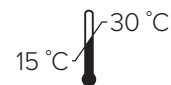


ThinPrep™ UroCyt™ PreservCyt™-i lahus

Kasutusjuhend

**KAVANDATUD KASUTUSOTSTARVE**

ThinPrep™ UroCyt™ PreservCyt™-i lahus on uriiniproovide transpordi- ja säilituskeskkond ning seda kasutatakse tsütoloogiliste alusklaaside ettevalmistamiseks ThinPrep™-i süsteemi osana ThinPrep™-i protsessori abil. Professionaalseks kasutamiseks.

KOKKUVÕTE JA SELGITUS

PreservCyti lahus võimaldab uriini transportida ja säilitada.

PROTSEDUURI PÕHIMÕTTED

PreservCyti lahus on keskkond, mida kasutatakse uriiniproovide rakkude ja DNA säilitamiseks.

KOOSTIS

Metanoolipõhine puhverdatud säilituslahus. 35–55% metanool. CAS 67-56-1

HOIATUSED

Oht. Tuleohtlik. Sisaldab metanooli.

H301. Allaneelamisel mürgine.

H311. Kokkupuutel nahaga toksiline.

H370. Kahjustab elundeid.

H331. Sissehingamisel mürgine.

H226. Tuleohtlik vedelik ja aur.

In vitro diagnostiliseks kasutamiseks.

Ei ole mõeldud väliseks ega sisemiseks kasutamiseks inimestel ega loomadel.

Ei saa muuta mittemürgiseks.

ETTEVAATUSABINÕUD

Enne kasutamist lugege neid juhiseid hoolikalt.

Kontrollige kogu sisu kahjustuste osas.

P210. Hoidke eemale kuumusest/sädemetest/lahtisest leegist/kuumadest pindadest.

P260. Ärge hingake tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pritsmeid.

P280. Kandke kaitsekindaid/kaitserõivaid/silmakaitset/näokaitset.

P301 + P310. NEELAMISE KORRAL: Helistage kohe MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arstile.

P303 + P361 + P353. NAHALE (või juustele) SATTUMISEL: Eemaldage seljast kohe kõik saastunud riided. Loputage nahka vee/dušiga.

ThinPrep™ UroCyt™ PreservCyt™-i lahus

P305 + P351 + P338. SILMA SATTUMISEL: Loputage ettevaatlikult veega mitu minutit. Eemaldage kontaktläätsede esinemisel need ja kui seda on lihtne teha. Jätka loputamist.

P308 + P311. KUI olete kokku puutunud või kahtlustate seda: Helistage MÜRGIKUSTEABEKESKUSESSE või arstile.

P370 + P378. Tulekahju korral: Kustutamiseks kasutage kuiva liiva, kuiva kemikaali või alkoholikindlat vahtu.

P403 + P233. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida tops tihedalt suletuna.

P501. Kõrvaldage sisu/tops vastavalt kohalikele/regionlaasetele/riiklikele/rahvusvahelistele määrustele.

Pärast käsitlemist peske käsi põhjalikult.

Nagu kõigi laboratoorsete protseduuride puhul, tuleb järgida universaalseid ettevaatusabinõusid.

Ärge kasutage, kui turvakleebis on katki.

Kasutage hästi ventileeritud kohas.

Vältige otsest kontakti.

EELTÖÖTLEMINE

Lahustada, segada ega lahjendada pole vaja.

SÄILITAMINE JA KÄITLEMINE

Kasutamata PreservCyti lahust hoidke temperatuuril 15–30 °C. Ärge kasutage pärast kõlblikkusaega. Hoidke PreservCyti lahuse viaali ja proovivõtutopsi suletuna, kuni see on kasutamiseks valmis.

Hoidke PreservCyti lahust koos uriiniprooviga temperatuurivahemikus 4–30 °C. Töödelge proov 48 tunni jooksul.

VÄLIMUS JA TERVIK

Selge, mittesteriilne lahus.

OHUTUS JA TOIMIVUSNÄITAJAD

PreservCyti lahusel on bakteriostaatilised omadused ja see takistab uriiniproovis olevate organismide kasvu, kui seda kasutatakse uriini ja PreservCyti lahuse suhtes 2 : 1 temperatuurivahemikus 4–30 °C. Lisateabe saamiseks vaadake ThinPrepi protsessori operaatori käsiraamatut.

Selle seadmega või sellega kasutatavate komponentidega seotud tõsiste juhtumite korral teatage sellest Hologicu tehnilisele toele ja patsiendi ja/või kasutaja kohalikule pädevale asutusele.

TÖÖTLEMISJUHISED

Märkus. Vysis UroVysion põievähi komplekti jaoks on vajalik vähemalt 33 cc uriini, mida kogutakse tavapärasel viisil.

1. Valage PreservCyti lahuse viaali kogu sisu ettevaatlikult uriini sisaldavasse proovitopsi. Lekke vältimiseks kinnitage proovitops tihedalt.
2. Hoidke proovimaterjal koos PreservCyti lahusega temperatuurivahemikus 4–30 °C. Säilitamis- ja saatmistingimused eelistavad jääpakke (nt Styrofoami sinine jää).
3. Töödelge proov 48 tunni jooksul vastavalt ThinPrepi protsessori operaatori käsiraamatus toodud juhiste või Vysis UroVysioni põievähi komplekti tootja kasutusjuhendile.

KÕRVALDAMISE TEAVE

Kõrvaldage kasutatud proovikogumistops, absorbeeriv padi, transpordikott ja ülejäänud proovimaterjal bioloogiliselt ohtlikena.

Kõrvaldage vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

ThinPrep™ UroCyte™ PreservCyt™ -i lahus

PRTOSEDUURI PIIRANGUD

PreservCyti lahust ei saa asendada ühegi muu lahusega proovide kogumiseks, ettevalmistamiseks ega töötlemiseks. Vähendage määrdeainete (nt KY® Jelly) kasutamist enne proovi kogumist, kuna sellised ained võivad rakkude ülekannet häirida.

ESMAABIMEETMED

NEELAMISE KORRAL: Kui tunnete end halvasti, helistage MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arstile. Kogu ohutuskaardi leiata veebilehelt www.hologicds.com.

Läbivaatamise ajalugu

Läbivaatamine	Kuupäev	Kirjeldus
AW-22938-2702 Rev. 001	3-2021	Juhiste täpsustamine. Lisatud juhised seoses tõsistest juhtumitest teatamisega.



Tootja



Vaadake kasutusjuhendit



In vitro diagnostiline meditsiiniseade



Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses



Kataloogi number



Kõlblikkusaeg




Partii kood



Temperatuuri piirid



Ärge taaskasutage

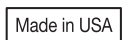

Valmistatud USA-s



Tuleohtlik



Äge mürgistus



Hingamisteede sensibilisaator, toksilisus sihtorganile



Kogus



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA
Tel: +1 (508) 263-2900 • www.hologic.com

EC/REP Hologic BV • Da Vinciaan 5 • 1930 Zaventem • Belgia • Tel: +32 2 711 46 80

Austraalia sponsor: Hologic (Austraalia ja Uus-Meremaa) Pty Ltd. • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Austraalia • Tel: +02 9888 8000