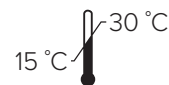


## ThinPrep™ UroCyt™ PreservCyt™ -liuos

## Käyttöohjeet

**KÄYTTÖTARKOITUS**

ThinPrep™ UroCyt™ PreservCyt™ -liuos on virtsanäytteille tarkoitettu kuljetus- ja säilytysaine, jota käytetään sytologisten objektilasien valmisteluun ThinPrep™-käsittelylaitteella osana ThinPrep™-järjestelmää. Ammattikäyttöön.

**YHTEENVETO JA SELITYS**

PreservCyt-liuoksessa voidaan kuljettaa ja säilyttää virtsaa.

**MENETELMÄN TOIMINTAPERIAATTEET**

PreservCyt-liuos on virtsanäytteiden solujen ja DNA:n säilyttämiseen käytettävä aine.

**KOOSTUMUS**

Metanolipohjainen, puskuroitu säilytysliuos. 35—55 % metanolia. CAS 67-56-1

**VAROITUKSET**

**Vaara.** Syttyvää. Sisältää metanolia.

H301. Myrkyllistä nieltynä.

H311. Myrkyllistä joutuessaan iholle.

H370. Vahingoittaa elimiä.

H331. Myrkyllistä hengitettynä.

H226. Syttyvä neste ja höyry.

In vitro -diagnostiseen käyttöön.

Ei ulkoiseen tai sisäiseen käyttöön ihmisille tai eläimille.

Ei voida tehdä myrkyttömäksi.

**VAROIMET**

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Tarkasta koko sisältö vahingoittumisen varalta.

P210. Suojaa lämmöltä, kipinöiltä, avotulelta ja kuumilta pinnoilta.

P260. Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.

P280. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

P301 + P310. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

P303 + P361 + P353. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuho/suihkuta iho vedellä.

## ThinPrep™ UroCyt™ PreservCyt™ -liuos

P305 + P351 + P338. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

P308 + P311. Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

P370 + P378. Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen kuivaa hiekkaa, sammutusjauhetta tai alkoholinkestävää vaahtoa.

P403 + P233. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.

P501. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti.

Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.

Kuten kaikissa laboratoriomenetelmissä, yleisiä varotoimia on noudatettava.

Ei saa käyttää, jos suojasinetti on rikkoutunut.

Käytä tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

Vältä suoraa kosketusta.

### **ESIKÄSITTELY**

Ei vaadi ennalleen palauttamista, sekoittamista tai laimentamista.

### **SÄILYTYS JA KÄSITTELY**

Käyttämättömän PreservCyt-liuoksen säilytyslämpötila on 15 °C – 30 °C. Älä käytä viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Pidä PreservCyt-liuospullo ja näytteenottomalja suljettuina käyttöhetkeen saakka.

Virtsanäytteen sisältävän PreservCyt-liuoksen säilytyslämpötila on 4 °C – 30 °C. Käsittele näyte 48 tunnin kuluessa.

### **ULKOASU JA EHEYS**

Kirkas, ei-steriili liuos.

### **TURVALLISUUS- JA SUORITUSKYKYOMINAISUUDET**

PreservCyt-liuksella on bakteriostaattisia ominaisuuksia ja se estää organismien kasvun virtsanäytteissä, kun virtsaa käytetään PreservCyt-liuoksen kanssa suhteessa 2:1 ja lämpötila on 4 °C – 30 °C. Lisätietoa on ThinPrep-käsittelylaitteen käyttöoppaassa.

Jos tähän laitteeseen tai sen kanssa käytettyjen osien käytön yhteydessä ilmenee vakavia vaaratilanteita, ilmoita siitä Hologicin tekniselle tuelle ja potilaan ja/tai käyttäjän oleskelupaikan toimivaltaiselle viranomaiselle.

### **KÄSITTELYOHJEET**

Huomautus: Vysis UroVysion Bladder Cancer Kit -sarjan käyttöön tarvitaan vähintään 33 ml rutiinimenetelmin kerättyä virtsaa.

1. Kaada koko PreservCyt-liuospullon sisältö varovasti virtsaa sisältävään näytemaljaan. Sulje näytemalja tiukasti vuotojen välttämiseksi.
2. Säilytä PreservCyt-liuksessa olevaa näytettä 4 °C:n – 30 °C:n lämpötilassa. Säilytykseen ja kuljetukseen suositellaan jääpakkauksia (esim. teräsjää Styrofoam-pakkauksessa).
3. Käsittele näyte 48 tunnin kuluessa ThinPrep-käsittelylaitteen käyttöoppaassa tai Vysis UroVysion Bladder Cancer Kit -sarjan valmistajan toimittamissa käyttöohjeissa annettujen ohjeiden mukaisesti.

## ThinPrep™ UroCyt™ PreservCyt™ -liuos

**HÄVITTÄMISTÄ KOSKEVAT TIEDOT**

Hävitä käytetty näytteenottomalja, imutyyny, kuljetuslaukku ja jäljelle jäänyt näyte biovaarallisena jätteenä. Noudata hävittämisessä kaikkia soveltuvia määräyksiä.

**MENETELMÄÄN LIITTYVÄT RAJOITUKSET**

PreservCyt-liuosta ei voi korvata millään muulla liuoksella näytteiden keräämisessä, valmistelussa ja käsittelyssä. Minimoi liukasteaineiden (esim. KY® Jelly) käyttö ennen näytteen keräämistä, koska ne voivat häiritä solujen siirtoa.

**ENSIAPUTOIMET**

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Katso koko käyttöturvallisuustiedote osoitteesta [www.hologicsds.com](http://www.hologicsds.com).

**Versiohistoria**

Versio	Päivämäärä	Kuvaus
AW-22938-1702 Rev. 001	3-2021	Ohjeita selvennetty. Lisätty ohjeita vakavien vaaratilanteiden ilmoittamisesta.



Valmistaja



Lue käyttöohjeet

*In vitro* -diagnostinen lääkekäyttöön laite

Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä



Tuotenumero



Viimeinen käyttöpäivä




Eräkoodi



Lämpötilarajat



Ei saa käyttää uudelleen

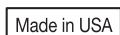

Valmistettu Yhdysvalloissa



Syttävää



Akuutti myrkyllisyys



Hengitysteitä herkistävä aine, myrkyllinen kohde-elimille



Määrä



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA  
Puh.: +1 (508) 263-2900 • [www.hologic.com](http://www.hologic.com)



Hologic BV • Da Vinciaan 5 • 1930 Zaventem • Belgia • Puh.: +32 2 711 46 80

Australialainen toimeksiantaja: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302,  
Level 3 • 2 Lyon Park Road  
Macquarie Park NSW 2113 • Australia • Puh.: +02 9888 8000