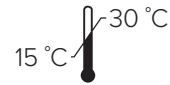


ThinPrep™ UroCyt™ PreservCyt™-løsning

Bruksanvisning

**TILTENKT BRUK**

ThinPrep™ UroCyt™ PreservCyt™-løsningen er et transport- og konserveringsmedium for urinprøver, og brukes til å fremstille cytologi-objektglass med en ThinPrep™-prosessor som en del av ThinPrep™-systemet. Til profesjonell bruk.

OPPSUMMERING OG FORKLARING

PreservCyt-løsningen muliggjør transport og konservering av urin.

PROSEDYREPRINSIPPER

PreservCyt-løsning er et medium brukt til konservering av celler og DNA i urinprøver.

SAMMENSETNING

Metanolbasert, bufret konserveringsløsning. 35–55 % metanol. CAS 67-56-1

ADVARSLER

Fare. Brennbart. Inneholder metanol.

H301. Giftig ved svelging.

H311. Giftig ved hudkontakt.

H370. Medfører skade på organer.

H331. Giftig ved innånding.

H226. Antennbar væske og damp.

Til bruk i *in vitro*-diagnostikk.

Ikke til utvortes eller innvortes bruk på mennesker eller dyr.

Kan ikke bli gjort ugiftig.

FORHOLDSREGLER

Les disse instruksjonene nøye før bruk.

Inspiser alt innhold for skade.

P210. Hold unna varme/gnister/åpen flamme/varme overflater.

P260. Ikke inhaler støv/røyk/gass/luftfuktighet/damp/spray.

P280. Bruk vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsbeskyttelse.

P301 + P310. VED SVELGING: Ring GIFTINFORMASJONEN eller en lege umiddelbart.

P303 + P361 + P353. VED KONTAKT MED HUD (eller hår): Fjern eller ta av alle forurensede klær med det samme. Skyll huden med vann/i dusjen.

ThinPrep™ UroCyt™ PreservCyt™-løsning

P305 + P351 + P338. VED ØYEKONTAKT: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis det er aktuelt og enkelt å gjøre. Fortsett å skylle.

P308 + P311. HVIS du er eksponert eller bekymret: Ring GIFTINFORMASJONEN eller en lege.

P370 + P378. Ved brann: Bruk tørrsand, pulverkjemikalier eller alkoholbestandig skum for å slukke.

P403 + P233. Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

P501. Innhold/holder avhendes i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale bestemmelser.

Vask hendene grundig etter håndtering.

Som med alle laboratorieprosedyrer, skal generelle forsiktighetsregler følges.

Må ikke brukes hvis forseglingen er brutt.

Bruk i et godt ventilert område.

Unngå direkte kontakt.

FORBEHANDLING

Det er ikke nødvendig med rekonstituering, miksing eller fortynning.

OPPBEVARING OG HÅNTERING

Oppbevar ubrukt PreservCyt-løsning ved 15 °C–30 °C. Må ikke brukes etter utløpsdatoen. Hold hetteglasset med PreservCyt-løsningen og prøveinnsamlingsglasset lukket til de er klare for bruk.

Oppbevar PreservCyt-løsningen med urinprøve mellom 4 °C og 30 °C. Behandle prøven innen 48 timer.

UTSEENDE OG INTEGRITET

Klar, ikke-steril løsning.

SIKKERHETS- OG YTELSESKARAKTERISTIKKER

PreservCyt-løsningen utviser bakteriostatisk egenskap og forhindrer vekst av organismer i urinprøver når den brukes i en ratio på 2:1 urin til PreservCyt-løsning ved temperaturer mellom 4 °C og 30 °C. Se brukerhåndboken for ThinPrep-prosessoren for mer informasjon.

Hvis det oppstår alvorlige hendelser relatert til denne enheten eller komponenter som brukes sammen med denne enheten, må du melde fra til teknisk støtte hos Hologic og pasientens og/eller brukerens relevante myndigheter.

PROSESSERINGSINSTRUKSJONER

Merk: Minst 33 ml urin, innhentet på rutinemessig vis, kreves for Vysis UroVysion-blærekreftsett.

1. Hell hele innholdet i hetteglasset med PreservCyt-løsning forsiktig over i prøveglasset som inneholder urin. Skru lokket på prøveglasset godt på for å hindre lekkasje.
2. Oppbevar prøven med PreservCyt-løsningen 4 °C og –30 °C. Foretrukkede oppbevarings- og forsendelsesforhold er på ispakker (f.eks. blåis i Styrofoam).
3. Viderebehandle prøven innen 48 timer i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken for ThinPrep-prosessoren eller produsentens bruksanvisning for Vysis UroVysion-blærekreftsett.

ThinPrep™ UroCyt™ PreservCyt™-løsning

AVHENDINGSINFORMASJON

Avhend brukte prøveglass, absorberingspute, transportpose og eventuelt gjenværende prøvemateriale som smittefarlig avfall. Skal avhendes i samsvar med alle gjeldende forskrifter.

BEGRENSNINGER VED PROSEDYREN

PreservCyt-løsningen kan ikke byttes ut med noen annen løsning for prøveinnsamling, preparasjon og behandling. Minimer bruken av smøremidler (f.eks. KY®-gel) før prøveinnsamling, ettersom slike midler kan ha innvirkning på celleoverføringen.

FØRSTEHJELPSTILTAK

VED SVELGING: Ring en GIFTSENTRAL eller en lege hvis du føler deg uvel. Se www.hologic.com for hele sikkerhetsdatabladet.

Revisjonshistorikk

Revisjon	Dato	Beskrivelse
AW-22938-1802 Rev. 001	03/2021	Instruksjoner for klargjøring. Legg til instruksjoner om rapportering av alvorlige hendelser.



Produsent



Les bruksanvisningen



Medisinsk enhet til bruk i *in vitro*-diagnostikk



Autorisert representant i EU



Katalognummer



Brukes innen




Batchkode



Temperaturbegrensning



Må ikke gjenbrukes

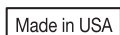

Produsert i USA



Brennbar



Akutt giftig



Kan gi allergi ved innånding, målorgantoksisitet



Mengde



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA
Tlf.: +1 (508) 263-2900 • www.hologic.com

EC/REP Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgia • Tlf.: +32 2 711 46 80

Australsk sponsor: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Australia: • Tlf.: +02 9888 8000