

## ThinPrep™ festőanyag EA oldat

## Használati utasítás

**RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT**

A ThinPrep™ EA-festőoldat a Papanicolaou festési eljárás során bármely ThinPrep sejtmagfestékkel, ThinPrep festéköblítő-oldattal, ThinPrep kékítőoldattal és ThinPrep Orange G festőoldattal alkalmazható. Profesziónális alkalmazásra.

**ÖSSZEFOGLALÁS ÉS MAGYARÁZAT**

A ThinPrep EA oldat egy alkoholos oldat, amely a citoplazma festésére szolgál a citológiai értékelés céljából elkészített tárgylemezkészítményekben.

**AZ ELJÁRÁS ALAPELVEI**

A ThinPrep festőoldatokkal és citológiai tárgylemez-készítményekkel együtt használva a ThinPrep EA oldat megfesti a sejtek citoplazmáját anélkül, hogy hatással lenne a sejtmagfestésre és morfológiára.

**ÖSSZETÉTEL**

Etanol, izopropil-alkohol, metanol és szabadalmaztatott biológiai színezékek alkoholos oldata. CAS-szám: 64-17-5, CAS-szám: 67-56-1, CAS-szám: 67-63-0

**FIGYELMEZTETÉSEK**

**Veszély.** Gyúlékony. Etanolt, izopropil-alkoholt és metanolt tartalmaz.

H302 – Lenyelve ártalmas.

H312 – Bőrrel érintkezve ártalmas.

H319 – Súlyos szemirritációt okoz.

H371 – Károsíthatja a szerveket.

H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

*In vitro* diagnosztikai használatra. Embereken vagy állatokon tilos külsőleg vagy belsőleg használni. Nem lehet nem mérgezővé alakítani.

**ÓVINTÉZKEDÉSEK**

P210 – Hőtől/szikkától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. – Tilos a dohányzás.

P280 – Védőkesztyű és szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P260 – A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

P301 + P310 – LENYELÉS ESETÉN: Azonnal hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT, vagy forduljon orvoshoz.

P303 + P361 + P353 – HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Azonnal távolítsa el/vegye le az összes szennyezett ruházatot. Öblítse le a bőrt vízzel/zuhannyal.

P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatosan öblítse vízzel több percig. Távolítsa el az esetleges kontaktlencsét, ha egyszerűen megteheti. Folytassa az öblítést.

P304 + P340 – BELÉLEGEZVE: Az áldozatot friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P309 + P311 – Expozíció vagy rossz közérzet esetén: Hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT, vagy forduljon orvoshoz.

## ThinPrep™ festőanyag EA oldat

P370 + P378 – Tűz esetén: Az oltáshoz használjon száraz homokot, por alakú vegyszert vagy alkoholálló habot.

P403 + P233 – Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: összhangban a helyi/regionális/országos/nemzetközi szabályokkal.

A használatot követően alaposan kezelt kell mosni. Használaton kívül az edény szorosan lezárva tartandó. Megfelelő szellőzés mellett használandó. ThinPrep citológiai mintáktól eltérő mintákkal elért eredményeket nem értékelték. Ne használja, ha az elsődleges csomagolás sérült.

### **ELŐKÉSZÍTÉS**

Nem kell feloldani, keverni vagy hígítani.

### **TÁROLÁS**

A fel nem használt ThinPrep EA oldatot tárolja 15 °C (59 °F) és 30 °C (86 °F) között a mellékelt tartályban. Ne használja a ThinPrep EA oldatot a tartályon feltüntetett lejárati időn túl.

### **MEGJELENÉS ÉS INTEGRITÁS**

Átlátszatlan, nem steril oldat.

### **MINTAVÉTEL ÉS ELŐKÉSZÍTÉS**

Bármely ThinPrep™ processzoron feldolgozott nőgyógyászati citológiai mintákkal való használatra.

### **ELJÁRÁS**

Az egyes festési protokollokat lásd a ThinPrep festőanyag felhasználói kézikönyvében.

### **AZ ELJÁRÁS KORLÁTAI**

A ThinPrep festőanyag felhasználói kézikönyvében található utasítások szerint használandó. A ThinPrep EA oldat nem helyettesíthető más oldattal.

### **BIZTONSÁGI ÉS TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK**

Az utasításnak megfelelő használat esetén a ThinPrep EA oldat megfesti a citológiai tárgylemezkeszítvényeken feldolgozott sejtek citoplazmáját.

Ha a termékkel vagy a termékkel használt bármely összetevőhöz kapcsolódó súlyos rendkívüli esemény következik be, jelentse a Hologic műszaki szolgálatának, valamint a beteg és/vagy felhasználó szerinti helyi illetékes hatóságnak.

Lásd a ThinPrep képalkotó rendszer felhasználói kézikönyvét.

### **ÁRTALMATLANÍTÁS**

Az ártalmatlanítást a vonatkozó jogszabályi előírások szerint végezze.












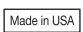


### **ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI TEENDŐK**

LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT, vagy forduljon orvoshoz. A teljes biztonsági adatlapot a [www.hologiccsds.com](http://www.hologiccsds.com) weboldalon találja.

### **Átdolgozási előzmények**

Átdolgozás	Dátum	Leírás
AW-24896-2802, 001 átdolg.	2022. 03.	Utasítások pontosítása. Súlyos rendkívüli események bejelentésére vonatkozó utasítások hozzáadása.

## ThinPrep™ festőanyag EA oldat

 Gyártó	 Katalógusszám	 Gyúlékony
 Lásd a használati utasítást	 Felhasználható	 Irritáló, légúti irritáció, bőrszenzibilizáló
 <i>In vitro</i> diagnosztikai orvostechnikai eszköz	 Tételszám	 Légúti szenzibilizálás, célszervi toxicitás
 Hivatalos képviselő az Európai Közösségben	 Hőmérsékleti határértékek	 Itt nyissa ki
 Mennyiség	 Készült az Amerikai Egyesült Államokban	 A megfelelés felmérésre került az Egyesült Királyság tekintetében (Nagy-Britannia)
<b>EtOH</b> Etanol	 A termék megfelel az EU-IVD 2017/746 rendelet szerinti CE-jelölésre vonatkozó követelményeknek	

 Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA • Tel.: +1-508-263-2900 • [www.hologic.com](http://www.hologic.com)

 Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgium • Tel.: +32 2 711 46 80

Ausztrál szponzor: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road  
Macquarie Park NSW 2113 • Ausztrália • Tel.: 02 9888 8000

Felelős személy az Egyesült Királyságban: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe  
Manchester M23 9HZ • Egyesült Királyság