


**HOLOGIC®**

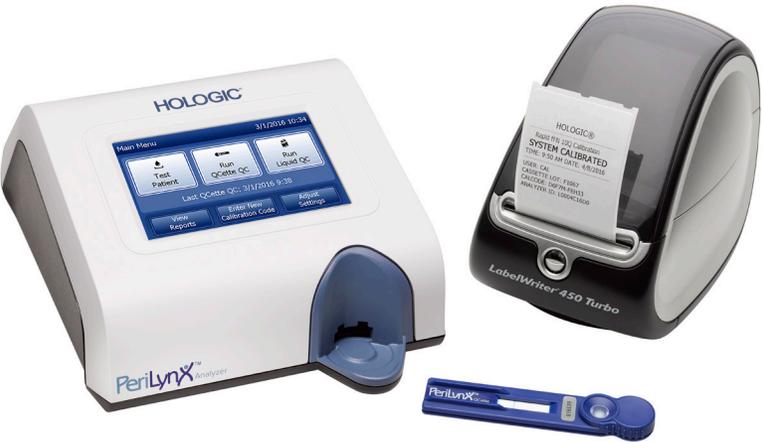

**Perilynx™** System

**Gebrauchsanleitung**

**WICHTIG:** Lesen Sie vor Inbetriebnahme des PeriLynx™ Systems die gesamte Gebrauchsanleitung.



Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 USA

Tel.: Technischer Kundendienst (USA und Kanada)  
1-800-442-9892

Fax: 1-508-263-2967

Tel.: Technischer Kundendienst (außerhalb USA und Kanada ) InternationalTechSupport@Hologic.com



Hologic BV  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Belgien

Asien	+852 3526 0718	Niederlande:	0800 0226782
Australien:	+61 2 9888 8000	Norwegen:	800 15564
Österreich:	0800 291919	Portugal:	800 841034
Belgien:	0800 77378	Spanien:	900 994197
Dänemark:	8088 1378	Südafrika:	0800 980 731
Finnland:	0800 114829	Schweden:	020 797943
Frankreich:	0800 913659	Schweiz:	0800 298921
Deutschland:	0800 1830227	Großbritannien:	0800 0323318
Republik Irland:	1 800 554144	Alle anderen Länder	00800.800.29892
Italien:	800 786308	Internationale Faxnummer:	0041.21.633.39.10

©2023 Hologic, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Hologic, Inc. in irgendeiner Form durch ein beliebiges Mittel weder vollständig noch in Teilen reproduziert, in einem Abfragesystem bereitgestellt oder übertragen werden. Dieses Produkt kann durch ein oder mehrere US-Patent(e) geschützt sein. Weitere Informationen unter <http://hologic.com/patentinformation>. Hologic, PeriLynx, Rapid fFN und QCette sind Marken bzw. eingetragene Marken von Hologic, Inc. bzw. ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken, eingetragenen Marken und Produktnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

## Revisionsverlauf

<b>Revision</b>	<b>Datum</b>	<b>Beschreibung</b>
AW-24885-801	5-2022	Anweisungen zur Sprachauswahl hinzufügen. Hinweis auf die Meldung schwerwiegender Zwischenfälle hinzufügen. Sicherheitsinformationen hinzufügen.
AW-24885-801 Rev. 002	1-2023	Administrative Änderungen.

## INHALTSVERZEICHNIS

---

<b>Kapitel</b>	<b>Seite</b>
<b>Kapitel 1 – Einführung</b>	<b>1-1</b>
Verwendungszweck	1-1
Allgemeine Beschreibung	1-1
Bestandteile des Analysegeräts	1-2
Touchscreen	1-2
Kassetteneinführöffnung	1-2
Angezeigte/gedruckte Ergebnisse	1-3
Technische Daten	1-4
Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen	1-6
Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten	1-10
Auf dem Gerät verwendete Symbole	1-12

## INHALTSVERZEICHNIS

---

<b>Kapitel</b>	<b>Seite</b>
<b>Kapitel 2 – Installation</b>	<b>2-1</b>
Allgemeines	2-1
Umgebungsfaktoren	2-1
Sicherheit	2-2
Auspacken	2-3
Systemeinrichtung	2-6
Erste Schritte	2-8
Einstellung von Datum und Uhrzeit	2-10
Werkseitige Standardeinstellungen	2-11
Herunterfahren	2-12
Längere Außerbetriebnahme	2-12

## INHALTSVERZEICHNIS

---

<b>Kapitel</b>	<b>Seite</b>
<b>Kapitel 3 – Allgemeine Betriebs- und Testanweisungen</b>	<b>3-1</b>
Start des Systems	3-1
Hauptmenü des PeriLynx Analysegeräts im Überblick	3-2
Typische Abfolge von Menüoptionen	3-3
Verwendung des Touchscreen	3-4
QCette QC ausführen – Kurzer Überblick	3-8
Patiententest – Kurzer Überblick	3-9
Eingabe eines neuen Kalibrierungscodes – Kurzüberblick	3-11
Flüssigkeit QC durchführen – Kurzer Überblick	3-12
<b>Kapitel 4 – Softwarefunktionen: ausführliche Beschreibung</b>	<b>4-1</b>
Startbildschirm	4-1
Hauptmenü	4-2
Eingabe eines neuen Kalibrierungscodes	4-3
Patiententest	4-6

## INHALTSVERZEICHNIS

---

<b>Kapitel</b>	<b>Seite</b>
QCette QC ausführen	4-15
Flüssigkontrollen	4-20
Einstellungen ändern	4-28
Einstellungen ändern – Datum/Uhrzeit	4-28
Einstellungen ändern – Toneinstellungen	4-30
Einstellungen ändern – Automatisches Drucken	4-31
Einstellungen ändern – Passworteinstellungen	4-32
Einstellungen ändern – QCette Einstellungen	4-35
Einstellungen ändern – Software aktualisieren	4-41
Einstellungen ändern – Spracheinstellungen	4-42
Berichte anzeigen	4-43
Monatliche Nutzung	4-43
Teststatistiken	4-45
Zugriff auf Daten	4-46
Zugriff auf Daten – Daten anzeigen/drucken	4-46
Zugriff auf Daten – Datenübertragung	4-48

## INHALTSVERZEICHNIS

---

<b>Kapitel</b>	<b>Seite</b>
<b>Kapitel 5 – Pflege des Analysegeräts</b>	<b>5-1</b>
<b>Kapitel 6 – Drucker</b>	<b>6-1</b>
Einlegen von Druckeretiketten	6-1
Entfernung einer leeren Etikettenrolle	6-4
Beseitigung von Etikettenstaus	6-5
<b>Kapitel 7 – Fehlerbehebung</b>	<b>7-1</b>
Allgemeine Informationen	7-1
Fehler-/Ungültig-Codes	7-10
<b>Kapitel 8 – Kundendienst</b>	<b>8-1</b>
Technischer Kundendienst	8-1
Ersatzteile	8-3

## Kapitel 1 – Einführung



Nur für *den Gebrauch als In-vitro*-Diagnostikum  
Nur von geschultem medizinischen Personal zu verwenden

### **Verwendungszweck**

Das Hologic PeriLynx™ System ist ein *In-vitro*-Diagnostikgerät und zur Verwendung in Kombination mit der Rapid fFN® 10Q Kassette, dem Rapid fFN® Kontrollkit und der PeriLynx™ QCette® zum Nachweis von fötalem Fibronektin (fFN) in zervikovaginalem Sekret vorgesehen. Für patientennahe Anwendung. Eine ausführliche Darstellung des Verwendungszwecks finden Sie in der Packungsbeilage zur Rapid fFN 10Q Kassette.

### **Allgemeine Beschreibung**

Das PeriLynx™ Analysegerät ist ein elektronisches Gerät auf Basis der optischen Reflexion, das eine kolorimetrische Reaktion von einer Kassette in ein digitalisiertes Format umwandelt. Das PeriLynx Analysegerät ist kein automatisches Gerät. Die Daten werden anhand mehrerer Parameter analysiert, darunter ein Vergleich der Probedaten und der Kalibrierungsdaten. Das Analysegerät meldet die fFN-Konzentration in der klinischen Probe.

Das Analysegerät meldet fFN-Konzentrationen zwischen 0–500 ng/ml. Konzentrationen über 500 ng/ml werden als >500 ng/ml gemeldet. Das Ergebnis wird als ungültig angegeben, wenn die speziellen internen Testkriterien nicht erfüllt wurden.

## Bestandteile des Analysegeräts

Hauptbestandteile des Analysegeräts sind der Touchscreen und die Kassetteneinführöffnung.



### Touchscreen

Verwenden Sie den Touchscreen, um Daten einzugeben, Optionen auszuwählen und um durch die Menüs zu navigieren. Vollständige Beschreibung zur Benutzung des Touchscreen siehe Kapitel 3 – Allgemeine Betriebs- und Testanweisungen.

### Kassetteneinführöffnung

Die Kassetteneinführöffnung weist eine leicht konkave Vertiefung auf, die so geformt ist, dass sie Flüssigkeit auffängt, die beim Aufbringen der Probe auf die Kassette evtl. übergelaufen ist. Dieser Bereich des Geräts sollte regelmäßig gereinigt werden (siehe Kapitel 5 – Pflege des Analysegeräts).

**Hinweis:** Für einen Test zur Erkennung von fötalem Fibronectin (fFN) in zervikalem Vaginalsekret führen Sie nur eine **Rapid fFN 10Q Kassette** oder eine **PeriLynx QCette** ein.

## Angezeigte/gedruckte Ergebnisse

Jedes Ergebnis einer Menüfunktion wird auf dem Touchscreen des Analysegeräts angezeigt. Mit Auto Drucken EIN wird das Ergebnis automatisch gedruckt. Jedes gedruckte Ergebnis benötigt ein Druckeretikett. Die Ergebnisse können von einem Datensatzbildschirm – entweder direkt nach einem Test oder im Modus Zugriff auf Daten – gedruckt werden. Das Beispiel unten zeigt den Bildschirm und den Ausdruck eines Patiententests.

### **Beispiel: Angezeigte/gedruckte Ergebnisse eines Patiententests**

Patiententest 7/2/2021 9:58 AM

Proben-ID: 16976565 Kassettenlos: F1067

**fFN KONZ.: 228 ng/ml**

Datum: 7/2/2021  
Zeit: 9:58 AM

**Interne Kontrollen**

Analyzer QC.: ✓ BESTANDEN  
Kassetten-QC.: ✓ BESTANDEN

Drucken Beenden

Angezeigt

HOLOGIC®

Rapid fFN 10Q test Ergebnis

**fFN KONZ.: 160 ng/ml**

ZEIT: 16:42 DATUM: 7/1/2022

PROBE: 16976565  
BENUTZER: 1001  
KASSETTENLOS: F1067  
KAL.CODE: D67F7M-FEH33  
ANALYZER ID: 0000000014

INTERNE KONTROLLEN  
ANALYZER QC.: BESTANDEN  
KASSETTEN-QC.: BESTANDEN

Gedruckt

## Technische Daten

Stromversorgung	UL +24 VDC-gelistete Stromversorgung
Speicherkapazität	50 Kalibrierungsdatensätze 50 QCette-Datensätze 50 Kontrolldatensätze 1000 Patientendatensätze
Touchscreen	5-Zoll-Bildschirm mit einer Auflösung von 480 x 800 und 256 Farben. Widerstandsfähige Schnittstelle.
Abmessungen	Länge – 10 Zoll (25,4 cm) Breite – 7,5 Zoll (19,05 cm) Höhe – 4 Zoll (10,16 cm) Gewicht – 2,4 lbs (1090 g)
Temperaturbereich bei Lagerung	15–30 °C 59–86 °F
Betriebstemperatur	15–30 °C 59–86 °F
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 % bis 80 %, nicht-kondensierend

Schallpegel, Analysegerät	Der maximale A-bewertete Schalldruckpegel an der typischen Benutzerposition und in einem Radius von 1 Meter um das Analysegerät beträgt 56 dB.
A.C. Angebot	100-240 V AC 50-60 Hz 2,1 A
Eingangsanschluss	Koaxialstecker mit positivem Innenleiter
Ausgangsanschlüsse	9-poliger RS-232-Anschluss 3 Host-USB-Anschlüsse Ethernetanschluss Druckernetzkabel

## Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen

Im Zusammenhang mit dem PeriLynx System sind keine Gefahren bekannt, wenn es gemäß den Anweisungen in dieser Gebrauchsanleitung betrieben wird. Jedoch sollten Sie sich Situationen vor Augen führen, die zu einer ernsten Verletzung führen können.

Alle schwerwiegenden Vorfälle, die im Zusammenhang mit diesem Produkt oder mit dem Produkt verwendeten Komponenten auftreten, sind dem technischen Kundendienst von Hologic und der für den Patienten und/oder Benutzer zuständigen Behörde zu melden.



**WARNUNG!** Sorgen Sie dafür, dass der Netzadapter des Analysegeräts mit einer Wechselstrom-Steckdose verbunden ist, die die von Hologic angegebene Spannung und Stromstärke abgibt. Die Verwendung einer nicht kompatiblen Stromsteckdose kann zu Stromschlag und Brandgefahr führen.

**VORSICHT!** Nur den von Hologic gelieferten Netzadapter verwenden. Die Verwendung eines nicht kompatiblen Netzadapters kann zu Schäden an den inneren Komponenten führen.

**VORSICHT!** Vor der Reinigung der Außenflächen des Analysegeräts stets den Strom ausschalten und den Netzadapter abziehen. Eindringen von Flüssigkeit kann interne Komponenten beschädigen. Den Netzadapter NICHT reinigen.

**VORSICHT!** Extreme Hitze kann den Bildschirm und andere elektronische Komponenten beschädigen.



**WARNUNG!** Niemals Reinigungsreagenzien aufsprühen, da die Flüssigkeit in das Analysegerät gelangen kann und dort die elektrischen Komponenten beschädigen oder dem Benutzer möglicherweise einen Stromschlag verursachen kann.

**VORSICHT!** Analysegerät nicht in Flüssigkeit eintauchen. Eindringen von Flüssigkeit kann interne Komponenten beschädigen.

**VORSICHT!** Den Touchscreen nicht mit unverdünnten Bleichlösungen oder anderen Lösungsmitteln reinigen. Ätzende Reinigungslösungen können den Touchscreen beschädigen.

**VORSICHT!** Bei der Handhabung biogefährdender Materialien sind geeignete Laborverfahren anzuwenden. Wird dieses Gerät auf eine andere als die vom Hersteller angegebene Weise betrieben, können die Schutzvorrichtungen des Geräts beeinträchtigt werden.

### **Hinweise der FCC (Federal Communications Commission):**

Dieses Gerät wurde geprüft und hält die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse A entsprechend Teil 15 der FCC-Vorschriften ein. Diese Grenzwerte wurden für einen angemessenen Schutz gegen Störstrahlungen entwickelt, um den sicheren Betrieb der Geräte in kommerziellen Umgebungen zu gewährleisten. Dieses Gerät kann Radiofrequenzenergie generieren, verwenden und ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen in der Gebrauchsanleitung aufgestellt und verwendet wird, kann es zu Radiostörstrahlungen bei Funkübertragungen führen. Wenn dieses Gerät in Wohngebieten betrieben wird, führt dies wahrscheinlich zu Radiostörstrahlungen. In diesem Fall muss der Benutzer die Störungen auf eigene Kosten beheben.

### **FCC-Warnung:**

Durch Veränderungen oder Modifikationen am Gerät ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers kann dem Benutzer das Nutzungsrecht an diesem Gerät verweigert werden.

**Hinweis:** *Die Verwendung von nicht abgeschirmten Schnittstellenkabeln am Gerät ist untersagt.*

### **CE-Hinweis:**

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die folgenden Normen gemäß IVD-Leitlinie:

- |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN61326-2-6   | Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen; Medizingeräte für die <i>In-vitro-Diagnostik</i> (IVD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EN61010-2-101 | Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte; Teil 101; Besondere Anforderungen an Medizingeräte für die <i>In-vitro-Diagnostik</i> (IVD). Dieses Gerät wurde gemäß CISPR 11 Klasse A getestet. In einem häuslichen Umfeld kann es Funkstörungen auslösen. In diesem Fall müssen Sie möglicherweise Maßnahmen gegen Störungen ergreifen. Vor Inbetriebnahme des Geräts ist die elektromagnetische Umgebung zu beurteilen. Dieses Gerät darf nicht in unmittelbarer Nähe von Quellen starker elektromagnetischer Strahlung (z. B. nicht abgeschirmte, beabsichtigte HF-Quellen) verwendet werden, da diese den ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen können. |

## **Das Gerät erfüllt außerdem folgende Sicherheitsnormen:**

- UL61010-1            Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – Teil 1:  
Allgemeine Anforderungen, mit ETL- oder vergleichbarem Zulassungskennzeichen
- ICES-003            Kanadische Bestimmungen für die Industrie: Norm für störungsverursachende Geräte –  
Digitales Gerät
- CAN/CSA C22.2 Nr. 61010-2-101  
Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – Teil 1:  
Allgemeine Anforderungen, mit ETL- oder vergleichbarem Zulassungskennzeichen

## **Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten**

### **Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE; Waste Electrical and Electronic Equipment)**

Hologic ist darum bemüht, länderspezifische Vorgaben hinsichtlich des umweltgerechten Umgangs mit unseren Produkten zu erfüllen. Dabei sollen auch Abfallbelastungen reduziert werden, die durch unsere Elektro- und Elektronikaltgeräte entstehen. Hologic ist sich der Vorteile bewusst, derartige WEEE-Geräte der möglichen Wiederverwendung bzw. einer Spezialbehandlung, Recycling-Verfahren oder der Rohstoffwiedergewinnung zuzuführen, damit möglichst wenig Sondermüll anfällt.

### **Ihre Verantwortung**

Als Kunde von Hologic sind Sie dafür verantwortlich, die mit dem unten gezeigten Symbol markierten Geräte getrennt vom allgemeinen Abfallsystem zu entsorgen, es sei denn, Sie wurden durch die Behörden in Ihrem Gebiet hierzu ermächtigt. Setzen Sie sich bitte mit Hologic (s. unten) vor der Entsorgung eines Elektrogeräts von Hologic in Verbindung.

### **Symbol am Gerät**

Das folgende Symbol wird auf diesem Gerät verwendet:



### **Wiederverwertung**

Hologic kümmert sich um die Abholung und korrekte Wiederverwertung der von uns an unsere Kunden gelieferten Elektrogeräte. Hologic ist bestrebt, nach Möglichkeit Hologic Geräte, Montageteile und Komponenten wieder zu verwenden. Im Fall von Materialien, die für die Wiederverwertung nicht geeignet sind, sorgt Hologic für die entsprechende Abfallentsorgung.


## Hologic Kontaktinformationen


	<p>Hologic, Inc. 10210 Genetic Center Drive San Diego, CA 92121 USA Tel.: +1(508) 263-2900 E-Mail: <a href="mailto:InternationalTechSupport@Hologic.com">InternationalTechSupport@Hologic.com</a></p>
<p>Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft</p>	<p>Hologic BV Da Vincilaan 5 1930 Zaventem Belgien</p>

## Auf dem Gerät verwendete Symbole

Die folgenden Symbole können an diesem Gerät angebracht sein:

	Vorsicht, Gebrauchsanleitung beachten
	Elektro- und Elektronikaltgeräte – Wenden Sie sich zwecks Entsorgung des Geräts an Hologic.
	Bestellnummer
	Seriennummer
 <a href="http://www.hologic.com/ifu">www.hologic.com/ifu</a>	Gebrauchsanweisung lesen

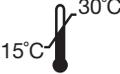	Hersteller
	Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft
	Bei 15 °C bis 30 °C lagern
	Biologische Risiken
	Das Produkt erfüllt die Anforderungen für die CE-Kennzeichnung gemäß der EU-IVD-Verordnung 2017/746

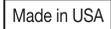	<p>Die Informationen gelten nur für die USA und Kanada</p>
	<p>Made in USA</p>
	<p><i>In-vitro</i>-Diagnostikum</p>

	<p>Das ETL-Zeichen ist ein Nachweis dafür, dass das Produkt den nordamerikanischen Sicherheitsstandards entspricht. Die zuständigen Behörden (Authorities Having Jurisdiction, AHJs) und die für die Einhaltung von Vorschriften zuständigen Stellen in den USA und Kanada akzeptieren das ETL-Zeichen als Nachweis dafür, dass das Produkt den veröffentlichten Industrienormen entspricht.</p>
	<p>Für patientennahe Tests</p>
	<p>Gleichstrom (DC)</p>

## Kapitel 2 – Installation

### Allgemeines

In diesem Kapitel werden detaillierte Installationsanweisungen für das PeriLynx System gegeben. Befolgen Sie die Installationsschritte sorgfältig, um den richtigen Aufbau und Betrieb zu gewährleisten.

### Umgebungsfaktoren

Das PeriLynx System wurde zur sicheren Nutzung unter den folgenden Bedingungen entwickelt:

- Für die Verwendung in Innenbereichen;
- Höhen bis zu 2000 m;
- maximale relative Luftfeuchtigkeit 80 % bei Temperaturen bis zu 30 °C;
- Verschmutzungsgrad II gemäß IEC 61010-1 Kategorie II Das PeriLynx System ist nur für die Verwendung in einem Büro oder einer sauberen Laborumgebung bestimmt;
- Die Betriebstemperatur muss relativ konstant sein. Die optimale Betriebstemperatur beträgt 15–30 °C (59–86 °F). Vor der Inbetriebnahme muss das Gerät Raumtemperatur haben.

Setzen Sie das Gerät nicht dem direkten Sonnenlicht aus und stellen Sie es entfernt von Orten mit extremen Temperaturschwankungen auf (z. B. offene Fenster, Öfen, Heizplatten, Heizkörper in der Nähe).

## **Sicherheit**

### **Zugriff auf vertrauenswürdige Benutzer beschränken**

Das PeriLynx Analysegerät ist ein nicht vernetztes, eigenständiges Gerät. Die Risiken für die Cybersicherheit des Systems sind minimal, aber jemand, der physischen Zugang zum System hat, könnte ungewollt oder absichtlich Schäden verursachen. Hologic empfiehlt, den Prozessor in einem Bereich aufzustellen, der nur für vertrauenswürdige Benutzer zugänglich ist.

Sollte das Analysegerät nicht funktionieren, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Hologic.

### **Sicherheitsmaßnahmen in Bezug auf die Cybersicherheit**

Hologic integriert sichere Designprinzipien in den Lebenszyklus der Produktentwicklung, um die Risiken der Cybersicherheit zu minimieren. Das PeriLynx Analysegerät verfügt über die folgenden Sicherheitsmaßnahmen:

- Der Zugang zur Aktualisierung der Software ist auf das Personal von Hologic beschränkt.
- Das Gerät ist eigenständig und wird nicht an ein externes Netzwerk angeschlossen.
- Das Analysegerät ist so konzipiert, dass ein Kunde ein Passwort verlangen kann, um Patienteninformationen anzuzeigen und auszudrucken.

### **Aktualisierungen der Cybersicherheit**

Hologic evaluiert kontinuierlich Software-Aktualisierungen, Sicherheits-Patches und die Effektivität der implementierten Sicherheitsmaßnahmen, um festzustellen, ob Aktualisierungen erforderlich sind, um neue Bedrohungen abzuwehren. Hologic stellt während des gesamten Lebenszyklus des Medizinprodukts bei Bedarf validierte Software-Aktualisierungen und Patches zur Verfügung, um die Sicherheit und Wirksamkeit des Produkts zu gewährleisten.

## Auspacken

### PeriLynx Analysegerät

Nehmen Sie das Analysegerät und die Zubehörteile vorsichtig aus dem Versandkarton.

Kontrollieren Sie den Karton und das Analysegerät auf sichtbare Schäden. Falls das Analysegerät beschädigt ist, wenden Sie sich sofort an das Versandunternehmen und den Kundendienst von Hologic.

Der Karton enthält folgende Artikel/Zubehörteile:

- PeriLynx Analysegerät
- Wechselstrom-Netzadapter und Netzkabel (ein oder mehrere international kompatible(s) Netzkabel)
- Gebrauchsanleitung
- PeriLynx QCette®

**Hinweis:** Den Versandkarton für späteren Gebrauch aufbewahren. Falls das Analysegerät versandt werden muss, verwenden Sie dafür den Original-Versandkarton.

Gebrauchsanleitung für das PeriLynx™ System  
Kapitel 2 – Installation



## Drucker

Nehmen Sie den Drucker und die Zubehörteile vorsichtig aus dem Versandkarton. Kontrollieren Sie den Karton und den Drucker auf sichtbare Schäden. Falls der Drucker beschädigt ist, wenden Sie sich sofort an das Versandunternehmen und den Kundendienst von Hologic.

Der Druckerkarton sollte folgende Artikel/  
Zubehörteile enthalten:

- Drucker
- Druckeretiketten (1 Rolle)
- Netzkabel
- USB-Kabel



**Hinweis:** Den Versandkarton für den späteren Gebrauch aufbewahren. Falls der Drucker versandt werden muss, verwenden Sie dafür den Original-Versandkarton.

### **Barcode-Scanner (optional)**

Hologic bietet einen Barcode-Scanner an, um Daten in das Analysegerät einzugeben. Dieser Barcode-Scanner ist der einzige Barcode-Scanner, der in Verbindung mit dem PeriLynx System verwendet werden kann. Falls Ihre Bestellung den optionalen Barcode-Scanner beinhaltet, nehmen Sie ihn und die Zubehörteile vorsichtig aus dem Versandkarton. Kontrollieren Sie den Karton und den Barcode-Scanner auf sichtbare Schäden. Falls der Barcode-Scanner beschädigt ist, wenden Sie sich sofort an das Versandunternehmen und den Kundendienst von Hologic.



Befolgen Sie alle Anweisungen hinsichtlich des sicheren Gerätegebrauchs, die vom Hersteller des Barcode-Scanners bereitgestellt werden.

Der Karton sollte folgende Artikel/Zubehörteile enthalten:

- Barcode-Scanner
- Basis

## **Systemeinrichtung**

1. Analysegerät und Drucker sollten auf einer flachen, ebenen Oberfläche stehen. Vergewissern Sie sich, dass sich der Netzschalter auf der Rückseite des Analysegeräts in der Aus-Position „Off“ (0) befindet.

**Hinweis:** Installieren Sie nicht die mit dem Drucker gelieferte Dymo-Etikettensoftware.

2. Stecken Sie den Netzstecker in den mit 24 V DC bezeichneten Eingang an der Unterseite des Druckers. Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in das PeriLynx Analysegerät.
3. Stecken Sie das USB-Kabel in den Anschluss an der Druckerunterseite, der mit USB bezeichnet ist. Führen Sie das USB-Kabel und das Netzkabel durch den Kabelkanal und stellen Sie den Drucker aufrecht auf eine ebene Oberfläche. Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in einen der beiden USB-Anschlüsse am Analysegerät.



System

(Abbildung mit optionalem Barcode-Scanner)



Drucker



Analysegerät

4. Benutzen Sie das Netzkabel (Wechselstrom), das den im Raum vorhandenen Steckdosen entspricht. Stecken Sie den Ausgangsstecker des Netzadapters in die Rückseite des Analysegeräts. Stecken Sie den Wandnetzadapter in eine Netzsteckdose.

**Vorsicht:** Es dürfen nur Netzadapter verwendet werden, die zusammen mit dem PeriLynx Analysegerät geliefert wurden. Ein Ersatz durch andere Teile kann zu einer Beschädigung des PeriLynx Analysegeräts und des Druckers führen.

5. Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in einen der USB-Anschlüsse am Analysegerät, um den optionalen Barcode-Scanner anzuschließen.


## Erste Schritte

Schalten Sie den Netzschalter des Analysegeräts in die Position Ein (I). Der Netzschalter befindet sich an der Rückseite des Geräts. (Wenn sich das Analysegerät nicht einschalten lässt, siehe Kapitel 7 – Fehlerbehebung, Punkt 1.)


Beim Einschalten zeigt das Analysegerät das Hologic Logo und dann 60 Sekunden lang das Logo des PeriLynx Systems mit der Meldung Initialisierung des Systems an. Dann ertönt ein Signalton und das Analysegerät führt einen Selbsttest der Gerätekomponenten durch.

Falls nach dem Selbsttest ein Problem bestehen sollte, ertönt ein Signalton, um auf einen Fehler hinzuweisen; daraufhin wird ein Fehlercode angezeigt. Wird ein Fehlercode angezeigt, schlagen Sie im Kapitel zur Fehlerbehebung in dieser Gebrauchsanleitung nach.

Wenn der Drucker nicht angeschlossen ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

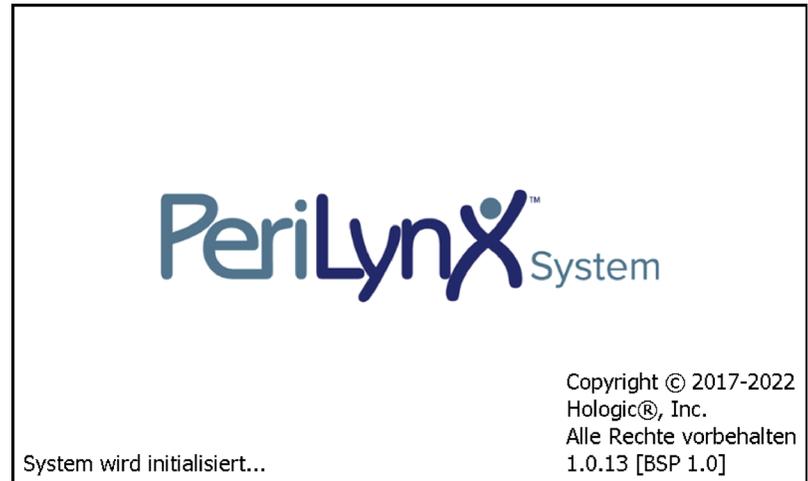

Wenn der Selbsttest abgeschlossen ist, zeigt der Bildschirm wieder das Hauptmenü an. Datum und Uhrzeit müssen ggf. auf Ihre Zeitzone umgestellt werden.

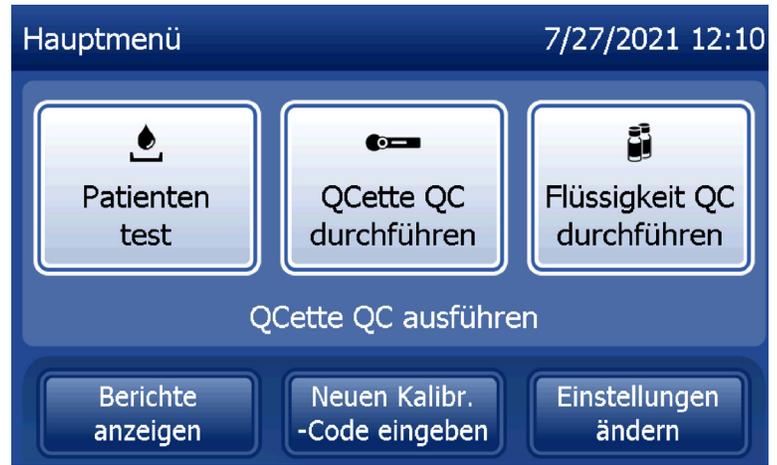

## Einstellung von Datum und Uhrzeit

1. Wählen Sie aus dem Hauptmenü die Option **Einstellungen ändern** aus.
2. Berühren Sie **Einstellungen – Datum/Uhrzeit** und folgen Sie den Aufforderungen.

Mehr Einzelheiten zur Einstellung von Datum und Uhrzeit finden Sie in Kapitel 4 – Softwarefunktionen: ausführliche Beschreibung.



## **Werkseitige Standardeinstellungen**

Das PeriLynx System arbeitet mit folgenden Standardeinstellungen. Um die Einheit Ihren Laboranforderungen anzupassen, siehe Kapitel 4 – Softwarefunktionen: ausführliche Beschreibung.

Die Standardeinstellungen sind:

### **Automatisches Drucken**

Werkseitige Einstellung ist Auto Drucken EIN. Nach jedem Ergebnis druckt der Drucker das Ergebnis aus.

### **Datumsformat**

Die Standardeinstellung ist MM/TT/JJ.

### **Uhrzeitformat**

Die Standardeinstellung ist 24 Stunden.

### **Toneinstellungen**

In der Standardeinstellung ist der Signalton (Piepton) auf das Lautstärkeniveau 5 eingestellt.

### **Passworteinstellungen**

In der Standardeinstellung ist das Passwort deaktiviert.

### **Herunterfahren**

Wenn das System nicht gebraucht wird, bleibt es im Leerlaufbetrieb, wobei der Netzstecker eingesteckt bleiben kann. Wenn das System heruntergefahren werden soll, achten Sie darauf, dass es im Leerlauf ist. Schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Analysegeräts in die Aus-Position.

### **Längere Außerbetriebnahme**

Soll das System für eine längere Zeit ausgeschaltet oder außer Betrieb genommen werden, schalten Sie das Analysegerät wie oben beschrieben aus. Um den Drucker vom Stromnetz zu nehmen, ziehen Sie das Netzkabel von der Steckdose ab.

## **Kapitel 3 – Allgemeine Betriebs- und Testanweisungen**

Nach der Installation des Geräts kann das PeriLynx Analysegerät jeden Tag mit folgenden Verfahren betrieben werden. Lesen Sie die ausführliche Beschreibung der Anzeigen, Aufforderungen und Betriebsabfolgen in Kapitel 4 nach.

### **Start des Systems**

1. Schalten Sie den Netzschalter des Analysegeräts in die Ein-Position. Der Netzschalter befindet sich an der Rückseite des Geräts. (Wenn sich das Analysegerät nicht einschalten lässt, siehe Kapitel 7, Fehlerbehebung, Punkt 1.)

Beim Einschalten zeigt das Analysegerät 60 Sekunden lang die Meldung Initialisierung des Systems an. Dann führt das Analysegerät einen Selbsttest der Gerätekomponenten durch.

Falls nach dem Selbsttest ein Problem bestehen sollte, ertönt ein Signalton, um auf einen Fehler hinzuweisen; daraufhin wird ein Fehlercode angezeigt. Wird ein Fehlercode angezeigt, lesen Sie im Kapitel zur Fehlerbehebung in dieser Gebrauchsanleitung nach. Überprüfen Sie, ob Datum und Uhrzeit korrekt sind. Zur Einstellung von Datum/Uhrzeit siehe Kapitel 4 – Softwarefunktionen: ausführliche Beschreibung.

2. Ist der Drucker mit dem Analysegerät verbunden, verfügt er über eine kontinuierliche Stromversorgung. Achten Sie darauf, dass Etiketten im Drucker sind. Zum Einlegen von Druckeretiketten siehe Kapitel 6 – Drucker.

## **Hauptmenü des PeriLynx Analysegeräts im Überblick**

<b>Hauptmenü</b>	<b>Zweck</b>
Patiententest	Führt einen Rapid fFN 10Q Test an einer Patientenprobe durch.
QCette QC ausführen	Vergleicht die Funktionsparameter der QCette mit denjenigen der ursprünglichen Einrichtung. Gewährleistet, dass das Analysegerät richtig funktioniert. Wird täglich durchgeführt.
Flüssigkeit QC durchführen	Führt Durchläufe mit den Flüssigkontrollproben auf dem Analysegerät durch, um die ordnungsgemäße Funktion des PeriLynx Systems zu gewährleisten. Wird bei der Ersteinrichtung und bei jedem Kassettenwechsel bzw. jeder Kassettenlieferung durchgeführt.
Berichte anzeigen	Anzeigen/Drucken der Ergebnisse von Patiententests, QCette- und Kontrollprüfungen sowie der Systemkalibrierungsergebnisse. Ermöglicht die Datenübertragung über die Datenschnittstelle.
Eingabe eines neuen Kalibrierungscodes	Eingabe des Kalibrierungscodes für das Kassettenlos und Speicherung im Speicher des Analysegeräts. Wird bei der Ersteinrichtung und bei jedem Kassettenwechsel durchgeführt.
Einstellungen ändern	Ermöglicht Änderungen von Datum/Uhrzeit, Ton, Automatisches Drucken und Passworteinstellungen. Ermöglicht die QCette-Einrichtung.
Software aktualisieren	Ermöglicht die Aktualisierung der Softwareversion.

Das Hauptmenü zeigt auch den Status der Qualitätskontrolle der QCette an.

## Typische Abfolge von Menüoptionen

<b>Bei der Systeminstallation</b>	<b>Tägliche Routinevorgänge</b>	<b>Neues Kassettenlos</b>
Einstellungen für Datum/Uhrzeit	QCette QC ausführen	Eingabe eines neuen Kalibrierungscodes
Automatisches Drucken ein-/ ausschalten auswählen	Patiententest	QCette QC ausführen
QCette Einstellungen	Berichte anzeigen	Flüssigkeit QC durchführen
Eingabe eines neuen Kalibrierungscodes		Patiententest
QCette QC ausführen		Berichte anzeigen
Flüssigkeit QC durchführen		
Patiententest		
Berichte anzeigen		

## Verwendung des Touchscreen

Eine Schaltfläche wird durch Berühren auf dem Touchscreen ausgewählt.

ID-Felder, bei denen das Eintragen von Daten erforderlich ist, werden durch Berühren eines Buchstabens oder einer Zahl ausgefüllt. Das Alphabet ist immer auf Großbuchstaben eingestellt. Um von Buchstaben auf Zahlen umzuschalten, berühren Sie die Schaltfläche „**123**“ im oberen Bereich des Bildschirms. Um von Zahlen auf Buchstaben umzuschalten, berühren Sie die Schaltfläche „**ABC**“. Tippen Sie auf die Schaltfläche „**Alt**“, wenn diese in Ihrer Sprache verfügbar ist, um auf zusätzliche Zeichen zuzugreifen. Verwenden Sie die Taste **Löschen**, um eine Ziffer zu löschen. Verwenden Sie Taste **Leerzeichen**, um ein Leerzeichen an der Stelle des Cursors einzufügen.

Um alle Eingaben aus dem ID-Feld zu löschen, berühren Sie das „x“ rechts neben dem ID-Feld.

Der optionale Barcode-Scanner kann ebenfalls benutzt werden, um Daten in ein Feld einzugeben.

Um einen Eintrag anzuzeigen, der länger ist als das ID-Feld oder um einen Eintrag zu bearbeiten, berühren Sie das ID-Feld. Um einen Eintrag zu bearbeiten, verwenden Sie die Buchstaben-, Zahlen- oder **Löschen**-Tasten.



### Schaltfläche „Hilfe“

Die Schaltfläche **Hilfe** stellt Informationen über die eingegebenen Daten bereit. Drücken Sie auf **Schließen**, um die Hilfe zu verlassen und die korrekten Daten einzugeben.

### Schaltfläche „Weiter“

Befolgen Sie die Aufforderungen des Analysegeräts. In der Regel bestätigt die Schaltfläche **Weiter** einen Eintrag in ein Datenfeld und führt weiter zum nächsten Punkt der Abfolge. Die Schaltfläche **Weiter** ist grün, wenn das Analysegerät bereit ist, um zum nächsten Punkt der Abfolge überzugehen.

### Schaltfläche „Zurück“

Berühren Sie **Zurück**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, außer anderweitig angegeben.

The screenshot shows a dark blue interface titled "Patiententest" with a timestamp "7/4/2022 9:55". Below the title is a "LOT" label and a "Kassettenlos:" input field containing "F1067" with a close button (x). To the right is a "Hilfe" button. Below this is a numeric keypad (1-0) and an alphanumeric keypad (A-G, H-M, and a "Löschen" button with a back arrow). At the bottom are three buttons: "Zurück" (grey), "Leerzeichen" (blue), and "Weiter" (green).

<b>Feld</b>	<b>Länge</b>	<b>Erforderliches Format</b>
Benutzer	Bis zu 15 Zeichen	Jede Kombination aus Buchstaben und Ziffern. Es muss eine Eingabe erfolgen.
Proben-ID	Bis zu 16 Zeichen	Jede Kombination aus Buchstaben und Ziffern. Es muss eine Eingabe erfolgen.
Kassettenlosnummer	5 Zeichen	BZZZZ, wobei B=Buchstabe, Z=Ziffer. Die Losnummer genau so eingeben, wie sie auf der Kassetten tasche angegeben ist. In diesem Bildschirm ist das Alphabet auf Buchstaben begrenzt, die bei Kassettenlosnummern verwendet werden. Es muss eine Eingabe erfolgen.
Kalibrierungscode	10 Zeichen	Die Losnummer genau so eingeben, wie sie auf der Kassettenpackung angegeben ist.
Losnummer der Flüssigkontrollen	Bis zu 12 Zeichen	Die Losnummer der Flüssigkontrollen genau so eingeben, wie sie auf der Flasche angegeben ist oder die Losnummer-Barcodes auf der Kontrollkitschachtel scannen. Es muss eine Eingabe erfolgen.
QCette ID	6 Zeichen	Die Seriennummer der QCette genau so eingeben, wie sie auf der QCette angegeben ist. Es muss eine Eingabe erfolgen.

Das Analysegerät zeigt einen Fehler an und gibt einen Signalton ab, wenn ein falsches Format eingegeben wurde oder wenn ein ungültiger Code eingegeben wird. Drücken Sie auf **Schließen**, um die Fehlermeldung zu verlassen und die korrekten Daten einzugeben.

### Scrollen durch Datensätze

Verwenden Sie die Pfeil-nach-oben- und Pfeil-nach-unten-Tasten, um in längeren Berichten wie „Monatliche Nutzung“ durch Datensätze zu scrollen.

### Drucken

Drücken Sie auf **Drucken**, um einen Datensatz auszudrucken.

Diese Druckfunktion ist nur aktiv, wenn ein Datensatz auf dem Bildschirm sichtbar ist.

### Schaltfläche „Abbrechen“

Die Schaltfläche **Abbrechen** steht in einigen Fällen bereit, um eine Abfolge abzubrechen und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

### Hauptmenü

Berühren Sie die Schaltfläche


**Hauptmenü**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Monatliche Nutzung				4/5/2022 15:04
Analyzer-ID: 0000000014				
Monat	Gültig	Ungültig	Gesamt	
Apr 2022	35	1	36	▲
Mär 2022	14	2	16	
Feb 2022	42	0	42	
Jan 2022	29	0	29	▼

Zurück      Drucken      Hauptmenü

## QCette QC ausführen – Kurzer Überblick

Die tägliche QCette Qualitätskontrolle sollte mindestens alle 24 Stunden durchgeführt werden. Achten Sie darauf, dass im Hauptmenü Datum und Uhrzeit der letzten Durchführung der Kontrolle angezeigt werden.
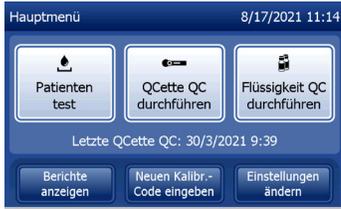
<p>Wählen Sie aus dem Hauptmenü die Option <b>QCette QC ausführen</b> aus.</p>	<p>Geben Sie die Benutzer-ID ein und drücken Sie auf <b>Weiter</b>.</p>	
		
<p>Geben Sie die QCette ID ein bzw. bestätigen Sie diese, falls sie schon eingegeben ist. Auf <b>Weiter</b> drücken</p>	<p>Führen Sie die QCette ein und drücken Sie auf <b>Weiter</b>.</p>	<p>Die Ergebnisse werden angezeigt und innerhalb von 3 Minuten ausgedruckt.</p>
		

Falls die QCette Prüfung fehlgeschlagen ist, siehe Kapitel 7 – Fehlerbehebung, Punkt 9.

## Patiententest – Kurzer Überblick


Überprüfen Sie, ob die Probe entsprechend Ihren besonderen Protokollen vorbereitet ist.

<p>Wählen Sie im Hauptmenü <b>Patiententest</b>.</p>	<p>Geben Sie die Benutzer-ID ein und drücken Sie auf <b>Weiter</b>.</p>	<p>Geben Sie die Kassettenlosnummer (auf der Kassetten tasche) ein und drücken Sie auf <b>Weiter</b>.</p>
 <p>Hauptmenü 8/17/2021 11:14</p> <p>Patiententest, QCette QC durchführen, Flüssigkeit QC durchführen</p> <p>Letzte QCette QC: 30/3/2021 9:39</p> <p>Berichte anzeigen, Neuen Kalibr.-Code eingeben, Einstellungen ändern</p>	 <p>Patiententest 7/4/2022 9:52</p> <p>Benutzer: 1001</p> <p>Q W E R T Z U I O P A S D F G H J K L Y X C V B N M Löschen</p> <p>Zurück Alt Leerzeichen Weiter</p>	 <p>Patiententest 7/4/2022 9:55</p> <p>LOT Kassettenlos: F1067 Hilfe</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F G H J K L M Löschen</p> <p>Zurück Leerzeichen Weiter</p>
<p>Geben Sie die Patientennummer ein und drücken Sie auf <b>Weiter</b>.</p>	<p>Nehmen Sie die Patientenkassette aus der Tasche. Legen Sie die Kassette in das Analysegerät ein und drücken Sie auf <b>Weiter</b>.</p>	<p>Das Analysegerät überprüft, ob die Rapid fFN 10Q Kassette richtig eingelegt wurde.</p>
 <p>Patiententest 7/4/2022 9:54</p> <p>Proben-ID: 1697655</p> <p>Q W E R T Z U I O P A S D F G H J K L Y X C V B N M Löschen</p> <p>Zurück Alt Leerzeichen Weiter</p>	 <p>Patiententest 1/31/2022 3:12 PM</p> <p>Führen Sie die Kassette ein und drücken Sie auf <b>Weiter</b></p> <p>Zurück Abbrechen Weiter</p>	 <p>Patiententest 2/1/2022 9:49 AM</p> <p>Überprüfung der Kassette</p> <p>KASSETTE NICHT ENTFERNEN</p> <p>Zurück Abbrechen</p>

Das Gerät gibt einen wiederholten Signalton ab und zeigt auf dem Bildschirm Probe auf die Kassette auftragen und Test starten drücken an. Geben Sie 200 µl der Patientenprobe hinzu und drücken Sie auf **Test starten**.

Das Analysegerät beginnt mit einem 10-minütigen Countdown: 7 Minuten für die Inkubation und 2–3 Minuten für die Analyse der Kassette.

Nach Abschluss des Testvorgangs zeigt das System das Ergebnis an und druckt es aus.

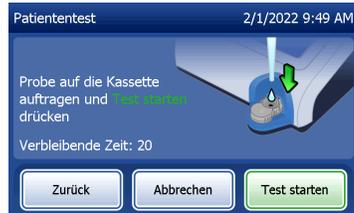


## Eingabe eines neuen Kalibrierungscodes – Kurzüberblick



Bei einem Wechsel des Kassettenloses muss die Kalibrierung eingestellt werden.

<p>Wählen Sie im Hauptmenü <b>Neuen Kalibrierungscode eingeben</b>.</p>	<p>Geben Sie die Benutzer-ID ein und drücken Sie auf <b>Weiter</b>.</p>	<p>Geben Sie die Kassettenlosnummer (auf der Kassetten tasche) ein und drücken Sie auf <b>Weiter</b>.</p>
 <p>Hauptmenü 8/17/2021 11:14</p> <p>Patienten test   QCette QC durchführen   Flüssigkeit QC durchführen</p> <p>Letzte QCette QC: 30/3/2021 9:39</p> <p>Berichte anzeigen   <b>Neuen Kalibr.-Code eingeben</b>   Einstellungen ändern</p>	 <p>Neuer Kalibrierungscode 7/4/2022 9:50</p> <p>Benutzer: 1001 123</p> <p>Q W E R T Z U I O P A S D F G H J K L Y X C V B N M Löschen</p> <p>Zurück Alt Leerzeichen Weiter</p>	 <p>Neuer Kalibrierungscode 7/4/2022 9:51</p> <p>LOT Kassettenlos: F1067 Hilfe</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F G H J K L M Löschen</p> <p>Zurück Leerzeichen Weiter</p>
<p>Geben Sie den Kalibrierungscode (auf dem Kassettenkarton) ein und drücken Sie auf <b>Weiter</b>.</p>	<p>Die Kalibrierungsergebnisse werden angezeigt und können ausgedruckt werden. Auf <b>Beenden</b> drücken, um zum Hauptmenü zurückzukehren.</p>	
 <p>Neuer Kalibrierungscode 7/4/2022 9:47</p> <p>CAL Kal. Code: D6F7M-FEH33 123</p> <p>Q W E R T Z U I O P A S D F G H J K L Y X C V B N M Löschen</p> <p>Zurück Alt Leerzeichen Weiter</p>	 <p>Neuer Kalibrierungscode 1/31/2022 3:10 PM</p> <p>Benutzer: 1001 Kassettenlos: F1067</p> <p><b>SYSTEM KALIBRIERT</b></p> <p>Datum: 1/31/2022 Kal. Code: D6F7M-FEH33 Zeit: 3:10 PM Analyzer-ID: 000000014</p> <p>Drucken Beenden</p>	

## Flüssigkeit QC durchführen – Kurzer Überblick

Lassen Sie bei jedem Kassettenloswechsel Tests mit Flüssigkontrollen durchlaufen.
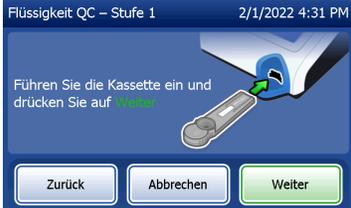
<p>Wählen Sie aus dem Hauptmenü die Option <b>Flüssigkeit QC durchführen</b> aus.</p>	<p>Geben Sie die Benutzer-ID ein und drücken Sie auf <b>Weiter</b>.</p>	<p>Geben Sie die Kassettenlosnummer (auf der Kassetten tasche) ein und drücken Sie auf <b>Weiter</b>.</p>
 <p>Hauptmenü 8/17/2021 11:14</p> <p>Patienten test   QCette QC durchführen   Flüssigkeit QC durchführen</p> <p>Letzte QCette QC: 30/3/2021 9:39</p> <p>Berichte anzeigen   Neuen Kalibr.-Code eingeben   Einstellungen ändern</p>	 <p>Flüssigkeit QC 7/4/2022 9:48</p> <p>Benutzer: 1001 123</p> <p>Q W E R T Z U I O P A S D F G H J K L Y X C V B N M Löschen</p> <p>Zurück Alt Leerzeichen Weiter</p>	 <p>Flüssigkeit QC 7/4/2022 9:49</p> <p>LOT Kassettenlos: F1067 Hilfe</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F G H J K L M Löschen</p> <p>Zurück Leerzeichen Weiter</p>
<p>Wählen Sie <b>Stufe 1</b> oder <b>Stufe 2</b> aus und drücken Sie auf <b>Weiter</b>.</p>	<p>Geben Sie die Losnummer der Kontrolle ein (auf Flaschenetikett und Karton der Kontrollen) und drücken Sie auf <b>Weiter</b>.</p>	<p>Führen Sie die Kassette ein und drücken Sie auf <b>Weiter</b>.</p>
 <p>Liquid QC 2/1/2022 4:24 PM</p> <p>Stufe 1 Stufe 2</p> <p>Zurück Abbrechen Weiter</p>	 <p>Flüssigkeit QC – Stufe 1 7/4/2022 9:49</p> <p>LOT Kontroll-Los: A5054 ABC</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F G H J K L M Löschen</p> <p>Zurück Leerzeichen Weiter</p>	 <p>Flüssigkeit QC – Stufe 1 2/1/2022 4:31 PM</p> <p>Führen Sie die Kassette ein und drücken Sie auf Weiter</p> <p>Zurück Abbrechen Weiter</p>
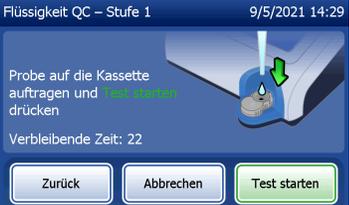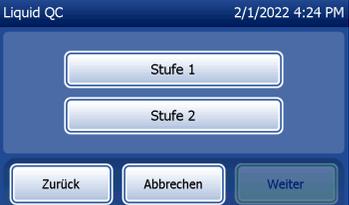
<p>Das Analysegerät überprüft, ob die Rapid fFN 10Q Kassette richtig eingelegt wurde.</p>	<p>Das Gerät gibt einen wiederholten Signalton ab und zeigt auf dem Bildschirm „Probe zu Kassette hinzufügen und Start Test drücken“ an. Geben Sie 200 µl der Kontrollprobe hinzu und drücken Sie sofort auf <b>Test starten</b>.</p>	<p>Das Analysegerät beginnt mit einem 10-minütigen Countdown: 7 Minuten für die Inkubation und 2–3 Minuten für die Analyse der Kassette.</p>
		
<p>Nach Abschluss des Testvorgangs zeigt das System das Ergebnis an und druckt es aus. Wählen Sie <b>Beenden</b>, um die nächste Kontrollprobe durchzuführen.</p>	<p><b>Hinweis:</b> Es müssen sowohl eine Stufe-1- als auch eine Stufe-2-Kontrollprobe getestet werden.</p>	<p>Wiederholen Sie den Test mit der anderen Kontrollprobe und einer frischen Kassette.</p>
		


Falls die Flüssigkontrollen fehlgeschlagen sind, siehe Kapitel 7 – Fehlerbehebung, Punkt 10.

## Kapitel 4 – Softwarefunktionen: ausführliche Beschreibung

### Startbildschirm


Beim Einschalten zeigt das Analysegerät das Hologic Logo und dann 60 Sekunden lang das Logo des PeriLynx Systems mit der Meldung Initialisierung des Systems an. Dann führt das Analysegerät einen Selbsttest der Gerätekomponenten durch. Dieser Bildschirm zeigt auch die Softwareversion an.

Wenn der Selbsttest abgeschlossen ist, zeigt der Bildschirm wieder das Hauptmenü an.

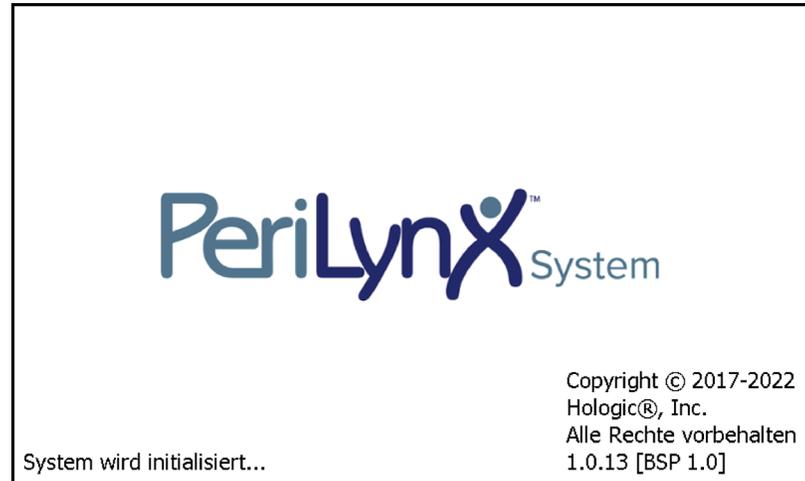

## Hauptmenü

Das Hauptmenü besteht aus den Schaltflächen „Patiententest“, „QCette QC ausführen“, „Flüssigkeit QC durchführen“, „Berichte anzeigen“, „Eingabe eines neuen Kalibrierungscodes“ und „Einstellungen ändern“.

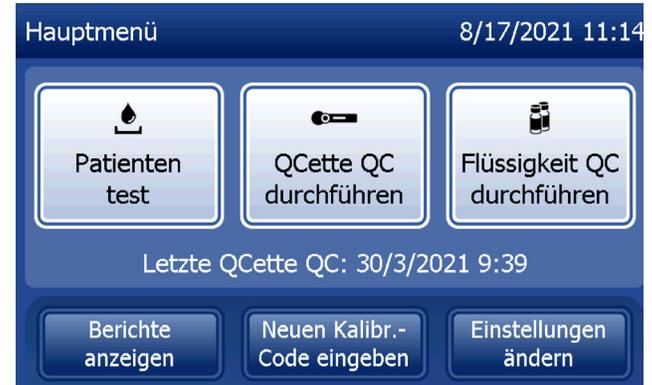

Wenn Sie die Schaltflächen „Berichte anzeigen“ und „Einstellungen ändern“ auswählen, wird jeweils ein Untermenü angezeigt.




## Eingabe eines neuen Kalibrierungscodes

Wählen Sie **Neuen Kalibrierungscode eingeben** auf dem Hauptmenü-Bildschirm, um die Kalibrierung für das Analysegerät einzustellen. Befolgen Sie die Aufforderungen des Analysegeräts. Bei einem Wechsel des Kassettenloses muss die Kalibrierung eingestellt werden.

**Hinweis:** Falls die Kalibrierung nicht eingestellt wurde, können „Patiententest“ und „Flüssigkeit QC durchführen“ nicht durchgeführt werden. Die Kalibrierung muss eingestellt werden, bevor das Analysegerät für Tests verwendet werden kann.

Um mit dem nächsten Schritt fortzufahren, muss die Benutzer-ID eingegeben werden. Drücken Sie auf **Weiter**, um die ID zu akzeptieren. Das Feld kann bis zu 15 alphanumerische Zeichen fassen.

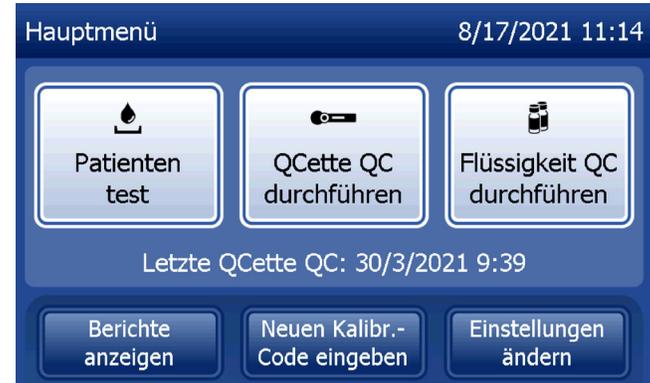

Die Kassettenlosnummer muss eingegeben werden, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren. Die Kassettenlosnummer befindet sich auf der Kassettentasche und auf dem Kassettenkarton. Die Software verlangt, dass die Losnummer im korrekten Format eingegeben wird: ein Buchstabe, danach vier numerische Zeichen (z. B. L1067).

The screenshot shows a blue-themed interface titled 'Neuer Kalibrierungscode' with a timestamp '7/4/2022 9:51'. A label 'LOT' is next to the 'Kassettenlos:' field, which contains 'F1067'. A 'Hilfe' button is to the right. Below is a numeric keypad (1-0) and an alphanumeric keypad (A-G, H-M, and a delete key labeled 'Löschen'). At the bottom are 'Zurück', 'Leerzeichen', and 'Weiter' buttons.

Der Kalibrierungscode (Kal. Code) muss eingegeben werden, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren. Der Kalibrierungscode befindet sich auf dem Kassettenkarton. Die Software verlangt, dass die Codenummer im korrekten Format eingegeben wird: 10 alphanumerische Zeichen mit einem Bindestrich in der Mitte. Geben Sie den Kalibrierungscode genau so ein, wie er auf dem Karton angegeben ist.

The screenshot shows a blue-themed interface titled 'Neuer Kalibrierungscode' with a timestamp '7/4/2022 9:47'. A label 'CAL' is next to the 'Kal. Code:' field, which contains 'D6F7M-FEH33'. A '123' button is to the right. Below is a full alphanumeric keypad (Q-P, A-L, Y-X, C-V, B-N, M, and a delete key labeled 'Löschen'). At the bottom are 'Zurück', 'Alt', 'Leerzeichen', and 'Weiter' buttons.

**Hinweis:** Der Kalibrierungscode wird von Hologic für jedes Los der Rapid fFN 10Q Kassetten vergeben.

## Kalibrierungsdatensätze

Der komplette Datensatz wird automatisch ausgedruckt, wenn Auto Drucken auf EIN eingestellt ist; alternativ kann gedruckt/erneut gedruckt werden, indem Sie auf die Schaltfläche **Drucken** drücken.




Anzeige und Ausdruck



## **Patiententest**

Wählen Sie **Patiententest** im Hauptmenü, um eine Patientenprobe zu testen. Befolgen Sie die Aufforderungen des Analysegeräts.

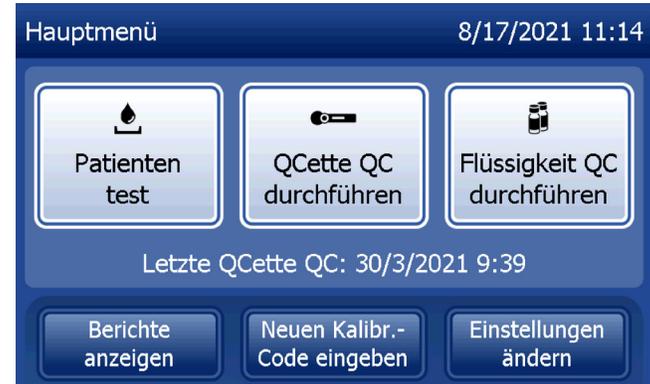

Um mit dem nächsten Schritt fortzufahren, muss die Benutzer-ID eingegeben werden. Drücken Sie auf **Weiter**, um die ID zu akzeptieren. Das Feld kann bis zu 15 alphanumerische Zeichen fassen.



Die Kassettenlosnummer muss eingegeben werden, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren. Die Kassettenlosnummer befindet sich auf dem Kassettenbeutel und auf dem Kassettenkarton. Die Software verlangt, dass die Losnummer im korrekten Format eingegeben wird: ein Buchstabe, danach vier numerische Zeichen (z. B. L1067).

Es ist wichtig, dass Sie die Kassettenlosnummer verwenden, die auf jeder Kassetten tasche und jedem Kassettenkarton aufgedruckt ist.

Das Analysegerät vergleicht automatisch die Kassettenlosnummer, die für die Einstellung der Kalibrierung verwendet wurde, mit der Kassettenlosnummer, die für den Patiententest verwendet wurde. Das Analysegerät akzeptiert Kassetten aus jeder der letzten fünf Kassettenlose, für die eine Kalibrierung eingestellt wurde.

Wenn die Losnummern nicht übereinstimmen, kann der Testablauf nicht fortgesetzt werden. In diesem Fall meldet die Anzeige, dass das Kassettenlos nicht kalibriert werden konnte. Wenn Sie **Schließen** drücken, wird die Kassettenlosnummer, die für die Kalibrierung verwendet wurde, angezeigt.

**Hinweis:** Wenn sich Kassettenlosnummer geändert hat, muss die Option Neuen Kalibrierungscode eingeben ausgeführt werden.

The screenshot shows the 'Patiententest' screen with the date and time '7/4/2022 9:55'. At the top, there is a 'LOT' label and a text input field containing 'F1067'. To the right of the input field is a 'Hilfe' button. Below the input field is a numeric keypad with digits 1-0 and a row of letters A-G. Below the letters is a row with H, J, K, L, M, and a 'Löschen' button with a delete icon. At the bottom, there are three buttons: 'Zurück', 'Leerzeichen', and 'Weiter'.

The screenshot shows the 'Patiententest' screen with the date and time '1/31/2022 3:06 PM'. A large blue dialog box is centered on the screen with the text 'Kassettenlos wurde nicht kalibriert'. At the bottom of the dialog box is a 'Schließen' button. Below the dialog box, the 'Zurück', 'Leerzeichen', and 'Weiter' buttons from the previous screen are visible.

Geben Sie bis zu 16 alphanumerische Zeichen für eine Proben-ID ein und drücken Sie auf **Weiter**. Um mit dem nächsten Schritt fortzufahren, muss die Proben-ID eingegeben werden.



Diese Meldung wird angezeigt, falls sich eine Kassette im Analysegerät befindet, bevor das System zum nächsten Bildschirm übergeht. Entfernen Sie die Kassette und drücken Sie auf **Weiter**.



Dann fordert das Analysegerät den Benutzer auf, eine Kassette einzuführen und auf **Weiter** zu drücken.


Das Analysegerät überprüft, ob die Rapid fFN 10Q Kassette richtig eingelegt wurde.




Wenn die falsche Kassette eingelegt wurde, kann der Test nicht durchgeführt werden. Drücken Sie auf **Schließen** und entfernen Sie die falsche Kassette.



Es läuft eine 30-Sekunden-Stoppuhr ab, während das Analysegerät einen Signalton abgibt. Geben Sie 200 µl der Patientenprobe hinzu und drücken Sie sofort auf **Test starten**.

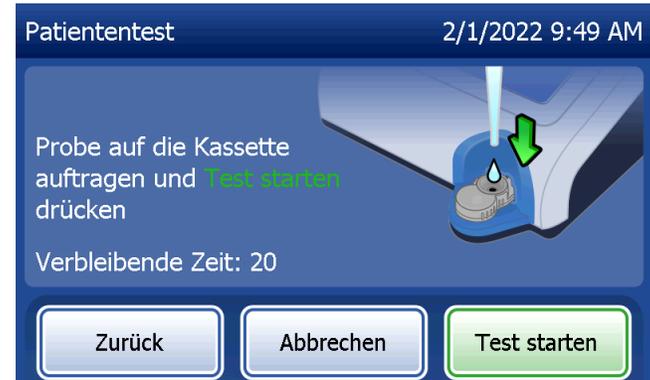

Falls die Patientenprobe nicht hinzugegeben und **Test starten** nicht in der entsprechenden Zeit betätigt wird, kann der Testablauf nicht fortgesetzt werden. Die Anzeige meldet dann, dass die Probe nicht in der entsprechenden Zeit hinzugegeben wurde. Drücken Sie auf **Schließen**, um die Kassette zu entfernen, und **Beenden**, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Es wird kein Datensatz zu diesem Test im Speicher erfasst.

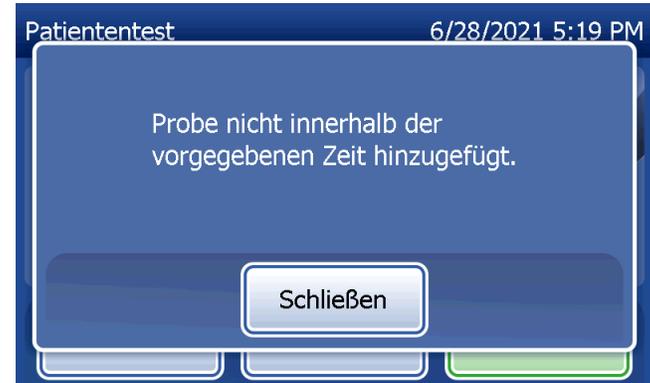

Wurde eine Probe hinzugegeben, startet das Analysegerät einen 10-minütigen Countdown.

Zum Abbruch des Tests drücken Sie auf **Abbrechen**. Die Betätigung von **Abbrechen** und die Bestätigung, dass sie den Vorgang abbrechen möchten, beendet den Test und die Daten gehen verloren.


Beim Abschluss der 7-minütigen Inkubationsphase beginnt das Analysegerät die Analyse der Kassette. Lassen Sie das Analysegerät bis zur Anzeige der Ergebnisse in Ruhe arbeiten. Die Analyse dauert etwa 2–3 Minuten.

Gebrauchsanleitung für das PeriLynx™ System

Kapitel 4 – **Softwarefunktionen – Patiententest**



Diese Meldung wird angezeigt, wenn **Abbrechen** beim Testvorgang betätigt wurde. Wählen Sie **Ja**, um den Vorgang zu beenden oder **Nein**, um mit dem Test fortzufahren. Diese Meldung bleibt 5 Sekunden lang bestehen, dann fährt das System mit dem Test fort. Wenn der Test abgebrochen wird, entfernen Sie die Kassetten und drücken Sie auf **Beenden**. Es ist eine neue Kassette für eine Testwiederholung erforderlich.

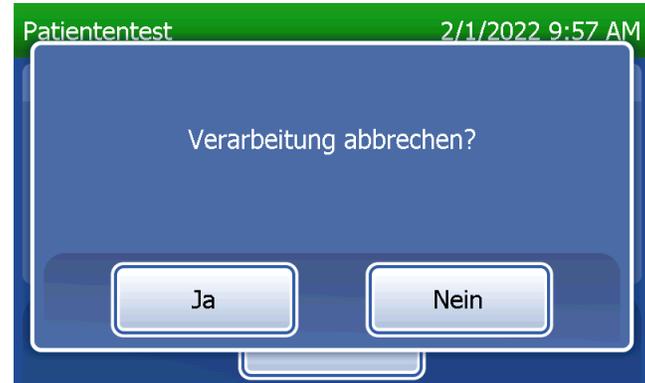

## Patientendatensätze

Die Patiententestergebnisse werden angezeigt. Der komplette Datensatz wird automatisch ausgedruckt, wenn Auto Drucken auf EIN eingestellt ist; alternativ kann gedruckt/erneut gedruckt werden, indem Sie auf die Schaltfläche **Drucken** drücken.

Patiententest 7/2/2021 9:58 AM

Proben-ID: 16976565 Kassettenlos: F1067

**fFN KONZ.: 228 ng/ml**

Datum: 7/2/2021  
Zeit: 9:58 AM

**Interne Kontrollen**  
Analyzer QC.: ✓ BESTANDEN  
Kassetten-QC.: ✓ BESTANDEN

Drucken Beenden

Anzeige und Ausdruck

HOLOGIC®

Rapid fFN 10Q test Ergebnis

**fFN KONZ.: 160 ng/ml**

ZEIT: 16:42 DATUM: 7/1/2022

PROBE: 16976565  
BENUTZER: 1001  
KASSETTENLOS: F1067  
KAL.CODE: D67F7M-FEH33  
ANALYZER ID: 0000000014

INTERNE KONTROLLEN  
ANALYZER QC.: BESTANDEN  
KASSETTEN-QC.: BESTANDEN

Patientenergebnisse werden als fFN-Konzentration in ng/ml oder als UNGÜ LTIG angezeigt.

Bei dem Ergebnis ungültig sollte der Test wiederholt werden (siehe Kapitel 7 – Fehlerbehebung, Punkt 12).

**Hinweis:** Interne Kontrollen werden automatisch bei jedem Rapid fFN Test durchgeführt. Diese internen Kontrollen prüfen Folgendes:

- (1) einen Schwellenwert des Signals in der Verfahrenskontrollposition,
- (2) einen geeigneten Probefluss durch die Rapid fFN 10Q Kassette,
- (3) das Ausbleiben einer Konjugataggregation und
- (4) ordnungsgemäße Funktion der Hardware des PeriLynx Analysegeräts.


## QCette QC ausführen

Vor dem erstmaligen Durchlauf mit der PeriLynx QCette® müssen die QCette Einstellungen erfolgen. Siehe Einstellungen ändern – QCette Einstellungen. Mehr Informationen finden Sie in der Packungsbeilage mit Anleitungen zur PeriLynx QCette.

Die tägliche QCette Qualitätskontrolle sollte mindestens alle 24 Stunden durchgeführt werden. Achten Sie darauf, dass im Hauptmenü Datum und Uhrzeit der letzten Durchführung der QCette Qualitätskontrolle angezeigt werden.

Wählen Sie aus dem Hauptmenü die Option **QCette QC ausführen** aus.

Um mit dem nächsten Schritt fortzufahren, muss die Benutzer-ID eingegeben werden. Drücken Sie auf **Weiter**, um die ID zu akzeptieren. Das Feld kann bis zu 15 alphanumerische Zeichen fassen.

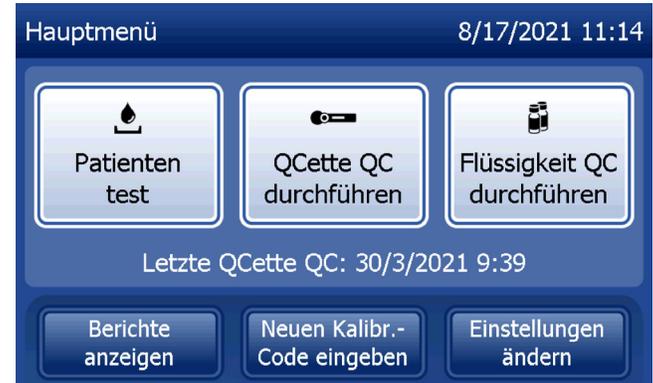

Die QCette ID wird angezeigt. (Sie wurde ursprünglich bei der Einrichtung der QCette eingegeben.) Die QCette-ID ist die Seriennummer der QCette. Bestätigen Sie, dass die angezeigte Seriennummer der auf dem Kunststoffgehäuse der QCette aufgedruckten Seriennummer entspricht, und drücken Sie auf **Weiter**. Die Software verlangt, dass die Seriennummer im korrekten Format eingegeben wird: sechs numerische Zeichen (z. B. 014899). Geben Sie auch alle Nullen am Anfang der Nummer ein.

Diese Meldung wird angezeigt, wenn die eingegebene QCette-Seriennummer nicht mit der Seriennummer identisch ist, die zur Zeit der QCette-Einrichtung eingegeben wurde.

Drücken Sie auf **Schließen**. Führen Sie entweder die Einrichtung einer neuen QCette durch oder führen Sie erneut die QCette Qualitätskontrolle mit der korrekten QCette durch.



Diese Meldung wird angezeigt, falls sich eine Kassette im Analysegerät befindet, bevor das System zum nächsten Bildschirm übergeht. Entfernen Sie die Kassette und drücken Sie auf **Weiter**.




Dann fordert das Analysegerät den Benutzer auf, die QCette einzuführen und auf **Weiter** zu drücken.



Das Analysegerät liest die QCette. Lassen Sie das Analysegerät bis zur Anzeige der Ergebnisse in Ruhe arbeiten. Die Analyse dauert etwa 2–3 Minuten.



Diese Meldung wird angezeigt, wenn **Abbrechen** beim Testvorgang betätigt wurde. Wählen Sie **Ja**, um den Vorgang zu beenden oder **Nein**, um mit dem Test fortzufahren. Diese Meldung bleibt 5 Sekunden lang bestehen, dann fährt das System mit dem Test fort. Wenn der Test abgebrochen wird, entfernen Sie die Kassetten und drücken Sie auf **Beenden**.

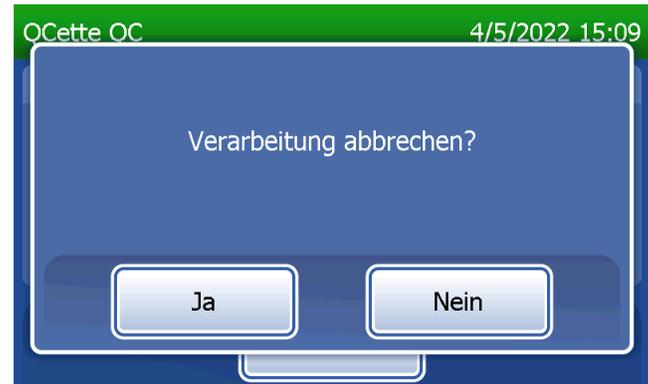

## QCette Datensätze

Der komplette Datensatz wird automatisch ausgedruckt, wenn Auto Drucken auf EIN eingestellt ist; alternativ kann gedruckt/erneut gedruckt werden, indem Sie auf die Schaltfläche **Drucken** drücken.

Die QCette Ergebnisse lauten SYSTEM: BESTANDEN oder SYSTEM: NICHT BESTANDEN. Das Analysegerät zeigt das Ergebnis BESTANDEN oder NICHT BESTANDEN und das Ergebnis für jede QCette-Stufe an (Stufe 1 und Stufe 2).

Bei einem Ergebnis NICHT BESTANDEN sollte der Test wiederholt werden (siehe Kapitel 7 – Fehlerbehebung, Punkte 8 und 9).

Auf **Beenden** drücken, um zum Hauptmenü zurückzukehren.




Anzeige und Ausdruck



## Flüssigkontrollen

Wählen Sie aus dem Hauptmenü **Flüssigkeit QC durchführen** aus.

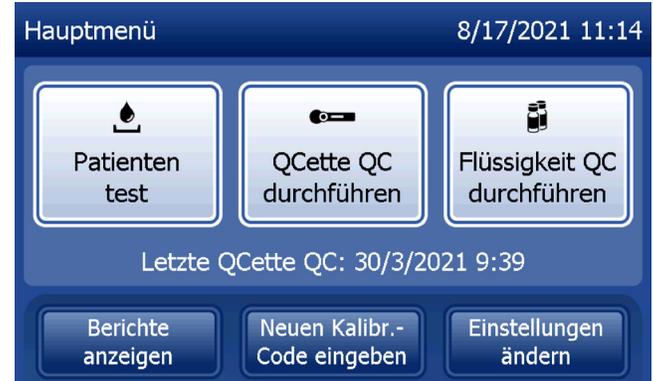

Um mit dem nächsten Schritt fortzufahren, muss die Benutzer-ID eingegeben werden. Drücken Sie auf **Weiter**, um die ID zu akzeptieren. Das Feld kann bis zu 15 alphanumerische Zeichen fassen.



Die Kassettenlosnummer muss eingegeben werden, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren. Die Kassettenlosnummer befindet sich auf der Kassetten tasche und auf dem Kassettenkarton. Die Software verlangt, dass die Codenummer im korrekten Format eingegeben wird: ein Buchstabe, danach vier numerische Zeichen (z. B. L1067).

The screenshot shows the 'Flüssigkeit QC' (Liquid QC) interface. At the top right, the date and time are '7/4/2022 9:49'. Below the title, there is a 'LOT' label and a text input field containing 'F1067'. To the right of the input field is a 'Hilfe' (Help) button. Below the input field is a numeric keypad with digits 1-0 and a '0' key. Below the numeric keypad is a letter keypad with letters A-M and a 'Löschen' (Delete) button. At the bottom, there are three buttons: 'Zurück' (Back), 'Leerzeichen' (Space), and 'Weiter' (Next).

Das Analysegerät vergleicht automatisch die Kassettenlosnummer, die für die Einstellung der Kalibrierung verwendet wurde, mit der Kassettenlosnummer, die für die Testkontrollen verwendet wurde.

Wenn die Losnummern nicht übereinstimmen, kann der Testablauf nicht fortgesetzt werden. In diesem Fall meldet die Anzeige, dass das Kassettenlos nicht kalibriert werden konnte. Wenn Sie **Schließen** drücken, wird die Kassettenlosnummer, die für die Kalibrierung verwendet wurde, angezeigt.

The screenshot shows the 'Flüssigkeit OC' (Liquid OC) interface. At the top right, the date and time are '9/5/2021 14:26'. The main display area shows a message: 'Kassettenlos wurde nicht kalibriert' (Cassette lot was not calibrated). Below the message is a 'Schließen' (Close) button. At the bottom, there are three buttons: 'Zurück' (Back), 'Leerzeichen' (Space), and 'Weiter' (Next).


Wählen Sie die Kontrolle für **Stufe 1** oder **Stufe 2** aus.




Geben Sie die Kontrolllosnummer ein und drücken Sie auf **Weiter**. Das Feld kann bis zu 12 alphanumerische Zeichen fassen.



Diese Meldung wird angezeigt, falls sich eine Kassette im Analysegerät befindet, bevor das System zum nächsten Bildschirm übergeht. Entfernen Sie die Kassette und drücken Sie auf **Weiter**.

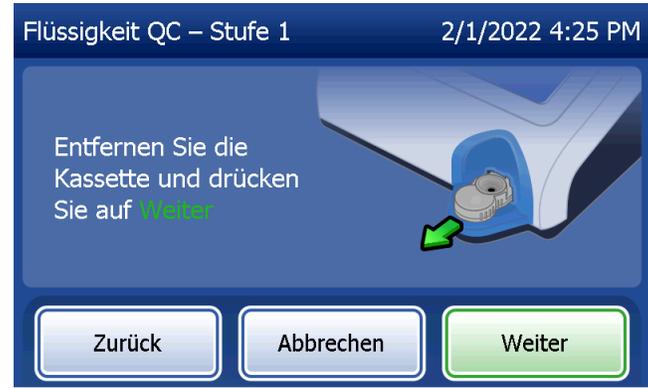


Dann fordert das Analysegerät den Benutzer auf, eine Kassette einzuführen und auf **Weiter** zu drücken.

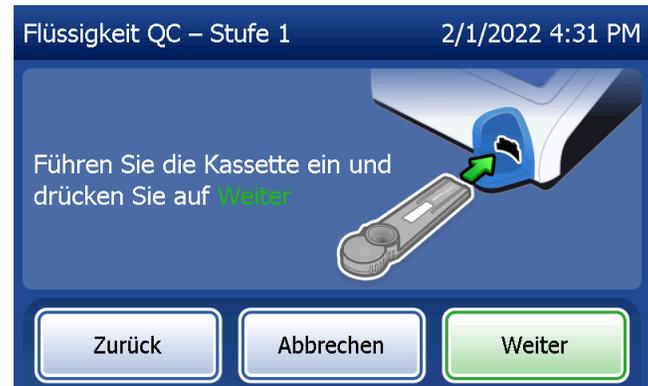


Das Analysegerät überprüft, ob die Rapid fFN 10Q Kassette richtig eingelegt wurde.

Es läuft eine 30-Sekunden-Stoppuhr ab, während das Analysegerät einen Signalton abgibt. Geben Sie 200 µl der Kontrollprobe hinzu und drücken Sie sofort auf **Test starten**.

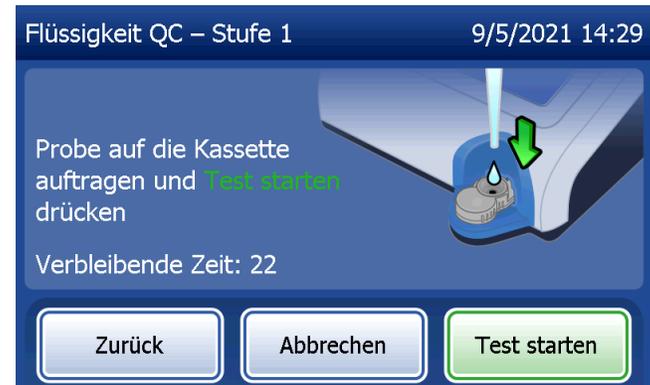

Falls die Flüssigkontrollprobe nicht hinzugegeben und **Test starten** nicht in der entsprechenden Zeit betätigt wird, kann der Testablauf nicht fortgesetzt werden. Die Anzeige meldet dann, dass die Probe nicht in der entsprechenden Zeit hinzugegeben wurde. Drücken Sie auf **Schließen**, um die Kassette zu entfernen, und **Beenden**, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Es wird kein Datensatz zu diesem Test im Speicher erfasst.

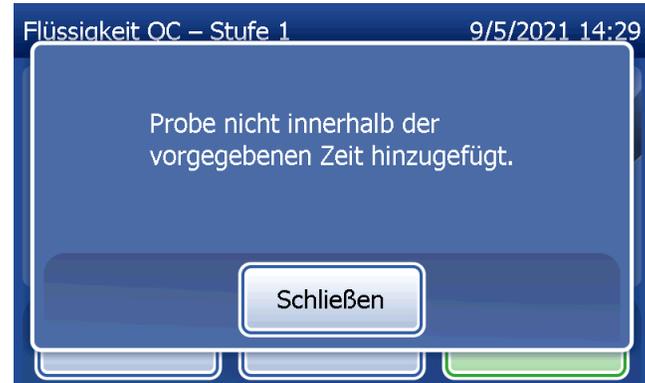


Wurde eine Probe hinzugegeben, startet das Analysegerät einen 10-minütigen Countdown.

Zum Abbruch des Tests drücken Sie auf **Abbrechen**. Die Betätigung von **Abbrechen** und die Bestätigung, dass sie den Vorgang abbrechen möchten, beendet den Test und die Daten gehen verloren.


Beim Abschluss der 7-minütigen Inkubationsphase beginnt das Analysegerät die Analyse der Kassette. Lassen Sie das Analysegerät bis zur Anzeige der Ergebnisse in Ruhe arbeiten. Die Analyse dauert etwa 2–3 Minuten.

Gebrauchsanleitung für das PeriLynx™ System

Kapitel 4 – **Softwarefunktionen – Flüssigkontrollen**

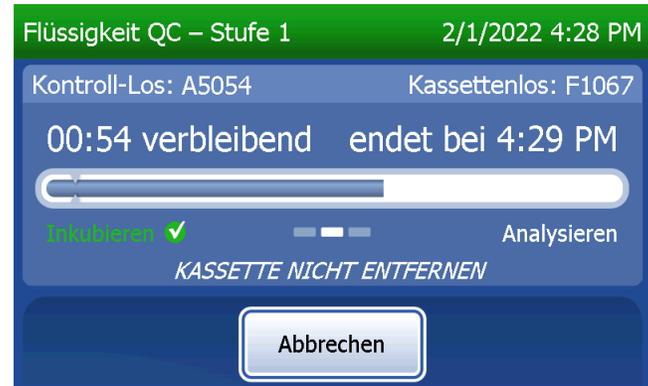

Diese Meldung wird angezeigt, wenn **Abbrechen** beim Testvorgang betätigt wurde. Wählen Sie **Ja**, um den Vorgang zu beenden oder **Nein**, um mit dem Test fortzufahren. Diese Meldung bleibt 5 Sekunden lang bestehen, dann fährt das System mit dem Test fort. Wenn der Test abgebrochen wird, entfernen Sie die Kassetten und drücken Sie auf **Beenden**. Falls der Test abgebrochen wird, ist eine neue Kassette für eine Testwiederholung erforderlich.

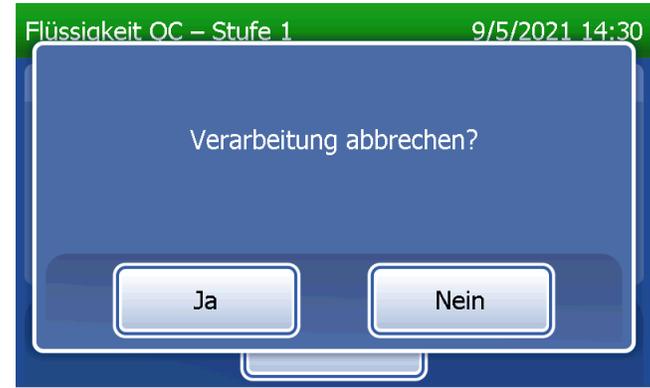

## Datensätze der Flüssigkontrolle

Der komplette Datensatz wird automatisch ausgedruckt, wenn Auto Drucken auf EIN eingestellt ist; alternativ kann gedruckt/erneut gedruckt werden, indem Sie auf die Schaltfläche **Drucken** drücken.


Kontrollergebnisse werden als fFN-Konzentration in ng/ml oder als UNGÜ LTIG angezeigt. Angemessene Ergebnisse der Flüssigkontrollen finden Sie in der Packungsbeilage zum Rapid fFN-Kontrollkit.

Bei einem Ergebnis außerhalb des Bereichs oder dem Ergebnis UNGÜ LTIG sollte der Test wiederholt werden (siehe Kapitel 7 – Fehlerbehebung, Punkt 10 und 11).



The screenshot shows a blue-themed interface for 'Flüssigkeit QC – Stufe 2'. At the top right, the date and time are '9/5/2021 14:41'. Below this, the control ID is 'Kontroll-Los: A5053' and the cassette ID is 'Kassettenlos: F1067'. The main result is 'fFN KONZ.: 170 ng/ml'. On the left, the date is 'Datum: 9/5/2021' and the time is 'Zeit: 14:41'. A box labeled 'Interne Kontrollen' shows 'Analyzer QC.: ✓ BESTANDEN' and 'Kassetten-QC.: ✓ BESTANDEN'. At the bottom, there are two buttons: 'Drucken' (Print) and 'Beenden' (End).

Anzeige und Ausdruck

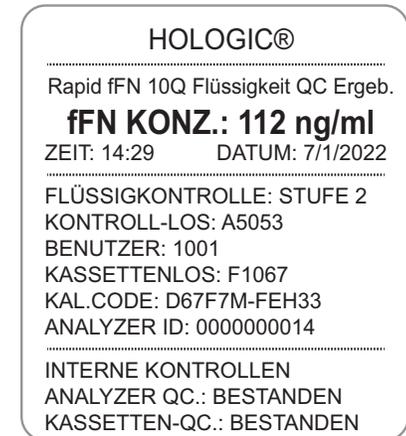

The printed output shows the following information:


HOLOGIC®  
-----  
Rapid fFN 10Q Flüssigkeit QC Ergeb.  
**fFN KONZ.: 112 ng/ml**  
ZEIT: 14:29      DATUM: 7/1/2022  
-----  
FLÜSSIGKONTROLLE: STUFE 2  
KONTROLL-LOS: A5053  
BENUTZER: 1001  
KASSETTENLOS: F1067  
KAL.CODE: D67F7M-FEH33  
ANALYZER ID: 000000014  
-----  
INTERNE KONTROLLEN  
ANALYZER QC.: BESTANDEN  
KASSETTEN-QC.: BESTANDEN


## Einstellungen ändern

Die Schaltfläche **Einstellungen ändern** im Hauptmenü ermöglicht dem Benutzer, Datum, Uhrzeit, Ton-, Autoprint- oder Passwort-Einstellungen zu ändern bzw. eine QCette-Einrichtung vorzunehmen. Diese Option ermöglicht dem technischen Kundendienst von Hologic außerdem die Aktualisierung der Softwareversion. Drücken Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche **Einstellungen ändern**, um auf diesen Bildschirm zuzugreifen.

## Einstellungen ändern – Datum/Uhrzeit

Wählen Sie **Einstellungen – Datum/Uhrzeit**.

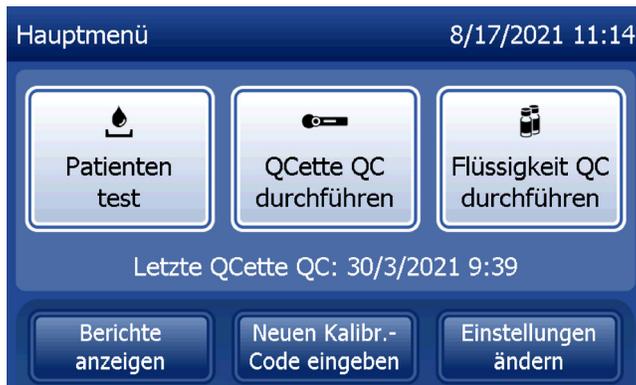


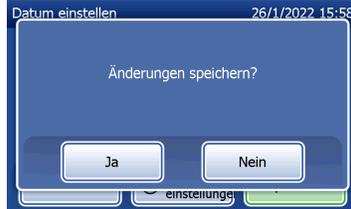
<p>Richten Sie Datum/Uhrzeit ein. Wählen Sie unter Datumsformat das gewünschte Format aus. Ein grünes Häkchen zeigt Ihre Auswahl an.</p>	<p>Verwenden Sie die Pfeil-nach-oben- und Pfeil-nach-unten-Tasten, um das Datum zu ändern. Drücken Sie auf die Schaltfläche <b>Speichern</b>, um zu akzeptieren.</p>	<p>Um die Zeiteinstellungen zu ändern, drücken Sie auf die Schaltfläche <b>Zeiteinstellungen</b>. Wählen Sie unter Zeitformat das gewünschte Format aus. Ein grünes Häkchen zeigt Ihre Auswahl an.</p>
		
<p>Verwenden Sie die Pfeil-nach-oben- und Pfeil-nach-unten-Tasten, um die Zeit zu ändern. Wenn die Zeit im 12-Stunden-Format eingestellt wird, wählen Sie <b>AM</b> oder <b>PM</b>. Ein grünes Häkchen zeigt Ihre Auswahl an. Drücken Sie auf die Schaltfläche <b>Speichern</b>, um zu akzeptieren.</p>	<p>Über den Bildschirm Zeit einstellen können Sie zum Bildschirm Datumseinstellungen zurückkehren. Oder drücken Sie auf die Schaltfläche <b>Zurück</b>, um zum Bildschirm Einstellungen ändern zurückzukehren.</p>	<p>Bei nicht gespeicherten Änderungen und Drücken der Schaltflächen <b>Zurück</b>, <b>Datumseinstellungen</b> oder <b>Zeiteinstellungen</b> wird der Bildschirm Änderungen speichern angezeigt. Drücken Sie auf <b>Ja</b>, um die Änderungen zu speichern oder <b>Nein</b>, um die Änderungen zu verwerfen.</p>
		

## Einstellungen ändern – Toneinstellungen

Aktivieren oder deaktivieren Sie im Abschnitt „Ton“ den Signalton (Piepton). Ein grünes Häkchen zeigt Ihre Auswahl an.

Wenn der Ton aktiviert ist, verwenden Sie die Schaltflächen Plus (+) oder Minus (-), um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Bei aktiviertem Ton spielt das Analysegerät beim Berühren der Plus- oder Minus-Schaltflächen auch den Ton in der gewählten Lautstärke ab.


Drücken Sie auf die Schaltfläche **Zurück**, um zum Bildschirm Einstellungen ändern zurückzukehren.

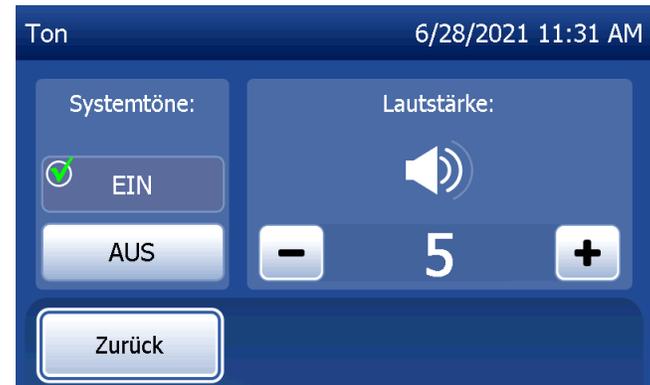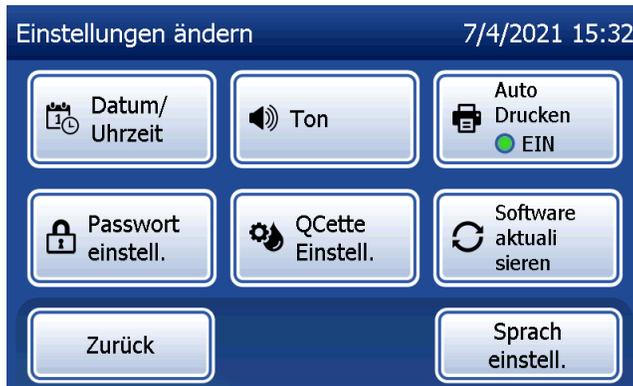


## Einstellungen ändern – Automatisches Drucken

Drücken Sie auf dem Bildschirm Einstellungen ändern auf die Schaltfläche **Auto Drucken**, um automatisches Drucken zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Ein grüner Kreis zeigt an, dass Auto Drucken aktiviert ist.

„Auto Drucken“ druckt automatisch die Testergebnisse, wenn die Funktion auf EIN eingestellt wurde. Wenn Auto Drucken auf AUS eingestellt wurde, können die Ergebnisse gedruckt werden, indem Sie die Schaltfläche **Drucken** drücken.

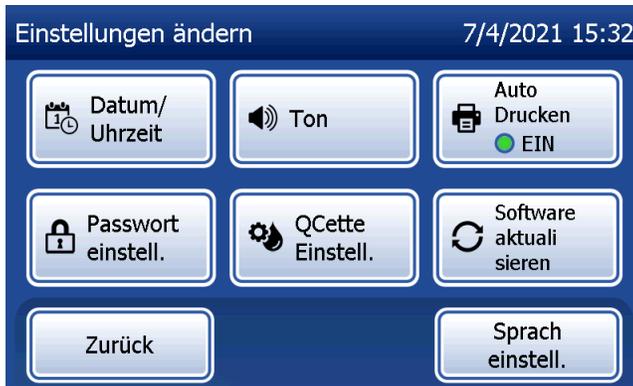

Auto Drucken EIN

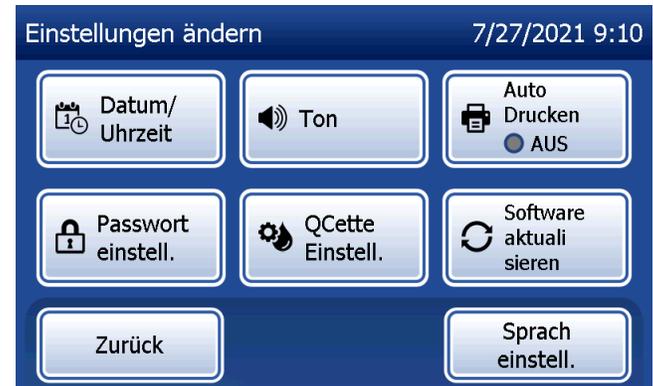

Auto Drucken AUS


## Einstellungen ändern – Passworteinstellungen

Das Analysegerät kann so eingestellt werden, dass im Abschnitt Zugriff auf Daten ein Passwort erforderlich ist, um Patienteninformationen anzuzeigen und zu drucken.



Wenn der Passwortschutz deaktiviert ist, sind die Datenzugriffsfunktionen für alle Benutzer verfügbar.

Um den Passwortschutz zu aktivieren, berühren Sie die Schaltfläche **Neues Passwort eingeben**.

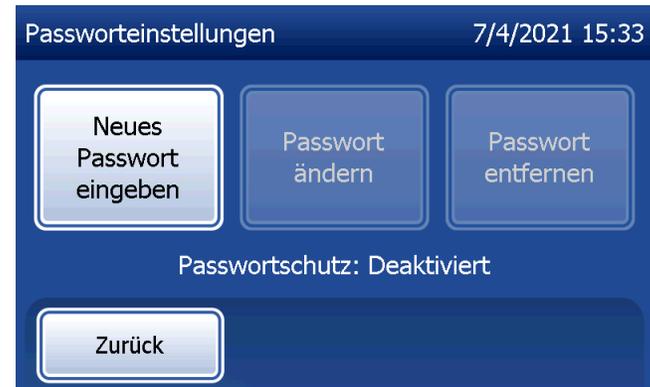

Geben Sie das Passwort über den Touchscreen oder optionalen Barcode-Scanner ein.

Drücken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

Nun ist ein Passwort erforderlich, um die Informationen im Abschnitt Zugriff auf Daten anzuzeigen und zu drucken.

Um das Passwort zu ändern, drücken Sie auf die Schaltfläche **Passwort ändern**. Geben Sie das aktuelle Passwort über den Touchscreen oder optionalen Barcode-Scanner ein. Drücken Sie auf die Schaltfläche **Weiter** und geben Sie dann das Passwort ein.

Drücken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.



Um den Passwortschutz zu entfernen, drücken Sie auf die Schaltfläche **Passwort entfernen**. Geben Sie das aktuelle Passwort über den Touchscreen oder optionalen Barcode-Scanner ein.

Drücken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.

Der Passwortschutz ändert sich von „Aktiviert“ zu „Deaktiviert“. Nun ist kein Passwort erforderlich, um die Informationen im Abschnitt Zugriff auf Daten anzuzeigen und zu drucken.



## Einstellungen ändern – QCette Einstellungen

Über die QCette Einstellungen wird die QCette initialisiert, so dass sie zur Auswertung der Funktion des Analysegeräts bereit ist. Während der Initialisierung werden die Leistungskriterien für das Analysegerät festgelegt. Die QCette Einstellungen müssen **VOR** dem Einsatz der QCette als Instrumentenprüfgerät vorgenommen werden.

Wählen Sie aus dem Hauptmenü die Option **Einstellungen ändern** aus.

Wählen Sie **QCette Einstellungen** im Menü Einstellungen ändern, um zu starten.

Um mit dem nächsten Schritt fortzufahren, geben Sie die Benutzer-ID ein. Drücken Sie auf **Weiter**, um die ID zu akzeptieren. Das Feld kann bis zu 15 Buchstaben und/oder Zahlen erfassen.



Um mit dem nächsten Schritt fortzufahren, muss die QCette-ID eingegeben werden. Die QCette ID ist die Seriennummer der QCette. Die Seriennummer ist auf dem Kunststoffgehäuse der QCette aufgedruckt. Die Software verlangt, dass die Seriennummer im korrekten Format eingegeben wird: sechs numerische Zeichen (z. B. 014899). Geben Sie auch alle Nullen am Anfang der Nummer ein.



Diese Meldung wird angezeigt, falls sich eine Kassette im Analysegerät befindet, bevor das System zum nächsten Bildschirm übergeht. Entfernen Sie die Kassette und drücken Sie auf **Weiter**.



Dann fordert das Analysegerät den Benutzer auf, die QCette einzuführen und auf **Weiter** zu drücken.




Es läuft eine zehninminütige Stoppuhr ab.


Das Analysegerät beginnt mit der Initialisierung der QCette. Lassen Sie das Analysegerät bis zur Anzeige der Ergebnisse in Ruhe arbeiten. Der Initialisierungsvorgang dauert etwa 10 Minuten. Die Initialisierung kann durch Betätigung von **Abbrechen** beendet werden.



Diese Meldung wird angezeigt, wenn **Abbrechen** beim Testvorgang betätigt wurde. Wählen Sie **Ja**, um den Vorgang zu beenden oder **Nein**, um mit dem Test fortzufahren. Diese Meldung bleibt 5 Sekunden lang bestehen, dann fährt das System mit dem Test fort. Wenn der Test abgebrochen wird, entfernen Sie die Kassetten und drücken Sie auf **Beenden**.

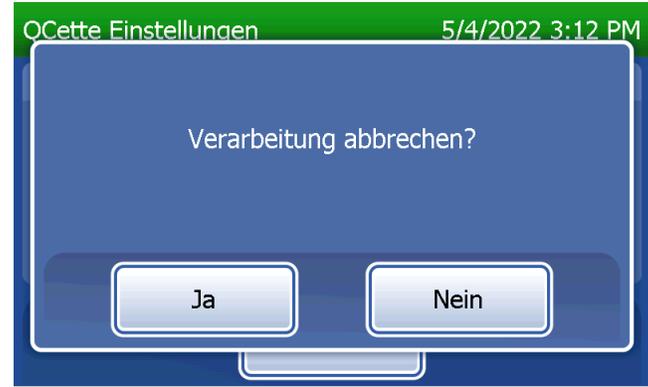


Beim erfolgreichen Abschluss der QCette-Einrichtung wird diese Meldung angezeigt. EINRICHTUNG ABGESCHLOSSEN bedeutet, dass die Leistungskriterien für das Analysegerät festgelegt wurden. Auf **Beenden** drücken, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

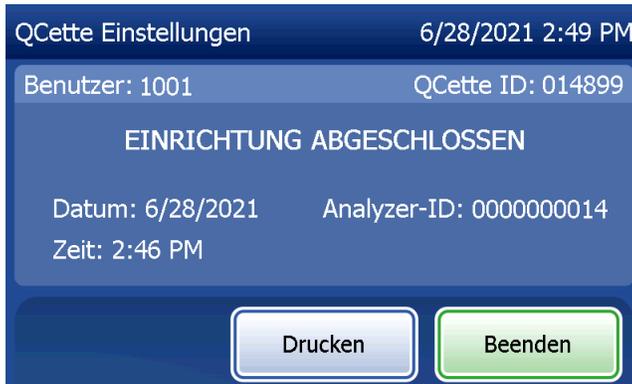

Anzeige und Ausdruck



Diese Meldung wird angezeigt, falls die QCette-Einrichtung nicht abgeschlossen wurde. Sie zeigt an, dass die Leistungskriterien des Analysegeräts nicht erreicht wurden. Bei Auftreten des Einrichtungsfehler für die QCette, siehe Kapitel 7 – Fehlerbehebung Punkt 8.

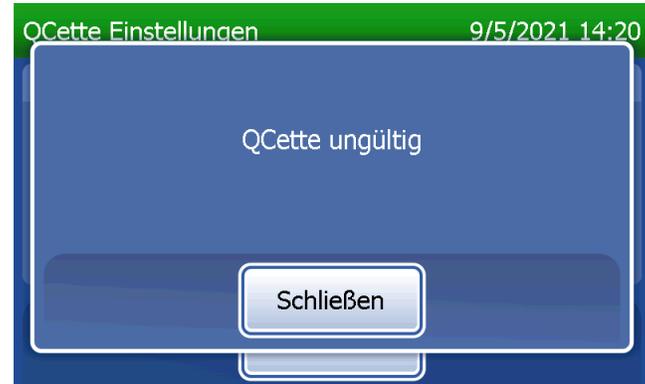

## Einstellungen ändern – Software aktualisieren

Der Bildschirm Einstellungen ändern verfügt über eine Option zur Aktualisierung der Softwareversion.




## Einstellungen ändern – Spracheinstellungen

Der Bildschirm Einstellungen ändern verfügt über eine Option, mit der die auf dem Bildschirm des Analysegerätes angezeigte Sprache geändert werden kann.

Um die auf dem Bildschirm angezeigte Sprache zu ändern, drücken Sie die Taste **Sprache**. Verwenden Sie den Pfeil nach oben oder unten, um durch die Liste der Sprachen zu blättern. Zur Sprachauswahl den Namen der Sprache drücken.


Drücken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

Das Analysegerät braucht etwa 60 Sekunden, um die Sprache zu wechseln.

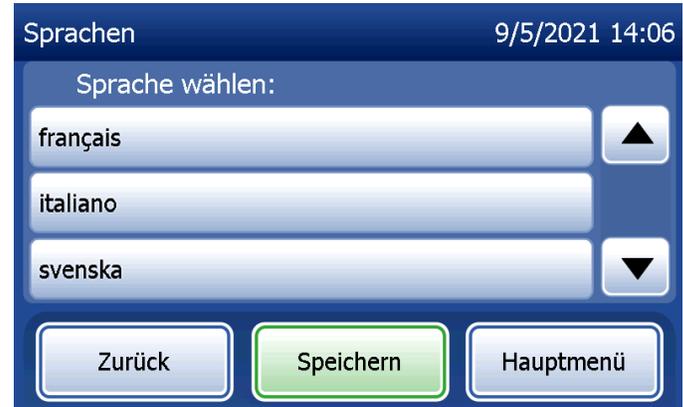

## **Berichte anzeigen**


Die Schaltfläche **Berichte anzeigen** im Hauptmenü ermöglicht dem Benutzer den Bericht der monatlichen Nutzung, die Teststatistiken und die Datenzugriffsfunktionen anzuzeigen und auszudrucken.

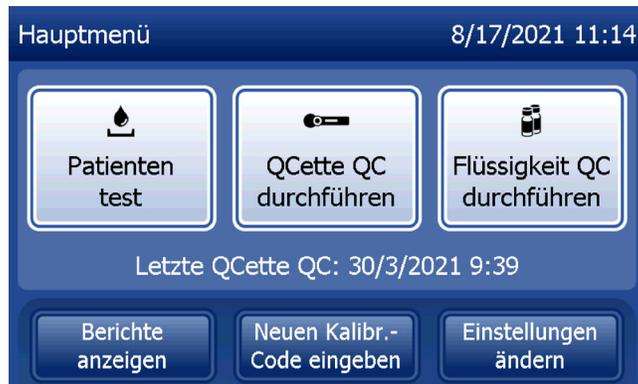

## **Monatliche Nutzung**

Berühren Sie die Schaltfläche **Monatliche Nutzung** auf dem Bildschirm **Berichte anzeigen**, um eine Zusammenfassung der Patiententests anzuzeigen oder auszudrucken, die pro Monat in den vergangenen 12 Monaten (fortlaufender Kalender) durchgeführt wurden.

**Hinweis:** Um den Bericht der monatlichen Nutzung auf ein USB-Gerät zu übertragen, verbinden Sie ein USB-Laufwerk mit dem USB-Anschluss an der Rückseite des Analysegeräts, bevor Sie die Schaltfläche **Monatliche Nutzung** auf dem Bildschirm „Berichte anzeigen“ berühren.

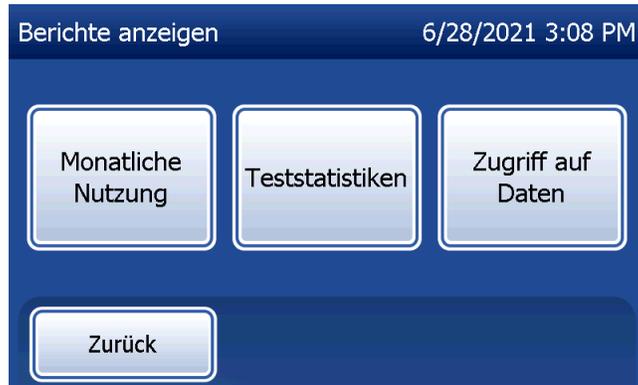

Verwenden Sie die Pfeil-nach-oben- und Pfeil-nach-unten-Tasten, um im Bericht zu scrollen.

Es wird die Gesamtzahl der Patiententests angezeigt. Die Gesamtzahl der gültigen und ungültigen Patiententests werden ebenfalls angezeigt.

Drucken Sie den Bericht, indem Sie die Taste **Drucken** betätigen.

Drücken Sie auf die Schaltfläche **Zurück**, um zum Bildschirm „Berichte anzeigen“ zurückzukehren.

Berühren Sie die Schaltfläche **Hauptmenü**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Monat	Gültig	Ungültig	Gesamt
Dez 2021	73	0	73
Nov 2021	22	0	22
Okt 2021	25	0	25
Sep 2021	38	1	39

Anzeige und Ausdruck

MONAT	GÜLT.	UNGÜLT.	GES.
MÄR	0004	0000	0004
FEB	00023	00002	00025
JAN	00050	00001	00051
DEZ	00017	00000	00017
NOV	00020	00000	00020
OKT	00021	00001	00022
SEP	00015	00003	00018
AUG	00006	00000	00006
JUL	00010	00001	00011
JUN	00011	00000	00011
MAI	00014	00000	00014
APR	00017	00002	00019
GES	00208	00010	00218


## Teststatistiken

Berühren Sie im Bildschirm „Berichte anzeigen“ die Schaltfläche **Teststatistiken**, um die Anzahl der Tests, die auf dem Analysegerät durchgeführt wurden, nach Kategorie anzuzeigen und zu drucken.

Die Gesamtanzahl der Patiententests, Flüssigkontrolltests (Liquid QC) und QCette Qualitätskontrolltests werden angezeigt. Drücken Sie auf die Schaltfläche **Drucken**, um die Teststatistiken auszudrucken.

Drücken Sie auf die Schaltfläche **Zurück**, um zum Bildschirm „Berichte anzeigen“ zurückzukehren.

Berühren Sie die Schaltfläche **Hauptmenü**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

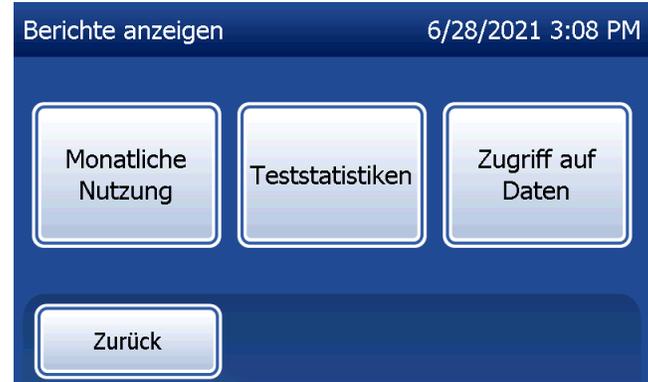

Anzeige und Ausdruck



## **Zugriff auf Daten**

### **Zugriff auf Daten – Daten anzeigen/drucken**

Berühren Sie auf dem Bildschirm „Berichte anzeigen“ die Schaltfläche **Zugriff auf Daten**, um auf die Patientendaten, Daten der QCette Qualitätskontrolle oder Kalibrierungsdaten zuzugreifen, die im Analysegerät gespeichert sind.

Wählen Sie die Kategorie der anzuzeigenden/zu druckenden Datensätze.



Wenn der Passwortschutz des Analysegeräts aktiviert ist, geben Sie das Passwort ein, um auf die Patientendaten zuzugreifen und drücken Sie auf **Weiter**.

Zugriff auf Daten 7/4/2022 9:46

Aktuelles Passwort:

Q	W	E	R	T	Z	U	I	O	P
A	S	D	F	G	H	J	K	L	
Y	X	C	V	B	N	M	Löschen		
Zurück		Alt	Leerzeichen				Weiter		

Eine Zusammenfassung der Datensätze dieser Kategorie wird angezeigt. Dabei steht der aktuellste Datensatz an oberster Stelle. In diesem Beispiel wurden Patientendaten gewählt. Verwenden Sie die Pfeil-nach-oben- und Pfeil-nach-unten-Tasten, um in den Zusammenfassungen zu scrollen.

Patiententest 1/31/2022 2:12 PM

Datum/Uhrzeit	Proben-ID	Ergebnis	
7/1/2021 11:59 AM	50	61 ng/ml	▲
7/1/2021 11:40 AM	200	135 ng/ml	
7/1/2021 8:54 AM	10	17 ng/ml	▼

Zurück Hauptmenü

Zum Anzeigen eines Datensatzes klicken Sie auf den Eintrag. Verwenden Sie die Pfeil-nach-oben- und Pfeil-nach-unten-Tasten, um durch verschiedene Datensätze zu scrollen.

Drücken Sie auf die Schaltfläche **Drucken**, um den Datensatz auszudrucken.

Drücken Sie auf die Schaltfläche **Zurück**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Berühren Sie die Schaltfläche **Hauptmenü**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

### **Zugriff auf Daten – Datenübertragung**

Die Funktion „Daten übertragen“ im Menü Zugriff auf Daten ermöglicht dem Benutzer, alle Testergebnisse, die auf dem Analysegerät gespeichert sind, auf einen Computer zu übertragen, der mit einem seriellen Kabel mit dem Analysegerät verbunden ist.

**Hinweis:** Auf dem Analysegerät können maximal 1000 Patiententestergebnisse, 50 Ergebnisse der QCette Qualitätskontrolle, 50 Ergebnisse der Flüssig-Qualitätskontrolle und 50 Kalibrierungsergebnisse gespeichert werden.



Berühren Sie **Daten übertragen**.

Wenn der Passwortschutz des Analysegeräts aktiviert ist, geben Sie das Passwort ein und drücken Sie auf **Weiter**.

**Hinweis:** Daten werden im ASCII-Format auf den Computer übertragen. Erfassung und Organisation der übertragenen Daten erfolgen nach dem Ermessen des Benutzers. Hologic, Inc. bietet KEINE Software- oder technische Unterstützung im Hinblick auf eine Verarbeitung der Daten, sobald diese das Analysegerät verlassen haben.

Diese Meldung wird angezeigt, während die Datenübertragung läuft.

Wenn die Übertragung vollständig ist, wird dies in der Anzeige des Bildschirms „Berichte anzeigen“ angezeigt.



## Kapitel 5 – Pflege des Analysegeräts

### Allgemeine Reinigung

Halten Sie das Analysegerät staubfrei. Ggf. die Außenflächen einschließlich des Touchscreen mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel reinigen.



**WARNUNG!** Es darf KEINE Flüssigkeit in das Analysegerät gelangen. Halten Sie das Analysegerät stets trocken. In das Analysegerät eindringende Flüssigkeit kann die elektrischen Komponenten beschädigen oder beim Benutzer möglicherweise einen Stromschlag verursachen.

**VORSICHT!** An KEINEM Teil des Analysegeräts Lösungsmittel verwenden. Lösungsmittel können den Touchscreen beschädigen.

### Reinigung der Kassetteneinführöffnung

Die Kassetteneinführöffnung kann in Kontakt mit Körperflüssigkeiten gelangen und sollte regelmäßig gereinigt werden.

**VORSICHT:** Bei der Handhabung biogefährdender Materialien sind geeignete Laborverfahren anzuwenden.

### Zugelassene Reinigungsmittel

Reagenzien, die nicht unten aufgeführt sind, können Verfärbungen am Gehäuse des Analysegeräts und am Touchscreen verursachen.

**Folgende Reinigungsmittel dürfen ausschließlich mit einem Tuch bzw. Labor-Wischtuch aufgetragen werden. Reinigungsmittel NIEMALS aufsprühen.**

- 70%iges Ethanol
- Allgemeine Reinigungsmittel für den Laborbedarf mit desinfizierenden Eigenschaften

## Kapitel 6 – Drucker

### Einlegen von Druckeretiketten


Die Anleitung zum Verbinden des Druckers mit dem PeriLynx Analysegerät finden Sie in Kapitel 2 – Installation.

**Hinweis:** Installieren Sie NICHT die Dymo-Etikettensoftware, die in der Druckerverpackung mit enthalten ist.


1. Öffnen Sie die Druckerabdeckung, um Zugriff auf das Innere des Druckers zu erhalten. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
2. Nehmen Sie die Etikettenspule aus dem Drucker heraus.
3. Beachten Sie, dass die LINKE und die RECHTE Seite der Spule unterschiedlich sind. Zum korrekten Zusammensetzen beachten Sie die Illustration auf jedem Teil. Die rechte Seite gleitet nach innen und außen und kann zum Einlegen der Etikettenrolle komplett abgenommen werden.
4. Entfernen Sie die RECHTE SEITE der Spule, indem Sie sie rechts nach außen herunterschieben.

5. Beachten Sie Abb. 1, während Sie diese Anweisungen befolgen: Schieben Sie die Etikettenrolle von rechts nach links auf die Spule, wie in Abb. 1(a) dargestellt. Befestigen Sie anschließend die rechte Seite der Spule wieder und schieben Sie sie fest gegen die Etikettenrolle, wie in Abb. 1(b) dargestellt. Achten Sie darauf, dass keine Lücke zwischen Rolle und Spule vorhanden ist. Die Etiketten rollen sich von unten von der Rolle ab.

Abbildung 1

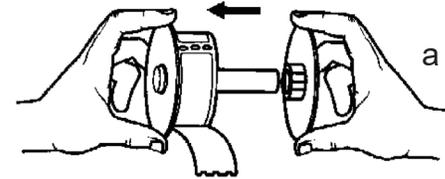


6. Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel eingesteckt ist. Schalten Sie den Drucker ein, indem Sie das Kabel in die Steckdose stecken. Die Stromanzeige blinkt und der Motor des Druckers läuft, während er Etiketten zum Abrollen anfordert.

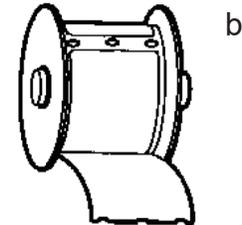

7. Während Sie die Etikettenspule mit einer Hand halten, fädeln Sie mit der anderen Hand das lose Ende der Rolle in den Führungsschlitz im Inneren des Druckers, wie in Abb. 2 dargestellt. (Falls es einfacher für Sie ist, legen Sie die Etiketten oben auf dem Drucker ab, wodurch Sie beide Hände für das Einführen der Etikettenrolle frei haben.)

Abbildung 2

8. Schieben Sie das Ende der Rolle in den Schlitz, bis Sie einen leichten Widerstand spüren. Schieben Sie weiter leicht vorwärts. Der Motor für den Etikettenvorschub schiebt nun das Ende vor, transportiert die Etiketten durch den Drucker und aus dem Ausgangsschlitz hinaus. Der Drucker stoppt am Ende des ersten Etiketts automatisch den Vorschub. Falls der Motor anhält, während der Etiketteneinlegvorgang noch läuft, drücken Sie auf die Taste Papierzuführung, um ihn so wieder zu starten. (Zum Eigenschutz hält der Motor alle paar Sekunden an.)
9. Legen Sie die Etikettenspule in den Drucker ein. Die Spule passt in die erhabenen Seitenschlitze des Druckers.
10. Schließen Sie die Abdeckung, der Drucker ist nun bereit zum Drucken von Etiketten.

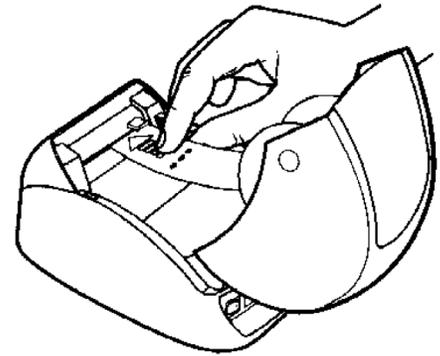

## **Entfernung einer leeren Etikettenrolle**

Wenn der Drucker keine Etiketten mehr hat, blinkt die Stromanzeige.

1. Lassen Sie den Drucker eingeschaltet und öffnen Sie die Abdeckung. Das letzte Etikett auf der Rolle kann mit einem Stück Klebeband auf dem Pappkern befestigt werden. Wenn dies geschehen ist, schneiden Sie mit der Schere das Etikett zwischen der Rolle und dem Etikettenvorschub-Schlitz durch. Nehmen Sie die Etikettenspule aus dem Drucker heraus.
2. Drücken Sie die Taste „Form Feed“ auf der Vorderseite des Druckers, um das verbleibende Etikett aus dem Drucker auszuwerfen.
3. Schieben Sie die rechte Seite der Spule nach außen weg und entfernen Sie den Pappkern der Rolle.
4. Schieben Sie eine neue Etikettenrolle auf (Anleitung hierzu siehe Einlegen von Druckeretiketten).


## **Beseitigung von Etikettenstaus**

**Hinweis:** Zur Vermeidung von Etikettenstaus reißen Sie die Ausdrucke ab, sobald sie erstellt wurden. Lassen Sie nicht die Etikettenrolle aus dem Drucker herauslaufen.

Falls es zum Stau von Etiketten im Drucker kommt, befolgen Sie diese Anweisungen zur Beseitigung:

1. Öffnen Sie die Druckerabdeckung und schneiden Sie mit der Schere das Etikett zwischen Vorschubschlitz und Etikettenrolle durch.
2. Drücken Sie die Taste „Form Feed“ auf der Vorderseite des Druckers, um das Etikett durch den Drucker zu schieben. Legen Sie erneut die Etiketten ein (Anleitung hierzu siehe Entfernung einer leeren Etikettenrolle).
3. Falls das Etikett nicht durch den Papierzufuhrschlitz vorgeschoben wird, entfernen Sie die Etikettenspule aus dem Drucker. Ziehen Sie das gestaute Etikett vorsichtig durch den Vorschubschlitz nach hinten heraus.
4. Ggf. nehmen Sie die Vorderblende des Druckers ab, um einen besseren Zugang zum Druckkopf zu erhalten. Öffnen Sie die Klappe und ziehen Sie vorsichtig am Rand der vorderen Abdeckung (1, siehe unten). Schieben Sie das Teil nach vorn (2). Jetzt lässt sich die Vorderblende abziehen.

5. Drücken Sie den Hebel links am Drucker nach vorn, um den Druck des Druckkopfes gegen das Etikett zu lösen.
6. Um die Druckerblende wieder zu befestigen, schieben Sie die Abdeckung wieder herauf und sorgen Sie dabei dafür, dass die Vorsprünge unten wie oben wieder einrasten. Legen Sie die Etikettenrolle erneut ein.

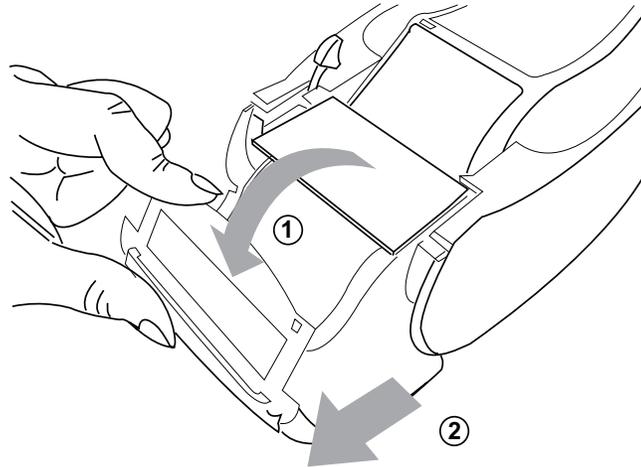

## Kapitel 7 – Fehlerbehebung

### Allgemeine Informationen

Die Software des PeriLynx Analysegeräts wurde für eine einfache Fehlerbehebung entwickelt. Achten Sie immer auf die Signaltöne und befolgen Sie die Aufforderungen am Bildschirm, damit Ihr System optimal funktionieren kann. Die folgende Tabelle enthält eine Liste der möglichen Probleme, Problemursachen und empfohlenen Lösungen. Wenden Sie sich bei Fragen zur Leistung Ihres PeriLynx Systems an den technischen Kundendienst von Hologic.

PUNKT	PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
1	Analysegerät-Bildschirm ist schwarz.	Netzkabel und/ oder -adapter des Analysegeräts  On/Off-Schalter	Überprüfen Sie, ob das Netzkabel des Analysegeräts fest im Gerät steckt.  Verwenden Sie nur den mitgelieferten Adapter des Analysegeräts.  Überprüfen Sie, ob der Netzadapter des Analysegeräts in eine geerdete Wechselstrom-Steckdose gesteckt ist.  Überprüfen Sie, ob der On/Off-Schalter des Analysegeräts auf „On“ (Ein) steht.

<b>PUNKT</b>	<b>PROBLEM</b>	<b>URSACHE</b>	<b>LÖSUNG</b>
2	Es wird ein Fehlercode angezeigt, sobald das Analysegerät zum ersten Mal eingeschaltet wird.	Analysegerät	Schalten Sie das Analysegerät aus und wieder an, um das System neu hochzufahren.  Falls der Fehlercode weiterbesteht, siehe Tabelle Fehler-/Ungültig-Codes.
3	Der Analysevorgang wird abgebrochen und/oder es erscheinen ungewöhnliche Zeichen auf dem Bildschirm und das Analysegerät reagiert nicht auf die Eingabe über den Touchscreen.	Vorübergehende Stromunterbrechung	Trennen Sie das Druckernetzkabel vom Analysegerät.  Schalten Sie das Analysegerät aus.  Verbinden Sie das Druckernetzkabel wieder mit dem Analysegerät.  Schalten Sie das Analysegerät an.  Setzen Sie die Tests fort.

PUNKT	PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
4	Drucker druckt nicht.	<p>Drucker ist nicht verbunden Druckernetzkabel</p> <p>USB-Kabel</p> <p>Druckeretiketten</p> <p>Drucker war nicht verbunden, als der Test lief.</p>	<p>Überprüfen Sie, ob das Netzkabel des Druckers fest am Analysegerät eingesteckt ist. Die Stromanzeige sollte leuchten.</p> <p>Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel mit dem Drucker und dem Analysegerät verbunden ist.</p> <p>Überprüfen Sie, ob der Drucker noch Druckeretiketten enthält. Zur Bestellung von Druckeretiketten wenden Sie sich an den Kundendienst.</p> <p>Verbinden Sie den Drucker mit dem Analysegerät. Schalten Sie das Analysegerät aus und wieder an. Rufen Sie das Testergebnis auf dem Analysegerät-Bildschirm auf (Berichte anzeigen, Zugriff auf Daten, Patient. Wählen Sie den Bericht aus der Liste aus, um ihn zu öffnen). Drücken Sie auf <b>Drucken</b> am Analysegerät, um das Ergebnis auszudrucken.</p>

PUNKT	PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
5	Druckerausgabe in ungewöhnlicher Schriftart.	Drucker	Trennen Sie das Druckernetzkabel vom Analysegerät. Schalten Sie das Analysegerät aus. Verbinden Sie das Druckernetzkabel wieder mit dem Analysegerät. Schalten Sie das Analysegerät an.
6	Das Analysegerät wurde nach Kalibrierung ausgeschaltet oder es kam bei der Kalibrierung zu einem Stromausfall.	Stromversorgung	Die Kalibrierung ist im Speicher erfasst. Stellen Sie die Kalibrierung nur erneut ein, wenn das Analysegerät dazu auffordert.
7	Die Kassette oder QCette kann nicht aus dem Analysegerät entfernt werden. <b>(Hinweis:</b> Versuchen Sie nicht, diese mit Gewalt aus dem Analysegerät herauszuziehen oder zu drehen.)	Analysegerät	Schalten Sie das Analysegerät aus und wieder an, um das System neu hochzufahren.  Falls die Kassette/QCette leicht entfernt werden kann, setzen Sie die Tests fort.  Falls die Kassette/QCette nicht leicht entfernt werden kann, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.

<b>PUNKT</b>	<b>PROBLEM</b>	<b>URSACHE</b>	<b>LÖSUNG</b>
8	PeriLynx QCette konnte nicht vollständig eingerichtet werden.	PeriLynx QCette oder Analysegerät	<p>Schalten Sie das Analysegerät aus und wieder an, um das System neu hochzufahren.</p> <p>Sorgen Sie dafür, dass die QCette sauber und unbeschädigt ist. Die QCette lässt sich mit einem Druckluftspray reinigen.</p> <p>Wiederholen Sie die Einrichtung der QCette wie in Kapitel 4 – Softwarefunktionen: ausführliche Beschreibung beschrieben. Wenn die Einrichtung der QCette abgeschlossen ist, führen Sie die QCette Qualitätskontrolle durch und anschließend die Flüssigkeits-Qualitätskontrolle.</p> <p>Setzen Sie das Analysegerät oder die QCette beim Test keinen Stößen oder Erschütterungen aus.</p> <p>Falls die Einrichtung der QCette zum zweiten Mal fehlschlägt, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.</p>

<b>PUNKT</b>	<b>PROBLEM</b>	<b>URSACHE</b>	<b>LÖSUNG</b>
9	Die PeriLynx QCette ist bei der täglichen Geräteüberprüfung ausgefallen.	PeriLynx QCette oder Analysegerät	<p>Schalten Sie das Analysegerät aus und wieder an, um das System neu hochzufahren.</p> <p>Überprüfen Sie, ob die QCette-Seriennummer auf dem Gerät mit der im Analysegerät programmierten Seriennummer übereinstimmt, die im Ausdruck des Qualitätskontrollenergebnisses der QCette angegeben ist.</p> <p>Sorgen Sie dafür, dass die QCette sauber und unbeschädigt ist. Die QCette lässt sich mit einem Druckluftspray reinigen.</p> <p>QCette QC ausführen Wurde diese bestanden, ist keine weitere Fehlerbehebung mehr notwendig.</p> <p>Wenn das Durchführen der QCette Qualitätskontrolle fehlschlägt, führen Sie die Einrichtung der QCette durch. (Wählen Sie im Hauptmenü die Option Einstellungen ändern und dann QCette Einstellungen.) Wenn QCette Einstellungen abgeschlossen ist, führen Sie QCette QC aus, danach Flüssigkeit QC. Wurde beides bestanden, ist keine weitere Fehlerbehebung mehr notwendig.</p> <p>Falls QCette QC ausführen zum zweiten Mal fehlschlägt, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.</p>

<b>PUNKT</b>	<b>PROBLEM</b>	<b>URSACHE</b>	<b>LÖSUNG</b>
10	Das Ergebnis der Flüssigkontrolle liegt außerhalb des Bereichs der zulässigen Ergebnisse.	Flüssigkontrolle	<p>Vergewissern Sie sich, dass das Verfallsdatum der Rapid fFN 10Q-Kassetten nicht überschritten wurde und sie richtig gelagert wurden. Sorgen Sie dafür, dass der im Gerät programmierte Kal.-Code mit dem Kal.-Code auf dem Kassettenkarton übereinstimmt.</p> <p>Überprüfen Sie, ob das Verfallsdatum der Kontrolle erreicht ist und ob die Flüssigkeit trübe oder verfärbt ist.</p> <p>Falls eine Kontamination der Kontrollen vermutet wird, öffnen Sie einen neuen Karton mit Kontrollen.</p> <p>Überprüfen Sie die Packungsbeilage des Rapid fFN-Kontrollkits, um zu gewährleisten, dass das richtige Verfahren angewandt wurde. Wiederholen Sie den Test mit einer neuen Kassette. Wenn das Kontrollergebnis akzeptabel ist, ist keine weitere Fehlerbehebung mehr notwendig.</p> <p>Wenn das Kontrollergebnis zum zweiten Mal außerhalb des Bereichs der zulässigen Ergebnisse liegt, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.</p>

PUNKT	PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
11	Ungültiges Testergebnis mit Flüssigkontrolle.	<p>Interne Kontrollen Analyzer QC: System nicht bestanden. Kassetten- Qualitätskontrolle: Bestanden</p>	<p>Siehe Tabelle Fehler-/Ungültig-Code.</p> <p>Schalten Sie das Analysegerät aus und wieder an, um das System neu hochzufahren.</p> <p>QCette QC ausführen Wenn das Ergebnis der QCette Qualitätskontrolle „Bestanden“ ist, testen Sie die Kontrolle mit einer neuen Kassette erneut. Wurde beides bestanden, ist keine weitere Fehlerbehebung mehr notwendig.</p> <p>Wenn das Ergebnis der QCette Qualitätskontrolle „Nicht bestanden“ lautet, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.</p>
		<p>Interne Kontrollen Analyzer QC: Bestanden Kassetten-QC: System nicht bestanden.</p>	<p>Überprüfen Sie, ob 200 µl der Kontrolle dosiert wurden.</p> <p>Überprüfen Sie die Packungsbeilage des Rapid fFN-Kontrollkits, um zu gewährleisten, dass das richtige Verfahren angewandt wurde. Wiederholen Sie den Test mit einer neuen Kassette. Wenn das Kontrollergebnis akzeptabel ist, ist keine weitere Fehlerbehebung mehr notwendig.</p> <p>Setzen Sie das Analysegerät oder die Kassette beim Test keinen Stößen oder Erschütterungen aus.</p> <p>Falls die Kontrolle zum zweiten Mal ungültig ist, wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst.</p>

<b>PUNKT</b>	<b>PROBLEM</b>	<b>URSACHE</b>	<b>LÖSUNG</b>
12	Ungültiges Patiententestergebnis	Interne Kontrollen Analyzer QC: System nicht bestanden. Kassetten-QC: Bestanden	<p>Siehe Tabelle Fehler-/Ungültig-Code.</p> <p>Schalten Sie das Analysegerät aus und wieder an, um das System neu hochzufahren.</p> <p>Führen Sie die Qualitätskontrolle der QCette erneut durch. Wenn das Ergebnis Bestanden ist, testen Sie die Probe erneut mit einer neuen Kassette. Wurde beides bestanden, ist keine weitere Fehlerbehebung mehr notwendig.</p> <p>Wenn das Patiententestergebnis ungültig ist, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.</p>
		Interne Kontrollen Analyzer QC: Bestanden Kassetten-QC: System nicht bestanden.	<p>Überprüfen Sie, ob 200 µl der Probe dosiert wurden.</p> <p>Überprüfen Sie die Packungsbeilage des Rapid fFN 10Q Kassettenkits, um zu gewährleisten, dass das richtige Verfahren angewandt wurde. Wiederholen Sie den Test mit einer neuen Kassette.</p> <p>Untersuchen Sie die Kassette. Zählflüssige Patientenproben können zu einem unvollständigen Probenfluss durch die Membran führen. Suchen Sie nach Hinweisen auf eine Probenkontamination (Gleitmittel, Seife, Desinfektionsmittel, Cremes).</p> <p>Testen Sie die Probe erneut mit einer neuen Kassette. Lässt sich das Problem nicht beseitigen, wenden Sie sich an den Arzt und fordern Sie eine erneute Probenentnahme in 24 Stunden an.</p>

## **Fehler-/Ungültig-Codes**

<b>FEHLERCODE</b>	<b>DEFINITION</b>	<b>FEHLERBEHEBUNGSVERFAHREN</b>
003, 004, 007, 020, 024, 100, 103, 104, 107, 120, 124	Interne Kontrollen Fehler bei Kassetten-QC	Siehe Fehlerbehebung, Punkt 11 und 12.
142A	Dark Count außerhalb des Messbereichs	Schalten Sie das Analysegerät aus und wieder an, um das System neu hochzufahren. Führen Sie die Qualitätskontrolle der QCette erneut durch. Wurde die QCette Qualitätskontrolle bestanden, setzen Sie den normalen Betrieb fort. Schlug die QCette Qualitätskontrolle fehl, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.
142B	Temperaturfehler	Schalten Sie das Analysegerät aus und wieder an, um das System neu hochzufahren. Führen Sie die Qualitätskontrolle der QCette erneut durch. Wurde die QCette Qualitätskontrolle bestanden, setzen Sie den normalen Betrieb fort. Schlug die QCette Qualitätskontrolle fehl, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.
0622	Mögliches Problem mit der Spannung	Schalten Sie das Analysegerät aus und wieder an, um das System neu hochzufahren. Führen Sie die Qualitätskontrolle der QCette erneut durch. Wurde die QCette Qualitätskontrolle bestanden, setzen Sie den normalen Betrieb fort. Schlug die QCette Qualitätskontrolle fehl, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.

**Falls Analysegeräte-Fehler weiterbestehen oder wieder auftreten, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.**

<b>FEHLERCODE</b>	<b>DEFINITION</b>	<b>FEHLERBEHEBUNGSVERFAHREN</b>
0720 0721	Mögliches Motorproblem	Schalten Sie das Analysegerät aus und wieder an, um das System neu hochzufahren. Führen Sie die Qualitätskontrolle der QCette erneut durch. Wurde die QCette Qualitätskontrolle bestanden, setzen Sie den normalen Betrieb fort. Schlug die QCette Qualitätskontrolle fehl, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.
OD24	Mögliches QCette Problem	Schalten Sie das Analysegerät aus und wieder an, um das System neu hochzufahren. Reinigen Sie die QCette nach den Anweisungen in der Packungsbeilage. Wiederholen Sie die Einrichtung der QCette (siehe Fehlerbehebung, Punkt 8).
OE21	Hohe Lichtstärke	Schalten Sie das Analysegerät aus und wieder an, um das System neu hochzufahren. Stellen Sie fest, ob es eine neue Quelle von hellem Licht gibt (in der letzten Zeit neue Position an einem Fenster, Laborleuchten ersetzt, Fensterjalousien geöffnet). Entfernen Sie möglichst die zu helle Lichtquelle oder setzen Sie das Analysegerät um. Siehe Fehlerbehebung, Punkt 11 und 12. Führen Sie die Qualitätskontrolle der QCette erneut durch. Wurde die QCette Qualitätskontrolle bestanden, setzen Sie den normalen Betrieb fort. Schlug die QCette Qualitätskontrolle fehl, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.
OE22, OE23	Mögliche Optikprobleme	Schalten Sie das Analysegerät aus und wieder an, um das System neu hochzufahren. Führen Sie die Qualitätskontrolle der QCette erneut durch. Wurde die QCette Qualitätskontrolle bestanden, setzen Sie den normalen Betrieb fort. Schlug die QCette Qualitätskontrolle fehl, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.
Sonstige Codes		Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.

**Falls Analysegeräte-Fehler weiterbestehen oder wieder auftreten, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.**

## **Kapitel 8 – Kundendienst**

### **Technischer Kundendienst**

#### **Analysegerät**

Das PeriLynx Analysegerät ist ein in sich geschlossenes Gerät. Es gibt dabei keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Bei richtiger Pflege und Verwendung sollte das Analysegerät mit minimalem Aufwand einwandfrei funktionieren. Falls ein Problem auftritt, lesen Sie in Kapitel 7, Fehlerbehebung nach. Wegen Fragen zum Analysegerät wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Hologic.

#### **Drucker**

Der Drucker ist ein in sich geschlossenes Gerät. Falls ein Problem auftritt, siehe Kapitel 7 – Fehlerbehebung. Wegen Fragen zum Drucker wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Hologic.

#### **Barcode-Scanner (optional)**

Der Barcode-Scanner ist ein in sich geschlossenes Gerät. Falls ein Problem auftritt, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Hologic.

## **Kontaktinformationen**

Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center DriveSan  
Diego, CA 92121 USA  
www.hologic.com

## **Technischer Kundendienst (außerhalb USA und Kanada)**

### **Tel.:**

Asien	+852 3526 0718	Niederlande:	0800 0226782
Australien:	+61 2 9888 8000	Norwegen:	800 15564
Österreich:	0800 291919	Portugal:	800 841034
Belgien:	0800 77378	Spanien:	900 994197
Dänemark:	8088 1378	Südafrika:	0800 980 731
Finnland:	0800 114829	Schweden:	020 797943
Frankreich:	0800 913659	Schweiz:	0800 298921
Deutschland:	0800 1830227	Großbritannien:	0800 0323318
Republik Irland:	1 800 554144	Andere Länder:	00800.800.29892
Italien:	800 786308		

Internationale Faxnummer: 0041.21.633.39.10

E-Mail: [InternationalTechSupport@Hologic.com](mailto:InternationalTechSupport@Hologic.com)

## **Ersatzteile**

<b>Punkt</b>	<b>Bestellnummer</b>
Druckeretiketten	52660-001
PeriLynx QCette	PRD-04007
Rapid fFN 10Q Flüssigkontrollkit	PRD-01019
Probenentnahmekit	PRD-01020
Rapid fFN Kassetten, 26er-Karton	PRD-01018
Barcode-Scanner	MEL-00970
Gebrauchsanleitung für das PeriLynx™ System	MAN-08809-001

Zur Bestellung von Ersatzteilen wenden Sie sich an den fFN-Kundendienst.

### **Ein Exemplar**

#### **Kundendienst (außerhalb der USA und Kanada)**

Setzen Sie sich mit Ihrer nächstgelegenen Vertretung in Verbindung.

Sie finden die nächstgelegene Vertretung unter

[www.ffntest.com](http://www.ffntest.com)

oder [www.hologic.com](http://www.hologic.com)

oder unter der Telefonnummer 00800-800-29892.

der eingeschränkten Garantie von Hologic und andere Verkaufsbedingungen können beim Kundendienst unter den oben aufgeführten Nummern angefordert werden.

### **PeriLynx™ System**

Analysegerät-Seriennummer \_\_\_\_\_

Druckerseriennummer \_\_\_\_\_

Barcode-Scanner (optional), Seriennummer \_\_\_\_\_

Versanddatum \_\_\_\_\_