

Viera™

Breast ultrasound von **Clarius®**

Kurzanleitung

HOLOGIC®

 **clarius** ultrasound
anywhere



Technischer Support über:
**Kontaktieren Sie den Technischen
Support von Hologic**



Die komplette Anleitung, ein Symbolverzeichnis
und Sicherheitsinformationen finden Sie im
Handbuch des Viera Ultraschallgeräts.


1 Laden Sie die Clarius App von iTunes oder Google Play Store herunter



2 Starten Sie die Clarius App



3 Konto erstellen

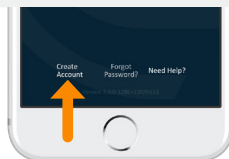

i Falls Sie bereits über ein Konto verfügen, melden Sie sich über Ihr bestehendes Konto an.


4 Legen Sie den Akku ein

Nachdem die Clarius App auf Ihr Smartphone oder Tablet geladen wurde, nehmen Sie den Akkuschutz ab, und legen Sie den Akku vollständig ein. Die Anzeige des Ultraschallgeräts blinkt zunächst blau, dann grün und geht schließlich aus. Das Ultraschallgerät befindet sich im Standby-Modus und wartet darauf, dass die App gestartet wird.



5 Ultraschallgerät finden

Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone oder Tablet mit dem Internet verbunden ist. Es dauert etwa eine Minute bis das Ultraschallgerät, das Sie verwenden möchten, in der App angezeigt wird.

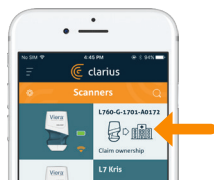


6 Institution erstellen oder auswählen

Sobald Sie Ihr Ultraschallgerät gefunden haben, werden Sie von der App aufgefordert, eine neue Institution zu erstellen oder eine Institution auszuwählen, die bereits mit Ihrem Konto verbunden ist.



7 Ultraschallgerät auswählen


Wählen Sie Ihr neues Ultraschallgerät aus der Liste.

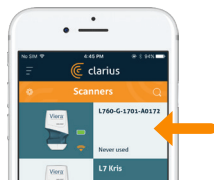

8

Achten Sie auf die Verbindungsanzeige

Nach Abschluss des Verbindungsaufbaus ist die Clarius App mit dem Ultraschallgerät verbunden.

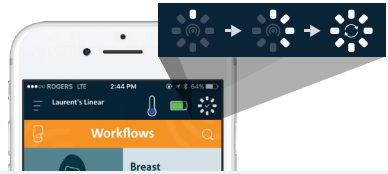


9

Wechseln Sie auf das Wi-Fi Direct Netzwerk des Ultraschallgeräts

Nach der Erstinbetriebnahme verbindet sich Ihr Viera Ultraschallgerät bei jedem Einsetzen des Akkus automatisch mit Ihrem Smartphone oder Tablet. Um eine hohe Leistung zu erzielen, wird ein Smartphone oder Tablet empfohlen, das 5-GHz-WLAN unterstützt.


iOS*

iOS 11+ wird bei jedem Einschalten des Ultraschallgeräts eine Aufforderung anzeigen. Berühren Sie einfach die Schaltfläche „Beitreten“ und Ihr Ultraschallgerät stellt eine Verbindung her.

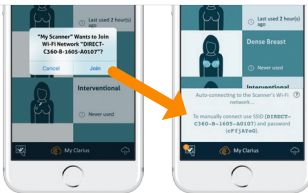

Android

Eine Meldung erscheint auf dem Bildschirm und bestätigt die automatische Verbindung.

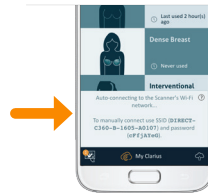

*HINWEIS: Nutzer von iOS 10 oder älteren Versionen müssen das manuelle Einstellungsverfahren verwenden, erläutert unter www.clarius.com/wifi. Das iPhone 4s unterstützt kein 5-GHz-WLAN.




Verbindungsprobleme? Versuchen Sie das hier erläuterte manuelle Einstellungsverfahren: www.clarius.com/wifi


10

Ultraschalluntersuchung starten


Wählen Sie den Untersuchungstyp aus der Liste

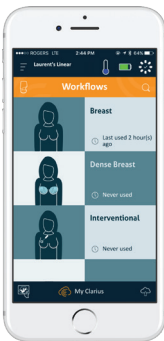

Geben Sie Angaben zum Patienten ein, oder fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort

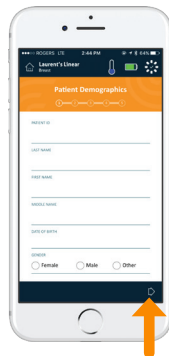


Drücken Sie die Schaltfläche mit der Schneeflocke für die Live-Bildgebung

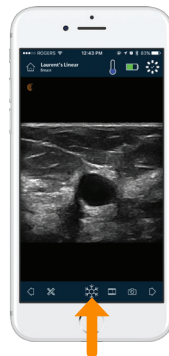

Die Basisfunktionen für das Scannen finden Sie unter www.clarius.com/tutorials


Aktualisierungen herunterladen

Es kann sein, dass Sie vom System aufgefordert werden, die Software Ihres Ultraschallgeräts zu aktualisieren. Drücken Sie **Aktualisieren**, um fortzufahren.

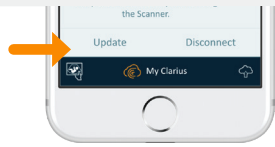

Während einer Aktualisierung

Die Leuchte des Ultraschallgeräts blinkt zunächst blau und anschließend während der Aktualisierung der Software violett auf. **Trennen Sie während dieser Zeit nicht die Verbindung zum Akku.**

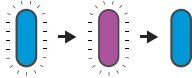

Oben rechts im Bildschirm erscheint eine violette Anzeige. Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, leuchtet die Anzeige des Ultraschallgeräts blau auf, und die Verbindung wird wieder automatisch wiederhergestellt.

i Nach der Aktualisierung kann eventuell Schritt 9 notwendig sein, um die Verbindung wieder herzustellen.

Tipps und Tricks

In unserer Wissensdatenbank finden Sie zahlreiche Tipps und Tricks zur Einrichtung und Nutzung des Viera Ultraschallgeräts und der Clarius Cloud.

www.clarius.com/faq

Unterstützte Geräte

Viera Ultraschallgeräte sind mit iOS- und Android-Geräten kompatibel. Eine Aufstellung der unterstützten Geräte finden Sie unter:

www.clarius.com/devices

Handbücher

Um ein kostenloses Exemplar des Benutzerhandbuchs für Viera Ultraschallgeräte zu erhalten oder wenn Sie Fragen zu den im Lieferumfang enthaltenen Teilen haben, kontaktieren Sie den Technischen Support von Hologic unter:

Technischer Support von Hologic

Support-Zentrum USA

+1-877-371-4372

+1-781-999-7750

BreastHealth.Support@hologic.com

Support-Zentrum Europa

+32 2 711 4545

BE-Techsupport@hologic.com

Support-Zentrum Australien

+1-800-264073

+612-9888-8000

anz.service@hologic.com

Hergestellt für:

Hologic, Inc.

Unternehmenszentrale

250 Campus Drive

Marlborough, MA 01752 USA

Telefon: +1.508.263.2900

www.hologic.com

Hergestellt von:

Clarius Mobile Health

350-3605 Gilmore Way

Burnaby, BC, V5G4X5, Kanada

hello@clarius.com

Telefon: +1.778.800.9975

www.clarius.com



Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Die folgenden beiden Bedingungen müssen für den Betrieb gegeben sein: (1) Dieses Gerät darf keine schädliche Störstrahlung verursachen und (2) muss alle empfangene Störstrahlung, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb hervorrufen, annehmen. Dieses Produkt hat elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) unter Bedingungen einschließlich der Verwendung von konformen Peripheriegeräten bewiesen. Es ist wichtig, dass Sie kompatible Peripheriegeräte verwenden, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass das Gerät die Funkkommunikation von Radios, Fernsehern und anderen elektronischen Geräten stört.



Technischer Support über:
Kontaktieren Sie den Technischen Support von Hologic



Die komplette Anleitung, ein Symbolverzeichnis und Sicherheitsinformationen finden Sie im Handbuch des Viera Ultraschallgeräts.