

# 3Dimensions™



**Przewodnik użytkownika**  
MAN-08951-3402 Wersja 002

**HOLOGIC®**



# 3Dimensions™

System mammografii cyfrowej

System tomosyntezy cyfrowej

## Przewodnik użytkownika

dot. oprogramowania w wersji 2.2.1

Numer części MAN-08951-3402

Wersja 002

Październik 2022

## **Wsparcie dla produktów**

USA: +1.877.371.4372  
Europa: +32 2 711 4690  
Azja: +852 37487700  
Australia: +1 800 264 073  
Wszystkie pozostałe: +1 781 999 7750  
E-mail: [BreastHealth.Support@hologic.com](mailto:BreastHealth.Support@hologic.com)

© 2022 Hologic, Inc. Wydrukowano w Stanach Zjednoczonych. Niniejszy podręcznik został pierwotnie napisany w języku angielskim.

Hologic, 3Dimensions, 3D, 3D Mammography, 3DQuorum, Affirm, C-View, Dimensions, FAST Paddle, Genius, Genius AI, Hologic Clarity HD, I-View, ImageChecker, Quantra, Selenia, SmartCurve, i powiązane logo są znakami towarowymi i / lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Hologic, Inc., i / lub jej filie w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe, zastrzeżone znaki towarowe i nazwy produktów są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Niniejszy produkt jest objęty jednym lub większą liczbą patentów bądź zgłoszeń patentowych wymienionych na stronie [www.Hologic.com/patent-information](http://www.Hologic.com/patent-information).

## Spis treści

Lista rycin .....	xi
Lista tabel .....	xv
<b>1: Wstęp .....</b>	<b>1</b>
1.1 Przeznaczenie .....	1
1.1.1 Przeznaczenie systemu 3Dimensions .....	1
1.1.2 Przeznaczenie urządzenia Genius AI Detection .....	2
1.1.3 Przeciwwskazania .....	2
1.2 Potencjalne działania niepożądane systemów mammografii na zdrowie ludzkie.....	2
1.3 Możliwości systemu .....	3
1.4 Informacje o badaniu Genius 3D Mammography.....	3
1.5 Więcej informacji o tomosyntezie .....	3
1.6 Informacje o technologiach obrazowania C-View i Intelligent 2D .....	5
1.6.1 Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące technologii obrazowania C-View i Intelligent 2D ....	5
1.6.2 Zasada działania technologii obrazowania C-View Intelligent 2D .....	6
1.7 Informacje o oprogramowaniu 3DQuorum .....	7
1.7.1 Ostrzeżenia i środki ostrożności dla oprogramowania 3DQuorum .....	7
1.7.2 Teoria działania oprogramowania 3DQuorum.....	8
1.8 Informacje o module Genius AI Detection.....	9
1.8.1 Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące modułu Genius AI Detection .....	10
1.9 Profile użytkowników .....	10
1.9.1 Technolog mammografii .....	10
1.9.2 Radiolog.....	10
1.9.3 Fizyk medyczny .....	10
1.10 Wymagania dotyczące szkoleń.....	11
1.11 Wymagania dotyczące kontroli jakości .....	11
1.12 Gdzie można znaleźć instrukcje instalacji.....	11
1.13 Gdzie można znaleźć opis techniczny .....	11
1.14 Oświadczenie dotyczące gwarancji.....	12
1.15 Wsparcie techniczne .....	12
1.16 Reklamacje dotyczące produktu.....	12
1.17 Oświadczenie firmy Hologic dotyczące cyberbezpieczeństwa.....	13
1.18 Symbole.....	13
1.19 Opisy ostrzeżeń, przestróg i uwag.....	17
1.20 Konwencje stosowane w dokumencie .....	17

<b>2: Informacje ogólne</b>	<b>19</b>
2.1 Przegląd systemu	19
2.1.1 Ramię C – przegląd informacji	20
2.2 Informacje o bezpieczeństwie	20
2.3 Ostrzeżenia i środki ostrożności	21
2.4 Wyłączniki awaryjne	25
2.5 Blokady	26
2.6 Zgodność z przepisami	26
2.6.1 Wymagania dotyczące zgodności z przepisami	26
2.6.2 Deklaracje zgodności z przepisami	28
<b>3: Elementy sterujące i wskaźniki w systemie</b>	<b>31</b>
3.1 Sterowanie zasilaniem systemu	31
3.2 Elementy sterowania i wskaźniki stanowiska lampy	32
3.2.1 Wyświetlacz głowicy lampy	33
3.2.2 Elementy sterujące i wyświetlacz urządzenia kompresyjnego	33
3.2.3 Panele sterowania ramieniem C	34
3.2.4 Panele sterowania gantry	34
3.2.5 Dwufunkcyjny przełącznik nożny	35
3.3 Elementy sterujące i wyświetlacze uniwersalnej stacji roboczej akwizycji	35
<b>4: Uruchamianie, testy funkcjonalne oraz wyłączanie</b>	<b>37</b>
4.1 Uruchamianie systemu	37
4.2 Logowanie	40
4.3 Wykonywanie testów funkcjonalnych	42
4.3.1 Testy funkcjonalne ucisku	43
4.3.2 Testy funkcjonalne ruchu ramienia C	44
4.3.3 Kolimacja	52
4.3.4 Przesuwanie płytek	53
4.4 Działanie wyłączników awaryjnych	54
4.5 Wyłączanie systemu	54
4.6 Odłączanie całego zasilania od systemu	54
<b>5: Interfejs użytkownika</b>	<b>55</b>
5.1 Ekran Select Function to Perform (Wybierz funkcję do wykonania)	55
5.2 Informacje o pasku zadań	57
5.3 Ekran Select Patient (Wybierz pacjenta)	60
5.3.1 Informacje o karcie Notices (Uwagi)	62
5.3.2 Otwieranie rekordu pacjenta	63
5.3.3 Dodawanie nowego pacjenta	63
5.3.4 Edycja informacji o pacjencie	64
5.3.5 Podział rekordów pacjentów	64
5.3.6 Usuwanie pacjenta	67
5.3.7 Filtry dla pacjentów	67

5.3.8	Odświeżanie listy roboczej.....	69
5.3.9	Zapytanie do listy roboczej .....	69
5.3.10	Admin (Administrator).....	70
5.3.11	Wylogowanie .....	70
5.3.12	Menedżer Advanced Workflow Manager .....	70
5.4	Ekran Procedure (Procedura).....	71
5.4.1	Użycie przycisku Implant Present (Obecny implant) .....	73
5.4.2	Korzystanie z funkcji przesuwania płytki.....	73
5.4.3	Okno dialogowe Procedure Information (Informacje o procedurze).....	74
5.4.4	Dodawanie procedury .....	77
5.4.5	Dodawanie (lub usuwanie) widoku .....	79
5.4.6	Edycja widoku .....	80
5.4.7	Pobierz .....	80
5.4.8	Zamykanie rekordu pacjenta .....	81
5.5	Uzyskiwanie dostępu do funkcji Image Review (Przegląd obrazu).....	82
5.6	Grupy wyjściowe .....	82
5.6.1	Wybór grupy wyjściowej.....	83
5.6.2	Dodawanie i edycja grupy wyjściowej .....	83
5.6.3	Grupy wyjściowe SmartSlices.....	84
5.6.4	Niestandardowa grupa wyjściowa .....	86
5.7	Urządzenia wyjściowe na żądanie .....	87
5.7.1	Archive (Archiwizuj) .....	87
5.7.2	Eksport .....	88
5.7.3	Drukuj .....	90
<b>6: Obrazowanie</b>		<b>93</b>
6.1	Ekran do wyświetlania obrazów .....	93
6.2	Ustawianie parametrów ekspozycji .....	94
6.2.1	Wybór trybu akwizycji obrazu (opcja tomosyntezy).....	94
6.2.2	Wybór trybu ekspozycji.....	94
6.2.3	Użytkowanie detektora AEC .....	94
6.3	Akwizycja obrazu .....	95
6.3.1	Sekwencja zdarzeń podczas obrazowania klasycznego.....	97
6.3.2	Sekwencja zdarzeń podczas obrazowania tomosyntezy .....	97
6.3.3	Akceptowanie odrzuconych obrazów .....	97
6.3.4	Akceptowanie lub odrzucanie obrazu oczekującego .....	97
6.3.5	Jasność linii skóry .....	98
6.4	Pozyskiwanie obrazu piersi z implantem .....	99
6.4.1	Implant oddalony od brodawki sutkowej.....	99
6.4.2	Implant w pobliżu brodawki sutkowej .....	100
6.4.3	Widoki przemieszczonego implantu .....	102
6.4.4	Jasność implantu.....	103
6.5	Korygowanie i ponowne przetwarzanie obrazów implantów .....	104
6.5.1	Jeśli obraz nie jest zaakceptowany .....	104
6.5.2	Jeśli obraz jest zaakceptowany .....	104

# Przewodnik użytkownika systemu 3Dimensions

## Spis treści

---

6.6	Przeglądanie obrazów .....	105
6.6.1	Karta narzędzi do przeglądu obrazów .....	106
6.6.2	Karta Notices (Uwagi).....	107
6.6.3	Inne narzędzia do przeglądu obrazów .....	108
6.6.4	Wskaźnik projekcji .....	109
6.6.5	Wskaźnik warstw .....	109
6.7	Wysyłanie obrazów do urządzeń wyjściowych .....	109
6.8	Obrazy I-View 2D wzmocnione kontrastem.....	110
6.8.1	Wskaźnik obciążenia lampy.....	114
6.8.2	Konfiguracja ustawień kontrastu .....	115
6.9	Obrazy próbek.....	116
<b>7: Akcesoria</b> .....		<b>119</b>
7.1	Instalowanie akcesoriów na ramieniu C.....	119
7.2	Oslony twarzy pacjentki .....	120
7.2.1	Instalacja i demontaż chowanej osłony twarzy .....	120
7.2.2	Użytkowanie chowanej osłony twarzy.....	121
7.2.3	Instalacja i demontaż klasycznej osłony twarzy.....	122
7.3	Płytki kompresyjne .....	122
7.3.1	Płytki do rutynowych badań przesiewowych.....	124
7.3.2	Kontaktowe i punktowe płytki kompresyjne .....	125
7.3.3	Płytki do powiększeń.....	125
7.3.4	Płytki lokalizacyjne.....	126
7.3.5	Duża płytka do ultradźwięków .....	126
7.3.6	Instalowanie i demontaż płytki kompresyjnej.....	127
7.3.7	Konserwacja i czyszczenie płytek.....	128
7.3.8	Przesuwanie płytki .....	128
7.3.9	Tryb kompresji FAST .....	128
7.4	Statyw do powiększeń .....	130
7.4.1	Instalacja i demontaż statywu do powiększeń .....	130
7.5	Urządzenia celownicze .....	132
7.5.1	Instalacja i demontaż lokalizacyjnego urządzenia celowniczego .....	132
7.5.2	Korzystanie z lokalizacyjnego urządzenia celowniczego .....	133
7.5.3	Instalacja i demontaż urządzenia celowniczego do powiększeń.....	133
7.5.4	Wyrównanie urządzenia celowniczego.....	134
<b>8: Procedury kliniczne</b> .....		<b>135</b>
8.1	Procedura standardowa.....	135
8.1.1	Przygotowanie .....	135
8.1.2	Przy gantry .....	135
8.1.3	Przy stacji roboczej akwizycji.....	136
8.2	Przykład procedury przesiewowej.....	136
8.2.1	Pozycjonowanie pacjentki .....	137
8.2.2	Ustawianie technik ekspozycji.....	137
8.2.3	Akwizycja ekspozycji.....	138
8.3	Procedura lokalizacji igły przy użyciu tomosyntezy .....	139



<b>9: Konserwacja i czyszczenie</b>	<b>143</b>
9.1 Czyszczenie .....	143
9.1.1 Informacje ogólne o czyszczeniu .....	143
9.1.2 Czyszczenie ogólne .....	143
9.1.3 Aby zapobiec ewentualnym obrażeniom ciała i uszkodzeniom sprzętu .....	144
9.1.4 Stacja robocza akwizycji .....	145
9.2 Konserwacja.....	146
9.2.1 Harmonogramy konserwacji zapobiegawczej.....	146
9.2.2 Informacje o odzyskiwaniu miejsca na dysku.....	148
<b>10: Interfejs administracyjny systemu</b>	<b>149</b>
10.1 Ekran Admin (Administrator) .....	149
10.2 Ekran About (Informacje) .....	152
10.2.1 Karta Licensing (Licencje) .....	153
10.3 Zmiana preferencji dotyczących języka użytkownika.....	154
10.4 Konfigurowanie automatycznego zawieszania i automatycznego parowania.....	155
10.5 Ustawianie kart z wieloma wierszami procedur.....	156
10.6 Aktywacja i ustawianie pamięci wysokości.....	157
10.7 Aktywacja opcji domyślnej wysokości i ustawienie domyślnej wysokości.....	159
10.8 Ustawianie automatycznej akceptacji i automatycznego zawieszania obrazów .....	162
10.9 Ustawianie wartości domyślnych kontrastu.....	163
10.10 Ustawianie preferencji modułu Genius AI Detection.....	164
10.11 System Tools (Narzędzia systemu) .....	166
10.11.1 Narzędzia systemowe dla menedżera w roli technologa radiologicznego .....	166
10.11.2 Dostęp zdalny do raportów dotyczących obrazów .....	168
10.12 Narzędzie archiwizacji.....	171
<b>Załącznik A: Specyfikacje</b>	<b>175</b>
A.1 Wymiary produktu.....	175
A.1.1 Stanowisko lampy (gantry i ramię C).....	175
A.1.2 Stacje robocze akwizycji .....	176
A.2 Warunki eksploatacji i przechowywania .....	178
A.2.1 Ogólne warunki eksploatacji .....	178
A.2.2 Warunki otoczenia podczas przechowywania.....	178
A.3 Osłona antyradiacyjna.....	178
A.4 Wejściowe parametry elektryczne.....	179
A.4.1 Statyw lampy .....	179
A.4.2 Stacja robocza akwizycji .....	179
A.5 Dane techniczne statywu lampy.....	180
A.5.1 Ramię C.....	180
A.5.2 Kompresja.....	181
A.5.3 Lampa RTG .....	182
A.5.4 Filtracja i wyjście wiązki RTG.....	182
A.5.5 Kolimator RTG.....	184
A.5.6 Wskazanie pola świetlnego.....	184
A.5.7 Generator promieniowania RTG.....	184

# Przewodnik użytkownika systemu 3Dimensions

## Spis treści

---

A.6	Dane techniczne systemu obrazowania .....	185
A.6.1	Detektor obrazu .....	185
<b>Załącznik B: Komunikaty systemowe i komunikaty alertów</b> .....		<b>187</b>
B.1	Przywracanie sprawności po błędzie i rozwiązywanie problemów .....	187
B.2	Typy komunikatów .....	187
B.2.1	Poziomy usterek .....	187
B.2.2	Komunikaty systemowe .....	188
B.3	Komunikaty zasilacza UPS .....	190
<b>Załącznik C: Użytkowanie systemu mobilnego</b> .....		<b>191</b>
C.1	Warunki bezpieczeństwa i inne środki ostrożności .....	191
C.2	Dane techniczne dotyczące zastosowania mobilnego .....	192
C.2.1	Limity wstrząsów i wibracji .....	192
C.2.2	Otoczenie pojazdu .....	192
C.3	Wejściowe parametry elektryczne .....	193
C.3.1	Gantry .....	193
C.3.2	Stacja robocza akwizycji .....	193
C.4	Przygotowanie systemu do transportu .....	194
C.5	Przygotowanie systemu do użytkowania .....	196
C.6	Testowanie systemu po przewozie .....	197
C.6.1	Testy elementów sterujących i funkcjonalne systemu mobilnego .....	197
C.6.2	Kontrola jakości dla systemów mobilnych .....	197
<b>Załącznik D: Informacje o dawce</b> .....		<b>199</b>
D.1	Tabele dawek EUREF .....	199
D.2	Tabela CNR EUREF .....	200
<b>Glosariusz terminów</b> .....		<b>201</b>
<b>Indeks</b> .....		<b>203</b>

## Lista rycin

Rycina 1: System 3Dimensions™ .....	19
Rycina 2: Ramię C — przegląd informacji .....	20
Rycina 3: Działanie wyłącznika awaryjnego.....	25
Rycina 4: Sterowanie zasilaniem systemu .....	31
Rycina 5: Elementy sterowania i wskaźniki stanowiska lampy .....	32
Rycina 6: Wyświetlacz głowicy lampy .....	33
Rycina 7: Urządzenie kompresyjne .....	33
Rycina 8: Wyświetlacz urządzenia kompresyjnego.....	33
Rycina 9: Panel sterowania ramieniem C .....	34
Rycina 10: Panel sterowania gantry .....	34
Rycina 11: Dwufunkcyjny przełącznik nożny .....	35
Rycina 12: Elementy sterujące i wyświetlacze uniwersalnej stacji roboczej akwizycji .....	36
Rycina 13: Obrócić, aby zresetować wyłączniki awaryjne.....	37
Rycina 14: Przyciski zasilania uniwersalnej stacji roboczej akwizycji.....	37
Rycina 15: Ekran logowania do systemu Windows 10.....	38
Rycina 16: Ekran startowy .....	39
Rycina 17: Ekran logowania do systemu.....	40
Rycina 18: Panel sterowania ramienia C (widok z lewej) .....	42
Rycina 19: Działanie wyłącznika awaryjnego.....	54
Rycina 20: Przyciski zasilania uniwersalnej stacji roboczej akwizycji.....	54
Rycina 21: Przykładowy ekran wyboru funkcji do wykonania .....	55
Rycina 22: Pasek zadań .....	57
Rycina 23: Ekran Select Patient (Wybierz pacjenta).....	60
Rycina 24: Karta Enterprise (Placówka) .....	61
Rycina 25: Ekran Add Patient (Dodaj pacjenta) .....	63
Rycina 26: Ekran Split Patient Records (Rozdziel kartotekę pacjenta).....	64
Rycina 27: Wybór właściwej procedury w celu rozdzielania kartoteki pacjenta .....	66
Rycina 28: Karta Filter (Filtr) na ekranie Patient Filter (Filtr pacjentów) .....	67
Rycina 29: Ekran Procedure (Procedura).....	71
Rycina 30: Przyciski przesuwania płytki.....	73
Rycina 31: Okno dialogowe Procedure Info (Informacje o procedurze).....	74
Rycina 32: Karta Genius AI Detection.....	76
Rycina 33: Okno dialogowe Add Procedure (Dodaj procedurę) .....	77
Rycina 34: Ekran Add View (Dodaj widok).....	79
Rycina 35: Ekran Edit View (Edytuj widok) .....	80
Rycina 36: Pole Output Groups (Grupy wyjściowe).....	83
Rycina 37: Przykład ustawień urządzenia wyjściowego.....	85
Rycina 38: Przykład niestandardowej grupy wyjściowej.....	86
Rycina 39: Wybór obrazów do eksportu .....	88
Rycina 40: Okno dialogowe Export (Eksportuj) .....	89
Rycina 41: Ekran Print (Drukuj).....	90
Rycina 42: Ekran do wyświetlania obrazów (pokazana opcja SmartSlices) .....	93

# Przewodnik użytkownika systemu 3Dimensions

## Spis treści

---

Rycina 43: Ekspozycja w toku .....	95
Rycina 44: Ekspozycja zakończona .....	95
Rycina 45: Obrazy oznaczone różnymi symbolami w procedurze.....	96
Rycina 46: Porównanie jasności standardowej i zmniejszonej .....	98
Rycina 47: Porównanie jasności standardowej i zmniejszonej .....	103
Rycina 48: Karta Tools (Narzędzia) (pokazana opcja Tomosynthesis (Tomosynteza)) .....	105
Rycina 49: Narzędzia do przeglądu obrazów .....	106
Rycina 50: Narzędzia na karcie Notices (Uwagi) .....	107
Rycina 51: Wskaźnik ekspozycji .....	108
Rycina 52: Tryby wyświetlania .....	108
Rycina 53: Wskaźnik projekcji.....	109
Rycina 54: Wskaźnik warstw (pokazana opcja SmartSlices) .....	109
Rycina 55: Ekran I-View 2D Contrast (Widok I-View z kontrastem 2D) .....	110
Rycina 56: Ekran I-View 2D Contrast (Widok I-View z kontrastem 2D), okres oczekiwania.....	111
Rycina 57: Ekran I-View 2D Contrast (Widok I-View z kontrastem 2D), okres optymalnego obrazowania....	112
Rycina 58: Ustawienia kontrastu 2D I-View .....	115
Rycina 59: Ekran procedury dla próbek .....	116
Rycina 60: Ekran obrazowania próbek .....	117
Rycina 61: Akcesoria ramienia C .....	119
Rycina 62: Wyrównanie chowanej osłony twarzy na ramieniu C .....	120
Rycina 63: Instalacja osłony twarzy.....	121
Rycina 64: Obsługa osłony twarzy .....	121
Rycina 65: Instalacja klasycznej osłony twarzy.....	122
Rycina 66: Instalacja płytki kompresyjnej.....	127
Rycina 67: Demontaż płytki kompresyjnej.....	127
Rycina 68: Suwak trybu kompresji FAST .....	129
Rycina 69: Instalacja statywu do powiększeń.....	130
Rycina 70: Instalacja lokalizacyjnego urządzenia celowniczego .....	132
Rycina 71: Instalacja i demontaż urządzenia celowniczego do powiększeń .....	133
Rycina 72: Przykład ekranu procedury przesiewowej .....	136
Rycina 73: Ekspozycja w toku.....	138
Rycina 74: Ekspozycja zakończona .....	139
Rycina 75: Obliczanie głębokości igły .....	141
Rycina 76: Ekran Admin (Administrator) .....	149
Rycina 77: Karta System (System) ekranu About (Informacje) (o stacji roboczej akwizycji).....	152
Rycina 78: Karta Licensing (Licencje) ekranu About (Informacje).....	153
Rycina 79: Włączanie automatycznego zawieszania i automatycznego parowania .....	155
Rycina 80: Włączenie opcji kart z wieloma wierszami procedur .....	156
Rycina 81: Przycisk My Settings (Moje ustawienia) na ekranie Admin (Administrator) .....	157
Rycina 82: Karta Console (Konsola) ekranu Edit Operator (Edytuj operatora) .....	157
Rycina 83: Panel sterowania wysokością.....	158
Rycina 84: Pola Desired Console Height (Żądana wysokość konsoli) i Current Console Height (Bieżąca wysokość konsoli).....	158
Rycina 85: Przycisk Preferences (Preferencje) na ekranie Admin (Administrator) .....	159
Rycina 86: Karta Console (Konsola) ekranu System Preferences (Preferencje systemu) .....	160

---

Rycina 87: Panel sterowania wysokością.....	160
Rycina 88: Pola Desired Console Height (Żądana wysokość konsoli) i Current Console Height (Bieżąca wysokość konsoli).....	161
Rycina 89: Ustawianie automatycznej dyspozycji dla obrazu.....	162
Rycina 90: Ustawienia domyślne kontrastu 2D w widoku I-View .....	163
Rycina 91: Automatyczny wybór dla przetwarzania przypadków w module Genius AI.....	164
Rycina 92: Automatyczny wybór dla przetwarzania przypadków w module Genius AI.....	164
Rycina 93: Wybór użytkownika do przetwarzania przypadku w module Genius AI .....	165
Rycina 94: Przycisk System Tools (Narzędzia systemowe).....	166
Rycina 95: Ekran System Tools (Narzędzia systemowe).....	166
Rycina 96: Ekran System Tools Login (Logowanie do narzędzi systemowych).....	168
Rycina 97: Ekran System Tools Welcome (Witamy w narzędziach systemowych) .....	169
Rycina 98: Parametry Create Image Report (Utwórz raport dot. obrazu).....	169
Rycina 99: Pobieranie raportu dotyczącego obrazu.....	170
Rycina 100: Przycisk Archive (Archiwizuj).....	171
Rycina 101: Ekran Multi Patient On Demand Archive (Archiwum wielu pacjentów na żądanie).....	171
Rycina 102: Ekran Export (Eksport) .....	173
Rycina 103: Wymiary stanowiska lampy (gantry i ramię C) .....	175
Rycina 104: Wymiary uniwersalnej stacji roboczej akwizycji.....	176
Rycina 105: Wymiary uniwersalnej stacji roboczej akwizycji do użytku mobilnego.....	177
Rycina 106: Wyświetlacz LCD zasilacza UPS .....	190
Rycina 107: Pokrętło blokady stolika na klawiaturę (prawa lub lewa strona).....	194
Rycina 108: Zwolnienie blokady stolika z pozycji zablokowanej (A) do odblokowanej (D) .....	194
Rycina 109: Pokrętła blokady monitora obrotowego na mobilnej uniwersalnej stacji roboczej akwizycji (seria I) ..	195
Rycina 110: Pokrętła blokady monitora obrotowego na mobilnej uniwersalnej stacji roboczej akwizycji (seria II) ..	195
Rycina 111: Zwolnienie blokady stolika z pozycji zablokowanej (A) do odblokowanej (D) .....	196
Rycina 112: Pokrętła blokady monitora obrotowego na mobilnej uniwersalnej stacji roboczej akwizycji (seria I) ..	196
Rycina 113: Pokrętła blokady monitora obrotowego na mobilnej uniwersalnej stacji roboczej akwizycji (seria II) ..	196



## Lista tabel

Tabela 1: Testy ucisku .....	43
Tabela 2: Ruch ramienia C w górę i w dół.....	44
Tabela 3: Obrót ramienia C w lewo.....	46
Tabela 4: Obrót ramienia C w prawo.....	47
Tabela 5: Przełącznik obrotu ramienia C.....	48
Tabela 6: Automatyczny obrót ramienia C w lewo.....	49
Tabela 7: Automatyczny obrót ramienia C w prawo.....	50
Tabela 8: Automatyczny obrót przy projekcji MLO .....	51
Tabela 9: Kolimacja ramienia C .....	52
Tabela 10: Przesuwanie płytki .....	53
Tabela 11: Menu paska zadań.....	57
Tabela 12: Ekran Select Patient (Wybierz pacjenta) .....	61
Tabela 13: Opcje na karcie Filter (Filtr) (wymagają praw dostępu) .....	68
Tabela 14: Ekran Procedure (Procedura).....	72
Tabela 15: Grupy procedur.....	78
Tabela 16: Grupy wyjściowe dla oprogramowania 3DQuorum .....	84
Tabela 17: Ustawienia urządzenia wyjściowego dla oprogramowania 3DQuorum.....	85
Tabela 18: Konwencjonalne obrazowanie 2D .....	101
Tabela 19: Obrazowanie z tomosyntezą .....	101
Tabela 20: Obrazowanie wzmocnione kontrastem (I-View).....	101
Tabela 21: Dostępne akcesoria .....	123
Tabela 22: Konserwacja zapobiegawcza wykonywana przez użytkownika.....	146
Tabela 23: Konserwacja zapobiegawcza wykonywanej przez inżyniera serwisu.....	147
Tabela 24: Funkcje ekranu Admin (Administrator).....	150
Tabela 25: Menedżer w roli technologa radiologicznego – funkcje narzędzi systemowych.....	167
Tabela 26: Maksymalne ustawienie mA w funkcji kV.....	182
Tabela 27: Komunikaty systemowe.....	188
Tabela 28: Dawka 2D (EUREF) .....	199
Tabela 29: Dawka BT (EUREF).....	199
Tabela 30: Dawka CEDM (EUREF) .....	200





## Rozdział 1 Wstęp

Przed rozpoczęciem użytkowania systemu należy przeczytać wszystkie podane informacje. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich ostrzeżeń i środków ostrożności wskazanych w niniejszym podręczniku. Niniejszy podręcznik należy zachować, aby zapewnić jego dostępność podczas wykonywania procedur. Lekarze powinni informować pacjentów o wszystkich opisanych w niniejszym podręczniku zagrożeniach i zdarzeniach niepożądanych, które dotyczą działania systemu.



### Uwaga

Firma Hologic konfiguruje niektóre systemy w taki sposób, aby spełniały konkretne wymagania. Konkretny system może nie zawierać niektórych opcji i akcesoriów opisanych w niniejszym podręczniku.



### Uwaga

Funkcje przedstawione w niniejszej instrukcji mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W celu uzyskania informacji należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Hologic.

## 1.1 Przeznaczenie

R<sub>x</sub>Only

Przeostrogę: Prawo federalne w Stanach Zjednoczonych zezwala na sprzedaż niniejszego wyrobu wyłącznie lekarzowi lub na zlecenie lekarza.

### 1.1.1 Przeznaczenie systemu 3Dimensions

System 3Dimensions™ firmy Hologic® generuje cyfrowe obrazy mammograficzne, które mogą być wykorzystywane do badań przesiewowych i diagnostyki raka piersi. System 3Dimensions (2D lub 3D) jest przeznaczony do tych samych zastosowań klinicznych co system mammograficzny 2D do mammograficznych badań przesiewowych. W szczególności system 3Dimensions może być wykorzystywany do generowania cyfrowych mammogramów 2D i mammogramów 3D. Każde badanie przesiewowe może składać się z:

- zestawu obrazów 2D FFDM lub
- zestawu obrazów 2D i 3D, gdzie obraz 2D może być albo zestawem FFDM, albo obrazem 2D wygenerowanym z zestawu obrazów 3D, a obraz 3D można wyświetlać jako przekroje 3D 1-mm lub SmartSlices 3D 6-mm.

Ponadto system 3Dimensions może być używany do dodatkowej diagnostyki piersi.



### Uwaga

W Kanadzie i Singapurze tomosynteza nie jest zatwierdzona do badań przesiewowych i musi być stosowana w połączeniu z obrazem 2D (obrazem FFDM lub obrazem 2D wygenerowanym z zestawu obrazów 3D).

### **Mammografia cyfrowa ze wzmocnieniem kontrastowym**

Mammografia cyfrowa ze wzmocnieniem kontrastowym (CEDM) stanowi rozszerzenie istniejących wskazań do mammografii diagnostycznej z użyciem systemu 3Dimensions. Aplikacja CEDM umożliwia obrazowanie piersi ze wzmocnieniem kontrastowym przy użyciu techniki podwójnej energii. Ta technika obrazowania może być stosowana jako pomocnicza po wykonaniu mammografii i (lub) badaniu USG w celu zlokalizowania zmiany stwierdzonej lub podejrzewanej.

### **1.1.2 Przeznaczenie urządzenia Genius AI Detection**

Genius AI™ Detection jest wspomaganym komputerowo urządzeniem programowym do wspomaganego komputerowo wykrywania i diagnostyki (CADe/CADx), przeznaczonym do użytku ze zgodnymi cyfrowymi systemami do badań piersi z tomosyntezą (DBT) w celu identyfikacji i oznaczania regionów zainteresowania, w tym zagęszczeń tkanki miękkiej (masy, zaburzenia struktury i asymetrii) oraz zwapnień w czasie odczytu wyników badań DBT ze zgodnych systemów DBT i podawania wyników pewności, które umożliwiają ocenę pewności ustaleń i ocenę przypadku. Zadaniem urządzenia jest ułatwienie interpretacji wyników badań piersi z tomosyntezą w sposób jednoczesny, gdy lekarz interpretujący potwierdza lub odrzuca wyniki w czasie odczytu badania.

### **1.1.3 Przeciwwskazania**

Brak znanych przeciwwskazań.

## **1.2 Potencjalne działania niepożądane systemów mammografii na zdrowie ludzkie**

Poniższa lista zawiera potencjalne działania niepożądane (takie jak powikłania) skojarzone z użyciem tego urządzenia (te zagrożenia są takie same, jak dotyczące innych systemów mammografii z detektorem filmowym lub systemów mammografii cyfrowej):

- nadmierna kompresja piersi;
- nadmierne narażenie na promieniowanie RTG;
- porażenie prądem;
- zakażenie;
- podrażnienia, otarcia skóry lub rany klute.

### 1.3 Możliwości systemu

System udostępnia interfejsy użytkownika przeznaczone do wykonywania mammogramów przesiewowych i diagnostycznych:

- Mammografia klasyczna z cyfrowym detektorem obrazu równoważna pod względem rozmiaru do dużej kliszy do zdjęć mammograficznych.
- Skan tomosyntezy z cyfrowym detektorem obrazu równoważny pod względem rozmiaru do dużej kliszy do zdjęć mammograficznych (opcja tomosyntezy).
- Klasyczny mammogram cyfrowy i skan tomosyntezy podczas jednej kompresji (opcja tomosyntezy).

### 1.4 Informacje o badaniu Genius 3D Mammography

Badanie Genius® 3D Mammography™ (nazywane również badaniem Genius®) jest wykonywane w systemie Hologic® 3D Mammography™ i obejmuje zestaw obrazów 2D oraz 3D™. Obraz 2D może być zarejestrowanym obrazem 2D lub obrazem 2D wygenerowanym z zestawu obrazów 3D™. Badanie Genius® jest dostępne tylko w systemie Hologic® 3D Mammography™.

Genius® 3D Mammography™ jest nazwą marki badania Hologic® 3D Mammography™, które na niektórych rynkach może być niedostępne.

### 1.5 Więcej informacji o tomosyntezie

11 lutego 2011 roku (patrz PMA numer P080003) agencja FDA wydała zgodę na opcję tomosyntezy Hologic dla systemu Hologic Selenia Dimensions. To dopuszczenie wydane przez agencję FDA dotyczy zarówno obrazowania przesiewowego, jak i diagnostycznego. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej agencji FDA pod adresem <http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpma/pma.cfm?id=P080003>.

16 maja 2013 roku (patrz PMA numer P080003 S001) agencja FDA wydała zgodę na opcję Generated 2D (Generowanie 2D) (C-View) w połączeniu z tomosyntezą. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej agencji FDA pod adresem <http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpma/pma.cfm?id=P080003S001>.

Lista publikacji naukowych dotyczących tomosyntezy piersi jest dostępna ze strony internetowej firmy Hologic. Większość badań przeprowadzono przy użyciu systemu tomosyntezy Hologic Selenia Dimensions dopuszczonego do obrotu komercyjnego. Informacje zawiera publikacja dostępna pod adresem <http://www.hologic.com/sites/default/files/Tomo-Bibliography-Rev-13.pdf>.

W witrynie firmy Hologic dostępnych jest kilka raportów oraz podsumowań dotyczących publikacji na temat obrazowania piersi. Zapoznaj się z dokumentami na stronie <http://www.hologic.com/en/learning-center/white-papers/breastimaging/>.

Autorzy niezależnych publikacji badali systemy tomosyntezy Hologic Selenia Dimensions w ramach sekwencyjnych populacyjnych badaniach przesiewowych prowadzonych w Europie. Wyniki spólnie pokazują znaczny wzrost współczynnika wykrywalności raka inwazyjnego z jednoczesnym spadkiem wynikiem fałszywie dodatnich. Zalecane są następujące publikacje:

**Integration of 3D digital mammography with tomosynthesis for population breast-cancer screening (STORM): a prospective comparison study.**

Ciatto S, Houssami N, Bernardi D, Caumo F, Pellegrini M, Brunelli S, Tuttobene P, Bricolo P, Fantò C, Valentini M, Montemezzi S, Macaskill P.

Lancet Oncol. 2013 Jun;14(7):583-9. doi: 10.1016/S1470-2045(13)70134-7. Epub 2013 Apr 25.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23623721>

**Prospective trial comparing full-field digital mammography (FFDM) versus combined FFDM and tomosynthesis in a population-based screening programme using independent double reading with arbitration.**

Skaane P, Bandos AI, Gullien R, Eben EB, Ekseth U, Haakenaasen U, Izadi M, Jebsen IN, Jahr G, Krager M, Hofvind S.

Eur Radiol. 2013 Aug;23(8):2061-71. doi: 10.1007/s00330-013-2820-3. Epub 2013 Apr 4.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23553585>

**Comparison of digital mammography alone and digital mammography plus tomosynthesis in a population-based screening program.**

Skaane P, Bandos AI, Gullien R, Eben EB, Ekseth U, Haakenaasen U, Izadi M, Jebsen IN, Jahr G, Krager M, Niklason LT, Hofvind S, Gur D.

Radiology. 2013 Apr;267(1):47-56. doi: 10.1148/radiol.12121373. Epub 2013 Jan 7.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23297332>

**Two-view digital breast tomosynthesis screening with synthetically reconstructed projection images: comparison with digital breast tomosynthesis with full-field digital mammographic images.**

Skaane P, Bandos AI, Eben EB, Jebsen IN, Krager M, Haakenaasen U, Ekseth U, Izadi M, Hofvind S, Gullien R.

Radiology. 2014 Jun;271(3):655-63. doi: 10.1148/radiol.13131391. Epub 2014 Jan 24

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24484063>

**Breast Cancer Screening Using Tomosynthesis in Combination With Digital Mammography**

Sarah M. Friedewald, MD1; Elizabeth A. Rafferty, MD2; Stephen L. Rose, MD3,4; Melissa A. Durand, MD5; Donna M. Plecha, MD6; Julianne S. Greenberg, MD7; Mary K. Hayes, MD8; Debra S. Copit, MD9; Kara L. Carlson, MD10; Thomas M. Cink, MD11; Lora D. Barke, DO12; Linda N. Greer, MD13; Dave P. Miller, MS14; Emily F. Conant, MD15

JAMA. 2014;311(24):2499-2507. doi:10.1001/jama.2014.6095

<http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1883018>

**WAŻNE:**

Firma Hologic zdecydowanie zaleca użytkownikom zapoznanie się z przepisami lokalnymi lub regionalnymi. Te przepisy mogą nakładać ograniczenia dotyczące różnych typów zastosowań klinicznych. W miarę upływu czasu takie przepisy mogą być rozwijane i zmieniane, dlatego zalecane jest okresowe sprawdzanie tych przepisów.

## 1.6 Informacje o technologiach obrazowania C-View i Intelligent 2D

**Uwaga**

Technologia obrazowania Intelligent 2D™ może nie być dostępna we wszystkich regionach. W celu uzyskania informacji należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.

Oprogramowanie C-View™ i Intelligent 2D™ wykorzystuje dane obrazowe dostępne po akwizycji tomosyntezy piersi celem wygenerowania jednego mammogramu cyfrowego (2D) na akwizycję tomosyntezy piersi. Zsyntetyzowany obraz 2D jest tworzony bez konieczności dodatkowej ekspozycji celem wykonania mammografii cyfrowej. Zsyntetyzowany obraz 2D wygląda podobnie i ma takie samo przeznaczenie, jak cyfrowy mammogram (2D), gdy jest używany jako część badania przesiewowego wykorzystującego tomosyntezę. Obraz z oprogramowania C-View lub Intelligent 2D jest interpretowany razem z zestawem obrazów z tomosyntezy piersi, a w przypadku podejmowania decyzji klinicznej lub diagnozowania nie jest przeznaczony do użytku bez towarzyszących obrazów z tomosyntezy piersi.

### 1.6.1 Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące technologii obrazowania C-View i Intelligent 2D

**Ostrzeżenie:**

**Nie należy podejmować decyzji klinicznej ani diagnozować na podstawie obrazów z oprogramowania C-View lub Intelligent 2D bez zapoznawania się z towarzyszącym zestawem obrazów z tomosyntezy.**

Obrazy 2D zsyntetyzowane w oprogramowaniu C-View lub Intelligent 2D muszą być używane w taki sam sposób, w jaki używana jest klasyczna mammografia cyfrowa (2D) w ramach badania przesiewowego z wykorzystaniem tomosyntezy.

- Podczas przeglądania obrazów z oprogramowania C-View lub Intelligent 2D pod kątem punktów lub obszarów zainteresowania należy porównywać je z wcześniejszym mammogramem cyfrowym (2D), o ile wcześniejsze badania istnieją, a ponadto uważnie przeglądać powiązane obrazy z tomosyntezy.
- Przed podjęciem decyzji klinicznej należy uważnie przeanalizować cały zestaw obrazów z tomosyntezy.



### **Ostrzeżenie:**

**Zsyntetyzowany obraz 2D z oprogramowania C-View lub Intelligent 2D może wyglądać inaczej niż obraz z klasycznej mammografii cyfrowej (2D), podobnie jak różnić się mogą obrazy 2D na kliszy i obrazy z mammografii cyfrowej (2D) pochodzące od różnych dostawców.**

---

Użytkownicy powinni upewnić się, że są odpowiednio przeszkoleni i znają wygląd zsyntetyzowanych obrazów 2D z oprogramowania C-View lub Intelligent 2D przed użyciem ich w połączeniu z zestawami obrazów z tomosyntezy.

## **1.6.2 Zasada działania technologii obrazowania C-View Intelligent 2D**

### **Przegląd**

Oprogramowanie C-View i Intelligent 2D to aplikacja do przetwarzania obrazów przeznaczona do końcowego przetwarzania danych pikseli z danych tomosyntezy zarejestrowanych na systemie obrazowania tomosyntezy Hologic do postaci obrazu z mammografii cyfrowej (2D). Zsyntetyzowany obraz 2D z oprogramowania C-View lub Intelligent 2D może być używany zamiast mammogramu cyfrowego (2D) w ramach badania przesiewowego wykorzystującego tomosyntezę.

Oprogramowanie C-View i Intelligent 2D przetwarza dane tomosyntezy, aby generować obrazy 2D, które wyglądają podobnie i mają takie samo przeznaczenie, jak cyfrowy mammogram (2D), gdy są używane jako części badania przesiewowego wykorzystującego tomosyntezę.

### **Konfiguracja**

W oprogramowaniu C-View ani Intelligent 2D nie są dostępne żadne konfigurowane przez użytkownika ustawienia, które wpływają na wygląd wynikowych zsyntetyzowanych obrazów 2D. Obrazy z oprogramowania C-View i Intelligent 2D są generowane w formacie obrazu DICOM Breast Tomosynthesis Image, jako pojedyncza gruba warstwa lub w formacie obiektu DICOM Digital Mammography X-Ray Image. Administrator systemu PACS w placówce, konsultując się z inżynierami ds. opcji połączeń z firmy Hologic, może wybrać format wyjściowy najbardziej odpowiedni dla infrastruktury i stacji roboczych IT, jakie są dostępne w placówce. Każdy nagłówek DICOM obrazu z oprogramowania C-View lub Intelligent 2D zawiera informacje wymagane do odróżnienia takiego obrazu od jakichkolwiek towarzyszących klasycznych obrazów 2D lub zestawów obrazów tomosyntezy w tym samym widoku. Ponadto w pikselach zsyntetyzowanego obrazu 2D jest zapisywana adnotacja („C-View” lub „Intelligent 2D”).

### **Procedura**

Podobnie jak przy każdym badaniu obrazowym technolog wybiera pacjenta oraz wskazuje typ procedury obrazowania, która zostanie wykonana. W przypadku badania obejmującego obrazy z oprogramowania C-View lub Intelligent 2D wymagane jest tylko obrazowanie pacjenta oraz zakończenie badania. Oprogramowanie C-View i Intelligent 2D działa samoczynnie i nie wymaga bezpośredniej interwencji ze strony człowieka.

## 1.7 Informacje o oprogramowaniu 3DQuorum



### Uwaga

Technologia obrazowania 3DQuorum® może nie być dostępna we wszystkich regionach. W celu uzyskania informacji należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.

Oprogramowanie 3DQuorum® wykorzystuje dane obrazowe dostępne z pozyskiwanej tomosyntezy piersi w wysokiej rozdzielczości, aby wygenerować SmartSlices, czyli „warstwowe” obrazy 3D. Obrazy SmartSlices są tworzone bez konieczności dodatkowej ekspozycji celem wykonania tomosyntezy cyfrowej. Obraz SmartSlice można postrzegać jako „grubą” wersję warstwy z tomosyntezy, która odpowiada sześciu warstwom (6 mm) z oryginalnej rekonstrukcji tomosyntezy. Obraz SmartSlice składa się z sekwencyjnie syntetyzowanych warstw. Każdy obraz SmartSlice współdzieli połowę zawartości z poprzednim obrazem SmartSlice, a drugą połowę z następnym obrazem SmartSlice. W związku z tym, podczas przeglądania obrazy SmartSlice są przesuwane do przodu o trzy 1-milimetrowe warstwy z tomosyntezy. Wynikająca z tego liczba obrazów do przeglądu przez radiologa jest o jedną trzecią mniejsza niż w przypadku zestawu obrazów 1-milimetrowych z tomosyntezy.

Obrazy SmartSlice zaprojektowano w celu skrócenia całkowitego czasu interpretacji tomosyntezy przesiewowej, zmniejszając łączną liczbę obrazów przeglądanych przez radiologa. Obrazy SmartSlice nie są przeznaczone do wykorzystania bez zsintetyzowanych obrazów 2D w celu podjęcia decyzji klinicznej lub postawienia diagnozy.

### 1.7.1 Ostrzeżenia i środki ostrożności dla oprogramowania 3DQuorum



#### Ostrzeżenie:

**Nie należy podejmować decyzji klinicznej ani diagnozować na podstawie obrazów SmartSlice bez zapoznania się z towarzyszącym zestawem obrazów zsintetyzowanych 2D.**

Używać obrazów SmartSlices w taki sam sposób jak warstw 3D 1-milimetrowych (lub warstw zrekonstruowanych po tomosyntezie) podczas zapoznawania się z przesiewowym badaniem tomosyntezy. Użytkownicy powinni upewnić się, że są odpowiednio przeszkoleni i znają wygląd obrazów SmartSlices przed ich użyciem zamiast zrekonstruowanych warstw z tomosyntezy.

### 1.7.2 Teoria działania oprogramowania 3DQuorum

#### Informacje ogólne

Oprogramowanie 3DQuorum to aplikacja do przetwarzania obrazów przeznaczona do końcowego przetwarzania ograniczonej liczby warstw z tomosyntezy, zarejestrowanych na systemie obrazowania tomosyntezy Hologic do postaci złożonego obrazu 3D. Obrazy SmartSlice zmniejszają liczbę obrazów o jedną trzecią w porównaniu z zestawem danych zrekonstruowanych podczas tomosyntezy, zachowując przy tym informacje kliniczne. W rezultacie czas odczytu obrazów dla radiologa może zostać skrócony o około 13%. Dla celów archiwizacji i transmisji rozmiary plików można zmniejszyć o ponad 50%.

Obrazów SmartSlice można użyć zamiast warstw zrekonstruowanych w tomosyntezie podczas zapoznawania się z badaniami przesiewowymi z wykorzystaniem tomosyntezy. Obrazy SmartSlices osiągają taką samą czułość jak odczyt warstw 1-milimetrowych 3D™.

#### Konfiguracja

Oprogramowanie 3DQuorum nie posiada żadnych konfigurowanych przez użytkownika ustawień, które wpływają na wygląd obrazów SmartSlice. Obrazy SmartSlice są przechowywane i przesyłane jako seria kadrów przy użyciu formatu obrazu tomosyntezy piersi DICOM. Nagłówek DICOM dla obrazów SmartSlice zawiera informacje potrzebne do odróżnienia go od wszelkich towarzyszących mu warstw zrekonstruowanych podczas tomosyntezy w tym samym widoku. Adnotacja („3DQuorum”) jest także wypalana w danych pikseli obrazów SmartSlice.

W trakcie pierwszej instalacji 3DQuorum system jest skonfigurowany tak, aby można było wysyłać warstwy zrekonstruowane i SmartSlices do PACS i diagnostycznych stacji roboczych. Domyślne grupy wyjściowe można skonfigurować tak, aby wysyłać automatycznie tylko obrazy SmartSlice, tylko zrekonstruowane warstwy lub obie wersje do preferowanych urządzeń. Administrator systemu PACS w placówce, konsultując się z inżynierami ds. opcji połączeń z firmy Hologic, może wybrać formaty wyjściowe najbardziej odpowiednie dla infrastruktury i stacji roboczych IT, jakie są dostępne w placówce.

Podobnie jak w przypadku wprowadzania każdej nowej technologii obrazowania, Hologic zaleca przetestowanie SmartSlices ze stacjami roboczymi PACS i innymi urządzeniami Imaging Enterprise, aby zapewnić kompatybilność.

#### Procedura

Podobnie jak przy każdym badaniu obrazowym technolog wybiera pacjenta oraz wskazuje typ procedury obrazowania, która zostanie wykonana. W przypadku badań tomosyntezy z użyciem oprogramowania 3DQuorum, konieczne jest tylko obrazowanie pacjenta i zakończenie badania. Oprogramowanie 3DQuorum działa samoczynnie i nie wymaga bezpośredniej interwencji ze strony człowieka.



## 1.8 Informacje o module Genius AI Detection

Genius AI Detection jest modulem oprogramowania służącym do identyfikacji budzących podejrzenie zmian w piersiach wyglądających jak zagęszczenia tkanki miękkiej (masy, zaburzenia struktury i asymetrie) lub zwapnienia na obrazach tomosyntezy piersi. Moduł Genius AI Detection analizuje zestaw danych pochodzących z tomosyntezy dla każdego widoku z badania Hologic 3D Mammography™ w celu identyfikacji takich zmian z wykorzystaniem sieci neuronowych do głębokiego uczenia się. W przypadku każdej zidentyfikowanej zmiany oprogramowanie Genius AI Detection generuje następujące wyniki CAD:

- przekrój, na którym zmiana jest najlepiej uwidoczniona;
- lokalizacja zmiany;
- zarys zmiany;
- wynik pewności dotyczący zmiany.

Ponadto moduł Genius AI Detection generuje ocenę przypadku z całego badania tomosyntezy piersi, która odzwierciedla pewność, że badanie wykryło zmianę złośliwą.

Moduł Genius AI Detection zapisuje wszystkie właściwości tych wyników CAD w obiekcie DICOM Mammography CAD SR w celu archiwizacji i wyświetlania na zgodnych z systemem DICOM stacjach roboczych do przeglądów diagnostycznych oraz systemach archiwizacji. Opcja tworzenia drugiego obrazu przechwytywania DICOM jest dostępna, jeżeli stacje robocze do przeglądów diagnostycznych nie mogą zinterpretować obiektów DICOM Mammography CAD SR.

### Procedura

Podobnie jak przy każdym badaniu obrazowym technolog wybiera pacjenta oraz wskazuje typ procedury obrazowania, która zostanie wykonana. W przypadku badania obejmującego mammogramy uzyskane za pomocą Genius 3D™ konieczne jest tylko obrazowanie pacjenta oraz zakończenie badania. Oprogramowanie Genius AI Detection działa samoczynnie i nie wymaga bezpośredniej interwencji ze strony człowieka.

### 1.8.1 Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące modułu Genius AI Detection

**Ważne**

Radiolog powinien opierać swoją interpretację wyłącznie na obrazach o dobrej jakości diagnostycznej i nie powinien polegać wyłącznie na znakach Genius AI Detection w celu ustalenia stanu klinicznego.

---

**Ważne**

Moduł Genius AI Detection stanowi pomoc, z której mogą korzystać radiolodzy interpretujący jednocześnie zestawy obrazów Hologic 3D Mammography™.

---

**Ważne**

Moduł Genius AI Detection nie poprawia tego, co widzi użytkownik, lecz ułatwia zidentyfikowanie wymagających badania regionów na mammogramach 3D™.

---

## 1.9 Profile użytkowników

### 1.9.1 Technolog mammografii

- Spełnia wszystkie wymogi obowiązujące w lokalizacji, w której pracuje technolog mammografii.
- Ukończył szkolenie dotyczące systemu mammografii.
- Został przeszkolony z zakresu pozycji do mammografii.
- Zna zasady obsługi komputera i jego urządzeń peryferyjnych.

### 1.9.2 Radiolog

- Spełnia wszystkie wymogi obowiązujące w lokalizacji, w której pracuje radiolog.
- Zna zasady obsługi komputera i jego urządzeń peryferyjnych.

### 1.9.3 Fizyk medyczny

- Spełnia wszystkie wymogi obowiązujące w lokalizacji, w której pracuje fizyk medyczny.
- Zna zasady badania mammograficznego.
- Ma doświadczenie w zakresie obrazowania cyfrowego.
- Zna zasady obsługi komputera i jego urządzeń peryferyjnych.

## 1.10 Wymagania dotyczące szkoleń

W Stanach Zjednoczonych użytkownicy tego systemu muszą być zarejestrowanymi technologami radiologii (ang. Registered Radiologic Technologist) spełniającymi kryteria do wykonywania mammografii. Użytkownicy wykonujący badanie mammograficzne muszą spełniać wszystkie odpowiednie wymagania ustawy MQSA dotyczące personelu podlegające wytycznym agencji FDA dotyczących mammografii klasycznej i cyfrowej.

Użytkownik może skorzystać między innymi z następujących szkoleń:

- Szkolenie z aplikacji w placówce klienta prowadzone przez specjalistę ds. obsługi klinicznej z firmy Hologic.
- Szkolenie w placówce klienta prowadzone w ramach konkretnych zabiegów (nazywane także szkoleniami wzajemnymi).

Ponadto podręcznik użytkownika zawiera wytyczne dotyczące użytkowania systemu.

Wszyscy użytkownicy muszą upewnić się, że otrzymali odpowiednie szkolenie z zakresu właściwej obsługi systemu, zanim jeszcze zaczną użytkować ten system w odniesieniu do pacjentów.

Firma Hologic nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia lub uszkodzenia wynikające z niewłaściwej obsługi systemu.

## 1.11 Wymagania dotyczące kontroli jakości

Placówki w Stanach Zjednoczonych muszą korzystać z podręcznika kontroli jakości, aby opracować program zapewniania i kontroli jakości. Placówka musi opracować program, aby spełnić wymogi ustawy MQSA (ang. Mammography Quality Standards Act) lub aby uzyskać akredytację ACR albo innej komisji akredytacyjnej.

Placówki poza Stanami Zjednoczonymi mogą korzystać z podręcznika kontroli jakości jako źródła wskazówek do opracowania programu celem spełnienia lokalnych standardów i przepisów.

## 1.12 Gdzie można znaleźć instrukcje instalacji

Instrukcje instalacji są dostępne w *podręczniku serwisowym*.

## 1.13 Gdzie można znaleźć opis techniczny

Opis techniczny jest dostępny w *podręczniku serwisowym*.

### 1.14 Oświadczenie dotyczące gwarancji

O ile Umowa nie stanowi wyraźnie inaczej: i) urządzenia wyprodukowane przez firmę Hologic są objęte gwarancją, wydawaną pierwotnemu nabywcy, dotyczącą tego, że urządzenia te będą działać zasadniczo zgodnie z opublikowaną specyfikacją przez okres jednego (1) roku od daty wysyłki lub, jeśli wymagana jest instalacja, od daty instalacji („Okres Gwarancji”); ii) na lampy rentgenowskie do obrazowania metodą mammografii cyfrowej udzielana jest gwarancja na dwadzieścia cztery (24) miesiące, podczas których lampy rentgenowskie są objęte pełną gwarancją przez pierwsze dwanaście (12) miesięcy, a na pozostałe miesiące (13–24) udzielana jest gwarancja proporcjonalna; iii) na części zamienne i artykuły regenerowane udzielana jest gwarancja na pozostałą część okresu gwarancyjnego lub na dziewięćdziesiąt (90) dni od daty wysyłki, w zależności od tego, który okres jest dłuższy; iv) na materiały eksploatacyjne udzielana jest gwarancja na zgodność z opublikowanymi specyfikacjami na okres kończący się z datą ważności podaną na odpowiednich pakietach; v) na licencjonowane Oprogramowanie udzielana jest gwarancja na działanie zgodne z opublikowanymi specyfikacjami; vi) na serwis udzielana jest gwarancja na to, że będzie realizowany w sposób zbliżony do pracy człowieka; vii) na urządzenia produkowane przez firmy inne niż Hologic udzielana jest gwarancja za pośrednictwem ich producenta i taka gwarancja producenta obejmuje klientów firmy Hologic w zakresie dozwolonym przez producenta takiego urządzenia produkowanego przez firmę inną niż Hologic. Firma Hologic nie gwarantuje, że użytkowanie jej produktów będzie przebiegało w sposób nieprzerwany bądź bezbłędny, ani że produkty będą działać z produktami innych firm, które nie zostały autoryzowane przez firmę Hologic. Te gwarancje nie dotyczą żadnej pozycji, która jest: (a) naprawiana, przenoszona lub modyfikowana przez osoby inne niż personel serwisowy autoryzowany przez firmę Hologic; (b) poddawana fizycznym (co dotyczy także termicznych lub elektrycznych) nadużyciom, obciążeniom lub nieprawidłowo użytkowana; (c) przechowywana, poddawana konserwacji lub obsługiwana w jakikolwiek sposób niezgodny z odpowiednimi specyfikacjami lub instrukcjami Hologic, co obejmuje także odmowę klienta na zastosowanie zalecanych przez Hologic aktualizacji oprogramowania; albo (d) wskazana jako podlegająca gwarancji firmy innej niż Hologic, wersja wstępna albo wersja udostępniana w stanie, w jakim się znajduje („as-is”).

### 1.15 Wsparcie techniczne

Dane kontaktowe w celu uzyskania wsparcia dla produktów można znaleźć w niniejszym podręczniku na stronie z prawami autorskimi.

### 1.16 Reklamacje dotyczące produktu

Jakiegokolwiek reklamacje lub problemy dotyczące jakości, niezawodności, bezpieczeństwa albo działania niniejszego produktu należy zgłaszać firmie Hologic. Jeśli urządzenie spowodowało lub pogorszyło uraz u pacjentki, należy niezwłocznie zgłosić taki incydent firmie Hologic. (Dane kontaktowe są dostępne na stronie zawierającej informacje o prawach autorskich).









## 1.17 Oświadczenie firmy Hologic dotyczące cyberbezpieczeństwa

Firma Hologic stale testuje bieżący stan zabezpieczeń komputerowych i sieciowych, aby badać potencjalne problemy z bezpieczeństwem. W razie potrzeby firma Hologic udostępnia aktualizacje produktu.

Informacje o dokumentach dotyczących najlepszych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa produktów firmy Hologic można znaleźć w witrynie internetowej [www.Hologic.com](http://www.Hologic.com).




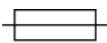









## 1.18 Symbole








W niniejszej sekcji opisano symbole stosowane w systemie, którego dotyczy niniejszy dokument.

Symbol	Opis	Norma
	Przeostroga — promieniowanie	Hologic
	Ten system przesyła energię o częstotliwościach radiowych (RF) (elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące)	IEC 60417, ref. 5140
	Ostrzeżenie: elementy elektryczne	IEC 60417, ref. 6042
	Prąd o wysokim napięciu	IEC 60417, ref. 5036
	Ostrzeżenie	ISO 7010, ref. W001
	Przeostroga	ISO 15223-1:2016, ref. 5.4.4
	Zatrzymanie awaryjne	Hologic
	Sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać, separując go od odpadów standardowych. Materiał wycofany z eksploatacji należy przesłać do firmy Hologic albo należy skontaktować się z przedstawicielem ds. serwisu.	Dyrektywa WEEE 2012/19/UE

# Przewodnik użytkownika systemu 3Dimensions

## Rozdział 1: Wstęp



Symbol	Opis	Norma
	Mająca kontakt z ciałem pacjenta część typu B	IEC 60417, ref. 5840
	Złącze do wyrównywania potencjałów	IEC 60417, ref. 5021
	Uziemienie ochronne	IEC 60417, ref. 5019
	Bezpiecznik	IEC 60417, ref. 5016
	Prąd przemienny	IEC 60417, ref. 5032
	Zasilanie „WYŁĄCZONE”	IEC 60417, ref. 5008
	Zasilanie „WŁĄCZONE”	IEC 60417, ref. 5007
<b>Rx ONLY</b>	Wyłącznie z przepisu lekarza	21 CFR 801.109
	Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej	ISO 15223-1:2016, ref. 5.1.2
	Oznaczenie CE z numerem referencyjnym jednostki notyfikowanej	Rozporządzenie MDR (UE) 2017/745
	Wyrób medyczny	ISO 15223-1, ref. 5.7.7
	Wyrób niejałowy	ISO 15223-1:2016, ref. 5.2.7
 <a href="http://www.hologic.com/package-inserts">www.hologic.com/package-inserts</a>	Zapoznać się z instrukcją użytkownika	ISO 15223-1:2016, ref. 5.4.3
<b>Translations in Box</b>	Tłumaczenia w pudełku	Hologic
	Symbol „Nadaje się do recyklingu”	Unicode, ref. U+267C

Symbol	Opis	Norma
	Dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich	Hologic
	Chronić przed wilgocią	ISO 15223-1:2016, ref. 5.3.4
	Produkt delikatny; obchodzić się ostrożnie	ISO 15223-1:2016, ref. 5.3.1
	Nie układać w stos	ISO 7000:2014, ref. 2402
	Ograniczenie temperatury	ISO 15223-1:2016, ref. 5.3.7
<b>Temp Logger Activated</b>	Aktywacja rejestratora temperatury	Hologic
<b>Temp Logger SN</b>	Numer seryjny rejestratora temperatury	Hologic
	Tą stroną do góry	ISO 7000:2014, ref. 0623
	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone	ISO 15223-1:2016, ref. 5.2.8
<b>P/N</b>	Numer części	Hologic
<b>REV</b>	Wersja	Hologic
<b>Model</b>	Numer modelu	Hologic
<b>REF</b>	Numer katalogowy	ISO 15223-1:2016, ref. 5.1.6
<b>LOT</b>	Kod partii	ISO 15223-1:2016, ref. 5.1.5

# Przewodnik użytkownika systemu 3Dimensions

## Rozdział 1: Wstęp

---

Symbol	Opis	Norma
<b>SN</b>	Numer seryjny	ISO 15223-1:2016, ref. 5.1.7
<b>QTY</b>	Ilość	Hologic
<b>SFW SHIPPED</b>	Dostarczone oprogramowanie	Hologic
<b>SFW Version</b>	Numer wersji oprogramowania	Hologic
<b>CASE</b>	Opakowanie	Hologic
<b>VC</b>	Kod sprzedawcy	Hologic
	Producent	ISO 15223-1:2016, ref. 5.1.1
	Data produkcji	ISO 15223-1:2016, ref. 5.1.3
<b>Made in USA</b>	Wyprodukowano w USA	Hologic
<b>Patents</b>	Patenty	Hologic



## 1.19 Opisy ostrzeżeń, ostrzeżeń i uwag

Opisy ostrzeżeń, ostrzeżeń i uwag stosowanych w niniejszym podręczniku:



---

### **OSTRZEŻENIE!**

**Procedury, których należy ściśle przestrzegać, aby zapobiec ewentualnym niebezpieczeństwom oraz śmiertelnym obrażeniom.**

---



---

### **Ostrzeżenie:**

**Procedury, których należy ściśle przestrzegać, aby zapobiec obrażeniom.**

---



---

### **Przestroga:**

**Procedury, których należy ściśle przestrzegać, aby nie dopuścić do uszkodzenia sprzętu, utraty danych oraz uszkodzenia plików w aplikacjach.**

---



---

### **Uwaga**

Uwagi przedstawiają dodatkowe informacje.

---

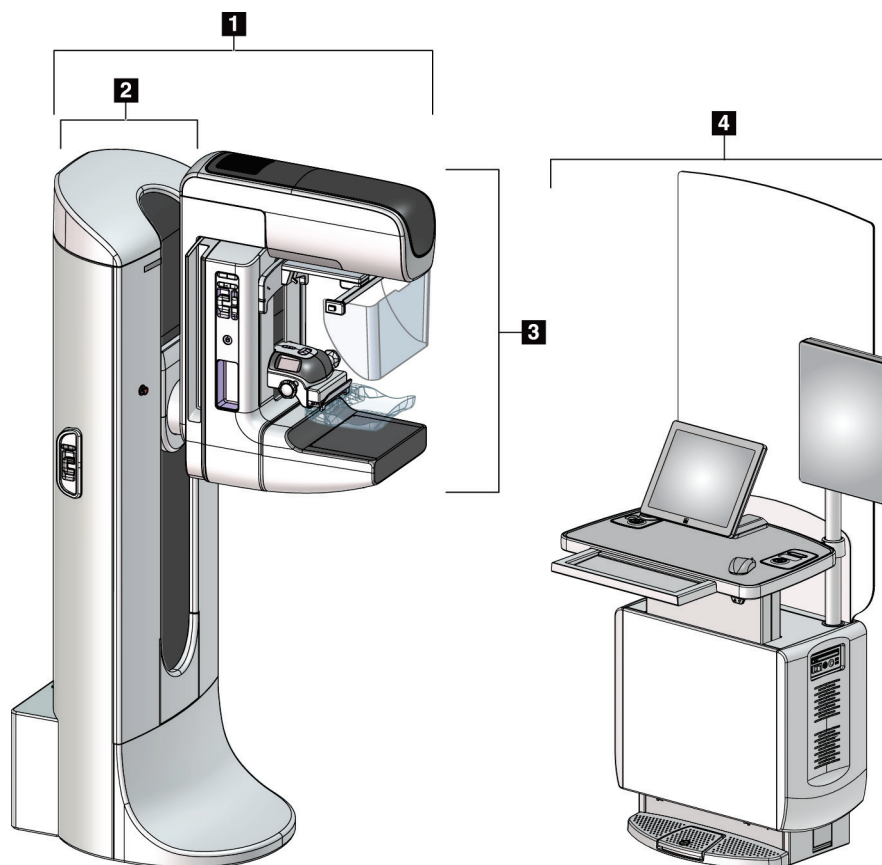
## 1.20 Konwencje stosowane w dokumencie

W przypadku zachęty do wprowadzenia tekstu należy wprowadzić tekst, stosując czcionkę o stałej szerokości – dokładnie taką, jak pokazana.



## Rozdział 2 Informacje ogólne

### 2.1 Przegląd systemu




Rycina 1: System 3Dimensions™

#### Legenda rysunku

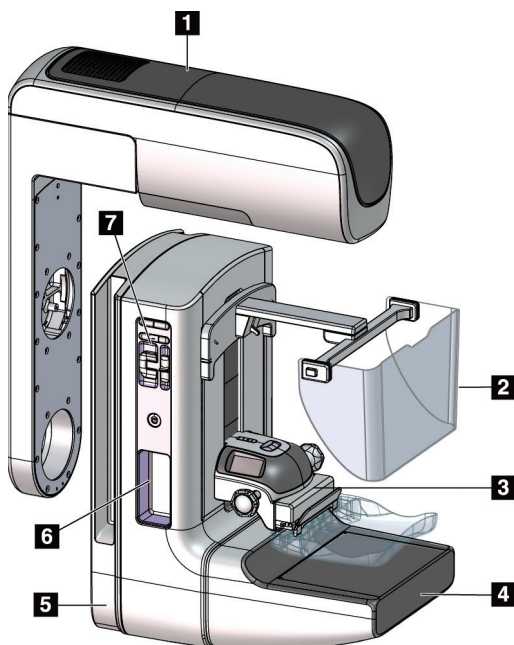1. Stanowisko lampy (gantry i ramię C)
2. Gantry
3. Ramię C (Ramię lampy i ramię uciskowe)
4. Uniwersalna stacja robocza akwizycji

### 2.1.1 Ramię C — przegląd informacji



#### Legenda ryciny

1. Ramię lampy
2. Osłona twarzy pacjentki
3. Urządzenie kompresyjne
4. Detektor obrazu
5. Ramię kompresyjne
6. Uchwyt dla pacjentki
7. Panel sterowania ramieniem C

Rycina 2: Ramię C — przegląd informacji

## 2.2 Informacje o bezpieczeństwie

Przed rozpoczęciem użytkowania tego systemu należy przeczytać niniejszy podręcznik ze zrozumieniem. Podręcznik należy zachować, aby zapewnić jego dostępność podczas obsługi systemu.

Zawsze należy przestrzegać instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku. Firma Hologic nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia lub uszkodzenia wynikające z niewłaściwej obsługi systemu. Aby uzyskać informacje o opcjach szkolenia, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Hologic.

W systemie działają blokady bezpieczeństwa, ale użytkownik musi poznać zasady bezpiecznej obsługi systemu. Użytkownik musi również zrozumieć zagrożenia dla zdrowia wynikające z promieniowania RTG.

## 2.3 Ostrzeżenia i środki ostrożności



Niniejszy system jest sklasyfikowany jako sprzęt KLASY I, CZĘŚĆ APLIKACYJNA TYPU B, IPX0, przeznaczony do podłączenia na stałe i pracy ciągłej z krótkotrwałym ładowaniem – według normy IEC 60601-1. Nie zastosowano żadnych specjalnych zabezpieczeń, aby chronić system przed palnymi środkami znieczulającymi ani wnikaniem płynów.



---

---

### **OSTRZEŻENIE!**

**Ryzyko porażenia prądem. Ten sprzęt należy podłączać wyłącznie do gniazda zasilającego z uziemieniem ochronnym.**

---

---



---

---

### **OSTRZEŻENIE!**

**W celu zapewnienia zgodności z wymogami bezpieczeństwa elektrycznego dla Ameryki Północnej należy stosować gniazdo klasy szpitalnej zapewniające poprawne przyłącze do uziemienia.**

---

---



---

---

### **OSTRZEŻENIE!**

**Sprzęt elektryczny używany w pobliżu palnych środków znieczulających może spowodować wybuch.**

---

---



---

---

### **OSTRZEŻENIE!**

**Aby prawidłowo odizolować system, należy podłączać do niego tylko zatwierdzone akcesoria lub opcje. Połączenia może zmieniać tylko zatwierdzony personel.**

---

---



---

---

### **OSTRZEŻENIE!**

**Pomiędzy pacjentem a jakimkolwiek urządzeniem nieprzeznaczonym do kontaktu z pacjentem należy zachować odległość 1,5 metra. W obszarze pacjenta nie należy instalować żadnych komponentów systemu nieprzeznaczonych do kontaktu z pacjentem (takich jak urządzenie Workflow Manager, stacja robocza do przeglądów diagnostycznych ani drukarka).**

---

---



---

**OSTRZEŻENIE!**

Panele mogą być otwierane tylko przez przeszkolonych inżynierów serwisu autoryzowanych przez firmę Hologic. W systemie działają napięcia o wartościach, które mogą spowodować śmierć człowieka.

---



---

**OSTRZEŻENIE!**

Przed rozpoczęciem korzystania z systemu użytkownik musi wyeliminować problemy. W celu przeprowadzenia konserwacji zapobiegawczej należy skontaktować się z przedstawicielem zatwierdzonego działu serwisowego.

---



---

**OSTRZEŻENIE!**

Po awarii zasilania należy wyprowadzić pacjentkę z systemu przed włączeniem zasilania.

---



---

**Ostrzeżenie:**

To urządzenie zawiera niebezpieczny materiał. Materiał wycofany z eksploatacji należy przesłać do firmy Hologic albo należy skontaktować się z przedstawicielem ds. serwisu.

---



---

**Ostrzeżenie:**

Ramię C jest napędzane napędami silnikowymi.

---



---

**Ostrzeżenie:**

Zwiększenie ustawienia automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) powoduje wzrost dawki przyjmowanej przez pacjentkę do wysokich poziomów. Zmniejszenie ustawienia automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) powoduje zwiększenie zaszumienia obrazu lub zmniejszenie jakości obrazu.

---



---

**Ostrzeżenie:**

Dostęp do sprzętu należy kontrolować zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony antyradiacyjnej.

---



---

**Ostrzeżenie:**

Napędy dysków zainstalowane w tym systemie są produktem laserowym klasy I. Nie dopuszczać do bezpośredniej ekspozycji na wiązkę. W przypadku otwarcia obudowy napędu dysku istnieje ukryte promieniowanie laserowe.

---



**Ostrzeżenie:**

Zainstalowany w tym systemie skaner kodów kreskowych jest produktem laserowym klasy II. Nie dopuszczać do bezpośredniej ekspozycji na wiązkę. W przypadku otwarcia obudowy istnieje ukryte promieniowanie laserowe.

---



**Ostrzeżenie:**

Podczas wykonywania ekspozycji całe ciało operatora powinno być ukryte za osłoną antyradiacyjną.

---



**Ostrzeżenie:**

Nie należy przesuwania ramienia C, gdy system odbiera obraz.

---



**Ostrzeżenie:**

Jeśli płytki dotknie materiałów potencjalnie zakaźnych, należy skontaktować się z przedstawicielem ds. kontroli zakażeń w celu usunięcia czynników zakaźnych z płytki.

---



**Ostrzeżenie:**

Podczas procedury nie należy pozostawiać pacjentki bez nadzoru.

---



**Ostrzeżenie:**

Ręce pacjentki powinny przez cały czas znajdować się z dala od wszystkich przycisków i przełączników.

---



**Ostrzeżenie:**

Każdy przełącznik nożny należy ustawić w takim miejscu, aby w przypadku ich użycia użytkownik pozostawał w zasięgu wyłączników awaryjnych.

---



**Ostrzeżenie:**

Przełączniki nożne należy umieścić w taki sposób, aby nie dopuścić do ich przypadkowego użycia przez pacjentkę lub na skutek najechania wózkiem inwalidzkim.

---



**Ostrzeżenie:**

Aby nie dopuścić do zwiększenia dawki promieniowania oddziałującego na pacjentkę, w ścieżce wiązki promieniowania RTG należy umieszczać tylko zatwierdzone materiały.

---



**Ostrzeżenie:**

System może być niebezpieczny dla pacjenta i użytkownika. Zawsze należy przestrzegać środków ostrożności dotyczących ekspozycji na promieniowanie RTG.

---



**Ostrzeżenie:**

Podczas ekspozycji zawsze należy stosować osłonę twarzy (nie dotyczy to badań z powiększaniem).

---



**Ostrzeżenie:**

Osłona twarzy nie chroni pacjentki przed promieniowaniem.

---



**Ostrzeżenie:**

Ryzyko uwięzienia. Należy upewnić się, że podczas obrotu odległość ramienia C od wszelkich przedmiotów wynosi co najmniej 50 cm (20 cali). Jeśli ramię C jest bliżej niż 50 cm (20 cali) od jakiegokolwiek przedmiotu, nie należy używać obrotu automatycznego.

---



**Przestroga:**

System jest urządzeniem medycznym, a nie zwykłym komputerem. W odniesieniu do sprzętu i oprogramowania można wprowadzać tylko zatwierdzone zmiany. To urządzenie należy zainstalować za zaporą w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieciowego. Razem z tym urządzeniem medycznym nie jest dostarczane zabezpieczenie przeciwko wirusom komputerowym ani zabezpieczenie sieciowe (na przykład zaporą). Zapewnienie bezpieczeństwa w sieci i ochrony przed wirusami jest obowiązkiem użytkownika.

---



**Przestroga:**

Wyłącznik stacji roboczej akwizycji można aktywować tylko w sytuacji awaryjnej. Wyłącznik może wyłączyć zasilacz bezprzerwowy (UPS) i spowodować ryzyko utraty danych.

---



**Przestroga:**

Ryzyko utraty danych. Na urządzeniach, które wytwarzają jakiegokolwiek pola magnetyczne (ani w ich pobliżu) nie należy umieszczać żadnych nośników magnetycznych.

---



**Przestroga:**

Względem detektora obrazu nie należy używać żadnego źródła ciepła (jak podkładka grzewcza).

---





**Przeostroga:**

Aby zapobiec uszkodzeniu cyfrowego detektora obrazu na skutek szoku termicznego, należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą wyłączenia sprzętu.



**Przeostroga:**

Wyświetlacz jest skalibrowany zgodnie z normami DICOM. Nie należy w żaden sposób regulować jasności ani kontrastu wyświetlacza.



**Przeostroga:**

Należy używać jak najmniejszej ilości płynów czyszczących. Używane płyny nie powinny nigdzie spływać ani przepływać.



**Przeostroga:**

Aby zapobiec uszkodzeniom elementów elektronicznych, względem systemu nie należy używać środka dezynfekującego.

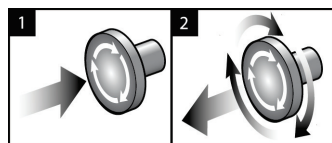


**Uwaga:**

Firma Hologic nie dostarcza kabla zasilania gantry dla niektórych krajów. Jeśli kabel zasilania nie został dostarczony, instalowany kabel zasilania musi spełniać poniższe wymagania i wszystkie obowiązujące wymogi lokalne: miedziany kabel 3-żyłowy o przekroju 10 mm<sup>2</sup> (8 AWG) nie dłuższy niż 7,62 metra (25 stóp).

## 2.4 Wyłączniki awaryjne

Wyłączniki awaryjne powodują odłączenie zasilania od gantry i mechanizmu podnoszenia stacji roboczej akwizycji (na stacjach roboczych, na których ta opcja jest dostępna). Wyłączników awaryjnych nie należy używać w celu rutynowego wyłączenia systemu.



Rycina 3: Działanie wyłącznika awaryjnego

W systemie dostępne są trzy wyłączniki awaryjne: po jednym na każdej stronie gantry i jeden na stacji roboczej akwizycji.

1. Aby wyłączyć gantry i mechanizm podnoszenia stacji roboczej akwizycji, naciśnij dowolny wyłącznik awaryjny.
2. Aby zresetować wyłącznik awaryjny, obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wykonując około jedną czwartą obrotu do momentu wyskoczenia przełącznika na zewnątrz.

### 2.5 Blokady

W systemie dostępne są następujące blokady bezpieczeństwa:

- Gdy stosowana jest siła kompresyjna, ruchy ramienia C w pionie i jego obroty są wyłączone. Inżynier serwisu może skonfigurować siłę blokady w zakresie od 22 niutonów (5 funtów-siła) do 45 niutonów (10 funtów-siła).
- Jeśli przycisk promieniowania RTG i (lub) przełącznik nożny promieniowania RTG\* zostanie zwolniony przed końcem ekspozycji, ekspozycja zostanie zatrzymana i pojawi się komunikat alarmowy.  
\* (Opcja przełącznika nożnego RTG jest dostępna tylko na uniwersalnej stacji roboczej akwizycji).
- W trybie Tomo system nie zezwala na ekspozycję, gdy siatka jest ustawiona w polu promieniowania RTG (opcja tomosyntezy).
- Znaczniki położenia lustra i filtra również uniemożliwiają generowanie promieniowania RTG w przypadku nieprawidłowego ustawienia lustra pola świetlnego lub zespołu filtrów.

### 2.6 Zgodność z przepisami

W niniejszej sekcji opisano wymagania dotyczące zgodności systemu mammografii z przepisami oraz obowiązki producenta w tym zakresie.

#### 2.6.1 Wymagania dotyczące zgodności z przepisami

Producent ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo, niezawodność oraz wydajność tego sprzętu, o ile spełnione są następujące warunki:

- Instalacja elektryczna w pomieszczeniu spełnia wszystkie wymagania.
- Sprzęt jest użytkowany zgodnie z *Przewodnikiem użytkownika*.
- Prace z zakresu montażu, rozszerzeń, regulacji, zmian i napraw są wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie autoryzacje.
- Sprzęt sieciowy i komunikacyjny jest zainstalowany zgodnie z normami IEC. Cały system (sprzęt sieciowy i komunikacyjny oraz system mammografii) musi spełniać wymogi normy IEC 60601-1.



**Przeostroga:**

**W przypadku medycznych urządzeń elektrycznych obowiązują specjalne środki ostrożności dotyczące zgodności elektromagnetycznej i takie urządzenia muszą być instalowane, oddawane do eksploatacji oraz użytkowane zgodnie z podanymi informacjami o zgodności elektromagnetycznej.**

---



**Przeostroga:**

**Przenośny i mobilny sprzęt do komunikacji radiowej może oddziaływać na medyczne urządzenia elektryczne.**

---



**Przeostroga:**

Użycie nieautoryzowanych akcesoriów i kabli może prowadzić do zwiększenia emisji lub zmniejszenia odporności. W celu zachowania odpowiedniej jakości izolacji systemu należy podłączać do niego tylko zatwierdzone akcesoria lub opcje.

---



**Przeostroga:**

Medycznego urządzenia elektrycznego (ani takiego systemu) nie należy używać w bezpośrednim sąsiedztwie innego sprzętu ani układać go w stosie z innym sprzętem. Jeśli użycie w bezpośrednim sąsiedztwie lub w stosie jest niezbędne, należy upewnić się, że medyczne urządzenie elektryczne (lub taki system) działa poprawnie w takiej konfiguracji.

---



**Przeostroga:**

Ten system jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez personel medyczny. Ten system może powodować zakłócenia radiowe lub zakłócać działanie pobliskich urządzeń. Konieczne może być podjęcie działań w celu złagodzenia tego efektu – na przykład zmiana orientacji, relokacja sprzętu albo zastosowanie ekranowania.

---



**Przeostroga:**

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Hologic, mogą spowodować utratę uprawnień do obsługi tego sprzętu.

---



**Przeostroga:**

Opisywany sprzęt był testowany, a wykonane testy wykazały, że spełnia limity dla urządzenia cyfrowego Klasy A zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Te limity zapewniają uzasadnioną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami, gdy sprzęt jest użytkowany w środowisku przeznaczonym do celów komercyjnych. Ten sprzęt generuje, wykorzystuje i może wypromieniowywać energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie będzie zainstalowany i użytkowany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Użytkowanie tego sprzętu w obszarach mieszkalnych może powodować szkodliwe zakłócenia, a w przypadku wystąpienia takich zakłóceń użytkownik będzie musiał wyeliminować zakłócenia na własny koszt.

---



**Przeostroga:**

Na podstawie wyników testu **ODPORNOŚCI PORTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBUDOWIE** na **ODDZIAŁYWANIE SPRZĘTU DO BEZPRZEWODOWEJ KOMUNIKACJI RADIOWEJ** (według normy IEC 60601-1-2 wyd. 4) to urządzenie wykazuje wrażliwość na częstotliwość nadawczą GMRS 460, FRS 460. Minimalna odległość separacji między radiami GMRS i FRS a systemem wynosi 30 cm.

---

### 2.6.2 Deklaracje zgodności z przepisami

Producent deklaruje, że niniejsze urządzenie zostały wyprodukowane w taki sposób, aby spełniało następujące wymagania:



dotyczące wyrobów medycznych — jako urządzenie wykorzystujące promieniowanie elektromagnetyczne pod względem ryzyka porażenia prądem, zagrożenia pożarowego i zagrożeń mechanicznych wyłącznie zgodnie z normami ANSI/AAMI ES 60601-1 (2005) + A1: 2012, C1: 2009 / (R)2012, A2: 2010 / (R)2012 i CAN/CSA-C22.2 nr 60601-1 (2014)

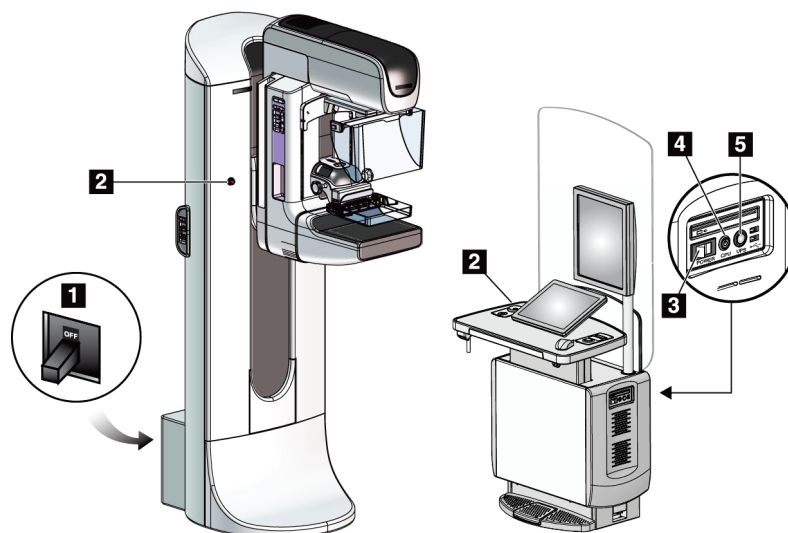
- CAN/CSA-ISO 13485-03 Wyroby medyczne — Systemy zarządzania jakością — Wymagania do celów przepisów prawnych (przyjęta norma ISO 13485:2003 wydanie drugie, 15.07.2003)
- CAN/CSA C22.2 NO. 60601-1:2014 Medyczne urządzenia elektryczne — Część 1: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych
- EN 60601-1: 2006 / A1: 2013 Medyczne urządzenia elektryczne. Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych
- ETSI EN 300 330-1: V1.3.1 oraz ETSI EN 300 330-2: V1.5.1: 2006 — Zgodność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM); Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD); Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 25 MHz i systemy z pętlą indukcyjną pracujące w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 30 MHz
- ETSI EN 301 489-1: V1.6.1 oraz ETSI EN 301 489-3: V1.8.1: 2008 — Zgodność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM); Norma zgodności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych
- FCC, 47 CFR część 15, podczęść C, sekcja 15.225: 2009
- FDA, 21 CFR [części 900 i 1020]
- IEC 60601-1: 2005 / A1: 2012, wyd. 3.1 Medyczne urządzenia elektryczne — Część 1: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych
- IEC 60601-1-2 wyd. 4: 2014 Medyczne urządzenia elektryczne — Część 1–2: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych — Norma uzupełniająca: Zgodność elektromagnetyczna — Wymagania i badania
- IEC 60601-1-3 wyd. 2.0: 2008 / A1: 2013 Medyczne urządzenia elektryczne — Część 1-3: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa zespołów urządzeń rentgenowskich i zespołów lamp rentgenowskich do diagnostyki medycznej
- IEC 60601-2-28: 2017 Medyczne urządzenia elektryczne — Część 2–28: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego promienników rentgenowskich przeznaczonych do diagnostyki medycznej

- IEC 60601-2-45: 2011 / AMD1: 2015 Medyczne urządzenia elektryczne — Część 2-45: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego mammografów i mammograficznych urządzeń stereotaktycznych
- RSS-210: Wydanie 7, 2007 Specyfikacje norm radiowych Urządzenia radiokomunikacyjne o małej mocy zwolnione z licencji: sprzęt kategorii I
- ANSI/AAMI ES 60601-1: +A1: 2012, C1: 2009 / (R)2012 i A2: 2010 / (R)2012 Medyczne urządzenia elektryczne, Część 1: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych z poprawką (2010)



## Rozdział 3 Elementy sterujące i wskaźniki w systemie

### 3.1 Sterowanie zasilaniem systemu




Rycina 4: Sterowanie zasilaniem systemu

#### Legenda rysunku

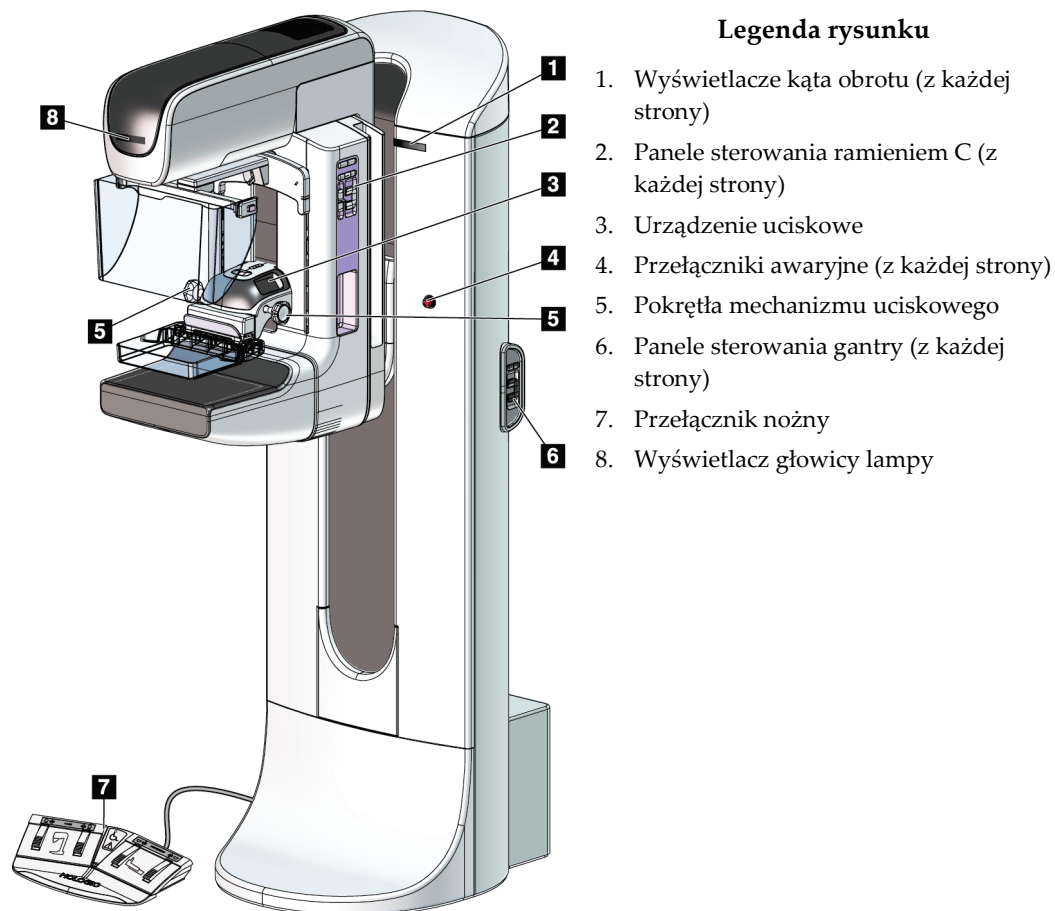1. Wyłącznik zasilania gantry
2. Wyłącznik awaryjny (dwa na gantry, jeden na stacji roboczej akwizycji)
3. Przełącznik zasilania stacji roboczej akwizycji
4. Przycisk włączania/resetowania komputera
5. Przycisk zasilacza bezprzerwowego (UPS)

## 3.2 Elementy sterowania i wskaźniki stanowiska lampy




*Rycina 5: Elementy sterowania i wskaźniki stanowiska lampy*



### 3.2.1 Wyświetlacz głowicy lampy

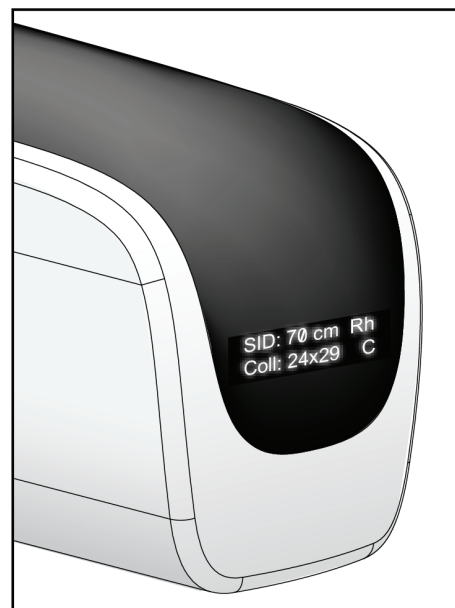Na wyświetlaczu głowicy lampy wyświetlane są następujące informacje:

- SID
- Typ filtra
- Ustawienie kolimatora
- Pozycja płytki




Rycina 6: Wyświetlacz głowicy lampy

### 3.2.2 Elementy sterujące i wyświetlacz urządzenia kompresyjnego
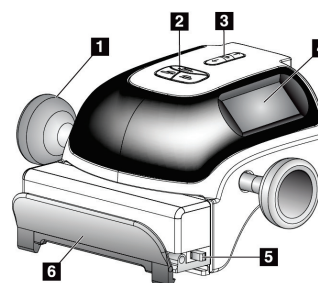
#### Legenda ryciny


1. Ręczne pokrętki kompresyjne
2. Przyciski przesuwania płytki
3. Przyciski czujnika automatycznej kontroli ekspozycji (AEC)
4. Wyświetlacz urządzenia kompresyjnego
5. Suwak trybu kompresji FAST
6. Zacisk płytki



Rycina 7: Urządzenie kompresyjne

Na wyświetlaczu urządzenia kompresyjnego wyświetlane są następujące informacje:

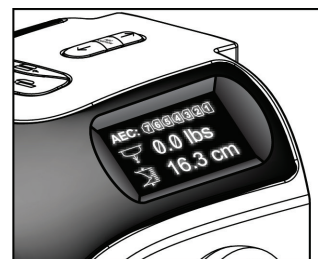- Pozycja czujnika automatycznej kontroli ekspozycji (AEC)
- Siła kompresji (gdy siła jest mniejsza niż 4 funty-siła (18 N), wyświetlana jest wartość 0.0)
- Grubość po kompresji
- Kąt ramienia C po obrocie (przez 5 sekund)



Rycina 8: Wyświetlacz urządzenia kompresyjnego

#### 3.2.3 Panele sterowania ramieniem C

Po lewej i prawej stronie ramienia C znajduje się panel sterowania ramieniem C. Przyciski te udostępniają funkcje kolimatora i ramienia C.




Rycina 9: Panel sterowania ramieniem C

#### Legenda rysunku

1. Obrót MLO
2. Pozycja zerowa ramienia C
3. Lampa pola świetlnego
4. Włączenie silnika
5. Sterowanie kolimatorem
6. Obrót ramienia C w prawo
7. Ramię C w górę i w dół
8. Obrót ramienia C w lewo
9. Płytkę uciskową w górę
10. Płytkę uciskową w dół

#### 3.2.4 Panele sterowania gantry

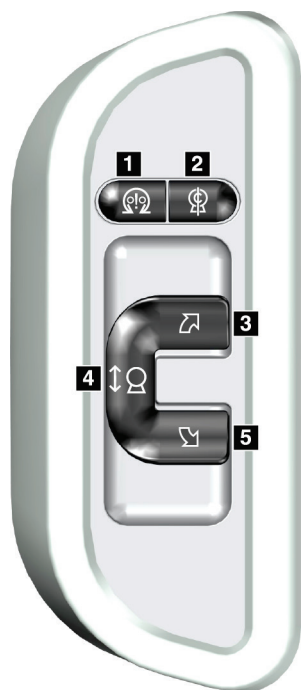Panele sterowania znajdujące się na gantry umożliwiają dodatkowy dostęp do funkcji ramienia C. Po lewej i prawej stronie gantry znajduje się panel sterowania ramieniem C.



Rycina 10: Panel sterowania gantry

#### Legenda rysunku

1. Włączenie silnika
2. Pozycja zerowa ramienia C
3. Obrót ramienia C w prawo
4. Ramię C w górę i w dół
5. Obrót ramienia C w lewo

### 3.2.5 Dwufunkcyjny przełącznik nożny



**Ostrzeżenie:**

Każdy przełącznik nożny należy ustawić w takim miejscu, aby w przypadku ich użycia użytkownik pozostawał w zasięgu wyłączników awaryjnych.



**Ostrzeżenie:**

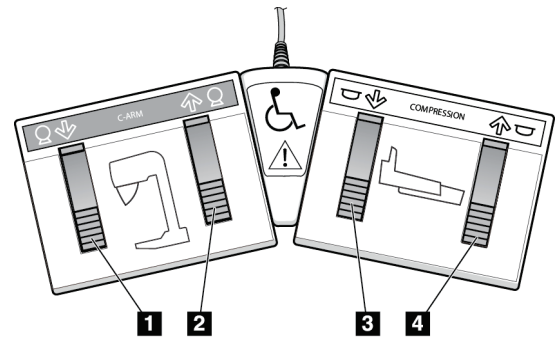
Przełączniki nożne należy umieścić w taki sposób, aby nie dopuścić do ich przypadkowego użycia przez pacjentkę lub na skutek najeżdżenia wózkiem inwalidzkim.

Aby używać przełącznika nożnego:

- Naciśnij przełącznik nożny, aby uruchomić.
- Zwolnij przełącznik nożny, aby zatrzymać ruch.

**Legenda ryciny**

1. Ramię C w dół
2. Ramię C w górę
3. Kompresja w dół
4. Kompresja w górę




Rycina 11: Dwufunkcyjny przełącznik nożny

### 3.3 Elementy sterujące i wyświetlacze uniwersalnej stacji roboczej akwizycji



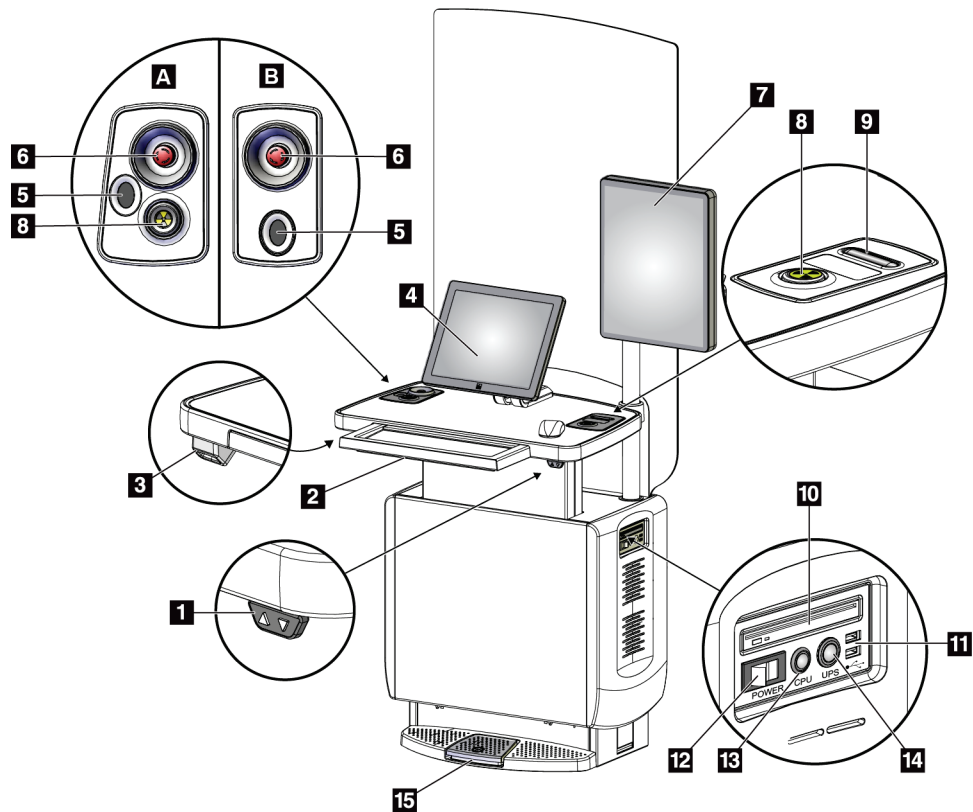**Uwaga**

Firma Hologic konfiguruje niektóre systemy w taki sposób, aby spełniały konkretne wymagania. Konkretny system może nie zawierać niektórych opcji i akcesoriów opisanych w niniejszym podręczniku.



Rycina 12: Elementy sterujące i wyświetlacze uniwersalnej stacji roboczej akwizycji

### Legenda ryciny

- |                                           |                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. Przełącznik regulacji wysokości        | 10. Napęd CD/DVD                                            |
| 2. Klawiatura (w szufladzie)              | 11. Porty USB                                               |
| 3. Skaner kodów kreskowych                | 12. Przełącznik Power (Zasilanie) stacji roboczej akwizycji |
| 4. Monitor kontrolny                      | 13. Przycisk włączania/resetowania zasilania komputera      |
| 5. Skaner linii papilarnych*              | 14. Przycisk zasilania zasilacza bezprzerwowego (UPS)       |
| 6. Wyłącznik awaryjny*                    | 15. Przełącznik nożny promieniowania RTG                    |
| 7. Monitor do wyświetlania obrazów        |                                                             |
| 8. Przycisk aktywacji promieniowania RTG* |                                                             |
| 9. Przycisk zwalniania kompresji          |                                                             |

\*A = układ w przypadku uniwersalnej stacji roboczej akwizycji serii II;  
B = układ w przypadku uniwersalnej stacji roboczej akwizycji serii I



### Uwaga

Elementy sterujące dla uniwersalnej stacji roboczej akwizycji zainstalowanej w środowisku mobilnym są takie same, jak elementy sterujące dla uniwersalnej stacji roboczej akwizycji.

## Rozdział 4 Uruchamianie, testy funkcjonalne oraz wyłączenie

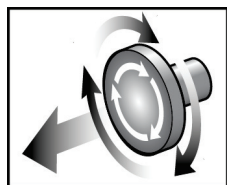
### 4.1 Uruchamianie systemu



#### Uwaga


Jeżeli system pozostaje włączony przez noc, codziennie uruchamiać go ponownie, aby zapewnić najlepszą wydajność.

1. Upewnić się, że na torze ruchu ramienia C ani w polu widzenia operatora nie znajdują się żadne przeszkody.
2. Upewnić się, że wszystkie trzy wyłączniki awaryjne znajdują się w pozycji zresetowanej (nie są wciśnięte).



Rycina 13: Obrócić, aby zresetować wyłączniki awaryjne

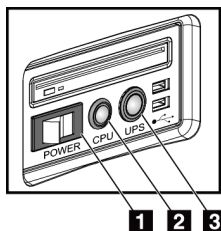3. Upewnić się, że wyłącznik zasilania gantry znajduje się w pozycji WŁ.
4. Jeżeli zasilacz bezprzerwowy (UPS) został wyłączony, nacisnąć przycisk zasilania zasilacza bezprzerwowego, aby go włączyć (patrz ilustracja poniżej).




Rycina 14: Przyciski zasilania uniwersalnej stacji roboczej akwizycji

#### Legenda ilustracji

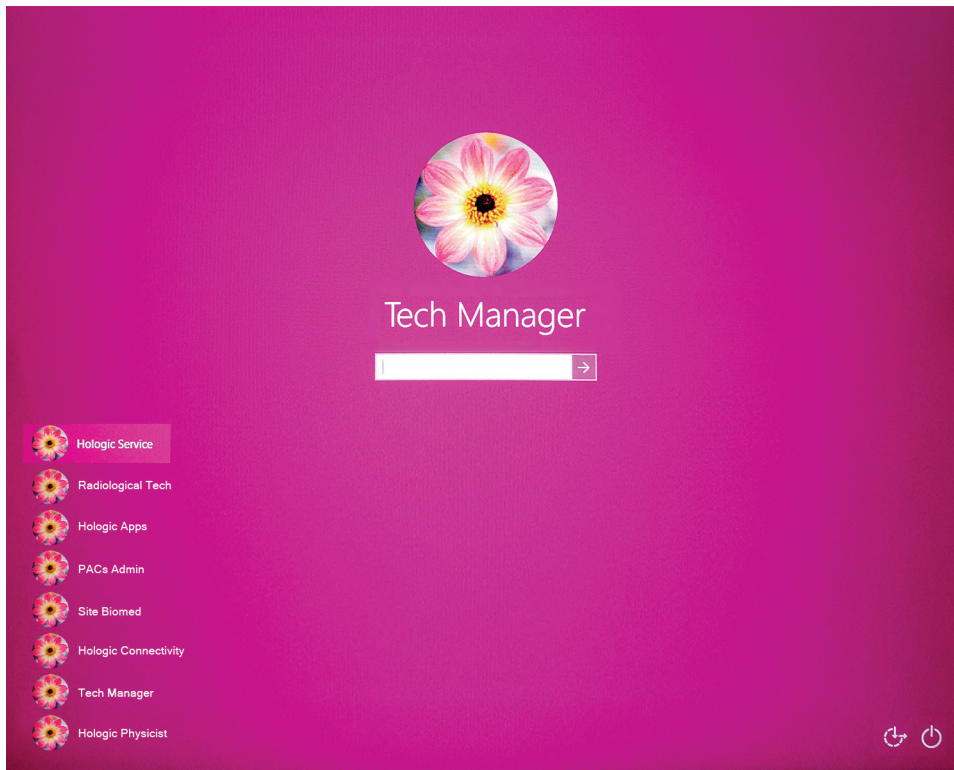1. Przełącznik zasilania stacji roboczej akwizycji
  2. Przycisk włączania/resetowania komputera
  3. Przycisk zasilania zasilacza bezprzerwowego (UPS)
5. Włączyć przełącznik zasilania stacji roboczej akwizycji (patrz poprzednia ilustracja).

6. Naciśnięcie przycisku zasilania komputera (patrz poprzednie ilustracje). Komputer włączy się, a na monitorze kontrolnym stacji roboczej akwizycji nastąpi wyświetlenie ekranu *Windows 10 Login* (Logowanie do systemu Windows 10).




Rycina 15: Ekran logowania do systemu Windows 10

7. Wybrać swoją nazwę użytkownika i wprowadzić hasło.

8. Na monitorze kontrolnym stacji roboczej akwizycji nastąpi wyświetlenie ekranu *Startup* (Ekran startowy) systemu 3Dimensions. Nastąpi automatyczne włączenie gantry.

## 3Dimensions™

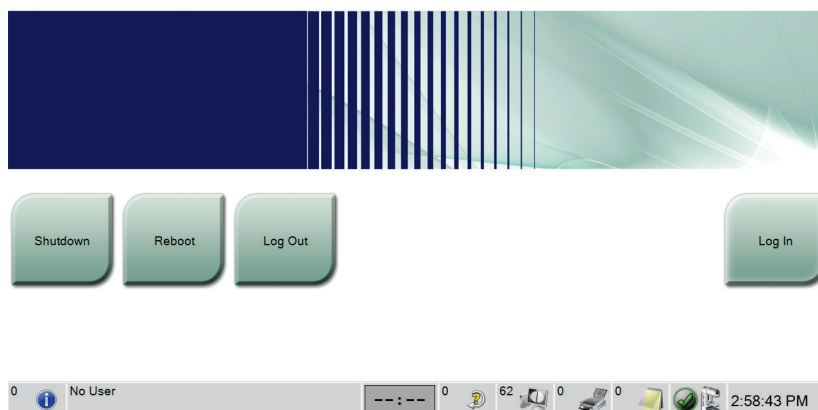

Rycina 16: Ekran startowy



### Uwaga

Aby wylogować się z systemu operacyjnego Windows 10, wybrać przycisk **Log Out** (Wyloguj).



### Uwaga

Ekran *Startup* (Uruchamianie) zawiera przycisk **Shutdown** (Zamknij), który służy do wyłączenia systemu, a także przycisk **Reboot** (Uruchom ponownie) przeznaczony do restartowania systemu.

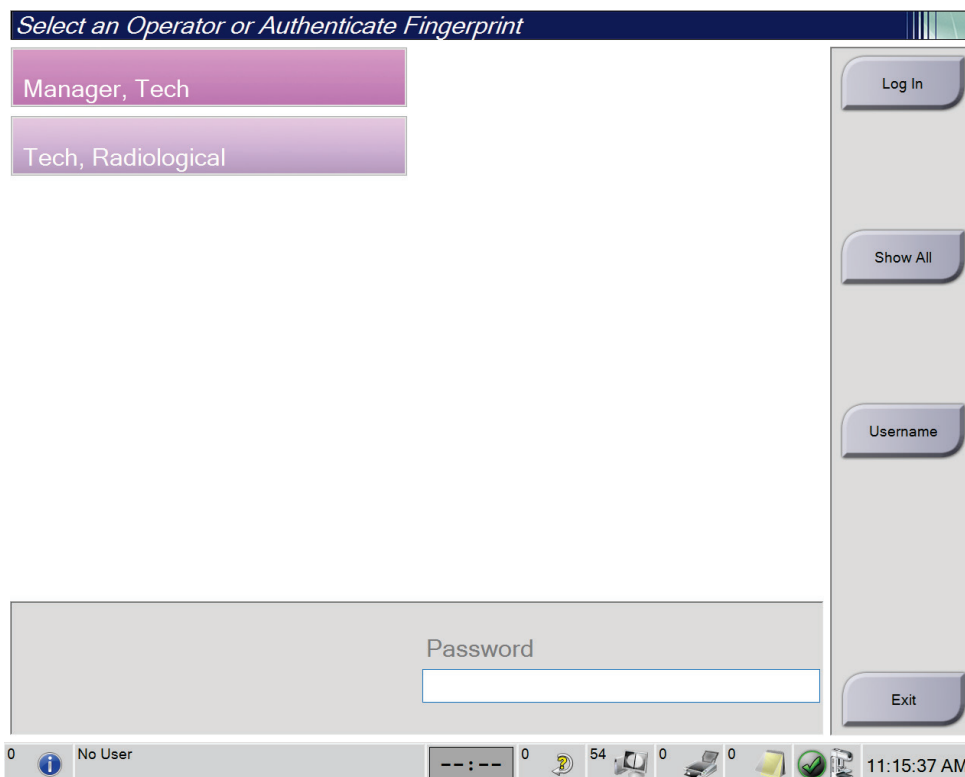


### Uwaga

System może wymagać od pięciu do piętnastu minut przygotowania do akwizycji obrazów. Czas oczekiwania jest zależny od konfiguracji zasilania detektora. Licznik czasu na pasku narzędzi wyświetla czas oczekiwania, zanim system stanie się gotowy. Nie należy rejestrować obrazów klinicznych ani obrazów do kontroli jakości, jeśli ikona statusu systemu nie wskazuje, że system jest gotowy.

### 4.2 Logowanie

1. Wybrać przycisk **Log In** (Zaloguj) na ekranie *Startup* (Ekran startowy).
2. Zostanie wyświetlony ekran *Select an Operator* (Wybierz operatora) (System Log In) (Logowanie do systemu) z listą menedżerów i techników. W razie potrzeby wybrać przycisk **Show All** (Pokaż wszystko), aby wyświetlić listę nazwisk użytkowników serwisowych, aplikacji i fizyków.



Rycina 17: Ekran logowania do systemu



3. Aby zalogować się do systemu, skorzystać z jednej z poniższych metod:
- Wybrać odpowiedni przycisk nazwy użytkownika. Wpisać swoje hasło, po czym wybrać przycisk **Log In** (Zaloguj).
  - Wybrać przycisk **Username** (Nazwa użytkownika). Wpisać swoją nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybrać przycisk **Log In** (Zaloguj).
  - Zatwierdzić swój odcisk palca, przyciskając palec do skanera odcisków palców.



**Uwaga**

Większość unikatowych, trwałych informacji dotyczących odcisku palca pochodzi z opuszki palca, a nie jego czubka. Płaskie ułożenie palca, jak pokazano na ilustracji po lewej, umożliwia szybką i dokładną identyfikację odcisku palca.

---



Prawidłowo



Nieprawidłowo

---



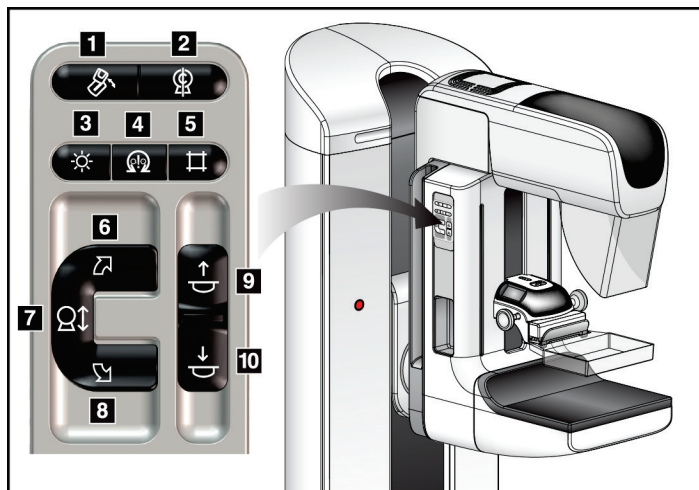
**Uwaga**

Jeżeli wymagane są zadania kontroli jakości, nastąpi otwarcie ekranu *Select Function to Perform* (Wybierz funkcję do wykonania). Użytkownik ma możliwość wykonania zadań kontroli jakości lub wybrania opcji **Skip** (Pomiń).

---

#### 4.3 Wykonywanie testów funkcjonalnych

Aby upewnić się, że elementy sterowania działają prawidłowo, wykonywać testy funkcjonalne w ramach listy czynności do wykonania podczas comiesięcznej kontroli wzrokowej. Upewnić się, że wszystkie przyciski działają prawidłowo (panele sterowania gantry i ramienia C po każdej ze stron).



#### Legenda rysunku

1. Obrót MLO
2. Pozycja zerowa ramienia C
3. Lampa pola świetlnego
4. Włączenie silnika
5. Sterowanie kolimatorem
6. Obrót ramienia C w prawo
7. Ramię C w górę i w dół
8. Obrót ramienia C w lewo
9. Płytkę uciskową w górę
10. Płytkę uciskową w dół

Rycina 18: Panel sterowania ramienia C (widok z lewej)





#### Uwaga

Ruch pionowy ramienia C i obrót są wyłączone po przyłożeniu siły ucisku. Pracownik techniczny może skonfigurować siłę blokady od 22 niutonów (5 funtów) do 45 niutonów (10 funtów).

### 4.3.1 Testy funkcjonalne ucisku

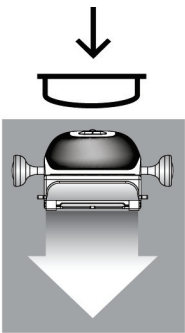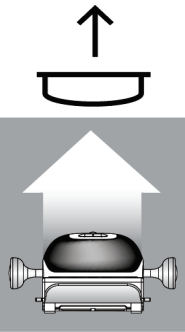Tabela 1: Testy ucisku

Funkcja	Test funkcjonalny
<p>Płytkę uciskową w dół</p> 	<p>Nacisnąć przycisk <b>Płytkę uciskową w dół</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastąpi załączenie hamulca uciskowego.</li> <li>• Zaświeci się lampa pola świetlnego.</li> <li>• Urządzenie uciskowe zostanie obniżone.</li> </ul> <p><i>Uwaga... Po naciśnięciu przycisku <b>Płytkę uciskową w dół</b> hamulec uciskowy pozostaje załączony aż do naciśnięcia przycisku <b>Compression Release</b> (Zwolnienie ucisku).</i></p> <p>Ruch płytki uciskowej w dół zatrzymuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• po zwolnieniu przycisku,</li> <li>• po osiągnięciu wartości granicznej siły dociskowej,</li> <li>• po osiągnięciu dolnej granicy przesuwu.</li> </ul>
<p>Płytkę uciskową w górę</p> 	<p>Nacisnąć przycisk <b>Płytkę uciskową w górę</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Urządzenie uciskowe uniesie się.</li> </ul> <p><i>Uwaga... Przycisk <b>Płytkę uciskową w górę</b> NIE powoduje zwolnienia hamulca uciskowego.</i></p> <p>Ruch płytki uciskowej w górę automatycznie zatrzymuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• po zwolnieniu przycisku,</li> <li>• po osiągnięciu górnej granicy przesuwu.</li> </ul>

### 4.3.2 Testy funkcjonalne ruchu ramienia C

#### Ruch ramienia C w górę i w dół

Tabela 2: Ruch ramienia C w górę i w dół

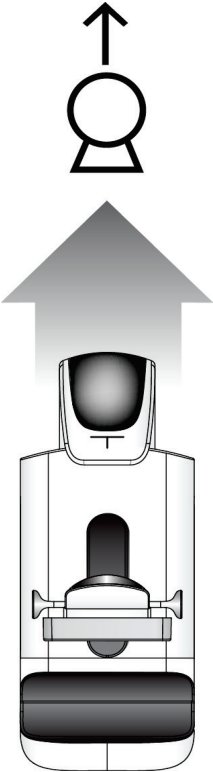
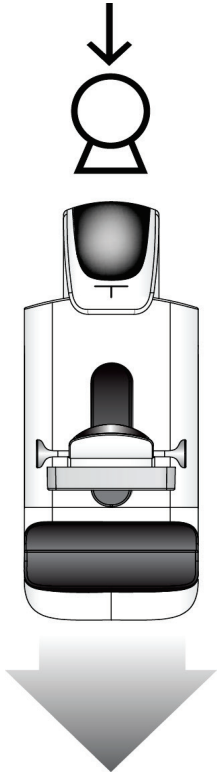
Funkcja	Test funkcjonalny
<p data-bbox="378 499 570 531">Ramię C w górę</p> 	<p data-bbox="722 512 1133 543">Naciśnij przycisk <b>Ramię C w górę</b>.</p> <ul data-bbox="773 556 1385 888" style="list-style-type: none"><li>• Ruch ramienia C zatrzymuje się w momencie zwolnienia przycisku.</li><li>• Ruch ramienia C zatrzymuje się, gdy ramię C osiągnie limit posuwu w górę.</li><li>• Gdy stosowana jest siła kompresyjna, ruchy ramienia C w pionie i jego obroty są wyłączone. Inżynier serwisu może skonfigurować siłę blokady w zakresie od 22 niutonów (5 funtów-siła) do 45 niutonów (10 funtów-siła).</li></ul>

Tabela 2: Ruch ramienia C w górę i w dół

Funkcja	Test funkcjonalny
<p data-bbox="427 363 607 394">Ramię C w dół</p> 	<p data-bbox="773 373 1170 405">Naciśnij przycisk <b>Ramię C w dół</b>.</p> <ul data-bbox="821 422 1433 751" style="list-style-type: none"><li data-bbox="821 422 1433 485">• Ruch ramienia C zatrzymuje się w momencie zwolnienia przycisku.</li><li data-bbox="821 499 1433 562">• Ruch ramienia C zatrzymuje się, gdy ramię C-osiągnie limit posuwu w dół.</li><li data-bbox="821 577 1433 751">• Gdy stosowana jest siła kompresyjna, ruchy ramienia C w pionie i jego obroty są wyłączone. Inżynier serwisu może skonfigurować siłę blokady w zakresie od 22 niutonów (5 funtów-siła) do 45 niutonów (10 funtów-siła).</li></ul>

### Obrót ramienia C

Tabela 3: Obrót ramienia C w lewo

Funkcja	Test funkcjonalny
Obrót ramienia C w lewo	Nacisnąć przycisk <b>Obrót ramienia C w lewo</b> (poz. 1), aby zainicjować obrót ramienia C w lewo. Po zwolnieniu przełącznika ruch ramienia C zatrzymuje się. Aby doprecyzować obrót ramienia C w jednostopniowych segmentach, przytrzymać przycisk przez jedną sekundę, a następnie szybko puścić. W razie potrzeby czynność powtórzyć.


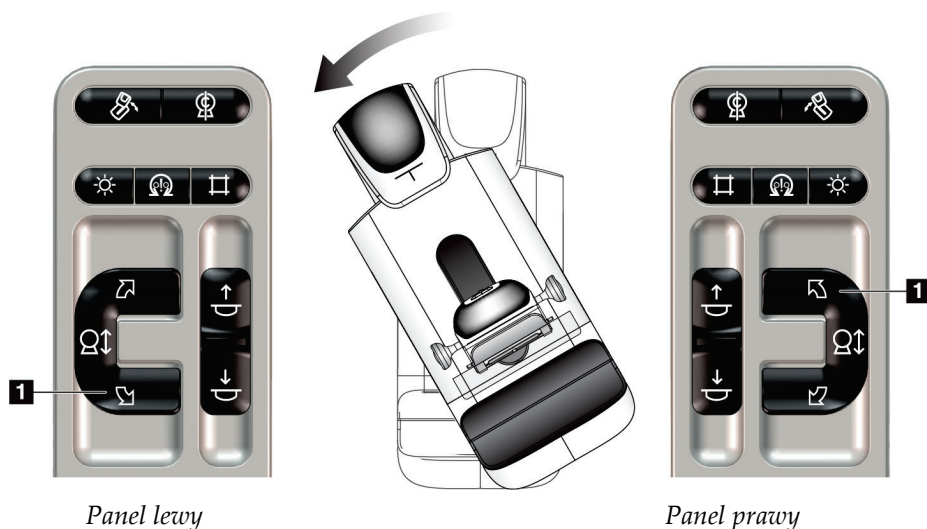


Tabela 4: Obrót ramienia C w prawo

Funkcja	Test funkcjonalny
Obrót ramienia C w prawo	Nacisnąć przycisk <b>Obrót ramienia C w prawo</b> (poz. 1), aby zainicjować obrót ramienia C w prawo. Po zwolnieniu przełącznika ruch ramienia C zatrzymuje się. Aby doprecyzować obrót ramienia C w jednostopniowych segmentach, przytrzymać przycisk przez jedną sekundę, a następnie szybko puścić. W razie potrzeby czynność powtórzyć.

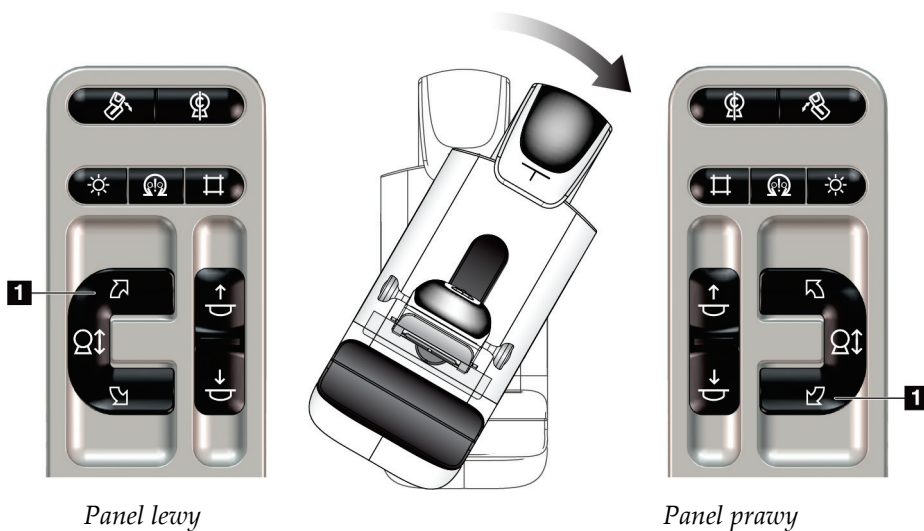


## Przewodnik użytkownika systemu 3Dimensions

### Rozdział 4: Uruchamianie, testy funkcjonalne oraz wyłączenie

Tabela 5: Przełącznik obrotu ramienia C

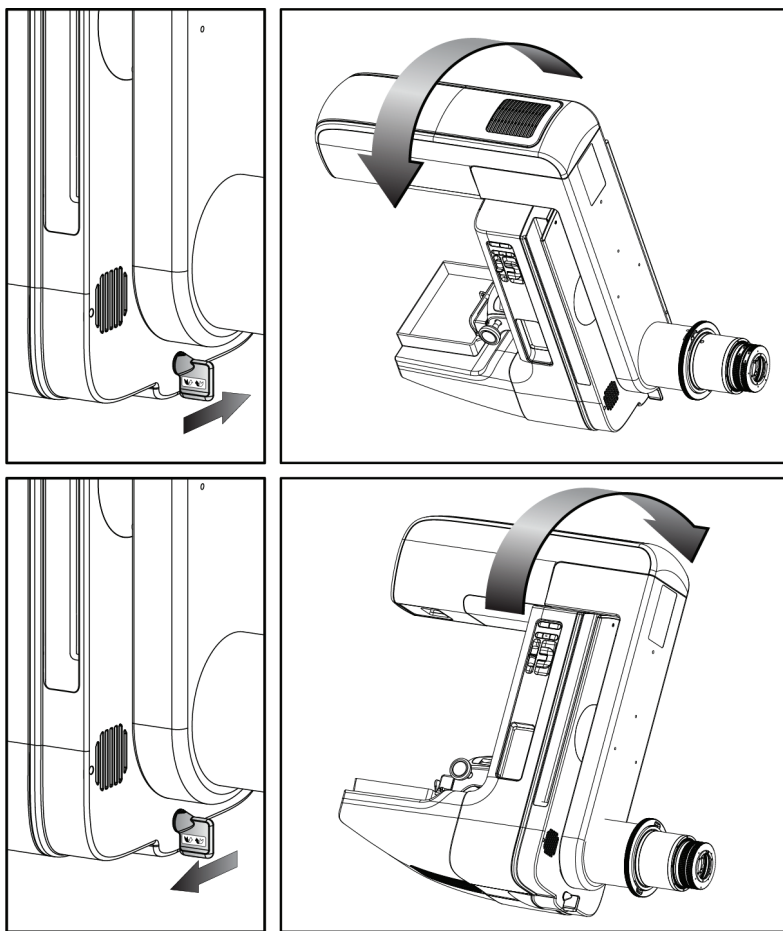Funkcja	Test funkcjonalny
Przełącznik obrotu ramienia C	Aby przesunąć ramię C w kierunku użytkownika, odsunąć od niego przełącznik obrotu ramienia C. Aby odsunąć ramię C od użytkownika, pociągnąć ku sobie przełącznik obrotu ramienia C. Po zwolnieniu przełącznika ruch ramienia C zatrzymuje się.





### Automatyczny obrót ramienia C (Autorotacja)



**Ostrzeżenie:**

Ryzyko uwięzienia. Należy upewnić się, że podczas obrotu odległość ramienia C od wszelkich przedmiotów wynosi co najmniej 50 cm (20 cali). Jeśli ramię C jest bliżej niż 50 cm (20 cali) od jakiegokolwiek przedmiotu, nie należy używać obrotu automatycznego.



**Uwaga**

Aby zatrzymać automatyczny ruch obrotowy ramienia C, naciśnięć dowolny przycisk lub przycisk awaryjnego zatrzymania.



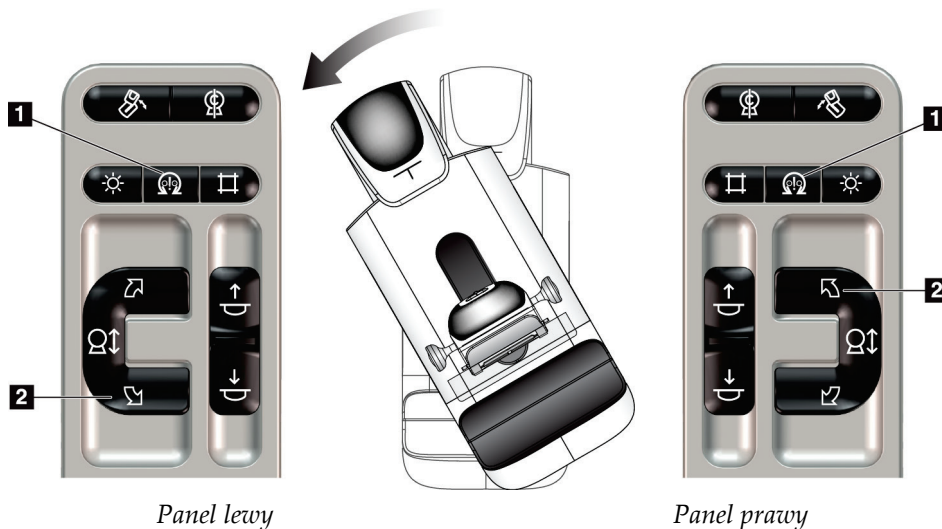
<p>Włączenie silnika</p> 	<p>Naciśnięć równocześnie przyciski <b>Włączenie silnika</b> i <b>Obrót</b> w celu włączenia automatycznego ruchu obrotowego w prawo lub w lewo.</p>
<p>Pozycja zerowa ramienia C</p> 	<p>Naciśnięć jednocześnie przyciski <b>Włączenie silnika</b> i <b>Pozycja zerowa ramienia C</b>. Zwolnić przyciski. Urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy, a ramię C automatycznie powraca do pozycji zerowej.</p>

Tabela 6: Automatyczny obrót ramienia C w lewo

Funkcja	Test funkcjonalny
Automatyczny obrót ramienia C w lewo	Naciśnięć jednocześnie przyciski <b>Włączenie silnika</b> (poz. 1) i <b>Obrót ramienia C w lewo</b> (poz. 2). Zwolnić przyciski. Urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy, a ramię C automatycznie obraca się w lewo.




## Przewodnik użytkownika systemu 3Dimensions

### Rozdział 4: Uruchamianie, testy funkcjonalne oraz wyłączenie

Tabela 7: Automatyczny obrót ramienia C w prawo

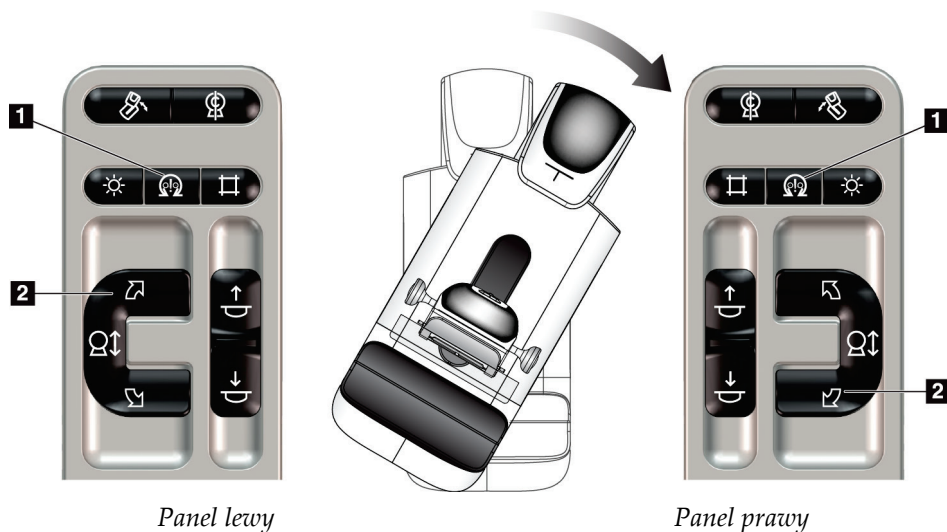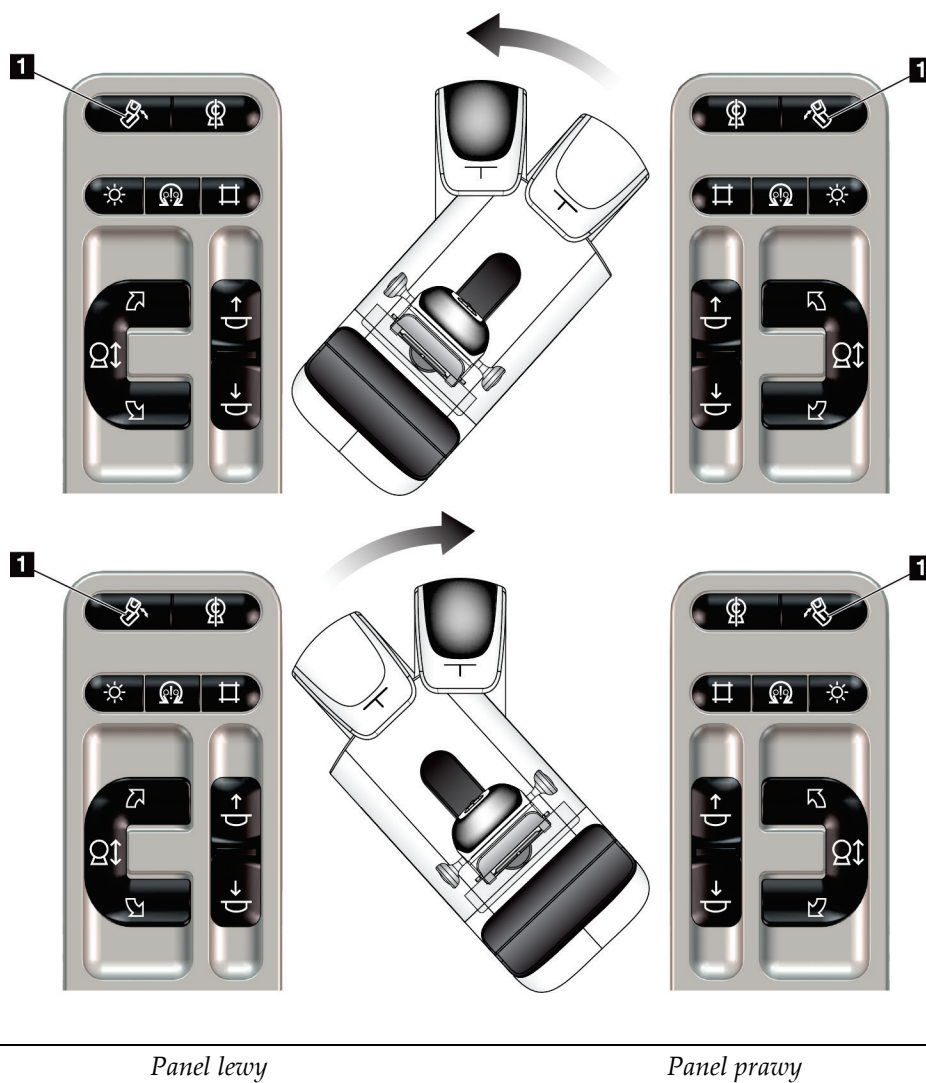
Funkcja	Test funkcjonalny
Automatyczny obrót ramienia C w prawo	Nacisnąć jednocześnie przyciski <b>Włączenie silnika</b> (poz. 1) i <b>Obrót ramienia C w prawo</b> (poz. 2). Zwolnić przyciski. Urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy, a ramię C automatycznie obraca się.



### Automatyczny obrót przy projekcji MLO

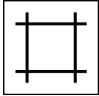

Tabela 8: Automatyczny obrót przy projekcji MLO

Funkcja	Test funkcjonalny
Automatyczny obrót głowicy lampy do pozycji zerowej	Ustawić ramię C pod kątem większym niż 15 stopni. Nacisnąć przycisk <b>Obrót przy projekcji MLO</b> (poz. 1). Głowica lampy automatycznie przemieszcza się do pozycji zerowej. Ramię uciskowe pozostaje w ustawieniu ukośnym. Nacisnąć ponownie przycisk Obrót przy projekcji MLO, aby przywrócić pierwotną pozycję głowicy lampy.



### 4.3.3 Kolimacja

Tabela 9: Kolimacja ramienia C

Funkcja	Test funkcjonalny
<p>Pominięcie kolimatora</p> 	<p>Przycisk <b>Pominięcie kolimatora</b> zmienia kolimację przez różne pola promieniowania RTG.</p> <p>Naciśnij przycisk <b>Lampa do pola świetlnego</b>, aby pokazać pole promieniowania RTG, a następnie naciśnij przycisk <b>Pominięcie kolimatora</b>, aby wybrać pole promieniowania RTG.</p>
<p>Lampa do pola świetlnego</p> 	<p>Dla płytek kompresyjnych: naciśnij przycisk <b>Lampa do pola świetlnego</b>, aby wyświetlać pole promieniowania RTG przez dwie minuty.</p> <p>Dla płytek lokalizacyjnych: naciśnij przycisk <b>Lampa do pola świetlnego</b>, aby wyświetlać pole promieniowania RTG przez skonfigurowany czas. Domyślny czas dla płytek lokalizacyjnych do biopsji lub igły wynosi dziesięć minut.</p> <p>Ponownie naciśnij przycisk <b>Lampa do pola świetlnego</b>, aby wyłączyć lampę do pola świetlnego.</p> <p>Lampa do pola świetlnego zaświeci się automatycznie na początku ruchu kompresji w dół.</p>

#### 4.3.4 Przesuwanie płytek




##### Uwaga


Większość płytek może być używanych z funkcją przesuwania płytek. Duża (24 x 29 cm) bezramkowa płytka do badań przesiewowych, duża (24 x 29 cm) płytka systemu SmartCurve® oraz płytki do powiększeń są niezgodne z funkcją przesuwania płytek.

W celu przetestowania funkcji przesuwania płytek należy użyć bezramkowej płytki 18 x 24 cm do badań przesiewowych.

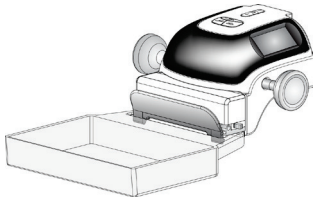Tabela 10: Przesuwanie płytki

Funkcja	Test funkcjonalny
Przesuwanie płytki 	<p>Zakres ruchu płytki 18 x 24 cm do badań przesiewowych wynosi około 2,5 cm w lewo, do środka lub w prawo. Gdy stosowana jest kompresja, nie można wykonywać ruchów płytką. Kolimator jest zaprogramowany w taki sposób, aby śledził położenie tej płytki.</p> <p>Aby przetestować tę funkcję:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zainstaluj płytkę 18 x 24 cm w urządzeniu kompresyjnym.</li><li>2. Wybierz widok.</li><li>3. Użyj przycisków <b>przesuwania płytki</b> na ekranie <i>Procedure</i> (Procedura), aby zastosować zmianę położenia.</li><li>4. Sprawdź, czy płytka automatycznie przesuwa się do nowego położenia.</li><li>5. Włącz lampę do pola świetlnego.</li><li>6. Sprawdź, czy położenie kolimatora odpowiada położeniu płytki.</li><li>7. Powtórz tę procedurę dla innych położzeń płytki.</li></ol>

### 4.4 Działanie wyłączników awaryjnych

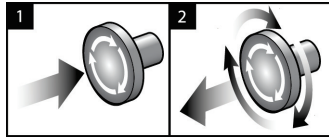

Rycina 19: Działanie wyłącznika awaryjnego

W systemie dostępne są trzy wyłączniki awaryjne: po jednym na każdej stronie gantry i jeden na stacji roboczej akwizycji.


1. Aby wyłączyć gantry i mechanizm podnoszenia stacji roboczej akwizycji, naciśnij dowolny wyłącznik awaryjny.
2. Aby zresetować wyłącznik awaryjny, obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wykonując około jedną czwartą obrotu do momentu wyskoczenia przełącznika na zewnątrz.

### 4.5 Wyłączenie systemu

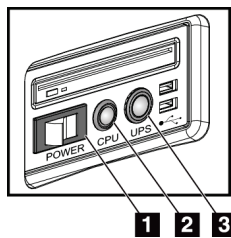1. Zamknij wszystkie otwarte procedury pacjenta. Zapoznaj się z sekcją [Zamykanie rekordu pacjenta](#) na stronie 81.
2. Na ekranie *Select Patient* (Wybór pacjenta) wybierz przycisk **Log Out** (Wyloguj).
3. Na ekranie *Startup* (Uruchamianie) wybierz przycisk **Shutdown** (Zamknij).
4. W oknie dialogowym potwierdzenia wybierz przycisk **Yes** (Tak).

### 4.6 Odłączanie całego zasilania od systemu

Poniższa ilustracja przedstawia przyciski i przełączniki, o których mowa w niżej opisanych procedurach.



Rycina 20: Przyciski zasilania uniwersalnej stacji roboczej akwizycji

#### Legenda rysunku

1. Przełącznik zasilania stacji roboczej akwizycji
2. Przycisk włączania/resetowania komputera
3. Przycisk zasilania zasilacza bezprzerwowego (UPS)

Aby odłączyć całe zasilanie od systemu:

1. Wyłączyć system.
2. Jeżeli system obejmuje zasilacz bezprzerwowy (UPS), nacisnąć przycisk UPS (poz. 3).
3. Wyłączyć przełącznik zasilania stacji roboczej akwizycji (poz. 1).
4. Odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego stacji roboczej akwizycji od gniazda zasilania prądem przemiennym.
5. Wyłączyć wyłącznik zasilania gantry.
6. Wyłączyć wyłącznik sieciowy placówki.

## Rozdział 5 Interfejs użytkownika

### 5.1 Ekran Select Function to Perform (Wybierz funkcję do wykonania)

Po zalogowaniu nastąpi wyświetlenie ekranu *Select Function to Perform* (Wybierz funkcję do wykonania). Na ekranie wyświetlane są wymagane zadania kontroli jakości.



#### Uwaga

Otwarcie ekranu *Select Patient* (Wybierz pacjenta) następuje, gdy nie ma zaplanowanych do wykonania zadań kontroli jakości.

Navn	Sist utført	Forfallsdato
DICOM-skriverkvalitetskontroll		21.02.2022
Få kalibrering		21.02.2022
CEDM Gain Calibration		21.02.2022
Kalibrering av geometri	31.05.2018	05.11.2018
Evaluering av artefakt		21.02.2022
Phantom-bildekvalitet		21.02.2022
SNR/CNR		21.02.2022
Indikator for kompresjonstykkelse		21.02.2022
Diagnostisk gjennomgang av arbeidsstasjonskvalitetskontroll		21.02.2022
Visningsbokser og visningsforhold		21.02.2022
Sjekkliste for visuelt		21.02.2022
Avvise analyse		21.02.2022
Gjenta analyse		21.02.2022
Kompresjonstest		21.02.2022

Antall resultater: 14

0 Manager, Tech ( Manager ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.41.06

Rycina 21: Przykładowy ekran wyboru funkcji do wykonania

#### Wykonanie zaplanowanego zadania kontroli jakości:

1. Wybrać z listy zadanie kontroli jakości.
2. Wybrać przycisk **Start** (Start). Aby wykonać procedurę, postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami. (Przycisk **Start** (Start) nie jest dostępny w przypadku każdego typu testów).  
– LUB –  
Wybrać przycisk **Mark Completed** (Zaznacz zakończone), aby zaznaczyć stan procedury jako zakończonej. Wybrać opcję **Yes** (Tak), aby potwierdzić zakończenie wybranej procedury.
3. Wybrać opcję **End QC** (Zakończ kontrolę jakości).

#### Postępowanie bez kończenia wszystkich zaplanowanych zadań kontroli jakości:

Jeżeli wszystkie zadania kontroli jakości nie zostaną w tym czasie zakończone, wybrać przycisk **Skip** (Pomiń).



#### Uwaga

Po wybraniu przycisku **Skip** (Pomiń) nastąpi otwarcie ekranu *Select Patient* (Wybierz pacjenta). Informacje na temat tego ekranu podano w punkcie [Ekran Select Patient \(Wybierz pacjenta\)](#) na stronie 60.

Po wybraniu przycisku **Admin** (Administrator) nastąpi otwarcie ekranu *Admin* (Administrator). Informacje na temat tego ekranu podano w punkcie Korzystanie z ekranu Admin (Administrator).

---



#### Uwaga

Zadania kontroli jakości są dostępne do wykonania w dowolnym czasie. Wybrać przycisk **Admin** (Administrator), a następnie przycisk **Quality Control** (Kontrola jakości), aby uzyskać dostęp do listy zadań kontroli jakości.

---



## 5.2 Informacje o pasku zadań

Pasek zadań u dołu ekranu wyświetla dodatkowe ikony. Należy wybrać ikonę, aby uzyskać dostęp do informacji lub wykonać zadania systemowe.



Rycina 22: Pasek zadań

Tabela 11: Menu paska zadań

	Opis	Menu
1	<p><b>Ikona informacji</b></p> <p>Wybierz ikonę <b>Informacje</b>, aby wyświetlić menu Alarms (Alarmy). W przypadku alarmu ta sekcja paska zadań miga na żółto. Aby wyłączyć migające wskazanie, wybierz opcję <b>Acknowledge All</b> (Zatwierdź wszystkie). Aby wyświetlić i zamknąć jakiegokolwiek otwarte alarmy, wybierz opcję <b>Manage Alarms</b> (Zarządzaj alarmami).</p>	<p>Brak alarmów</p> <hr/> <p>Potwierdź wszystko</p> <p>Zarządzaj alarmami ...</p>
2	<p><b>Nazwa bieżącego użytkownika</b></p> <p>Wybierz sekcję paska zadań z nazwą użytkownika, aby wyświetlić menu Users (Użytkownicy). Wybranie opcji <b>Log Out</b> (Wyloguj) spowoduje powrót do ekranu <i>Startup</i> (Uruchamianie). Opcja <b>My Settings</b> (Moje ustawienia) umożliwia wybieranie ustawień użytkownika oraz preferencji procedury. Opcja <b>Print</b> (Drukuj) powoduje wysłanie wyświetlanej listy pacjentów do podłączonej drukarki.</p>	<p>Menu Użytkownicy</p> <hr/> <p>Wylogowanie ...</p> <p>Moje ustawienia ...</p> <hr/> <p>Druk ...</p>

Tabela 11: Menu paska zadań



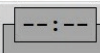
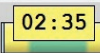







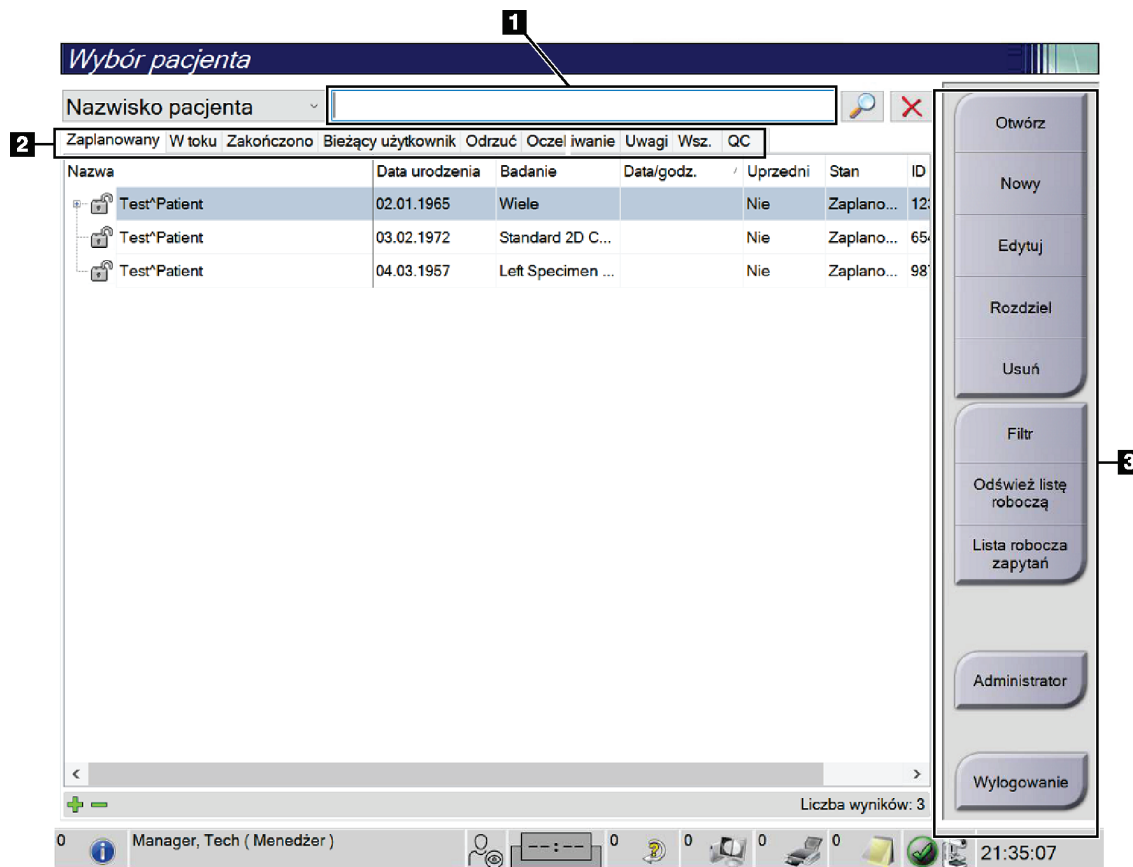
	Opis	Menu												
 	<p style="text-align: center;"><b>Wskaźnik priorytetu odczytu</b></p> <p>Wskaźnik priorytetu odczytu jest wyświetlany w przypadku dostępności modułu Genius AI Detection. Kolor ikony zmienia się na żółty, jeżeli istnieją pacjenci oznaczeni jako pacjenci o wysokim priorytecie do odczytu na podstawie wyników uzyskanych dzięki Genius AI Detection. Wybierz ikonę <b>Priorytet odczytu</b>, aby wyświetlić listę pacjentów oznaczonych wysokim priorytetem odczytu przez oprogramowanie Genius AI Detection. Wybierz przycisk <b>X</b>, aby usunąć pacjenta z listy priorytetów odczytu. Więcej informacji na ten temat podano w punkcie <a href="#">Informacje o module Genius AI Detection</a> na stronie 9.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center; background-color: #002060; color: white; margin: 0;"><b>Priorytet odczytu</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Nazwisko pacjenta</th> <th style="text-align: left;">Godzina zakończenia</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Patient, Test</td> <td>00.02:16 temu</td> <td style="text-align: center;">⊗</td> </tr> <tr> <td>Patient, Test 2</td> <td>00.02:06 temu</td> <td style="text-align: center;">⊗</td> </tr> <tr> <td>Test, Patient</td> <td>00.01:13 temu</td> <td style="text-align: center;">⊗</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Nazwisko pacjenta	Godzina zakończenia		Patient, Test	00.02:16 temu	⊗	Patient, Test 2	00.02:06 temu	⊗	Test, Patient	00.01:13 temu	⊗	
Nazwisko pacjenta	Godzina zakończenia													
Patient, Test	00.02:16 temu	⊗												
Patient, Test 2	00.02:06 temu	⊗												
Test, Patient	00.01:13 temu	⊗												
 	<p style="text-align: center;"><b>Licznik czasu środka kontrastowego</b></p> <p>Licznik czasu środka kontrastowego jest wyświetlany, jeżeli dostępna jest <a href="#">Obrazy I-View 2D wzmocnione kontrastem</a> na stronie 110. Aktywacja licznika czasu ma miejsce w czasie obrazowania z kontrastem 2D. Licznik czasu wyświetla informację o ilości pozostałego czasu w każdej fazie kontrastu. Kolor licznika czasu wskazuje fazę kontrastu.</p> <p>(Początek) Żółty = okres oczekiwania, środek kontrastowy nie uległ całkowitej dyspersji.</p> <p>Zielony = optymalny okres obrazowania, środek kontrastowy uległ całkowitej dyspersji.</p> <p>(Koniec) Żółty = okres późny, środek kontrastowy rozprasza się.</p>													
<p>3</p>   	<p style="text-align: center;"><b>Ikony urządzeń wyjściowych</b></p> <p>Wybierz dowolne urządzenie wyjściowe, aby wyświetlić ekran <i>Manage Queues</i> (Zarządzaj kolejkami). Na tym ekranie wyświetlane są statusy zadań w kolejce, informacje o zadaniach dla wybranego urządzenia wyjściowego, a ponadto wyświetlaną kolejkę można filtrować. Numer na ikonie wskazuje liczbę zadań, które pozostają w kolejce.</p>													

Tabela 11: Menu paska zadań

	Opis	Menu
4 	<p><b>Ikona Uwagi</b></p> <p>Wybierz ikonę <b>Uwagi</b>, aby wyświetlić ekran <i>Patients with Unviewed Notices</i> (Pacjenci z niewyświetlonymi uwagami). Numer na ikonie wskazuje liczbę pacjentów z niewyświetlonymi uwagami.</p>	
5   	<p><b>Ikony Status systemu</b></p> <p>Jeśli obok ikony <b>Status systemu (głowica lampy)</b> widoczny jest zielony znacznik wyboru, oznacza to, że system jest gotowy do użytkowania. Wybierz ikonę <b>Status systemu</b>, aby wyświetlić menu Faults (Usterki).</p> <p>Jeśli ikona <b>Status systemu</b> ma kolor czerwony, a obok niej widoczna jest liczba, wówczas zanim możliwe będzie bezpieczne zarejestrowanie następnego ekranu, należy poczekać pokazaną liczbę minut.</p> <p>Jeśli obok ikony <b>Status systemu</b> widoczny jest żółty znak wykrzyknika, a ta sekcja paska zadań miga na czerwono, oznacza to, że wystąpił błąd. Aby uzyskać więcej informacji o tym błędzie, wybierz ikonę <b>Status systemu</b>.</p> <p>Opcja <b>Clear All Faults</b> (Kasuj wszystkie usterki) umożliwia usunięcie wszystkich komunikatów dotyczących usterek.</p> <p>Opcja <b>X-ray Tube, 0 Degrees</b> (Lampa RTG, 0 stopni) powoduje ustawienie głowicy lampy w położeniu obrotu o zero stopni w celu wykonania następnej ekspozycji.</p> <p>Opcja <b>Lampa RTG, -15 stopni</b> powoduje ustawienie głowicy lampy w położeniu obrotu o -15 stopni w celu wykonania ekspozycji.</p> <p>Opcja <b>Lampa RTG, +15 stopni</b> powoduje ustawienie głowicy lampy w położeniu obrotu o +15 stopni w celu wykonania ekspozycji.</p> <p>Opcja <b>System Diagnostics</b> (Diagnostyka systemu) umożliwia dostęp do obszaru ustawień podsystemu.</p> <p>Opcja <b>System Defaults</b> (Domyślne ustawienia systemu) powoduje otwarcie ekranu <i>Gantry Defaults</i> (Domyślne ustawienia gantry), na którym można ustawić domyślne wartości ustawień kompresji i gantry.</p> <p>Opcja <b>About</b> (Informacje o) powoduje wyświetlenie informacji o stacji roboczej akwizycji (patrz <a href="#">Ekran About (Informacje)</a> na stronie 152).</p>	<p>Brak awarii</p> <hr/> <p>Wyczyść wszystkie awarie Lampa RTG, 0 stopni Lampa RTG, -15 stopni Lampa RTG, +15 stopni Diagnostyka systemu ... Ustawienia domyślne systemu ... Informacje ...</p>

### 5.3 Ekran Select Patient (Wybierz pacjenta)



Rycina 23: Ekran Select Patient (Wybierz pacjenta)

Tabela 12: Ekran Select Patient (Wybierz pacjenta)


Pozycja	Opis
1. Pole szybkiego wyszukiwania	Przeszukiwanie wybranej karty pod kątem imienia i nazwiska pacjenta, identyfikatora pacjenta lub numeru przyjęcia.
2. Karty	<p>Karty u góry ekranu są konfigurowalne. Użytkownik dysponujący odpowiednimi uprawnieniami może usuwać karty i tworzyć nowe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Karta <b>Scheduled</b> (Zaplanowane) zawiera zaplanowane procedury.</li> <li>• Karta <b>In Progress</b> (W toku) zawiera procedury niezakończone.</li> <li>• Karta <b>Completed</b> (Zakończone) obejmuje zakończone procedury.</li> <li>• Karta <b>Current User</b> (Aktualny użytkownik) wyświetla procedury dla aktualnego operatora.</li> <li>• Karta <b>Reject</b> (Odrzucone) wyświetla procedury z odrzuconymi widokami.</li> <li>• Karta <b>Pend</b> (Zawieszony) zawiera procedury z widokami zawieszonymi.</li> <li>• Karta <b>All</b> (Wszystkie) wyświetla wszystkie procedury dla wszystkich użytkowników.</li> <li>• Karta <b>Notices</b> (Uwagi) wyświetla pacjentów z niewyświetlonymi uwagami (domyślnie). Pełne informacje na ten temat podano w punkcie <a href="#">Informacje o karcie Notices (Uwagi)</a> na stronie 62.</li> <li>• Karta <b>QC</b> (Kontrola jakości) wyświetla procedury kontroli jakości.</li> <li>• Karta <b>Enterprise</b> (Placówka) jest wyświetlana, jeżeli użytkownik dysponuje silnikiem <a href="#">Menedżer Advanced Workflow Manager</a> na stronie 70. Ta karta zawiera listę wszystkich badań pozyskanych przez systemy należące do grupy Advanced Workflow Manager (Zaawansowany menedżer przepływu pracy). Z poziomu tej karty odbywa się zarządzanie badaniami.</li> </ul>  <p style="text-align: center;">Rycina 24: Karta Enterprise (Placówka)</p>

Tabela 12: Ekran *Select Patient* (Wybierz pacjenta)

Pozycja	Opis
<b>3. Przyciski</b>	<p>Dostęp do wielu funkcji z poziomu tego ekranu jest możliwy po wybraniu konkretnego przycisku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Open</b> (Otwórz): Otwieranie wybranego pacjenta.</li> <li>• <b>New</b> (Nowy): Dodawanie nowego pacjenta — patrz punkt <a href="#">Dodawanie nowego pacjenta</a> na stronie 63.</li> <li>• <b>Edit</b> (Edytuj): Edycja informacji o pacjencie — patrz punkt <a href="#">Edycja informacji o pacjencie</a> na stronie 64.</li> <li>• <b>Split</b> (Rozdziel): Usuwanie obrazów z procedury lub pacjenta i przenoszenie obrazów do innej procedury lub pacjenta — patrz punkt <a href="#">Podział rekordów pacjentów</a> na stronie 64.</li> <li>• <b>Delete</b> (Usuń): Usuwanie wybranego pacjenta — patrz punkt <a href="#">Usuwanie pacjenta</a> na stronie 67.</li> <li>• <b>Filter</b> (Filtruj): Korzystanie z filtra pacjentów — patrz punkt <a href="#">Filtry dla pacjentów</a> na stronie 67.</li> <li>• <b>Refresh Worklist</b> (Odśwież listę roboczą): Aktualizacja informacji z listy roboczej zaplanowanych pacjentów — patrz punkt <a href="#">Odświeżanie listy roboczej</a> na stronie 69.</li> <li>• <b>Query Worklist</b> (Wyszukaj na liście roboczej): Wyszukiwanie pacjenta na liście roboczej procedur — patrz punkt <a href="#">Zapytanie do listy roboczej</a> na stronie 69.</li> <li>• <b>Admin</b> (Administrator): Dostęp do ekranu <i>Admin</i> (Administrator) — patrz punkt Korzystanie z ekranu Admin (Administrator).</li> <li>• <b>Log Out</b> (Wyloguj): Wyjście z systemu — patrz punkt <a href="#">Wylogowanie</a> na stronie 70.</li> </ul>

### 5.3.1 Informacje o karcie Notices (Uwagi)

- Po wybraniu karty **Notices** (Uwagi) z ekranu *Select Patient* (Wybór pacjenta) wyświetlana jest lista pacjentów z uwagami.
- Wartością domyślną dla listy są pacjenci z uwagami wyświetlonymi i niewyświetlonymi.
- Wartość można zmienić, aby wyświetlać pacjentów z uwagami wyświetlonymi lub pacjentów z uwagami niewyświetlonymi.
- Aby uzyskać dostęp do ekranu *Procedure* (Procedura) dla wybranego pacjenta, wybierz przycisk **Open** (Otwórz).

### 5.3.2 Otwieranie rekordu pacjenta

1. Wybierz kartę, aby wyświetlić żądaną listę pacjentów.
2. Wybierz pacjenta z listy. Przycisk **Open** (Otwórz) stanie się aktywny.
3. Aby uzyskać dostęp do ekranu *Procedure* (Procedura) dla konkretnego pacjenta, wybierz przycisk **Open** (Otwórz).

### 5.3.3 Dodawanie nowego pacjenta

1. Na ekranie *Select Patient* (Wybierz pacjenta) wybrać przycisk **New** (Nowy). Nastąpi otwarcie ekranu *Add Patient* (Dodaj pacjenta).

*Dodaj pacjenta*

Ostatni*	<input type="text"/>
Pierwszy	<input type="text"/>
Drugi inicjał	<input type="text"/>
ID pacjenta*	<input type="text"/>
Data urodzenia*	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Płeć*	Kobieta
Numer przyjęcia	<input type="text"/>
Procedura*	Conventional
	Standard Screening - Conventional

Otwórz

Wstecz

0 Manager, Tech (Menedżer) 0 0 0 0 0 0 0 21:35:41

Rycina 25: Ekran *Add Patient* (*Dodaj pacjenta*)

2. Wprowadzić informacje o nowym pacjencie i wybrać procedurę.
3. Wybrać przycisk **Open** (Otwórz). Zostanie wyświetlony ekran *Procedure* (Procedura) dla nowego pacjenta.

### 5.3.4 Edycja informacji o pacjencie

1. Na ekranie *Select Patient* (Wybór pacjenta) wybierz nazwę pacjenta, a następnie przycisk **Edit** (Edycja).
2. Wprowadź zmiany na ekranie *Edit Patient* (Edytuj pacjenta), a następnie wybierz przycisk **Save** (Zapisz).
3. W komunikacie *Update Successful* (Aktualizacja przebiegła pomyślnie) wybierz przycisk **OK**.

### 5.3.5 Podział rekordów pacjentów

Funkcja rozdzielania umożliwia przenoszenie obrazów w sytuacji, gdy zostały pozyskane w toku niewłaściwej procedury lub u niewłaściwego pacjenta.



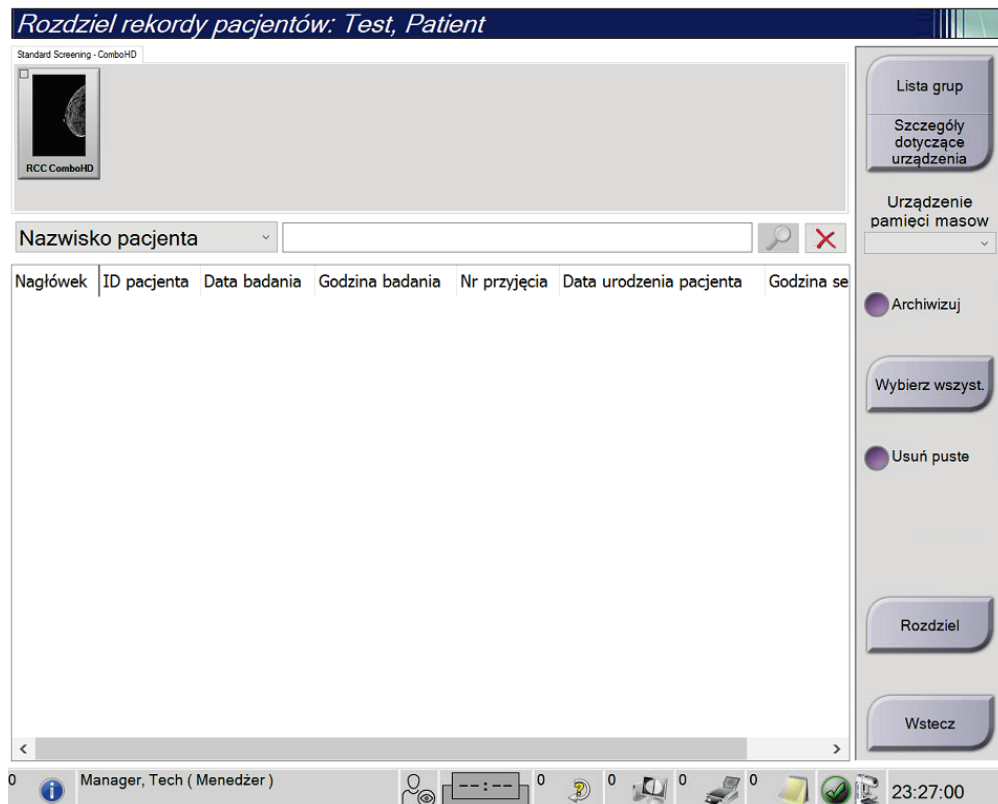
#### Uwaga

Nie ma możliwości rozdzielania obrazów w przypadku pacjentów chronionych.



#### Uwaga

Po użyciu funkcji rozdzielania zarchiwizowane kartoteki pacjentów nadal wymagają korekty w systemie PACS lub innych systemach archiwizacji.



Rycina 26: Ekran *Split Patient Records* (Rozdziel kartotekę pacjenta)




### Obrazy pozyskane w toku niewłaściwej procedury

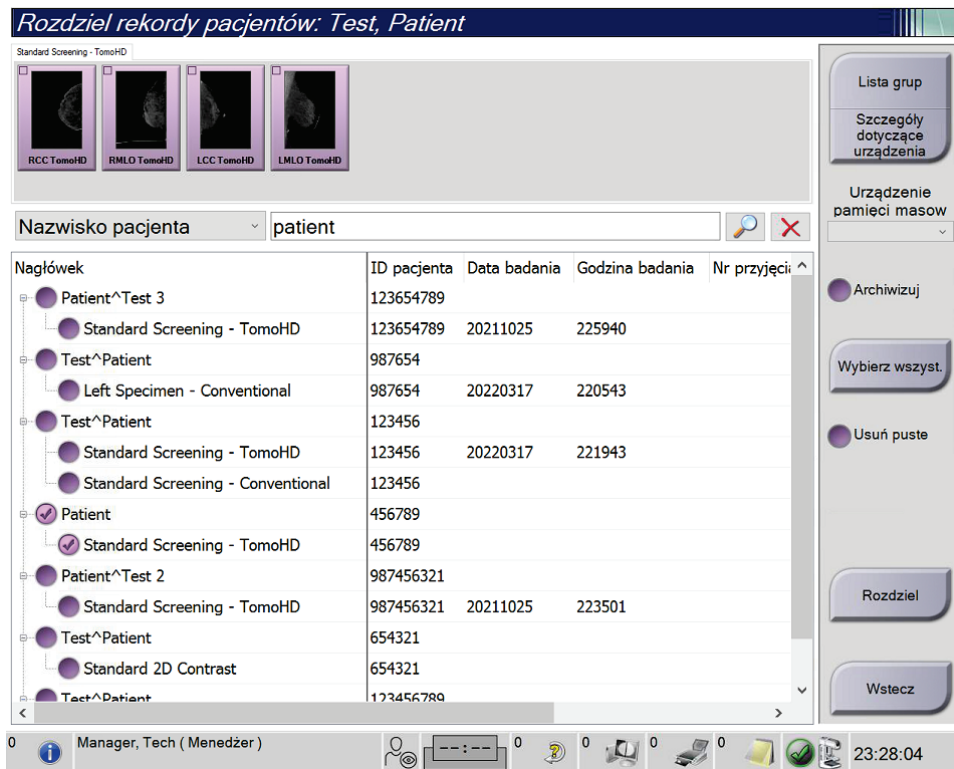1. Na ekranie *Select Patient* (Wybierz pacjenta) wybrać pacjenta.
2. Wybrać przycisk **Split** (Rozdziel). Nastąpi otwarcie ekranu *Split Patient Records* (Rozdziel kartotekę pacjenta).
3. Wybrać obrazy do przeniesienia. Jeżeli przenoszone są wszystkie obrazy, wybrać opcję **Select All** (Wybierz wszystkie).
4. Wybrać kryteria wyszukiwania (np. Patient Name (Nazwisko pacjenta) lub Accession Number (Numer przyjęcia)), korzystając z poniższej listy rozwijanej.
5. Wprowadzić te same informacje o pacjencie i wybrać przycisk **Szukaj** (ikona lupy).
6. Po pojawieniu się nazwiska pacjenta wybrać właściwą procedurę dla obrazów.
7. Jeżeli WSZYSTKIE obrazy są przenoszone i użytkownik chce usunąć nieprawidłową procedurę, wybrać opcję **Delete Empty** (Usuń pustą).
8. W przypadku zamiaru zarchiwizowania obrazów lub zapisania ich w urządzeniu, wybrać opcję **Archive** (Archiwizuj). Sprawdzić, czy wybrano właściwe elementy.
9. Wybrać opcję **Split** (Rozdziel), a następnie **OK** (OK) w oknie komunikatu *Split Successful* (Rozdzielenie powiodło się).

### Obrazy pozyskane u niewłaściwego pacjenta

1. Na ekranie *Select Patient* (Wybierz pacjenta) wybrać pacjenta, do którego są przypisane obrazy wymagające przeniesienia.
2. Wybrać przycisk **Split** (Rozdziel). Nastąpi otwarcie ekranu *Split Patient Records* (Rozdziel kartotekę pacjenta).
3. Wybrać obrazy do przeniesienia. Jeżeli przenoszone są wszystkie obrazy, wybrać opcję **Select All** (Wybierz wszystkie).
4. Wybrać kryteria wyszukiwania (np. Patient Name (Nazwisko pacjenta) lub Accession Number (Numer przyjęcia), korzystając z poniższej listy rozwijanej).
5. Wprowadzić kryteria wyszukiwania i wybrać przycisk **Szukaj** (ikona lupy).
6. Po pojawieniu się nazwiska pacjenta wybrać właściwą procedurę.



Rycina 27: Wybór właściwej procedury w celu rozdzielania kartoteki pacjenta

7. Jeżeli WSZYSTKIE obrazy są przenoszone i użytkownik chce usunąć nieprawidłowego pacjenta z listy pacjentów, wybrać opcję **Delete Empty** (Usuń pustą).
8. W przypadku zamiaru zarchiwizowania obrazów lub zapisania ich w urządzeniu, wybrać opcję **Archive** (Archiwizuj). Sprawdzić, czy wybrano właściwe elementy.
9. Wybrać opcję **Split** (Rozdziel), a następnie **OK** (OK) w oknie komunikatu *Split Successful* (Rozdzielenie powiodło się).

### 5.3.6 Usuwanie pacjenta



#### Uwaga

Odzyskiwanie miejsca na dysku standardowo eliminuje konieczność ręcznego usuwania rekordów pacjentów. Patrz: [Informacje o odzyskiwaniu miejsca na dysku](#) na stronie 148.

1. Na ekranie *Select Patient* (Wybór pacjenta) wybierz co najmniej jednego pacjenta.
2. Wybierz przycisk **Delete** (Usuń).
3. Gdy pojawi się monit dotyczący potwierdzenia, wybierz przycisk **Yes** (Tak).



#### Uwaga

Technolodzy nie mają uprawnień do usuwania pacjentów.

### 5.3.7 Filtry dla pacjentów

Po wybraniu przycisku **Filter** (Filtruj) na ekranie *Select Patient* (Wybierz pacjenta) nastąpi otwarcie ekranu *Patient Filter* (Filtr pacjentów) dla wybranej listy pacjentów.

**Filtr pacjenta: Scheduled**

Filtr Kolumny

- Nazwisko pacjenta
- ID pacjenta
- Numer przyjęcia
- Zakres: Dzisiaj
- Dyspozycja:
  - Oczekujący
  - Odrzucone
  - Zaakceptowano
- Rola: Śr
- Źródło:
  - Lista robocza
  - Lokalna
- Stan uwagi:
  - Niewyświetlone

**Wyniki**

Nazwa	Data urodzenia	Badanie	Data/godz.	Uprzedni	Stan	ID
Test*Patient	02.01.1965	Wiele		Nie	Zaplano...	123
Test*Patient	03.02.1972	Standard 2D C...		Nie	Zaplano...	654
Test*Patient	04.03.1957	Left Specimen ...		Nie	Zaplano...	987

Liczba wyników: 3

Manager, Tech ( Menedzer ) 21:37:48

Rycina 28: Karta Filter (Filtr) na ekranie Patient Filter (Filtr pacjentów)

### Karta Filter (Filtr)

Karta **Filter** (Filtr) umożliwia zmianę opcji filtrów dla listy pacjentów. Wybranie lub anulowanie opcji powoduje zmianę, która jest widoczna w obszarze Results (Wyniki) na ekranie.



#### Uwaga

W celu zapisywania tych nowych filtrów na wybranej karcie w ekranie *Select Patient* (Wybór pacjenta) użytkownik musi dysponować dostępem na poziomie menedżera. (Patrz: [Inne funkcje na karcie Filter \(Filtr\)](#) na stronie 68).



#### Uwaga

Wybranie wiersza na liście wyników, a następnie wybranie przycisku **Open** (Otwórz) spowoduje otwarcie ekranu *Procedure* (Procedura) dla wybranej pacjentki.

### Inne funkcje na karcie Filter (Filtr)

Na karcie **Filter** (Filtr) użytkownicy posiadający prawa dostępy mogą dodawać, zmieniać i usuwać karty na ekranie *Select Patient* (Wybór pacjenta). Informacje zawiera poniższa tabela.

Tabela 13: Opcje na karcie Filter (Filtr) (wymagają praw dostępu)

Zmiana bieżących parametrów filtrowania rekordów pacjentów.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wybierz kartę na ekranie <i>Select Patient</i> (Wybór pacjenta).</li><li>2. Wybierz przycisk <b>Filter</b> (Filtr).</li><li>3. Wybierz opcje filtra.</li><li>4. Wybierz przycisk <b>Save</b> (Zapisz).</li><li>5. Upewnij się, że nazwa wybranej karty jest widoczna w polu nazwy.</li><li>6. Wybierz przycisk <b>OK</b>.</li></ol>
Tworzenie nowej karty na ekranie <i>Select Patient</i> (Wybór pacjenta).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wybierz kartę na ekranie <i>Select Patient</i> (Wybór pacjenta).</li><li>2. Wybierz przycisk <b>Filter</b> (Filtr).</li><li>3. Wybierz opcje filtra dla karty.</li><li>4. Wybierz przycisk <b>Save As</b> (Zapisz jako).</li><li>5. Wprowadź nową nazwę dla karty.</li><li>6. Wybierz przycisk <b>OK</b>.</li></ol>
Usuwanie karty z ekranu <i>Select Patient</i> (Wybór pacjenta).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wybierz kartę na ekranie <i>Select Patient</i> (Wybór pacjenta).</li><li>2. Wybierz przycisk <b>Filter</b> (Filtr).</li><li>3. Wybierz przycisk <b>Delete</b> (Usuń).</li><li>4. W oknie dialogowym potwierdzenia wybierz przycisk <b>Yes</b> (Tak).</li></ol>

### Karta Columns (Kolumny)

Karta **Columns** (Kolumny) umożliwia dodawanie opcji wyszukiwania (na przykład Age (Wiek), Gender (Płeć), Notices (Uwagi)) do filtrowanej listy. Te opcje pokazują się jako kolumny w obszarze wyników. W celu dodania dodatkowych kolumn do filtrowanej listy należy wybrać kartę **Columns** (Kolumny), a następnie wybrać opcje.



#### Uwaga

W celu zapisania tych nowych kolumn w filtrze rekordów pacjentów użytkownik musi dysponować dostępem na poziomie menedżera.

---



#### Uwaga

Wybranie wiersza na liście wyników, a następnie wybranie przycisku **Open** (Otwórz) spowoduje otwarcie ekranu *Procedure* (Procedura) dla wybranej pacjentki.

---

### Przycisk Order Tabs (Kolejność kart)

Przycisk **Order Tabs** (Kolejność kart) należy wybrać, aby zmienić kolejność kart na liście pacjentów.

#### 5.3.8 Odświeżanie listy roboczej

Przycisk **Refresh Worklist** (Odśwież listę roboczą) należy wybrać, aby zaktualizować listę zaplanowanych pacjentów od dostawcy listy roboczej modalności.

#### 5.3.9 Zapytanie do listy roboczej

Przycisk **Query Worklist** (Zapytanie do listy roboczej) należy wybrać, aby wyszukiwać dostawcę listy roboczej modalności pod kątem rekordu pacjenta lub listy rekordów pacjentów.

Dostępne są dwie metody wprowadzania danych zapytania:

- **Klawiatura** — wpisz dane zapytania do co najmniej jednego pola. Zostanie wyświetlona zaplanowana procedura, a rekord pacjenta zostanie dodany do lokalnej bazy danych. Wszystkie pola zapytania mogą być skonfigurowane. Domyślne pola to Patient name (Nazwisko pacjenta), Patient ID (Identyfikator pacjenta), Accession Number (Numer przyjęcia), Requested Procedure ID (Identyfikator żądanej procedury) oraz Scheduled Procedure Date (Zaplanowana data procedury).
- **Skaner kodów kreskowych** — zeskanuj kod kreskowy dla skonfigurowanego pola zapytania. Zostanie wyświetlona zaplanowana procedura, a rekord pacjenta zostanie dodany do lokalnej bazy danych. Pole skanowane przez kod kreskowy można skonfigurować. Domyślnym polem zapytania może być Patient ID (Identyfikator pacjenta), Accession Number (Numer przyjęcia) lub Requested Procedure ID (Identyfikator żądanej procedury).

#### 5.3.10 Admin (Administrator)

Przycisk **Admin** (Administrator) umożliwia dostęp do ekranu *Admin* (Administrator) oraz do funkcji administracyjnych systemu. Więcej informacji zawiera sekcja [Interfejs administracyjny systemu](#) na stronie 149.

#### 5.3.11 Wylogowanie

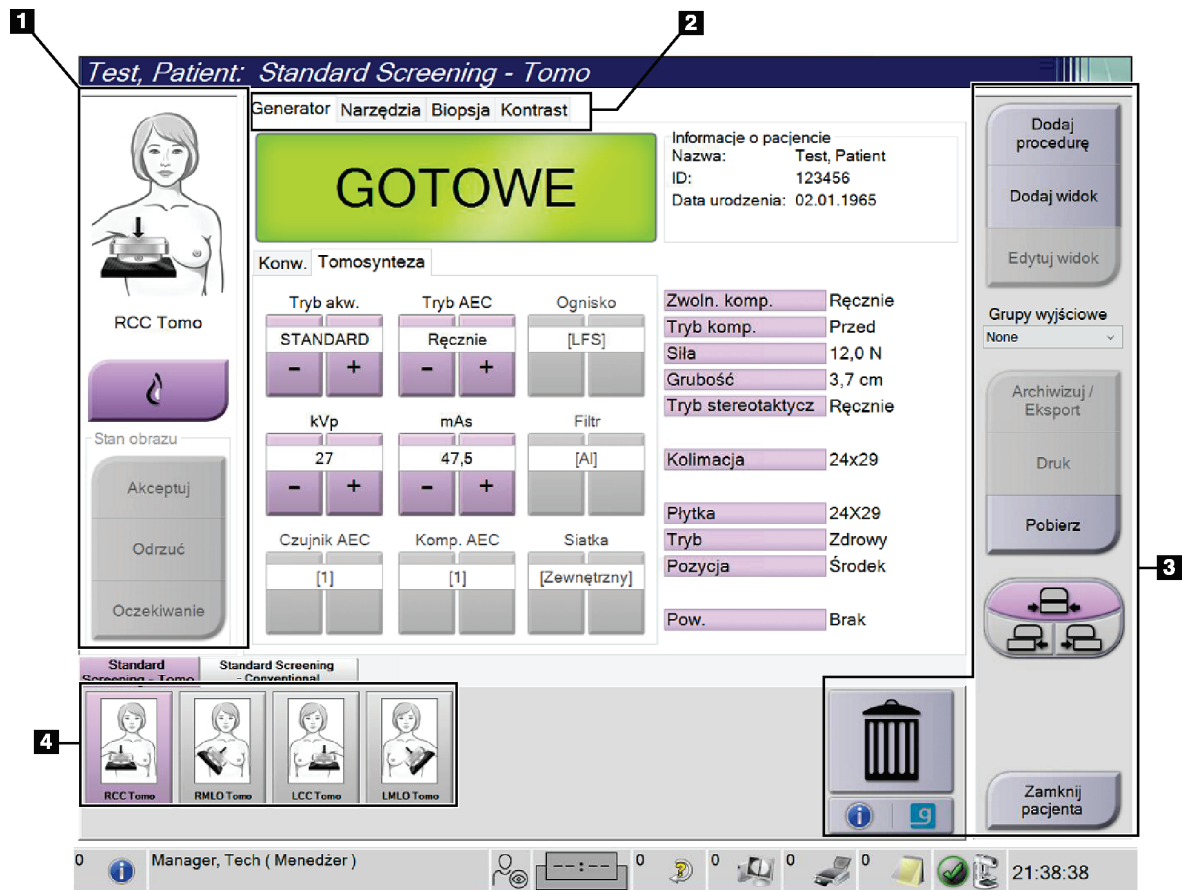
Przycisk **Log Out** (Wylogowanie) umożliwia wyjście z systemu i powrót do ekranu *Startup* (Uruchamianie).

#### 5.3.12 Menedżer Advanced Workflow Manager

Advanced Workflow Manager to mechanizm przepływu pracy, który umożliwia komunikowanie się zgodnych systemów firmy Hologic i pozwala na wymianę informacji między nimi. Menedżer Advanced Workflow Manager śledzi wszystkich pacjentów, procedury oraz obrazy zarejestrowane na wszystkich systemach w klastrze Advanced Workflow Manager. Ponadto menedżer Advanced Workflow Manager synchronizuje uwagi i przekazuje obrazy do wszystkich systemów w klastrze.

W systemach z menedżerem Advanced Workflow Manager karta Enterprise (Przedsiębiorstwo) jest wyświetlana na [Ekran Select Patient \(Wybierz pacjenta\)](#) na stronie 60. Ta karta zawiera procedury zarejestrowane na wszystkich systemach w klastrze Advanced Workflow Manager.

## 5.4 Ekran Procedure (Procedura)



Rycina 29: Ekran Procedure (Procedura)

Tabela 14: Ekran Procedure (Procedura)

Pozycja	Opis
<b>1. Stan obrazu</b>	<p>Ikona widoku przedstawia aktualnie wybrany widok.</p> <p>Przycisk <b>Implant Present</b> (Obecność implantu) – wybrać, jeżeli pacjentka ma implant.</p> <p>Przycisk <b>Accept</b> (Zatwierdź) – wybrać, aby zaakceptować obraz.</p> <p>Przycisk <b>Reject</b> (Odrzuć) – wybrać, aby odrzucić obraz.</p> <p>Przycisk <b>Pend</b> (Zawieś) – wybrać, aby zapisać obraz do późniejszego przeglądu.</p>
<b>2. Karty</b>	<p>Wybrać kartę <b>Generator</b> (Generator), aby dostosować techniki ekspozycji do procedury.</p> <p>Wybrać kartę <b>Tools</b> (Narzędzia), aby przejrzeć obrazy.</p> <p>Wybrać kartę <b>Biopsy</b> (Biopsja), aby utworzyć cele.</p> <p>Wybrać kartę <b>Contrast</b> (Kontrast), aby wykonać procedury z kontrastem I-View™ 2D.</p>
<b>3. Przyciski</b>	<p>Dostęp do wielu funkcji z poziomu tego ekranu jest możliwy po wybraniu konkretnego przycisku:</p> <p><b>Add Procedure (Dodaj procedurę):</b> Dodanie nowego pacjenta.</p> <p><b>Add View (Dodaj widok):</b> Dodanie nowego widoku.</p> <p><b>Edit View (Edytuj widok):</b> Przypisanie obrazowi innego widoku.</p> <p><b>Archive/Export (Archiwizuj/eksportuj):</b> Wysyłanie obrazów.</p> <p><b>Print (Drukuj):</b> Drukowanie obrazów.</p> <p><b>Retrieve (Pobierz):</b> Zapytanie skonfigurowanych urządzeń o aktualne informacje o pacjencie.</p> <p><b>Przesunięcie stolika:</b> Wyłączenie domyślnej pozycji stolika dla wybranego widoku.</p> <p><b>Close Patient (Zamknij pacjenta):</b> Zamknięcie pacjenta i procedury.</p> <p><b>Kosz:</b> Usunięcie widoku.</p>
<b>4. Miniatury</b>	<p>Wybrać kartę, aby wyświetlić miniatury widoków lub miniatury obrazów dla danej procedury.</p>



### 5.4.1 Użycie przycisku Implant Present (Obecny implant)

Przycisk **Implant Present** (Obecny implant) znajduje się nad przyciskiem **Accept** (Akceptuj) na ekranie *Procedure* (Procedura). Ten przycisk powoduje zastosowanie specjalnego przetwarzania widoków implantu oraz implantu przemieszczonego, a ponadto zmienia znacznik DICOM „Obecny implant” w nagłówku obrazu. Wybranie tego przycisku powoduje wyświetlenie na nim znacznika wyboru.



Przycisk **Implant Present** (Obecny implant) należy wybrać dla widoków implantu i implantu przemieszczonego przed zarejestrowaniem obrazu.



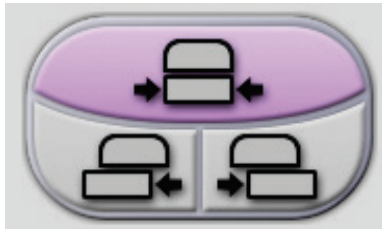
#### Uwaga

Przycisk **Implant Present** (Obecny implant) jest wybierany automatycznie, jeśli otwarta procedura zawiera widok z identyfikatorem.

### 5.4.2 Korzystanie z funkcji przesuwania płytki

Informacje na temat funkcji przesuwania płytki zawiera sekcja [Przesuwanie płytki](#) na stronie 128.

1. Na ekranie *Procedure* (Procedura) wybierz widok miniatury obrazu bez ekspozycji. Płytki zostanie przesunięta do położenia domyślnego dla tego widoku.
2. Wybierz przycisk przesuwania płytki, aby pominąć domyślne położenie dla wybranego widoku. Płytki zostanie przesunięta do nowego położenia.




Rycina 30: Przyciski przesuwania płytki

#### 5.4.3 Okno dialogowe Procedure Information (Informacje o procedurze)

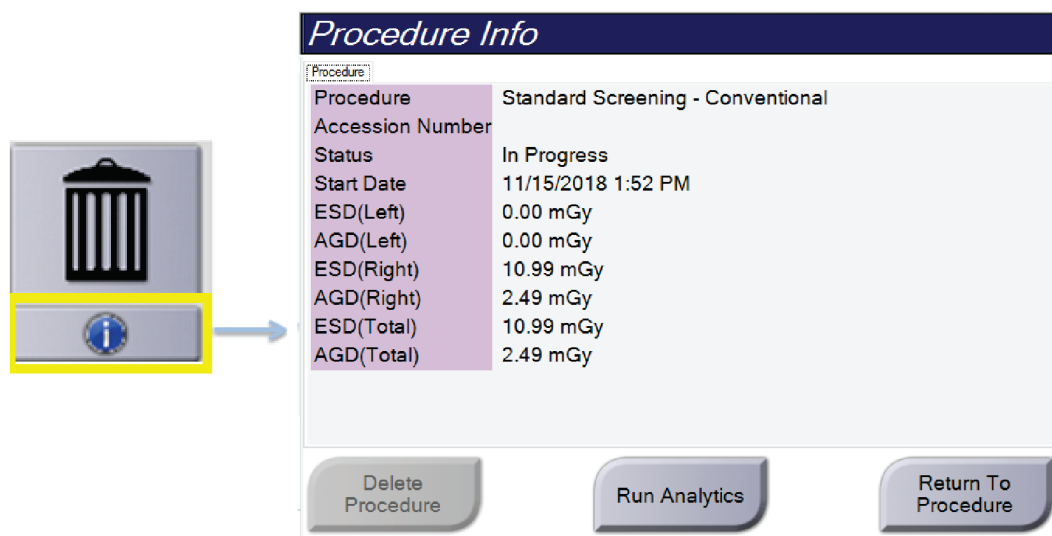Aby wyświetlić informacje o procedurze, wybrać przycisk **Procedure Information** (Informacje o procedurze) znajdujący się poniżej przycisku **Usuń widok** (ikona kosza). Nastąpi otwarcie okna dialogowego Procedure Info (Informacje o procedurze) z następującymi informacjami:

- nazwa procedury,
- numer przyjęcia;
- stan procedury;
- data i godzina rozpoczęcia oraz zakończenia procedury;
- informacje o dawce (na każdą pierś i łącznie).



Rycina 31: Okno dialogowe Procedure Info (Informacje o procedurze)

W przypadku procedur, które nie zawierają naświetlonych widoków, wybrać przycisk **Delete Procedure** (Usuń procedurę), aby usunąć wybraną procedurę z pacjenta.

Aby ręcznie uruchomić analizę obrazu, wybrać przycisk **Run Analytics** (Uruchom analizę).



#### Uwaga

Przycisk **Uruchom analizę** jest widoczny tylko wówczas, gdy użytkownik ma licencję na oprogramowanie ImageChecker® CAD, Quantra™ lub Genius AI Detection.

Wybrać opcję **Return to Procedure** (Powrót do procedury), aby wyjść z okna dialogowego.

### Informacje o przycisku Run Analytics (Uruchom analizę)

Oprogramowanie ImageChecker® CAD i Quantra™ przeznaczone do oceny wolumetrycznej gęstości piersi oraz Genius AI Detection są dostępne w systemach Selenia Dimensions i 3Dimensions.

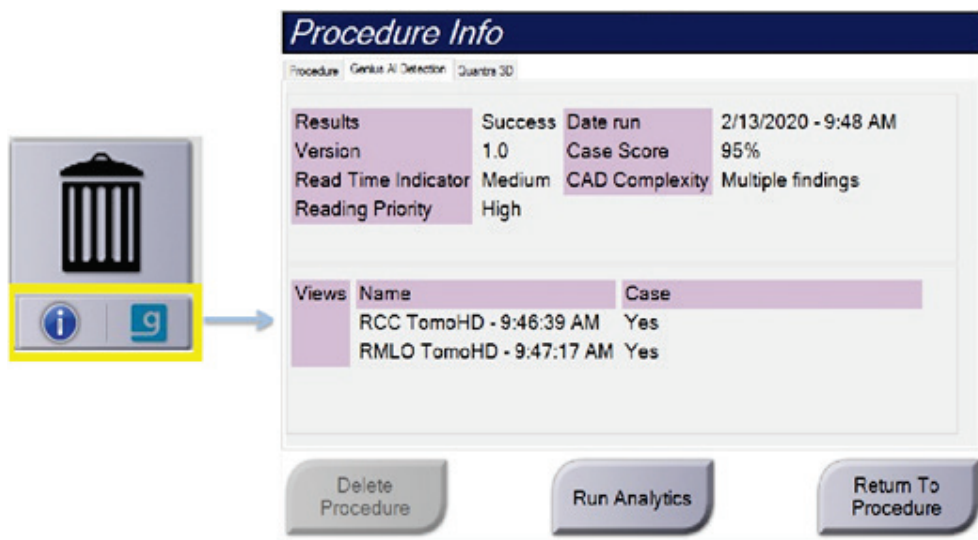
Jeśli dostępna jest licencja na jeden z tych programów:

- Analizy obrazu są uruchamiane automatycznie po wybraniu przycisku **Close Procedure Complete** (Zamknij zakończoną procedurę) w celu zamknięcia rekordu pacjenta po akwizycji nowych obrazów. Analizy obrazu są uruchamiane automatycznie po edycji rekordu pacjenta, edycji widoku lub dodaniu widoku, a następnie wybraniu przycisku **Close Procedure Complete** (Zamknij zakończoną procedurę) w celu zamknięcia rekordu pacjenta.
- Analizy obrazu można uruchomić ręcznie, wybierając przycisk **Run Analytics** (Uruchom analizy) w oknie dialogowym Procedure Info (Informacje o procedurze). Analizy obrazów można w razie potrzeby uruchamiać ręcznie względem obrazów odebranych lub zaimportowanych ze źródeł zewnętrznych.
- Analizy obrazów są wykonywane tylko względem obrazów, które zostały zarejestrowane przy użyciu tej samej wersji oprogramowania co oprogramowanie stacji roboczej akwizycji lub wersji bezpośrednio ją poprzedzającej.
- Okno dialogowe Procedure Info (Informacje o procedurze) zawiera karty, na których widoczne są informacje o powodzeniu lub niepowodzeniu analiz obrazów.
- Miniatury obrazów dla wyników analiz obrazów są wyświetlane w sekcji miniatur na ekranie *Procedure* (Procedura).

### Informacje o karcie Genius AI Detection

Genius AI Detection jest funkcją dostępną w systemach Selenia Dimensions i 3Dimensions. Aby wyświetlić wyniki uzyskane dzięki oprogramowaniu Genius AI Detection, wybrać przycisk **Informacje o procedurze** znajdujący się poniżej przycisku **Usuń widok** (ikona kosza). Nastąpi otwarcie okna dialogowego *Procedure Info* (Informacje o procedurze). Wybrać kartę **Genius AI Detection**, aby wyświetlić następujące informacje:

- Wyniki
- Wskaźnik czasu odczytu
- Priorytet odczytu
- Data i godzina analizy przeprowadzanej z użyciem modułu Genius AI Detection
- Wynik przypadku
- Złożoność CAD
- Nazwa widoku, godzina i informacja o tym, czy widok został dołączony do przetwarzania przypadku.




Rycina 32: Karta Genius AI Detection

Wybrać opcję **Return to Procedure** (Powrót do procedury), aby wyjść z okna dialogowego.

#### 5.4.4 Dodawanie procedury

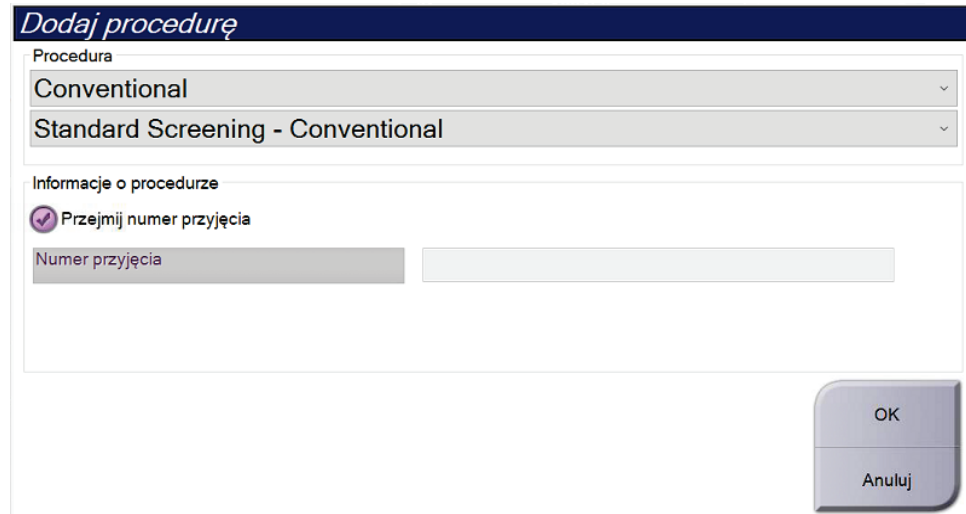1. Aby dodać kolejną procedurę, wybrać przycisk **Add Procedure** (Dodaj procedurę) na ekranie *Procedure* (Procedura), aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Add Procedure (Dodaj procedurę).



Rycina 33: Okno dialogowe Add Procedure (Dodaj procedurę)

2. Za pomocą menu rozwijanych wybrać typ procedury do dodania.
3. Zostanie automatycznie użyty aktualny numer przyjęcia. Aby użyć innego numeru przyjęcia, usunąć zaznaczenie pola wyboru Inherit Accession Number (Przejmij numer przyjęcia) i wprowadzić żądany numer.
4. Wybrać przycisk **OK** (OK). Nastąpi dodanie nowej karty z miniaturami widoków dla wybranej procedury.

### Dostępne procedury

W tej tabeli przedstawiono główne grupy procedur dostępne w systemie.



#### Uwaga

Niektóre procedury z tej tabeli są widoczne tylko wtedy, gdy dostępna jest licencja na konkretną procedurę.

---

Tabela 15: Grupy procedur

Grupa procedur	proc.
Conventional (Konwencjonalna)	Tylko cyfrowe obrazowanie mammograficzne (2D)
Combo (Łączona)	Cyfrowe obrazowanie mammograficzne (2D) i tomosynteza piersi
Tomo (Tomosynteza)	Tylko obrazowanie tomosyntezy piersi
TomoHD (Tomosynteza o wysokiej rozdzielczości)	Obrazowanie tomosyntezy piersi i generowanie obrazu 2D.
ComboHD (Łączona o wysokiej rozdzielczości)	Mammografia cyfrowa (2D), obrazowanie tomosyntezy piersi i generowanie obrazu 2D
Stereo Biopsy (Biopsja stereotaktyczna)	Biopsja z użyciem celowania stereotaktycznego
Tomo Biopsy (Biopsja z tomosyntezą)	Biopsja z użyciem celowania w tomosyntezie
Specimen (Próbka)	Specjalistyczne obrazowanie próbki
2D Contrast (Obrazowanie 2D wzmocnione kontrastem)	Obrazowanie cyfrowe wzmocnione kontrastem
Contrast Stereo Biopsy (Biopsja stereotaktyczna z kontrastem)	Biopsja z użyciem celowania stereotaktycznego z kontrastem

## 5.4.5 Dodawanie (lub usuwanie) widoku

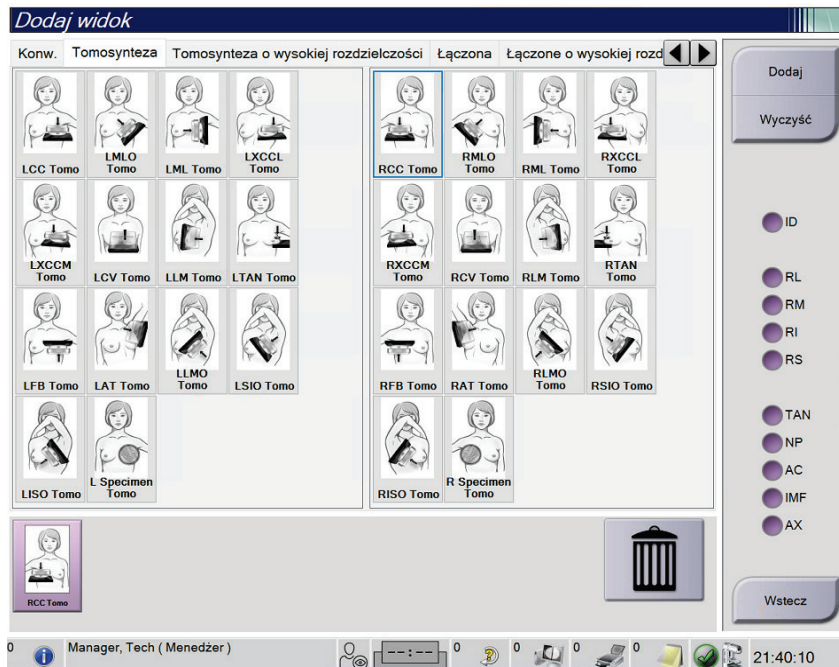
Aby dodać widok:

1. Wybrać przycisk **Add View** (Dodaj widok), aby otworzyć ekran *Add View* (Dodaj widok).



### Uwaga

W zależności od ustawień licencyjnych systemu można wyświetlić różne karty.



Rycina 34: Ekran Add View (Dodaj widok)

### Modyfikatory widoku

**ID** = implant przemieszczony (ang. Implant Displaced)

**RL** = rolowanie boczne (ang. Rolled Lateral)

**RM** = rolowanie przyśrodkowe (ang. Rolled Medial)

**RI** = rolowanie od spodu (ang. Rolled Inferior)

**RS** = rolowanie od góry (ang. Rolled Superior)

**TAN** = stycznie (ang. Tangential)

**NP** = brodawka z profilu (ang. Nipple in Profile)

**AC** = ucisk przedni (ang. Anterior Compression)

**IMF** = fałd podsutkowy (ang. Infra-Mammary Fold)

**AX** = tkanka pachowa (ang. Axillary Tissue)

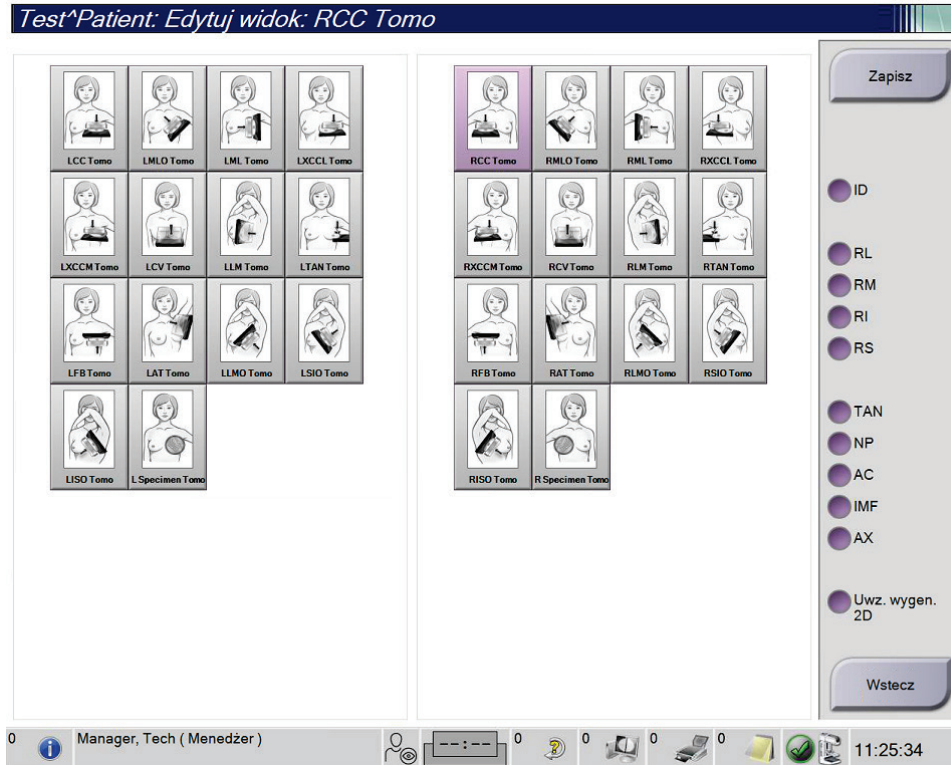
2. Wybrać kartę, a następnie widok. Istnieje możliwość wyboru maksymalnie trzech modyfikatorów widoku z przedniego panelu ekranu.
3. Wybrać przycisk **Add** (Dodaj). Miniatura obrazu każdego wybranego widoku zostanie dodana w panelu dolnym ekranu.

### Usuwanie obrazu

- Aby usunąć pojedynczy widok z dodanej listy, wybrać widok, a następnie ikonę kosza.
- Aby usunąć wszystkie widoki z dodanej listy, wybrać przycisk **Clear** (Wyczyść).

### 5.4.6 Edycja widoku

Użyć ekranu *Edit View* (Edytuj widok), aby przypisać inny widok do obrazu.



Rycina 35: Ekran *Edit View* (Edytuj widok)

1. Na ekranie *Procedure* (Procedura) wybrać miniaturę widoku naświetlonego obrazu.
2. Wybrać przycisk **Edit View** (Edytuj widok).
3. Wybrać widok z ekranu. Istnieje możliwość wyboru maksymalnie trzech modyfikatorów widoku. Opis modyfikatorów widoku znajduje się w części [Dodawanie \(lub usuwanie\) widoku](#) na stronie 79.
4. Wybrać opcję **Save** (Zapisz), a następnie przycisk **OK** (OK), aby wyświetlić komunikat *Update Successful* (Aktualizacja powiodła się).



#### Uwaga

Na ekranie *Edit View* (Edytuj widok) w przypadku procedur biopsji wyświetlane są inne modyfikatory widoku. Zapoznać się z dokumentem *User Guide* (Instrukcja obsługi) systemu naprowadzania Affirm® do biopsji piersi.

### 5.4.7 Pobierz

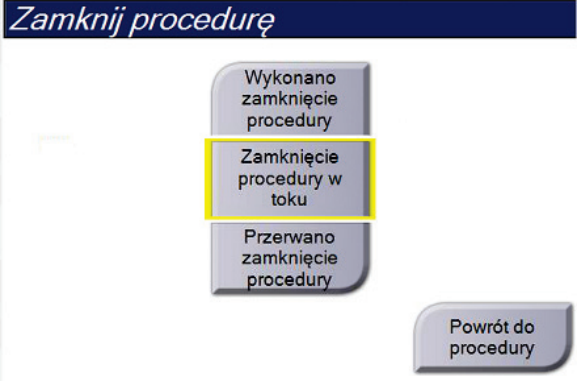
Przycisk **Retrieve** (Pobierz) umożliwia wygenerowanie zapytania do skonfigurowanych urządzeń w sprawie informacji o bieżącym pacjencie. Wybranie przycisku **Retrieve** (Pobierz) powoduje wykonanie tej samej funkcji, jak w przypadku przycisku **Query Retrieve** (Zapytanie/pobieranie) na ekranie *Admin* (Administrator).



### 5.4.8 Zamykanie rekordu pacjenta

Wybierz przycisk **Close Patient** (Zamknij rekord pacjenta). Jeśli zostały zarejestrowane obrazy, zostanie otwarte okno dialogowe **Close Procedure** (Zamykanie procedury).

Wybierz jedną z następujących opcji:

<b>Zamknij procedurę</b>	
	<p><b>Close Procedure Complete</b> (Zamknij zakończoną procedurę): powoduje zamknięcie procedury i umieszczenie jej na karcie <b>Completed</b> (Zakończone).</p>
	<p><b>Close Procedure In Progress</b> (Zamknij procedurę w toku): powoduje zamknięcie procedury i umieszczenie jej na karcie <b>In Progress</b> (W toku).</p>
	<p><b>Close Procedure Discontinue</b> (Zamknij zakończoną i przerwij): powoduje zamknięcie procedury i umieszczenie jej na karcie <b>All</b> (Wszystkie). Zostanie otwarte okno dialogowe, w którym należy wybrać z listy przyczynę przerwania procedury lub dodać nową przyczynę.</p>
	<p><b>Return To Procedure</b> (Powrót do procedury): umożliwia powrót do procedury.</p>

Jeśli istnieją obrazy oznaczone jako **Pend** (Oczekiwanie), zostanie otwarte okno dialogowe z następującymi opcjami:

- **Accept All and Close Complete** (Akceptuj wszystkie i zamknij zakończone)
- **Close Procedure In Progress** (Zamknij procedurę w toku)
- **Return To Procedure** (Powrót do procedury)

Jeśli aktywowano etap **MPPS**, informacja o statusie procedury zostanie wysłana do urządzeń wyjściowych w momencie wybrania opcji **Complete** (Zakończ) lub **Discontinue** (Przerwij). Dodatkowo w celu wysłania komunikatu o statusie procedury w trakcie jej trwania można kliknąć kartę i przytrzymać ją nad miniaturami. Zostanie otwarte okno dialogowe **Procedure Action** (Działanie procedury) z przyciskami służącymi do ponownego wysłania statusu lub powrotu do procedury.



#### Ważne

Po uzyskaniu licencji na oprogramowanie 3DQuorum należy postępować zgodnie ze standardową procedurą zamykania rekordu pacjenta. Jeśli istnieją obrazy SmartSlice, które nie zostały przetworzone, zostanie otwarte okno dialogowe z następującym komunikatem:

#### Informacje

Przetwarzanie. Czekaj...



Przed otwarciem rekordu kolejnego pacjenta należy poczekać na zakończenie przetwarzania.

---



#### Uwaga

Jeśli dostępna jest licencja na oprogramowanie Genius AI Detection, ImageChecker CAD lub Quantra, analizy obrazów są wykonywane automatycznie w momencie wybrania przycisku **Zamknij zakończoną procedurę** po akwizycji nowych obrazów. Wyniki są automatycznie wysyłane do urządzeń wyjściowych. W momencie ponownego otwarcia rekordu pacjenta miniatury obrazów są wyświetlane na ekranie *Procedure* (Procedura), a w oknie dialogowym Procedure Info (Informacje o procedurze) dostępne są karty statusu.

---

## 5.5 Uzyskiwanie dostępu do funkcji Image Review (Przegląd obrazu)

Wybierz kartę **Tools** (Narzędzia) na ekranie *Procedure* (Procedura), aby uzyskać dostęp do funkcji przeglądu obrazów. Informacje zawiera sekcja [Karta narzędzi do przeglądu obrazów](#) na stronie 106.

## 5.6 Grupy wyjściowe

Zaakceptowane obrazy są wysyłane automatycznie do urządzeń wyjściowych w wybranej grupie wyjściowej. Konfiguracja systemu kontroluje to, czy obrazy są wysyłane po zamknięciu rekordu pacjenta czy też natychmiast po zaakceptowaniu obrazu.

---

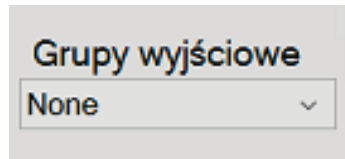


#### Uwaga

Obrazy tomosyntezy nie są wysyłane do urządzenia drukującego w wybranej grupie wyjściowej. Wybrane warstwy tomosyntezy i SmartSlices można wydrukować z ekranu *Print* (Drukowanie).

---

### 5.6.1 Wybór grupy wyjściowej



Rycina 36: Pole Output Groups (Grupy wyjściowe)

Z listy rozwijanej Output Groups (Grupy wyjściowe) na ekranie *Procedure* (Procedura) należy wybrać grupę urządzeń wyjściowych, taką jak system PACS, Diagnostic Workstations (Diagnostyczne stacje robocze), urządzenia CAD lub drukarki.



#### Uwaga

Jeśli grupa wyjściowa nie jest wybrana, obrazy nie są wysyłane.

---

### 5.6.2 Dodawanie i edycja grupy wyjściowej



#### Uwaga

Grupy wyjściowe są konfigurowane podczas instalacji, ale można edytować istniejące grupy i dodawać nowe.

---

#### Aby dodać nową grupę wyjściową:

1. Uzyskaj dostęp do ekranu *Admin* (Administrator).
2. Wybierz przycisk **Manage Output Groups** (Zarządzaj grupami wyjściowymi).
3. Wybierz przycisk **New** (Nowe), wprowadź informacje, a następnie wybierz urządzenia wyjściowe.
4. Wybierz przycisk **Add** (Dodaj), a następnie przycisk **OK** w komunikacie *Update Successful* (Aktualizacja zakończona pomyślnie).
5. Możesz wybrać dowolną grupę jako domyślną.

#### Aby edytować grupę wyjściową:

1. Uzyskaj dostęp do ekranu *Admin* (Administrator).
2. Wybierz przycisk **Manage Output Groups** (Zarządzaj grupami wyjściowymi).
3. Wybierz przycisk **Edit** (Edytuj), a następnie wprowadź zmiany.
4. Wybierz przycisk **Save** (Zapisz), a następnie przycisk **OK** w komunikacie *Update Successful* (Aktualizacja zakończona pomyślnie).

### 5.6.3 Grupy wyjściowe SmartSlices



#### Uwaga

Grupy wyjściowe są konfigurowane podczas instalacji, ale można edytować istniejące grupy i dodawać nowe.

W trakcie instalacji oprogramowania 3DQuorum w systemie tworzone są nowe domyślne grupy wyjściowe, które obejmują opcje wyjściowe dla obrazów SmartSlice. Nowe grupy wyjściowe umożliwiają kontrolowanie, czy do preferowanych urządzeń automatycznie przesyłane są obrazy SmartSlice, zrekonstruowane warstwy tomosyntezy czy też obie wersje. W poniżej tabeli znajdują się opisy grup wyjściowych.


Tabela 16: Grupy wyjściowe dla oprogramowania 3DQuorum

Nazwa grupy wyjściowej	Objaśnienie konfiguracji
SmrtSlces,DBT,2D	Przesyła wszystkie skonfigurowane typy danych.
SmartSlices,2D	Przesyła typy danych SmartSlices i 2D (zsyntetyzowane 2D lub FFDM). Zrekonstruowane warstwy 1-milimetrowe nie są przesyłane.
DBT,2D	Przesyła zrekonstruowane warstwy 1-milimetrowe i typy danych 2D (zsyntetyzowane 2D lub FFDM). Obrazy SmartSlice nie są przesyłane.
Niestandard.	Umożliwia wybór wyjść i typów danych na żądanie.

Aby utworzyć trzy nowe typy grup wyjściowych, każde urządzenie wyjściowe ImageStorage jest skonfigurowane tak, aby posiadać trzy wpisy Installed Device. Pozwala to na maksymalną elastyczność przy eksperymentowaniu, czy obrazy SmartSlice są zawsze używane w odczytach diagnostycznych, zawsze archiwizowane, czy też wysyłane tylko na żądanie. W poniższej tabeli znajdują się opisy ustawień zainstalowanego urządzenia wyjściowego.

Tabela 17: Ustawienia urządzenia wyjściowego dla oprogramowania 3DQuorum

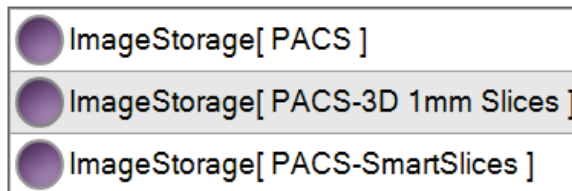Nazwa wyjściowa	Objaśnienie konfiguracji
Nazwa urządzenia	Wysyła wszystkie żądane typy danych poza SmartSlices i zrekonstruowanymi warstwami 1-mm.
Nazwa urządzenia – warstwy 3D 1-mm	Wysyła tylko zrekonstruowane warstwy 1-mm.
Nazwa urządzenia – SmartSlices	Wysyła tylko obrazy SmartSlices.



Rycina 37: Przykład ustawień urządzenia wyjściowego


W miarę podejmowania decyzji dotyczących tego, które dane mają być wysyłane do stacji roboczych w celu diagnozy, które dane zarchiwizować i jakie dane wysyłać tylko na żądanie, można dalej dostosowywać domyślne konfiguracje. Zmian można dokonać podczas szkolenia z zakresu zastosowania klinicznego lub kontaktując się z działem pomocy technicznej Hologic.

#### 5.6.4 Niestandardowa grupa wyjściowa

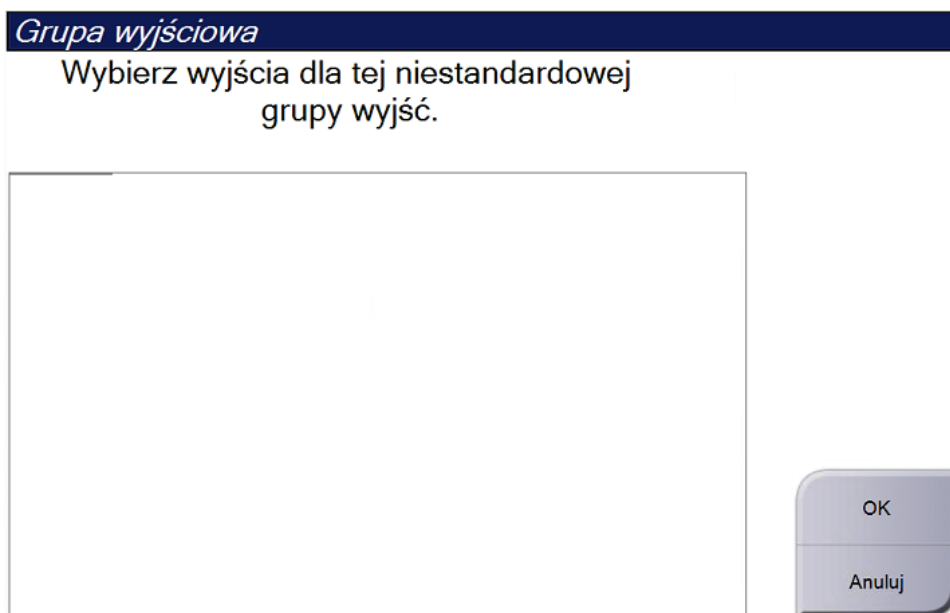Opcja Custom Output Group (Niestandardowa grupa wyjściowa) umożliwia utworzenie grupy wyjściowej z poziomu ekranu *Procedure* (Procedura). Utworzona przez użytkownika niestandardowa grupa wyjściowa pozostaje jako opcja Custom (Niestandardowa), aż do utworzenia kolejnej niestandardowej grupy wyjściowej.

**Tworzenie niestandardowej grupy wyjściowej z poziomu ekranu *Procedure* (Procedura):**

1. Na ekranie *Procedure* (Procedura) wybrać opcję **Custom** (Niestandardowa) z listy rozwijanej Output Groups (Grupy wyjściowe).
2. W oknie dialogowym *Output Group* (Grupa wyjściowa) wybrać z listy dostępnych urządzenie, a następnie wybrać przycisk **OK** (OK).



Rycina 38: Przykład niestandardowej grupy wyjściowej

## 5.7 Urządzenia wyjściowe na żądanie

Urządzenia wyjściowe na żądanie to urządzenia **Archive/Export** (Archiwizuj/Eksportuj) oraz **Print** (Drukuj). Aktualnie otwarty rekord pacjenta można ręcznie zarchiwizować, wyeksportować lub wydrukować do czasu zamknięcia procedury.

Wybranie przycisku **On-Demand Output** (Urządzenia wyjściowe na żądanie) umożliwia wysłanie obrazów z otwartego rekordu pacjenta do dowolnych skonfigurowanych urządzeń wyjściowych.

### 5.7.1 Archive (Archiwizuj)

1. Wybierz przycisk **Archive/Export** (Archiwizuj/Eksportuj).
2. Na ekranie *On Demand Archive* (Archiwum na żądanie) wybierz procedurę lub widoki:
  - Przycisk **Select All** (Zaznacz wszystkie) umożliwia zaznaczenie wszystkich pozycji widocznych na tym ekranie.
  - Przycisk **Clear** (Wyczyść) umożliwia anulowanie wyboru pozycji wybranych na tym ekranie.
  - Wybranie przycisku **Priors** (Wcześniejsze) powoduje wyświetlenie wcześniejszych procedur i widoków konkretnej pacjentki.
  - Wybranie przycisku **Rejected** (Odrzucone) powoduje wyświetlenie widoków odrzuconych dla tej pacjentki.
3. Wybierz urządzenie pamięci masowej:
  - Wybierz przycisk **Device List** (Lista urządzeń) i dokonaj wyboru spośród opcji w menu rozwijanym *Storage Device* (Urządzenie pamięci masowej).  
— LUB —
  - Wybierz grupę wyjściową z listy rozwijanej *Output Group* (Grupa wyjściowa).
4. Wybierz przycisk **Archive** (Archiwizuj), aby wysłać wybrane obrazy do wybranego archiwum.



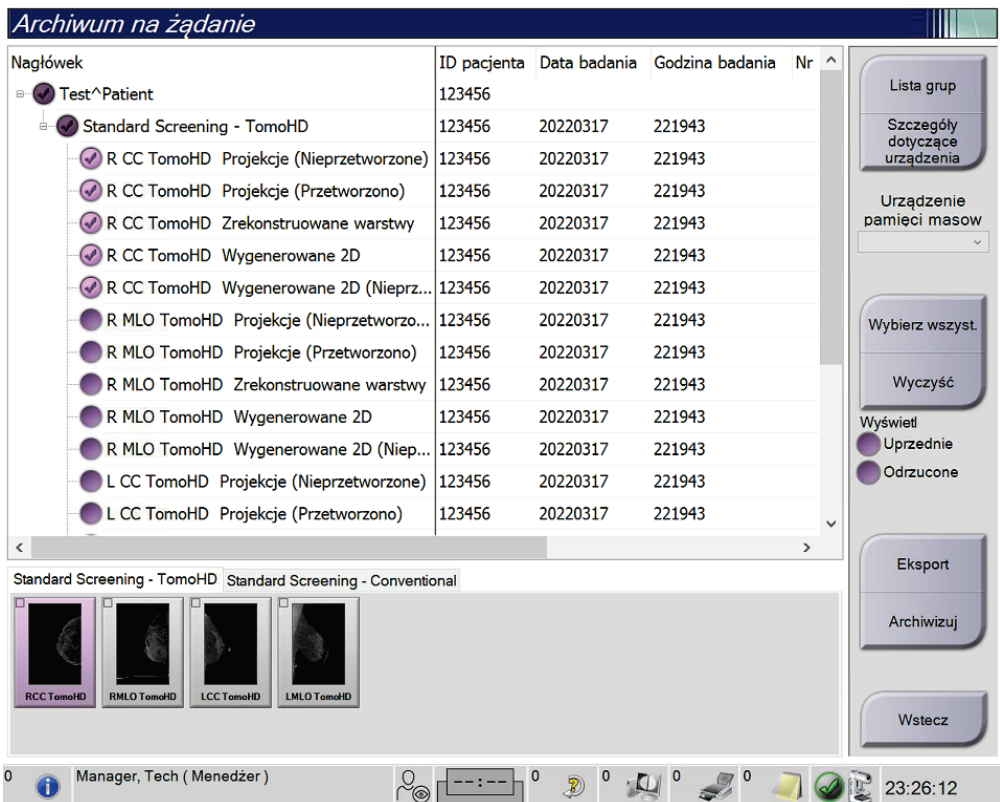
#### Uwaga

Aby sprawdzić status archiwum, należy skorzystać z narzędzia Manage Queue (Zarządzaj kolejkami) na pasku zadań.

---

### 5.7.2 Eksport


1. Wybrać przycisk **Archive/Export** (Archiwizuj/eksportu) (po prawej stronie ekranu *Procedure* (Procedura)).
2. Wybrać obrazę do wyeksportowania, a następnie wybrać przycisk **Export** (Eksportuj).



Rycina 39: Wybór obrazów do eksportu



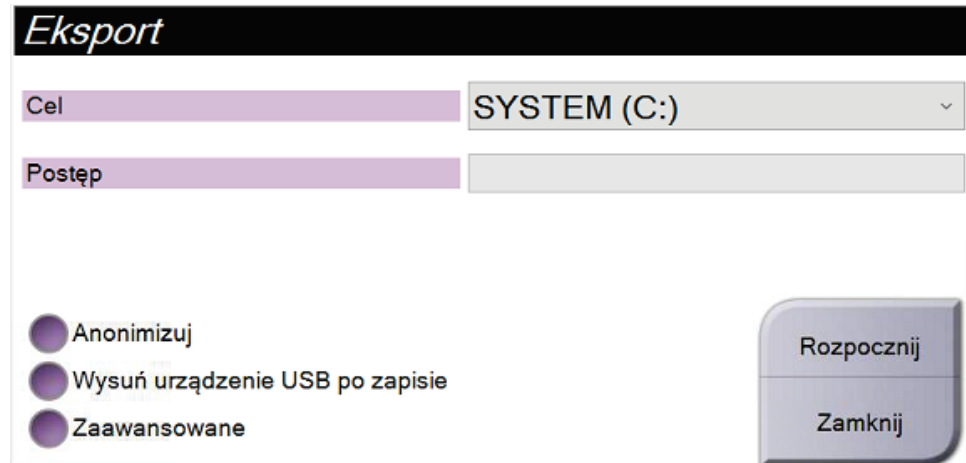
3. W oknie dialogowym Export (Eksportuj) wybrać cel z listy rozwijanej urządzeń multimedialnych.



Rycina 40: Okno dialogowe Export (Eksportuj)

- W celu zanonimizowania danych pacjenta wybrać opcję **Anonymize** (Anonimizuj).
  - Aby automatycznie wysunąć urządzenie pamięci masowej po zakończeniu eksportu, wybrać opcję **Eject USB Device after write** (Wysuń urządzenie USB po zapisie).
  - Aby wybrać folder w systemach lokalnych przeznaczony do przechowywania swoich wyborów i wybrać typy eksportu dla obrazu, wybrać opcję **Advanced** (Zaawansowane).
4. Wybrać przycisk **Start** (Start), aby wysłać wybrane obrazy do wskazanego urządzenia.

### 5.7.3 Drukuj

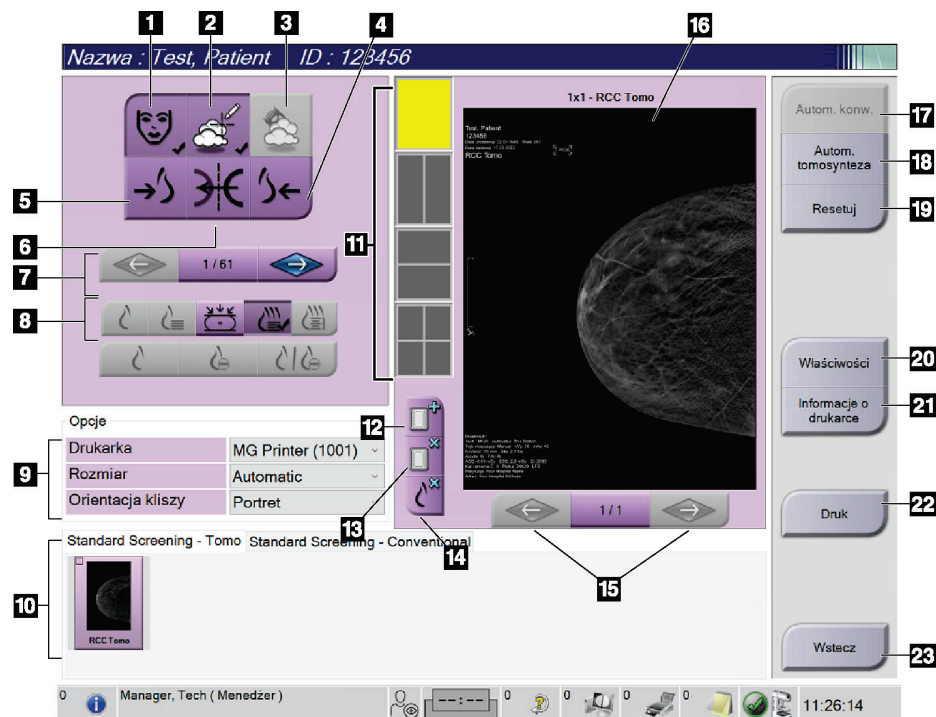

Rycina 41: Ekran Print (Drukuj)

#### Legenda ilustracji

1. Wyświetlanie lub ukrywanie danych pacjenta.
2. Wyświetlanie lub ukrywanie oznaczeń i adnotacji.
3. Wyświetlanie lub ukrywanie celów na obrazach z biopsji.
4. Drukowanie obrazu z perspektywy grzbietowej.
5. Drukowanie obrazów z perspektywy brzusznej.
6. Odwracanie obrazu (lustro).
7. Przejście do poprzedniej lub następnej warstwy tomosyntezy lub projekcji (opcja Tomosynthesis (Tomosynteza)).
8. Wybór widoku Conventional (Konwencjonalny), Projection (Projekcja) lub Reconstruction (Rekonstrukcja) (opcja Tomosynthesis (Tomosynteza)). Przycisk Widok C pokazuje, czy system ma licencję na obrazowanie widoku C.
9. Wybór opcji drukarki.
10. Wyświetlanie miniatur.
11. Wybór formatu kliszy (liczba płyt).
12. Tworzenie nowej kliszy.
13. Usuwanie kliszy.
14. Usuwanie obrazu z kliszy.
15. Przechodzenie przez strony kliszy.
16. Drukowanie obszaru podglądu.
17. Drukowanie obrazów konwencjonalnych (C-View, jeżeli system ma licencję) z konfiguracją domyślną.
18. Drukowanie obrazów tomosyntezy (warstwy lub projekcje) oznaczonych do druku.
19. Powrót ekranu *Print (Drukuj)* do ustawień domyślnych.
20. Otwarcie ekranu *Properties (Właściwości)*.
21. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie adresu IP drukarki, nazwy AE, portu i opcji drukowania w formacie True Size.
22. Rozpoczęcie procesu drukowania.
23. Powrót do ekranu *Procedure (Procedura)*.

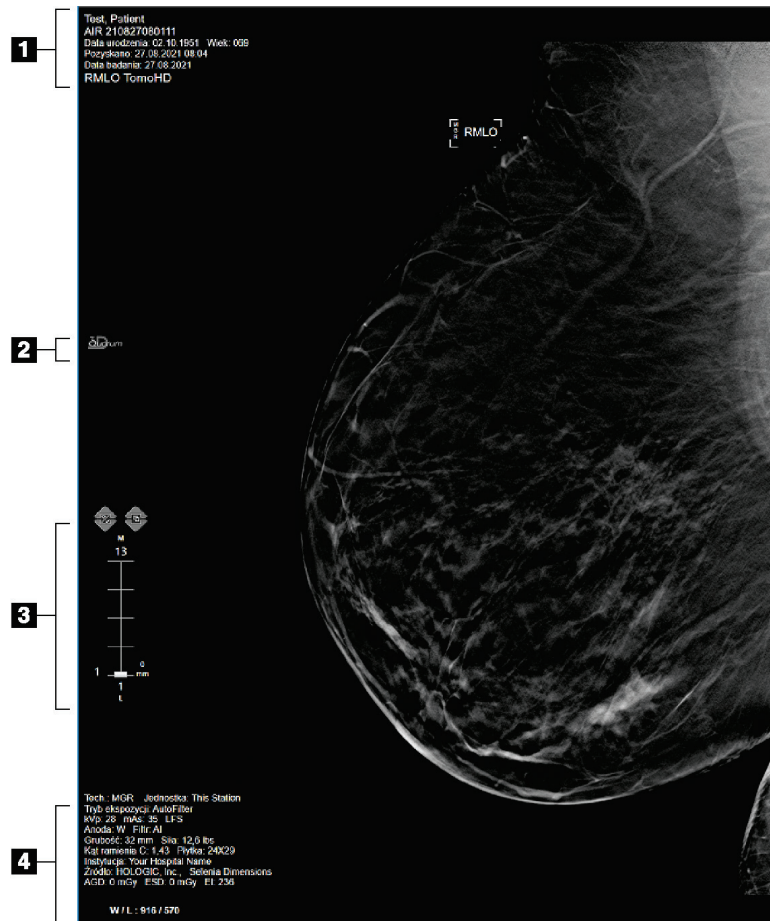
1. Na ekranie *Procedure* (Procedura) wybrać przycisk **Print** (Drukuj), aby wyświetlić ekran *Print* (Drukuj).
2. Wybrać format kliszy z obszaru formatu kliszy na ekranie.
3. Wybrać miniaturę obrazu.
4. Wybrać tryb obrazowania (Conventional (Konwencjonalny), Projection (Projekcja) lub Reconstruction (Rekonstrukcja)). Przycisk Widok C pokazuje, czy system ma licencję na obrazowanie widoku C.
5. Wybrać obszar poglądu wydruku (poz. 16) na ekranie *Print* (Drukuj). Obraz wyświetlany w tym obszarze jest obrazem, który zostanie wydrukowany na kliszy.
6. Aby umieścić inne obrazy na tej samej kliszy wieloformatowej, wykonać czynności od 3 do 5.
7. Aby wydrukować inny format kliszy tych samych obrazów, wybrać przycisk **New Film** (Nowa klisza) (poz. 12), po czym wykonać czynności od 2 do 6.
8. Przyciski w lewym górnym obszarze ekranu *Print* (Drukuj) (poz. od 1 do 6) służą do ukrywania lub wyświetlania danych pacjenta, oznaczeń i adnotacji oraz zmiany orientacji obrazu.
9. Wybrać przycisk **Print** (Drukuj), aby wydrukować klisze.



## Rozdział 6 Obrazowanie

### 6.1 Ekran do wyświetlania obrazów

Po wykonaniu ekspozycji zarejestrowany obraz jest otwierany na monitorze do wyświetlania obrazów. Informacje o pacjencie i procedurze można wyświetlić na ekranie. Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie tych informacji, należy przejść do karty **Tools** (Narzędzia) na ekranie *Procedure* (Procedura) i wybrać przycisk **Patient Information** (Informacje o pacjencie).



Rycina 42: Ekran do wyświetlania obrazów (pokazana opcja SmartSlices)

#### Legenda ilustracji

1. Informacje o pacjencie i dane badania
2. Logo oprogramowania 3DQuorum
3. Wskaźnik warstw
4. Informacje o ekspozycji

## 6.2 Ustawianie parametrów ekspozycji

### 6.2.1 Wybór trybu akwizycji obrazu (opcja tomosyntezy)

- Standardowy Do rutynowych procedur przesiewowych w tomosyntezą
- Rozszerzony Do diagnostycznych widoków tomosyntezy



---

#### Ostrzeżenie:

Rozszerzony tryb akwizycji z obrazowaniem w trybie combo (DM + BT) może generować dawkę promieniowania wyższą niż określony przez MQSA limit dla badań przesiewowych wynoszący 3,0 mGy i z tego powodu powinien być stosowany wyłącznie na potrzeby oceny diagnostycznej.

---

### 6.2.2 Wybór trybu ekspozycji

Tryby automatycznej kontroli ekspozycji (AEC, ang. Automatic Exposure Control) umożliwiają systemowi kontrolowanie technik ekspozycji. Tryby AEC są dostępne w zakresie 20–49 kV.

- Manual (Ręcznie) Użytkownik wybiera parametry, takie jak kV, mAs, ognisko i filtr.
- AEC: Auto-Time (AEC: czas automatycznie) Użytkownik wybiera parametry, takie jak kV, ognisko i filtr. System wybiera wartość mAs.
- AEC: Auto-kV (AEC: napięcie automatycznie) Użytkownik wybiera ognisko. System wybiera kV, mAs oraz filtr (rod).
- AEC: Auto-Filter (AEC: filtr automatycznie) Użytkownik wybiera ognisko. System wybiera kV, mAs oraz filtr.

### 6.2.3 Użytkowanie detektora AEC

Detektor AEC dysponuje siedmioma pozycjami ręcznymi oraz pozycją automatyczną. Pozycje ręczne zaczynają się przy krawędzi ściany klatki piersiowej (pozycja 1) i sięgają do krawędzi brodawki sutkowej (pozycja 7). Pozycja automatyczna umożliwia wybór dwóch regionów na obszarze od ściany klatki piersiowej do brodawki sutkowej.

Klawisze plus (+) i minus (-) na urządzeniu kompresyjnym lub na ekranie w obszarze detektora AEC umożliwiają zmianę położenia detektora. Można wybrać opcję Auto AEC (Automatyczna kontroli ekspozycji), aby umożliwić systemowi obliczenie najlepszej ekspozycji dla piersi.

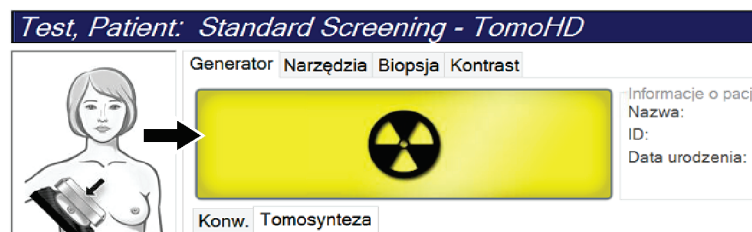
## 6.3 Akwizycja obrazu

Informacje o procedurach klinicznych zawiera sekcja [Procedury kliniczne](#) na stronie 135.

1. Wybierz widok spośród miniatur u dołu ekranu *Procedure* (Procedura).
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **promieniowania RTG** i/lub **przełącznik nożny promieniowania RTG**, aby wykonać pełną ekspozycję.


Podczas ekspozycji:

- Na pasku stanu systemu pojawi się symbol promieniowania i żółte tło (patrz poniższa rycina).



Rycina 43: Ekspozycja w toku

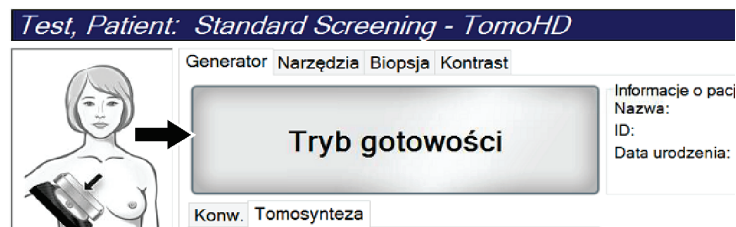- Przez cały czas trwania ekspozycji będzie generowany słyszalny dźwięk. Ten dźwięk jest ciągłą sekwencją tonów. Dźwięk rozlega się podczas całej akwizycji combo od rozpoczęcia ekspozycji do końca widoku klasycznego. Pomiedzy tomosyntezą piersi a klasyczną ekspozycją mammografii cyfrowej sygnał dźwiękowy nie jest przerywany. Gdy rozlega się sygnał dźwiękowy, nie należy zwalniać przełącznika ekspozycji.
3. Gdy system przestanie generować sygnał dźwiękowy, a na pasku stanu systemu pojawi się informacja **Standby** (Gotowość) (patrz poniższa rycina), zwolnij przycisk **promieniowania RTG** i (lub) **przełącznik nożny promieniowania RTG**.




Rycina 44: Ekspozycja zakończona

4. Gdy generowanie promieniowania RTG zostanie zakończone, obraz pojawi się na monitorze do wyświetlania obrazów. Ekran *Procedure* (Procedura) automatycznie ulegnie zmianie na kartę **Tools** (Narzędzia).

Wybierz jedną z następujących opcji, aby zakończyć akwizycję:

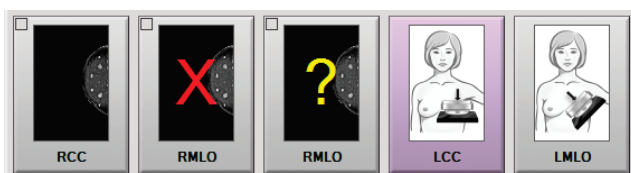- **Accept** (Akceptuj), aby zaakceptować obraz. Obraz zostanie przesłany do urządzeń wyjściowych ze wszystkimi atrybutami.
- **Reject** (Odrzuć), aby odrzucić obraz. Gdy zostanie otwarte okno dialogowe, wybierz przyczynę odrzucenia obrazu. Ekran *Image Display* (Wyświetlacz obrazów) zostanie zamknięty. Możesz powtórzyć odrzucony widok lub wybrać inny widok. Jeśli wybierzesz przycisk **Reject** (Odrzuć), na miniaturze pojawi się symbol „X”.
- **Pend** (Oczekiwanie), aby ustawić dla obrazu tryb oczekiwania. Obraz zostanie zapisany do przeglądu w przyszłości. Jeśli wybierzesz przycisk **Pend** (Oczekiwanie), na miniaturze pojawi się znak „?”.



Rycina 45: Obrazy oznaczone różnymi symbolami w procedurze

5. Powtórz kroki od 1 do 4 dla każdego widoku.



#### Uwaga

Użytkownik w roli menedżera może skonfigurować system w taki sposób, aby automatycznie akceptował nowe obrazy lub automatycznie ustawiał dla nich tryb oczekiwania.

---



### 6.3.1 Sekwencja zdarzeń podczas obrazowania klasycznego

1. Przejrzyj obraz po ekspozycji i w razie potrzeby dodaj komentarz.
2. Dla obrazu wybierz opcję **Accept** (Akceptuj), **Reject** (Odrzuć) lub **Pend** (Oczekiwanie). Obraz miniatury zastąpi widok miniatury w obszarze Case Study (Studium przypadku) na ekranie.



#### Uwaga

Użytkownik w roli menedżera może skonfigurować system w taki sposób, aby automatycznie akceptował nowe obrazy lub automatycznie ustawiał dla nich tryb oczekiwania.

---

### 6.3.2 Sekwencja zdarzeń podczas obrazowania tomosyntezy

1. Poczekaj na zakończenie rekonstrukcji obrazu.
2. Sprawdź obrazy projekcji pod kątem ruchów.
3. Dla obrazu wybierz opcję **Accept** (Akceptuj), **Reject** (Odrzuć) lub **Pend** (Oczekiwanie). Obraz miniatury zastąpi widok miniatury w obszarze Case Study (Studium przypadku) na ekranie.



#### Uwaga

Użytkownik w roli menedżera może skonfigurować system w taki sposób, aby automatycznie akceptował nowe obrazy lub automatycznie ustawiał dla nich tryb oczekiwania.

---

### 6.3.3 Akceptowanie odrzuconych obrazów

Jeśli odrzucony obraz jest lepszy niż nowy obraz, można wczytać stary obraz i użyć go. Należy wybrać obraz miniatury na ekranie *Procedure* (Procedura), aby przejrzeć obraz, a następnie wybrać dla obrazu opcję **Accept** (Akceptuj).

### 6.3.4 Akceptowanie lub odrzucanie obrazu oczekującego

Aby zaakceptować lub odrzucić obraz oczekujący, należy wybrać obraz miniatury obrazu oczekującego, na następnie wybrać przycisk **Accept** (Akceptuj) lub przycisk **Reject** (Odrzuć).



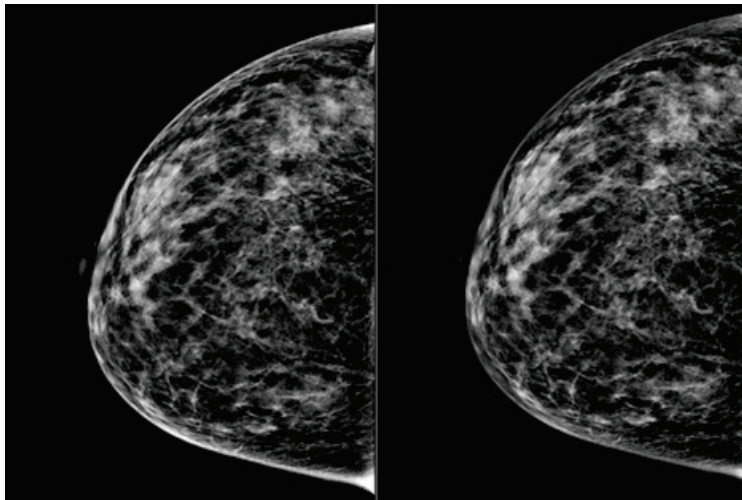
#### Uwaga

Użytkownik w roli menedżera może skonfigurować system w taki sposób, aby automatycznie akceptował nowe obrazy lub automatycznie ustawiał dla nich tryb oczekiwania.

---

#### 6.3.5 Jasność linii skóry

Opcjonalne ustawienie przetwarzania obrazu jest dostępne w przypadku obrazowania 2D w celu zmniejszenia jasności i zaciemnienia skóry w widokach przesiewowych. Aby włączyć tę opcję, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Hologic.



**Standard**

**Zmniejszona jasność**

*Rycina 46: Porównanie jasności standardowej i zmniejszonej*

## 6.4 Pozyskiwanie obrazu piersi z implantem

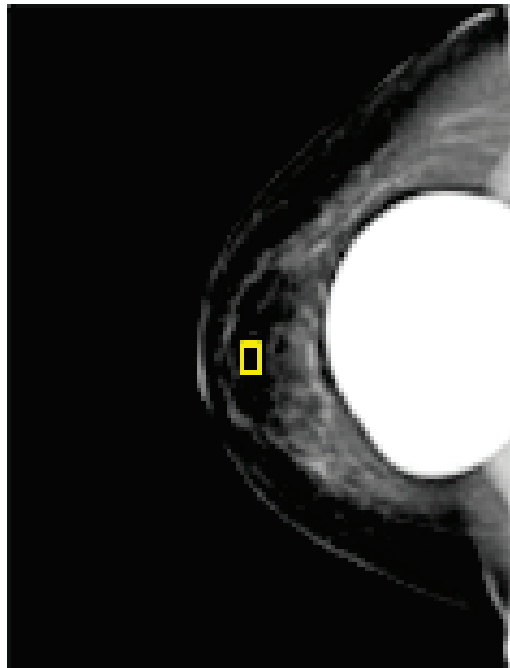


### Uwaga

W przypadku wszystkich widoków z implantem należy **ZAWSZE** wybierać przycisk **Obecność implantu**. Przycisk ten umożliwi prawidłowe przetwarzanie obrazów implantu.

### 6.4.1 Implant oddalony od brodawki sutkowej

1. Wybierz widok spośród miniatur u dołu ekranu *Procedure* (Procedura).
2. W trybie AEC wybierz opcję **Filtr automatyczny**.
3. Za pomocą przycisków + i – przenieś czujnik AEC do tkanki za brodawką sutkową.



4. Zarejestruj ekspozycję.
5. Dla obrazu wybierz opcję **Accept** (Akceptuj), **Reject** (Odrzuć) lub **Pend** (Oczekiwanie).



### Uwaga

Użytkownik w roli menedżera może skonfigurować system w taki sposób, aby automatycznie akceptował nowe obrazy lub automatycznie ustawiał dla nich tryb oczekiwania.

6. Powtórz kroki od 1 do 5 dla każdego widoku.

### 6.4.2 Implant w pobliżu brodawki sutkowej

1. Wybierz widok spośród miniatur u dołu ekranu *Procedure* (Procedura).
2. W trybie AEC wybierz opcję **Manual** (Ręcznie).
3. Za pomocą przycisków + i – wybierz wartości kVp i mAs. Patrz tabele w punkcie [Tabele wartości dla opcji Implant w pobliżu brodawki sutkowej](#) na stronie 101 w celu uzyskania informacji o zalecanych wartościach w oparciu o typ widoku i grubość kompresji.



#### Uwaga

Widok CEDM składa się z dwóch oddzielnych ekspozycji. Możliwość ustawienia ręcznego jest dostępna wyłącznie w przypadku technik odnoszących się do pierwszej ekspozycji, wykonywanej z zastosowaniem niższej energii. System automatycznie ustawia techniki dla drugiej ekspozycji w oparciu o techniki z pierwszej ekspozycji.

---



#### Uwaga

W przypadku widoków łączonych wzmocnionych kontrastem należy wybrać wartości dla ekspozycji na tomosyntezę podane w tabeli 17 oraz wartości dla ekspozycji wzmocnionej kontrastem (CEDM), które zawiera tabela 18.

---

Więcej informacji na temat akwizycji obrazów wzmocnionych kontrastem można znaleźć w punkcie [Obrazy I-View 2D wzmocnione kontrastem](#) na stronie 110.

4. Zarejestruj ekspozycję.
  5. Dla obrazu wybierz opcję **Accept** (Akceptuj), **Reject** (Odrzuć) lub **Pend** (Oczekiwanie).
- 



#### Uwaga

Użytkownik w roli menedżera może skonfigurować system w taki sposób, aby automatycznie akceptował nowe obrazy lub automatycznie ustawiał dla nich tryb oczekiwania.

---

6. Powtórz kroki od 1 do 5 dla każdego widoku.

**Tabele wartości dla opcji Implant w pobliżu brodawki sutkowej***Tabela 18: Konwencjonalne obrazowanie 2D*

<b>Grubość po kompresji</b>	<b>kV</b>	<b>mAs</b>	<b>Filtr</b>
< 4 cm	28	100	Rh
4 cm – < 6 cm	28	120	Rh
6 cm – < 8 cm	28	140	Rh
8 cm – 10 cm	28	160	Rh
> 10 cm	28	180	Rh

*Tabela 19: Obrazowanie z tomosyntezą*


<b>Grubość po kompresji</b>	<b>kV</b>	<b>mAs</b>	<b>Filtr</b>
< 4 cm	29	60	Al
4 cm – < 6 cm	31	70	Al
6 cm – < 8 cm	33	90	Al
8 cm – 10 cm	35	100	Al
> 10 cm	38	100	Al

*Tabela 20: Obrazowanie wzmocnione kontrastem (I-View)*

<b>Grubość po kompresji</b>	<b>kV</b>	<b>mAs</b>	<b>Filtr</b>
< 3,5 cm	26	30	Rh
3,5 cm – < 4 cm	27	40	Rh
4 cm – < 5 cm	28	40	Rh
5 cm – < 5,5 cm	29	60	Ag
5,5 cm – < 6cm	30	60	Ag
6 cm – < 7,5 cm	31	80	Ag
7,5 cm – < 8,5 cm	32	120	Ag
8,5 cm – 12 cm	33	120	Ag
> 12 cm	33	160	Ag

#### 6.4.3 Widoki przemieszczonego implantu

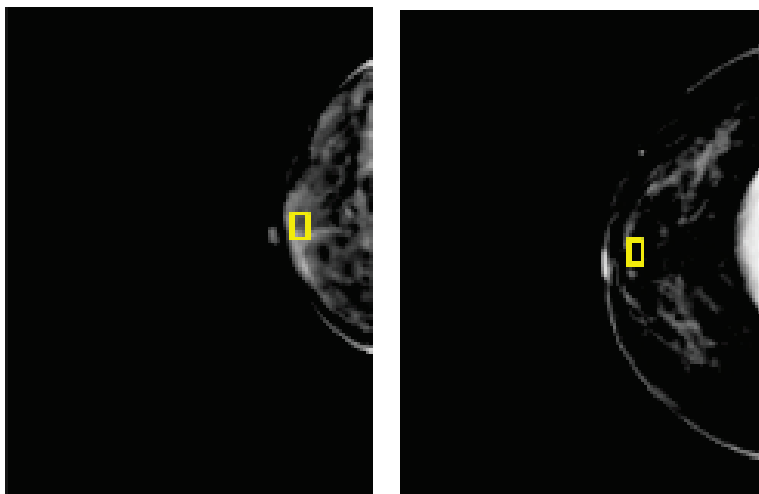1. Wybierz widok spośród miniatur u dołu ekranu *Procedure* (Procedura).
2. W trybie AEC wybierz opcję **Filtr automatyczny**.
3. Za pomocą przycisków + i – przenieś czujnik AEC do tkanki za brodawką sutkową.



4. Zarejestruj ekspozycję.
5. Dla obrazu wybierz opcję **Accept** (Akceptuj), **Reject** (Odrzuć) lub **Pend** (Oczekiwanie).



#### **Uwaga**

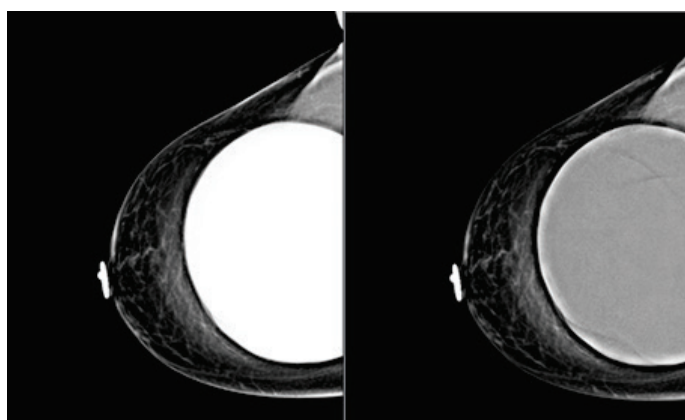
Użytkownik w roli menedżera może skonfigurować system w taki sposób, aby automatycznie akceptował nowe obrazy lub automatycznie ustawiał dla nich tryb oczekiwania.

---

6. Powtórz kroki od 1 do 5 dla każdego widoku


#### 6.4.4 Jasność implantu

Opcjonalne ustawienie przetwarzania obrazu jest dostępne zarówno w przypadku obrazowania 2D, jak i 3D z implantami. Jasność implantu można zmniejszyć w celu poprawy widoczności obszaru granicznego implant/pierś. Aby włączyć tę opcję, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Hologic.



Standard

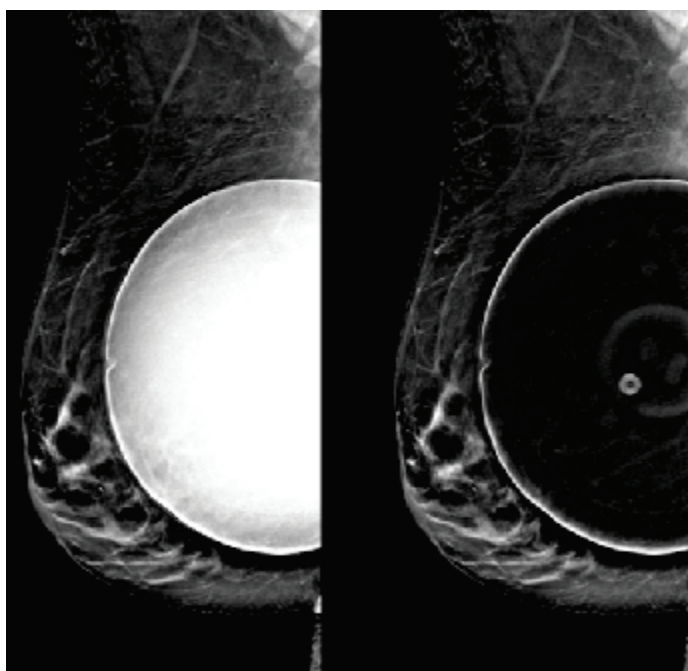Zmniejszona jasność



Standard

Zmniejszona jasność

Rycina 47: Porównanie jasności standardowej i zmniejszonej

## 6.5 Korygowanie i ponowne przetwarzanie obrazów implantów

Jeśli widok implantu lub implantu przemieszczonego został zarejestrowany bez aktywacji przycisku **Implant Present** (Obecny implant), konieczne jest skorygowanie takiego obrazu.

### 6.5.1 Jeśli obraz nie jest zaakceptowany

Wybierz przycisk **Implant Present** (Obecny implant) na ekranie *Procedure* (Procedura), aby wskazać, że istnieje implant. Na przycisku pojawi się znacznik wyboru, a obraz zostanie ponownie przetworzony.



### 6.5.2 Jeśli obraz jest zaakceptowany

1. Wybierz obraz.
2. Wybierz przycisk **Implant Present** (Obecny implant) na ekranie *Procedure* (Procedura), aby skorygować obraz. Na przycisku pojawi się znacznik wyboru, a obraz zostanie ponownie przetworzony.
3. Wybierz przycisk **Accept** (Akceptuj), aby zaakceptować zmiany.



#### Uwaga

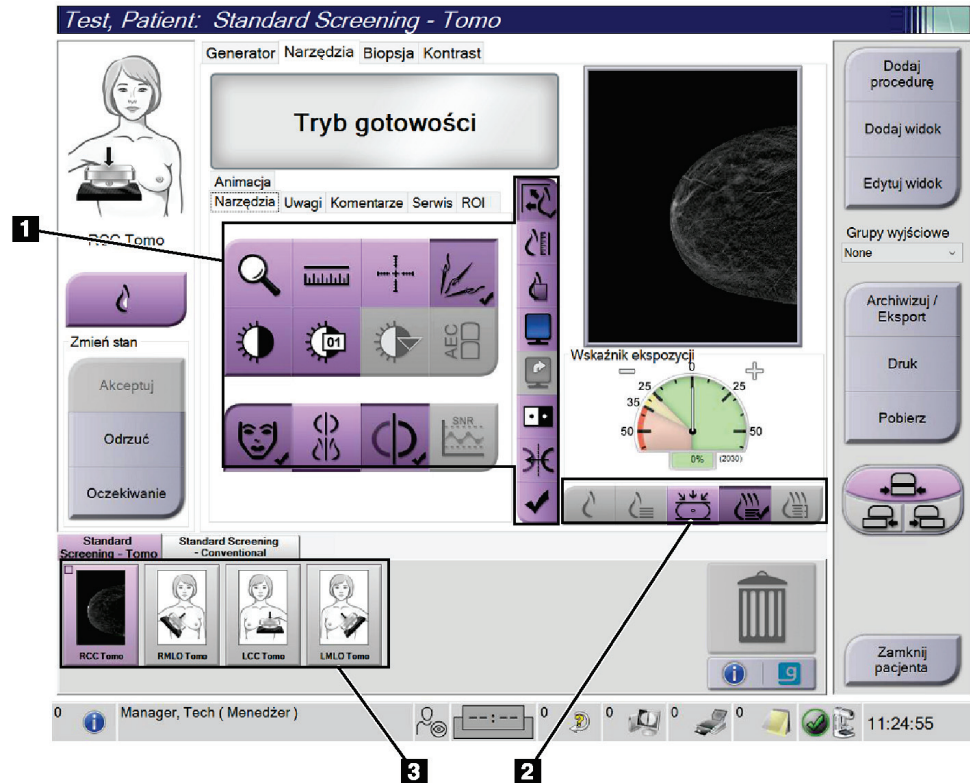
Skorygowany obraz zostanie automatycznie wysłany do wybranych urządzeń wyjściowych, o ile w systemie skonfigurowano wysyłanie obrazów po wybraniu przycisku **Accept** (Akceptuj).

---



## 6.6 Przeglądanie obrazów

Przeglądanie obrazów obejmuje korzystanie z miniatur, narzędzi do przeglądania obrazów oraz trybów wyświetlania.




Rycina 48: Karta Tools (Narzędzia) (pokazana opcja Tomosynthesis (Tomosynteza))

### Legenda rysunku

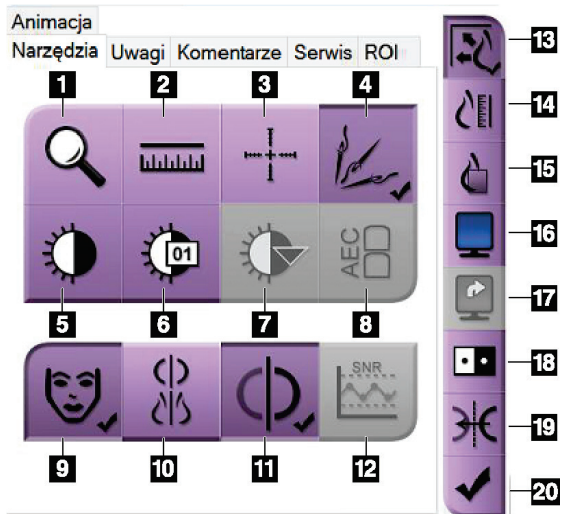1. Narzędzia przeglądania obrazów — patrz [Karta narzędzi do przeglądu obrazów](#) na stronie 106.
2. Tryby wyświetlania obrazów — patrz [Tryby wyświetlania](#) na stronie 108.
3. Miniatury widoków i miniatury obrazów. Wybrać dowolną miniaturę obrazu, aby wyświetlić obraz na monitorze wyświetlania obrazów.

### 6.6.1 Karta narzędzi do przeglądu obrazów

Karta Tools (Narzędzia) na ekranie Procedure (Procedura) zawiera narzędzia do przeglądania obrazów. Na polu aktywnego narzędzia widoczny jest znacznik wyboru.




#### Legenda ryciny

Rycina 49: Narzędzia do przeglądu obrazów

1. Narzędzie **Zoom** (Powiększenie) umożliwia powiększenie sekcji obrazu.
2. Narzędzie **Ruler** (Linijka) służy do pomiaru odległości między dwoma punktami.
3. Narzędzie **Crosshair** (Celownik) umożliwia wyświetlenie celownika na ekranie *Image Display* (Wyświetlacz obrazów).
4. Narzędzie **Demetalizer** (Usuwanie metali) umożliwia przetwarzanie obrazów tomosyntezy, na których widoczne są przedmioty metalowe.
5. Narzędzie **Window/Level** (Okno/poziom) służy do zmiany jasności i kontrastu.
6. Narzędzie **Window/Level Fine Adjustment** (Dokładna regulacja okna/poziomu) umożliwia wprowadzenie konkretnych wartości dotyczących okna i poziomu.
7. Narzędzie **LUT Selection** (Wybór tabeli LUT) umożliwia przewijanie dostępnych ustawień okna/poziomu dla wybranego obrazu z dołączonymi tabelami LUT.
8. Wybranie przycisku **AEC** powoduje wyświetlenie obszarów detektora AEC używanego do obliczenia ekspozycji. Obszary czujnika zostaną wyświetlone na ekranie *Image Display* (Wyświetlacz obrazów).
9. Przycisk **Patient Information** (Informacje o pacjencie) umożliwia aktywację wyświetlacza informacji o pacjencie.
10. Wybranie przycisku **Auto-Hanging** (Automatyczne zawieszenie) powoduje automatyczne zawieszenie aktualnie wybranego badania w konfiguracji obejmującej 4 obrazu na ekranie (4-up).
11. Przycisk **Auto-Pairing** (Automatyczne parowanie) umożliwia wyłączenie automatycznego parowania dla aktualnie wybranego obrazu w konfiguracji wiele obrazów na ekranie (multi-up).
12. Wybranie przycisku **SNR/CNR** (Stosunek sygnału do szumu / Stosunek kontrastu do szumu) umożliwia obliczenie stosunku sygnału do szumu oraz kontrastu do szumu na fantomie ACR.
13. Przycisk **Fit-to-Viewport** (Dopasuj do okienka ekranu) umożliwia dopasowanie obrazu do kafelka obrazu.
14. Przycisk **True Size** (Rozmiar rzeczywisty) umożliwia wyświetlenie obrazu w rzeczywistym rozmiarze piersi.
15. Przycisk **View Actual Pixels** (Wyświetl rzeczywiste piksele) umożliwia wyświetlenie obrazu w pełnej rozdzielczości.
16. Przycisk **Multi-Up Display** (Wyświetlacz z wieloma kafelkami) umożliwia wybranie liczby kafelków do wyświetlenia.
17. Przycisk **Image Tile Advance** (Przesunięcie kafelka obrazu) powoduje ustawienie aktywnego kafelka z układu wielu kafelków.
18. Narzędzie **Invert Image** (Odwróć obraz) powoduje zmianę koloru czarnego na biały, a białego na czarny.
19. Przycisk **Mirror** (Odbicie lustrzane) umożliwia odwrócenie (lustrzane) obrazu.
20. Przycisk **Tag for Print** (Zaznacz do drukowania) powoduje zaznaczenie projekcji lub obrazów po rekonstrukcji obrazu tomosyntezy do późniejszego drukowania.

### 6.6.2 Karta Notices (Uwagi)

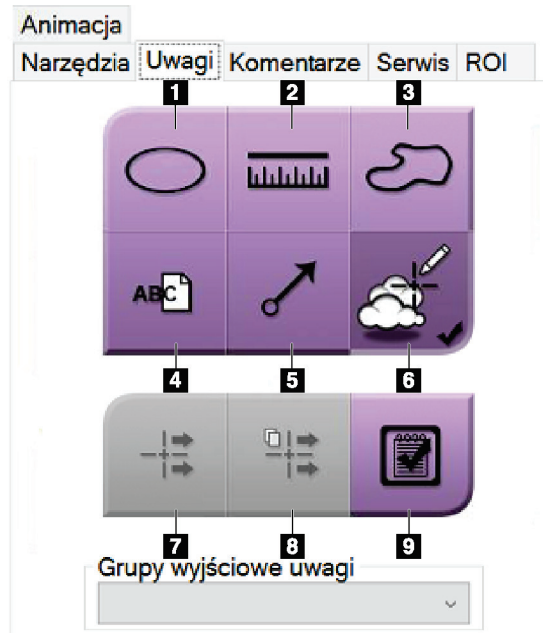Narzędzia na karcie **Notices** (Uwagi) umożliwiają zaznaczanie obrazów i dodawanie do nich adnotacji, a także wysyłanie uwag dotyczących wyświetlanego obrazu albo procedury. Menu rozwijane Notice Output Groups (Grupy wyjściowe uwag) u dołu tej karty umożliwia wybranie miejsca docelowego dla uwag.



Rycina 50: Narzędzia na karcie Notices (Uwagi)

#### Legenda ryciny

1. Narzędzie **Oval** (Owal) umożliwia narysowanie owalnego zaznaczenia na obrazie.
2. Narzędzie **Ruler** (Linijka) służy do pomiaru odległości między dwoma punktami.
3. Narzędzie **Freehand** (Odręcznie) umożliwia narysowanie odręcznego zaznaczenia na obrazie.
4. Narzędzie **Text** (Tekst) umożliwia dodanie uwagi tekstowej do obrazu bez zaznaczenia.
5. Narzędzie **Arrow** (Strzałka) umożliwia narysowanie na obrazie zaznaczenia w postaci strzałki.
6. Narzędzie **Markings** (Zaznaczenia) służy do pokazywania lub usuwania zaznaczeń oraz adnotacji na obrazie.
7. Narzędzie **Send Notice** (Wyślij uwagę) umożliwia wysłanie uwagi dotyczącej bieżącego obrazu do wybranego miejsca docelowego.
8. Narzędzie **Send All Notices** (Wyślij wszystkie uwagi) umożliwia wysłanie wszystkich uwag dotyczących wszystkich obrazów w otwartej procedurze do wybranego miejsca docelowego.
9. Narzędzie **Viewed** (Wyświetlone) służy do zmiany statusu uwag dotyczących pacjenta na wyświetlone.

#### 6.6.3 Inne narzędzia do przeglądu obrazów

##### Inne karty

- **Comments** (Komentarze): umożliwia dodawanie komentarzy do obrazu.
- **Service** (Serwis): umożliwia oznaczenie obrazu jako przeznaczonego dla personelu serwisowego.
- **ROI** (Obszar zainteresowania): służy do rysowania obszaru zainteresowania na monitorze do wyświetlania obrazów.
- **Cine** (Animacja): wyświetla serię obrazów w postaci filmu (opcja tomosyntezy).

##### Wskaźnik ekspozycji


Wskaźnik ekspozycji stanowi wskaźnik jakości obrazu. Gdy wskaźnik ekspozycji pokazuje obszar w kolorze czerwonym lub żółtym, należy sprawdzić wybrany obraz pod względem szumów i podjąć decyzję o tym, czy wymagana jest ponowna akwizycja takiego obrazu.



Rycina 51: Wskaźnik ekspozycji

##### Tryby wyświetlania

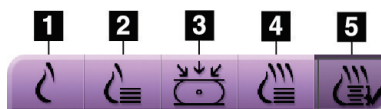Przyciski dostępne w obszarze trybów wyświetlania na ekranie umożliwiają wybór typu widoku do pokazania na monitorze do wyświetlania obrazów. W celu wyświetlania obrazów złożonych do wyboru dostępne są obrazy klasyczne, wygenerowane obrazy 2D, projekcje, rekonstrukcje oraz obrazy SmartSlices.




Rycina 52: Tryby wyświetlania

##### Legenda ilustracji

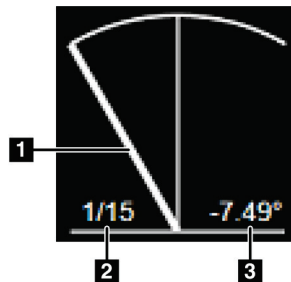1. Przycisk **Conventional** (Klasyczne) umożliwia wyświetlanie obrazów klasycznych 2D.
2. Przycisk **Generated 2D** (Wygenerowane 2D) umożliwia wyświetlenie obrazu 2D wygenerowanego z zarejestrowanego obrazu tomograficznego.
3. Przycisk **Projections** (Projekcje) wyświetla obrazy projekcji z zakresu 15°.
4. Przycisk **Reconstructions** (Rekonstrukcje) umożliwia wyświetlanie warstw 1 mm po rekonstrukcji.
5. Przycisk **SmartSlices** pokazuje 6 mm warstwy z oprogramowania 3DQuorum.

### 6.6.4 Wskaźnik projekcji

Wskaźnik projekcji na monitorze do wyświetlania obrazów pokazuje się tylko w trakcie procedur tomosyntezy. Wybierz tryb wyświetlania projekcji, aby pokazać wskaźnik.




Rycina 53: Wskaźnik projekcji

#### Legenda ilustracji

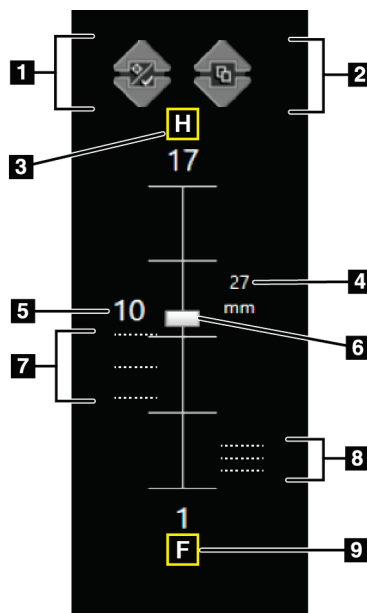1. Użyj kółka przewijania myszki, aby poruszać się po projekcjach.
2. Liczba projekcji dla obrazu
3. Kąt nachylenia lampy do projekcji

### 6.6.5 Wskaźnik warstw

Wskaźnik warstw na monitorze do wyświetlania obrazów pokazuje się tylko na rekonstrukcjach tomograficznych, w tym SmartSlices.



Rycina 54: Wskaźnik warstw  
(pokazana opcja SmartSlices)

#### Legenda ilustracji

1. Strzałki w górę i w dół umożliwiają zmianę między warstwami, które zawierają docelową zmianę, a warstwami zaznaczonymi do drukowania.
2. Strzałki w górę i w dół umożliwiają zmianę między warstwami, które zawierają uwagi.
3. „H” (odniesienie anatomiczne do kierunku głowy).
4. Wysokość w obrębie objętości piersi (dla SmartSlices)
5. Numer zrekonstruowanej warstwy tomosyntezy lub obrazu SmartSlice
6. Pasek przewijania służy do przewijania warstw rekonstrukcji.
7. Warstwy, które zawierają cele lub są oznaczone do drukowania.
8. Warstwy, które zawierają uwagi.
9. „F” (odniesienie anatomiczne do kierunku stóp).

## 6.7 Wysyłanie obrazów do urządzeń wyjściowych

Obrazy można wysyłać do urządzeń wyjściowych albo można używać funkcji Archive/Export (Archiwizuj/Eksportuj) w celu kopiowania obrazów do tymczasowego nośnika pamięci masowej. Instrukcje zawierają sekcje [Grupy wyjściowe](#) na stronie 82 i [Urządzenia wyjściowe na żądanie](#) na stronie 87.

### 6.8 Obrazy I-View 2D wzmocnione kontrastem



**Ostrzeżenie:**

U pacjentów mogą występować reakcje niepożądane na środki kontrastowe. Wyczerpujące informacje na ten temat podano w instrukcji użycia środka kontrastowego.



**Ostrzeżenie:**

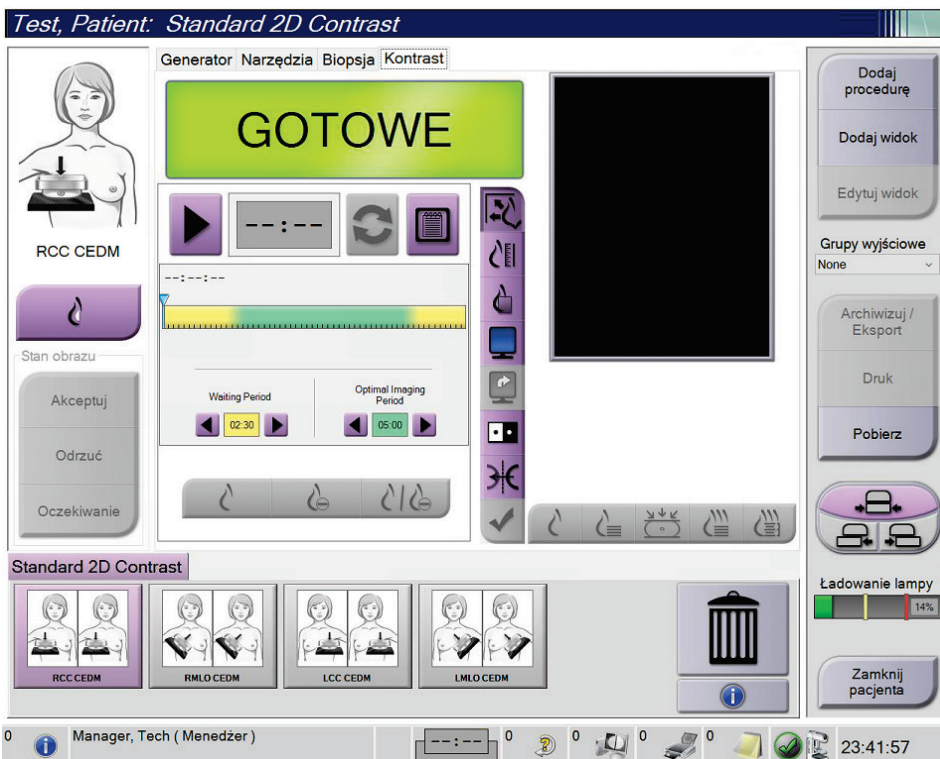
Mammografia wzmocniona kontrastem wykorzystuje do badania środki kontrastowe, które są wstrzykiwane dożylnie. Mogą wystąpić reakcje alergiczne.



**Uwaga**

Firma Hologic konfiguruje niektóre systemy w taki sposób, aby spełniały konkretne wymogi. Konkretny system może nie zawierać niektórych opcji i akcesoriów opisanych w niniejszym podręczniku.

1. Wybrać kartę **Contrast** (Kontrast), aby uzyskać dostęp do funkcji widoku I-View™ z kontrastem 2D (CEDM).



Rycina 55: Ekran I-View 2D Contrast (Widok I-View z kontrastem 2D)

2. Skonfigurować ustawienia kontrastu. Więcej informacji na ten temat podano w części [Konfiguracja ustawień kontrastu](#) na stronie 115.

**Uwaga**

Informacje o kontraście podane są w nagłówku DICOM obrazu I-View.

3. Aby rozpocząć dawkowanie kontrastu i uruchomić zegar, wybrać przycisk **Start** (strzałka).

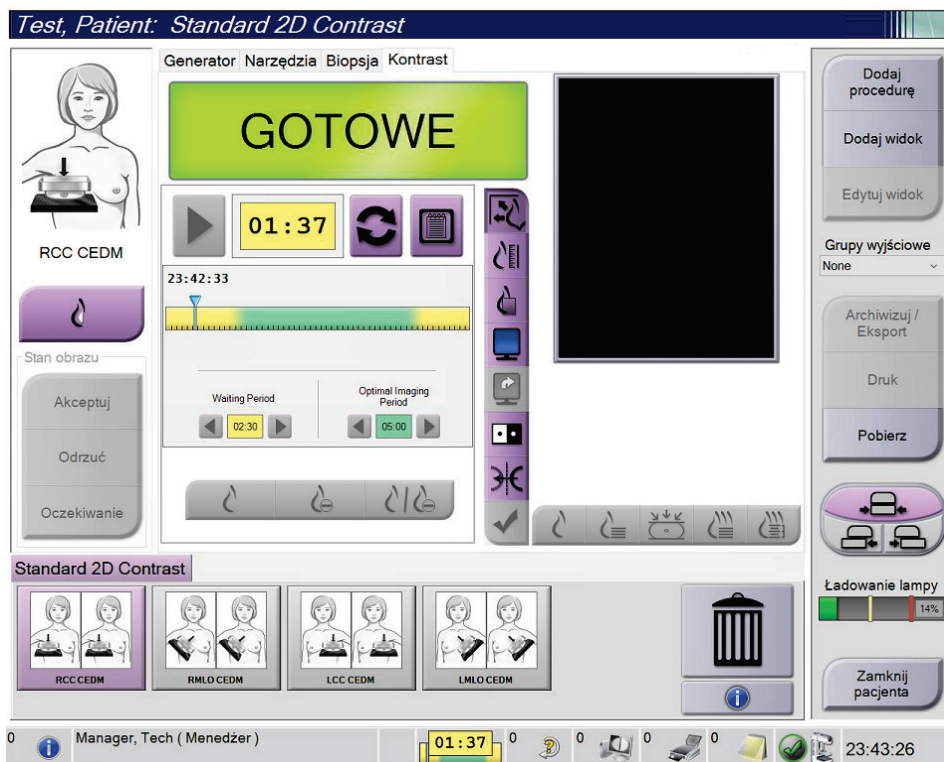
Zegar rozpoczyna odliczanie w fazie **Okres oczekiwania**, której odpowiada żółte tło.

**Uwaga**

Istnieje możliwość ustawienia czasu dla faz licznika czasu **Okres oczekiwania** i **Okres optymalnego obrazowania**. Należy użyć strzałek w lewo i w prawo.

**Uwaga**

Istnieje możliwość ustawienia domyślnego czasu dla faz zegara **Okres oczekiwania** i **Okres optymalnego obrazowania**. Patrz Ustawianie wartości domyślnych kontrastu.



Rycina 56: Ekran I-View 2D Contrast (Widok I-View z kontrastem 2D), okres oczekiwania




### Uwaga

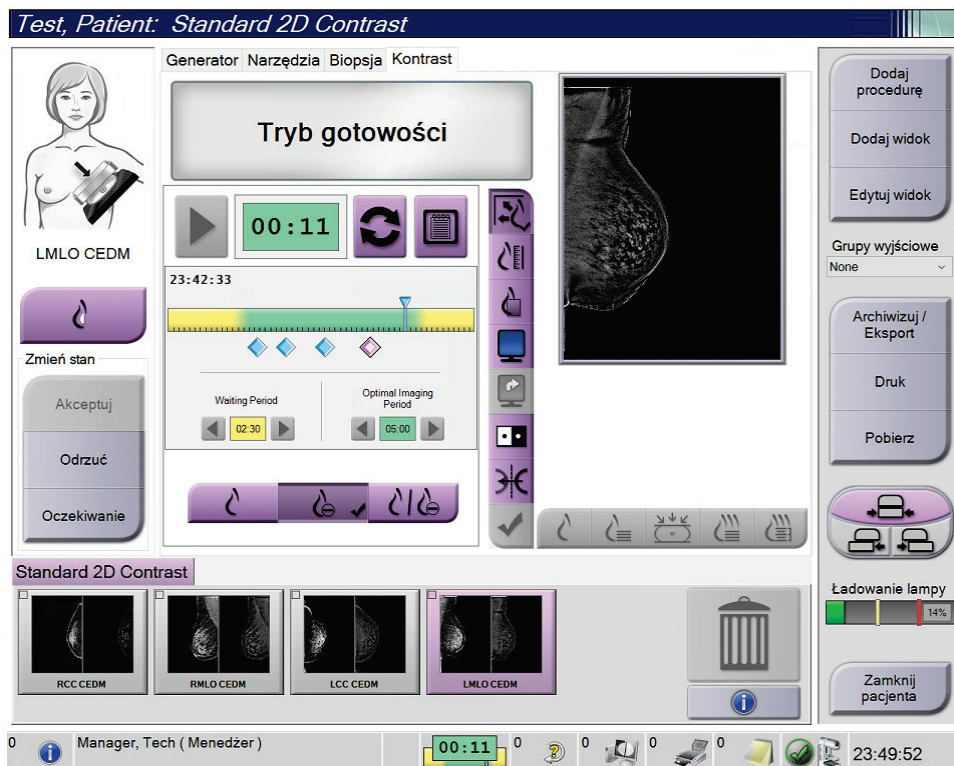Funkcja zegara nie zezwala na zatrzymanie zegara, a jedynie jego uruchomienie i zresetowanie. Licznik czasu zatrzymuje się tylko wtedy, gdy użytkownik wyjdzie z procedury pacjenta.

Po zakończeniu fazy **Okres oczekiwania** zegar rozpoczyna fazę **Okres optymalnego obrazowania**, której odpowiada zielone tło.

4. Obrazy należy pozyskiwać w fazie **Okres optymalnego obrazowania**.

Po pozyskaniu obrazu pod zegarem pojawi się znacznik.



Rycina 57: Ekran I-View 2D Contrast (Widok I-View z kontrastem 2D), okres optymalnego obrazowania



5. Wybierać przyciski niskiej i wysokiej ekspozycji, aby wyświetlić obrazy pozyskane z zastosowaniem niskiej i wysokiej energii.
- **Low** (Niska): Konwencjonalny obraz niskoenergetyczny
  - **Sub** (Subtrakcja): Obraz z kontrastem i subtrakcją
  - **Low Sub** (Niska subtrakcja): Wyświetlanie obok siebie obrazów niskoenergetycznych i z subtrakcją, na podzielonym ekranie.



**Przeostoga:**

Wykonywanie procedury obrazowania I-View z kontrastem 2D wydłuża czas, jaki musi upłynąć przed przystąpieniem do akwizycji kolejnych obrazów. Gdy ikona



stanu systemu zmieni kolor na czerwony ( ), wyświetlany jest zalecany czas oczekiwania. W tym czasie temperatura lampy RTG spada, co pozwala uniknąć uszkodzenia unieważniającego gwarancję na lampę. Każdorazowo przed rozpoczęciem procedury obrazowania I-View z kontrastem 2D należy upewnić się,



( ) że ikona stanu systemu ma kolor zielony. Jeżeli w czasie procedury ikona stanu systemu zmieni kolor na czerwony, należy odczekać zalecaną ilość czasu przed akwizycją kolejnych obrazów, a następnie szybko zakończyć procedurę, ograniczając liczbę ekspozycji do minimum.

---

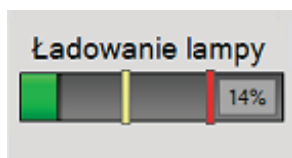
Obciążenie termiczne lampy rentgenowskiej jest śledzone przez wskaźnik obciążenia lampy. Należy zwracać uwagę na stan obciążenia lampy w czasie akwizycji obrazów wzmocnionych kontrastem. Więcej informacji podano w punkcie [Wskaźnik obciążenia lampy](#) na stronie 114.

### 6.8.1 Wskaźnik obciążenia lampy


Karta **Generator** na ekranie *Procedura* zawiera wskaźnik obciążenia lampy. Wskaźnik ten informuje o aktualnym obciążeniu termicznym lampy rentgenowskiej.

Wskaźnik obciążenia lampy wyświetla jeden z następujących trzech stanów:


- Obciążenie termiczne lampy rentgenowskiej jest na akceptowalnym poziomie. Ikona stanu systemu na pasku zadań ma kolor zielony. Kontynuuj akwizycję obrazów i zakończ procedurę.



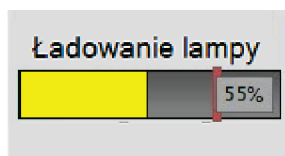- Obciążenie termiczne lampy rentgenowskiej przekracza limit ostrzegawczy (domyślnie = 40%), ale nie wykracza poza limit maksymalny (domyślnie = 72%). Zakończ akwizycję aktualnego obrazu, a następnie poczekaj na ostygnięcie lampy rentgenowskiej przed zakończeniem procedury.



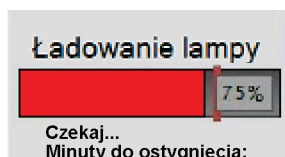- Obciążenie termiczne lampy rentgenowskiej wykracza poza limit maksymalny (domyślnie = 72%). Ikona stanu systemu na pasku zadań jest koloru czerwonego i wyświetla liczbę minut wymaganych do ostygnięcia lampy rentgenowskiej. Nie wykonuj akwizycji obrazów. Odłóż procedurę do czasu ostygnięcia lampy rentgenowskiej.



#### Przeostroga

Zbyt wysoka temperatura może uszkodzić lampę rentgenowską.

---

## 6.8.2 Konfiguracja ustawień kontrastu

1. Na karcie **Contrast** (Kontrast) wybrać przycisk **Configure Contrast** (Konfiguruj kontrast), aby edytować ustawienia kontrastu. Nastąpi otwarcie okna dialogowego **Contrast Information** (Dane kontrastu).

*Informacje o środku kontrastowym*

Droga podania środka kontrastowego	Intra-arterial route
Środek kontrastowy	Diatrizoate
Stężenie środka kontrastowego	240 mg/ml
Całkowita objętość Bolusa	0.0 ml
Masa c. pacjenta	0.0 lb = 0.0 kg
Stężenie środka kontrastowego na jedn. masy ciała	0.0 ml/kg
Ilość środka kontrastowego	0.0 ml

Zapisz i zamknij      Anuluj

Rycina 58: Ustawienia kontrastu 2D I-View

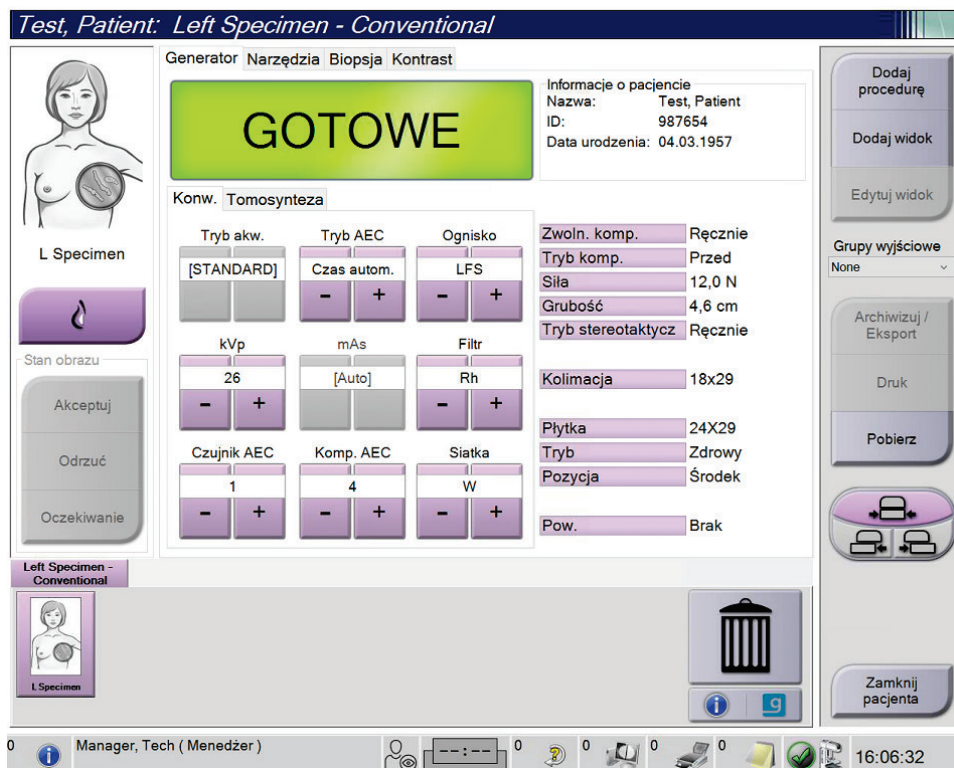
2. Z list rozwijanych wybrać odpowiednie ustawienia.
3. Wprowadzić dane w polu **Contrast Concentration Per Body Weight** (Stężenie kontrastu na masę ciała) lub **Amount of Contrast Agent** (Ilość środka kontrastowego). Pozostałe pola zostaną wypełnione właściwymi danymi.
4. Wybrać opcję **Save & Close** (Zapisz i zamknij).

### 6.9 Obrazy próbek

System może też służyć do obrazowania próbek pochodzących z biopsji.

Aby pozyskać obrazy próbek:


1. Wybrać pacjenta z listy roboczej lub ręcznie dodać nowego pacjenta.
2. Dodać lub wybrać żadaną procedurę obrazowania próbek.



Rycina 59: Ekran procedury dla próbek

3. Upewnić się, że ramię C jest ustawione w pozycji 0 stopni.
4. Przygotować próbkę i umieścić ją na detektorze obrazu.

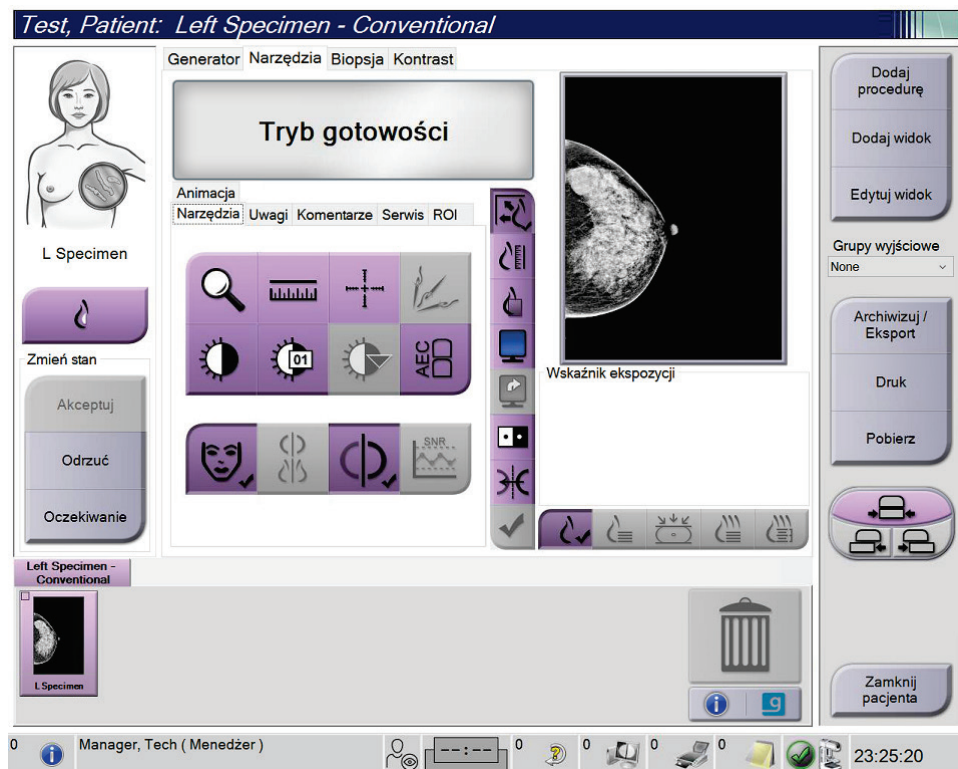5. Pozyskać obrazy. Więcej informacji na temat akwizycji obrazów, patrz [Akwizycja obrazu](#) na stronie 95.



Rycina 60: Ekran obrazowania próbek

6. Przejrzeć obrazy w razie potrzeby.



## Rozdział 7 Akcesoria

W systemie można wykonywać badania przesiewowe i diagnostyczne przy zastosowaniu określonych akcesoriów. W niniejszym systemie opisano sposób użytkowania wszystkich możliwych akcesoriów systemu.

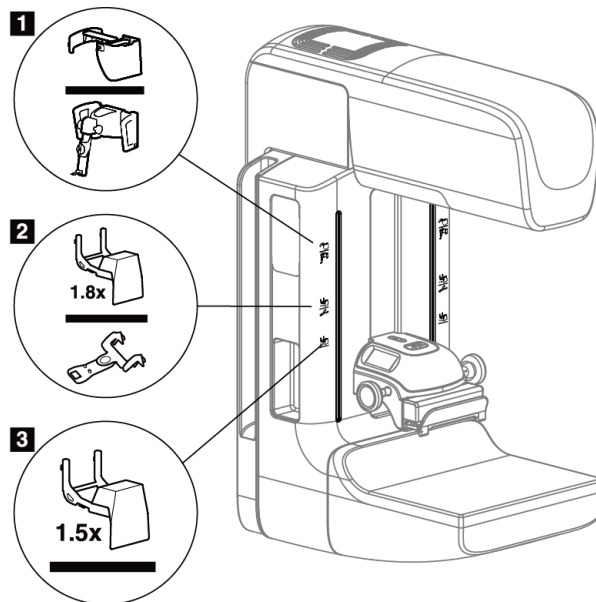


### Uwaga

Firma Hologic konfiguruje niektóre systemy w taki sposób, aby spełniały konkretne wymagania. Konkretny system może nie zawierać niektórych opcji i akcesoriów opisanych w niniejszym podręczniku.

### 7.1 Instalowanie akcesoriów na ramieniu C

Chowana osłona twarzy, statyw do powiększeń oraz celowniki lokalizacyjne należy mocować w szczelinach na ramieniu C. Te szczeliny są oznakowane ikonami, które wskazują akcesorium odpowiednie dla konkretnej szczeliny. Dla każdego akcesorium dostępne są dwie linie. Akcesorium należy wyrównać z odpowiednią linią na ramieniu C. Gdy zaczep znajdzie się na odpowiedniej głębokości, druga cieńsza linia zrówna się z linią na ramieniu C. Następne sekcje zawierają instrukcje instalacji poszczególnych akcesoriów.



Rycina 61: Akcesoria ramienia C

#### Legenda ryciny

1. Szczelina na chowaną osłonę twarzy (opcja tomosyntezy) lub na system kierowanej biopsji piersi Affirm® (opcja biopsji).
2. Szczelina na statyw do powiększeń 1,8x i na celowniki lokalizacyjne.
3. Szczelina na statyw do powiększeń 1,5x.

### 7.2 Osłony twarzy pacjentki

Osłona twarzy utrzymuje głowę i twarz pacjentki z dala od pola promieniowania RTG podczas badania. Osłonę należy sprawdzać codziennie przed użyciem.



**Ostrzeżenie:**

**Osłona twarzy musi być zamocowana w przypadku wszystkich ekspozycji z wyjątkiem badań z powiększaniem.**



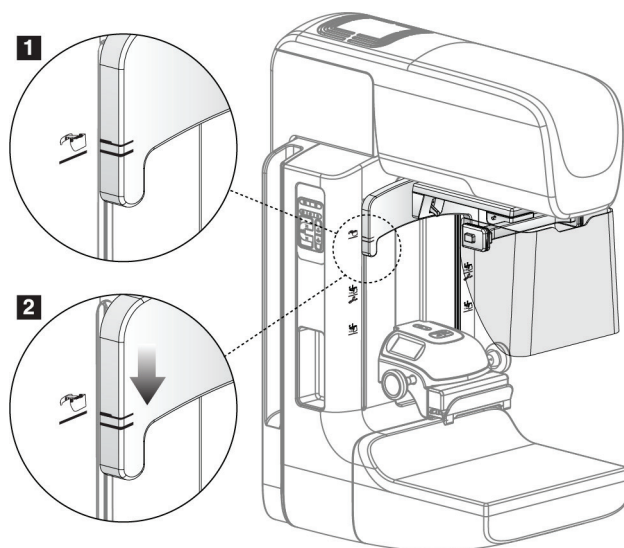
**Ostrzeżenie:**

**Osłona twarzy nie chroni pacjentki przed promieniowaniem.**

#### 7.2.1 Instalacja i demontaż chowanej osłony twarzy

Aby zainstalować chowaną osłonę twarzy:

1. Całkowicie wysuń osłonę twarzy do położenia zewnętrznego.
2. Wyrównaj zaczepy osłony twarzy ze szczelinami montażowymi na ramieniu C, które są oznaczone ikoną osłony twarzy.
3. Wprowadź zaczepy znajdujące się na obu bokach osłony twarzy do szczelin montażowych na ramieniu C. Dźwignia odblokowująca (pozycja 1 na poniższej rycinie) będzie ustawiona w położeniu górnym.
4. Popchnij osłonę twarzy do położenia dolnego i zablokowanego. Gdy osłona twarzy zostanie zablokowana, dźwignia odblokowująca będzie ustawiona w położeniu dolnym.



Rycina 62: Wyrównanie chowanej osłony twarzy na ramieniu C

Aby zdemontować chowaną osłonę twarzy:

1. Naciśnij i przytrzymaj dźwignię odblokowującą (pozycja 1 na poniższej rycinie) w położeniu górnym.
2. Unieś osłonę twarzy ze szczelin i wyjmij z ramienia C.



## 7.2.2 Użytkowanie chowanej osłony twarzy



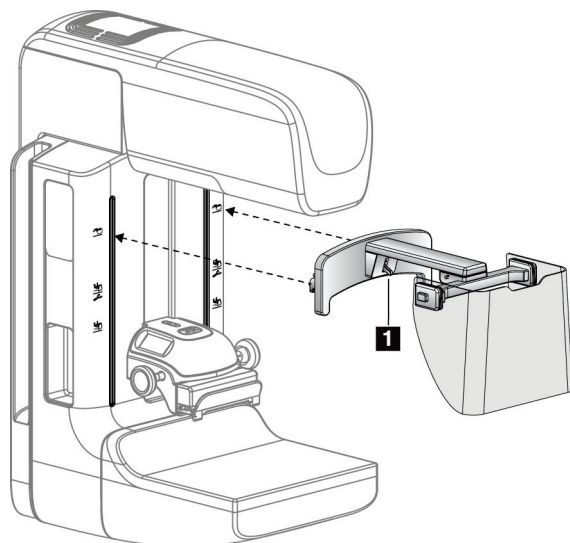
### Uwaga

Przed wykonaniem ekspozycji należy się upewnić, że osłona twarzy jest całkowicie wysunięta lub całkowicie schowana.


Aby wysunąć osłonę twarzy, należy ją odciągać od ramienia C, aż zostanie zablokowana w położeniu zewnętrznym.

Aby schować osłonę twarzy:

1. Naciśnij zatrzask zwalniający (pozycja 2 na poniższej rycinie – po jednym na każdej stronie).
2. Popychaj osłonę twarzy w stronę ramienia C aż dojdzie do jej zatrzymania.




Rycina 63: Instalacja osłony twarzy

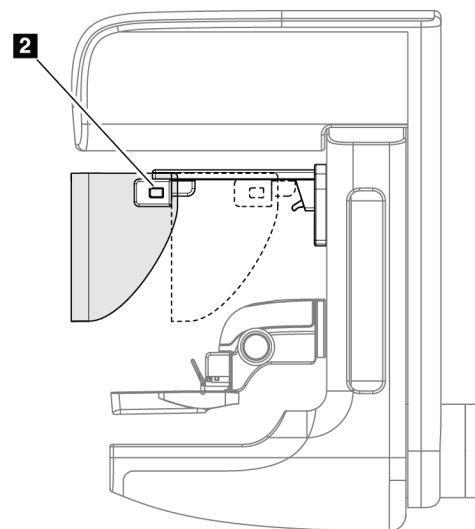

Rycina 64: Obsługa osłony twarzy

#### 7.2.3 Instalacja i demontaż klasycznej osłony twarzy

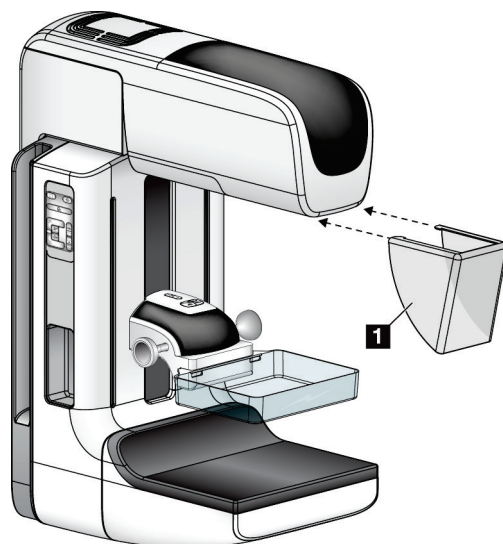

Rycina 65: Instalacja klasycznej osłony twarzy

Aby zainstalować klasyczną osłonę twarzy:

1. Ostrożnie wprowadź występy końcowe osłony twarzy (pozycja 1 na poprzedniej rycinie) do szczelin w przedniej części mocowania głowicy lampy.
2. Nasuwaj osłonę twarzy na mocowanie głowicy lampy do momentu zablokowania osłony twarzy.

Aby zdemontować klasyczną osłonę twarzy:

1. Pociągnij boki osłony twarzy w kierunku poziomym (z dala od głowicy lampy).
2. Zdejmij osłonę twarzy.

#### 7.3 Płytki kompresyjne



##### Uwaga

Niektóre płytki są opcjonalne i mogą nie być dołączone do systemu.

---

System może rozpoznać każdą płytkę i automatycznie wyregulować kolimator.

Dostępne akcesoria są zależne od konfiguracji konkretnego systemu.

Tabela 21: Dostępne akcesoria

Akcesorium		2D/BT	Badanie przesiewowe 2D
Płytki do rutynowych badań przesiewowych	18 x 24 cm	*	*
	24 x 29 cm	*	*
	Do małych piersi	*	*
	18 x 24 cm SmartCurve®	*	*
	24 x 29 cm SmartCurve	*	*
	SmartCurve Mini	*	*
Kontaktowe i punktowe płytki kompresyjne	Kontaktowa 10 cm	*	
	Kontaktowa 15 cm	*	
	Kontaktowa, punktowa 7,5 cm	*	Patrz uwaga
	Bezramkowa, kontaktowa, punktowa	*	
Płytki do powiększeń	Punktowa 7,5 cm do powiększeń	*	
	10 cm do powiększeń	*	
	15 cm do powiększeń	*	
Płytki lokalizacyjne	Prostokątna 10 cm, otwarta	*	
	Prostokątna 15 cm, otwarta	*	
	10 cm, perforowana	*	
	15 cm, perforowana	*	
	Perforowana, 10 cm, do powiększeń, lokalizacyjna	*	
	Lokalizacyjna, 10 cm, do powiększeń	*	
Płytki do ultradźwięków	15 cm, duża, do ultradźwięków	*	
Osłona twarzy pacjentki		*	*
Statyw do powiększeń		*	
Lokalizacyjne urządzenie celownicze		*	
Urządzenia celownicze do powiększeń		*	



### Uwaga

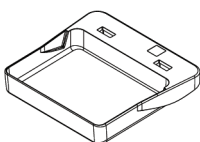
W celu kalibracji grubości po kompresji na systemie do badań przesiewowych 2D należy używać tylko punktowej płytki kontaktowej 7,5 cm.




### Uwaga

Bezramkowa płytko 24 x 29 cm do badań przesiewowych, płytko 24 x 29 cm systemu SmartCurve, płytko do powiększeń oraz płytko lokalizacyjne są NIEZGODNE z funkcją przesuwania płytek.


### 7.3.1 Płytko do rutynowych badań przesiewowych



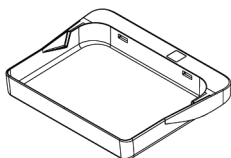Bezramkowa płytko  
18 x 24 cm do badań  
przesiewowych




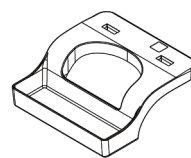Bezramkowa płytko  
24 x 29 cm do badań  
przesiewowych




Bezramkowa płytko  
do małych piersi


### Płytko systemu SmartCurve

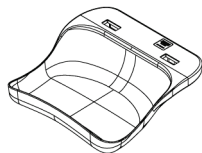

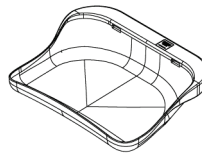Bezramkowa płytko 18 x 24  
cm systemu SmartCurve do  
badań przesiewowych



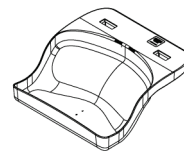Bezramkowa płytko 24 x 29  
cm systemu SmartCurve do  
badań przesiewowych



Płytko mini do badań  
przesiewowych systemu  
SmartCurve



### Uwaga

Płytko systemu SmartCurve mogą nie być odpowiednie dla wszystkich pacjentek. Jeśli piersi nie można odpowiednio unieruchomić lub skompresować z powodu krzywizny płytek, należy użyć standardowych płaskich płytek do badań przesiewowych.



### Uwaga

Płytko systemu SmartCurve nie są zalecane do widoków tylny-przyśrodkowych fragmentów obu piersi, widoków po zrolowaniu ani widoków mozaikowych bardzo dużych piersi. W przypadku takich widoków należy używać standardowych płaskich płytek do badań przesiewowych.



**Uwaga**

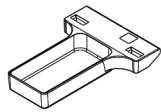
Płytki SmartCurve systemu są odpowiednie do piersi większości rozmiarów. Z powodu krzywizny tych płytek u niektórych pacjentek, w przypadku których odpowiednie byłoby użycie mniejszej standardowej płytki płaskiej, łatwiej jest uzyskać odpowiednie ułożenie z użyciem większej płytki SmartCurve.




**Uwaga**

Płytki systemu SmartCurve są niezgodne z trybem kompresji FAST.


### 7.3.2 Kontaktowe i punktowe płytki kompresyjne



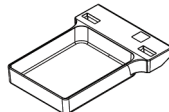**Bezramkowa płytki  
10 cm kontaktowa**



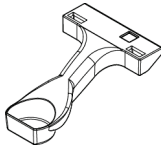**Bezramkowa płytki  
15 cm kontaktowa**




**Bezramkowa płytki  
7,5 cm kontaktowa,  
punktowa**




**Bezramkowa płytki  
kontaktowa,  
punktowa**


### 7.3.3 Płytki do powiększeń

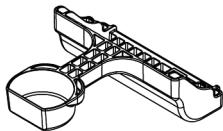

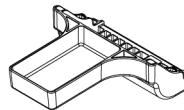**Punktowa płytki 7,5 cm  
do powiększeń**



**Płytki 10 cm do  
powiększeń**

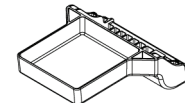


**Płytki 15 cm do  
powiększeń**




**Uwaga**

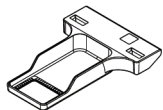Obrazów tomosyntezy nie można rejestrować przy użyciu płytek do powiększeń.


### 7.3.4 Płytki lokalizacyjne



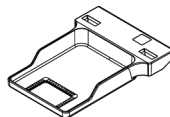
Płytki lokalizacyjna 10 cm z prostokątnym otworem



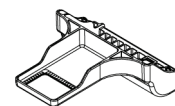
Płytki lokalizacyjna 15 cm z prostokątnym otworem



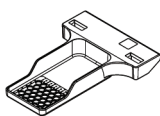Płytki lokalizacyjna 10 cm do powiększeń



Płytki lokalizacyjna 10 cm, perforowana

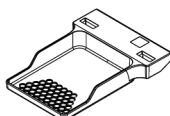


Płytki lokalizacyjna 15 cm, perforowana



Płytki lokalizacyjna 10 cm do powiększeń, perforowana

### 7.3.5 Duża płytki do ultradźwięków

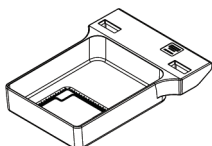


Duża płytki 15 cm do ultradźwięków

### 7.3.6 Instalowanie i demontaż płytki kompresyjnej
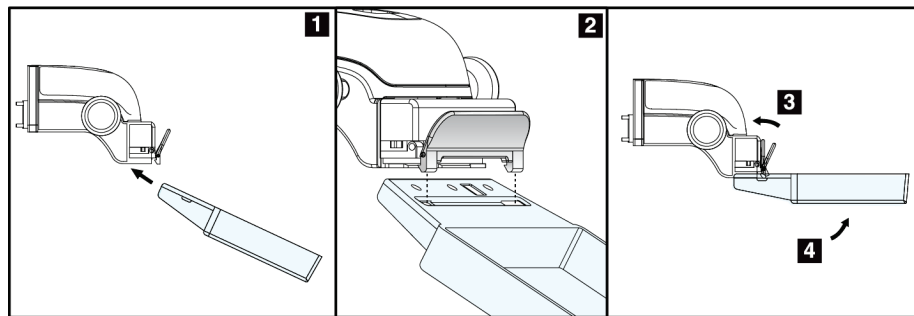
#### Instalowanie płytki kompresyjnej:


1. Przytrzymaj przednią część płytki jedną ręką przed urządzeniem kompresyjnym.
2. Przechyl płytke (od 30 do 45 stopni), a następnie umieść tył płytki na rowku z tyłu urządzenia kompresyjnego (pozycja 1 na poniższej rycinie).
3. Przesuwaj płytke wzdłuż rowka do momentu, gdy szczeliny u góry płytki znajdują się pod blokadami na zacisku płytki (pozycja 2 na poniższej rycinie).
4. Zaciśnij zacisk płytki (pozycja 3 na poniższej rycinie) wolną ręką.
5. Obróć płytke do góry (poz. 4 na poniższej rycinie).
6. Zwolnij zacisk płytki, aby zablokować płytke.



Rycina 66: Instalacja płytki kompresyjnej

#### Usuwanie płytki kompresyjnej:

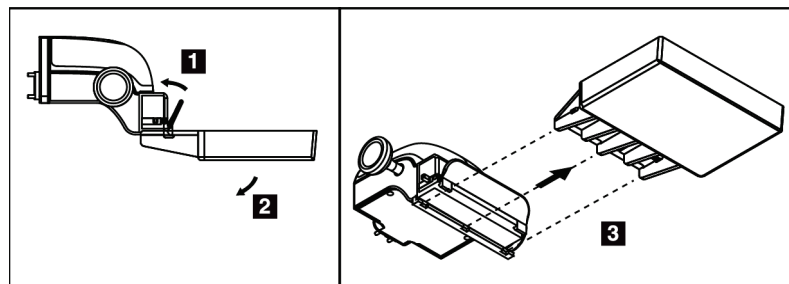1. Przytrzymaj płytke jedną ręką, a jednocześnie wolną ręką zaciśnij zacisk płytki, aby zwolnić blokadę (pozycja 1 na poniższej rycinie).
2. Obniż płytke (poz. 2 na poniższej rycinie) i wyjmij płytke z urządzenia kompresyjnego (poz. 3 na poniższej rycinie).
3. Zwolnij zacisk płytki.



Rycina 67: Demontaż płytki kompresyjnej

#### 7.3.7 Konserwacja i czyszczenie płytek

Płytki należy czyścić po każdym użyciu. Instrukcje czyszczenia są dostępne w sekcji [Konserwacja i czyszczenie](#) na stronie **Error! Bookmark not defined..**

#### 7.3.8 Przesuwanie płytki

System zezwala większości płytek na przesuwanie w lewo lub prawo od położenia środkowego. Ta funkcja ułatwia wykonywanie badań małych piersi z widokami bocznymi. Gdy wybrany jest widok boczny, system automatycznie przesuwa kolimator do pozycji wybranej płytki.



##### Uwaga

Bezramkowa płytka 24 x 29 cm do badań przesiewowych, płytka 24 x 29 cm systemu SmartCurve oraz płytki do powiększeń są NIEZGODNE z funkcją przesuwania płytek.

---

#### 7.3.9 Tryb kompresji FAST

##### Informacje o trybie kompresji FAST

Tryb kompresji FAST (ang. Fully Automatic Self-adjusting Tilt) jest przeznaczony do stosowania, gdy budowa tkanki piersi nie pozwala na jednakową kompresję całej piersi z użyciem płaskiej płytki kompresyjnej. W przypadku takich pacjentek niewystarczająca kompresja może spowodować, że obraz będzie wyglądać na nieostry w regionie przednim — zarówno z powodu mimowolnych ruchów, jaki z powodu niewystarczającej kompresji.

Tryb kompresji FAST używany z piersiami tego typu zapewnia:

- Zmniejszenie artefaktów ruchu, ponieważ kompresja jest skuteczniejsza.
- Bardziej jednolitą kompresję od ściany klatki piersiowej do brodawki sutkowej.
- Maksymalny komfort pacjentki, ponieważ ten tryb zapobiega nadmiernej kompresji przy ścianie klatki piersiowej.

Gdy wybrany jest tryb kompresji FAST, płytka pochyla się automatycznie przy stosowaniu kompresji. Początkowo płytka jest ustawiona w położeniu płaskim do momentu zastosowania siły kompresji. Następnie płytka pochyla się do momentu osiągnięcia maksymalnego kąta.

Tryb kompresji FAST nie wymaga nadmiernej kompresji, ale konieczne jest użycie wystarczającej kompresji, aby nie dopuścić do ruchu piersi. Należy stosować spójną kompresję szczególnie w przypadku powiązanych widoków prawej i lewej strony.



Tryb kompresji FAST może nie być najlepszy dla piersi, które są równe lub symetryczne pod względem grubości od ściany klatki piersiowej do przedniego obszaru piersi.



### Uwaga

Z trybem kompresji FAST zgodna jest tylko bezramkowa płytką 18 x 24 cm do badań przesiewowych oraz bezramkowa płytką 24 x 29 cm do badań przesiewowych.

---



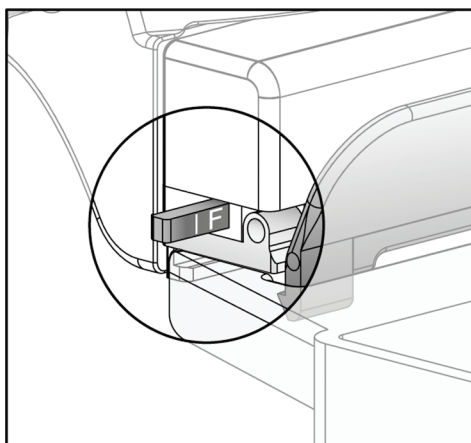
### Uwaga

Gdy załączony jest tryb kompresji FAST, który jest niezgodny z bieżącą płytką, system generuje sygnał dźwiękowy.

---

### Sposób użycia suwaka trybu kompresji FAST

W celu załączenia trybu kompresji FAST należy popchnąć suwak (z dowolnej strony) do momentu, gdy widoczna stanie się litera „F” i nastąpi zablokowanie suwaka, czemu będzie towarzyszyć kliknięcie.




Rycina 68: Suwak trybu kompresji FAST

### 7.4 Statyw do powiększeń

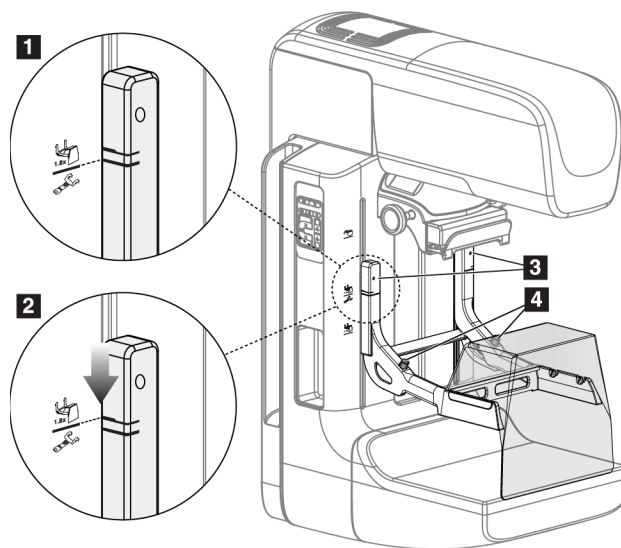Statyw do powiększeń obejmuje platformę na pierś oraz osłonę brzucha. W momencie zainstalowania statywu do powiększeń siatka automatycznie się chowa, a dla technik ekspozycji RTG ustawiane są domyślne wartości powiększeń. Gdy zainstalowany jest statyw do powiększeń, należy używać tylko płytek do powiększeń (patrz: [Płytki do powiększeń](#) na stronie 125).

#### 7.4.1 Instalacja i demontaż statywu do powiększeń



Rycina 69: Instalacja statywu do powiększeń

#### Aby zainstalować statyw do powiększeń

1. Zdejmij osłonę twarzy (patrz: [Osłony twarzy pacjentki](#) na stronie 120).
2. Zdejmij płytkę kompresyjną (patrz: [Instalowanie i demontaż płytki kompresyjnej](#) na stronie 127).
3. Przesuń urządzenie kompresyjne całkowicie do góry.
4. Przytrzymaj statyw po obu stronach tuż poniżej czarnych przycisków (patrz poz. 4 na powyższej rycinie). Nie naciskaj czarnych przycisków.



#### Uwaga

Te czarne przyciski są używane tylko podczas demontażu statywu do powiększeń.



#### Uwaga

Dla statywu do powiększeń dostępne są dwa zestawy szczelin montażowych — jeden zestaw do powiększeń 1,8x, a drugi do powiększeń 1,5x. Więcej informacji można znaleźć w punkcie [Instalowanie akcesoriów na ramieniu C](#) na stronie 119.

5. Wyrównaj grube czarne linie na statywie do powiększeń z grubymi czarnymi liniami na ramieniu C. Gdy te linie się zrównają, zaczepy statywu do powiększeń zrównają się ze szczelinami montażowymi na ramieniu C. Patrz pozycja 1 na poprzedniej rycinie.
6. Wprowadź zaczepy statywu do powiększeń do szczelin w ramieniu C. Przesuń statyw do powiększeń w dół, aż cienkie czarne linie na statywie do powiększeń zrównają się z czarną linią na ramieniu C. Patrz pozycja 2 na poprzedniej rycinie.
7. Sworznie lokalizacyjne wsuną się w otwory i zablokują urządzenie. Rozlegnie się słyszalne kliknięcie.



### **Uwaga**

Jeśli statyw do powiększeń nie zostanie poprawnie zainstalowany, pojawi się wskazanie w postaci czerwonego wysuniętego kołka (patrz poz. 3 na poprzedniej rycinie). Gdy statyw jest zainstalowany poprawnie, ten kołek jest schowany.

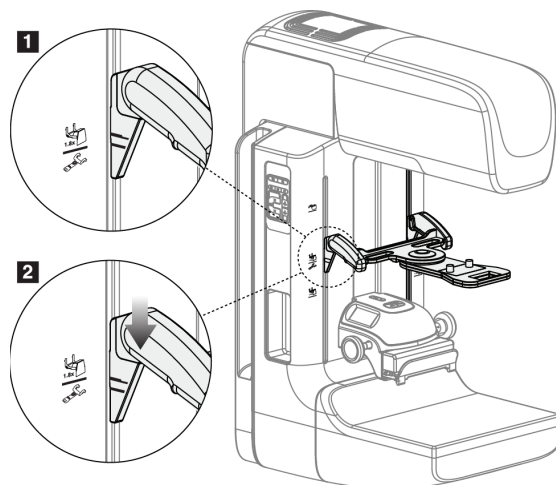
---

### **Aby wymontować statyw do powiększeń**

1. Wyjmij płytkę do powiększeń.
2. Przytrzymaj uchwyty statywu do powiększeń i naciśnij czarne przyciski.
3. Podnieś urządzenie i wyjmij je z ramienia C.

### 7.5 Urządzenia celownicze

#### 7.5.1 Instalacja i demontaż lokalizacyjnego urządzenia celowniczego



Rycina 70: Instalacja lokalizacyjnego urządzenia celowniczego

#### **Aby zainstalować lokalizacyjne urządzenie celownicze**

1. Zdejmij osłonę twarzy (patrz: [Osłony twarzy pacjentki](#) na stronie 120).
2. Przesuń urządzenie kompresyjne poniżej szczelin montażowych wskazanych ikoną celownika. Więcej informacji można znaleźć w punkcie [Instalowanie akcesoriów na ramieniu C](#) na stronie 119.
3. Przytrzymaj urządzenia celownicze za uchwyty i wyrównaj grube linie na urządzeniu z linią na ramieniu C. Zaciśnij dźwignie zwalniające.
4. Wprowadź zaczepy do szczelin w ramieniu C.
5. Przesuwaj zaczepy w dół do momentu, gdy cienkie czarne linie na celowniku zrównają się z czarną linią na ramieniu C.
6. Zwolnij dźwignie. Sworznie lokalizacyjne wsuną się w otwory i zablokują urządzenie w położeniu.

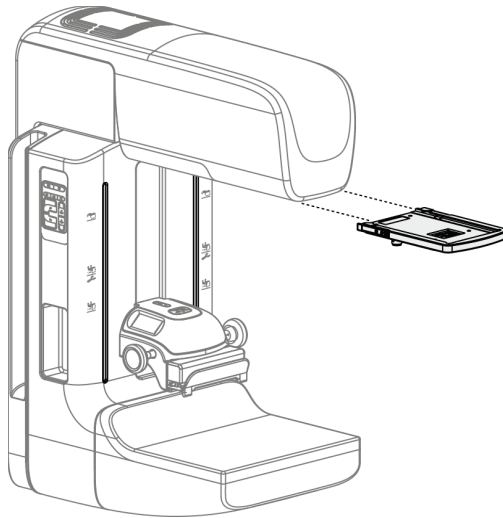
#### **Aby zdemontować lokalizacyjne urządzenie celownicze**

1. Zaciśnij dźwignie zwalniające.
2. Podnieś ramę do góry i wyjmij zaczepy ze szczelin w ramieniu C.

### 7.5.2 Korzystanie z lokalizacyjnego urządzenia celowniczego

1. Urządzenia celownicze obraca się w lewą lub prawą stronę od głowicy lampy. Podczas ekspozycji rejestrowanej z użyciem płytki lokalizacyjnej obróć urządzenie z dala od wiązki promieniowania RTG.
2. Gdy obracasz urządzenie z powrotem do przodu w celu użycia, upewnij się, że obracanie jest kontynuowane do czasu zablokowania urządzenia na pozycji, czemu będzie towarzyszyć kliknięcie.
3. Włącz lampę do pola świetlnego.
4. Obracaj dwoma pokrętkami celownika do momentu, gdy cień na piersi będzie zgodny ze wskaźnikami na obrazie, który identyfikuje podejrzaną zmianę.

### 7.5.3 Instalacja i demontaż urządzenia celowniczego do powiększeń



Rycina 71: Instalacja i demontaż urządzenia celowniczego do powiększeń

#### Aby zainstalować urządzenie celownicze do powiększeń

1. Zdejmij osłonę twarzy (patrz [Instalacja i demontaż klasycznej osłony twarzy](#) na stronie 122).
2. Wyrównaj urządzenie celownicze do powiększeń z głowicą lampy.
3. Przesuń urządzenia celownicze po szynach po obu stronach głowicy lampy, które są używane przez klasyczną osłonę twarzy. Upewnij się, że urządzenie zostało zablokowane w położeniu.
4. Zamontuj pozostałe urządzenia do powiększeń.

#### Aby zdemontować urządzenie celownicze do powiększeń

1. Przytrzymaj boki urządzenia.
2. Pociągnij urządzenie do siebie i zdejmij je z głowicy lampy.

### 7.5.4 Wyrównanie urządzenia celowniczego



---

#### Uwaga

Jeśli prostokąt światła celownika wydaje się być przechylony względem otworu w płytce, wykonaj procedurę wyrównania.

---

1. Zainstaluj prostokątną płytkę lokalizacyjną.
2. Poluzuj śrubę blokady regulacji u dołu urządzenia celowniczego.
3. Na detektorze obrazu umieść kawałek białego papieru, aby cień celowników był lepiej widoczny.
4. Przesuń płytkę lokalizacyjną na odległość około 6 cm nad detektor obrazu.
5. Włącz pole świetlne.
6. Obracaj urządzenie celownicze, aż prostokąt światła zrówna się z otworem w płytce lokalizacyjnej.
7. Dokręć śrubę regulacyjną.

## Rozdział 8 Procedury kliniczne



**Ostrzeżenie:**  
Ramię C jest napędzane napędami silnikowymi.

---



**Ostrzeżenie:**  
Ręce pacjentki powinny przez cały czas znajdować się z dala od wszystkich przycisków i przełączników.

---



**Ostrzeżenie:**  
Każdy przełącznik nożny należy ustawić w takim miejscu, aby w przypadku ich użycia użytkownik pozostawał w zasięgu wyłączników awaryjnych.

---



**Ostrzeżenie:**  
Przełączniki nożne należy umieścić w taki sposób, aby nie dopuścić do ich przypadkowego użycia przez pacjentkę lub na skutek najechania wózkiem inwalidzkim.

---

### 8.1 Procedura standardowa

#### 8.1.1 Przygotowanie

1. Wybierz pacjenta z listy roboczej albo ręcznie dodaj nowego pacjenta.
2. Ustal, jakie procedury są wymagane.
3. Jeśli potrzebne jest inne lub dodatkowe urządzenie, wybierz zestaw urządzeń wyjściowych.
4. Zainstaluj płytkę.
5. Wybierz pierwszy widok.

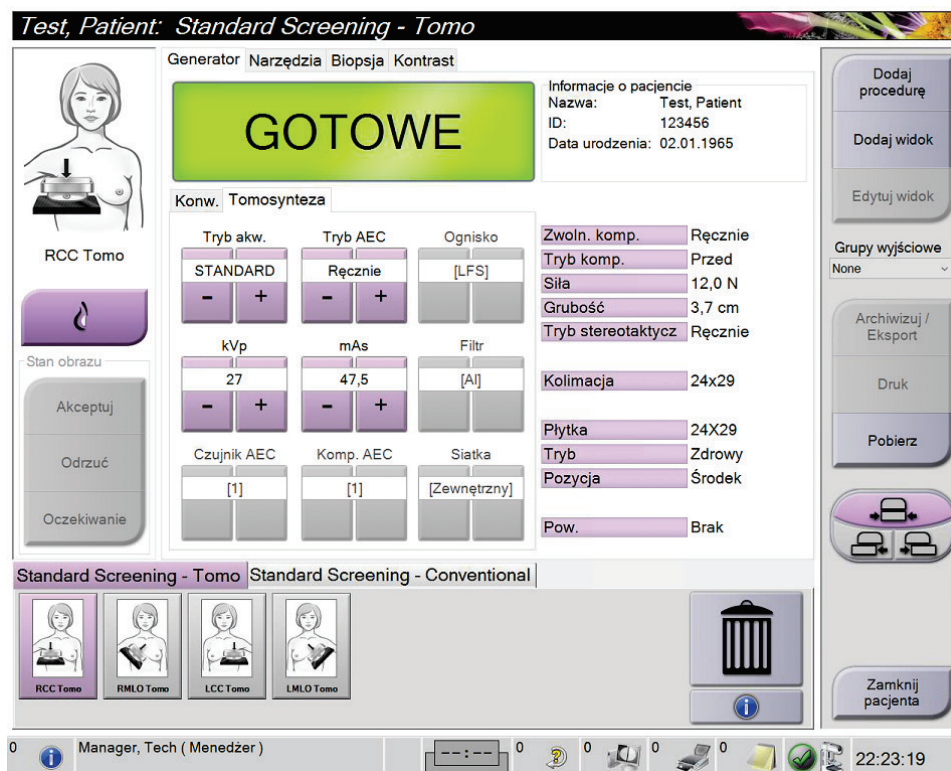
#### 8.1.2 Przy gantry

1. Ustaw wysokość i kąt obrotu ramienia C.
2. Upewnij się, że pole świetlne oświetla właściwy obszar.
3. Ułóż pacjentkę i skompresuj piers.

### 8.1.3 Przy stacji roboczej akwizycji

1. Ustaw technikę ekspozycji.
2. Zarejestruj obraz.
3. Uwolnij pacjentkę.
4. Wyświetl podgląd obrazu. Sprawdź, czy wskaźnik ekspozycji mieści się w akceptowalnym zakresie.
5. Podczas wyświetlania podglądu obrazu możesz korzystać z narzędzia do Window/Level (Okno/poziom) lub innych opcji przeglądu.
6. Dla obrazu wybierz opcję Accept (Akceptuj), Reject (Odrzuć) lub Pend (Oczekiwanie).
7. Zgodnie z potrzebami wykonaj cykl akwizycji dla żądanych procedur.
8. W razie potrzeby dodaj dodatkowy widok lub procedurę.
9. Po zakończeniu badania upewnij się, że pacjentka znajduje się w bezpiecznej odległości od systemu.
10. Zamknij procedurę.

### 8.2 Przykład procedury przesiewowej



Rycina 72: Przykład ekranu procedury przesiewowej



### 8.2.1 Pozycjonowanie pacjentki

1. Podnieś lub obniż platformę na pierś dla pacjentki.
2. Przesuń głowicę lampy do kąta projekcji.
3. Przesuń pacjentkę do ramienia C.
4. Ustaw pacjentkę odpowiednio do potrzeb.
5. Umieść ramię lub dłoń pacjentki na uchwycie dla pacjentki albo przy ciele.
6. Poproś pacjentkę, aby nie zbliżała się do elementów sterujących systemem.
7. Skompresuj pierś.
  - W miarę możliwości używaj elementów sterujących na przełączniku nożnym, aby bez użycia rąk kontrolować kompresję i wysokość ramienia C.
  - W razie potrzeby użyj lampy do pola świetlnego, aby zobaczyć pole promieniowania RTG.
  - Wykonuj kompresję powoli. W razie potrzeby przerwij ruch i dostosuj pozycję pacjentki.
  - W celu wykonania ostatecznej kompresji użyj pokręteł.

### 8.2.2 Ustawianie technik ekspozycji

Wybierz techniki ekspozycji dla procedury. Informacje zawiera sekcja [Ustawianie parametrów ekspozycji](#) na stronie 94.

### 8.2.3 Akwizycja ekspozycji

1. Upewnij się, że wszystkie współczynniki są poprawnie ustawione.
2. Jeśli w ciągu 30 sekund system nie wyświetli komunikatu Ready (Gotowy), sprawdź, czy akcesoria są poprawnie zainstalowane, a płytką zablokowaną nieruchomo. Gdy pojawi się status generatora **Ready** (Gotowy), oznacza to, że system jest gotowy na ekspozycję.



#### Ostrzeżenie:

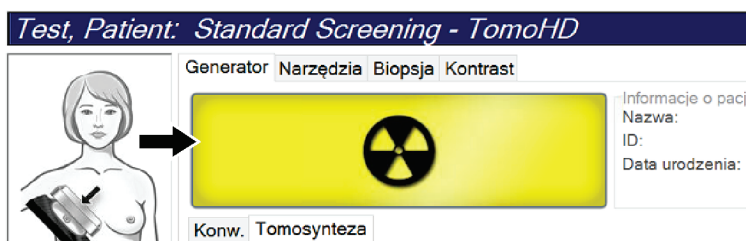
**System może być niebezpieczny dla pacjenta i użytkownika. Zawsze należy przestrzegać środków ostrożności dotyczących ekspozycji na promieniowanie RTG.**

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **promieniowania RTG** i/lub **przełącznik nożny promieniowania RTG**, aby wykonać pełną ekspozycję.

Podczas ekspozycji:


- Pojawi się komunikat systemowy z symbolem promieniowania i żółtym tłem (patrz poniższa rycina).
- Przez cały czas trwania ekspozycji będzie generowany słyszalny dźwięk

Dźwięk generowany podczas ekspozycji combo uległ zmianie, aby uniknąć zbyt wczesnego uwalniania promieniowania przez użytkownika za pomocą przycisku promieniowania RTG i (lub) przełącznika nożnego promieniowania RTG. Ten dźwięk jest teraz ciągłą sekwencją tonów. Dźwięk rozlega się podczas całej akwizycji combo od rozpoczęcia ekspozycji do końca widoku klasycznego. Pomiedzy tomosyntezą piersi a klasyczną ekspozycją mammografii cyfrowej sygnał dźwiękowy nie jest przerywany. Gdy rozlega się sygnał dźwiękowy, nie należy zwalniać przełącznika ekspozycji.



Rycina 73: Ekspozycja w toku

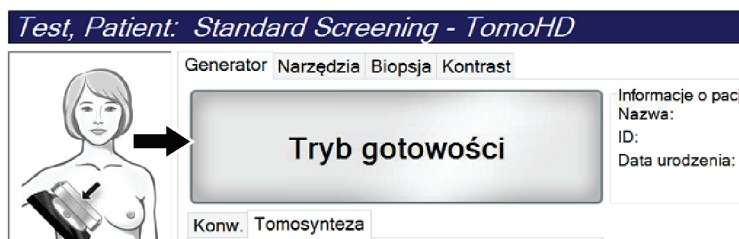4. Gdy system przestanie generować sygnał dźwiękowy, a w obszarze komunikatów systemu pojawi się informacja **Standby** (Gotowość) (patrz poniższa rycina), możesz zwolnić przycisk **promieniowania RTG** i (lub) **przełącznik nożny promieniowania RTG**.



Rycina 74: Ekspozycja zakończona

5. Zwolnij urządzenie kompresyjne. Jeśli skonfigurowana jest funkcja automatycznego zwalniania, po ekspozycji urządzenie kompresyjne zostanie automatycznie podniesione.

### 8.3 Procedura lokalizacji igły przy użyciu tomosyntezy

1. Zainstaluj płytkę lokalizacyjną i urządzenia celownicze przy głowicy lampy RTG. Upewnij się, że prowadnice celowników znajdują się poza polem promieniowania RTG.
2. Dla wybranego podejścia otwórz nową procedurę z widokiem Tomo lub TomoHD.
3. Ustaw pacjentkę i zastosuj kompresję.
4. Zarejestruj próbny obraz Tomo. Upewnij się, że obszar zainteresowania jest widoczny w otworze płytki lokalizacyjnej. Jeśli nie jest, ponownie ustaw pacjentkę i powtórz.
5. Zwróć uwagę na grubość po kompresji i grubość nadmiaru tkanki w otworze płytki lokalizacyjnej.
6. Przewiń warstwy rekonstrukcji, aby rozpoznać miejsce, w którym zmiana jest najlepiej widoczna. Zapisz numer warstwy (każda warstwa ma 1 mm grubości).
7. Ustaw celownik stacji roboczej akwizycji na zmianie.
8. Aby znaleźć współrzędne dla urządzenia celowniczego gantry, przewijaj rekonstrukcje do momentu rozpoznania współrzędnych alfanumerycznych.
9. Oblicz głębokość igły:

Wartość	Przykład
Grubość piersi po kompresji	50 mm
(+) Grubość tkanki przez otwór płytki	+ 7 mm
(-) Numer warstwy, w której znaleziono zmianę	- 30 mm
(+) Opcjonalna odległość za obszar zainteresowania dla drutu	+ 5–15 mm
(=) Głębokość igły dla drutu lokalizacyjnego	32–42 mm

10. Włącz światło kolimatora i wyrównaj urządzenia celownicze przy głowicy lampy RTG w taki sposób, aby wyrównać je z celownikiem na stacji roboczej akwizycji.
11. Ustaw i wprowadź igłę.
12. Wsuń prowadnice rzutowane przez urządzenie celownicze poza pole promieniowania RTG.
13. Zarejestruj kolejny obraz Tomo, aby upewnić się, że igła jest we właściwym miejscu. Aby sprawdzić, czy wymagana jest korekta, porównaj numer warstwy końcówki igły z numerem warstwy zmiany.
14. Wprowadź przewodnik przez igłę, a następnie (w razie potrzeby) wyjmij igłę i pozostaw drut na miejscu.
15. W razie potrzeby wykonaj następujące kroki:
  - a. Zarejestruj widok klasyczny lub Tomo, aby sprawdzić, czy drut jest poprawnie ustawiony.
  - b. Zarejestruj widok prostopadły, aby udokumentować umiejscowienie drutu lub igły (w widoku Tomo lub klasycznym).
16. W czasie wykonywania widoków prostopadłych jednocześnie dodawaj po jednej ikonie widoku, aby uniknąć przesunięcia płytki z powodu możliwej minimalnej kompresji.





## Rozdział 9 Konserwacja i czyszczenie

### 9.1 Czyszczenie

#### 9.1.1 Informacje ogólne o czyszczeniu

Przed każdym badaniem należy wyczyścić i zastosować środek do dezynfekcji na każdej części systemu, która dotyka pacjentki. Szczególną uwagę należy zwrócić na płytki i detektor obrazu.



**Przeostroga:**

Względem detektora obrazu nie należy używać żadnego źródła wysokich temperatur (jak podkładka grzewcza).

---

W przypadku płytek kompresyjnych należy zachować ostrożność. Płytki należy sprawdzać. W razie uszkodzeń płytkę należy wymienić.

#### 9.1.2 Czyszczenie ogólne

Należy używać niestrzępiącej się ściereczki lub podkładki, na którą należy nałożyć rozcieńczony płyn do mycia naczyń.



**Przeostroga:**

Należy używać jak najmniejszej ilości płynów czyszczących. Używane płyny nie powinny nigdzie spływać ani przepływać.

---

Jeśli konieczne jest zastosowanie nie tylko mydlin z wodą, firma Hologic zaleca użycie jednego z następujących środków:

- 10% roztwór chlorowego wybielacza z wodą wykonany przez zmieszanie jednej części dostępnego w sprzedaży roztworu wybielacza chlorowego (zwykle 5,25% chloru i 94,75% wody) z dziewięcioma częściami wody. W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów taki roztwór należy wykonywać codziennie.
- Dostępny w sprzedaży roztwór alkoholu izopropylowego (70% alkoholu izopropylowego objętościowo, nierozcieńczonego).
- Roztwór wody utlenionej o stężeniu maksymalnie 3%.

Po zastosowaniu dowolnego z powyższych roztworów należy użyć podkładki i zastosować rozcieńczony płyn do mycia naczyń, aby wyczyścić jakiegokolwiek części, które dotykają ciała pacjentki.



**Ostrzeżenie:**

Jeśli płytka dotknie materiałów potencjalnie zakaźnych, należy skontaktować się z przedstawicielem ds. kontroli zakażeń w celu usunięcia czynników zakaźnych z płytki.

---



**Przeostroga:**

**Aby zapobiec uszkodzeniom element6w6w elektronicznych, wzgl6dem systemu nie nalezy uzywac 6rodka dezynfekuj6cego.**

---

#### 9.1.3 Aby zapobiec ewentualnym obrazeniom ci6la i uszkodzeniom sprz6tu

Nie uzywac rozpuszczalnika o wla6ciwosciach zraczych, detergentu o wla6ciwosciach 6ciernych ani 6rodka do polerowania. Wyb6c 6rodek czyszcz6cy/dezynfekcyjny, kt6ry nie uszkadza tworzyw sztucznych, aluminium ani w6l6kna w6glowego.

Nie uzywac silnych detergent6w, 6rodk6w czyszcz6cych o wla6ciwosciach 6ciernych, alkoholu w wysokich st6zeniach ani alkoholu metylowego w jakim st6zeniu.

Nie poddawac ods6ni6tych cz66ci systemu sterylizacji parowej ani wysokotemperaturowej.

Nie dopuszczać do tego, aby p6yny wnikały do wewn6trznych cz66ci sprz6tu. Wzgl6dem sprz6tu nie stosowac sprej6w ani p6yn6w czyszcz6cych. Zawsze nalezy uzywac czystej 6ciereczki i na6ożyć sprej lub p6yn na 6ciereczk6. Je6li do systemu wniknie p6yn, nalezy odl6czyc zasilanie elektryczne i sprawdzic system przed jego ponownym uzyciem.



**Przeostroga:**

**Niewla6ciwe metody czyszczenia mog6 uszkodzić sprz6t, zmniejszyc wydajno6ć obrazowania lub zwi6kszyc ryzyko poraenia pr6dem.**

---

Zawsze przestrzegac instrukcji producenta produktu uzywanego do czyszczenia. Instrukcje obejmuj6 wskaz6wki i 6rodki ostrożności dotycz6ce nakladania, czasu kontaktu i przechowywania, a takze wymagania dotycz6cych sp6ukiwania, ubioru ochronnego, utylizacji oraz okresu ważności produktu. Nalezy przestrzegac tych instrukcji i stosowac produkt w moźliwie najbardziej bezpieczny i skuteczny spos6b.



## 9.1.4 Stacja robocza akwizycji

### Czyszczenie ekranu do wyświetlania obrazów

Unikać dotykania wyświetlacza monitora do wyświetlania obrazów.

Zachować ostrożność podczas czyszczenia zewnętrznej powierzchni ekranu LCD. W celu czyszczenia obszaru wyświetlacza zawsze używać czystej, miękkiej niestrzępiącej się ściereczki. Zalecane są ściereczki z mikrofibry.

- Nigdy nie rozpylać spreju ani nie wylewać żadnego płynu na wyświetlacz.
- Nigdy nie wywierać żadnego nacisku na obszar wyświetlacza.
- Nigdy nie używać detergentu zawierającego fluorki, amoniak, alkohol ani substancje o właściwościach ściernych.
- Nigdy nie używać wybielacza.
- Nigdy nie używać wełny stalowej.
- Nigdy nie używać gąbki o powierzchni ścierniej.

W handlu dostępnych jest wiele produktów przeznaczonych do czyszczenia wyświetlaczy LCD. Mogą być używane produkty, które nie zawierają wspomnianych powyżej składników i są stosowane zgodnie ze wskazówkami ich producenta.

### Czyszczenie wyświetlacza z ekranem dotykowym

W celu czyszczenia wyświetlacza z ekranem dotykowym należy używać środka do czyszczenia okien lub szkła. Nałożyć środek czyszczący na ściereczkę, a następnie wyczyścić nią wyświetlacz z ekranem dotykowym. Nie nakładać środka czyszczącego na wyświetlacz bez ściereczki.

### Czyszczenie klawiatury

Powierzchnie należy czyścić ściereczką CRT. W razie potrzeby klawiaturę należy odkurzyć. Jeśli do klawiatury dostaną się płyny, należy skontaktować się z działem wsparcia technicznego celem wymiany.

### Czyszczenie skanera linii papilarnych



#### Przeostroga:

#### Aby chronić skaner linii papilarnych:

- Nie należy stosować żadnego płynu bezpośrednio na okienko skanera linii papilarnych.
  - Nie używać produktów zawierających alkohol.
  - Nigdy nie umieszczać skanera linii papilarnych w cieczy.
  - Nigdy nie wywierać żadnego nacisku na okienko skanera linii papilarnych przy użyciu materiału o właściwościach ściernych.
  - Nie naciskać okienka skanera linii papilarnych.
-

Aby wyczyścić okienko skanera linii papilarnych, należy wykonać jedną z następujących czynności:

- Nałożyć taśmę celofanową klejącą stroną, a następnie zdjąć taśmę.
- Nałożyć produkt na bazie amoniaku na ściereczkę, a następnie wyczyścić nią okienko skanera linii papilarnych.

## 9.2 Konserwacja

### 9.2.1 Harmonogramy konserwacji zapobiegawczej

Tabela 22: Konserwacja zapobiegawcza wykonywana przez użytkownika

Opis zadania konserwacji	Zalecana częstotliwość					
	Po każdym użyciu	Co tydzień	Co dwa tygodnie	Co miesiąc	Co dwa miesiące	Co pół roku
Czyszczenie i dezynfekcja płytki	✓					
Czyszczenie i dezynfekcja platformy na pierś	✓					
Wzrokowa kontrola wszystkich płytek pod kątem uszkodzeń	✓					
Kalibracja detektora płaskiego *		✓				
Ocena artefaktów *		✓				
Obrazowanie fantomu *		✓				
Pomiary stosunku sygnału do szumu / kontrastu do szumu *		✓				
Kalibracja geometrii (opcja tomosyntezy) *						✓
Wskaźnik grubości po kompresji *			✓			
Wzrokowa lista kontrolna *				✓		
Kompresja *						✓
* Patrz: podręcznik kontroli jakości						

Tabela 23: Konserwacja zapobiegawcza wykonywanej przez inżyniera serwisu

Opis zadania konserwacji	Zalecana częstotliwość	
	Co pół roku	Co roku
Czyszczenie i kontrola gantry oraz stacji roboczej akwizycji	✓	
Kontrola osłony antyradiacyjnej pod kątem wyszczerbień, pęknięć, złamań i zbyt ciasnych mocowań	✓	
Kontrola wszystkich głównych przyłączy do zasilania	✓	
Kontrola blokad, przełączników zabezpieczających i wyłączników granicznych	✓	
Kontrola/smarowanie ramienia C	✓	
Ramię C / kontrola wszystkich przycisków ramienia C	✓	
Weryfikacja kalibracji ramienia C i kalibracji obrotów	✓	
Wymiana filtra platformy na pierś	✓	
Weryfikacja kalibracji siły kompresji	✓	
Weryfikacja kalibracji grubości po kompresji.	✓	
Kontrola lampy LED kolimatora pod kątem kurzu i zanieczyszczeń	✓	
Czyszczenie i smarowanie kolimatora oraz przekładni ślimakowych	✓	
Kontrola hamulców ruchu obrotowego	✓	
Weryfikacja kalibracji pola promieniowania RTG / pola świetlnego	✓	
Weryfikacja kalibracji wartości kV oraz prądów lampy RTG	✓	
Ocena warstwy półchlonnej	✓	
Weryfikacja dawki w celu	✓	
Weryfikacja kompensacji AEC ekspozycji (2D)	✓	
Wykonanie testu rozdzielczości systemu *	✓	
Ocena jakości obrazu z użyciem fantomu *	✓	
Ocena artefaktów obrazu *	✓	
Wykonanie kopii zapasowej plików stacji roboczej akwizycji	✓	
Ocena stanu działania zasilacza UPS / ocena stanu akumulatorów	✓	
Utworzenie kopii zapasowej wszystkich danych kalibracji	✓	
* Patrz: podręcznik kontroli jakości		

#### 9.2.2 Informacje o odzyskiwaniu miejsca na dysku

Odzyskiwanie jest funkcją automatyczną, która powoduje, że miejsce na dysku staje się dostępne do zapisu nowo zarejestrowanych obrazów. Parametry konfigurowane umożliwiają zgromadzenie określonej liczby obrazów przed rozpoczęciem odzyskiwania, a podczas odzyskiwania starsze obrazy są usuwane z systemu.

## Rozdział 10 Interfejs administracyjny systemu

### 10.1 Ekran Admin (Administrator)

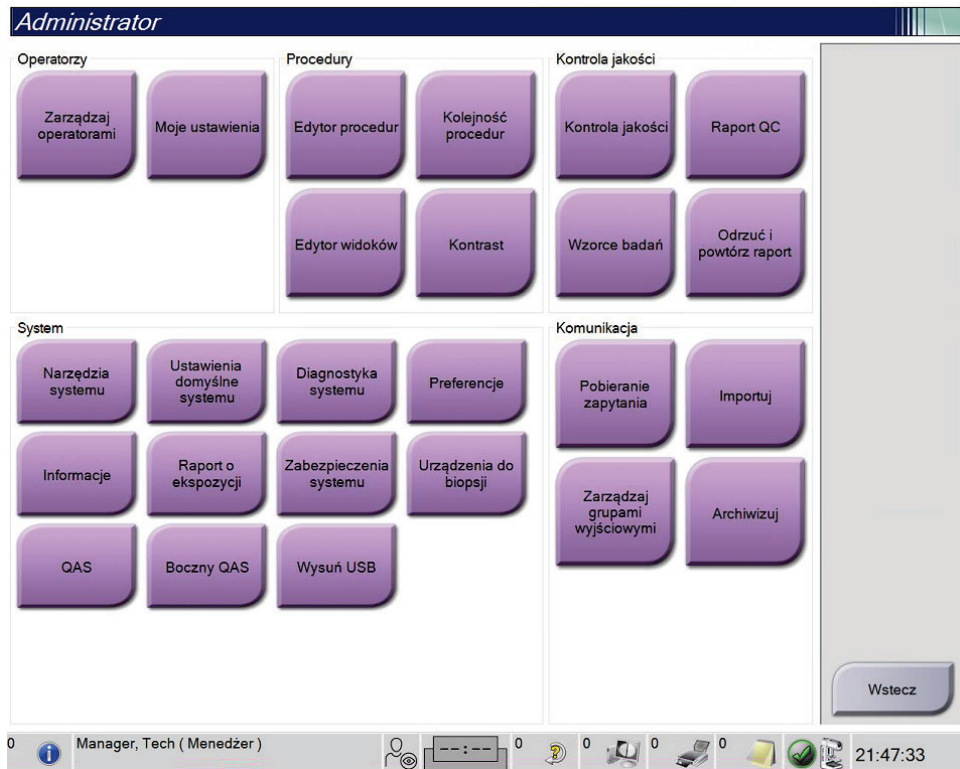
W tej części opisano funkcje dostępne na ekranie *Admin* (Administrator). Aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji na tym ekranie, należy zalogować się do systemu jako użytkownik z uprawnieniami administratora, kierownika lub serwisanta.

Opisy funkcji ekranu *Admin* (Administrator) podano w tabeli na następnej stronie.



#### Uwaga

W zależności od ustawień licencyjnych systemu można wyświetlić różne przyciski.



Rycina 76: Ekran Admin (Administrator)

## Przewodnik użytkownika systemu 3Dimensions

### Rozdział 10: Interfejs administracyjny systemu

Tabela 24: Funkcje ekranu Admin (Administrator)

Grupa	Przycisk	Funkcja
Operatorzy	<b>Manage Operators (Zarządzaj operatorami)</b>	Dodawanie, usuwanie lub zmiana danych operatorów.
	<b>My Settings (Moje ustawienia)</b>	Zmiana danych bieżącego operatora.
Procedures (Procedury)	<b>Procedure Editor (Edytor procedur)</b>	Dodawanie lub edycja procedur, lub zmiana kolejności wyświetlania poszczególnych użytkowników.
	<b>Procedure Order (Kolejność procedur)</b>	Wyświetlanie lub zmiana kolejności procedur w grupie procedur.
	<b>View Editor (Edytor widoków)</b>	Ustawianie domyślnej kolejności widoków dla procedury i edycja indywidualnych widoków.
	<b>Contrast (Kontrast)</b>	Dostęp do zaawansowanych funkcji mammografii cyfrowej o zwiększonym kontraście i konfiguracja ustawień domyślnych.
Quality control (Kontrola jakości)	<b>Quality control (Kontrola jakości)</b>	Wybieranie zadania kontroli jakości do wykonania lub oznaczenia zakończonego.
	<b>QC Report (Raport kontroli jakości)</b>	Tworzenie raportu kontroli jakości.
	<b>Test Patterns (Wzorce badań)</b>	Wybór i wysyłanie wzorców badań do urządzeń wyjściowych.
	<b>Reject and Repeat Report (Raport odrzucenia i powtórzenia)</b>	Tworzenie raportu odrzucenia i powtórzenia.
System (System)	<b>System Tools (Narzędzia systemu)</b>	Interfejs serwisowy do konfiguracji lub identyfikacji problemów w stacji roboczej akwizycji.
	<b>System Defaults (Ustawienia domyślne systemu)</b>	Ustawianie wartości domyślnych gantry.
	<b>System Diagnostics (Diagnostyka systemu)</b>	Wyświetlanie stanu wszystkich podsystemów.
	<b>Preferences (Preferencje)</b>	Ustawianie preferencji systemu.
	<b>About (Informacje)</b>	Opis systemu. Patrz <a href="#">Ekran About (Informacje)</a> na stronie 152.
	<b>Exposure Report (Raport o ekspozycji)</b>	Tworzenie raportu o ekspozycji na promieniowanie.

Tabela 24: Funkcje ekranu Admin (Administrator)

Grupa	Przycisk	Funkcja
	<b>Zabezpieczenia systemu</b>	Dostęp do ustawień zabezpieczenia konta, narzędzi zarządzania komputerem, lokalnej polityki bezpieczeństwa, lokalnych użytkowników i grup oraz polityki grupy lokalnej w systemie operacyjnym Windows.
	<b>Biopsy Devices (Urządzenia do biopsji)</b>	Wyświetlanie i konfiguracja dostępnych urządzeń do biopsji.
	<b>QAS (QAS)</b>	Dostęp do ekranu <i>QAS Needle Test</i> (Test igły QAS).
	<b>Lateral QAS (Boczny QAS)</b>	Dostęp do ekranu <i>Lateral QAS Needle Test</i> (Test boczny igły QAS).
	<b>Eject USB (Wysuń USB)</b>	Wysuwanie urządzenia pamięci masowej podłączonego do portu USB.
Connectivity (Komunikacja)	<b>Query Retrieve (Pobieranie zapytania)</b>	Zapytanie i pobieranie informacji o pacjencie ze skonfigurowanych urządzeń.
	<b>Import (Importuj)</b>	Import danych ze źródła DICOM.
	<b>Manage Output Groups (Zarządzanie grupami wyjściowymi)</b>	Dodawanie, usuwanie lub edycja grup wyjściowych.
	<b>Archive (Archiwizuj)</b>	Wysyłanie lokalnych badań do sieciowej pamięci masowej lub eksport do urządzeń z nośnikami wymiennymi.
Dostęp do wszystkich funkcji wymaga uprawnień. Poziom uprawnień decyduje o możliwości uzyskania dostępu i wprowadzenia zmian w ramach poszczególnych funkcji.		

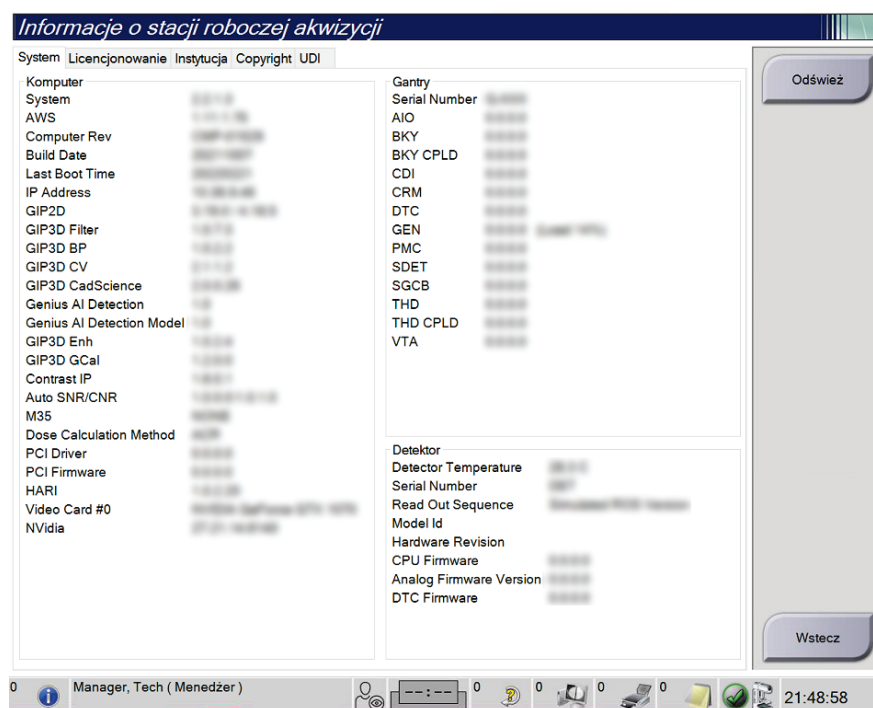
### 10.2 Ekran About (Informacje)

Ekran *About* (Informacje) zawiera informacje o urządzeniu, takie jak poziom systemu, adres IP i numer seryjny gantry. Ten typ danych może być przydatny podczas pracy z urządzeniem Hologic w celu rozwiązania problemu z systemem lub jego konfiguracji. Aby uzyskać dostęp do ekranu *About* (Informacje), należy wybrać opcję **About** (Informacje) z grupy systemu na ekranie *Admin* (Administrator).



#### Uwaga

Dostęp do ekranu *About* (Informacje) jest ponadto możliwy z poziomu paska zadań. Wybierz ikonę **Stan systemu (głowica lampy)**, a następnie wybierz opcję **Informacje....**



Rycina 77: Karta System (System) ekranu About (Informacje) (o stacji roboczej akwizycji)

Ekran *About* (Informacje) obejmuje następujące karty:

- **System** (System) (domyślna) — dane konfiguracji systemu;
- **Licensing** (Licencje) — opcje objęte licencją Hologic, zainstalowane na tym urządzeniu;
- **Institution** (Instytucja) — zawiera nazwę i adres organizacji oraz nazwę stanowiska przypisaną do tego komputera.
- **Copyright** (Prawa autorskie) — prawa autorskie należące do firmy Hologic oraz dotyczące oprogramowania innych producentów zainstalowanego na tym urządzeniu;
- **UDI** (Unikatowe identyfikatory) — lista unikatowych identyfikatorów urządzenia.



### 10.2.1 Karta Licensing (Licencje)

Na karcie **Licensing** (Licencje) ekranu *About* (Informacje) wyświetlane są wszystkie licencje zainstalowane w tym systemie.



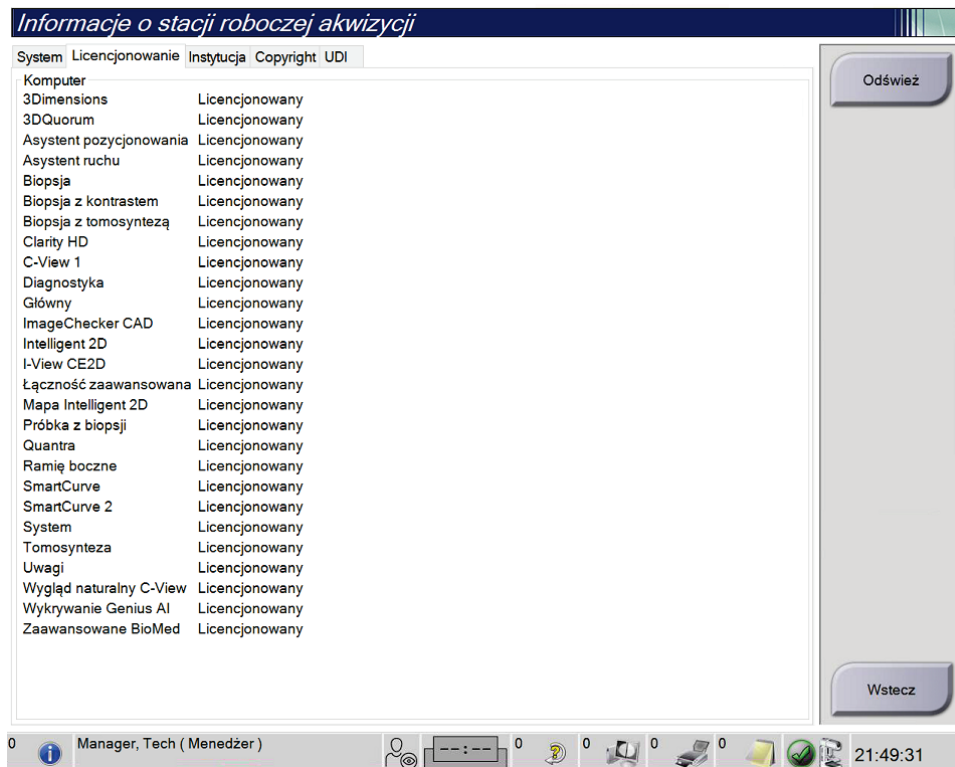
#### Uwaga

Firma Hologic konfiguruje niektóre systemy w taki sposób, aby spełniały konkretne wymagania. Konkretny system może nie zawierać niektórych opcji i akcesoriów opisanych w niniejszym podręczniku.



#### Uwaga

Funkcje przedstawione w niniejszej instrukcji mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W celu uzyskania informacji należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Hologic.



Rycina 78: Karta Licensing (Licencje) ekranu *About* (Informacje)

### 10.3 Zmiana preferencji dotyczących języka użytkownika

W systemie można ustawić interfejs użytkownika na język, który będzie automatycznie ustawiany w momencie zalogowania się użytkownika.

1. W grupie Operators (Operatorzy) na ekranie *Admin* (Administrator) wybierz opcję **My Settings** (Moje ustawienia).



#### Uwaga

Dostęp do obszaru **My Settings** (Moje ustawienia) można także uzyskać za pośrednictwem paska zadań. Wybierz obszar nazwy użytkownika, a następnie opcję **My Settings** (Moje ustawienia) w menu rozwijanym.

---

2. Zostanie otwarta karta **Users** (Użytkownicy) ekranu *Edit Operator* (Edytuj operatora). Z pola ustawień regionalnych wybierz język z listy rozwijanej.
3. Wybierz przycisk **Save** (Zapisz), a następnie przycisk **OK** w komunikacie *Update Successful* (Aktualizacja zakończona pomyślnie). Język interfejsu użytkownika zostanie zmieniony na wybrany język.

## 10.4 Konfigurowanie automatycznego zawieszania i automatycznego parowania

Aby skonfigurować w systemie automatyczne zawieszanie i automatyczne parowanie obrazów:

1. W grupie Operators (Operatorzy) na ekranie *Admin* (Administrator) wybierz opcję **My Settings** (Moje ustawienia).



### Uwaga

Dostęp do obszaru **My Settings** (Moje ustawienia) można także uzyskać za pośrednictwem paska zadań. Wybierz obszar nazwy użytkownika, a następnie opcję **My Settings** (Moje ustawienia) w menu rozwijanym.

2. Zostanie otwarty ekran *Edit Operator* (Edytuj operatora). Wybierz kartę **Workflow** (Procedura).
  - Zaznacz pole Auto-Hanging (Automatyczne zawieszanie), aby automatycznie wyświetlać wcześniejsze badanie w trybie z konfiguracją obejmującą 4 obrazy na ekranie (4-up).
  - Zaznacz pole wyboru Auto-Pairing (Automatyczne parowanie), aby wyświetlić wcześniejszy widok w trybie z wieloma obrazami obok nowo zarejestrowanego obrazu.



Rycina 79: Włączanie automatycznego zawieszania i automatycznego parowania

3. Wybierz przycisk **Save** (Zapisz), a następnie przycisk **OK** w komunikacie *Update Successful* (Aktualizacja zakończona pomyślnie).

### 10.5 Ustawianie kart z wieloma wierszami procedur

W preferencjach operatora dostępne jest ustawienie, które można skonfigurować, aby informacje wyświetlane w górnej części kart procedury zawierały więcej informacji niż tylko nazwę procedury. Aby zmienić karty procedury z jednowierszowych na wielowierszowe:

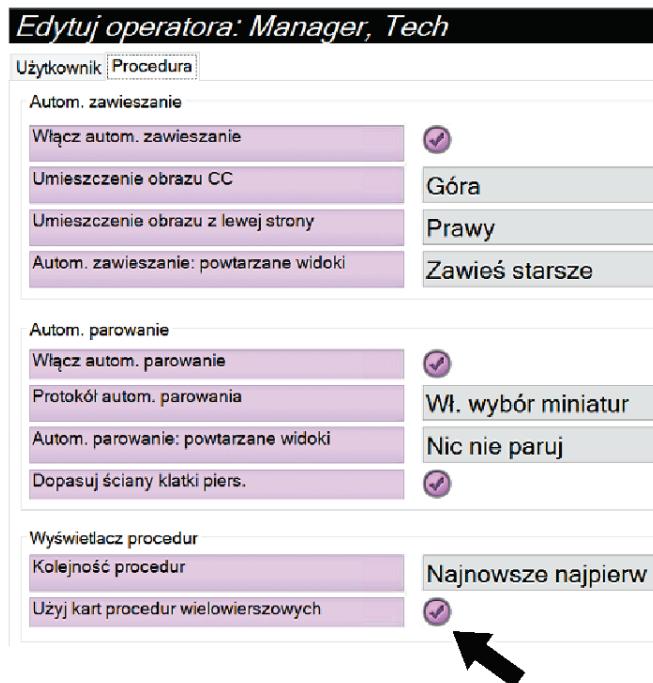
1. W grupie Operators (Operatorzy) na ekranie *Admin* (Administrator) wybierz opcję **My Settings** (Moje ustawienia).



#### Uwaga

Dostęp do obszaru **My Settings** (Moje ustawienia) można także uzyskać za pośrednictwem paska zadań. Wybierz obszar nazwy użytkownika, a następnie opcję **My Settings** (Moje ustawienia) w menu rozwijanym.

2. Zostanie otwarty ekran *Edit Operator* (Edytuj operatora). Wybierz kartę **Workflow** (Procedura).
3. Zaznacz pole wyboru **Use Multi Line Procedure Tabs** (Używaj kart procedur z wieloma wierszami).




Rycina 80: Włączenie opcji kart z wieloma wierszami procedur

4. Wybierz przycisk **Save** (Zapisz), a następnie przycisk **OK** w komunikacie *Update Successful* (Aktualizacja zakończona pomyślnie).

## 10.6 Aktywacja i ustawianie pamięci wysokości

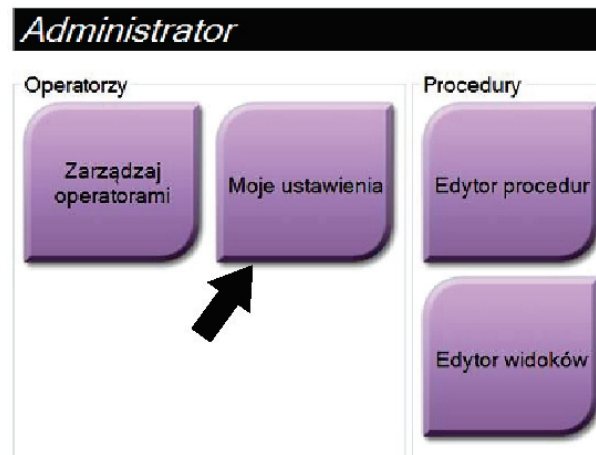Użytkownicy mogą aktywować regulację wysokości i skonfigurować stację roboczą akwizycji w taki sposób, aby w momencie zalogowania się do stacji następowała automatyczna zmiana na ustawienie wysokości preferowane przez użytkownika. Aby aktywować i ustawić pamięć regulacji wysokości:

1. W grupie Operators (Operatorzy) na ekranie *Admin* (Administrator) wybierz opcję **My Settings** (Moje ustawienia).




Rycina 81: Przycisk My Settings (Moje ustawienia) na ekranie Admin (Administrator)



### Uwaga

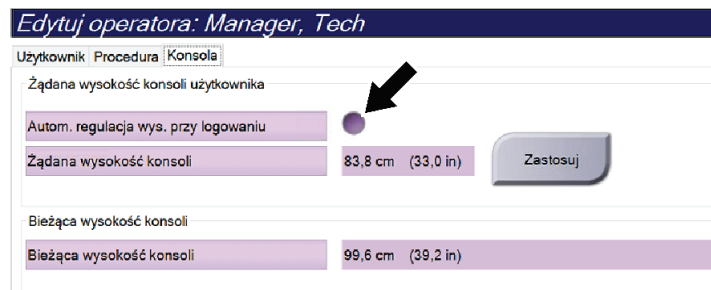
Dostęp do obszaru **My Settings** (Moje ustawienia) można także uzyskać za pośrednictwem paska zadań. Wybierz obszar nazwy użytkownika, a następnie opcję **My Settings** (Moje ustawienia) w menu rozwijanym.

2. Na ekranie *Edit Operator* (Edytuj operatora) wybierz kartę **Console** (Konsola).
3. Aby włączyć pamięć regulacji wysokości, zaznacz przycisk opcji po prawej stronie pola „Auto-Height adjustment on login” (Automatyczna regulacja wysokości po zalogowaniu). Pojawi się znacznik wyboru. (Aby wyłączyć opcję pamięci regulacji wysokości, usuń zaznaczenie tego przycisku opcji).



Rycina 82: Karta Console (Konsola) ekranu Edit Operator (Edytuj operatora)

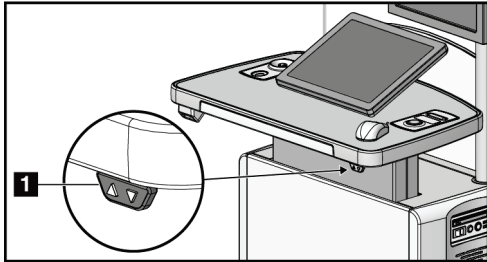4. Użyj przycisków ▲ W GÓRĘ i ▼ W DÓŁ na panelu sterowania wysokością, aby ustawić żądaną wysokość (patrz poniższa rycina).



Rycina 83: Panel sterowania wysokością

5. W polu Desired console height (Żądana wysokość konsoli) zostanie wyświetlona aktualnie ustawiona wysokość. W polu Current console height (Bieżąca wysokość konsoli) wyświetlana jest najnowsza zapisana wysokość. (Zapoznaj się z poprzednią ryciną). Aby zapisać ustawienie żądanej wysokości, wybierz przycisk **Apply** (Zastosuj).

*Edytuj operatora: Manager, Tech*

Użytkownik Procedura **Konsola**

Żądana wysokość konsoli użytkownika

Autom. regulacja wys. przy logowaniu	<input checked="" type="checkbox"/>
Żądana wysokość konsoli	83,8 cm (33,0 in)

Zastosuj

Bieżąca wysokość konsoli

Bieżąca wysokość konsoli	99,6 cm (39,2 in)
--------------------------	-------------------

Rycina 84: Pola Desired Console Height (Żądana wysokość konsoli) i Current Console Height (Bieżąca wysokość konsoli)

6. Wybierz przycisk **Save** (Zapisz), a następnie przycisk **OK** w komunikacie *Update Successful* (Aktualizacja zakończona pomyślnie).

## 10.7 Aktywacja opcji domyślnej wysokości i ustawienie domyślnej wysokości

Użytkownik w roli menedżera może skonfigurować stację roboczą akwizycji w taki sposób, aby automatycznie wracała do domyślnej wysokości, gdy użytkownik wyloguje się. Aby aktywować i ustawić domyślną wysokość:


1. W grupie systemu na ekranie *Admin* (Administrator) wybierz opcję **Preferences** (Preferencje).



Rycina 85: Przycisk Preferences (Preferencje) na ekranie Admin (Administrator)


2. Na ekranie *System Preferences* (Preferencje systemu) wybierz kartę **Console** (Konsola).

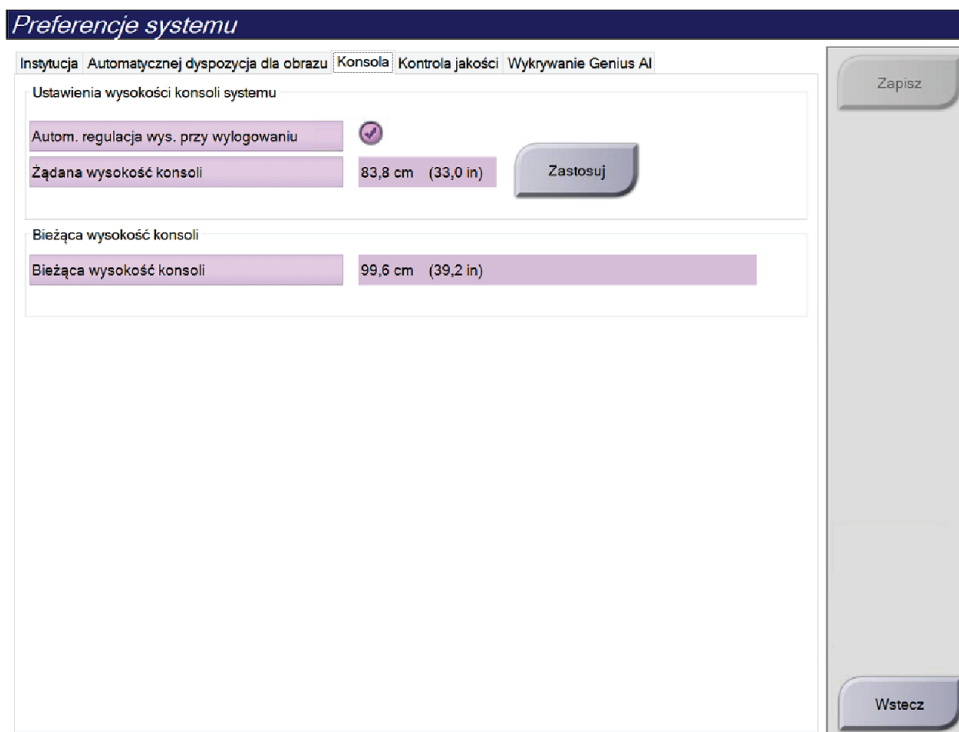3. Aby włączyć domyślną wysokość, zaznacz przycisk opcji po prawej stronie pola „Auto-Height adjustment on logout” (Automatyczna regulacja wysokości po wylogowaniu). Pojawi się znacznik wyboru. (Aby wyłączyć opcję domyślnej wysokości, usuń zaznaczenie tego przycisku opcji).



Rycina 86: Karta Console (Konsola) ekranu System Preferences (Preferencje systemu)

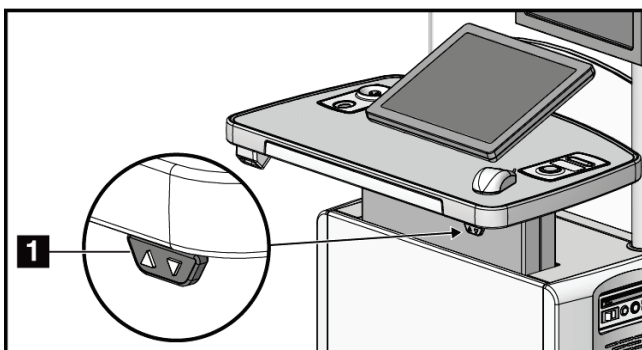
4. Użyj przycisków ▲ W GÓRĘ i ▼ W DÓŁ na panelu sterowania wysokością, aby ustawić żadaną wysokość (patrz poniższa rycina).



Rycina 87: Panel sterowania wysokością



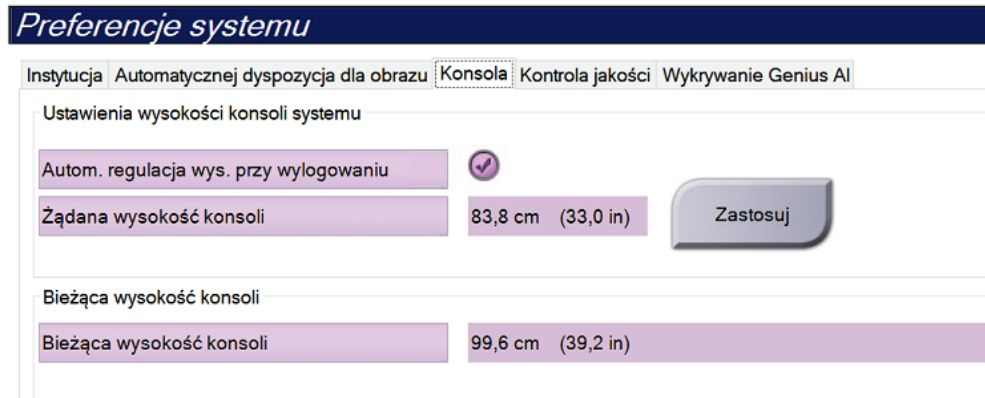5. W polu Desired console height (Żądana wysokość konsoli) zostanie wyświetlona aktualnie ustawiona wysokość. W polu Current console height (Bieżąca wysokość konsoli) wyświetlana jest najnowsza zapisana wysokość. (Zapoznaj się z poniższą ryciną). Aby zapisać ustawienie żądanej wysokości, wybierz przycisk **Apply** (Zastosuj).



**Preferencje systemu**

Instytucja Autom. dyspozycja dla obrazu **Konsola** Kontrola jakości Wykrywanie Genius AI

Ustawienia wysokości konsoli systemu

Autom. regulacja wys. przy wylogowaniu

Żądana wysokość konsoli 83,8 cm (33,0 in) **Zastosuj**

Bieżąca wysokość konsoli

Bieżąca wysokość konsoli 99,6 cm (39,2 in)


Rycina 88: Pola *Desired Console Height* (Żądana wysokość konsoli) i *Current Console Height* (Bieżąca wysokość konsoli)

6. Wybierz opcję **Save** (Zapisz), a następnie przycisk **OK** (OK), aby wyświetlić komunikat *Update Successful* (Aktualizacja powiodła się).

### 10.8 Ustawianie automatycznej akceptacji i automatycznego zawieszania obrazów

Użytkownik z uprawnieniami kierownika ma możliwość skonfigurowania systemu pod kątem automatycznej akceptacji lub zawieszania nowych obrazów.

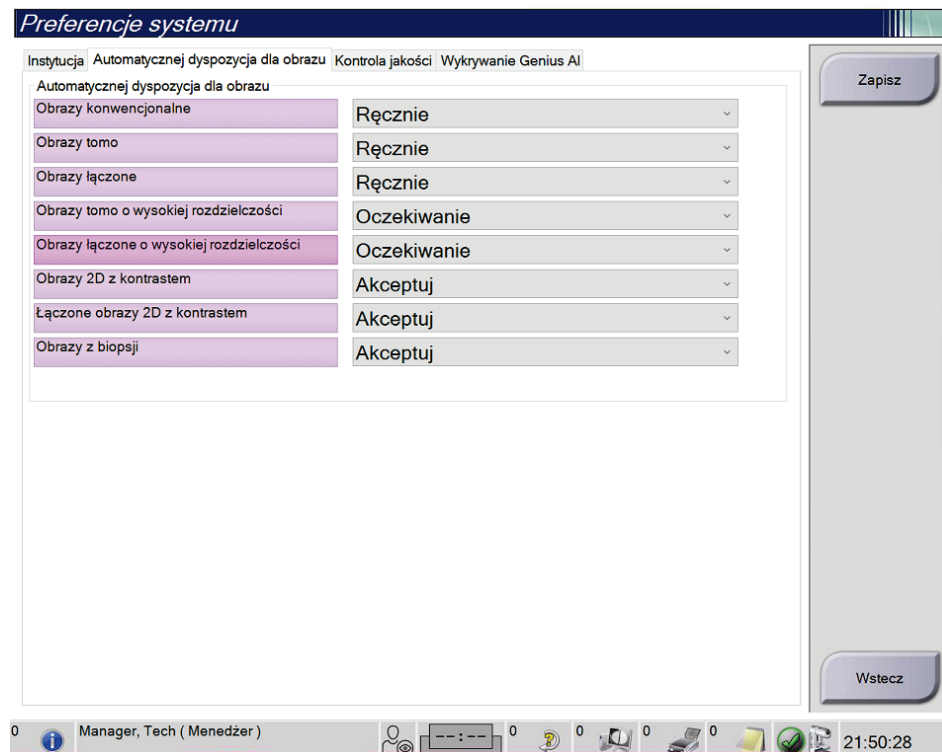1. W grupie systemu na ekranie *Admin* (Administrator) wybrać opcję **Preferencje** (Preferencje). Nastąpi otwarcie ekranu *System Preferences* (Preferencje systemu).
2. Wybrać kartę **Image Auto Disposition** (Automatyczna dyspozycja dla obrazu).
3. Za pomocą menu rozwijanych wybrać automatyczną dyspozycję dla każdego typu obrazu.
  - Wybrać opcję **Manual** (Ręcznie), aby ręcznie zatwierdzać, odrzucać lub zawieszać każdy nowo pozyskany obraz.
  - Wybrać opcję **Accept** (Zatwierdź), aby automatycznie zatwierdzać każdy nowo pozyskany obraz.
  - Wybrać opcję **Pend** (Zawieś), aby automatycznie zawieszać nowo pozyskane obrazy.



Rycina 89: Ustawianie automatycznej dyspozycji dla obrazu


4. Wybrać opcję **Save** (Zapisz), a następnie przycisk **OK** (OK), aby wyświetlić komunikat *Update Successful* (Aktualizacja powiodła się).

## 10.9 Ustawianie wartości domyślnych kontrastu

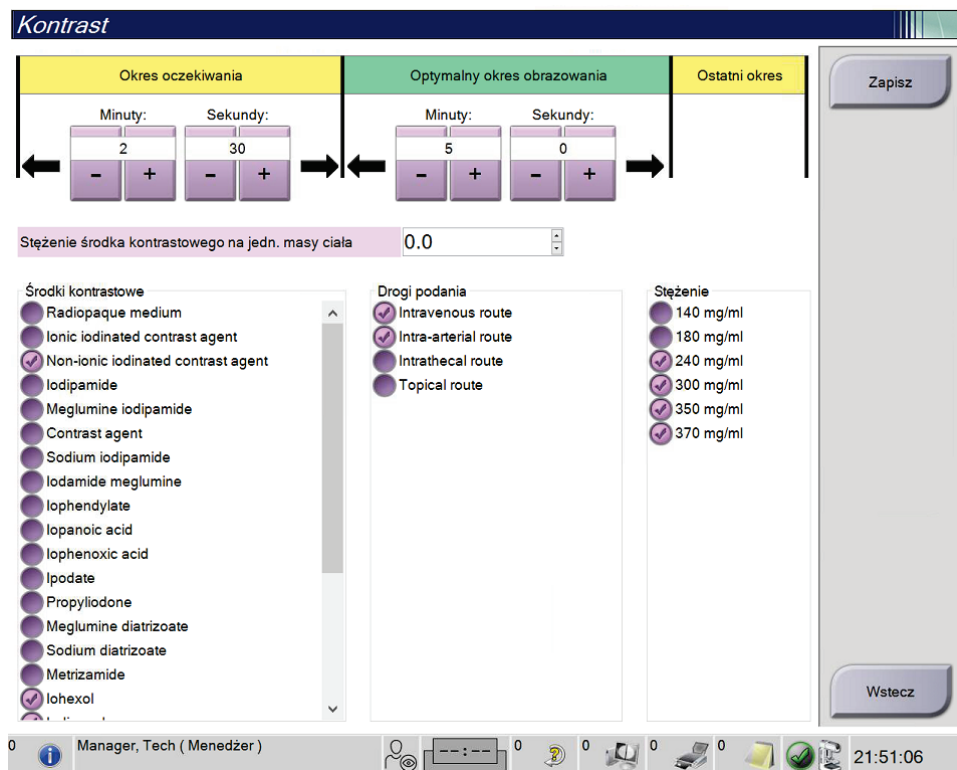Użytkownik o uprawnieniach kierownika ma możliwość skonfigurowania domyślnych okresów i domyślnych danych kontrastu.

### Ustawianie domyślnych okresów

1. Z grupy procedur na ekranie *Admin* (Administrator) wybrać przycisk **Contrast** (Kontrast).



Rycina 90: Ustawienia domyślne kontrastu 2D w widoku I-View

2. Wybierać przyciski plus (+) lub minus (-), aby zmienić liczbę minut i sekund **okresu oczekiwania i okresu optymalnego obrazowania**.

3. Wybrać opcję **Save** (Zapisz).

Dokonany wybór pojawi się na karcie **Contrast** (Kontrast) jako domyślne ustawienia zegara.

### Ustawianie domyślnych danych kontrastu

1. Z grupy procedur na ekranie *Admin* (Administrator) wybrać przycisk **Contrast** (Kontrast).
2. Wybrać jedną lub kilka opcji **Contrast agents** (Środki kontrastowe), **Entry routes** (Drogi podania) i **Concentration** (Stężenie). Patrz poprzednia ilustracja.
3. Wybrać opcję **Save** (Zapisz).

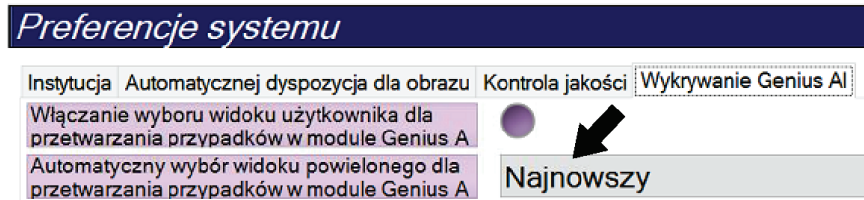
Wybrane opcje zostaną wyświetlone jako opcje domyślne w oknie dialogowym Contrast Information (Dane kontrastu).

### 10.10 Ustawianie preferencji modułu Genius AI Detection

Procedura może czasami wymagać powtórzenia. Kierownik może ustawić preferencje dla obrazu, aby używać przetwarzania przypadków w module Genius AI, jeśli istnieją zduplikowane widoki.

**Aby ustawić domyślny wybór systemu dla zduplikowanych widoków:**

1. W grupie systemu na ekranie *Admin* (Admin) wybierz przycisk **Preferences** (Preferencje). Nastąpi otwarcie ekranu *System Preferences* (Preferencje systemu).
2. Wybierz kartę **Genius AI Detection** (Wykrywanie Genius AI).
3. W polu „Genius AI Case Processing Automatic Duplicate View Selection” (Automatyczny wybór widoku powielonego dla przetwarzania przypadków w module Genius AI) wybierz opcję **Newest** (Najnowsze) lub **Oldest** (Najstarsze).
  - **Newest** (Najnowsze) ustawia system tak, aby automatycznie wybierał najnowszy widok duplikatu do przetwarzania przypadku.
  - **Oldest** (Najstarsze) ustawia system tak, aby automatycznie wybierał najstarszy widok duplikatu do przetwarzania przypadku.




Rycina 91: Automatyczny wybór dla przetwarzania przypadków w module Genius AI

4. Wybierz opcję **Save** (Zapisz), a następnie przycisk **OK** (OK), aby wyświetlić komunikat *Update Successful* (Aktualizacja powiodła się).

**Aby umożliwić użytkownikowi wybór zduplikowanych widoków:**

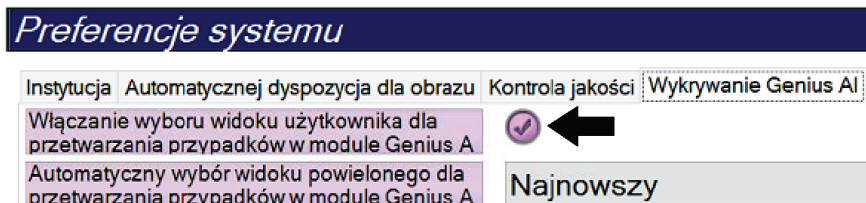
1. W grupie systemu na ekranie *Admin* (Admin) wybierz przycisk **Preferences** (Preferencje). Nastąpi otwarcie ekranu *System Preferences* (Preferencje systemu).
2. Wybierz kartę **Genius AI Detection** (Wykrywanie Genius AI).
3. Aby włączyć wybór przez użytkownika, zaznacz przycisk radiowy „Enable User View Selection for Genius AI Case” (Włączanie wyboru widoku użytkownika dla przetwarzania przypadków w module Genius AI). Pojawi się znaczek wyboru. (Aby wyłączyć opcję wyboru przez użytkownika, usuń zaznaczenie przycisku radiowego).



Rycina 92: Automatyczny wybór dla przetwarzania przypadków w module Genius AI

- Wybierz opcję **Save** (Zapisz), a następnie przycisk **OK** (OK), aby wyświetlić komunikat *Update Successful* (Aktualizacja powiodła się).

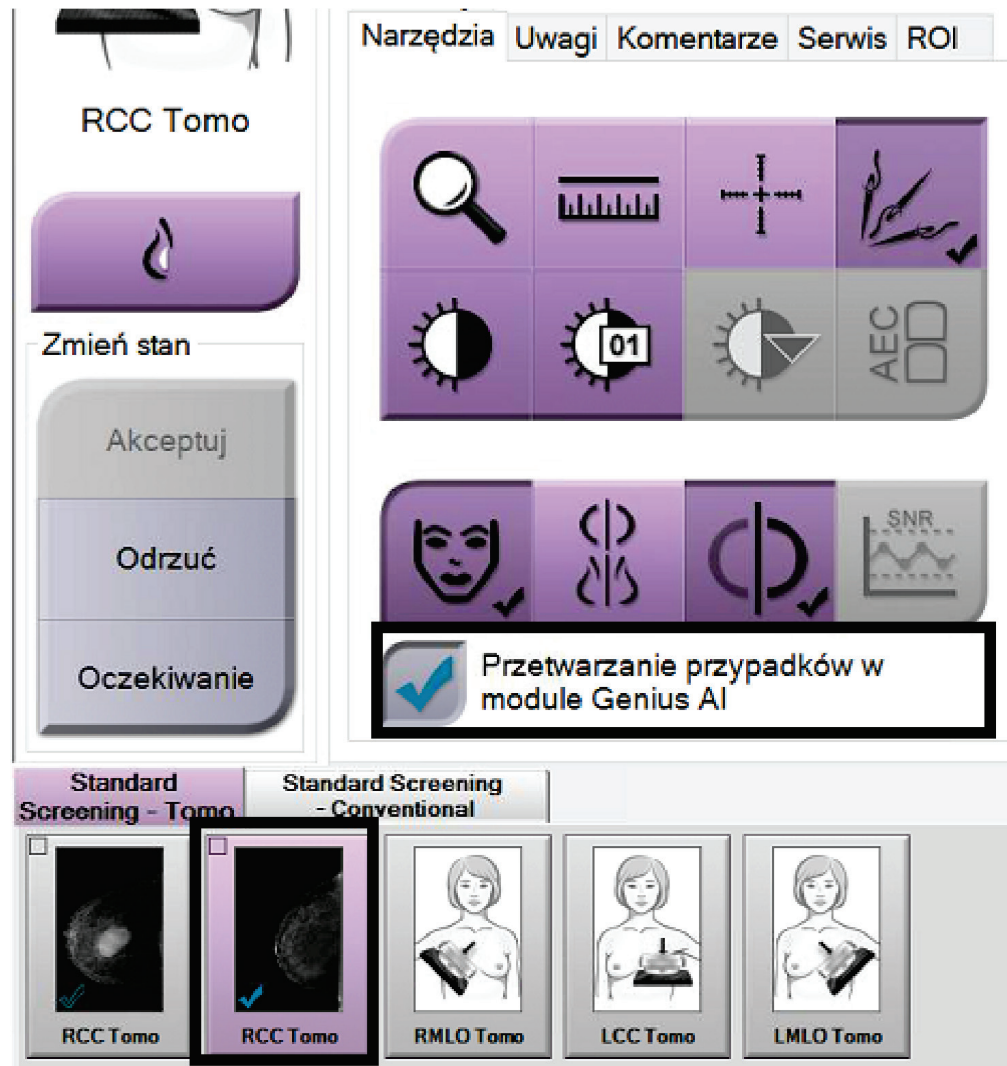Po uzyskaniu i zaakceptowaniu zduplikowanego widoku system pokazuje, że użytkownik wybrał obraz do przetwarzania przypadku za pomocą modułu Genius AI Detection. Karta Tools (Narzędzia) na ekranie Procedure (Procedura) wyświetli duży znak zaznaczenia. Miniatura obrazu, który został wybrany do przetworzenia, jest oznaczona małym znakiem wyboru. (Zapoznaj się z poniższą ryciną).



Rycina 93: Wybór użytkownika do przetwarzania przypadku w module Genius AI


### 10.11 System Tools (Narzędzia systemu)

Menedżerowie i użytkownicy w roli technologów radiologicznych, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia, mogą uzyskiwać dostęp do programu narzędziowego System Tools (Narzędzia systemowe). Program narzędziowy System Tools (Narzędzia systemowe) zawiera informacje o konfiguracji systemu. Aby uzyskać dostęp do tego programu narzędziowego, należy wybrać przycisk **System Tools** (Narzędzia systemowe) z grupy System na ekranie *Admin* (Administrator).



Rycina 94: Przycisk System Tools (Narzędzia systemowe)
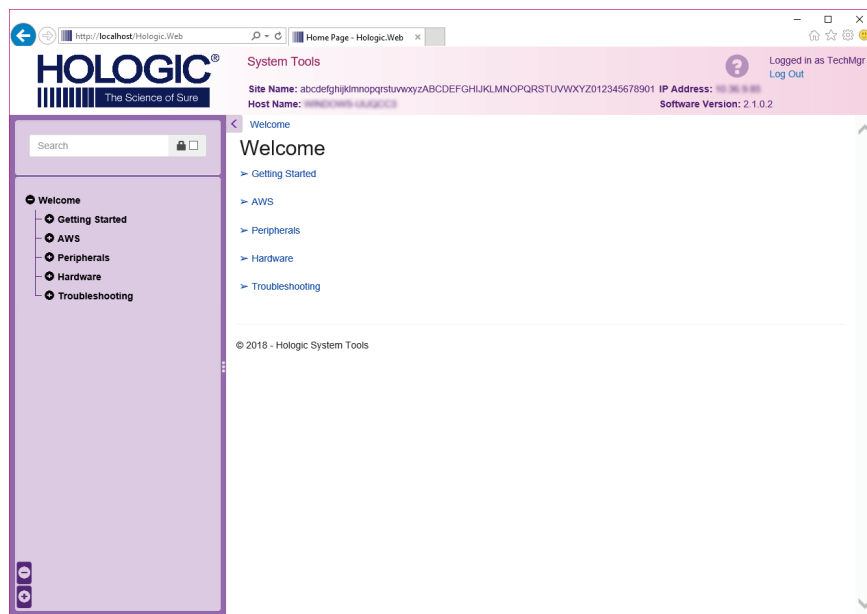
#### 10.11.1 Narzędzia systemowe dla menedżera w roli technologa radiologicznego



Rycina 95: Ekran System Tools (Narzędzia systemowe)

Tabela 25: Menedżer w roli technologa radiologicznego – funkcje narzędzi systemowych


Sekcja	Funkcje na ekranie
Getting Started (Wprowadzenie)	<p><b>About</b> (Informacje o): wprowadzenie do narzędzia serwisowego.</p> <p><b>FAQ</b> (Często zadawane pytania): lista najczęstszych pytań.</p> <p><b>Glossary</b> (Glosariusz): lista terminów i opisów.</p> <p><b>Platform</b> (Platforma): lista katalogów, numerów wersji oprogramowania i statystyk dotyczących oprogramowania systemu.</p> <p><b>Shortcuts</b> (Skróty): lista skrótów systemu Windows.</p>
AWS (Stacja robocza akwizycji)	<p><b>Connectivity</b> (Opcje połączeń): lista zainstalowanych urządzeń.</p> <p><b>Film &amp; Image Information</b> (Informacje o kliszy i obrazie): umożliwia utworzenie raportu dotyczącego obrazu*. Utworzenie raportu z kontroli jakości. (*Dostęp do tego raportu można także uzyskać z komputera zdalnego. Patrz: <a href="#">Dostęp zdalny do raportów dotyczących obrazów</a> na stronie 168).</p> <p><b>Licensing</b> (Licencje): lista zainstalowanych licencji.</p> <p><b>User Interface</b> (Interfejs użytkownika): umożliwia zmianę opcji w aplikacji oprogramowania.</p> <p><b>Internationalization</b> (Umiejętność międzynarodowa): umożliwia wybór języka lokalnego oraz kultury lokalnej.</p>
Troubleshooting (Rozwiązywanie problemów)	<p><b>AWS</b> (Stacja robocza akwizycji): umożliwia pobieranie obrazów.</p> <p><b>Computer</b> (Komputer): informacje o zarządzaniu systemem oraz o sieci.</p> <p><b>Log</b> (Dziennik): opcje zmiany rejestru zdarzeń.</p> <p><b>Backups</b> (Kopie zapasowe): kontrola kopii zapasowych dla systemu.</p>

#### 10.11.2 Dostęp zdalny do raportów dotyczących obrazów

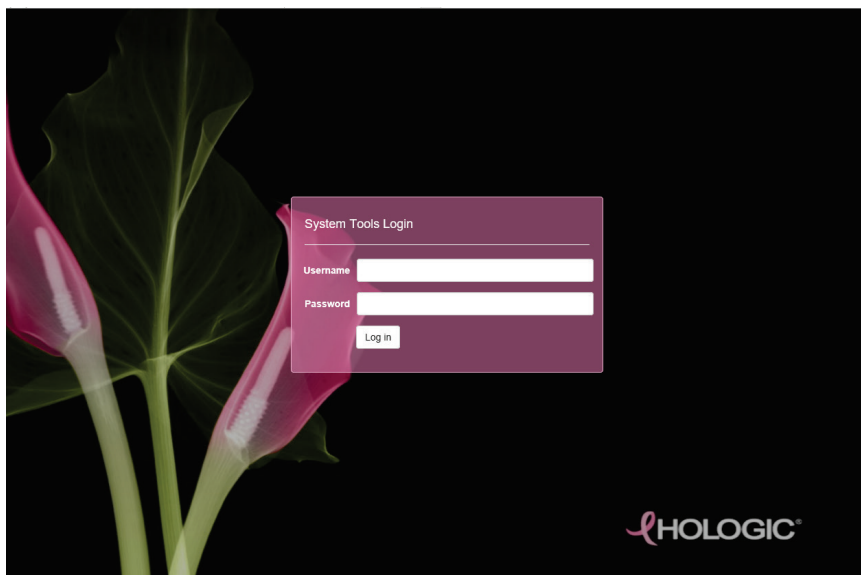Uzyskaj dostęp do raportów dotyczących obrazów za pośrednictwem komputera zdalnego podłączonego do systemu przez sieć. Ta funkcja może być używana w przypadku placówek, które nie pozwalają na pobieranie raportów bezpośrednio z systemu na nośnik USB.

Aby uzyskać dostęp do raportów dotyczących obrazów z komputera zdalnego, wykonaj poniższe kroki. W celu wykonania tej procedury musisz zalogować się do obszaru System Tools (Narzędzia systemowe) jako użytkownik na poziomie menedżera.


1. Uzyskaj adres IP komputera, do którego chcesz uzyskać dostęp. Możesz otrzymać ten adres IP od administratora IT lub z systemu. W systemie przejdź do ekranu *About* (Informacje o) i wybierz kartę **System**. Zapisz adres IP.
2. W przeglądarce internetowej na komputerze zdalnym przejdź pod adres `http://[adres IP]/Hologic.web/MainPage.aspx`. Użyj adresu IP z kroku 1.
3. Zostanie otwarty ekran *System Tools Login* (Logowanie do narzędzi systemowych). Wpisz nazwę użytkownika (na poziomie menedżera) i hasło, a następnie wybierz przycisk **Log In** (Zaloguj).



Rycina 96: Ekran System Tools Login (Logowanie do narzędzi systemowych)




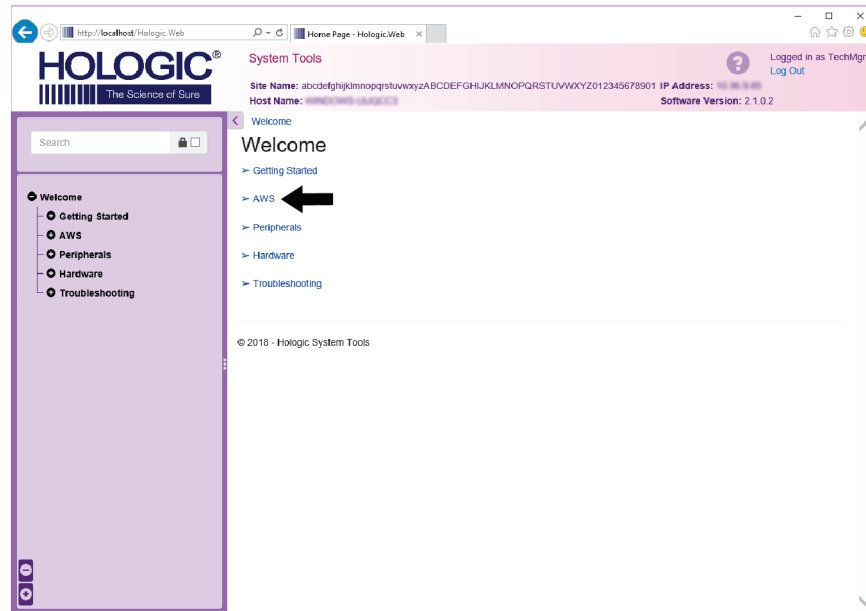4. Zostanie otwarty ekran *System Tools Welcome* (Witamy w narzędziach systemowych). Wybierz kolejno **AWS** (Stacja robocza akwizycji) > **Film & Image Information** (Informacje o kliszy i obrazie) > **Create Image Report** (Utwórz raport dot. obrazu).



Rycina 97: Ekran *System Tools Welcome* (Witamy w narzędziach systemowych)

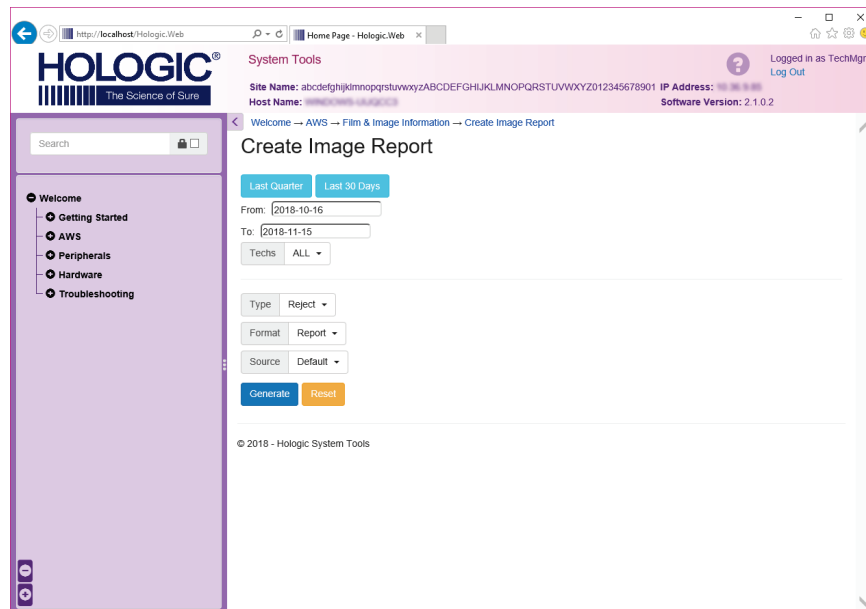5. Wybierz parametry dla raportu i kliknij opcję **Generate** (Generuj).



Rycina 98: Parametry *Create Image Report* (Utwórz raport dot. obrazu)

# Przewodnik użytkownika systemu 3Dimensions

## Rozdział 10: Interfejs administracyjny systemu

6. Raport zostanie wyświetlony na ekranie. Przewiń do dołu raportu i wybierz opcję **Download to (html)** (Pobierz do (html)) lub **Download to (csv)** (Pobierz do (csv)), aby określić typ pobieranego pliku. Gdy pojawi się monit, kliknij przycisk **Save** (Zapisz).

The screenshot shows the Hologic System Tools interface. At the top, there is a navigation bar with the Hologic logo and 'System Tools' title. Below the navigation bar, there is a search bar and a sidebar menu with categories like 'Welcome', 'Getting Started', 'AWS', 'Peripherals', 'Hardware', and 'Troubleshooting'. The main content area displays a table with 12 rows of data. The table has columns for category, and several columns of numerical values, with a 'Totals' row at the bottom. Below the table, there are summary statistics: 'Total with Reasons: 0', 'Total Exposures: 0', and 'Ratio (%): 0%'. There are also fields for 'Remarks' and 'Corrective Action'. At the bottom of the report, there are two links: 'Download html (Right click to download)' and 'Download csv (Right click to download)'. A black arrow points to the 'Download html' link.

Category	Value 1	Value 2	Value 3	Value 4	Value 5	Value 6	Value 7	Value 8	Value 9
6. Incorrect Patient ID	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7. X-ray Equipment Failure	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8. Software Failure	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9. Blank Image	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
10. Wire Localization	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
11. Aborted AEC Exposure	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
12. Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Totals:								0	100%

Total with Reasons: 0  
Total Exposures: 0  
Ratio (%): 0%

Remarks:  
Corrective Action:

Download html (Right click to download)  
Download csv (Right click to download)

Rycina 99: Pobieranie raportu dotyczącego obrazu

7. Wybierz folder na komputerze, a następnie kliknij przycisk **Save** (Zapisz).
8. Po zakończeniu wybierz opcję **Log out** (Wyloguj), aby wylogować się z obszaru System Tools (Narzędzia systemowe).

## 10.12 Narzędzie archiwizacji

Funkcja archiwizacji na ekranie *Admin* (Administrator) umożliwia:


- wysyłanie lokalnych badań do archiwum,
- eksport badań na nośniki wymienne.



Rycina 100: Przycisk Archive (Archiwizuj)

1. Z grupy komunikacji na ekranie *Admin* (Administrator) wybrać przycisk **Archive** (Archiwizuj). Nastąpi otwarcie ekranu *Multi Patient On Demand Archive* (Archiwum wielu pacjentów na żądanie).
2. Aby wyszukać pacjenta, wprowadzić co najmniej dwa znaki w obszarze parametrów wyszukiwania i wybrać lupę.

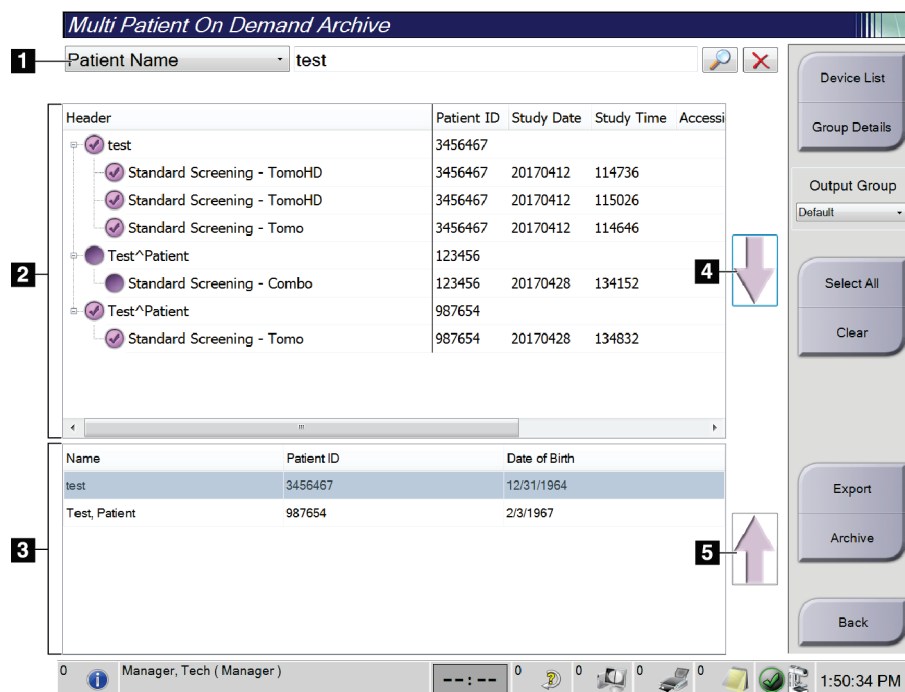Zostanie wyświetlona lista pacjentów odpowiadających kryteriom wyszukiwania.



Rycina 101: Ekran *Multi Patient On Demand Archive* (Archiwum wielu pacjentów na żądanie)

### Legenda rysunku

1. Parametry wyszukiwania
2. Obszar listy pacjentów
3. Obszar pacjentów do archiwizacji lub eksportu
4. Dodawanie pozycji z obszaru listy pacjentów do obszaru pacjentów przeznaczonych do archiwizacji lub eksportu
5. Usuwanie pozycji z obszaru pacjentów przeznaczonych do archiwizacji lub eksportu

#### Aby przenieść do archiwum:

1. Wybrać pacjentów i procedury przeznaczonych do archiwizacji.
  - Wybrać pacjentów z listy pacjentów lub wykonać wyszukiwanie za pomocą parametrów wyszukiwania (poz. 1) oraz wybrać pacjentów z listy wyników wyszukiwania.



---

#### Uwaga

Przycisk **Select All** (Wybierz wszystko) (po prawej stronie ekranu) umożliwia wybór wszystkich pacjentów w obszarze listy pacjentów. Przycisk **Clear** (Wyczyść) (po prawej stronie ekranu) powoduje usunięcie zaznaczeń.

---

- Wybrać procedury dla każdego pacjenta.
  - Wybrać przycisk **Strzałka w dół** (poz. 4) na ekranie, aby przenieść wybranych pacjentów do obszaru pacjentów przeznaczonych do archiwizacji (poz. 3).
  - Wybrać przycisk **Strzałka w górę** (poz. 5) na ekranie, aby usunąć wybranych pacjentów z obszaru pacjentów przeznaczonych do archiwizacji (poz. 3).
2. Wybrać urządzenie pamięci masowej.
    - Wybrać opcję z menu rozwijanego Store Device (Urządzenie pamięci masowej).  
– LUB –
    - Wybrać przycisk **Group List** (Lista grup), a następnie wybrać opcję.
  3. Wybrać przycisk **Archive** (Archiwizuj). Lista w obszarze pacjentów przeznaczonych do archiwizacji kopiuje się do wybranych urządzeń archiwizacyjnych.



---

#### Uwaga

Aby sprawdzić status archiwum, należy skorzystać z narzędzia Manage Queue (Zarządzaj kolejkami) na pasku zadań.

---

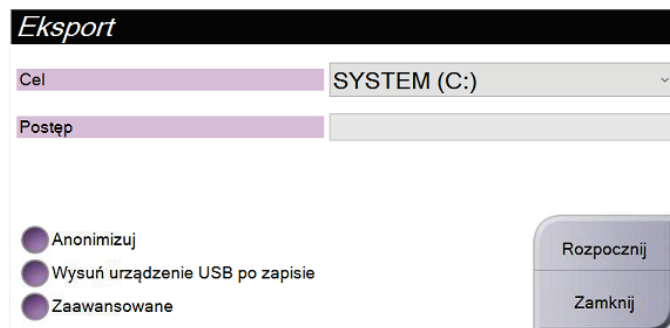
**Aby wyeksportować:**

- Wybrać pacjentów i procedury przeznaczonych do eksportu.
  - Wybrać pacjentów z listy pacjentów lub wykonać wyszukiwanie za pomocą jednego z parametrów wyszukiwania (poz. 1) oraz wybrać pacjentów z listy wyników wyszukiwania.

**Uwaga**

Przycisk **Select All** (Wybierz wszystko) (po prawej stronie ekranu) umożliwia wybór wszystkich pacjentów w obszarze listy pacjentów. Przycisk **Clear** (Wyczyść) (po prawej stronie ekranu) powoduje usunięcie zaznaczeń.

- Wybrać procedury dla każdego pacjenta.
  - Wybrać przycisk **Strzałka w dół** (poz. 4) na ekranie, aby przenieść wybranych pacjentów do obszaru pacjentów przeznaczonych do archiwizacji (poz. 3).
  - Wybrać przycisk **Strzałka w górę** (poz. 5) na ekranie, aby usunąć wybranych pacjentów z obszaru pacjentów przeznaczonych do archiwizacji (poz. 3).
- Wybrać przycisk **Export** (Eksportuj).
  - W oknie dialogowym *Export* (Eksportuj) wybrać cel z listy rozwijanej urządzeń multimedialnych.



Rycina 102: Ekran *Export* (Eksport)


- W razie potrzeby wybrać inne opcje:
  - Anonymize** (Anonimizuj): anonimizacja danych pacjenta.
  - Eject USB device after write** (Wysuń urządzenie USB po dokonaniu zapisu): wysuwanie wymiennego urządzenia pamięci masowej po zakończeniu eksportu.
  - Advanced** (Zaawansowane): wybór folderu w systemie lokalnym do zapisania wyborów, a także wybór typów eksportu obrazów.
- Wybrać przycisk **Start** (Start), aby wysłać wybrane obrazy do wskazanego urządzenia.



## Załącznik A Specyfikacje
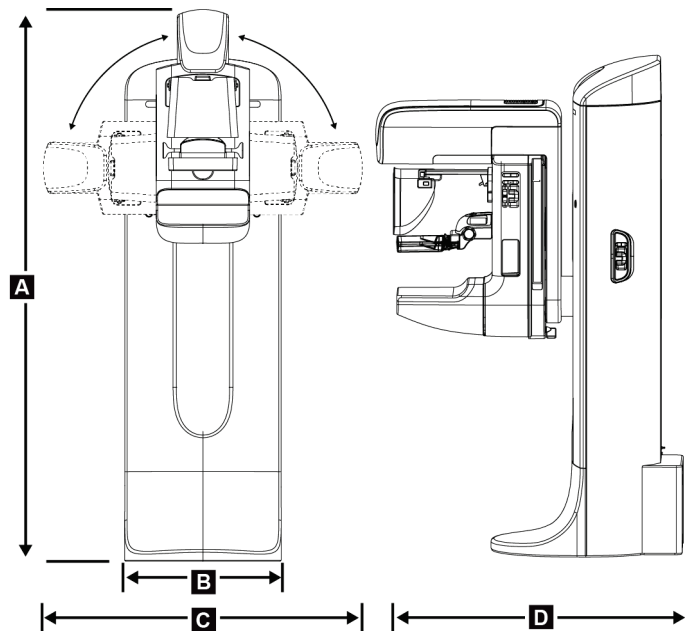
### A.1 Wymiary produktu

#### A.1.1 Stanowisko lampy (gantry i ramię C)




Rycina 103: Wymiary stanowiska lampy (gantry i ramię C)

A.	Wysokość	223 cm (87,8 cala)
B.	Szerokość	66 cm (26 cali)
C.	Szerokość	173 cm (68 cali)
D.	Głębokość	138 cm (54.3 cala)
	Masa	Do 400 kg (do 882 funty)

### A.1.2 Stacje robocze akwizycji
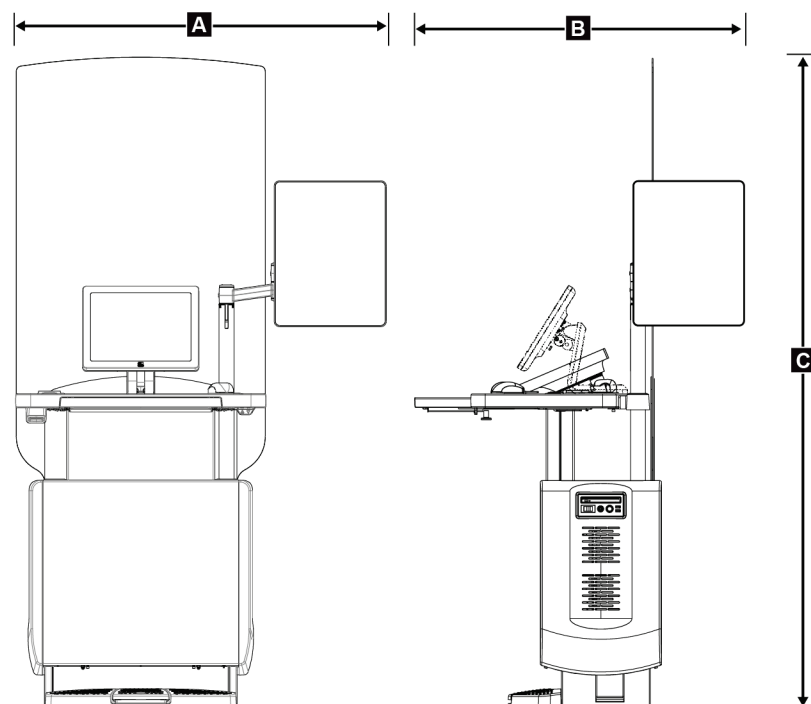
#### Uniwersalna stacja robocza akwizycji




Rycina 104: Wymiary uniwersalnej stacji roboczej akwizycji

A.	Szerokość (maksymalna) z wysuniętym opcjonalnym ramieniem (przegubowym) wyświetlacza	136 cm (53,4 cala) — seria I UAWS
		128 cm (50,3 cala) — seria II UAWS
	Szerokość (maksymalna) ze standardowym ramieniem wyświetlacza	94,0 cm (36,9 cala) — seria I UAWS 107 cm (42,0 cala) — seria II UAWS
B.	Głębokość (maksymalna) z wysuniętą szufladą klawiatury i opcjonalnym przegubowym ramieniem monitora	122 cm (48,4 cala) — seria I UAWS, po obróceniu do boku
		115 cm (45,1 cala) — seria II UAWS, po obróceniu do boku
	Głębokość (maksymalna) z wysuniętą szufladą klawiatury i standardowym ramieniem wyświetlacza	83,6 cm (32,9 cala) — serie I i II UAWS
C.	Wysokość (znamionowa)	219 cm (86,1 cala) po sierpniu 2017 r.
		204 cm (80,3 cala) przed wrześniem 2017 r.
	Masa (maksymalna)	209 kg (460 funtów)



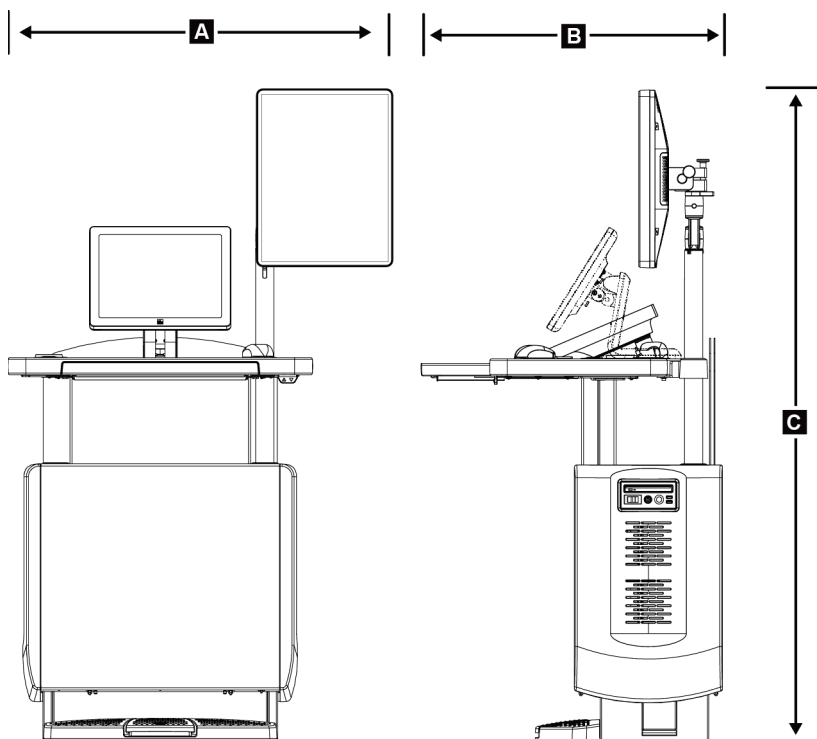Stacja robocza akwizycji do użytku mobilnego



Rycina 105: Wymiary uniwersalnej stacji roboczej akwizycji do użytku mobilnego

A.	Szerokość (maks.) z ruchomym ramieniem wyświetlacza	100 cm (39,5 cala) — seria I UAWS 107 cm (42,0 cala) — seria II UAWS
B.	Głębokość (maks.) z rozłożonym stolikiem na klawiaturę	85 cm (33,5 cala)
C.	Wysokość (maks.)	180 cm (71 cali)
	Masa (maks.)	179 kg (395 funty)

## A.2 Warunki eksploatacji i przechowywania

### A.2.1 Ogólne warunki eksploatacji

Zakres temperatur *Od 20°C (68°F) do 30°C (86°F)*

Zakres wilgotności względnej *Od 20% do 80% bez kondensacji*

### A.2.2 Warunki otoczenia podczas przechowywania

#### Gantry

Zakres temperatury *Od -10°C (14°F) do 40°C (104°F)*

Zakres wilgotności względnej *Od 10% do 90% bez kondensacji*

*(Umieścić w opakowaniu do przechowywania w budynku).*

#### Detektor RTG

Zakres temperatur *Od 10°C (50°F) do 30°C (86°F) przez nieograniczony czas*

*Od 10°C (50°F) do 35°C (95°F) przez maksymalnie 12 godzin*

Maksymalne tempo zmian temperatury *Mniej niż 10°C (50°F) na godzinę*

Zakres wilgotności względnej *Od 10% do 80% bez kondensacji*

*(W celu przechowywania w budynku umieścić w opakowaniu).*

#### Stacja robocza akwizycji

Zakres temperatury *Od -10°C (14°F) do 40°C (104°F)*

Zakres wilgotności względnej *Od 10% do 90% bez kondensacji*

*(Umieścić w opakowaniu do przechowywania w budynku).*

## A.3 Osłona antyradiacyjna

Równoważnik ołowiu (Pb) osłony *0,5 mm ołowiu dla promieniowania RTG o energii do 35 kV antyradiacyjnej*

## A.4 Wejściowe parametry elektryczne

### A.4.1 Statyw lampy

<i>Napięcie w sieci zasilającej</i>	200/208/220/230/ 240 VAC $\pm 10\%$
<i>Impedancja sieci zasilającej</i>	Maksymalna impedancja linii nie powinna przekraczać 0,20 oma dla 208/220/230/240 VAC, 0,16 oma dla 200 VAC
<i>Częstotliwość sieci zasilającej</i>	50/60 Hz $\pm 5\%$
<i>Prąd średni w ciągu 24 godzin</i>	< 5 A
<i>Szczytowy prąd na linii</i>	4 A (65 A maksymalnie przez $\leq 5$ sekund)

### A.4.2 Stacja robocza akwizycji

<i>Napięcie w sieci zasilającej</i>	100/120/200/208/220/230/240 VAC $\pm 10\%$
<i>Częstotliwość sieci zasilającej</i>	50/60 Hz $\pm 5\%$
<i>Pobór mocy</i>	< 1000 watów
<i>Cykl pracy (standardowa stacja robocza akwizycji)</i>	10% ~ 6 minut na godzinę lub 2 minuty włączone, 18 minut wyłączone
<i>Zabezpieczenie przeciwprądowe</i>	8 A

### A.5 Dane techniczne statywu lampy

#### A.5.1 Ramię C

<i>Zakres obrotu</i>	<i>Mammografia klasyczna:</i> $Od +195^{\circ} +3^{\circ}/-0,5^{\circ}$ do $0^{\circ} \pm 0,5^{\circ}$ do $-155^{\circ} +0,5^{\circ}/-3^{\circ}$  <i>Opcja tomosyntezy:</i> $Od +180^{\circ} \pm 0,5^{\circ}$ do $0^{\circ} \pm 0,5^{\circ}$ do $-140^{\circ} \pm 0,5^{\circ}$
<i>Bezwzględne położenie kątowne</i>	<i>dokładność do <math>\pm 0,5^{\circ}</math></i>
<i>Przyspieszenie przy obrocie</i>	$18^{\circ}/s^2 +18/-9\%$
<i>Zwalnianie przy obrocie</i>	$18^{\circ}/s^2 +18/-9\%$
<i>Prędkość kątowa przy pozycjonowaniu obrotowym</i>	$18^{\circ}/s \pm 25\%$



#### **Uwaga**

Prędkość kątowa jest średnią prędkości ramienia lampy obracającego się w kierunku zgodnym z ruchem zegara od  $0^{\circ}$  do  $90^{\circ}$  albo przeciwnym do ruchu wskazówek zegara od  $90^{\circ}$  do  $0^{\circ}$ . Prędkość kątowa nie uwzględnia czasu przyspieszania od prędkości zerowej i zwalniania do prędkości zerowej.

---

<i>Odległość źródło-obraz (SID)</i>	$70,0\text{ cm} \pm 1,0\text{ cm}$ (27,6 cala $\pm 0,4$ cala)  ( <i>Odchylenie pozycji ogniska wynosi <math>\pm 5\text{ mm}</math></i> )
<i>Podpora pacjentki (bez powiększeń)</i>	
<i>Dolny limit pozycji w pionie</i>	$70,5\text{ cm} +5,1/-0\text{ cm}$ (27,75 cala $+2,0/-0$ cala)
<i>Górny limit pozycji w pionie</i>	$141\text{ cm} +0/-17,8\text{ cm}$ (55,5 cala $+0/-7,0$ cala)

## A.5.2 Kompresja

<i>Siła kompresji ręcznej</i>	<i>Maksymalnie 300 N (67,4 funta-siła)</i>
<i>Kompresja z napędem silnikowym</i>	<i>Działa w trzech trybach pracy: Pre-compression (Kompresja wstępna), Full-Range (Pełny zakres), Dual Compression (Kompresja podwójna). Do wyboru przez użytkownika za pośrednictwem oprogramowania.</i>
<i>Siła kompresji Pre-compression (Kompresja wstępna)</i>	<i>Od 67 do 134 N (od 15 to 30 funtów-siła), za napędem silnikowym</i>
<i>Siła kompresji Full-Range (Pełny zakres)</i>	<i>Od 89 do 178 N (od 20 to 40 funtów-siła), za napędem silnikowym</i>
<i>Kompresja Dual Compression (Kompresja podwójna)</i>	<i>Zapewnia siłę kompresji Pre-compression (Kompresja wstępna) po pierwszej aktywacji przełącznika kompresji; następnie — w przypadku aktywacji w ciągu 2 sekund — siła jest stopniowo zwiększana po każdej aktywacji przełącznika do wybranej przez użytkownika pełnej siły kompresji.</i>
<i>Elementy sterujące kompresją</i>	<i>Przełączniki ruchu w górę / w dół po obu stronach ramienia C oraz na dwupozycyjnym przełączniku nożnym (napęd silnikowy). Pokrętko ręczne po obu stronach urządzenia kompresyjnego (regulacja ręczna).</i>
<i>Zwalnianie kompresji</i>	<i>Zwolnienie przy użyciu napędu silnikowego kontrolowane przyciskami po obu stronach ramienia C.</i>
<i>Automatyczne zwolnienie kompresji</i>	<i>Wybierany przez użytkownika tryb automatycznego zwolnienia powoduje podniesienie urządzenia kompresyjnego po zakończeniu ekspozycji.</i>
<i>Zmienna prędkość ruchu w dół</i>	<i>4,2 cm/s <math>\pm</math>15% (1,66 cali/s <math>\pm</math>15%)</i>
<i>Wyświetlacz siły kompresji</i>	<i>Dwa wyświetlacze LCD na urządzeniu kompresyjnym pokazują siłę kompresji w zakresie od 18 N do 300 N w krokach co 1 N (od 4 do 67 funtów-siła w krokach co 1 funt-siła).</i>
<i>Dokładność wyświetlania siły kompresji</i>	<i><math>\pm</math>20 N (<math>\pm</math>4,5 funta-siła)</i>
<i>Wyświetlacz grubości po kompresji</i>	<i>Dwa wyświetlacze LCD na urządzeniu kompresyjnym podają grubość po kompresji w krokach co 0,1 cm. Wyświetlacz jest widoczny po obu stronach pacjenta.</i>
<i>Dokładność grubości po kompresji</i>	<i><math>\pm</math>0,5 cm (<math>\pm</math>0,2 cala) w przypadku grubości od 0,5 cm do 15 cm (5,9 cala)</i>
<i>Grubość po kompresji w tomosyntezie piersi</i>	<i>Tomosynteza z rozdzielczością standardową Maksymalnie: 24 cm (ograniczona przez geometrię urządzenia kompresyjnego)</i>
<i>Płytki kompresyjne</i>	<i>Tomosynteza z wysoką rozdzielczością Maksymalnie: 15 cm (ograniczona przez limity DICOM) Płytki kompresyjne są przezroczyste. Płytki są wykonane z żywicy poliwęglanowej lub równoważnego materiału. Po zastosowaniu kompresji odchylenie płytki od płaszczyzny równoległej do powierzchni podpory pacjenta powinno być nie większe niż 1,0 cm.</i>

### A.5.3 Lampa RTG

Ognisko	Duże (0,3 mm), znamionowo Małe (0,1 mm), znamionowo
Napięcie lampy	Od 20 kV do 49 kV
Materiał anody	Wolfram
Okno rentgenowskie	Beryl 0,63 mm
Warunki testu promieniowania ubocznego z lampy RTG	49 kVp, 2,0 mA

### A.5.4 Filtracja i wyjście wiązki RTG

Filtracja	Pięciopozycyjne koło filtra: Pozycja 1: rod, 0,050 mm $\pm 10\%$ Pozycja 2: aluminium, 0,70 mm (znamionowo) (opcja tomosyntezy) Pozycja 3: srebro, 0,050 mm $\pm 10\%$ Pozycja 4: miedź, 0,3 mm Pozycja 5: ołów (zapewniany w celu serwisowania)
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Zakres wartości kV/mA

Tabela 26: Maksymalne ustawienie mA w funkcji kV

kV	Małe ognisko, mA	Duże ognisko, mA
20	100	30
21	110	30
22	110	30
23	120	30
24	130	30
25	130	40
26	140	40
27	150	40
28	160	40
29	160	40
30	170	50
31	180	50

Tabela 26: Maksymalne ustawienie mA w funkcji kV

kV	Małe ognisko, mA	Duże ognisko, mA
32	190	50
33	200	50
34	200	50
35	200	50
36	190	50
37	180	50
38	180	50
39	180	50
40	170	
41	170	
42	160	
43	160	
44	150	
45	150	
46	150	
47	140	
48	140	
49	140	

Kroki wartości mAs (tabela 1, domyślne) 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 30; 32,5; 35; 37,5; 40; 42,5; 45; 47,5; 50; 52,5; 55; 57,5; 60; 62,5; 65; 67,5; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 120; 140; 160; 180; 200; 220; 240; 260; 280; 300; 320; 340; 360; 380; 400; 420; 440; 460; 480; 500

### Tłumienie na włóknach węglowych

Detektor obrazu < 0,3 mm Al

Platforma do powiększeń < 0,3 mm Al

### A.5.5 Kolimator RTG

<i>Pola kolimacji</i>	<i>7,0 cm x 8,5 cm</i> <i>10 cm x 10 cm</i> <i>15 cm x 15 cm</i> <i>18 cm x 24 cm</i> <i>18 cm x 29 cm (opcja tomosyntezy)</i> <i>24 cm x 29 cm</i>
-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### A.5.6 Wskazanie pola świetlnego

<i>Zgodność pola świetlnego z promieniowaniem RTG</i>	<i>W zakresie 2% od SID</i>
-------------------------------------------------------	-----------------------------

### A.5.7 Generator promieniowania RTG

<i>Typ</i>	<i>Przemiennik wysokich częstotliwości o potencjale stałym</i>
<i>Parametry znamionowe</i>	<i>7,0 kW, maksymalnie (isowatt), 200 mA przy 35 kV</i>
<i>Moc elektryczna</i>	<i>9,0 kW maksymalnie</i>
<i>Zakres wartości kV</i>	<i>od 20 kV do 49 kV w krokach co 1 kV</i>
<i>Dokładność wartości kV</i>	<i>±2%, w zakresie 20–49 kVp</i>
<i>Zakres wartości mAs</i>	<i>od 3,0 mAs do 500 mAs w trybie ręcznym mAs (minimum 8 mAs w trybie AEC)</i>
<i>Dokładność wartości mAs</i>	<i>±(10% + 0,2 mAs)</i>
<i>Zakres wartości mA</i>	<i>od 10 mA do 200 mA, duże ognisko</i> <i>od 10 mA do 50 mA, małe ognisko</i>



## A.6 Dane techniczne systemu obrazowania

### A.6.1 Detektor obrazu

<i>Ochrona przed wnikaniem płynów</i>	<i>Płyn rozlany przypadkowo na detektor obrazu nie może wniknąć do środka.</i>
<i>Odchylenie</i>	<i>Nie przekracza 1,0 mm przy maksymalnej kompresji.</i>
<i>Aktywny obszar obrazowania</i>	<i>Nie mniej niż 23,3 cm na 28,5 cm (9,2 cala x 11,2 cala)</i>
<i>Mammografia klasyczna DQE</i>	<i>Nie mniej niż 50% przy 0,2 lp/mm</i>
	<i>Nie mniej niż 15% przy limicie Nyquista</i>
<i>DQE (opcja tomosyntezy)</i>	<i>Nie mniej niż 30% przy 0,2 lp/mm</i>
	<i>Nie mniej niż 15% przy limicie Nyquista</i>
<i>Zakres dynamiczny i liniowość</i>	<i>Odowiedź podsystemu detektora jest liniowa z liniowością 0,999 w zakresie dynamicznym 400:1 podczas ekspozycji na promieniowanie RTG.</i>
<i>Jednorodność</i>	<i>Podsystem detektora może korygować odchylenia wzmocnienia między pikselami.</i>
	<i>W przypadku procedur mammografii klasycznej odchylenie jednorodności reakcji detektora przy jednorodnym napromienianiu jest nie większe niż 2% po kalibracji wzmocnienia w zakresie ekspozycji od 0,5 mR do 200 mR.</i>



## Załącznik B Komunikaty systemowe i komunikaty alertów

### B.1 Przywracanie sprawności po błędzie i rozwiązywanie problemów

Większość komunikatów o usterkach i alertów jest kasowanych bez wpływu na proces pracy użytkownika. Należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie lub wyeliminować błąd, a następnie skasować status na pasku zadań. Niektóre sytuacje wymagają restartu systemu lub wskazują, że konieczne jest podjęcie dalszych działań (na przykład kontakt z działem wsparcia technicznego firmy Hologic). W niniejszym załączniku opisano kategorie komunikatów oraz działania, jakie należy podjąć, aby przywrócić normalne działanie systemu. Jeśli konkretny błąd wystąpi ponownie, należy skontaktować się z działem wsparcia technicznego firmy Hologic.

### B.2 Typy komunikatów

#### B.2.1 Poziomy usterek

Każdy komunikat ma konkretny zestaw poniższych cech:

- Przerywa trwającą ekspozycję (tak/nie)
- Uniemożliwia rozpoczęcie ekspozycji (tak/nie)
- Wyświetla komunikat dla użytkownika na stacji roboczej akwizycji (tak/nie)
- Może zostać zresetowany przez użytkownika (tak/nie)
- Może zostać zresetowany automatycznie przez system (tak/nie)

#### Komunikaty wyświetlane

Wszystkie wyświetlane komunikaty zostaną wyświetlone w języku wybranym przez użytkownika.

Każdy komunikat, który przerywa ekspozycję lub uniemożliwia jej rozpoczęcie, jest zawsze wyświetlany w postaci komunikatu informującego użytkownika o tym, jakie działania należy podjąć, aby kontynuować.

#### Dodatkowe informacje o komunikacie

Informacje techniczne o komunikacie są dostępne w pliku dziennika.

Niektóre komunikaty są wyświetlane jako usterka krytyczna (wymagany jest restart systemu). Te komunikaty są spowodowane stanem, który uniemożliwia wykonanie ekspozycji, a którego reset przez użytkownika lub system jest niemożliwy.

### B.2.2 Komunikaty systemowe

Gdy pojawią się następujące komunikaty systemowe, należy wykonać czynność określoną w kolumnie Działanie użytkownika, aby skasować komunikat i wykonać następną ekspozycję.

Tabela 27: Komunikaty systemowe


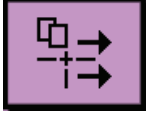





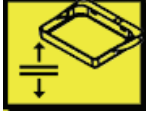










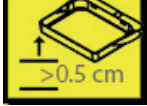
Ikona	Komunikat	Działanie użytkownika
	Paddle is moving (Płytkę się przesuwają)	Żadne działanie nie jest wymagane.
	Sending notice (Wysyłanie uwagi)	Żadne działanie nie jest wymagane.
	Invalid use of Magnification Stand (Niewłaściwe użycie statywu do powiększeń)	Wybrano widok tomograficzny, gdy zainstalowany jest statyw do powiększeń. Wybierz widok inny niż tomograficzny. (Opcja tomosyntezy)
	Face shield is not secured (Osłona twarzy nie jest unieruchomiona)	Całkowicie wysuń lub całkowicie schowaj osłonę twarzy. (Opcja tomosyntezy).
	Invalid use of compression paddle (Nieprawidłowe użycie płytki kompresyjnej)	Zdejmij statyw do powiększeń lub zainstaluj płytkę do powiększeń.
	Paddle position does not match selected view (Pozycja płytki nie odpowiada wybranemu widokowi)	Przesuń płytkę do lokalizacji prawidłowej dla wybranego widoku.
	Compression is less than 4.5 cm during calibration (Kompresja podczas kalibracji jest mniejsza niż 4,5 cm)	Aby zakończyć procedurę kalibracji, przesunij płytkę kompresyjną na wysokość większą niż 4,5 cm.
	FAST compression is engaged (Załączona kompresja FAST)	Wyłącz kompresję FAST i zainstaluj płytkę wyznaczoną dla tego trybu.
	License is missing (Brak licencji)	W celu korzystania z tego elementu lub tej funkcji potrzebna jest licencja. (Ten komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie ma żadnych działań do podjęcia przez użytkownika).
	Invalid detector calibration (Nieprawidłowa kalibracja detektora)	W celu kalibracji małego ogniska zamontuj statyw do powiększeń. W celu kalibracji dużego ogniska zdemontuj statyw do powiększeń.

Tabela 27: Komunikaty systemowe

Ikona	Komunikat	Działanie użytkownika
	Invalid geometry calibration (Nieprawidłowa kalibracja geometrii)	Przed próbą wykonania ekspozycji powtórz kalibrację geometrii. (Opcja tomosyntezy).
	Configuration file is missing (Brak pliku konfiguracyjnego)	Dotyczy personelu serwisowego.
	Waiting for Detector (Oczekiwanie na detektor)	Żadne działanie nie jest wymagane.
	System in Test Mode (System w trybie testowym)	Dotyczy personelu serwisowego.
	Tube needs to be manually positioned (move to 0 degrees) (Konieczne jest ręczne ustawienie lampy RTG (przesuń do 0 stopni))	Obróć ramię C do położenia 0 stopni.
	Tube needs to be manually positioned (move to -15 degrees) (Konieczne jest ręczne ustawienie lampy RTG (przesuń do -15 stopni))	Obróć ramię C do położenia -15 stopni.
	Tube needs to be manually positioned (move to 15 degrees) (Konieczne jest ręczne ustawienie lampy RTG (przesuń do 15 stopni))	Obróć ramię C do położenia +15 stopni.
	The Emergency Stop switch has been engaged. (Aktywowano przełącznik zatrzymania awaryjnego)	Obróć wyłącznik awaryjny o jedną czwartą obrotu, aby go zresetować.
	Compression too low for tomo reconstructions. (Kompresja zbyt niska dla rekonstrukcji tomo)	Aby wykonać ekspozycje tomograficzne, przesuń płytkę kompresyjną na wysokość większą niż 0,5 cm.

### B.3 Komunikaty zasilacza UPS

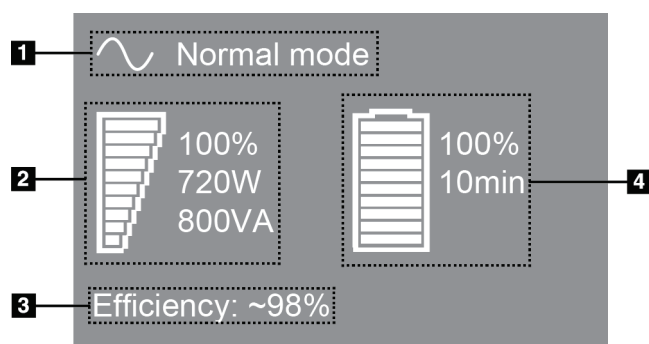


#### Uwaga

Przewodnik użytkownika zasilacza UPS jest dostarczany razem z systemem. Pełne instrukcje zawiera *Przewodnik użytkownika zasilacza UPS*.

---

Wyświetlacz LCD zasilacza UPS pokazuje wskazania dostępnego zasilania.



#### Legenda ryciny

1. Tryb pracy zasilacza UPS
2. Obciążenie zasilacza UPS
3. Wydajność zasilacza UPS
4. Poziom naładowania akumulatora zasilacza UPS

Rycina 106: Wyświetlacz LCD zasilacza UPS

Jeśli upłył termin ważności akumulatora zasilacza UPS, ikona Tryb (Mode) ulegnie zmianie na pokazaną. Należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu w celu wymiany akumulatora.



## Załącznik C Użytkowanie systemu mobilnego

W niniejszym załączniku opisano system zainstalowany w środowisku mobilnym.

### C.1 Warunki bezpieczeństwa i inne środki ostrożności

Wymagane jest akceptowalne, stabilne źródło zasilania VAC (bez zakłóceń) w celu zapewnienia, że system spełnia wszystkie specyfikacje wymagania. Tam, gdzie jest to możliwe, zasilanie lądowe poprawnie podłączone do systemu zapewnia najlepszą wydajność. Jeśli używany jest mobilny generator zasilania, specyfikacje zasilania na wejściu muszą być utrzymywane we wszystkich warunkach obciążeń.



**Ostrzeżenie:**

Osłona antyradiacyjna nie jest zatwierdzona do użytku mobilnego i nie jest zapewniana. Producent pojazdu, którym przewożony jest system, musi zapewnić odpowiednie ekranowanie.

---



**Przestroga:**

Gdy zasilanie z lądu jest niedostępne, można zastosować mobilne źródła zasilania, które zapewniają równoważną wydajność. (Patrz: [Dane techniczne dotyczące zastosowania mobilnego](#) na stronie 192). Właściwe działanie i odpowiednią wydajność systemu można zapewnić tylko wtedy, gdy zapewniane jest ciągle zasilanie VAC w postaci rzeczywistej fali sinusoidalnej zgodnie ze specyfikacjami zasilania wejściowego i charakterystyk obciążeniowych. Przejściowo źródło zasilania musi zapewniać 65 A przy 208 VAC przez co najmniej 5 sekund, a w innych sytuacjach maksymalnie 4 A ciągle. Takie obciążenie musi być obsługiwane raz na każde 30 sekund. W przypadku przerwy w dostawie zasilania lądowego lub mobilnego zasilacz UPS musi być zdolny zapewnić zasilanie wymagane do pracy systemu opisane powyżej przez co najmniej 4 minuty. Zasilanie stacji roboczej akwizycji i gantry musi być zapewniane przez osobne dedykowane obwody. W przypadku każdego obwodu zasilania zalecane jest stosowanie zasilacza bezprzerwowego z aktywnym kondycjonerem zasilania. Całe zasilanie pojazdu, którym przewożony jest system, powinno być dystrybuowane przez osobne obwody. Po wstępnej instalacji oraz każdorazowo po przemieszczeniu pojazdu, którym przewożony jest system, należy zadbać o to, aby instalacja elektryczna spełniała specyfikacje zasilania wejściowego dla systemu oraz wymagania bezpieczeństwa według normy IEC 60601-1.

---



**Przestroga:**

Temperatura i wilgotność wewnątrz pojazdu muszą być utrzymywane przez cały czas. Nie dopuszczać do tego, aby warunki środowiskowe przekroczyły podane specyfikacje, gdy system nie jest użytkowany.

---



**Przestroga:**

Podczas eksploatacji modułu RTG lub innego sprzętu (na przykład ogrzewającego lub klimatyzacji) napięcia nie mogą ulegać zmianie o więcej niż  $\pm 10\%$ .

---



**Przestroga**

Aby uniknąć występowania artefaktów obrazu:

- Należy zachować ostrożność, aby nie ustawiać i nie parkować pojazdu, w którym przewożony jest system, w pobliżu źródeł wysokiej mocy (takich jak linie transmisyjne albo transformatory zewnętrzne).
  - Należy upewnić się, że każdy mobilny generator zasilania, zasilacz bezprzerwowy (UPS) i stabilizator napięcia znajduje się w odległości co najmniej 3 metrów (10 stóp) od najbliższego punktu ruchu detektora obrazu.
- 

## C.2 Dane techniczne dotyczące zastosowania mobilnego

Następujące specyfikacje dotyczą tylko użytkownika mobilnego. Wszystkie pozostałe specyfikacje zawiera punkt [Specyfikacje](#) na stronie 175.

### C.2.1 Limity wstrząsów i wibracji

*Limit wibracji*

*Maksymalnie 0,30 G (od 2 Hz do 200 Hz) mierzone w punkcie, w którym system jest zamocowany do pojazdu.*

*Limit wstrząsów*

*Maksymalnie 1,0 G (impuls w postaci 1/2 sinusoidy) mierzone w punkcie, w którym system jest zamocowany do pojazdu. Zalecany jest pojazd z zawieszeniem pneumatycznym.*

### C.2.2 Otoczenie pojazdu

#### Otoczenie eksploatacyjne

*Zakres temperatur*

*Od 20°C (68°F) do 30°C (86°F)*

*Zakres wilgotności względnej*

*Od 20% do 80% bez kondensacji*

#### Otoczenie bez eksploatacji / transportowe

*Zakres temperatur*

*Od 10°C (50°F) do 35°C (95°F) przez maksymalnie 12 godzin*

*Od 10°C (50°F) do 30°C (86°F) przez nieograniczony czas*

*Maksymalne tempo zmian temperatury*

*< 10°C/godz.*

*Zakres wilgotności względnej*

*Od 10% do 80% bez kondensacji*



## **C.3 Wejściowe parametry elektryczne**

### **C.3.1 Gantry**

<i>Napięcie w sieci zasilającej</i>	<i>200/209/220/230/240 VAC ±10%</i>
<i>Impedancja sieci zasilającej</i>	<i>Maksymalna impedancja linii nie powinna przekraczać 0,20 oma dla 208/220/230/240 VAC, 0,16 oma dla 200 VAC</i>
<i>Częstotliwość sieci zasilającej</i>	<i>50/60 Hz ±5%</i>
<i>Prąd średni w ciągu 24 godzin</i>	<i>&lt; 5 A</i>
<i>Szczytowy prąd na linii</i>	<i>4 A (65 A maksymalnie przez 3 sekundy)</i>

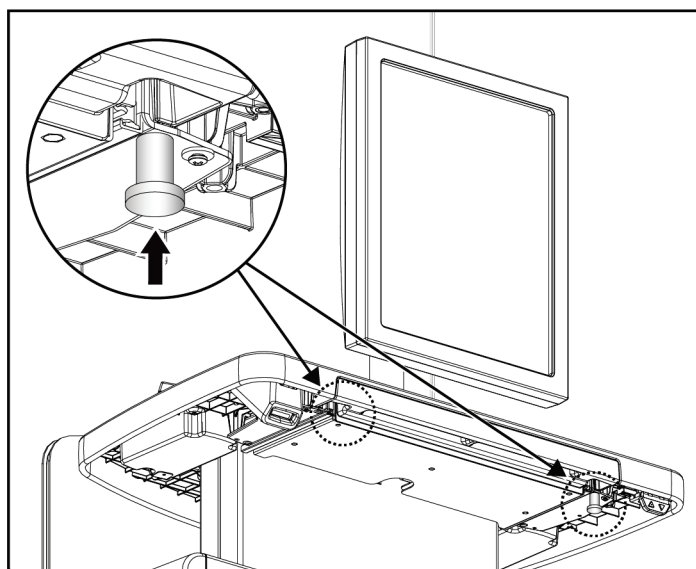
### **C.3.2 Stacja robocza akwizycji**

<i>Napięcie w sieci zasilającej</i>	<i>100/120/200/208/220/230/240 VAC ±10%</i>
<i>Częstotliwość sieci zasilającej</i>	<i>50/60 Hz ±5%</i>
<i>Pobór mocy</i>	<i>&lt; 1000 watów</i>

#### C.4 Przygotowanie systemu do transportu


Przed przewiezieniem wykonać następujące czynności:

1. Obrócić ramię C do 0 stopni (pozycja CC).
2. Opuścić ramię C do najniższej pozycji.
3. Wyłączyć system poprzez interfejs użytkownika.
4. Umieścić mysz na stoliku na klawiaturę.
5. Zablokować stolik na klawiaturę (patrz poniższe ilustracje):
  - a. Zamknąć stolik.
  - b. Znaleźć pokrętło blokady pod stolikiem.




Rycina 107: Pokrętło blokady stolika na klawiaturę (prawa lub lewa strona)

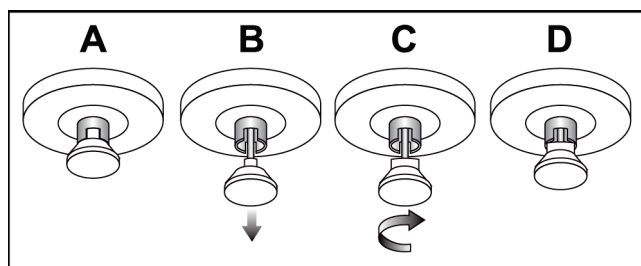- c. Obrócić pokrętło blokady o 90°, aż wpasuje się w blokadę. Pozycja A na poniższej ilustracji przedstawia pozycję zablokowaną.




Rycina 108: Zwolnienie blokady stolika z pozycji zablokowanej (A) do odblokowanej (D)

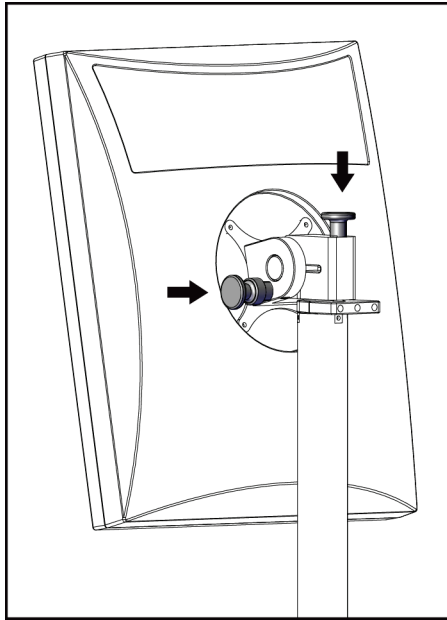6. Zablokować monitor obrotowy za pomocą pokręteł (patrz poniższe ilustracje).



Rycina 109: Pokrętła blokady monitora obrotowego na mobilnej uniwersalnej stacji roboczej akwizycji (seria I)

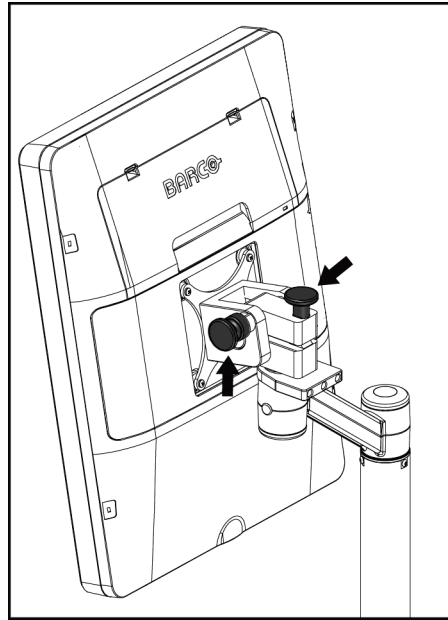


Rycina 110: Pokrętła blokady monitora obrotowego na mobilnej uniwersalnej stacji roboczej akwizycji (seria II)

7. Obniżyć powierzchnię roboczą do wysokości minimalnej.
8. Usunąć wszystkie akcesoria systemu.
9. Odłożyć wszystkie akcesoria, aby przechować je w bezpiecznym miejscu.


## C.5 Przygotowanie systemu do użytkowania

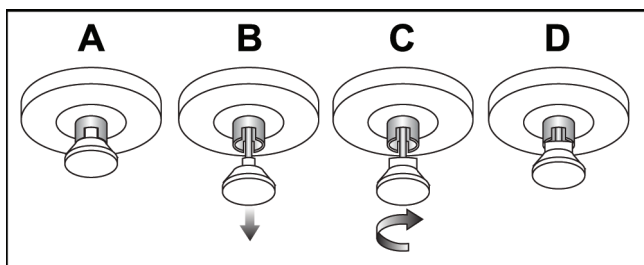1. Odblokuj szufladę klawiatury:
  - a. Znajdź pokrętło blokady pod stolikiem.
  - b. Pociągnij pokrętło w dół.
  - c. Obróć pokrętło o 90°. To ustawienie utrzymuje zasuwkę otwartą. Pozycja D na poniższej ilustracji pokazuje położenie odblokowane.




Rycina 111: Zwolnienie blokady stolika z pozycji zablokowanej (A) do odblokowanej (D)

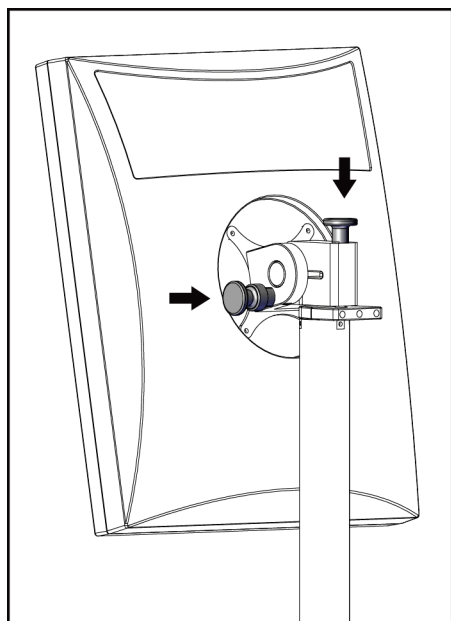2. W razie potrzeby wysuń szufladę.
3. W przypadku mobilnej uniwersalnej stacji roboczej akwizycji, odblokuj monitor obracany (patrz poniższe ryciny).



Rycina 112: Pokrętła blokady monitora obrotowego na mobilnej uniwersalnej stacji roboczej akwizycji (seria I)

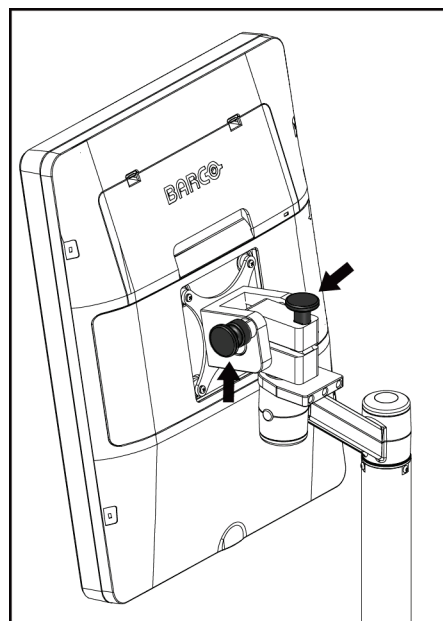

Rycina 113: Pokrętła blokady monitora obrotowego na mobilnej uniwersalnej stacji roboczej akwizycji (seria II)

## **C.6 Testowanie systemu po przewozie**

### **C.6.1 Testy elementów sterujących i funkcjonalne systemu mobilnego**

Aby sprawdzić stan układów mechanicznych systemu mobilnego, wykonaj testy elementów sterujących i testy funkcjonalne. Patrz: [Wykonywanie testów funkcjonalnych](#) na stronie 42.

- Kompresja w górę / w dół
- Zwalnianie kompresji
- Obrót ramienia C
- Ramię C w górę / w dół
- Pomińnięcie kolimatora
- Lampa do pola świetlnego
- System przesuwania płytki
- Wyłączniki awaryjne

Po każdej zmianie lokalizacji systemu mobilnego należy wykonać testy elementów sterujących i funkcjonalne.

### **C.6.2 Kontrola jakości dla systemów mobilnych**

Aby sprawdzić funkcje systemu mobilnego, wykonaj następujące testy kontroli jakości:

- Ocena artefaktów
- Pomiar SNR/CNR
- Ocena obrazu fantomu
- Grubość po kompresji

Po każdej zmianie lokalizacji systemu mobilnego należy wykonać testy kontroli jakości.



## Załącznik D Informacje o dawce

### D.1 Tabele dawek EUREF



#### Uwagi

Niniejsze informacje mają zastosowanie wyłącznie w Unii Europejskiej.  
Poniższe wartości dotyczą tabel dawek domyślnych.

Poniższe tabele pokazują typowe wartości dawek podczas użytkowania systemu w trybach obrazowania 2D i BT. W przypadku wszystkich wartości dawek obowiązuje tolerancja  $\pm 30\%$ . Tabele są zgodne z procedurami określonymi w *European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis, Fourth edition* (Europejskie wytyczne dotyczące zapewniania jakości w badaniach przesiewowych i diagnozowaniu raka piersi): sekcja **2a.2.5.1 Dosimetry** (Dozymetria) oraz **Appendix 5: Procedure for determination of average glandular dose** (Załącznik 5: Procedura określania średniej dawki gruczołowej).

Tabela 28: Dawka 2D (EUREF)

Fantom	cm	kV	Anoda	Filtr	Dawka EUREF (mGy)
2,0 cm PMMA	2,1	25	W	0,05 mm Rh	0,55
3,0 cm PMMA	3,2	26	W	0,05 mm Rh	0,75
4,0 cm PMMA	4,5	28	W	0,05 mm Rh	1,05
4,5 cm PMMA	5,3	29	W	0,05 mm Rh	1,42
5,0 cm PMMA	6	31	W	0,05 mm Rh	2
6,0 cm PMMA	7,5	31	W	0,05 mm Ag	2,7
7,0 cm PMMA	9	34	W	0,05 mm Ag	3,1

Tabela 29: Dawka BT (EUREF)

Fantom	cm	kV	Anoda	Filtr	Dawka EUREF (mGy)
2,0 cm PMMA	2,1	26	W	0,7 mm Al	1
3,0 cm PMMA	3,2	28	W	0,7 mm Al	1,15
4,0 cm PMMA	4,5	30	W	0,7 mm Al	1,5
4,5 cm PMMA	5,3	31	W	0,7 mm Al	2,00
5,0 cm PMMA	6	33	W	0,7 mm Al	2,5
6,0 cm PMMA	7,5	36	W	0,7 mm Al	3,9
7,0 cm PMMA	9	42	W	0,7 mm Al	5,15

Tabela 30: Dawka CEDM (EUREF)

Fantom	cm	kV	Anoda	Filtr	Dawka EUREF (mGy)
2,0 cm PMMA	2,1	26/45	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	0,83
3,0 cm PMMA	3,2	26/45	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	1,1
4,0 cm PMMA	4,5	28/45	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	1,6
4,5 cm PMMA	5,3	29/49	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	2,1
5,0 cm PMMA	6	31/49	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	3,0
6,0 cm PMMA	7,5	32/49	W	0,05/0,3 mm Ag/Cu	4,1
7,0 cm PMMA	9	33/49	W	0,05/0,3 mm Ag/Cu	4,7

## D.2 Tabela CNR EUREF



### Uwagi

Niniejsze informacje mają zastosowanie wyłącznie w Unii Europejskiej. Poniższe wartości dotyczą tabel dawek domyślnych.

Poniższa tabela zawiera typowe wartości CNR w przypadku użytkowania systemu z opcją Hologic Clarity HD™ lub trybem BT z 15 projekcjami i standardową rozdzielczością. W przypadku wszystkich wartości CNR obowiązuje tolerancja  $\pm 25\%$ . Dane podane w tabeli zarejestrowano zgodnie z procedurą podaną w protokole *European Protocol for the Quality Control of the Physical and Technical Aspects of Digital Breast Tomosynthesis Systems* (Europejski protokół kontroli jakości fizycznych i technicznych aspektów cyfrowych systemów tomosyntezy piersi): sekcja **2.4 AEC Performance** (Wydajność AEC).

Fantom	Hologic Clarity HD	Rozdzielczość standardowa
2,0 cm PMMA	3,2	6,0
3,0 cm PMMA	2,5	4,7
4,0 cm PMMA	2,1	4,0
4,5 cm PMMA	2,1	4,0
5,0 cm PMMA	2,0	3,7
6,0 cm PMMA	1,9	3,5
7,0 cm PMMA	1,6	2,9



## Glosariusz terminów

### ACR

Amerykańskie Towarzystwo Radiologiczne (ang. American College of Radiology).

### Adnotacje

Oznaczenia graficzne lub tekstowe na obrazie służące do wskazania obszaru zainteresowania.

### AEC

Automatyczna kontrola ekspozycji (ang. Automatic Exposure Control).

### BT

Tomosynteza piersi (ang. Breast Tomosynthesis). Procedura obrazowania, która zapewnia informacje o piersi w trzech wymiarach.

### CEDM

Mammografia CEDM (ang. Contrast Enhanced Digital Mammography).

### C-View

Licencjonowana funkcja firmy Hologic, która polega na tym, że obraz mammografii cyfrowej (DM) jest generowany z danych zarejestrowanych podczas skanu tomosyntezy piersi (BT).

### DBT

Cyfrowa tomosynteza piersi

### Detektor obrazu

Zespół detektora promieniowania RTG, siatki przeciwrozproszeniowej oraz osłony z włókna węglowego.

### DICOM

Norma obrazowania cyfrowego i wymiany obrazów w medycynie (ang. Digital Imaging and Communications in Medicine).

### DM

Mammografia cyfrowa (ang. Digital Mammography) (2D).

### EMC

Zgodność elektromagnetyczna (ang. Electromagnetic Compatibility).

### FDA

Agencja Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration) (w Stanach Zjednoczonych).

### Identyfikator UDI

Program amerykańskiej agencji Food and Drug Administration przeznaczony do jednoznacznej identyfikacji urządzeń (ang. Unique Device Identification). Więcej informacji o UDI można znaleźć na stronie <http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/UniqueDeviceIdentification/UDIBasics/default.htm>.

### Intelligent 2D

Licencjonowana funkcja firmy Hologic, która polega na tym, że obraz mammografii cyfrowej (DM) w wysokiej rozdzielczości jest generowany z danych zarejestrowanych podczas skanu tomosyntezy piersi (BT) w wysokiej rozdzielczości.

### I-View

Licencjonowana funkcja mammografii 2D Contrast Enhanced Digital Mammography.

### Kolimator

Urządzenie w lampie rentgenowskiej przeznaczone do kontrolowania obszaru ekspozycji na wiązkę promieniowania RTG.

### Mammografia klasyczna

Obrazy radiograficzne pojedynczej projekcji widoków przeznaczonych do badań przesiewowych i diagnostycznych.

### MPPS

Etap procedury wykonywany przez modalność (ang. Modality Performed Procedure Step).

### MQSA

Amerykańska ustawa Mammography Quality Standards Act.

### **Obraz projekcji**

Jeden z grupy obrazów tomosyntezy piersi zarejestrowany przy innym kącie projekcji i używany do wygenerowania obrazu po rekonstrukcji.

### **Oczekiwanie (ang. Pend)**

Działanie podejmowane względem obrazu w celu oznaczenia obrazu, jeśli technolog nie ma pewności co do jakości obrazu (obrazy oznaczone jako oczekujące muszą zostać zaakceptowane lub odrzucone przed zamknięciem procedury).

### **Odzyskiwanie**

Automatyczne usuwanie obrazów pacjentów i powiązanych informacji, aby zwolnić pamięć na nowo rejestrowane obrazy pacjentów.

### **PACS**

System archiwizacji obrazu i komunikacji (ang. Picture Archiving and Communications System). Komputerowy i sieciowy system, który przesyła i archiwizuje cyfrowe obrazy medyczne.

### **Płytki FAST**

Płytki do trybu FAST (ang. Fully Automatic Self-adjusting Tilt).

### **RF**

Częstotliwość radiowa (ang. Radio Frequency).

### **ROI**

Obszar zainteresowania (ang. Region of Interest).

### **Siatka**

Element cyfrowego detektora obrazu, który redukuje promieniowanie rozproszone podczas ekspozycji.

### **SID**

Odległość źródło-obraz (ang. Source to Image Distance).

### **Tomosynteza**

Procedura obrazowania, która łączy szereg obrazów piersi zarejestrowanych pod różnymi kątami. Obrazy tomosyntezy mogą być

poddawane rekonstrukcji w celu zaprezentowania płaszczyzn ogniskowania (warstw) w piersi.

### **UPS**

Zasilacz bezprzerwowy (ang. Uninterruptible Power Supply).

### **USB**

Uniwersalna magistrala szeregową (ang. Universal Serial Bus).

### **Uwaga**

Adnotacje i komentarze dotyczące obrazu przesyłane między stacją roboczą do przeglądów diagnostycznych, stacją roboczą technologa a stacją roboczą akwizycji.

## Indeks

### A

- About (Informacje o) (stacja robocza akwizycji), ekran - 150
- administrator, ekran
  - About (Informacje o) (stacja robocza akwizycji), ekran - 150
  - Admin (Administrator), przycisk - 68
- akceptowanie obrazów - 93, 95, 160
- akceptowanie odrzuconych obrazów - 95
- akcesoria - 117
  - instalacja ramienia C - 117
  - osłony twarzy - 118
  - statyw do powiększeń - 128
  - urządzenia celownicze - 130
- akwizycja obrazów - 93
- alerty - 185
- analiza
  - obrazy - 103
  - odrzucony obraz - 95
- archiwizacja - 85
- Automatyczna kontrola ekspozycji (ang. Automatic Exposure Control).
  - położenie czujnika - 31
  - przyciski - 31
- automatyczne zawieszanie, automatyczne parowanie - 153
- automatyczny obrót - 47, 49

### B

- bezpieczeństwo
  - informacje ogólne - 18, 19
  - promieniowanie - 19
  - uszkodzenie sprzętu - 19
  - utrata danych - 19
- bezpieczeństwo radiacyjne - 19

### C

- chowana osłona twarzy
  - instalacja - 118
  - użytkowanie - 119
- cyberbezpieczeństwo, oświadczenie - 12

### D

- dodawanie
  - nowy pacjent - 61
  - procedura - 75
  - widok - 77
- drukowanie - 88

### E

- edycja
  - informacje o pacjencie - 62
  - widok - 78
- ekran procedury - 69
- ekrany
  - dodawanie nowego pacjenta - 61
  - dodawanie widoku - 77
  - filtr, informacje o pacjencie - 65
  - Wybór funkcji do wykonania - 53
  - zapytanie - 67
- ekspozycja
  - parametry - 92
  - techniki, ustawianie - 92
- elementy sterujące
  - hamulec kompresji - 41
  - kompresja - 33
  - lampa do pola świetlnego - 50
  - pokrętła - 31
  - pominięcie kolimatora - 50
  - przełączniki nożne, stacja robocza akwizycji - 33
  - ramię C - 32, 33
  - statyw lampy i gantry - 30
  - system - 29
  - wskaźniki - 29

### F

- filtr, karta - 66
  - inne funkcje - 66
- filtr, opcje informacji - 65
- funkcja, wybór do wykonania - 53

### G

- głowica lampy, wyświetlacz - 31
- grupy wyjściowe, wybieranie - 81
- grupy wyjściowe, zarządzanie - 107

### I

Implant Present (Obecny implant), przycisk - 71  
informacje o dawce - 197  
    tabele dawek EUREF - 197  
instalacja  
    chowana osłona twarzy - 118  
    klasyczna osłona twarzy - 120  
    lokalizacyjne urządzenie celownicze - 130  
    płytki kompresyjne - 125  
    Statyw do powiększeń - 128  
    urządzenia celownicze do powiększeń - 131  
Intelligent 2D - 5  
interfejs użytkownika - 53  
I-View  
    ustawienia I-View - 113

### K

kalibrację, przeprowadzanie - 53  
karta animacji - 106  
karta generator, ustawianie techniki - 92  
karta komentarzy - 106  
karta Notices (Uwagi) - 106  
karta ROI - 106  
karty  
    filtr, kolumna - 66  
klasyczna osłona twarzy, instalacja - 120  
kolimator  
    pominięcie - 50  
kolumny, karta - 67  
kompresja  
    elementy sterujące i wyświetlacze - 31  
    specyfikacje - 179  
    tryb kompresji FAST - 126  
komunikaty i alerty - 185  
konserwacja  
    ogólne - 141  
kontrast 2D  
    ustawienia kontrastu 2D - 113

### L

lampa do pola świetlnego  
    użytkowanie - 135  
laserowa drukarka do klisz, wymagania dotyczące  
    izolacji - 19

lista robocza, zapytanie - 67  
lokalizacja igły - 137  
lokalizacyjne urządzenie celownicze  
    instalowanie i usuwanie - 130  
    użytkowanie - 131  
    wyrównanie - 132

### N

na żądanie, urządzenia wyjściowe - 85  
narzędzia, przegląd obrazu - 104

### O

obraz oczekujący, akceptowanie lub odrzucenie -  
    95  
obrazy  
    akceptowanie - 93, 95, 160  
    analiza - 103  
    narzędzia przeglądowe - 80, 104  
    odrzucając - 93  
    opcje formatów wyjściowych - 107  
    tryb akwizycji - 92  
    zachowywanie - 93, 160  
obrót MLO - 49  
odrzucając obrazów - 93  
osłona twarzy - 118  
ostrzeżenia, przestrogi i uwagi - 19  
    definicja - 16  
oświadczenie dotyczące cyberbezpieczeństwa - 12

### P

pacjent  
    dodawanie - 61  
    edycja informacji - 62  
    filtr - 65  
    osłona twarzy - 118  
    otwieranie - 61  
    pozycja - 135  
    usuwanie - 65  
płytki  
    instalacja - 125  
    kompresja - 123  
    przesunięcie do nowego położenia - 71  
    przesuwanie - 31, 51, 71  
    usuwanie - 125  
płytki do powiększeń - 123

płytki kontaktowe - 123  
 płytki lokalizacyjne - 124  
 poziom okna - 104  
 procedura otwierania rekordu pacjenta - 61  
 procedury  
     dodawanie - 75  
 procedury kliniczne - 133  
 profile użytkowników - 10  
 promieniowanie RTG  
     pola kolimowane - 50  
 przełączniki nożne, stacja robocza akwizycji - 33  
 przepływ pracy, standardowy - 133  
 przesuwanie płytki - 51, 71  
 przycisk włączania/wyłączania - 29  
 przycisk zasilania - 29  
 przycisk zasilania komputera - 29  
 przyciski przesuwania płytki - 31  
 punktowe płytki kompresyjne - 123

## R

### Ramię C

automatyczny obrót - 47, 49  
 elementy sterujące i wskaźniki - 30, 32  
 gniazda na akcesoria - 117  
 obrót i ruch - 42  
 wyświetlacze - 31

## S

siła kompresji, zakres - 31  
 specyfikacje - 173  
     elektryczne - 177  
 Stacja robocza akwizycji  
     About (Informacje o) (stacja robocza akwizycji), ekran - 150  
     konserwacja - 143  
 Statyw do powiększeń - 128  
     instalowanie i usuwanie - 128  
 statyw lampy, elementy sterujące i wskaźniki - 30  
 system  
     administracja - 147  
     elementy sterujące zasilaniem - 29  
     komunikaty - 186  
     możliwości - 2  
     opis - 17  
 system mobilny

bezpieczeństwo - 189  
 przygotowanie do użytkowania - 194  
 specyfikacje - 190  
 testy po przewozie - 195  
 system przesuwania płytki - 51, 71

## T

testy funkcjonalne - 40  
     wyłącznik awaryjny - 23, 52  
 tryb kompresji FAST - 126  
 tryby akwizycji - 92

## U

urządzenia celownicze do powiększeń,  
     instalowanie i usuwanie - 131  
 urządzenia wyjściowe  
     grupy wyjściowe - 107  
     wyjście niestandardowe - 84  
 urządzenia wyjściowe, na żądanie - 85  
 ustawienia kontrastu - 113  
 usterki - 185  
 usuwanie  
     chowana osłona twarzy - 118  
     klasyczna osłona twarzy - 120  
     lokalizacyjne urządzenie celownicze - 130  
     płytki kompresyjne - 125  
     Statyw do powiększeń - 128  
     urządzenia celownicze do powiększeń - 131  
     widok - 77  
 usuwanie rekordu pacjenta - 65  
 utrata danych - 19

## W

widok  
     dodawanie - 77  
     edycja - 78  
 widoki przemieszczonego implantu - 77  
 wskaźniki - 29  
 wsparcie techniczne - 12  
 wsparcie techniczne Hologic - 141  
 wybór  
     grupy wyjściowe - 81  
     parametry ekspozycji - 92  
 wyjście niestandardowe - 84  
 Wylogowanie - 68

- wyłączanie systemu - 52
- wyłącznik
  - Gantry - 29
- wyłącznik awaryjny - 23, 29, 30
  - test funkcjonalny - 40
- wymagania
  - kontrola jakości - 11
  - szkolenia - 10
  - wymagane umiejętności - 10
- wymagania dotyczące kontroli jakości - 11
- wymagania dotyczące szkoleń - 10
- wymagania wstępne przed użytkowaniem systemu - 10
- wysyłanie obrazów do urządzeń wyjściowych - 107
- wyświetlacz
  - czyszczenie - 143
  - grubość - 31
  - poziom okna - 104
  - siła kompresji - 31

## Z

- zadania kontroli jakości, wykonywanie - 53
- zapytanie do listy roboczej - 67
- zarządzanie
  - grupy wyjściowe - 81
- zasilacz bezprzerwowy - 188



# HOLOGIC®



**Hologic, Inc.**  
36 Apple Ridge Road  
Danbury, CT 06810 USA  
1-800-447-1856

Kontakt w Brazylii:

**Imex Medical Group do Brasil**  
Rua das Embaúbas, 601  
Fazenda Santo Antônio  
São José/SC  
88104-561 Brasil  
+55 48 3251 8800  
[www.imexmedicalgroup.com.br](http://www.imexmedicalgroup.com.br)

EC	REP
----	-----

**Hologic BV**  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Belgium  
Tel: +32 2 711 46 80  
Fax: +32 2 725 20 87

**CE**  
**2797**