



10 Revise la imagen.





11 Archive o exporte las imágenes y, a continuación, cierre el paciente.

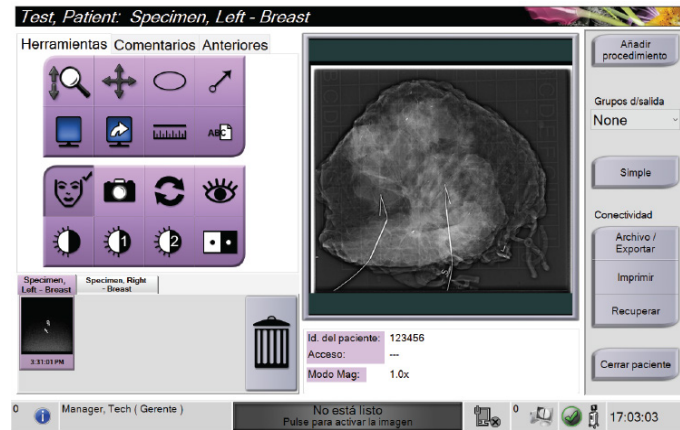

12 Retire la bandeja de muestras de la cabina de imágenes. Siga las normas del centro para el manejo de muestras.

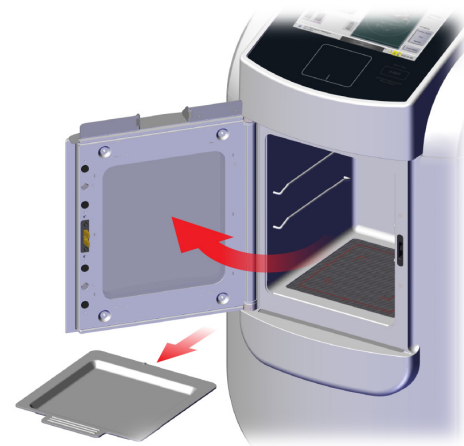

13 Apague el sistema.

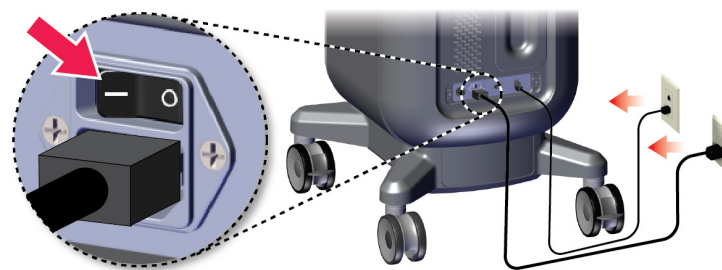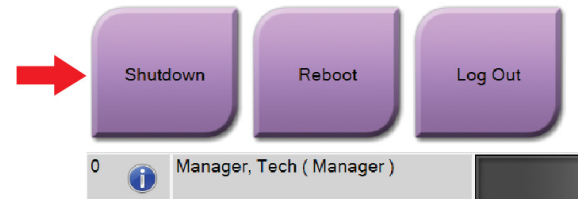

# Faxitron™ Trident® HD

Specimen Radiography System

## Guía de referencia rápida



- 1 Monitor de visualización de imágenes
- 2 Pantalla de control con panel táctil integrado y botón de activación de rayos X
- 3 Cabina de imágenes

**⚠** Consulte la guía de usuario para obtener información de seguridad e instrucciones completas.


1 Mueva la consola a la ubicación correcta.



2 Bloquee las ruedas pivotantes.



3 Conecte el sistema a la alimentación y la red.

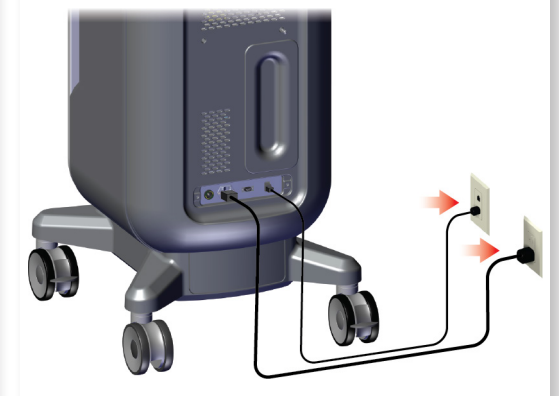

Hologic Inc.  
36 Apple Ridge Road  
Danbury, CT 06810 USA  
Tel: +1.877.371.4372

EC REP Hologic Ltd.  
Heron House Oaks Business Park  
Crewe Road  
Wythenshawe, Manchester  
M23 9HZ, UK  
Tel: +44 (0)161 946 2206



Brazilian Contact: Imex Medical Group do Brasil  
Rua das Embaúbas, 601- Fazenda  
Santo Antônio  
São José /SC - Brasil - 88104-561  
+55 48 3251-8800  
www.imexmedicalgroup.com.br

**HOLOGIC®**


Consulte el sitio web de la empresa para obtener información sobre mas representantes en todo el mundo.  
© 2019 Hologic, Inc. Impreso en los EE. UU. Este manual se escribió originalmente en inglés.

Hologic, Faxitron, Trident y los logotipos asociados son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Hologic, Inc. y/o de sus filiales en Estados Unidos y/u otros países. Todas las demás marcas comerciales, marcas comerciales registradas y nombres de productos son propiedad de sus respectivos propietarios. Este producto puede estar protegido por una o más patentes de Estados Unidos o extranjeras como se identifica en [www.Hologic.com/patents](http://www.Hologic.com/patents).


4 Inicie el sistema e inicie sesión.

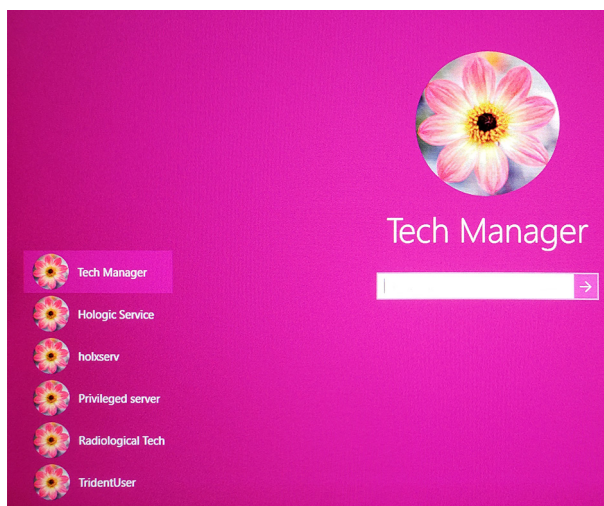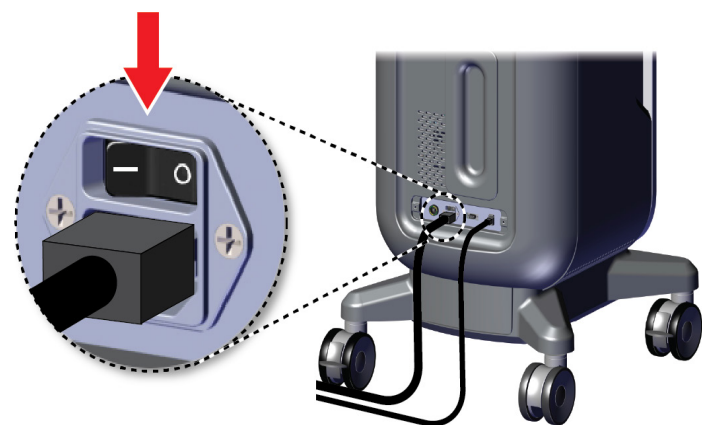


5 Seleccione el paciente y el procedimiento.

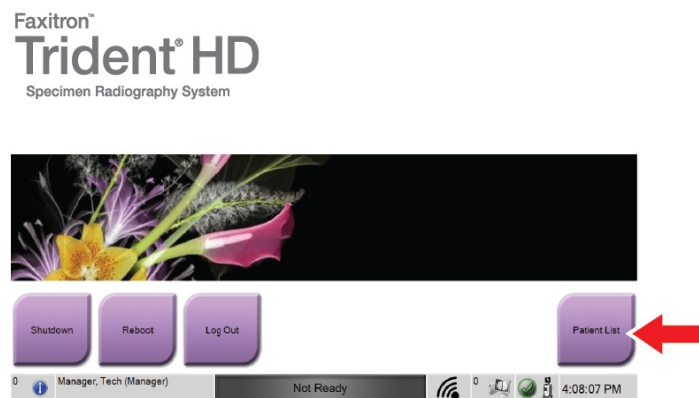


Nombre	Fecha de naci...	Examen
Patient patient*Test	08/04/1973	Specimen, Un...
Test*Patient	02/01/1965	Specimen, Left...
Patient*Test	04/02/1979	Specimen, Rig...
Test test*Patient	06/03/1962	Specimen, Left...

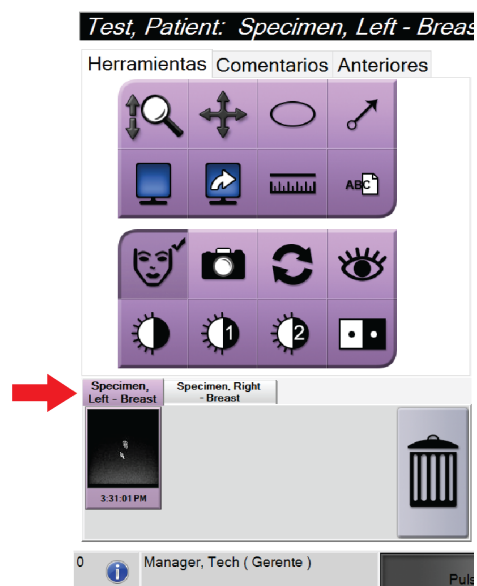


6 Prepare la muestra según las normas del centro y centre la bandeja de muestras.

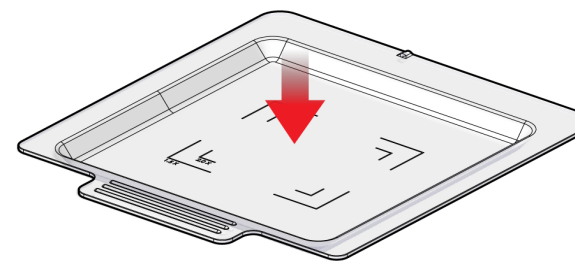

7 Coloque la bandeja de muestras en la cabina de imágenes para el nivel de aumento requerido.

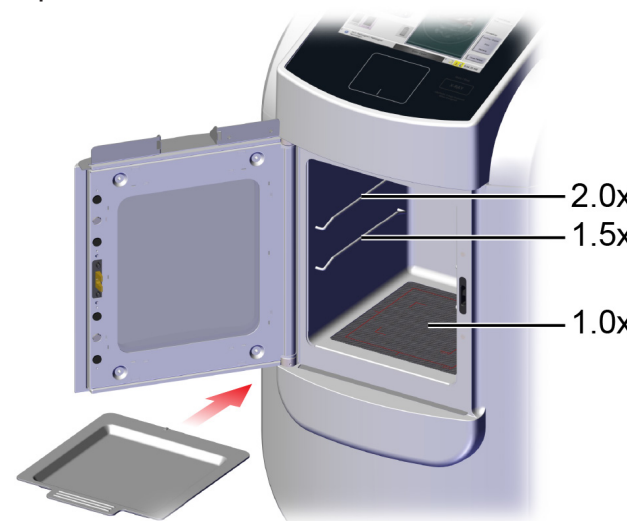

8 Cierre la puerta.

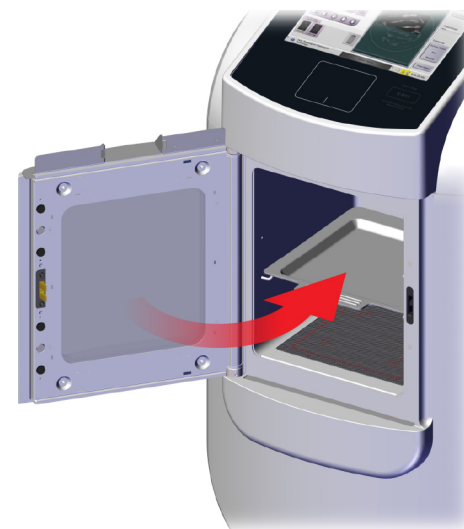

9 Adquiera la imagen.

