

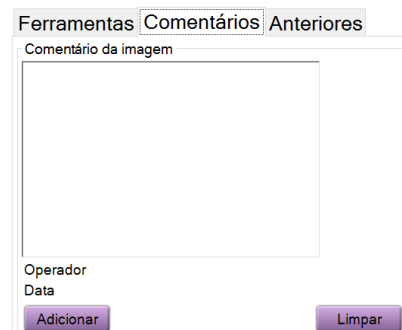
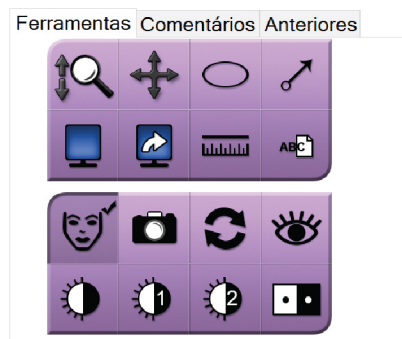



10 Revise a imagem.

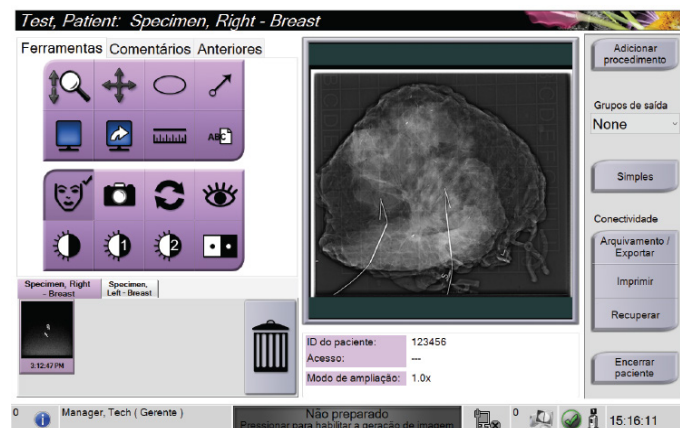




11 Arquive ou exporte as imagens, em seguida encerre o paciente.

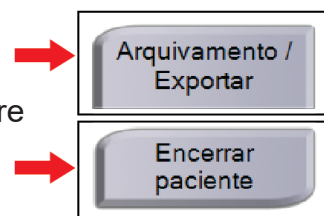

12 Remova a bandeja de amostras da cabine de imagem. Siga a política da instalação para manuseio de amostras.

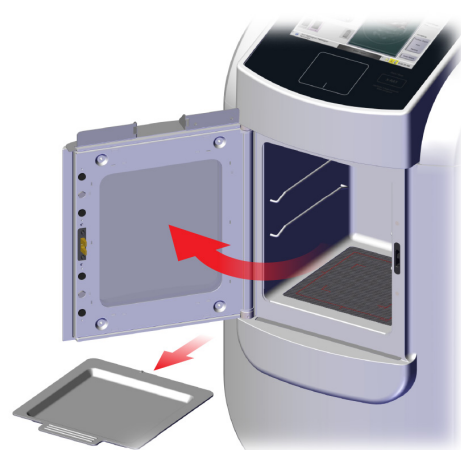

13 Desligue o sistema.

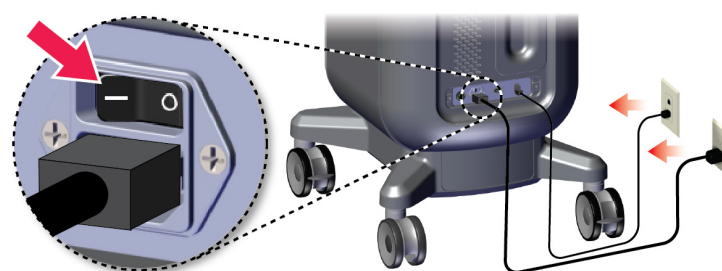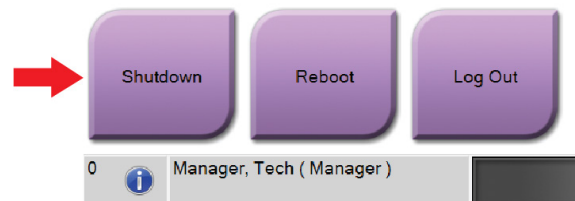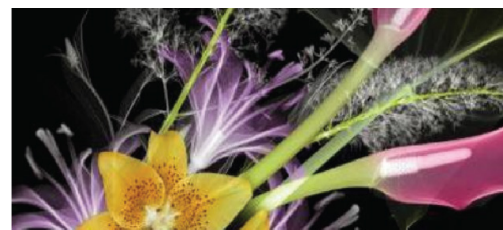

# Faxitron™ Trident® HD

Specimen Radiography System

## Guia de referência rápida



- 1 Monitor de exibição de imagem
- 2 Monitor de controle com Touch pad integrado e Botão de ativação de RAIOS X
- 3 Cabine de imagem

**⚠️ Consulte o Guia do Usuário para informações de segurança y instruções completas.**


1 Mova o console para a posição correta.



2 Trave os rodízios.



3 Conecte o sistema à energia e à rede.

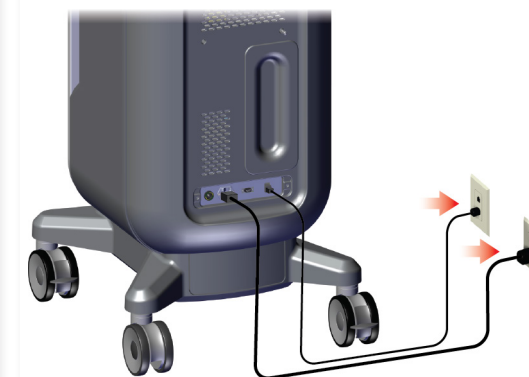

Hologic Inc.  
36 Apple Ridge Road  
Danbury, CT 06810 USA  
Tel: +1.877.371.4372

EC REP Hologic Ltd.  
Heron House Oaks Business Park  
Crewe Road  
Wythenshawe, Manchester  
M23 9HZ, UK  
Tel: +44 (0)161 946 2206



Contacto do Brasil: Imex Medical Group do Brasil  
Rua das Embaúbas, 601- Fazenda Santo Antônio  
São José /SC - Brasil - 88104-561  
+55 48 3251-8800  
www.imexmedicalgroup.com.br

**HOLOGIC®**


Visite o nosso website para obter informações sobre as nossas filiais no mundo todo.  
© 2019 Hologic, Inc. Impresso nos EUA. Este manual foi originalmente escrito em inglês.

Hologic, Faxitron, Trident e os logotipos associados são marcas e/ou marcas registradas da Hologic, Inc. e/ou suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou outros países. Todas as outras marcas, marcas registradas e nomes de produto são de propriedade de seus respectivos proprietários. Este produto pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA ou estrangeiras, conforme identificado em [www.Hologic.com/patents](http://www.Hologic.com/patents).

4 Inicie o sistema e conecte-se.

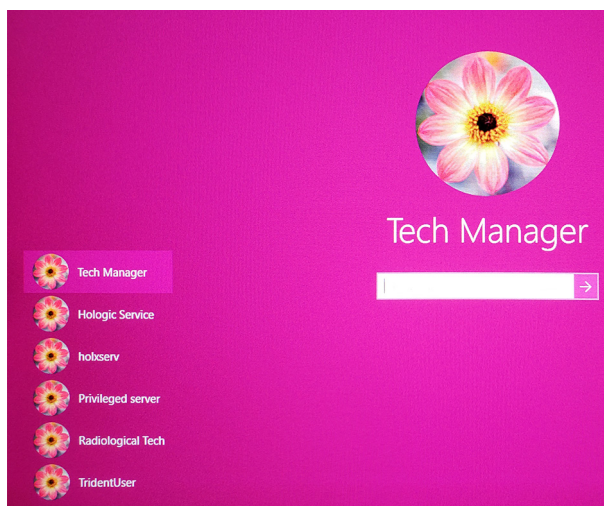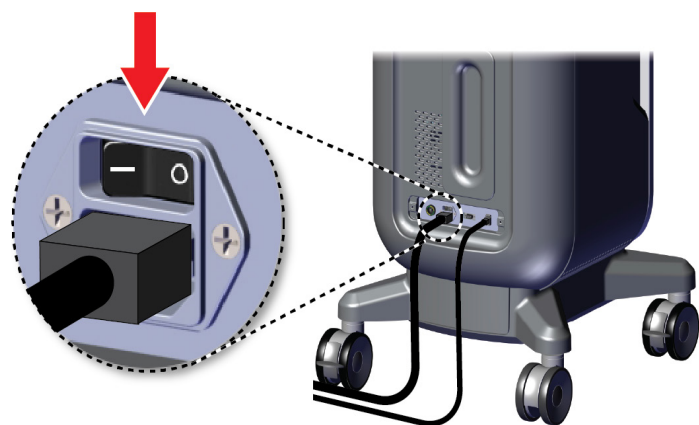


5 Seleccione o paciente e o procedimento.

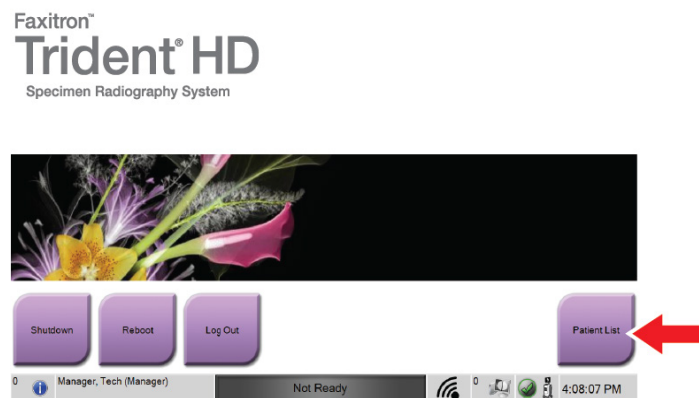


Nome	Data de nasci...	Exame
Patient^Test	04/02/1979	Specimen, Rig...
Test test^Patient	06/03/1972	Specimen, Left...
Patient patient^Test	08/04/1962	Specimen, Rig...
Test^Patient	02/01/1965	Múltiplo




6 Prepare a amostra de acordo com a política da instalação e centralize a bandeja de amostras.

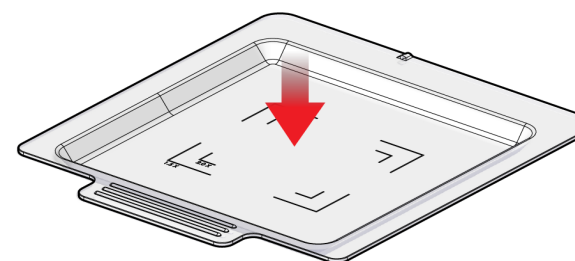

7 Posicione a bandeja de amostras na cabine de imagem para o nível de ampliação necessário.

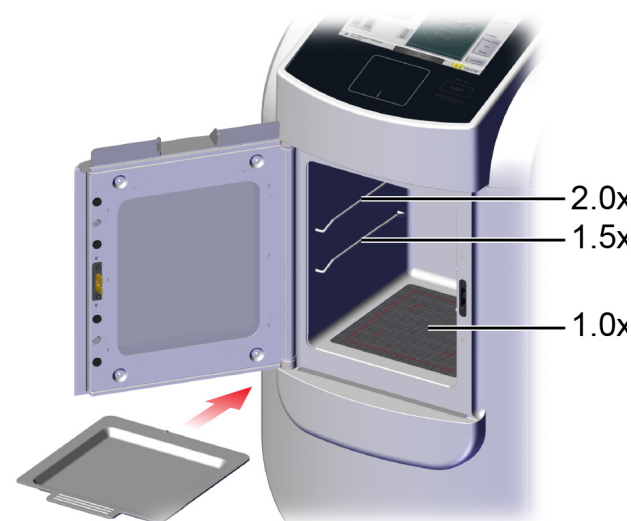

8 Feche a porta.

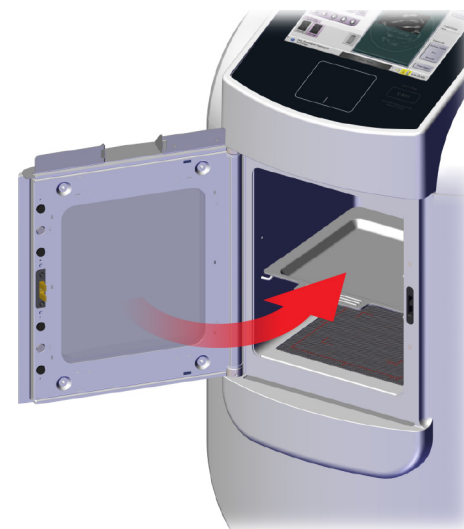

9 Adquira a imagem.

