



10 Revise la imagen.





11 Archive o exporte las imágenes y, a continuación, cierre el paciente.

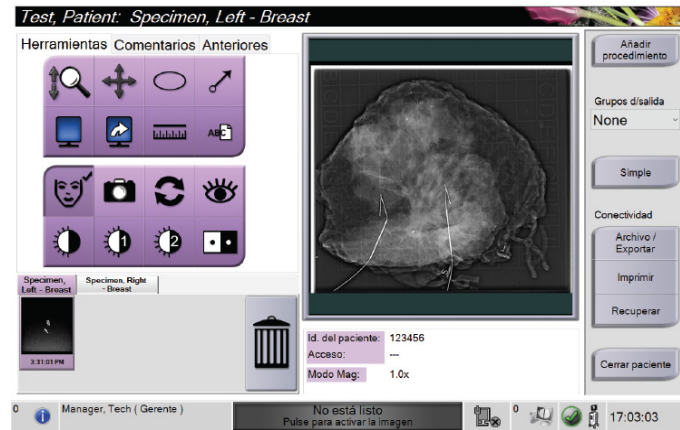

12 Retire la bandeja de muestras de la cabina de imágenes. Siga las normas del centro para el manejo de muestras.

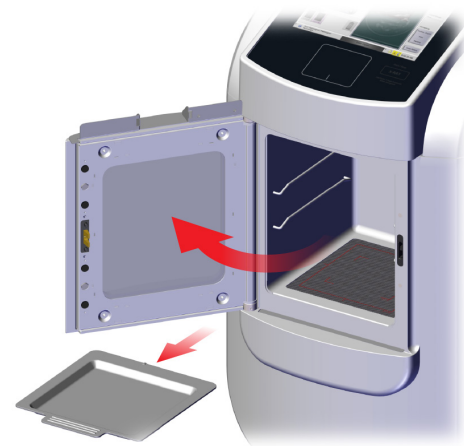

13 Apague el sistema.

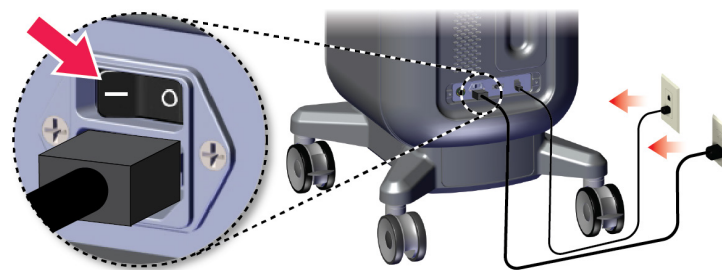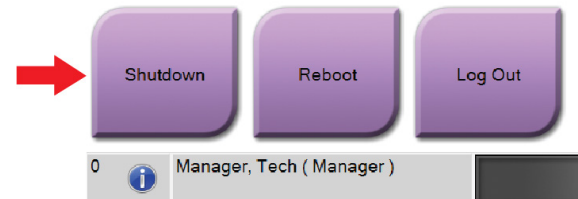

Faxitron™ Trident® HD

Specimen Radiography System

Guía de referencia rápida



- 1 Monitor de visualización de imágenes
- 2 Pantalla de control con panel táctil integrado y botón de activación de rayos X
- 3 Cabina de imágenes

! Consulte la guía de usuario para obtener información de seguridad e instrucciones completas.


1 Mueva la consola a la ubicación correcta.



2 Bloquee las ruedas pivotantes.



3 Conecte el sistema a la alimentación y la red.

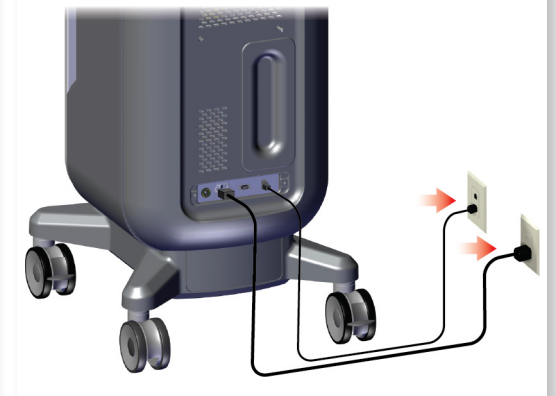

Hologic Inc.
36 Apple Ridge Road
Danbury, CT 06810 USA
Tel: +1.877.371.4372



Brazilian Contact: Imex Medical Group do Brasil
Rua das Embaúbas, 601- Fazenda
Santo Antônio
São José /SC - Brasil - 88104-561
+55 48 3251-8800
www.imexmedicalgroup.com.br

HOLOGIC®


Consulte el sitio web de la empresa para obtener información sobre mas representantes en todo el mundo.
© 2019 Hologic, Inc. Impreso en los EE. UU. Este manual se escribió originalmente en inglés.

Hologic, Faxitron, Trident y los logotipos asociados son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Hologic, Inc. y/o de sus filiales en Estados Unidos y/u otros países. Todas las demás marcas comerciales, marcas comerciales registradas y nombres de productos son propiedad de sus respectivos propietarios. Este producto puede estar protegido por una o más patentes de Estados Unidos o extranjeras como se identifica en www.Hologic.com/patents.


4 Inicie el sistema e inicie sesión.

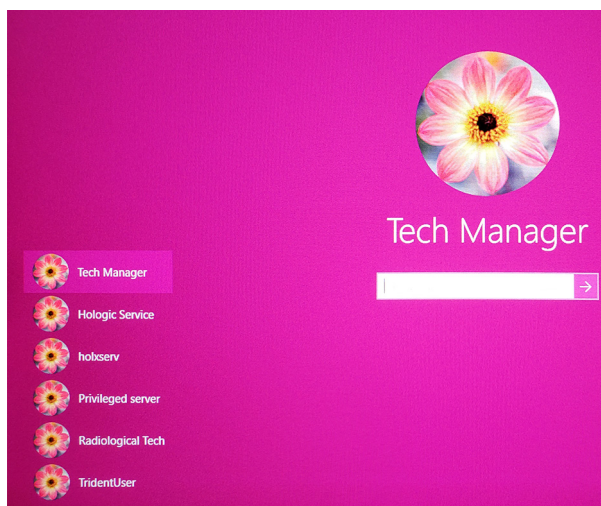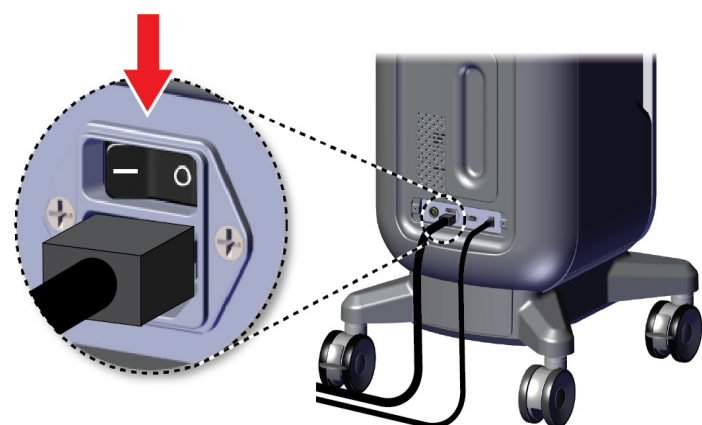


5 Seleccione el paciente y el procedimiento.

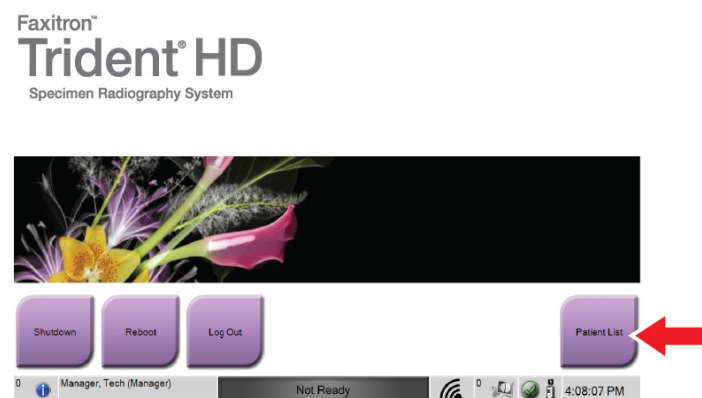


Nombre	Fecha de naci...	Examen
Patient patient*Test	08/04/1973	Specimen, Un...
Test*Patient	02/01/1965	Specimen, Left...
Patient*Test	04/02/1979	Specimen, Rig...
Test test*Patient	06/03/1962	Specimen, Left...

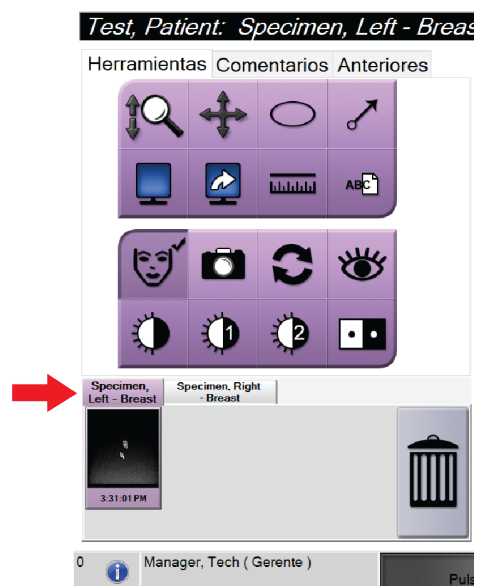


6 Prepare la muestra según las normas del centro y centre la bandeja de muestras.

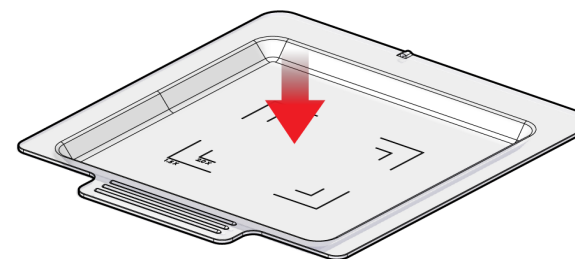

7 Coloque la bandeja de muestras en la cabina de imágenes para el nivel de aumento requerido.

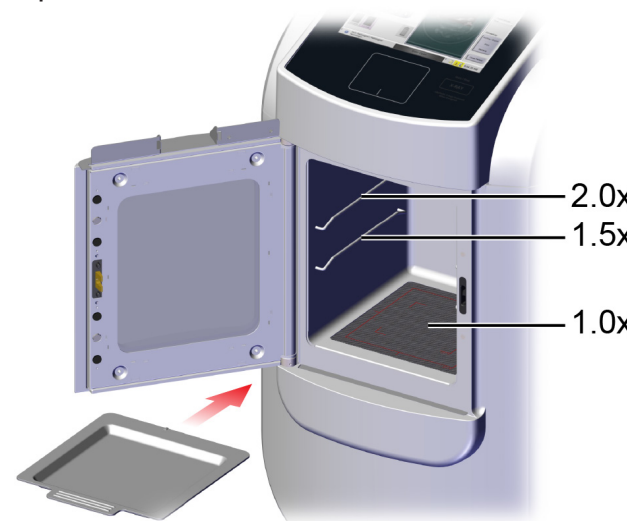

8 Cierre la puerta.

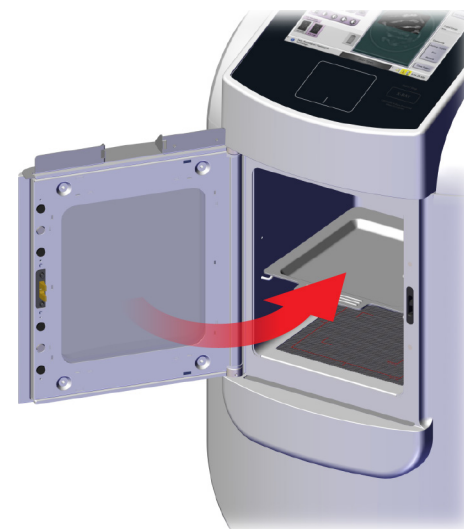

9 Adquiera la imagen.

