



10 Riesaminare l'immagine.

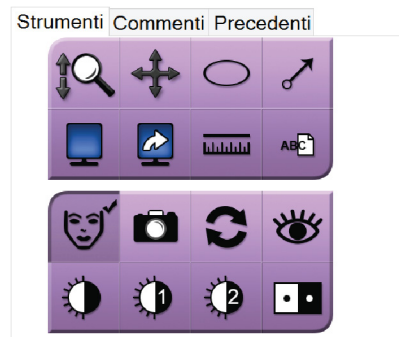


11 Archiviare o esportare le immagini, quindi chiudere la cartella paziente.



Archiviare o esportare le immagini, quindi chiudere la cartella paziente.

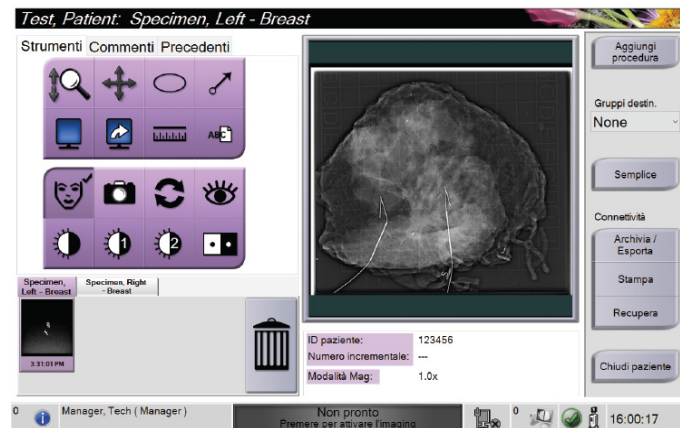

12 Rimuovere il vassoio portacampioni dall'unità di imagingografia. Seguire i criteri della struttura per la gestione dei campioni.

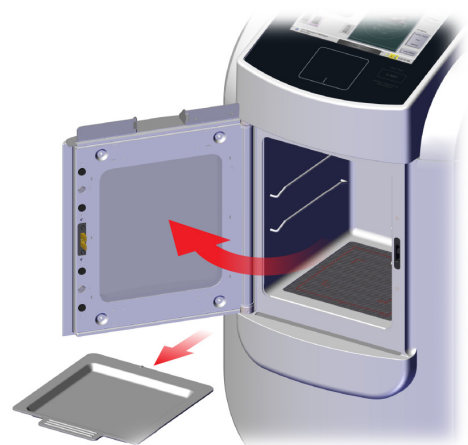

13 Spegner il sistema.

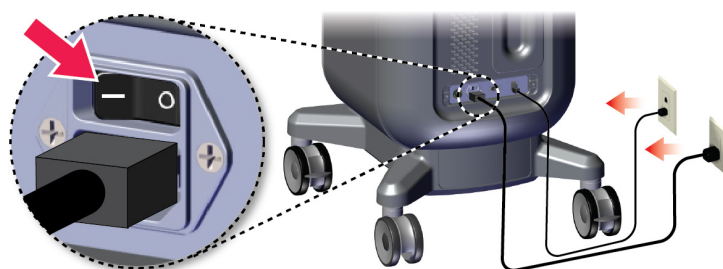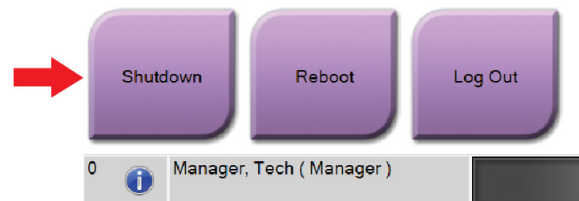

# Faxitron™ Trident® HD

Specimen Radiography System

## GUIDA RAPIDA DI RIFERIMENTO



- 1 Schermo di visualizzazione delle immagini
- 2 Display di comando con Touchpad integrato e Pulsante di attivazione dei raggi X
- 3 Unità di imagingografia

**! Per informazioni di sicurezza e istruzioni complete, consultare la Guida dell'utente.**


1 Spostare la console nella posizione corretta.



2 Bloccare le ruote.



3 Collegare il sistema all'alimentazione e alla rete.

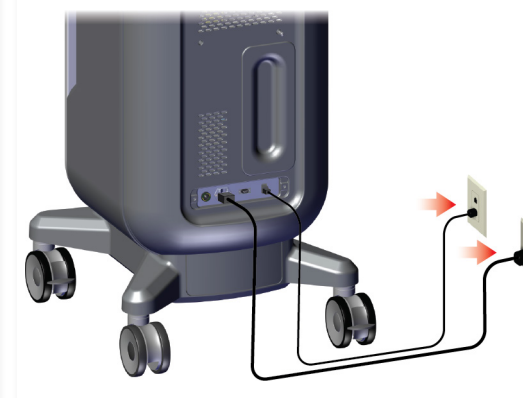

Hologic Inc.  
36 Apple Ridge Road  
Danbury, CT 06810 USA  
Tel: +1.877.371.4372



Brazilian Contact: Imex Medical Group do Brasil  
Rua das Embaúbas, 601- Fazenda Santo Antônio  
São José /SC - Brasil - 88104-561  
+55 48 3251-8800  
www.imexmedicalgroup.com.br

**HOLOGIC®**


Per ulteriori sedi in altri paesi consultare il sito Web della società.  
© 2019 Hologic, Inc. Stampato negli USA. Questo manuale è stato originariamente scritto in inglese.

Hologic, Faxitron, Trident e i logo associati sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Hologic, Inc., e/o delle sue sussidiarie negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi commerciali, marchi registrati e nomi di prodotto sono dei rispettivi titolari. Questo prodotto può essere protetto da uno o più brevetti statunitensi e/o di altri Paesi identificati sul sito Web [www.Hologic.com/patents..](http://www.Hologic.com/patents..)



4 Avviare il sistema ed effettuare il login.

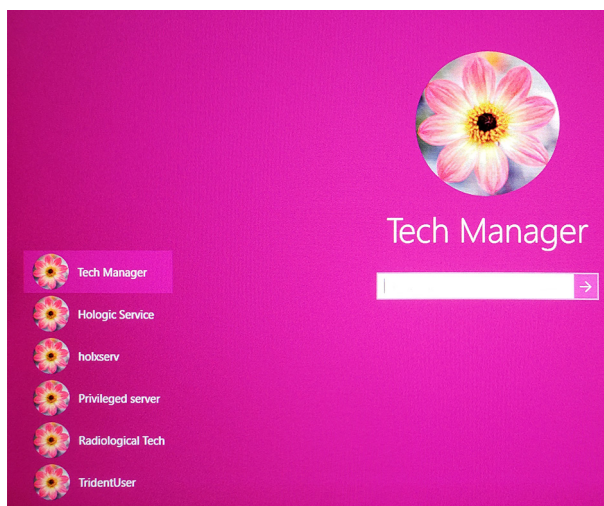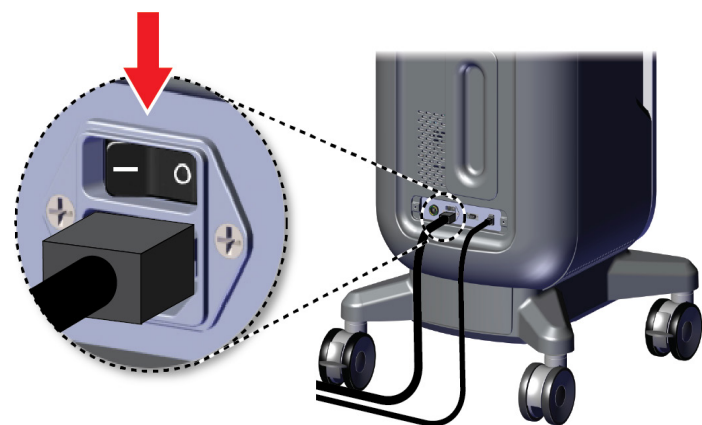


5 Selezionare paziente e procedura.

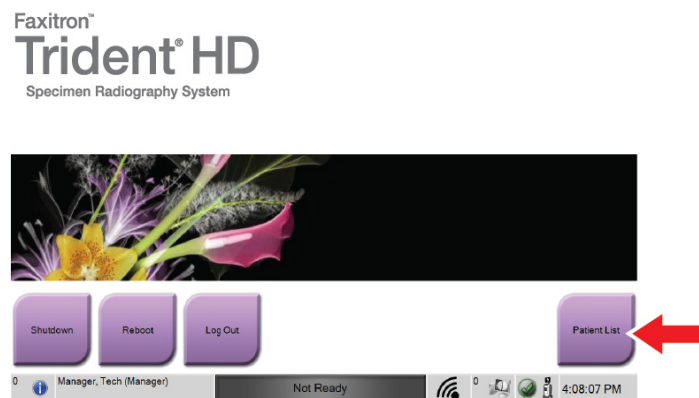


Nome	Data di nascita	Esame
Patient patient*Test	08/04/1973	Specimen, Un...
Test*Patient	02/01/1965	Specimen, Left...
Patient*Test	04/02/1979	Specimen, Rig...
Test test*Patient	06/03/1962	Specimen, Left...

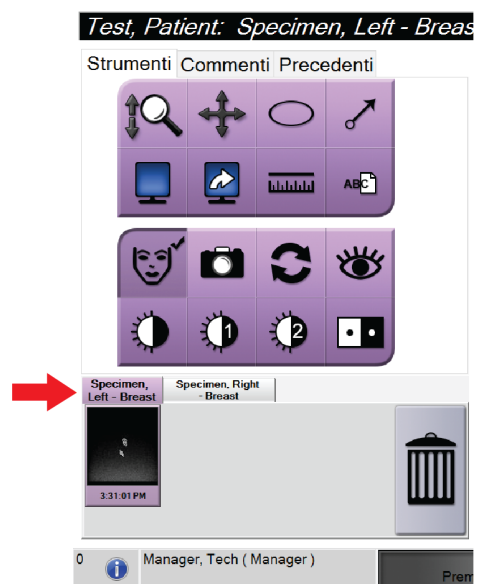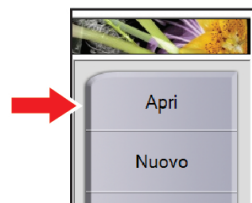


6 Preparare il campione conformemente ai criteri della struttura e centrarlo sul vassoio portacampioni.

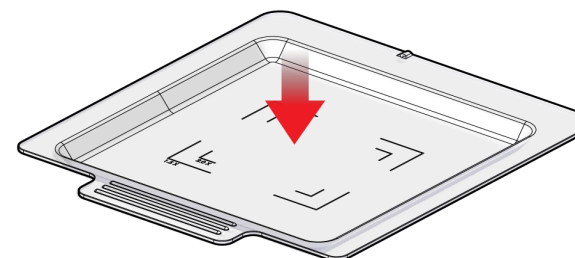

7 Posizionare il vassoio portacampioni nell'unità di immaginografia per ottenere il livello di ingrandimento richiesto.

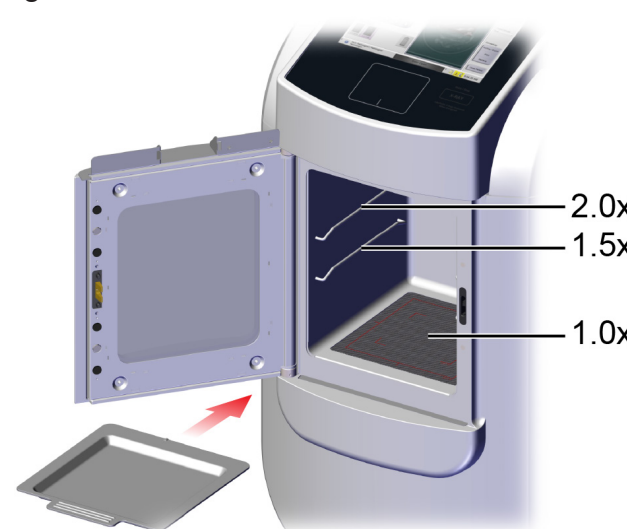

8 Chiudere lo sportello.

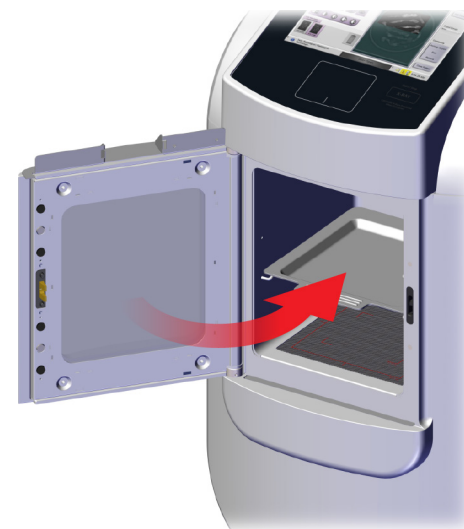

9 Acquisire l'immagine.

