

Guide d'installation rapide



Faxitron™ Path

Specimen Radiography System



Faxitron™ Path

Specimen Radiography System

VÉRIFIEZ LE CONTENU

Le système **Faxitron Path** est contenu dans **1 BOÎTE** :

CONTENU

Unité **Faxitron Path**

Guide de démarrage rapide **Faxitron Path**

1 x Moniteur de système avec support

1 x Ordinateur

1 x Câble de moniteur

1 x Clavier

1 x Souris

1 x Plateau d'agrandissement **Faxitron Path**

2 x Clés

1 x Câble USB

2 x Câbles réseau


3 x Cordons d'alimentation

1 x Clé USB d'installation du système
(Inclut le manuel de l'utilisateur)

Vérifiez que la boîte est arrivée sans dommage visible important pour chaque élément.

En cas de dommage, contactez l'équipe d'assistance **Hologic** :

+1 520 399 8139

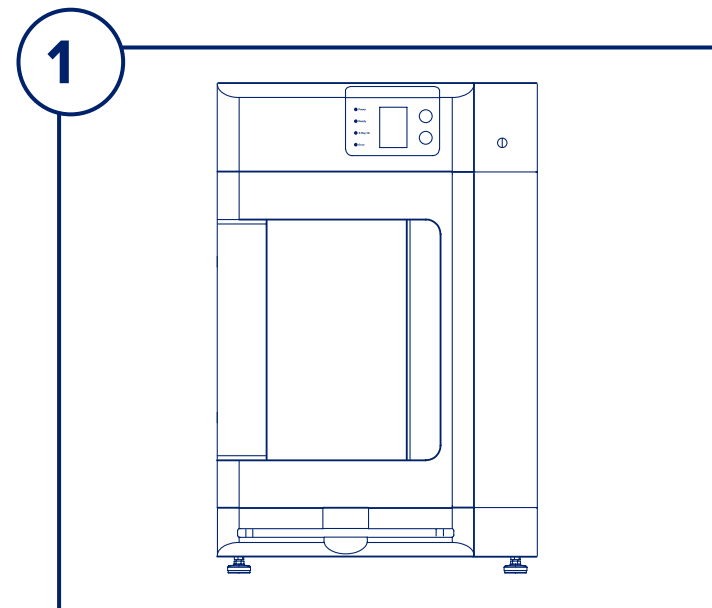


ÉTAPE UNE

Ouvrez la **CAISSE** et déballez l'unité.


Vérifiez si le **Faxitron Path** est endommagé (plastiques fissurés ou cassés, écran LCD endommagé, etc.).

L'unité pèse près de 500 lbs (230 kg). Demandez de l'aide pour sortir le PathVision de la caisse en toute sécurité et le placer à l'endroit souhaité.

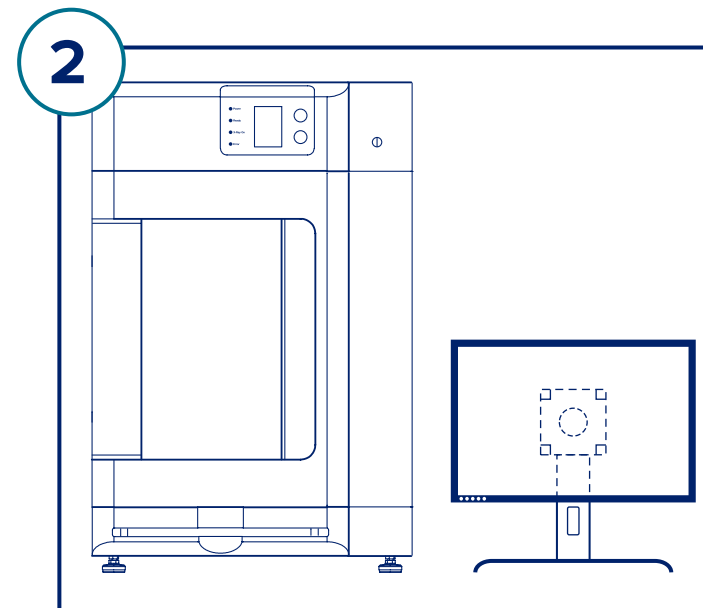

ÉTAPE DEUX


Retirez et déballez le moniteur et le support.

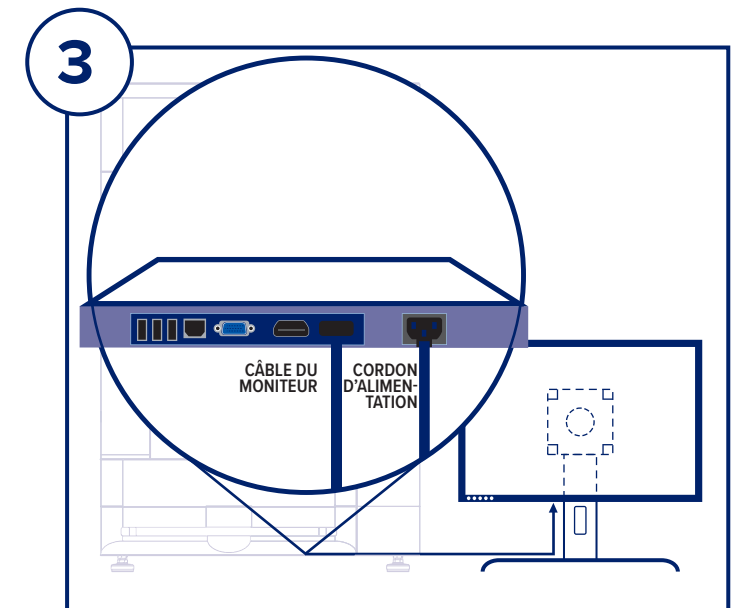

ÉTAPE TROIS


Ouvrez la porte du **Faxitron Path** et retirez le plateau d'agrandissement, l'ordinateur, le clavier et une petite boîte contenant des documents, des câbles, des cordons, des clés et une souris. Ouvrez la petite boîte et retirez tout son contenu. Déballez l'ordinateur et placez-le près de l'unité **Faxitron Path** et du moniteur.

Connectez le cordon d'alimentation et le câble du moniteur au moniteur. L'image illustrée est une approximation et peut varier légèrement.

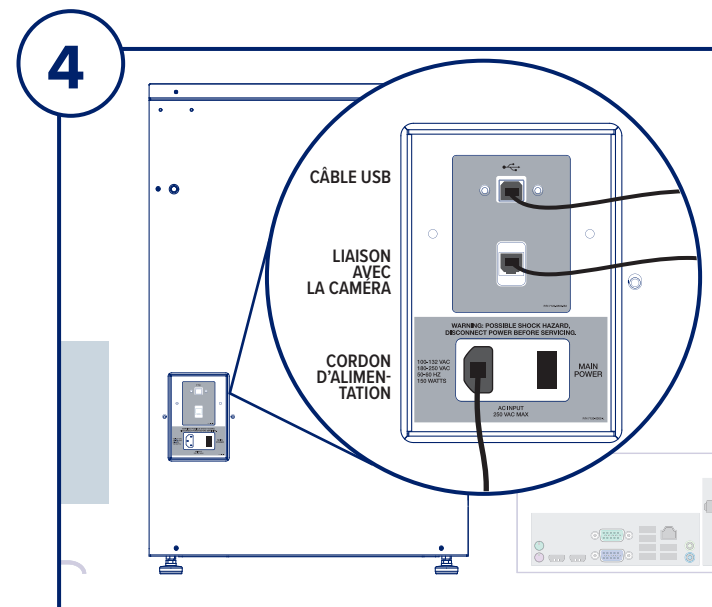

ÉTAPE QUATRE


Repérez le câble USB, le câble Ethernet et le cordon d'alimentation et connectez-les à l'arrière du **Faxitron Path**.

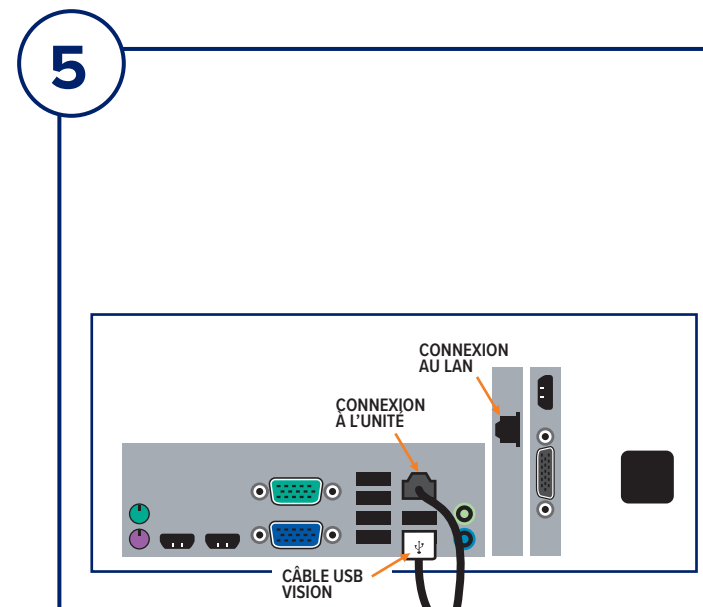

ÉTAPE CINQ

Connectez les autres extrémités des câbles USB et Ethernet à l'ordinateur.

Assurez-vous de brancher le câble USB dans le port comportant l'inscription « USB Vision », et connectez le câble Ethernet de l'unité au bon endroit sur l'ordinateur, comme illustré.

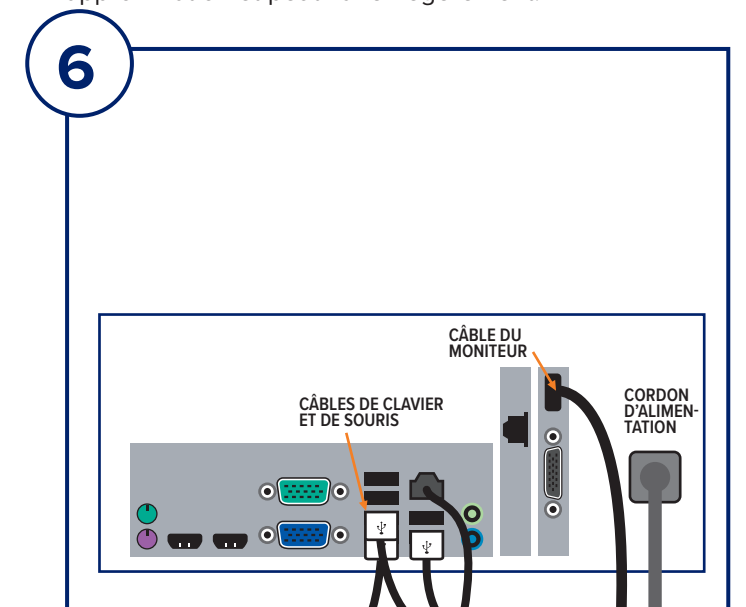


ÉTAPE SIX

Connectez le câble du moniteur et le cordon d'alimentation à l'arrière de l'ordinateur, comme illustré.

Déballez le clavier et la souris. Connectez-les à l'arrière de l'ordinateur, comme illustré. Branchez les cordons d'alimentation de l'ordinateur, du moniteur et de l'unité dans une prise de courant.

7

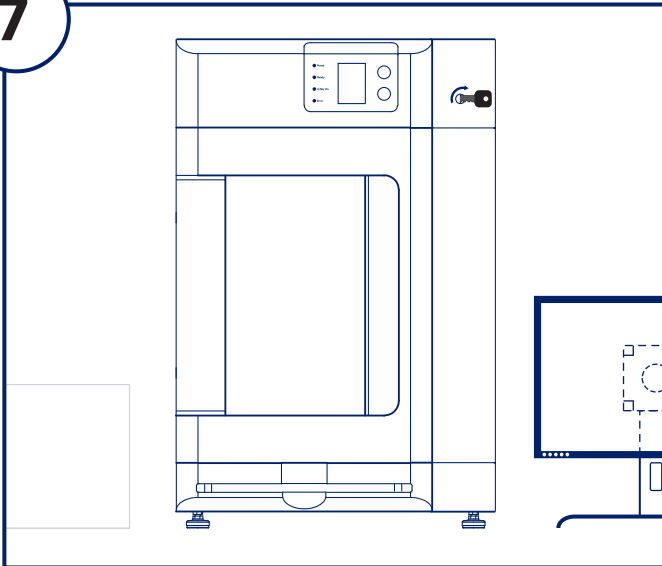


ÉTAPE SEPT

Repérez la clé du **Faxitron Path** et insérez-la dans l'interrupteur à clé situé à l'avant de l'appareil.

Allumez l'ordinateur et le moniteur et laissez Windows démarrer.

8

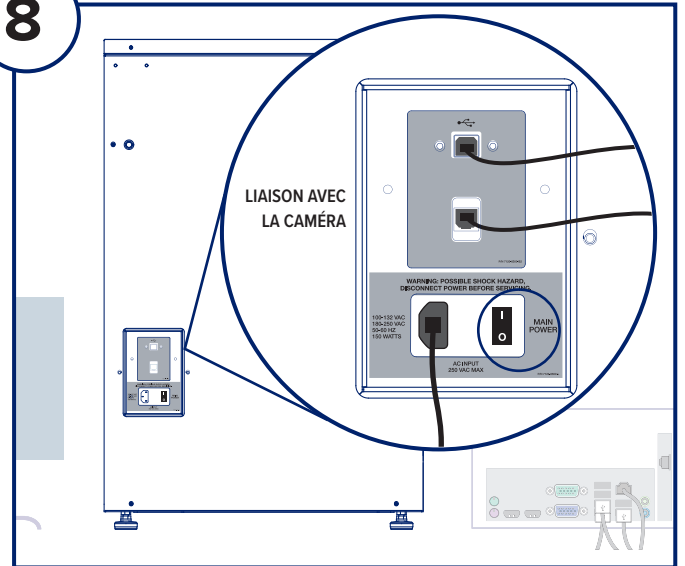

ÉTAPE HUIT

Activez le commutateur d'alimentation situé à l'arrière de l'unité **Faxitron Path**.

Tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre sur Marche.

Double-cliquez sur l'icône VISION.

Le système détectera l'unité **Faxitron Path** et débutera automatiquement l'étalonnage.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement du système, consultez le guide de démarrage rapide dans le kit de documents.

Système Faxitron Path, également connu sous le nom de système PathVision™.



Faxitron Bioptics LLC

3440 E. Britannia Dr, Ste 150,
Tucson, AZ 85706, États-Unis
servicedept-faxitron@hologic.com
+1 520 399 8139
www.faxitron.com/support