

1.1 Instruksjoner for bruk av MammoPad brystpute

MammoPad® brystputer er medisinske engangsprodukter til engangsbruk. De er gjennomtrengelige for elektromagnetisk stråling og lateksfrie. Bruk en ny pute for hver pasient. Følg denne prosedyren for å sikre at puten er riktig installert.

1. Åpne posen som inneholder MammoPad-brystputene, ta ut den ene puten og forsegl posen.



Merk

Putene må oppbevares i en forseglet plastpose for å forhindre forurensning som kan påvirke bildekvaliteten. Oppbevares borte fra direkte sollys og forsegle posen når den ikke er i bruk.


2. Ta av papirunderlaget fra puten og kast det.
3. Påfør limsiden på bildeplattformen i henhold til instruksjonene i følgende merknad for din type system. Ikke bruk puten over malte merker.



Merk

Selenia® og de fleste andre FFDM-systemer - Orienter det avrundede hjørnet nederst til venstre på detektoren. Glatt ut puten fra baksiden til fronten av bildeplattformen.

Dimensjoner® og GE-systemer - Orienter det avrundede hjørnet nederst til høyre på detektoren. Glatt ut puten fra forsiden til baksiden av bildeplattformen.

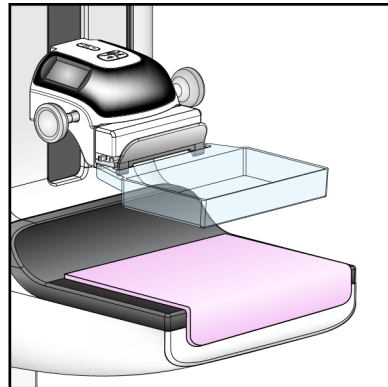

Figur 1: MammoPad installert på en bildeplattform

4. Følg din normale posisjonsrutine for alle visninger.
5. Fjern puten fra bildeplattformen og kast den når undersøkelsen er fullført.



Merk

Hvis puten ble utsatt for blod eller kroppsvæsker, følg fremgangsmåten for kassering av biologisk farlig materiale for ditt anlegg.

For å få hjelp med MammoPad-produkt, kontakt produktstøtte på 1-877-371-4372.

Autorisert EU-representant:



Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium
Tlf.: +32 2 711 46 80
Faks: +32 2 725 20 87



1.2 Symboler

Symbol	Beskrivelse	Standard
	Reseptbelagt bruk	FDA 21 CFR 801.109
	Produsent	ISO 15223-1:2021, henvisning 5.1.1
	Autorisert representant i EU	ISO 15223-1:2021, henvisning 5.1.2
	Brukes innen	ISO 15223-1:2021, henvisning 5.1.4
	Partikode	ISO 15223-1:2021, henvisning 5.1.5
	Katalognummer	ISO 15223-1:2021, henvisning 5.1.6
	Antall	Hologic
	Usteril	ISO 15223-1:2021, henvisning 5.2.7
	Må ikke brukes flere ganger	ISO 15223-1:2021, henvisning 5.4.2
 www.hologic.com/package-inserts	Se i bruksanvisningen	ISO 15223-1:2021, henvisning 5.4.3
	CE-merke Europeisk samsvar	MDR-regulering (EU) 2017/745

Symbol	Beskrivelse	Standard
	Inneholder ikke naturgummlateks	I/R
	Resirkulerbar-symbol	Unikode, henvisning U+267C
	Medisinsk enhet	ISO 15223-1:2021, henvisning 5.7.7

© 2023 Hologic, Inc. Med enerett. Hologic og MammoPad er varemerker og/eller registrerte varemerker som tilhører Hologic, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Dette produktet er dekket av ett eller flere amerikanske patenter eller patentsøknader. Se www.hologic.com/patent-information for mer informasjon.