

## 1.1 Návod na použitie prsníkovej podložky MammoPad

Prsníkové podložky MammoPad® sú zdravotnícke výrobky na jedno použitie. Sú priepustné pre röntgenové žiarenie a neobsahujú latex. Pri každej pacientke použite novú podložku. Dodržaním tohto postupu zaistíte správne umiestnenie podložky.

1. Otvorte vrečko s prsníkovými podložkami MammoPad, vyberte jednu podložku a vrečko znovu uzavrite.



### Poznámka

Podložky sa musia skladovať v uzavretom plastovom vrečku, aby sa predišlo kontaminácii, ktorá by mohla ovplyvniť kvalitu snímok. Skladujte mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a v čase nepoužívania vrečko uzavrite.


2. Z podložky odlepte spodnú papierovú vrstvu a zlikvidujte ju.
3. Priložte lepiacu stranu na snímkovaciu platformu podľa pokynov pre váš typ systému v nasledujúcej poznámke. Podložku nelepte na potlač.



### Poznámka

Selenia® a väčšina ostatných systémov FFDM: zaoblený roh umiestnite k ľavej dolnej časti detektora. Podložku uhladte na snímkovacej platforme od zadného okraja smerom dopredu.

Dimensions® a systémy GE: zaoblený roh umiestnite k pravej dolnej časti detektora. Podložku uhladte na snímkovacej platforme od predného okraja smerom dozadu.

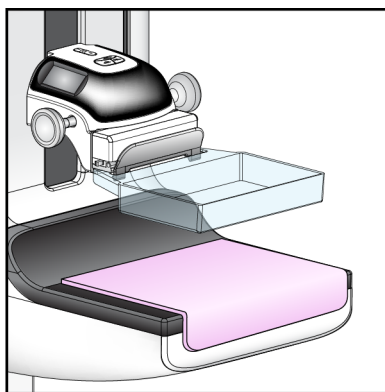

Obrázok 1: Podložka MammoPad umiestnená na snímkovacej platforme

4. Pri všetkých skrínigových zobrazeniach postupujte podľa bežného postupu polohovania.

5. Po skončení vyšetrenia odstráňte podložku zo snímkovacej platformy a zlikvidujte ju.



**Poznámka**

Ak bola podložka vystavená krvi alebo telesným tekutinám, postupujte podľa postupu likvidácie biologicky nebezpečných materiálov zavedeného vo vašom zariadení.

Ak potrebujete pomoc v súvislosti s výrobkom MammoPad, kontaktujte produktovú podporu na čísle 1-877-371-4372.

Autorizovaný zástupca pre EÚ:



**Hologic BV**  
 Da Vincilaan 5  
 1930 Zaventem  
 Belgium  
 Tel.: +32 2 711 46 80  
 Fax: +32 2 725 20 87



## 1.2 Symboly

Symbol	Opis	Norma
	Len na lekársky predpis	FDA 21 CFR 801.109
	Výrobca	ISO 15223-1:2021, odkaz 5.1.1
	Oprávnený zástupca v Európskom spoločenstve	ISO 15223-1:2021, odkaz 5.1.2
	Dátum spotreby	ISO 15223-1:2021, odkaz 5.1.4
	Kód dávky	ISO 15223-1:2021, odkaz 5.1.5
	Katalógové číslo	ISO 15223-1:2021, odkaz 5.1.6
	Množstvo	Hologic
	Nesterilné	ISO 15223-1:2021, odkaz 5.2.7
	Nepoužívajte opakovane.	ISO 15223-1:2021, odkaz 5.4.2
 <a href="http://www.hologic.com/package-inserts">www.hologic.com/package-inserts</a>	Prečítajte si návod na použitie	ISO 15223-1:2021, odkaz 5.4.3

Symbol	Opis	Norma
	Označenie CE Zhoda s európskymi predpismi	Nariadenie (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach
	Neobsahuje prírodný kaučukový latex	Neuplatňuje sa
	Symbol recyklácie	Unicode, odkaz U+267C
	Zdravotnícka pomôcka	ISO 15223-1:2021, odkaz 5.7.7

© 2023 Hologic, Inc. Všetky práva vyhradené. Hologic a MammoPad sú ochranné známky a/alebo registrované ochranné známky spoločnosti Hologic, Inc. a/alebo jej dcérskych spoločností v USA a/alebo iných krajinách. Na tento výrobok sa vzťahuje jeden alebo viac patentov alebo patentových prihlášok v USA. Podrobnosti nájdete na stránke [www.hologic.com/patent-information](http://www.hologic.com/patent-information).