

## 1.1 Instruksjoner for bruk av MammoPad brystpute

MammoPad® brystputer er medisinske engangsprodukter til engangsbruk. De er gjennomtrengelige for elektromagnetisk stråling og lateksfrie. Bruk en ny pute for hver pasient. Følg denne prosedyren for å sikre at puten er riktig installert.

1. Åpne posen som inneholder MammoPad-brystputene, ta ut den ene puten og forsegle posen.



### **Merk**

Putene må oppbevares i en forseglet plastpose for å forhindre forurensning som kan påvirke bildekvaliteten. Oppbevares borte fra direkte sollys og forsegle posen når den ikke er i bruk.


2. Ta av papirunderlaget fra puten og kast det.
3. Påfør limsiden på bildeplattformen i henhold til instruksjonene i følgende merknad for din type system. Ikke bruk puten over malte merker.



### **Merk**

Selenia® og de fleste andre FFDM-systemer - Orienter det avrundede hjørnet nederst til venstre på detektoren. Glatt ut puten fra baksiden til fronten av bildeplattformen.

Dimensjoner® og GE-systemer - Orienter det avrundede hjørnet nederst til høyre på detektoren. Glatt ut puten fra forsiden til baksiden av bildeplattformen.

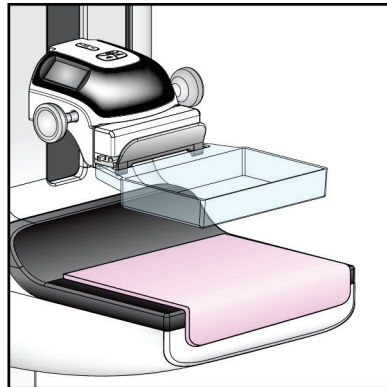

Figur 1: MammoPad installert på en bildeplattform

4. Følg din normale posisjonsrutine for alle visninger.
5. Fjern puten fra bildeplattformen og kast den når undersøkelsen er fullført.



### **Merk**

Hvis puten ble utsatt for blod eller kroppsvæsker, følg fremgangsmåten for kassering av biologisk farlig materiale for ditt anlegg.

For å få hjelp med MammoPad-produkt, kontakt produktstøtte på 1-877-371-4372.

Autorisert EU-representant:





**Hologic BV**  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Belgium  
Tlf.: +32 2 711 46 80  
Faks: +32 2 725 20 87



## 1.2 Symboler

Symbol	Beskrivelse	Standard
	Reseptbelagt bruk	FDA 21 CFR 801.109
	Produsent	ISO 15223-1:2021, henvisning 5.1.1
	Autorisert representant i EU	ISO 15223-1:2021, henvisning 5.1.2
	Brukes innen	ISO 15223-1:2021, henvisning 5.1.4
	Partikode	ISO 15223-1:2021, henvisning 5.1.5
	Katalognummer	ISO 15223-1:2021, henvisning 5.1.6
	Antall	Hologic
	Usteril	ISO 15223-1:2021, henvisning 5.2.7
	Må ikke brukes flere ganger	ISO 15223-1:2021, henvisning 5.4.2
 <a href="http://www.hologic.com/package-inserts">www.hologic.com/package-inserts</a>	Se i bruksanvisningen	ISO 15223-1:2021, henvisning 5.4.3
	CE-merke Europeisk samsvar	MDR-regulering (EU) 2017/745

Symbol	Beskrivelse	Standard
	Inneholder ikke naturgummlateks	I/R
	Resirkulerbar-symbol	Unikode, henvisning U+267C
	Medisinsk enhet	ISO 15223-1:2021, henvisning 5.7.7

© 2023 Hologic, Inc. Med enerett. Hologic og MammoPad er varemerker og/eller registrerte varemerker som tilhører Hologic, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Dette produktet er dekket av ett eller flere amerikanske patenter eller patentsøknader. Se [www.hologic.com/patent-information](http://www.hologic.com/patent-information) for mer informasjon.