

1.1 Rinnapadja MammoPad kasutusjuhised

Rinnapadjad MammoPad® on ühekordselt kasutatavad meditsiinitooted. Need on röntgennegatiivsed ja lateksivabad. Kasutage iga patsiendi jaoks uut patja. Järgige seda protseduuri veendumaks, et padi on õigesti paigaldatud.

1. Avage kott, mis sisaldab rinnapatju MammoPad, eemaldage üks padi ja sulgege kott uuesti.



Märkus

Pildikvaliteeti mõjutada võiva saastumise vältimiseks tuleb patju hoida suletud kilekotis. Hoida otsese päikesekiirguse eest kaitstuna ja sulgeda kott, kui toodet ei kasutata.


2. Eemaldage padjalt paber ja visake see minema.
3. Kandke kleepuv külj pildiplatvormile vastavalt teie süsteemi tüübi jaoks järgmises märkuses esitatud juhiste. Ärge kandke patja värvitud märgistele.



Märkus

Selenia® ja enamik teisi FFDM-süsteeme – joondage ümardatud nurk detektori vasaku alumise küljega. Siluge patja pildiplatvormi tagaosast ettepoole.

Dimensions® ja GE süsteemid – joondage ümardatud nurk detektori parema alumise küljega. Siluge patja pildiplatvormi eesosast tahapoole.

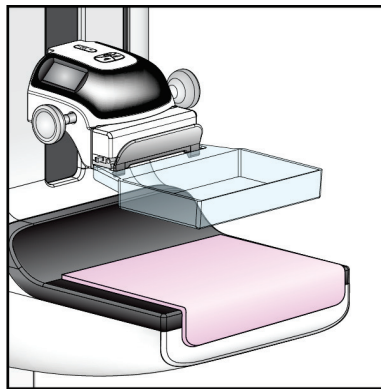

Joonis 1: Pildiplatvormile paigaldatud MammoPad

4. Järgige kõigi kontrolluuringu vaadete jaoks tavapärasest positsioneerimisrutiini.
5. Uuringu lõppemisel eemaldage padi pildiplatvormilt ja visake see minema.



Märkus

Kui padi puutus kokku vere või kehavedelikega, järgige oma ettevõtte bioloogiliselt ohtlike materjalide kõrvaldamise protseduuri.

Toote MammoPad juures abi saamiseks pöörduge tootetoe poole telefonil 1-877-371-4372.

Volitatud esindaja EL-is:



Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium
Tel: +32 2 711 46 80
Faks: +32 2 725 20 87



1.2 Sümbolid

Sümbol	Kirjeldus	Standard
	Ainult retseptiravim	FDA 21 CFR 801.109
	Tootja	ISO 15223-1:2021, viide 5.1.1
	Volitatud esindaja Euroopa Liidus	ISO 15223-1:2021, viide 5.1.2
	Tarvitamise lõpptähtpäev	ISO 15223-1:2021, viide 5.1.4
	Partii kood	ISO 15223-1:2021, viide 5.1.5
	Katalooginumber	ISO 15223-1:2021, viide 5.1.6
	Kogus	Hologic
	Mittesteriilne	ISO 15223-1:2021, viide 5.2.7
	Mitte korduskasutada	ISO 15223-1:2021, viide 5.4.2
 www.hologic.com/package-inserts	Uurida kasutusjuhendit	ISO 15223-1:2021, viide 5.4.3
	CE-vastavusmargis Euroopa vastavusmargis	MDR-eeskiri (EÜ) 2017/745

Sümbol	Kirjeldus	Standard
	Ei sisalda naturaalsset lateksit	Puudub
	Ringlussevõtusümbol	Unicode, viide U+267C
	Meditsiiniseade	ISO 15223-1:2021, viide 5.7.7

© 2023 Hologic, Inc. Kõik õigused kaitstud. Hologic ja MammoPad on ettevõtte Hologic, Inc. ja/või selle tütarettevõtete kaubamärgid ja/või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides. Sellele tootele kehtib üks või mitu USA patenti või patenditaotlust. Üksikasjalikku teavet vt www.hologic.com/patent-information.