

1.1 MammoPad emlővédő párna – alkalmazási utasítások

A MammoPad® emlővédő párnák egyszer használatos, eldobható orvosi termékek. Sugáráteresztők és latexmentesek. Minden betegnél használjon új párnát. A párna megfelelő rögzítéséhez kövesse az alábbi eljárást.

1. Nyissa fel a MammoPad emlővédő párnákat tartalmazó tasakot, vegyen ki egy párnát, és zárja vissza a tasakot.



Megjegyzés

A párnákat lezárt műanyag tasakban tárolja, hogy elkerülje szennyeződést, amely ronthatja a képminőséget. Közvetlen napfénytől védve tárolja. Ha nem használja, zárja le a tasakot.


2. Húzza le a papír hátlapot a párnáról, és dobja ki.
3. Helyezze fel az öntapadós oldalát a képkalkotó rendszerre a következő bekezdésben ismertetett, a rendszer típusától függő utasítások szerint. Ne helyezze a párnát festett matricára.



Megjegyzés

Selenia® és a legtöbb egyéb FFDM rendszer: Helyezze fel a párnát az érzékelőre, úgy, hogy a lekerekített sarka a bal alsó része felé tekintsen. Simítsa a párnát a képkalkotó rendszer felületére hátulról előre haladva.

Dimensions® és egyéb GE rendszerek: Helyezze fel a párnát az érzékelőre úgy, hogy a lekerekített sarka a jobb alsó része felé tekintsen. Simítsa a párnát a képkalkotó rendszer felületére előlről hátrafelé haladva.

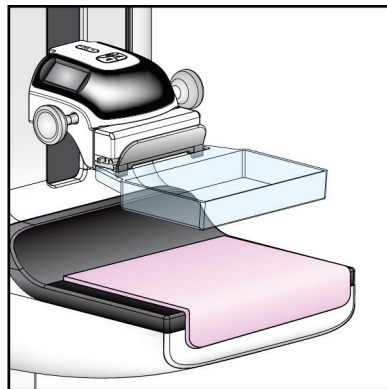

1. ábra: A képkalkotó rendszerre felhelyezett MammoPad

4. Minden szűrési nézetnél kövesse a szokásos eljárásokat.

5. A vizsgálat befejezése után távolítsa el a párnát a képkötő rendszerről, és dobja el.



Megjegyzés

Ha a párna vérrel vagy testnedvekkel érintkezett, kövesse az intézmény veszélyes biológiai anyagok ártalmatlanítására vonatkozó eljárását.

A MammoPad termékkel kapcsolatos segítségért forduljon terméktámogatási munkatársainkhoz az 1-877-371-4372 telefonszámon.

Meghatalmazott képviselő az Európai Unióban:



Hologic BV
 Da Vincilaan 5
 1930 Zaventem
 Belgium
 Tel.: +32 2 711 46 80
 Fax: +32 2 725 20 87



1.2 Szimbólumok

Szimbólum	Leírás	Normál
	Csak orvosi rendelvényre	FDA 21 CFR 801.109
	Gyártó	ISO 15223-1:2021, hivatkozás: 5.1.1
	Hivatalos képviselő az Európai Közösségben	ISO 15223-1:2021, hivatkozás: 5.1.2
	Felhasználhatósági idő	ISO 15223-1:2021, hivatkozás: 5.1.4
	Tételkód	ISO 15223-1:2021, hivatkozás: 5.1.5
	Katalógusszám	ISO 15223-1:2021, hivatkozás: 5.1.6
	Mennyiség	Hologic
	Nem steril	ISO 15223-1:2021, hivatkozás: 5.2.7
	Ne használja fel újra	ISO 15223-1:2021, hivatkozás: 5.4.2
 www.hologic.com/package-inserts	Olvassa el a használati utasítást	ISO 15223-1:2021, hivatkozás: 5.4.3

Szimbólum	Leírás	Normál
	CE jelölés Európai megfelelés	MDR-rendelet, (EU) 2017/745
	Nem tartalmaz természetes gumilatexet	N/A
	Újrahasznosítható	Unicode, hivatkozás: U+267C
	Orvostechikai eszköz	ISO 15223-1:2021, hivatkozás: 5.7.7

© 2023 Hologic, Inc. Minden jog fenntartva. A Hologic és a MammoPad a Hologic, Inc., és/vagy leányvállalatainak a védjegyei és/vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A termékre egy vagy több amerikai szabadalom vagy szabadalmi bejelentés vonatkozik. A részletekért lásd a www.hologic.com/patent-information weboldalt.