

Faxitron® Core

Specimen Radiography System



HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

1. GÜCÜ AÇIN

- Faxitron Core kabininin arkasındaki güç düğmesinin **ON** (Açık) konumuna getirildiğinden emin olun.
- Faxitron Core kabininin önündeki anahtarı **on** (açık) konumuna çevirin.
- Bilgisayarı ve monitörü **açın**.

2. YAZILIMI BAŞLATIN

- Faxitron Core örnek çekmesinde hiçbir şey olmadığını doğrulayın.
- Masaüstünün ortasındaki **Vision** simgesine çift tıklayın.

3. KALİBRE EDİN

- Oturum açtıktan sonra kalibrasyon gerçekleştirmeniz istenir. Devam etmek için **"Calibrate"** (Kalibre Et) düğmesine basın.

4. HASTA VERİLERİ

- "Start Procedure"** (Prosedür Başlat) ögesine tıklayın.
- "Select from Worklist"** (İş Listesinden Seç) ögesine tıklayın.
- Hastanın adını bulun ve çift tıklayın.
- Eksik olan zorunlu alanları girin, örneğin Laterality (Yanallık).
- "Accept"** (Kabul et) ögesine tıklayın.

5. RÖNTGENLE GÖRÜNTÜLEME

- Numuneleri Faxitron Core numune tepsisine yerleştirin.
- Numune tepsisini çekmeceye yerleştirin.
- Faxitron Core çekmesini kapatın.
- Röntgeni etkinleştirmek için yeşil **"X-ray"** (Röntgen Işını) düğmesine basın, birkaç saniye sonra görüntü belirecektir.

6. GÖRÜNTÜ İŞLEME

- Pencere/seviye işlevi için parlaklığı ve kontrastı değiştirmek üzere **farenin sol düğmesine** basılı tutun ve fareyi sürükleyin.
- Görüntüyü büyütme için **yakınlaştırmayı ayarlayın**.

7. PACS'A DEPOLAMA

- Ekranın sol tarafındaki **"PACS Store"** (PACS Depola) düğmesine tıklayın.

8. YAZDIRMA

- Ekranın sol tarafındaki **"PACS Print"** (PACS Yazdır) düğmesine tıklayın.

9. KAPATMA


- Sol taraftaki **"System Shutdown"** (Sistemi Kapat) düğmesine tıklayın, ardından **"OK"** (Tamam) ögesine tıklayın.
- Faxitron Core kabinindeki anahtarı **off** (kapalı) konumuna çevirin.



www.hologic.com/package-inserts



Hologic, Inc.
600 Technology Drive
Newark, DE 19702 ABD
1.800.447.1856
www.hologic.com

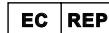

Hologic, BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belçika
Tel: +32 2 711 46 80
Faks: +32 2 725 20 87

AU SPONSORU

Hologic Pty Ltd
Suite 302, Level 3
2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113
Tel: 02 9888 8000



Faxitron Core sistemi, CoreVision Sistemi olarak da adlandırılır.

MAN-10102-3602 Rev. 001 (6/24) Hologic Inc. ©2024 Tüm hakları saklıdır. Hologic, CoreVision, Faxitron ve The Science of Sure; Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Hologic, Inc. ve/veya yan kuruluşlarının ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır. Bu bilgiler ABD ve diğer piyasalardaki sağlık mesleği mensuplarına yöneliktir ve teşvik ya da promosyon faaliyetlerinin yasak olduğu yerlerde bu tür faaliyetlere yönelik olarak tasarlanmamıştır. Hologic materyalleri, web siteleri, e-Yayınlar ve fuarlar aracılığıyla dağıtıldığından, bu tür materyallerin nerede görüldüğünü kontrol altına almak her zaman mümkün değildir. Belirli bir ülkede hangi ürünlerin satışa sunulduğuna dair özel bilgiler için lütfen yerel Hologic temsilcinize iletişime geçin.