

Faxitron® Core

Système de radiographie d'échantillons

HOLOGIC®

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

1. MISE EN MARCHÉ

- Assurez-vous que l'interrupteur situé à l'arrière de l'armoire Faxitron Core est réglé sur la position **ON** (Marche)
- Tournez la **clé** située à l'avant de l'armoire Faxitron Core sur **Marche**
- **Allumez** l'ordinateur et le moniteur

2. DÉMARRAGE DU LOGICIEL

- Vérifiez qu'il n'y a rien dans le tiroir à échantillons du Faxitron Core
- Double-cliquez sur l'icône **Vision** au centre du bureau

3. ÉTALONNAGE

- Vous serez invité à effectuer l'étalonnage une fois que vous vous serez connecté Appuyez sur le bouton « **Calibrate** » (Étalonnage) pour continuer

4. DONNÉES DU PATIENT

- Cliquez sur « **Start Procedure** » (Démarrer la procédure)
- Cliquez sur « **Select from Worklist** » (Sélectionner dans la liste de travail)
- Recherchez le nom du patient et double-cliquez dessus
- Saisissez les champs obligatoires manquants tels que Laterality (Latéralité)
- Cliquez sur « **Accept** » (Accepter)

5. IMAGERIE À RAYONS X

- Placez le(s) échantillon(s) dans le plateau d'échantillons du Faxitron Core
- Placez le plateau d'échantillons dans le tiroir
- Fermez le tiroir du Faxitron Core
- Appuyez sur le bouton vert « **X-ray** » (Rayons X) pour activer les rayons X – l'image apparaîtra au bout de quelques secondes

6. MANIPULATION DES IMAGES

- Maintenez le **bouton gauche de la souris** enfoncé et faites glisser la souris pour modifier la luminosité et le contraste pour la fonction fenêtre/niveau
- **Régler le zoom** pour agrandir l'image à visualiser

7. ENREGISTREMENT PACS

- Cliquez sur le bouton « **PACS Store** » (Enregistrement PACS) sur le côté gauche de l'écran

8. IMPRESSION

- Cliquez sur le bouton « **PACS Print** » (Impression PACS) sur le côté gauche de l'écran


9. ARRÊT

- Cliquez sur le bouton « **System Shutdown** » (Arrêt du système) sur le côté gauche, puis cliquez sur « **OK** »
- Tournez la **clé** située sur l'armoire Faxitron Core sur **Arrêt**

 www.hologic.com/package-inserts



Hologic, Inc.
600 Technology Drive
Newark, DE 19702 États-Unis
1.800.447.1856
www.hologic.com

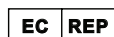

Hologic, BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgique
Tél. : +32 2 711 46 80
Fax : +32 2 725 20 87

SPONSOR AU
Hologic Pty Ltd
Suite 302, Level 3
2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113
Tél. : 02 9888 8000



Système Faxitron Core, également connu sous le nom de système CoreVision.

MAN-10102-900 Rév. 001 (6/23) Hologic Inc. ©2023 Tous droits réservés. Hologic, CoreVision, Faxitron et The Science of Sure sont des marques de commerce et/ou des marques déposées d'Hologic, Inc., et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Ces informations sont destinées aux professionnels du secteur médical aux États-Unis et sur d'autres marchés et ne représentent pas une sollicitation ou la promotion d'un produit lorsque ces activités sont prosrites. Étant donné que les documents de Hologic sont distribués par le biais de sites Web, de diffusions par voie électronique et de salons professionnels, il n'est pas toujours possible de contrôler le lieu d'apparition de ces documents. Pour des informations spécifiques sur les produits disponibles à la vente dans un pays donné, veuillez contacter votre représentant Hologic local.