

# Guía de inicio rápido



## Faxitron<sup>®</sup> Core

Sistema de radiografía de muestras



Faxitron<sup>™</sup> Core  
Specimen Radiography System

Automatic

25 kV  
4.5 S

Power   Ready   X-Ray On   Error

**CAUTION**  
X-Rays produced when energized.  
Do not insert any part of the body when energized - X-Ray hazard.  
LES rayons-x ont produit quand stimule.  
Ne pas faire d'insertion n'importe quelle partie du corps quand stimule - le danger d'EVITER

STOP

X-RAY



# Faxitron® Core

Sistema de radiografía de muestras

## COMPROBACIÓN DEL CONTENIDO

El sistema **Faxitron Core** se entrega en **1 CAJA**:

## CONTENIDO

Unidad **Faxitron Core**

Guía de inicio rápido de **Faxitron Core**

1 monitor del sistema con soporte

1 ordenador

1 cable del monitor

1 teclado

1 ratón

25 bandejas de muestras de **Faxitron Core**

2 llaves

2 cable USB Vision

1 cable de red

3 cable de alimentación


1 unidad flash de instalación del sistema  
(Incluye manual de usuario)

Compruebe que la caja ha llegado sin daños visibles significativos en todos los artículos.

Si hay daños, llame al equipo de soporte de **Hologic**:

**+1-800-447-1856**

1

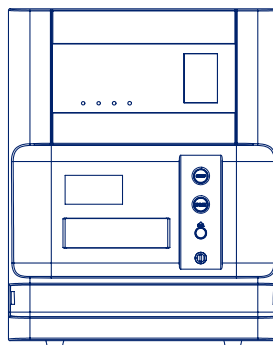


## PASO UNO

Abra la **CAJA** y retire la capa superior del embalaje para dejar espacio para sacar el **Faxitron Core** de forma segura.

Compruebe si el **Faxitron Core** está dañado (agrietado o con plásticos rotos, pantalla LCD dañada, etc.)

*El sistema pesa cerca de 25 kg (50 lb), por lo que debe contar con ayuda para levantar el Faxitron Core de la caja y colocarlo en el lugar deseado.*

4

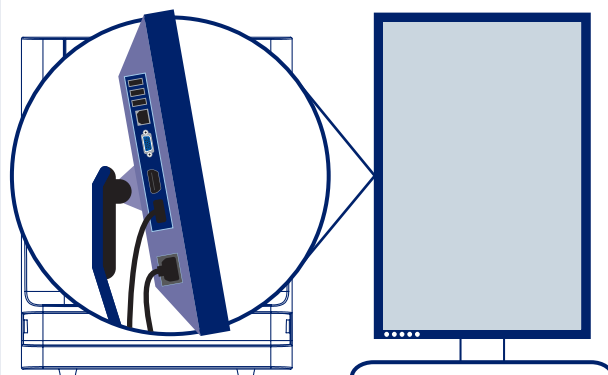


## PASO CUATRO

Retire el paquete de documentos, las bandejas de muestras, el teclado y el ratón, y déjelos a un lado. Saque todos los cables de la caja. Retire el ordenador y colóquelo cerca de la unidad **Faxitron Core** y el monitor.

Conecte el cable de alimentación y el cable del monitor al monitor. La imagen mostrada es solo aproximada y puede variar ligeramente.


2

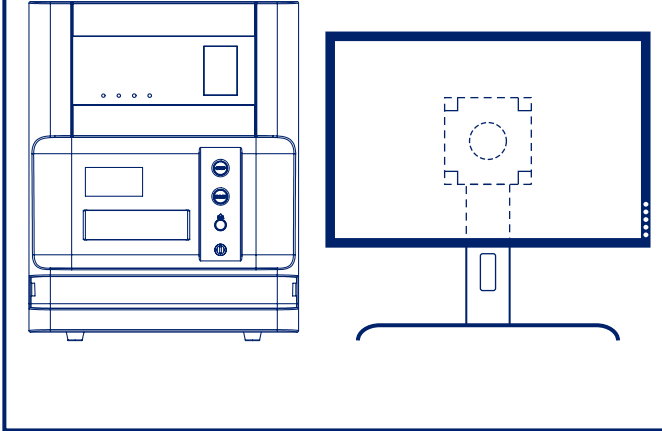

## PASO DOS

Saque el monitor y el soporte. Retire la bolsa protectora del monitor y déjela a un lado.


3

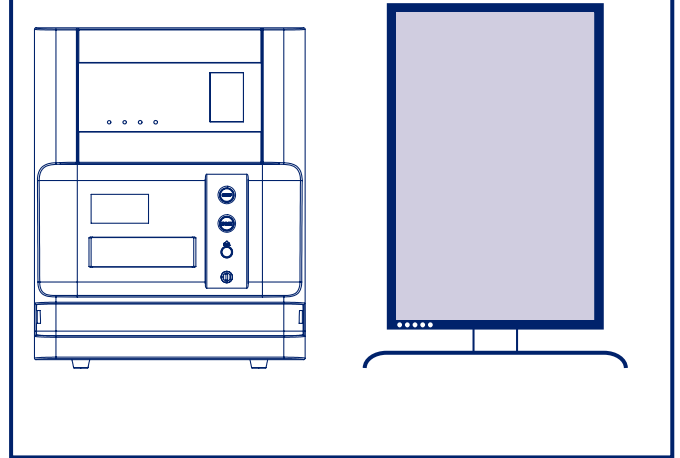

## PASO TRES

Gire el monitor 90° en el sentido de las agujas del reloj. Los botones estarán en la parte inferior como se muestra.


5

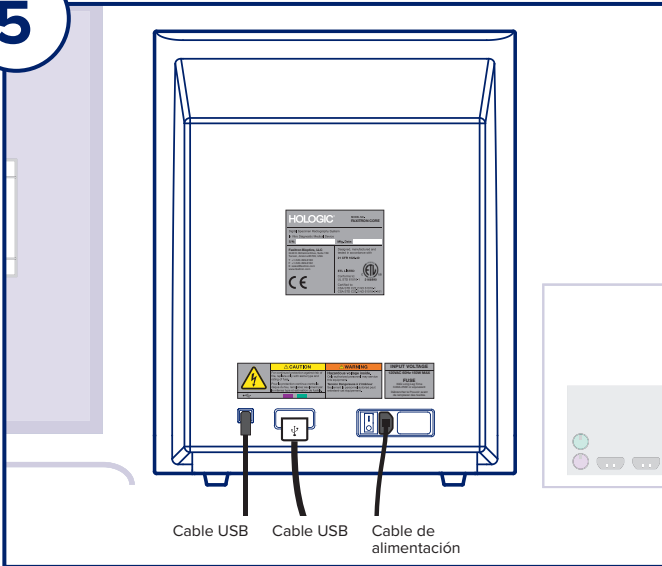

## PASO CINCO

Localice los cables USB y el cable de alimentación, y conéctelos a la parte posterior de la unidad **Faxitron Core** como se muestra.


6

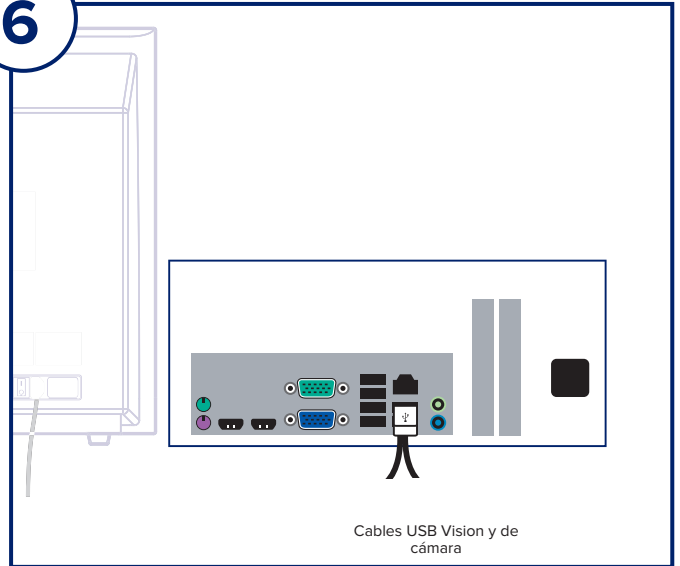

## PASO SEIS

Conecte los otros extremos de los cables USB al ordenador como se muestra. Asegúrese de conectar el cable de USB Vision en el puerto etiquetado «**Vision USB**».

7

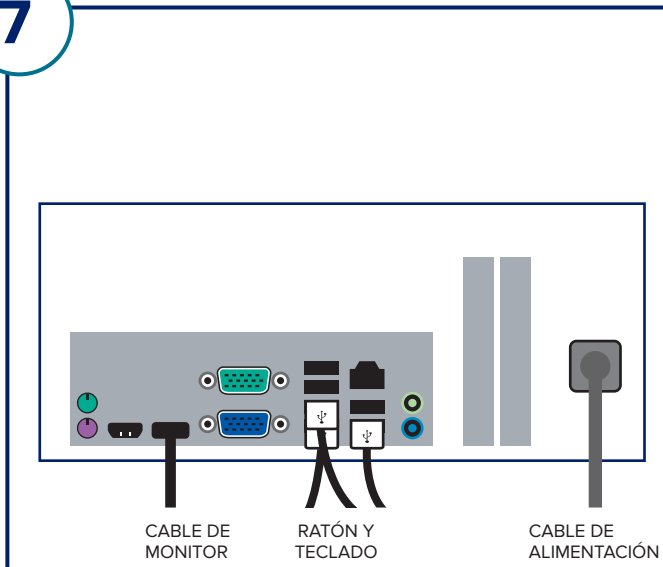


## PASO SIETE

Conecte el cable del monitor y el cable de alimentación a la parte posterior del ordenador como se muestra.

Desembale el teclado y el ratón, y conéctelos a la parte posterior del ordenador como se muestra.

Conecte el cable de alimentación a la parte posterior del ordenador como se muestra. Enchufe los cables de alimentación del ordenador, el monitor y la unidad de rayos X en un receptáculo de alimentación.

8

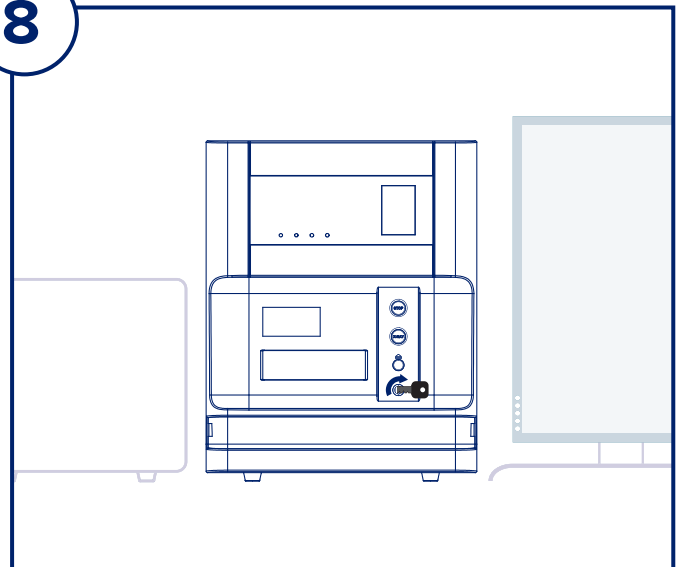

## PASO OCHO

Localice la llave del **Faxitron Core** e introdúzcala en la cerradura de contacto en la parte delantera de la unidad.

Encienda el ordenador y el monitor, y permita que Windows se inicie.

Encienda el interruptor de alimentación situado en la parte posterior de la unidad **Faxitron Core**.

Gire la llave en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición **ON** (Encendido).

Haga doble clic en el icono **Core**.

El sistema detectará la unidad **Faxitron Core** y comenzará la calibración automáticamente.

Para saber cómo funciona el sistema, consulte la Guía de inicio rápido.

*Sistema Faxitron Core, también conocido como sistema CoreVision®.*



**Hologic, Inc.**  
600 Technology Drive  
Newark, DE 19702 USA  
1.800.447.1856  
www.Hologic.com

EC REP

**Hologic, BV**  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Bélgica  
Tel.: +32 2 711 46 80  
Fax: +32 2 725 20 87



### PROMOTOR DE AUSTRALIA

**Hologic (Australia y Nueva Zelanda) Pty Ltd**  
Suite 302, Level 3  
2 Lyon Park Road  
Macquarie Park NSW 2113  
Tel.: 02 9888 8000



[www.hologic.com/package-inserts](http://www.hologic.com/package-inserts)