

# Faxitron® Path

## Radiografiesysteem voor specimens

## SNELSTARTGIDS

### 1. OPSTARTEN

- Zorg ervoor dat de voedingsschakelaar aan de achterzijde van de Faxitron Path-kast op de stand **ON** (Aan) staat
- Draai de **slutel** aan de voorzijde van de Faxitron Path-kast naar de stand **aan**
- Zet de computer en monitor **aan**

### 2. SOFTWARE STARTEN

- Controleer of er zich niets in de röntgenkast van de Faxitron Path bevindt
- Dubbelklik op het pictogram **Vision** in het midden van het bureaublad

### 3. KALIBREREN

- U wordt bij het aanmelden gevraagd om een kalibratie uit te voeren. Klik op de knop **'Calibrate'** (Kalibreren) om door te gaan

### 4. PATIËNTGEGEVENS

- Klik op **'Start Procedure'** (Procedure starten)
- Klik op **'Select from Worklist'** (Vanuit werklijst selecteren)
- Zoek de naam van de patiënt op en dubbelklik erop
- Vul lege vereiste velden in, zoals 'Laterality' (Lateraliteit)
- Klik op **'Accept'** (Accepteren)

### 5. RÖNTGENOPNAME MAKEN

- Plaats specimen(s) in de röntgenkast van de Faxitron Path – gebruik indien nodig de vergrotingstray
- Druk op de groene knop **'X-ray'** (Röntgen) om röntgenstraling te activeren – het beeld verschijnt na een paar seconden

### 6. BEELD MANIPULEREN

- Houd de **linkermuisknop** ingedrukt en versleep de muis om de helderheid en het contrast voor de functie 'window/level' (venster/niveau) aan te passen
- Klik op **Adjust zoom** (Zoom aanpassen) om het beeld voor weergave te vergroten

### 7. OP PACS OPSLAAN

- Klik op de knop **'PACS Store'** (PACS opslaan) aan de linkerkant van het scherm

### 8. AFDRUKKEN

- Klik op de knop **'PACS Print'** (PACS afdrukken) aan de linkerkant van het scherm

### 9. UITSCHAKELEN


- Klik op de knop **'System Shutdown'** (Systeem uitschakelen) aan de linkerkant en klik vervolgens op **'OK'**
- Draai de **slutel** in de Faxitron Path-kast naar de stand **uit**



[www.hologic.com/package-inserts](http://www.hologic.com/package-inserts)



**Hologic, Inc.**  
600 Technology Drive,  
Newark, DE 19702 VS  
1.800.447.1856  
[www.hologic.com](http://www.hologic.com)

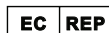

**Hologic, BV**  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
België  
Tel.: +32 2 711 46 80  
Fax: +32 2 725 20 87

#### AU-SPONSOR

**Hologic Pty Ltd**  
Suite 302, Level 3  
2 Lyon Park Road  
Macquarie Park NSW 2113  
Tel.: 02 9888 8000



*Faxitron Path-systeem, ook bekend als het PathVision-systeem.*

MAN-10245-1500 Rev. 001 (7/23) Hologic Inc. ©2023 Alle rechten voorbehouden. Hologic, Path, PathVision, Faxitron en The Science of Sure zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Hologic, Inc. en/of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Deze informatie is bestemd voor medische professionals in de VS en andere markten en is niet bedoeld als reclamemateriaal of promotie waar dergelijke activiteiten verboden zijn. Omdat de producten van Hologic via websites, eBroadcasts en beurzen worden gedistribueerd, is het niet altijd mogelijk om te controleren waar dergelijke producten worden gebruikt. Neem contact op met uw plaatselijke Hologic-vertegenwoordiger voor specifieke informatie over de producten die in een bepaald land voor verkoop beschikbaar zijn.