

Faxitron® Path

Modello sistema radiografico

GUIDA RAPIDA

1. ALIMENTAZIONE

- Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sul retro dell'armadio Faxitron Path sia posizionato su **ON** (Acceso).
- Ruotare la **chiavetta** sul lato anteriore dell'armadio di Faxitron Path su **on** (Acceso).
- **Accendere** il computer e il monitor.

2. AVVIO DEL SOFTWARE

- Verificare che la camera a raggi X di Faxitron Path sia vuota.
- Fare doppio clic sull'icona **Vision** al centro del desktop.

3. CALIBRAZIONE

- Verrà richiesta una calibrazione una volta effettuato l'accesso. Premere il pulsante **"Calibrate"** (Calibra) per procedere.

4. DATI PAZIENTE

- Fare clic su **"Start Procedure"** (Avvia procedura).
- Fare clic su **"Select from Worklist"** (Effet. selez. da lista di lavoro).
- Localizzare il nome di un paziente e fare clic su quest'ultimo.
- Immettere tutti i campi obbligatori mancanti, come Laterality (Lateralità).
- Fare clic su **"Accept"** (Accetta).

5. IMAGING RADIOLOGICO

- Collocare i campioni nella camera a raggi X di Faxitron Path. Se desiderato, utilizzare un vassoio di ingrandimento.
- Premere il pulsante verde **"X-ray"** (Raggi X) per attivare le radiografie; l'immagine viene visualizzata dopo pochi secondi.

6. MANIPOLAZIONE DELLE IMMAGINI

- Tenere premuto il **pulsante sinistro del mouse** e trascinare il mouse per cambiare la luminosità e il contrasto della funzione finestra/livello.
- **Regolare lo zoom** per ingrandire l'immagine per la visualizzazione.

7. MEMORIZZAZIONE IN PACS

- Fare clic sul pulsante **"PACS Store"** (Archivio PACS) sul lato sinistro dello schermo.

8. STAMPA

- Fare clic sul pulsante **"PACS Print"** (Stampa PACS) sul lato sinistro dello schermo.

9. SPEGNIMENTO


- Fare clic sul pulsante **"System Shutdown"** (Spegnimento del sistema) sul lato sinistro e fare clic su **"OK"**.
- Ruotare la **chiave** sull'armadio Faxitron Path sulla posizione **off** (Spento).



www.hologic.com/package-inserts



Hologic, Inc.
600 Technology Drive,
Newark, DE 19702 USA
1.800.447.1856
www.hologic.com

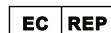

Hologic, BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgio
Tel.: +32 2 711 46 80
Fax: +32 2 725 20 87

SPONSOR AUSTRALIANO

Hologic Pty Ltd
Suite 302, Level 3
2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113
Tel.: 02 9888 8000



Sistema Faxitron Path, noto anche come sistema PathVision.

MAN-10245-700 Rev. 001 (7/23) Hologic Inc. ©2023 Tutti i diritti riservati. Hologic, Path, PathVision, Faxitron e The Science of Sure sono marchi e/o marchi depositati di Hologic, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Le presenti informazioni sono destinate ai professionisti del settore medico negli Stati Uniti e in altri mercati e non vanno intese come sollecitazioni all'acquisto o promozioni del prodotto ove tali attività siano proibite. Poiché i materiali di Hologic sono distribuiti mediante siti Internet, eBroadcast e fiere di settore, non è sempre possibile controllare i luoghi in cui tali materiali sono esposti. Per informazioni specifiche su quali prodotti siano disponibili per la vendita in un particolare Paese, contattare il rappresentante locale Hologic.