

## Aggiornamento delle preferenze utente per Quantra 2.2

Questa appendice si applica alle versioni 10.1.2 e precedenti di SecurView®. Conservare il presente documento con la *Guida per l'utente della stazione di lavoro SecurView DX/RT* per riferimento futuro.

La procedura consente di modificare le preferenze utente di un utente radiologo/tecnico per visualizzare correttamente i risultati dell'applicazione Quantra™ versione 2.2.



### Nota

Ripetere la procedura descritta di seguito per ogni utente radiologo e/o tecnico. Eseguire la procedura anche quando vengono aggiunti nuovi utenti. È responsabilità della struttura assicurarsi che questa procedura venga eseguita.

1. Nella finestra di login di SecurView, immettere il nome utente e la password associati all'account utente radiologo/tecnico, quindi selezionare **Accesso**.
2. Nella schermata di avvio di SecurView selezionare **Amministrazione**.
3. Selezionare **Preferenze utente**. Selezionare quindi **Strumenti e overlay**.
4. In "Visualizzazione CAD", selezionare **Configura...** per visualizzare la finestra Configurazione visualizzazione CAD.
5. Selezionare **Biomarcatori di imaging Hologic**.
6. Nella sezione "Quantra", deselezionare le caselle di spunta per le righe 1-7 (Vd, Vb, Vbd, Vd-score, Vbd-score, Abd e qDC). Selezionare solo la casella di spunta per la riga 8 (QDC), simile all'esempio riportato di seguito.

CAD Mark Info / R2 LesionMetrics™		Hologic Imaging Biomarkers	
Quantra			
	Display	Abbreviation	Name
1	<input type="checkbox"/>	Vd	Volume of dense tissue
2	<input type="checkbox"/>	Vb	Volume of breast
3	<input type="checkbox"/>	Vbd	Volumetric breast density
4	<input type="checkbox"/>	Vd-score	Volume of dense tissue reference score
5	<input type="checkbox"/>	Vbd-score	Volumetric breast density reference score
6	<input type="checkbox"/>	Abd	Area breast density
7	<input type="checkbox"/>	qDC	Quantra Breast Density Category - numerical
8	<input checked="" type="checkbox"/>	QDC	Quantra Breast Density Category

Figura 1: Biomarcatori di Hologic Imaging, sezione Quantra

7. Nell'elenco a discesa "Visualizzazione predefinita", selezione "Per soggetto".


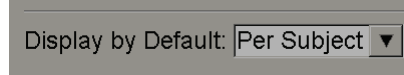


Figura 2: Selezione "Visualizzazione predefinita"

8. Selezionare **OK** per chiudere la finestra. Quindi selezionare **Applica** (nell'angolo in basso a destra dello schermo) per salvare le modifiche effettuate.

Alla successiva visualizzazione dei risultati dei Biomarcatori di imaging Hologic, i risultati Quantra vengono visualizzati come illustrato nell'esempio riportato di seguito, con la visualizzazione predefinita dei risultati per soggetto.

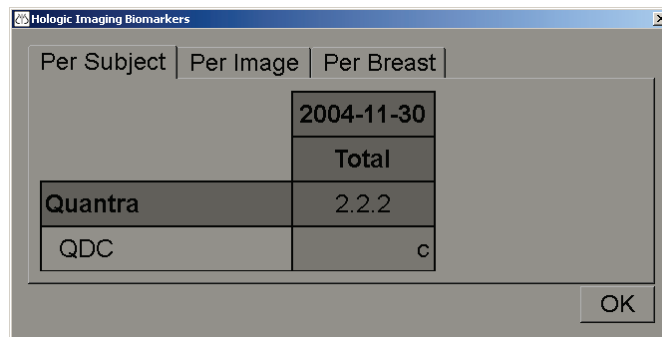

2004-11-30	
Total	
Quantra	2.2.2
QDC	c

The screenshot shows a window titled "Hologic Imaging Biomarkers" with three tabs: "Per Subject", "Per Image", and "Per Breast". The "Per Subject" tab is active. The window displays a table with a date "2004-11-30" and a "Total" row. Below that, there are two rows: "Quantra" with a value of "2.2.2" and "QDC" with a value of "c". An "OK" button is visible in the bottom right corner of the window.

Figura 3: Biomarcatori di Hologic Imaging, sezione "Per Soggetto" di Quantra



#### Nota

La versione Quantra 2.2 fornisce solo i risultati della Categoria di densità mammaria Quantra QDC. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla *Guida utente Descrizione del sistema Quantra 2.2* e alle *Note sulla versione Quantra 2.2.2*.

---