

# SecurView®

Breast Imaging Workstation



**Station SecurView® DX/RT**  
**Guide de l'utilisateur**  
MAN-07257-902 Révision 001

**HOLOGIC®**



# SecurView<sup>®</sup> DX/RT

Station d'imagerie mammaire

## Guide de l'utilisateur

pour la version logicielle 11.0

Référence MAN-07257-902

Révision 001

Mai 2021

**HOLOGIC<sup>®</sup>**

## Support produit

États-Unis : +1.877.371.4372

Europe : +32 2 711 4690

Asie : +852 37487700

Australie : +1 800 264 073

Autres pays : +1 781 999 7750

E-mail : BreastHealth.Support@hologic.com

© 2021 Hologic, Inc. Imprimé aux États-Unis. La version originale du présent guide est rédigée en anglais.

Hologic, Cenova, C-View, EmphaSize, Genius AI, ImageChecker, Intelligent 2D, LesionMetrics, Mammography Prior Enhancement, MultiView, PeerView, Quantra, RightOn, SecurView, Selenia, TechMate et les logos associés sont des marques commerciales ou des marques déposées de Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques commerciales, marques déposées et noms de produits appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Ce produit peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains ou étrangers, comme indiqué sur le site [www.Hologic.com/patent-information](http://www.Hologic.com/patent-information).



Logiciel de lecture Softcopy © 2002-2020 MeVis Medical Solutions AG. Tous droits réservés. Le présent produit et la documentation associée sont protégés par les droits d'auteur et sont distribués sous couvert de licences qui en restreignent l'utilisation, la copie, la distribution et la décompilation. Aucune partie de ce produit ou de la documentation associée ne peut être reproduite par quelque moyen que ce soit sans autorisation écrite préalable de MeVis Medical Solutions AG et de ses fournisseurs de licence, le cas échéant. FlowBack, FlowNext, MammoNavigator et ReportFlow sont des marques déposées de MeVis BreastCare Solutions GmbH & Co. KG. Ce produit peut être protégé par un ou plusieurs des brevets suivants : 7,283,857, 6,891,920.

### Bibliothèques

Bibliothèque libtiff © 1988-1997 Sam Leffler, 1991-1997 Silicon Graphics, Inc. OFFIS\_DCMTK © 1994–2005, OFFIS. Boîte à outils de l'intégrateur avancé MergeCOM-3 – Version 5.6.0. PostgreSQL – Version 11.2.1 Portions Copyright © 1996-2019, The PostgreSQL Global Development Group, Portions Copyright © 1994, The Regents of the University of California. jpeglib © 1991-1998, Thomas G. Lane. xerces © 1999-2010 The Apache Software Foundation. 7-Zip © 1999-2009 Igor Pavlov. Qt 4.8.6 © 2014 Digia Plc et/ou sa ou ses filiale(s), autorisé sous licence dans le cadre d'une LGPL v2.1. Cette bibliothèque Qt a été adaptée par MeVis Medical Solutions AG. Vous pouvez obtenir le code source complet correspondant en envoyant une demande à MeVis Medical Solutions AG, Support Department, Caroline-Herschel-Str. 1, 28359 Bremen, Allemagne.

# Table des matières

<b>Liste des figures</b>	<b>xi</b>
<b>Liste des tableaux</b>	<b>xv</b>
<b>1: Introduction</b>	<b>1</b>
1.1 Vue d'ensemble.....	1
1.2 Usage prévu.....	2
1.2.1 Usage prévu de la Station de diagnostic SecurView DX.....	2
1.2.2 Usage prévu de la Station des manipulateurs SecurView RT .....	2
1.3 Utilisation de ce guide.....	3
1.4 Ressources disponibles.....	4
1.5 Avertissements et mises en garde .....	5
1.5.1 Utilisation du système .....	5
1.5.2 Installation et maintenance .....	7
1.6 Plaintes concernant le produit .....	8
1.7 Déclaration de garantie .....	9
<b>2: Description de la station</b>	<b>11</b>
2.1 Présentation de la station.....	11
2.2 Station de diagnostic SecurView DX.....	12
2.2.1 Systèmes SecurView DX autonomes .....	13
2.2.2 Systèmes multi-stations SecurView DX.....	14
2.3 Station des manipulateurs SecurView RT .....	17
2.3.1 Systèmes SecurView RT autonomes .....	18
2.3.2 Systèmes multistations SecurView RT .....	19
2.4 Division fonctionnelle en configurations multi-stations .....	21
2.5 Groupes d'utilisateurs et mots de passe .....	21
2.6 Démarrage et arrêt.....	23
2.7 Connexion à SecurView .....	24
2.8 Accès aux informations sur l'identifiant d'appareil unique .....	25
<b>3: Patient Manager</b>	<b>27</b>
3.1 Ouverture du Patient Manager.....	27
3.2 Utilisation de la liste de patients.....	28
3.2.1 Sélection des patients .....	28
3.2.2 Les boutons de la liste de patients.....	29
3.2.3 Colonnes de la liste de patients .....	30
3.2.4 États de lecture .....	33
3.2.5 Auto-récupération des données du patient .....	34
3.2.6 Utilisation du menu contextuel .....	35
3.2.7 Fusion de données de patient .....	36
3.2.8 Recherche de patients .....	37

3.3	Création de sessions .....	39
3.4	Importation d'images DICOM .....	41
3.5	Synchronisation de la liste de patients avec MultiView .....	41
<b>4:</b>	<b>Lecture de données patient .....</b>	<b>43</b>
4.1	Affichage d'étude de patients .....	43
4.1.1	Listes de travail des patients .....	43
4.1.2	Listes de travail générées automatiquement .....	44
4.1.3	Listes de travail de sessions .....	45
4.1.4	MG Viewer .....	46
4.2	Affichage d'images de patients .....	47
4.2.1	Parcourir les données des patients .....	48
4.2.2	Utilisation du clavier .....	49
4.2.3	Utilisation du menu circulaire .....	50
4.2.4	Utilisation d'un ReportFlow .....	53
4.2.5	États de lecture et de verrouillage des données d'un patient lors de la lecture .....	53
4.2.6	Déplacement dans l'image (Panning) .....	54
4.2.7	Présentations d'images .....	54
4.2.8	Mode Mosaïque simple temporaire .....	55
4.2.9	Roaming intelligent .....	56
4.2.10	Modes échelle .....	58
4.2.11	Pixel Meter .....	60
4.2.12	Indicateurs de pile et Indicateurs de point temporel .....	61
4.2.13	Travail avec des images échographiques .....	61
4.2.14	MammoNavigator .....	64
4.2.15	Informations sur l'image .....	66
4.2.16	Recouvrements des informations sur le patient .....	67
4.2.17	Captures secondaires MG et captures d'écran MM .....	68
4.3	Visualisation des détails de l'image .....	69
4.3.1	Loupe et loupe inversée .....	70
4.3.2	L'AIE et la barre d'outils de la loupe .....	72
4.3.3	Zoom continu .....	73
4.3.4	Réglages de Fenêtre/Niveau et de Gamma .....	75
4.3.5	Application des tableaux de consultation des valeurs d'intérêt (VOI LUT) .....	77
4.3.6	Images MPE .....	78
4.3.7	Superpositions des champs DICOM 6000 .....	80
4.3.8	Amélioration des images CLAHE .....	81
4.4	Utilisation de la DAO .....	81
4.4.1	Affichage de l'information DAO .....	81
4.4.2	Hologic CAD .....	82
4.4.3	Biomarqueurs par imagerie de Hologic .....	86
4.4.4	Commutation entre plusieurs SR DAO de mammographie .....	87
4.5	Création et affichage des annotations .....	88
4.5.1	Marquage d'une image .....	89
4.5.2	Description d'une zone d'intérêt .....	91

4.5.3	Visualisation des annotations .....	92
4.6	Visualisation et envoi de messages .....	94
4.6.1	Envoi de messages.....	94
4.6.2	Visualisation des messages .....	96
4.7	Fermeture d'une étude.....	97
4.7.1	Fermeture d'une étude par un radiologue .....	97
4.7.2	Fermeture d'une étude par un manipulateur .....	100
4.7.3	Fermeture d'une étude depuis une application externe .....	101
4.8	Options d'impression.....	101
4.9	Synchronisation d'un patient avec une application externe .....	104
4.9.1	Synchronisation manuelle .....	104
4.9.2	Synchronisation automatique .....	105
4.9.3	Synchronisation lorsque vous recevez un message.....	105

**5: Travail avec des images de tomosynthèse \_\_\_\_\_ 107**

5.1	Présentation de l'imagerie de tomosynthèse .....	107
5.2	Navigation dans les images de tomosynthèse .....	109
5.2.1	Boutons de navigation des images de tomosynthèse .....	109
5.2.2	Visualisation des coupes ou plans de coupe de tomosynthèse.....	111
5.2.3	Modification de l'épaisseur du plan de coupe .....	113
5.2.4	Annotation d'une image de tomosynthèse .....	114
5.2.5	Utilisation du mode Ciné .....	115
5.2.6	Utilisation du mode Ciné local .....	116
5.2.7	Smart Mapping .....	116
5.2.8	Défilement des secteurs liés .....	118
5.2.9	Exportation d'une vidéo .....	119
5.3	Affichage des résultats DAO 3D.....	120
5.4	Affichage des résultats de DAO ImageChecker 3D Calc CAD .....	121
5.5	Marquage des coupes ou plans de coupe reconstruits de tomosynthèse .....	124
5.6	Impression des coupes et plans de coupe reconstruits de tomosynthèse .....	125

**6: Configuration des préférences utilisateur \_\_\_\_\_ 129**

6.1	Préférences des flux de production .....	130
6.2	Préférences de présentation d'image .....	132
6.3	Préférences de l'onglet Outils et Recouvrements .....	134
6.4	Préférences de profil d'utilisateur .....	138

**7: Captures d'écran de présentation et ReportFlows \_\_\_\_\_ 141**

7.1	Visualisation des ReportFlow .....	141
7.2	Visualisation des captures d'écran de présentation.....	143
7.3	Création et modification de captures d'écran de présentation.....	144
7.3.1	Création de nouvelles captures d'écran de présentation .....	144
7.3.2	Copie et modification d'une capture d'écran de présentation .....	149
7.3.3	Renommer une capture d'écran de présentation .....	149
7.3.4	Modification de l'icône d'une capture d'écran de présentation.....	150

# Guide de l'utilisateur de la station SecurView DX-RT 11.0

## Table des matières

---

7.4	ReportFlows.....	152
7.5	Lier un ReportFlow à une procédure.....	154
7.6	Création de ReportFlows.....	155
7.7	Préférences de ReportFlow.....	157
7.7.1	Sélection de Workflow.....	158
7.7.2	Configuration d'aperçu de présentation.....	158

## **8: Tâches de l'administrateur** 159

8.1	Ouverture du module d'administration.....	159
8.2	Gestion des profils des utilisateurs.....	160
8.3	Profil d'administrateur.....	164
8.4	Configuration des paramètres au niveau système.....	165
8.4.1	Programmation.....	165
8.4.2	Surveillance de l'espace disque et suppression automatique.....	166
8.4.3	Configuration des fonctions Auto-Fetching/Auto-Completion (Auto-récupération/Auto-achèvement).....	169
8.4.4	Configuration de Active Directory.....	171
8.4.5	Configuration d'un Study List Manager (SLM).....	172
8.4.6	Journalisation d'événement d'application.....	173
8.4.7	Unifi™ Analytics.....	175
8.4.8	Recherche sur PACS.....	176
8.4.9	Configuration de l'interface de synchronisation.....	176
8.4.10	Listes de travail.....	178
8.4.11	Format et unités de date/heure.....	178
8.4.12	Viewer Multimodality.....	178
8.4.13	Paramètres du fabricant.....	179
8.4.14	Score DAO et Score de cas.....	181
8.4.15	Double lecture.....	181
8.4.16	Envoyer les annotations, coupes tomo, état de l'étude.....	182
8.4.17	Établissement local.....	182
8.4.18	Capture secondaire.....	183
8.4.19	Adoption du nom et de l'adresse de l'établissement.....	183
8.5	Configuration des captures d'écran et des ReportFlows de niveau système.....	184
8.5.1	Intervalle de temps précédent/actuel.....	184
8.6	Configuration des noms de procédures d'examen.....	185
8.7	Configuration des recouvrements d'image.....	187
8.7.1	Recouvrement d'image dans MG Viewer.....	187
8.7.2	Recouvrement d'image dans MammoNavigator.....	188
8.7.3	Recouvrement d'image imprimée.....	189
8.8	Gestion de la base de données.....	190
8.8.1	Sauvegarde de la base de données.....	190
8.8.2	Planification de la maintenance de la base de données.....	191
8.8.3	Collecte des fichiers-journaux par groupe.....	191

## **9: Tâches de l'administrateur de cas** 193



9.1	Ouverture du module d'administration.....	193
9.2	Suppression de patients .....	194
<b>10:</b>	<b>Fichiers patients et ReportFlow .....</b>	<b>197</b>
10.1	Exportation de fichiers d'images actuellement affichées .....	197
10.2	Exportation des fichiers DICOM .....	198
10.3	Importer et exporter des ReportFlows.....	200
10.3.1	Importer des ReportFlows depuis un lecteur USB vers SecurView .....	200
10.3.2	Export de ReportFlow depuis SecurView vers un lecteur USB .....	200
<b>Annexe A</b>	<b>Raccourcis clavier.....</b>	<b>201</b>
<b>Annexe B</b>	<b>Guide du manipulateur.....</b>	<b>203</b>
<b>Index</b>	<b>.....</b>	<b>205</b>



## Liste des figures

Figure 1 : SecurView Station de diagnostic DX .....	12
Figure 2 : Circulation des informations avec une station autonome SecurView DX.....	14
Figure 3 : SecurView DX Manager .....	15
Figure 4 : Circulation des informations dans un système multi-stations SecurView DX.....	16
Figure 5 : SecurView Station des manipulateurs RT.....	17
Figure 6 : Circulation d'informations avec des stations SecurView DX et RT autonomes.....	18
Figure 7 : Circulation des images dans une installation multi-stations SecurView DX et RT .....	19
Figure 8 : Les annotations des médecins circulent dans une installation multi-stations SecurView DX et RT .	20
Figure 9 : Fenêtre de connexion .....	23
Figure 10 : Message d'arrêt.....	23
Figure 11 : L'écran Démarrage de SecurView.....	24
Figure 12 : Liste de patients .....	27
Figure 13 : Exemples d'études et séries d'images associées.....	28
Figure 14 : Les boutons de la liste de patients .....	29
Figure 15 : Boutons de recherche de la liste de patients.....	30
Figure 16 : Boîte de dialogue Sélectionner premier patient .....	36
Figure 17 : Critères de recherche locale .....	37
Figure 18 : Critères de recherche PACS.....	38
Figure 19 : Onglet Sessions .....	40
Figure 20 : Lecteur de codes-barres.....	43
Figure 21 : Sélection de la liste de travail combinée, filtre temps de lecture .....	44
Figure 22 : Bouton Visualisation de la liste de travail.....	45
Figure 23 : Exemple de liste de sessions .....	45
Figure 24 : MG Viewer — Écran de gauche .....	46
Figure 25 : MG Viewer — Écran de droite .....	46
Figure 26 : Clavier SecurView DX .....	49
Figure 27 : Menu circulaire.....	50
Figure 28 : Présentations d'images prédéfinies .....	54
Figure 29 : Roaming intelligent.....	56
Figure 30 : Indicateur de Roaming intelligent .....	57
Figure 31 : Pixel Meter.....	60
Figure 32 : Pixel Meter avec arrière-plan blanc indiquant des valeurs de pixel interpolées.....	60
Figure 33 : Indicateur de pile.....	61
Figure 34 : Indicateurs de pile et Indicateurs de point temporel .....	61
Figure 35 : Navigation dans l'image échographique .....	62
Figure 36 : Navigation dans l'image échographique à plusieurs cadres.....	63
Figure 37 : Exemple d'attributs DICOM pour une image.....	66
Figure 38 : Recouvrements des informations sur le patient.....	67
Figure 39 : Outils d'évaluation d'images.....	69
Figure 40 : Loupe .....	71
Figure 41 : Loupe inversée.....	71
Figure 42 : Loupe et barre d'outils AIE.....	72

# Guide de l'utilisateur de la station SecurView DX-RT 11.0

## Table des matières

---

Figure 43 : Boîte de dialogue Niveau de la fenêtre .....	75
Figure 44 : Exemple de liste VOI LUT.....	77
Figure 45 : Sans traitement MPE.....	79
Figure 46 : Avec traitement MPE.....	79
Figure 47 : Image initiale.....	80
Figure 48 : Image avec superposition des champs DICOM 6000.....	80
Figure 49 : Superpositions de ImageChecker CAD et Genius AI Detection.....	83
Figure 50 : ImageChecker CAD a échoué pour l'image .....	83
Figure 51 : CAD sans EmphaSize .....	84
Figure 52 : CAD avec EmphaSize .....	84
Figure 53 : PeerView désactivé .....	85
Figure 54 : PeerView activé .....	85
Figure 55 : Onglet Par sujet et onglet Par sein pour les Biomarqueurs par imagerie de Hologic.....	87
Figure 56 : Exemple de liste DAO SR.....	88
Figure 57 : À main levée.....	89
Figure 58 : Ellipse .....	89
Figure 59 : Flèche .....	89
Figure 60 : Mesure.....	89
Figure 61 : Règle.....	90
Figure 62 : Boîte de dialogue Annotation.....	91
Figure 63 : Exemples d'annotations.....	92
Figure 64 : Sélection d'un examinateur dans le menu circulaire.....	93
Figure 65 : Exemple d'indicateur d'annotation GSPS d'une tierce partie.....	93
Figure 66 : Sous-menu Envoyer tous les messages .....	95
Figure 67 : Sous-menu Envoyer message image.....	96
Figure 68 : Message de fermeture de l'étude pour les patients ayant reçu des messages .....	100
Figure 69 : Boîte de dialogue d'impression de MG Viewer .....	103
Figure 70 : Tomosynthèse : Coupes reconstruites (représentation schématique).....	107
Figure 71 : Boutons de navigation des images de tomosynthèse .....	109
Figure 72 : Outil curseur .....	111
Figure 73 : Curseur V-Split .....	113
Figure 74 : Indicateur d'épaisseur du plan de coupe.....	113
Figure 75 : Bouton Ciné et curseur de contrôle de vitesse.....	116
Figure 76 : Boîte de dialogue Export vidéo tomosynthèse.....	119
Figure 77 : Curseur de tomosynthèse avec indicateurs DAO 3D.....	120
Figure 78 : Outil curseur avec indicateurs ImageChecker 3D Calc CAD ; Logo R2 .....	122
Figure 79 : Repère DAO RightOn .....	123
Figure 80 : Délimitation d'un repère DAO.....	123
Figure 81 : PeerView (1 coupe).....	123
Figure 82 : PeerView (4 coupes).....	123
Figure 83 : Outil curseur avec indicateurs de marquage.....	124
Figure 84 : Boîte de dialogue d'impression de MG Viewer .....	126
Figure 85 : Onglet Flux de production des Préférences utilisateur (vue partielle) .....	129
Figure 86 : Onglet Flux de production .....	130
Figure 87 : Configuration du mélange de temps de lecture.....	131

---

Figure 88 : Onglet Présentation d'image .....	132
Figure 89 : Onglet Outils et Recouvrements .....	134
Figure 90 : Écran Configuration affichage DAO .....	136
Figure 91 : Onglet Biomarqueurs par imagerie de Hologic .....	137
Figure 92 : Onglet Profil utilisateur .....	138
Figure 93 : Onglet ReportFlows .....	142
Figure 94 : Onglet Captures d'écran de présentation .....	143
Figure 95 : Zone Secteur sélectionné .....	146
Figure 96 : Modifier la vue .....	148
Figure 97 : Éditer les variantes de projection .....	148
Figure 98 : Modifier les types d'images .....	148
Figure 99 : Exemple de ReportFlow (vue partielle) .....	152
Figure 100 : Onglet Réglages utilisateur .....	159
Figure 101 : Boutons de réglages utilisateur .....	160
Figure 102 : Boîte de dialogue Nouvel utilisateur .....	161
Figure 103 : Onglet Profil utilisateur .....	164
Figure 104 : La Fenêtre Settings (Paramètres) .....	165
Figure 105 : Surveillance de l'espace disque et paramètres de suppression automatique .....	166
Figure 106 : Boîte de dialogue Configuration des fonctions Auto-récupération/Auto-achèvement .....	169
Figure 107 : Boîte de dialogue Configuration d'Active Directory .....	171
Figure 108 : Boîte de dialogue Configuration d'un SLM .....	172
Figure 109 : Boîte de dialogue Configuration de l'interface de synchronisation .....	177
Figure 110 : Boîte de dialogue Paramètres du fabricant .....	179
Figure 111 : Fenêtre d'identification de la procédure d'examen .....	185
Figure 112 : Onglet Recouvrement d'image dans MG Viewer .....	187
Figure 113 : Onglet MammoNavigator .....	188
Figure 114 : Onglet Recouvrement d'image imprimée .....	189
Figure 115 : Onglet Maintenance .....	190
Figure 116 : Boîte de dialogue Graver un disque de Windows .....	199



## Liste des tableaux

Tableau 1 : Division fonctionnelle entre les stations Manager et Client .....	21
Tableau 2 : Groupes d'utilisateurs et droits .....	22
Tableau 3 : Définition des états de lecture.....	33





# Chapitre 1 Introduction

Ce chapitre présente une vue d'ensemble des stations SecurView® DX et RT de Hologic, ainsi que des informations sur ce guide, les ressources d'assistance au produit et les précautions de sécurité.

## 1.1 Vue d'ensemble

Ce guide explique comment utiliser les stations SecurView :

- Station de diagnostic SecurView DX
- Station des manipulateurs SecurView RT

Ce guide fournit, en outre, des instructions d'utilisation concernant les applications logicielles Hologic supplémentaires suivantes :

- Détection assistée par ordinateur ImageChecker®
- ImageChecker® 3D Calc CAD
- Évaluation de la densité mammaire Quantra™
- Application Synchronization
- Study List Manager

Pour plus d'informations sur l'option avancée de multimodalité, consultez le *Guide de l'utilisateur de l'option avancée de multimodalité SecurView*.

Les stations SecurView fournissent une console dédiée au diagnostic et au dépistage en mammographie. L'interface utilisateur et le workflow du système sont optimisés pour assister les radiologues expérimentés dans leur analyse de grandes quantités de cas de mammographie. L'efficacité et la qualité de l'interprétation sont favorisées par des fonctions particulières, notamment :

- Captures d'écran de présentation prédéfinies
- ReportFlow le mieux adapté
- Clavier de workflow
- Lecteur de codes-barres patient
- Connexion et paramètres de préférence distincts pour chaque utilisateur
- Listes de travail générées automatiquement
- Vues standard prédéfinies
- Prise en charge de la double lecture

SecurView donne accès à des informations supplémentaires sur les patients :

- MammoNavigator permet un accès facile aux images non standard telles que les vues supplémentaires, les mosaïques et les documents numérisés
- Intégration des fichiers Structured Report DAO (SR DAO) de mammographie
- Synchronisation automatique avec des applications externes
- Journalisation d'événement d'application afin de respecter les règles de confidentialité du client
- Le Study List Manager ajoute des patients non locaux à la liste de patients pour faciliter la synchronisation automatique

## 1.2 Usage prévu

 Only

La loi fédérale américaine limite l'utilisation de ce dispositif à un médecin ou sur son ordonnance.

### 1.2.1 Usage prévu de la Station de diagnostic SecurView DX

La console SecurView DX de Hologic est conçue pour la sélection, l'affichage, la manipulation et l'échange films/média d'images multimodalité en provenance de divers systèmes d'imagerie. Elle fournit aussi des interfaces avec divers appareils de stockage et d'impression utilisant DICOM ou d'autres standards d'interface similaires. En conjonction avec des écrans agréés par le FDA, l'appareil peut être utilisé par un médecin qualifié pour afficher, manipuler et interpréter des images mammographiques non-compressées ou compressées sans perte, dans un cadre de mammographie de diagnostic ou de dépistage et de tomosynthèse numérique du sein, tout comme toute autre image de multimodalité DICOM. SecurView DX est généralement utilisé par des professionnels qualifiés, y compris, mais sans s'y limiter, les médecins, les radiologues, les infirmières, les manipulateurs et les assistants médicaux.

### 1.2.2 Usage prévu de la Station des manipulateurs SecurView RT

La station des manipulateurs SecurView RT est une console d'affichage destinée uniquement à la visualisation et elle ne prend pas en charge la lecture de la mammographie de diagnostic. Elle est capable de récupérer pour affichage des images antérieures de mammographie en provenance de PACS ou d'autres systèmes de stockage d'images DICOM.

## 1.3 Utilisation de ce guide

Ce guide est organisé de la manière suivante :

- Cette [Introduction](#) fournit des informations générales sur le système et sur les guides.
- Le chapitre [Description de la station](#) donne un aperçu des stations SecurView, y compris la description des composants. Il explique également comment démarrer et arrêter le système, et comment se connecter.
- Le chapitre [Patient Manager](#) décrit la Liste de patients, qui comprend tous les patients, toutes les études et toutes les images actuellement dans la base de données SecurView. Il explique également comment configurer des sessions de lecture.
- Le chapitre [Lecture de données patient](#) décrit comment ouvrir les données patient pour visualisation, comment utiliser les outils de visualisation et d'annotation, comment fermer une étude, ainsi que les options d'impression.
- Le chapitre [Travail avec des images de tomosynthèse](#) décrit comment visualiser et travailler avec des images de tomosynthèse.
- Le chapitre [Configuration des préférences utilisateur](#) explique comment définir les préférences pour chaque utilisateur.
- Le chapitre [Captures d'écran de présentation et ReportFlows](#) décrit les captures d'écran de présentation et les ReportFlows, comment le radiologue peut sélectionner des ReportFlow spécifiques pour son usage quotidien et comment créer de nouvelles captures d'écran de présentation et de nouveaux ReportFlow.
- Le chapitre [Tâches de l'administrateur](#) décrit les tâches d'administrateur système, comme la gestion des utilisateurs, la configuration des paramètres au niveau du système et la sauvegarde de la base de données patient.
- Le chapitre [Tâches de l'administrateur de cas](#) explique comment l'administrateur de cas peut supprimer des données de patients.
- Le chapitre [Fichiers patients et ReportFlow](#) décrit des procédures destinées à assister le manipulateur pour la gestion des fichiers patients et des fichiers ReportFlow.

### 1.4 Ressources disponibles

En plus de ce guide, les ressources suivantes sont disponibles pour vous aider à utiliser les stations SecurView.

- **Formation** : pour les nouveaux systèmes, l'équipe d'applications de Hologic dispense une formation approfondie à distance aux radiologues et aux manipulateurs. Pour une formation personnalisée supplémentaire, contactez votre représentant Hologic.
- **Centre de formation Hologic** : ce site internet permet d'accéder rapidement aux guides et aux supports de formation des produits Hologic. Son accès est gratuit pour nos clients sous garantie ou sous contrat de maintenance Hologic. Vous trouverez le centre de formation sur le site internet de Hologic ([www.hologic.com](http://www.hologic.com)).
- **Documentation supplémentaire** : outre ce guide, Hologic fournit la documentation suivante pour les stations SecurView :
  - *Notes de publication de la station SecurView DX/RT*
  - *Manuel de contrôle qualité de la station SecurView DX/RT*
  - *Manuel d'installation et de maintenance de la station SecurView DX/RT*
  - *Déclarations de conformité DICOM SecurView de la station SecurView*
  - *Guide de l'utilisateur de l'option avancée de multimodalité SecurView*
  - *Manuel d'installation et de maintenance de l'option avancée de multimodalité SecurView*

Le guide de l'utilisateur SecurView et le guide de l'utilisateur de l'option avancée de multimodalité sont disponibles en ligne. Pour y accéder, sélectionnez l'icône Aide dans la barre d'outils de la station SecurView. Vous pouvez obtenir des exemplaires supplémentaires des versions imprimées des guides auprès de votre représentant Hologic. Les Déclarations de conformité DICOM sont disponibles à l'adresse [www.hologic.com](http://www.hologic.com).

- **Support produit et maintenance** : pour plus d'informations, consultez la page de droits d'auteur de ce guide.

## 1.5 Avertissements et mises en garde

Ce guide utilise les conventions suivantes pour les informations techniques et les informations de sécurité présentant un intérêt particulier.



---

**Avertissement :**

**Une instruction qui, si elle n'est pas suivie, peut entraîner une situation dangereuse.**

---



---

**Mise en garde**

**Une instruction qui, si elle n'est pas suivie, peut entraîner des dommages au système.**

---



---

**Important**

Une instruction dont le but est d'assurer des résultats corrects et des performances optimales, ou de préciser les limitations de l'appareil.

---



---

**Remarque**

Une information destinée à préciser une étape ou une procédure particulière.

---

Avant d'utiliser le système, lisez les avertissements et les conseils de précaution suivants.

### 1.5.1 Utilisation du système



---

**Avertissement :**

**Le système est prévu pour n'être utilisé que par le personnel ayant lu ce guide et ayant reçu une formation concernant son utilisation. Hologic n'est pas responsable de blessures ou de dommages liés à une mise en œuvre incorrecte ou dangereuse du système.**

---



---

**Avertissement :**

**L'accès des utilisateurs administratifs au système d'exploitation ou au système de fichiers d'une autre façon que celle indiquée dans ce guide ou par le personnel formé de Hologic entraîne une corruption ou des modifications du système, rendant le système inutilisable.**

---



---

**Avertissement :**

**N'utilisez ce système qu'en dehors de l'environnement des patients. Ce système n'est agréé que pour une utilisation dans un cabinet.**

---

**Avertissement :**

Le symbole placé à côté du connecteur d'alimentation signale un risque d'électrocution. Afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne branchez l'ordinateur que sur une prise de courant correctement mise à la terre et fournissant une tension et un courant conformes aux caractéristiques du système.

---

**Avertissement :**

Ne placez pas de récipient contenant un liquide sur l'appareil. Si du liquide est renversé, mettez tous les composants du système hors tension avant de nettoyer pour réduire les risques de choc électrique. N'utilisez pas l'appareil si des composants internes ont été en contact avec un liquide ; faites appel au responsable du service technique.

---

**Mise en garde**

Arrêtez toujours l'ordinateur en respectant les procédures préconisées dans ce guide. Le non-respect des procédures d'arrêt du système peut entraîner la perte de données ou endommager le système d'exploitation de l'ordinateur.

---

**Important**

Afin d'assurer le bon fonctionnement du système, la qualité technique des images (le contraste, par exemple) doit être satisfaisante pour le radiologue et conforme aux exigences de la réglementation MQSA (Mammography Quality Standards Act) ou aux normes s'appliquant dans le pays d'utilisation.

---

**Important**

La conception et le mode de fonctionnement de l'appareil sont compatibles avec les pratiques cliniques standard actuelles en matière de mammographie, telles que régies par la réglementation MQSA. Lors de l'implémentation de l'application SecurView dans des protocoles cliniques, les utilisateurs sont tenus de se conformer aux prescriptions de la réglementation MQSA aux États-Unis ou aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation.

---

**Important**

Lors de l'examen d'images d'un appareil FFDM (full-field digital mammography — mammographie numérique plein champ), conformez-vous aux recommandations de l'ACR (American College of Radiologists). Afin de garantir une visualisation optimale des informations de diagnostic, examinez chaque image en mode Pleine résolution. Lorsqu'une image est visualisée avec un facteur de zoom supérieur à un, SecurView agrandit l'image d'origine par interpolation des valeurs de pixel entre les pixels originaux. Les caractéristiques des pixels dans les images agrandies peuvent différer des pixels de l'image originale. Pour obtenir des informations sur les modes d'échelle, consultez [Modes échelle](#) à la page 58.

---



## Important

Pour assurer des performances optimales sur les affichages haute résolution SecurView, respectez les procédures de contrôle de qualité recommandées. Effectuez tous les tests de contrôle de qualité aux fréquences prescrites par les réglementations nationales.

---



## Important

Les stations SecurView sont conçues pour être utilisées comme des stations d'examen d'image uniquement. Elles ne peuvent pas être utilisées pour l'archivage des données d'image ou comme une archive d'image. Pour archiver des images ou des dossiers de patients de manière permanente, utilisez un PACS.

---

## 1.5.2 Installation et maintenance



### Avertissement :

Pour brancher le système sur une prise secteur, utilisez toujours un câble d'alimentation à trois conducteurs relié à la terre et conforme aux réglementations locales. L'utilisation d'un adaptateur à deux broches déconnecte la terre de protection et crée un risque grave d'électrocution.

---



### Avertissement :

Les ordinateurs de la station SecurView sont lourds ! En cas de difficulté pour soulever ou positionner l'ordinateur, demandez de l'aide.

---



### Avertissement :

Avant de nettoyer les composants du système, arrêtez toujours le système conformément aux procédures décrites dans ce guide et débranchez les cordons d'alimentation pour éviter tout choc électrique. N'utilisez jamais d'alcool, de benzène ni de diluant ou autres agents de nettoyage inflammables.

---



### Mise en garde

Ce produit ne comporte aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur.

---



### Mise en garde

Placez l'appareil dans un endroit bien ventilé et climatisé conforme aux conditions de température et d'humidité indiquées dans le manuel d'entretien du produit.

---



### Mise en garde

Ne tentez pas d'installer ni de réparer vous-même le système SecurView. Seul le personnel dûment formé et agréé par Hologic est habilité à installer ou à réparer le système.

---



---

**Mise en garde**

Débranchez le cordon d'alimentation avant de déplacer l'appareil ou de procéder à son entretien.

---



---

**Mise en garde**

Installez ce système derrière le pare-feu de l'établissement pour assurer la sécurité et la protection anti-virus du réseau. Hologic ne fournit aucune protection contre les virus informatiques ni aucune sécurité réseau pour le système. Si un logiciel antivirus est nécessaire, vous trouverez sur le site Web de Hologic des informations sur le programme Hologic de cybersécurité et un guide d'installation du logiciel antivirus.

---

## 1.6 Plaintes concernant le produit

Tout professionnel de la santé ayant des motifs de plainte ou étant insatisfait de la qualité, de la durabilité, de la fiabilité, de la sécurité, de l'efficacité et/ou des performances de ce produit doit le signaler à Hologic.

S'il y a des raisons de croire que le dispositif a causé la blessure grave d'un patient ou y a contribué, avertissez immédiatement Hologic par téléphone, par fax ou par courrier.



## 1.7 Déclaration de garantie

Sauf en cas de mention contraire expresse dans le présent Contrat : i) Hologic garantit au Client initial que l'équipement qu'elle fabrique fonctionnera conformément aux spécifications produit publiées et ce, pendant un (1) an à compter de la date d'expédition ou, si une installation est nécessaire, à partir de la date d'installation (« Période de garantie ») ; ii) les tubes à rayons X utilisés pour la mammographie numérique sont garantis pendant vingt-quatre (24) mois, à savoir garantis à 100 % pendant les douze (12) premiers mois et garantis au prorata selon la méthode linéaire pendant les mois 13 à 24 ; iii) les pièces de rechange et les éléments reconditionnés sont garantis pendant le reste de la Période de garantie ou quatre-vingt-dix (90) jours à compter de l'expédition, selon le délai le plus long ; iv) les consommables sont garantis conformes aux spécifications publiées pendant une période prenant fin à la date de péremption indiquée sur leur emballage respectif ; v) le Logiciel sous licence est garanti pour un fonctionnement conforme aux spécifications publiées ; vi) Hologic garantit que les services sont exécutés dans les règles de l'art ; vii) l'équipement non fabriqué par Hologic est garanti par le fabricant concerné et ladite garantie peut s'étendre aux clients Hologic dans les limites autorisées par le fabricant de cet équipement non fabriqué par Hologic. Hologic ne garantit pas que les produits pourront être utilisés en continu ou sans erreur, ni que les produits fonctionneront avec des produits tiers non agréés par Hologic. Ces garanties ne s'appliquent pas à un article ayant été : (a) réparé, déplacé ou modifié par des personnes autres que le personnel de maintenance agréé par Hologic ; (b) soumis à des abus physiques (y compris thermiques ou électriques), des contraintes ou une utilisation inappropriée ; (c) conservé, entretenu ou utilisé en ne respectant pas les spécifications ou instructions de Hologic applicables, ce qui inclut le refus d'installer les mises à niveau logicielles recommandées par Hologic ; ou (d) désigné comme un produit fourni sous une garantie autre que celle accordée par Hologic, fourni en tant que version préliminaire ou « en l'état ».



## Chapitre 2 Description de la station

Le présent chapitre décrit les modèles de station, la manière dont ils interagissent les uns avec les autres ainsi qu'avec d'autres appareils dans l'environnement clinique. Il explique également comment démarrer et arrêter le système et comment se connecter.

### 2.1 Présentation de la station

Hologic propose les stations SecurView suivantes :

**SecurView Station de diagnostic DX** — Utilisée principalement par les radiologues pour examiner des images de mammographie à des fins de dépistage ou de diagnostic et de tomosynthèse numérique du sein. Vous pouvez installer les stations SecurView DX comme des stations autonomes ou configurer plusieurs d'entre elles comme des stations client qui partagent une base de données centralisée sur SecurView DX Manager.

**SecurView DX Manager** — Donne accès à la base de données centrale et effectue la préparation de l'image pour toutes les stations client SecurView DX connectées.

**SecurView Station des manipulateurs RT** — Utilisée par les techniciens de radiologie pour examiner les images médicales à titre de référence. Vous pouvez installer les stations SecurView RT comme des stations autonomes ou configurer plusieurs d'entre elles comme des stations client qui partagent une base de données centralisée sur SecurView RT Manager. Les stations SecurView RT sont principalement utilisées dans des sites disposant de systèmes Hologic Selenia® FFDM.



#### Remarque

SecurView RT TechMate™ n'est plus pris en charge pour la version 9.0 ou ultérieure.

---

**SecurView RT Manager** — Donne accès à la base de données centrale et effectue la préparation de l'image pour toutes les stations client SecurView RT connectées

### 2.2 Station de diagnostic SecurView DX

Les médecins utilisent les stations de diagnostic SecurView DX pour analyser des images de mammographie dans un contexte de dépistage ou de diagnostic et de tomosynthèse numérique du sein.

SecurView DX permet la navigation dans la liste de patients avec une fonction de requête/récupération pour l'accès aux données des patients, l'analyse et l'annotation des images des patients, l'affichage des résultats des SR DAO de mammographie, l'administration de la station et le réglage des paramètres utilisateur.

Une station SecurView DX, autonome ou client, comprend :

- Un écran large de diagnostic en niveaux de gris ou en couleurs (ou deux écrans au format portrait)
- Un ou deux écrans facultatifs, de plus basse résolution, pour l'option avancée de multimodalité, l'option logicielle MultiView™ MM, Patient Manager, et/ou des applications externes
- Un ordinateur avec Microsoft Windows, un clavier et une souris
- Un clavier de workflow SecurView avec boule de commande (facultatif)
- Un lecteur de codes-barres (en option, non illustré)
- Une alimentation sur onduleur (UPS) (facultatif, non représentée)



#### Remarque

L'option MultiView MM et l'option avancée de multimodalité optimisent l'environnement de lecture électronique de la station de travail SecurView DX. Il est possible d'utiliser un ou deux écrans supplémentaires pour l'option avancée de multimodalité, l'option MultiView MM, la Liste de patients et/ou une application externe agréée (avec installation d'Application Synchronization).

---

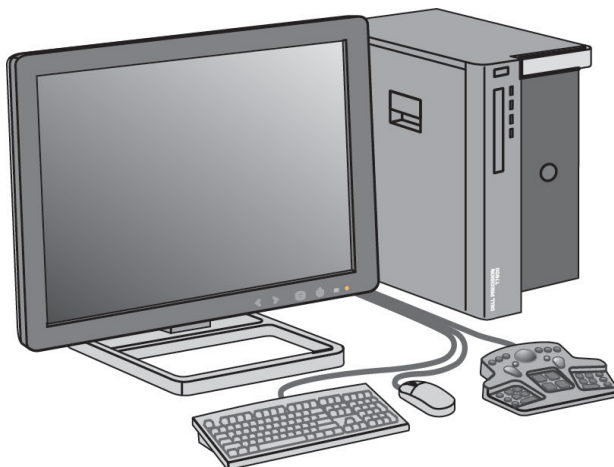


Figure 1 : SecurView Station de diagnostic DX

### 2.2.1 Systèmes SecurView DX autonomes

Une station SecurView DX installée en système autonome offre une gamme complète de fonctionnalités :

- Stockage temporaire des patients en cours
- Patient Manager pour naviguer dans la liste de patients
- Analyse et annotation des images des patients
- Requête et récupération d'études de patients dans le PACS
- Connectivité DICOM
- Base de données avec possibilité de réglage des paramètres système et des préférences utilisateur
- Images préparées pour affichage
- Stockage et affichage des SR DAO de mammographie

L'illustration ci-après indique comment des images provenant de la station d'acquisition circulent jusqu'à la station autonome SecurView DX. Après l'examen des images au niveau de la station SecurView DX, les annotations (renseignées par le médecin) sont automatiquement stockées dans la base de données SecurView et envoyés à toutes les destinations configurées.

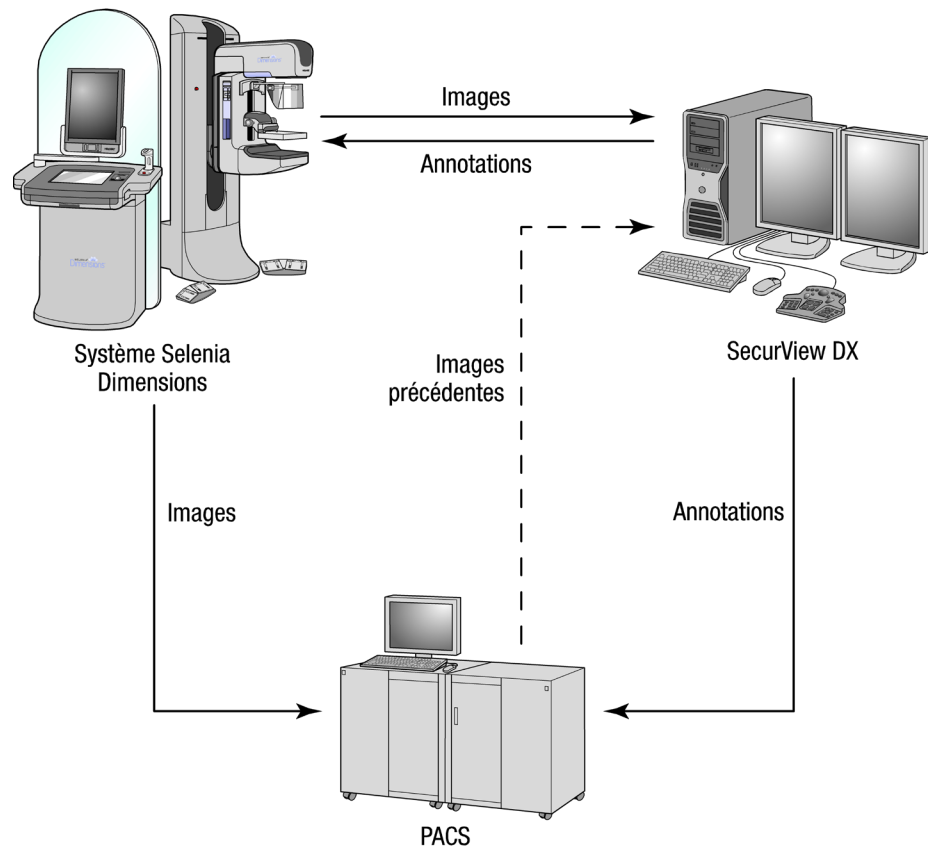



Figure 2 : Circulation des informations avec une station autonome SecurView DX

### 2.2.2 Systèmes multi-stations SecurView DX

Un SecurView DX Manager prend en charge deux stations client SecurView DX ou plus, selon le nombre de patients et les exigences du flux de travail. Le Manager se compose des éléments suivants :

- Un écran au format paysage
- Un ordinateur avec Microsoft Windows, un clavier et une souris
- Une alimentation UPS (non représentée)

Le SecurView DX Manager fournit la base de données centralisée pour le groupe et prépare les images pour toutes les stations clientes SecurView DX connectées. Dans un groupe multi-stations, Manager représente l'entité DICOM et il est en charge de la réception des images DICOM. Un groupe multi-stations constitue une entité DICOM individuelle.

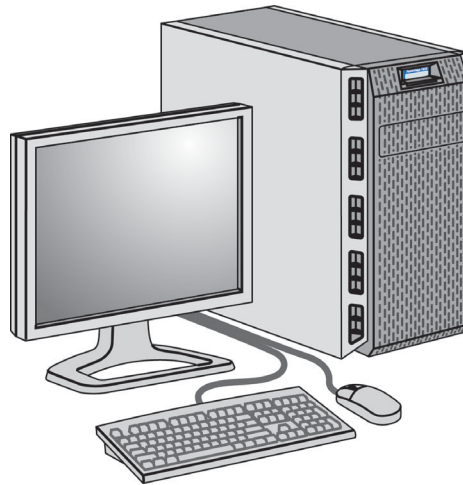

*Figure 3 : SecurView DX Manager*

L'illustration ci-après indique comment des images provenant de la station d'acquisition circulent jusqu'au SecurView DX Manager. Après l'examen des images au niveau de la station SecurView DX, les annotations (renseignées par le médecin) sont automatiquement stockées dans la base de données Manager et envoyés à toutes les destinations configurées.

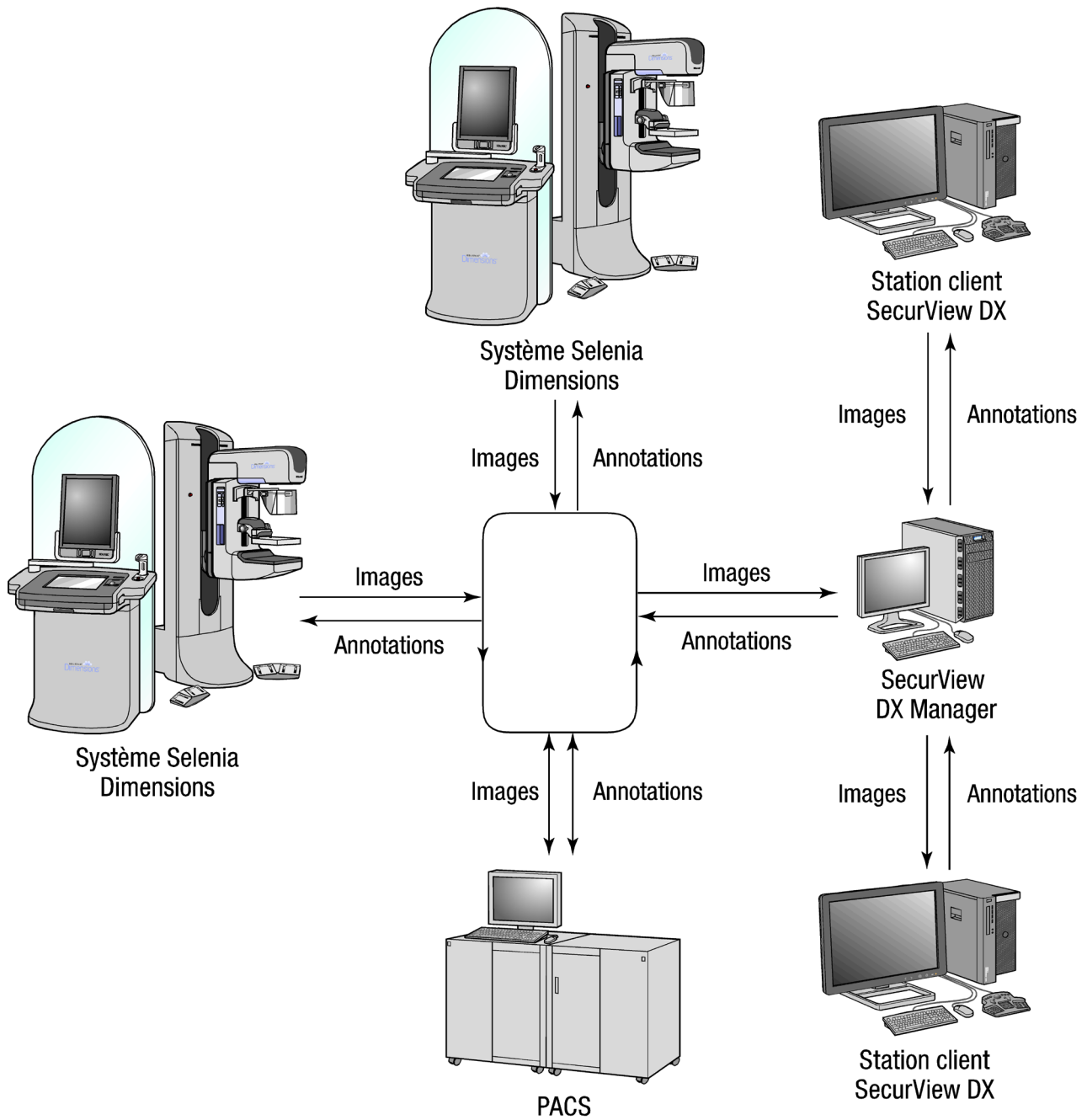


Figure 4 : Circulation des informations dans un système multi-stations SecurView DX



## 2.3 Station des manipulateurs SecurView RT

Les manipulateurs utilisent les stations SecurView RT pour vérifier les nouvelles images, examiner les images antérieures et les annotations du radiologue, ainsi que pour des tâches administratives.

Les stations SecurView RT affichent les images du patient en basse résolution et ne sont donc pas appropriées pour la lecture diagnostic. SecurView RT offre toutefois de nombreuses fonctionnalités de la station SecurView DX, telles que la navigation dans la liste de patients, la fonction de requête/récupération pour l'accès aux données des patients, l'administration de la station et le réglage des paramètres utilisateur.

Les stations SecurView RT sont principalement utilisées dans des sites disposant de systèmes Hologic Selenia FFDM.

Une station SecurView RT, autonome ou client, comprend :

- Un écran au format paysage
- Un ordinateur avec Microsoft Windows, un clavier et une souris
- Une alimentation UPS (non représentée)

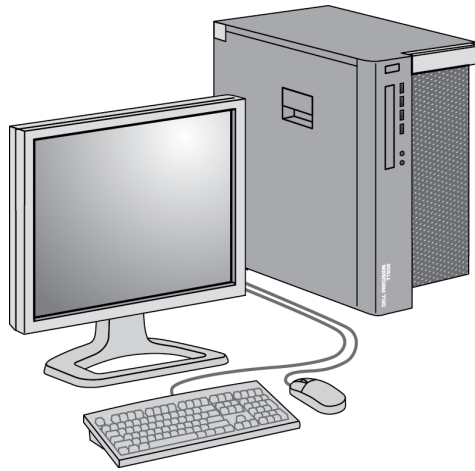


Figure 5 : SecurView Station des manipulateurs RT

### 2.3.1 Systèmes SecurView RT autonomes

Une station SecurView RT installée en système autonome offre une gamme complète de fonctionnalités au manipulateur :

- Vérification au fur et à mesure des nouvelles études et images
- Examen des images antérieures et des annotations du radiologue
- Création et gestion de ReportFlow et de captures d'écran de présentation
- Impression, importation et exportation des fichiers image

L'illustration ci-après indique comment des images provenant de la station d'acquisition circulent jusqu'aux stations autonomes SecurView RT et DX. Après l'examen des images au niveau de la station SecurView DX, les annotations (renseignées par le médecin) sont automatiquement stockées dans la base de données SecurView et envoyés à toutes les destinations configurées, y compris les stations SecurView RT.

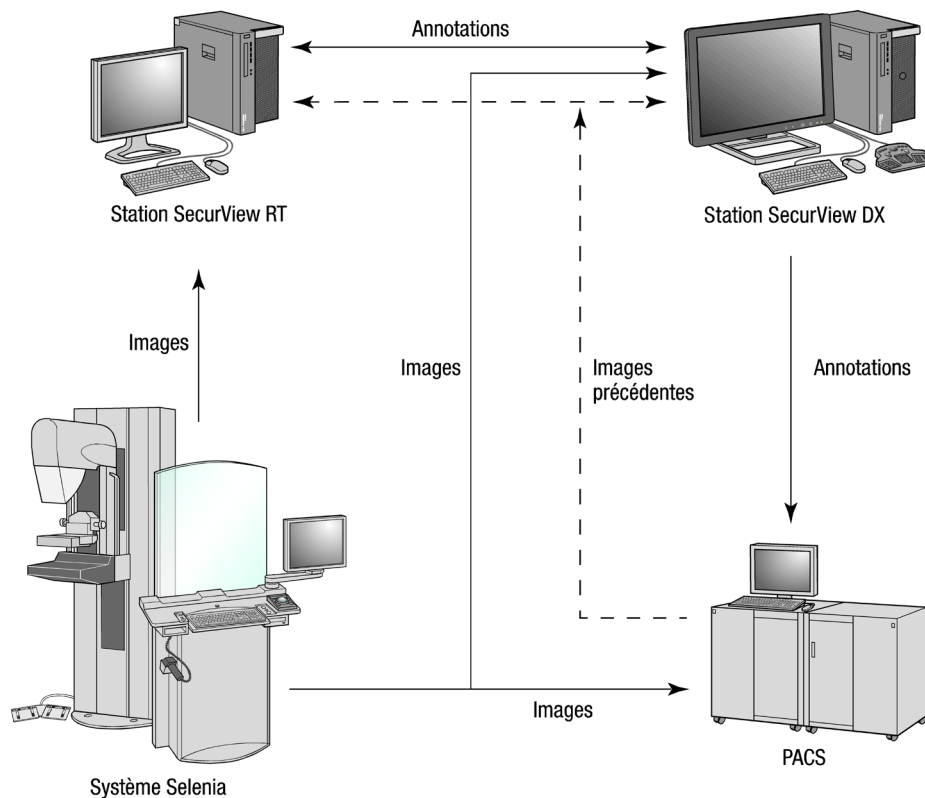


Figure 6 : Circulation d'informations avec des stations SecurView DX et RT autonomes

### 2.3.2 Systèmes multistations SecurView RT

Un SecurView RT Manager prend en charge plusieurs stations clientes SecurView RT, selon le nombre de patients et les exigences du flux de production. Comme pour SecurView DX Manager, le SecurView RT Manager fournit la base de données centralisée pour le groupe et prépare les images pour toutes les stations clientes SecurView RT connectées

L'illustration ci-après présente comment des images provenant de la station d'acquisition circulent jusqu'aux stations SecurView RT et DX.

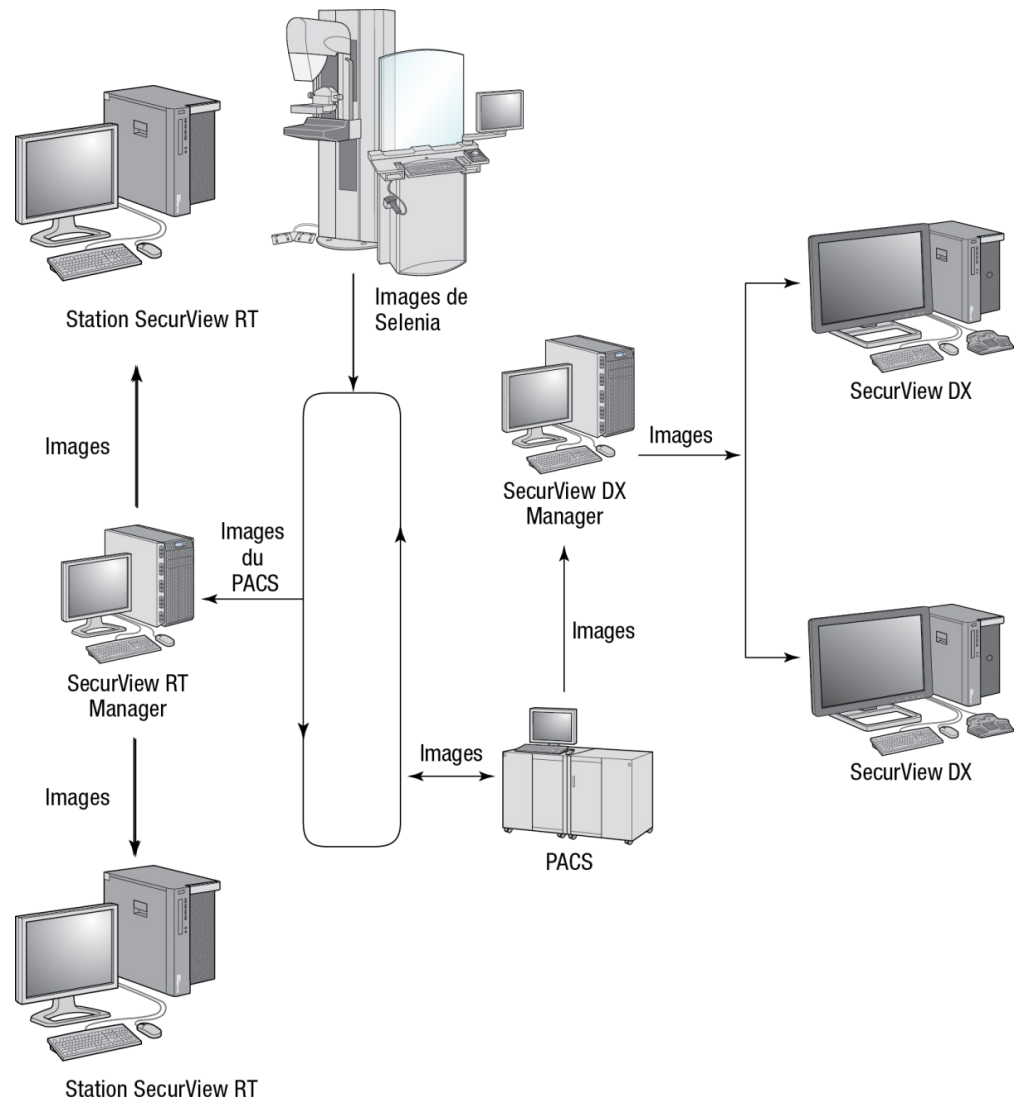


Figure 7 : Circulation des images dans une installation multi-stations SecurView DX et RT

Après l'examen des images au niveau de la station SecurView DX, les annotations renseignées par le médecin créées dans la station cliente sont automatiquement stockées dans la base de données SecurView DX Manager et envoyées via Manager à toutes les destinations configurées extérieures au groupe client, y compris les stations SecurView RT autonome ou Manager.

Le SecurView RT Manager réceptonnaire distribue les annotations à tous les clients connectés. En conséquence, toute annotation rédigée par un médecin est disponible pour les manipulateurs sur les stations clientes SecurView RT.

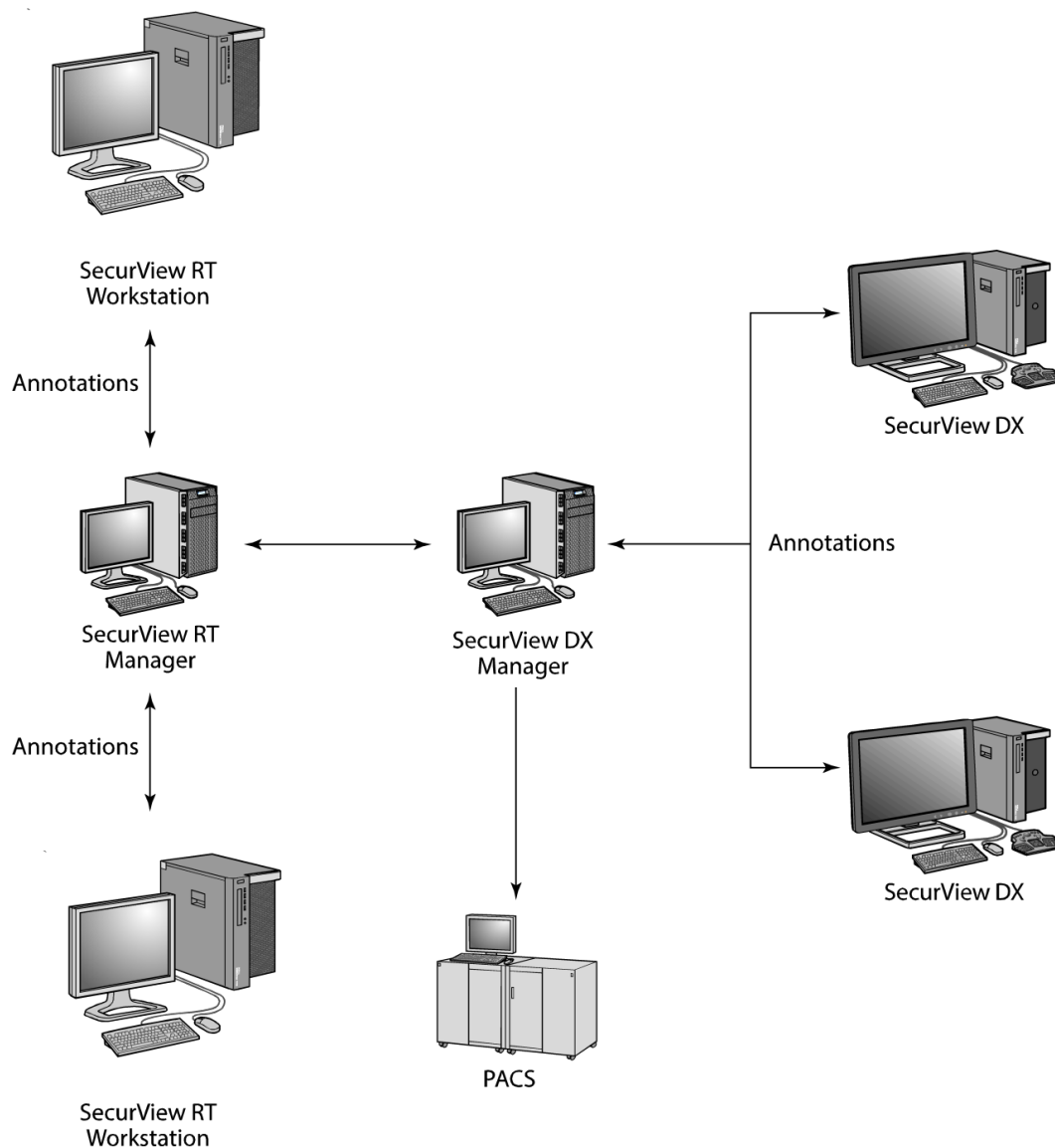


Figure 8 : Les annotations des médecins circulent dans une installation multi-stations SecurView DX et RT

## 2.4 Division fonctionnelle en configurations multi-stations

Le tableau suivant montre comment la fonctionnalité se divise entre les stations Manager et Client.

Tableau 1 : Division fonctionnelle entre les stations Manager et Client

Fonction	SecurView DX ou RT Manager	SecurView DX Client	SecurView RT Client
Patient Manager pour la navigation dans la liste de patients		X	X
Lecture diagnostic des données patient		X	
Annotation d'images de patients		X	X
Affichage des SR DAO		X	X
Affichage en basse résolution d'images de patients et annotations			X
Requête et récupération d'études de patients dans le PACS		X	X
Stockage temporaire d'études en cours et SR DAO	X		
Connectivité DICOM	X		
Base de données avec possibilité de réglage des paramètres système et des préférences utilisateur	X		

## 2.5 Groupes d'utilisateurs et mots de passe

Un administrateur du système SecurView doit enregistrer chaque utilisateur en créant un profil utilisateur qui comprend les éléments suivants :

- **Nom d'utilisateur** – Un nom permettant au système d'identifier l'utilisateur
- **Mot de passe** – Permet une connexion sécurisée.
- **Prénom et nom de famille** – Le véritable nom de l'utilisateur.
- **Groupe(s) d'utilisateurs** – Radiologue, Manipulateur, Administrateur, Administrateur de cas, ou Maintenance (consultez le tableau suivant).
- **Droits** – Un ensemble d'autorisations pour examiner les images et configurer les paramètres du système.

Chaque utilisateur a accès à des modules de programme spécifiques selon le ou les groupes auxquels il est affecté et ses droits (consultez [Gestion des profils des utilisateurs](#) à la page 160).

Tableau 2 : Groupes d'utilisateurs et droits

Groupe d'utilisateurs	Droits – Les utilisateurs peuvent. . .
Radiologue	<ul style="list-style-type: none"><li>• Configurer les préférences du flux de production personnalisées (par exemple : Les outils par défaut, les captures d'écran de présentation, les ReportFlows)</li><li>• Effectuer des lectures de diagnostic d'études de patients</li><li>• Saisir et visualiser des annotations, grouper les multiples dossiers d'un même patient, suivre l'état de lecture d'une étude</li><li>• Rechercher des patients dans des PACS</li><li>• Fermer les études</li></ul>
Manipulateur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Créer des listes de travail pour des sessions de dépistage et de diagnostic (sur SecurView DX)</li><li>• Visualiser des annotations et des études de patients</li><li>• Grouper les multiples dossiers d'un même patient, suivre l'état de lecture d'une étude (sur SecurView DX)</li><li>• Rechercher des patients dans des PACS</li></ul>
Administrateur de cas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Supprimer des images et des patients de la base de données</li><li>• Fusionner les multiples dossiers d'un seul patient</li></ul>
Administrateur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Créer de nouveaux utilisateurs et leur attribuer des droits</li><li>• Configurer les préférences du flux de production au niveau du système (par exemple : les captures d'écran de présentation, les ReportFlows)</li><li>• Configurer les autres paramètres système tels que la surveillance de l'espace disque, la récupération automatique et la synchronisation avec une application externe</li><li>• Sauvegarder la base de données</li><li>• Configurer le recouvrement d'images et MammoNavigator</li></ul>

Tableau 2 : Groupes d'utilisateurs et droits

Groupe d'utilisateurs	Droits – Les utilisateurs peuvent. . .
Entretien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Configurer les paramètres réseau et DICOM</li> <li>• Configurer la station, acheminer les images, supprimer des patients de la base de données, et gérer les licences</li> <li>• Avoir accès à tous les paramètres Administrateur</li> </ul>

## 2.6 Démarrage et arrêt

Normalement vous pouvez laisser les stations allumées. Utilisez ces procédures si quelqu'un a éteint le système ou si vous avez besoin de l'arrêter (par exemple si vous devez déplacer l'ordinateur ou si vous êtes informé d'une prochaine coupure de courant).

**Pour démarrer une station SecurView :**



### Remarque

Dans un environnement multi-stations, démarrez le Manager avant les stations client.

1. Allumez les périphériques (d'abord l'UPS, puis les écrans).
2. Démarrez l'ordinateur de la station SecurView. L'application SecurView démarre automatiquement et affiche la fenêtre de *Connexion*.

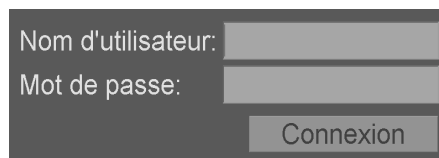


Figure 9 : Fenêtre de connexion

Pour plus d'informations sur la réalisation d'une connexion, consultez [Connexion à SecurView](#) à la page 24.

**Pour arrêter une station SecurView :**

1. Dans le sélecteur d'applications, sélectionnez **Arrêter**.

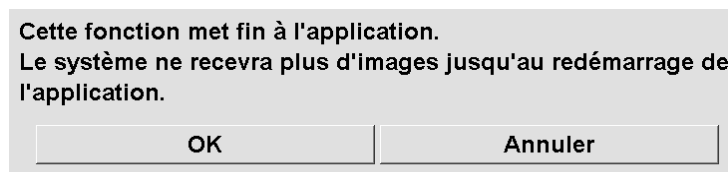


Figure 10 : Message d'arrêt

2. Sélectionnez **OK**. L'application SecurView se ferme et l'ordinateur s'éteint.
3. Éteignez les périphériques (d'abord les écrans, puis l'UPS).

### 2.7 Connexion à SecurView

Chaque utilisateur doit se connecter au moyen d'un nom et d'un mot de passe distincts. Un administrateur du système crée les comptes d'utilisateur et les attribue à un ou plusieurs groupes (Radiologue, Manipulateur, Administrateur de cas, Administrateur, Maintenance). Chaque groupe bénéficie d'un ensemble de privilèges d'accès à des modules de programme spécifiques. Consultez [Groupes d'utilisateurs et mots de passe](#) à la page 21.

#### Pour se connecter à l'application SecurView :

Dans la fenêtre de *Connexion*, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis sélectionnez **Connexion** pour afficher l'écran *Démarrage de SecurView*.

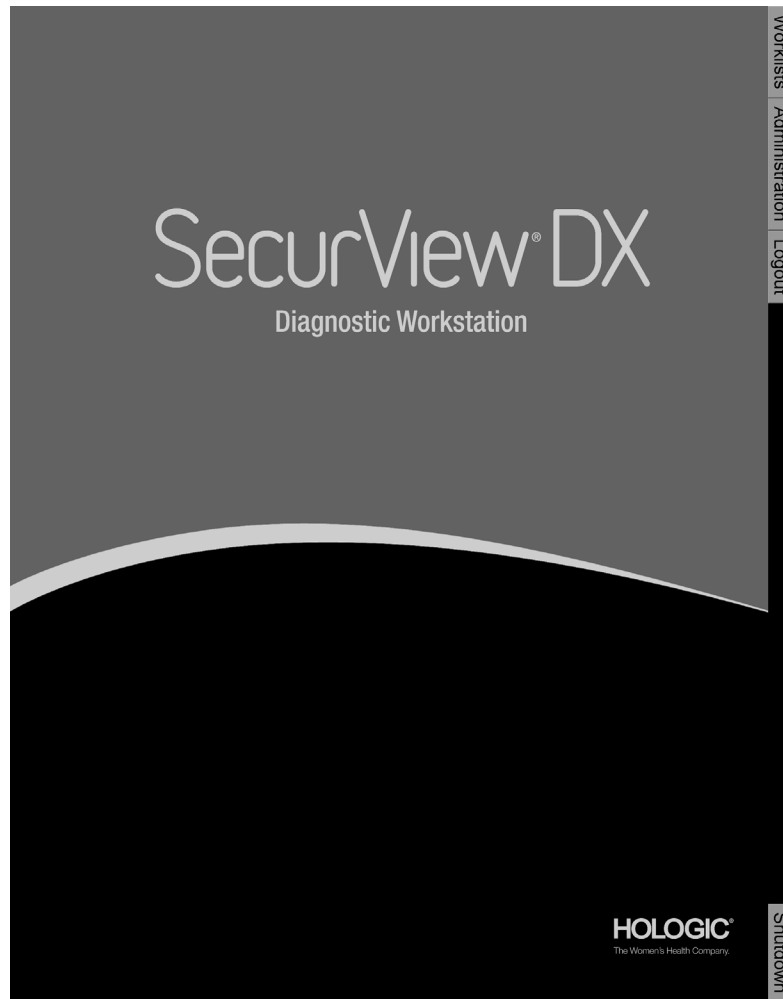


Figure 11 : L'écran Démarrage de SecurView



L'accès à l'application s'effectue par les onglets à la droite de l'écran :

- **Listes de travail** : pour avoir accès aux listes de travail automatiques et aux sessions définies par l'utilisateur. Cet onglet n'est disponible que pour les radiologues sur station SecurView DX. Consultez [Affichage d'étude de patients](#) à la page 43.
- **Administration** : pour accéder au module Administration qui vous permet de sélectionner les données patients à analyser (consultez [Ouverture du Patient Manager](#) à la page 27) et de définir les préférences des utilisateurs (consultez [Configuration des préférences utilisateur](#) à la page 129).
- **Déconnexion** : pour vous déconnecter de SecurView et afficher la fenêtre *Connexion*.
- **Arrêter** : pour arrêter SecurView et éteindre l'ordinateur. Consultez [Démarrage et arrêt](#) à la page 23.

## 2.8 Accès aux informations sur l'identifiant d'appareil unique

L'identifiant unique du système (UDI) est un code numérique ou alphanumérique unique qui permet de distinguer un système médical lors de la distribution et de son utilisation. Les informations relatives à l'UDI apparaissent dans l'écran *À propos de...* de l'application SecurView.

**Pour accéder aux informations relatives à l'UDI :**

1. Connectez-vous à l'application SecurView (consultez [Connexion à SecurView](#) à la page 24).
2. Sélectionnez l'onglet **À propos de...**

Les informations relatives à l'UDI s'affichent sur l'écran *À propos de...*



## Chapitre 3 Patient Manager

Le Patient Manager fournit la liste de tous les patients avec leurs études et les séries d'images actuellement disponibles dans la base de données, ainsi que les études de patients non locaux reçues via le Study List Manager. Avec Patient Manager vous pouvez :

- Sélectionner des patients pour visualisation
- Rechercher des études de patient
- Créer des sessions (définition à l'avance de listes de travail pour analyse)
- Suivre l'état de lecture des études (SecurView DX uniquement)
- Importer des images DICOM dans SecurView
- Vous synchroniser avec un Study List Manager externe

### 3.1 Ouverture du Patient Manager

Dans le sélecteur d'applications, sélectionnez **Administration**. L'onglet **Patient Manager** et la Liste de patients apparaissent. L'onglet **Liste de patients** est la fenêtre principale pour commencer à visualiser les images des patients.

Date de l'étude	Nom	ID patient	Date de naissance	Modalité	Etat	Remarque	Type	DAO	Complexité DAO	Priorité de lecture	Message	P	Radiologue	Double interprète	Technicien	Ng
2021-02-03	20000160	20000160	1957-01-01	MG+	Non nt.		Dépistage	+								Me
2021-02-03	AW5_3001_3015	1.2.276.0.28.3.203	1970-01-01	MG	Non nt.		Dépistage									Da
2010-01-15	Phis_Scoring_Test	Phis_Scoring_Test	1970-02-31	MG	Ancien											HC
2021-02-01	MACH30_IMAGES	Analyzer_316211253	na	US	Non nt.		Diagnost.									Wa
2021-02-01	100_3D_CAD_C	24861649	1963-01-01	MG+	Non nt.		Dépistage									Ma
2021-02-03	30100013	30100013	1944-01-01	MG+	Non nt.		Dépistage	+								Se
2021-02-03	HOLX_3DQ_Ext	HOLX_3DQ_Ext	1949-01-01	MG+	Non nt.		Dépistage	Haute	Résultats multiples	Haute						HC
2021-02-03	00300093	00300093	2007-01-01	MG+	Non nt.		Dépistage	+								Ma
2021-02-03	20500092	20500092	1947-01-01	MG+	Non nt.		Dépistage	+								Se
2021-02-03	IT450_Ata	110-08-001-3BC21	1900-01-01	MG	Non nt.		Dépistage									St
2021-02-03	HologicTestData	HologicTestData_002	1962-10-29	MG	Non nt.		Dépistage									Yo
2021-02-09	1_0001_10133255	1.2.276.0.28.3.273	1970-01-01	MG+	Non nt.		Dépistage	Haute	Résultats multiples	Normal						Yo
2021-02-09	2_0001_10133422	1.2.276.0.28.3.273	1970-01-01	MG	Non nt.		Dépistage	+								Yo
2021-02-09	2_0002_10133502	1.2.276.0.28.3.273	1970-01-01	MG	Non nt.		Dépistage	+								Yo
2021-02-09	2_0003_10133606	1.2.276.0.28.3.273	1970-01-01	MG	Non nt.		Dépistage	+								Yo
2021-02-09	2_0004_10133642	1.2.276.0.28.3.273	1970-01-01	MG	Non nt.		Dépistage	+								Yo
2021-02-09	2_0005_10133820	1.2.276.0.28.3.273	1970-01-01	MG	Non nt.		Dépistage	+								Yo
2021-02-09	1_0002_10134054	1.2.276.0.28.3.273	1970-01-01	MG+	Non nt.		Dépistage	Haute	Résultats multiples	Normal						Yo
2021-02-09	3_0001_10134221	1.2.276.0.28.3.273	1970-01-01	MG+	Non nt.		Dépistage	Mo	Résultat unique	Normal						Yo
2021-02-09	4_0001_10135039	1.2.276.0.28.3.273	1970-01-01	MG+	Non nt.		Dépistage	Haute	Résultats multiples	Haute						Yo
2021-02-09	5_0001_10135118	1.2.276.0.28.3.273	1970-01-01	MG+	Non nt.		Dépistage	Mo	Résultats multiples	Normal						Yo
2021-02-09	1_0003_10135142	1.2.276.0.28.3.273	1970-01-01	MG+	Non nt.		Dépistage	Haute	Résultats multiples	Normal						Yo
2021-02-09	1_0004_10140536	1.2.276.0.28.3.273	1970-01-01	MG+	Non nt.		Dépistage	Haute	Résultats multiples	Normal						Yo
2021-02-09	3_0002_10141039	1.2.276.0.28.3.273	1970-01-01	MG+	Non nt.		Dépistage	Mo	Résultat unique	Normal						Yo

Figure 12 : Liste de patients

Patient Manager propose trois onglets :

- **Liste de patients** : affiche tous les patients disponibles dans le système et offre des options pour rechercher, sélectionner et analyser des patients.
- **Sessions** : fournit une présentation des sessions et une vue d'ensemble des patients dans les sessions. Vous pouvez également modifier les sessions pour changer l'ordre de tri ou pour ajouter ou supprimer des patients.

- **Journal** : enregistre les tâches d'impression ayant échoué, les échecs de la fonction Auto-Récupération, ainsi que d'autres événements liés aux échanges d'informations avec les systèmes DICOM.

### 3.2 Utilisation de la liste de patients

La liste de patients présente tous les patients et toutes les études et séries actuellement présents dans la base de données.

#### 3.2.1 Sélection des patients

Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs patients comme suit :

- Tapez les premières lettres du nom du patient pour avancer dans la liste de patients.
- Sélectionnez un patient en cliquant dessus. Cliquez sur + pour afficher les études et les séries d'images associées à chaque étude.

Liste de patients										
Date de l'étude	Nom	ID patient	Date de naissa	Modalité	Etat	Remarque	Type	DAO	Complexité DAO	Priorité de lecture
+ 2021-02-03	20600160	20600160	1957-01-01	MG+	Non int...		Dépistage	+		
+ 2021-02-03	AWS_0001_3015...	1.2.276.0.28.3.203...	1970-01-01	MG	Non int...		Dépistage			
+ 2010-01-15	Prior Scrolling Test	Prior_Scrolling_Test	1970-12-31	MG	Ancien					
+ 2021-02-01	MACH30_IMAGES	Axplore_316211253	n/a	US	Non int...		Diagnosti...			
+ 2021-02-01	100_3D-CAD_C...	24861649	1963-01-01	MG+	Non int...		Dépistage			
- 2021-02-01				MG	Non inte...		Dépistage			
	L MLO l...			MG						
	L CC Br...			MG						
	L MLO ...			MG						
	R CC B...			MG						
	R MLO ...			MG						
	L CC Br...			MG						
	L MLO ...			MG						
	R CC B...			MG						
	R MLO ...			MG						
	L CC Br...			MG						
	L MLO ...			MG						
	R CC B...			MG						
	R MLO ...			MG						
	L CC Int...			MG						
	R CC In...			MG						
	R MLO l...			MG						
+ 2021-02-03	30100013	30100013	1944-01-01	MG+	Non int...		Dépistage	+		
+ 2021-02-03	HOLX_3DQ_Exa...	HOLX_3DQ_Exa...	1949-01-01	MG+	Non int...		Dépistage	Haute	Résultats multiples	Haute
+ 2021-02-03	00300593	00300593	2007-01-01	MG+	Non int...		Dépistage	+		

Figure 13 : Exemples d'études et séries d'images associées

- Ajouter d'autres patients, un à un, en cliquant dessus.
- Sélectionnez un bloc de patients en cliquant sur le premier patient puis, tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé, en déplaçant le pointeur de la souris sur le dernier patient que vous voulez sélectionner (au-dessus ou en dessous). Puis relâchez le bouton de la souris.

**Pour débiter l'analyse :**

- Sélectionnez un ou plusieurs patients (jusqu'à 100), puis sélectionnez **Révision**, ou
- Double-cliquez sur un patient (pour ouvrir les données d'un seul patient) ou
- Utilisez le lecteur de codes-barres pour lire le code-barres d'un patient.

SecurView referme la liste de patients, ouvre le Mammography (MG) Viewer sur le premier patient et affiche les images en utilisant le ReportFlow défini dans vos préférences utilisateur.

### 3.2.2 Les boutons de la liste de patients

Le Patient Manager propose des boutons pour aider à gérer les patients.



Figure 14 : Les boutons de la liste de patients

Les boutons présentent les fonctions suivantes :

- **Réinitialiser les colonnes** — Disposer toutes les colonnes selon les réglages par défaut.
- **Renvoyer** — Renvoyer manuellement des objets DICOM (annotations GSPS, rapports GSPS, images de capture secondaire MG ou images de capture d'écran MM) vers toutes les destinations configurées pour lesquelles une précédente tentative a échoué (SecurView DX uniquement). Ce bouton est disponible si au moins un patient sélectionné est dans l'état « Interprété\* » (consultez [États de lecture](#) à la page 33) ou si un astérisque « \* » figure dans la colonne Message de la Liste de patients.
- **Messages** — Réordonner la liste de patients de manière à ce que les patients avec messages apparaissent en haut.
- **Contrôle** — Commencer la lecture des données d'un ou plusieurs patients sélectionnés sur le MG Viewer. Consultez [Sélection des patients](#) à la page 28.
- **Effacer** — Effacer les patients sélectionnés.
- **Mettre à jour Liste de patients** — Ajouter toute nouvelle étude à la liste de patients. Si la station d'acquisition ou le système PACS envoie des images alors que la liste de patients est ouverte, les nouveaux éléments figurent automatiquement sur la liste de patients.
- **Grouper patients** — Fusionner manuellement deux dossiers de patients. Consultez [Fusion de données de patient](#) à la page 36.
- **Suspendre et revoir** — Disponible pendant la lecture des données d'un patient. Sélectionnez ce bouton pour interrompre la lecture de la Liste de travail et de patients actuels pour examiner un ou plusieurs patients prioritaires. Après avoir Suprécédemment ouverts pour reprendre la lecture.

Pour activer le mode Suspendre et revoir :

- (1) Dans le mode Revoir, sélectionnez Liste de patients sur le clavier ou la barre d'outils.
- (2) Lorsque la fenêtre Patient Manager s'affiche, sélectionnez un ou plusieurs patients à examiner, puis sélectionnez le bouton **Suspendre et revoir**. Une nouvelle session est prête à être examinée.

(3) Après avoir terminé la session intermédiaire, sélectionnez le bouton de la barre d'outils pour quitter le mode Revoir. Vous reprenez ensuite la session précédente là où vous l'avez interrompue.

Consultez également [Utilisation du menu contextuel](#) à la page 35.

---

### Remarque

En revenant à une liste de travail automatique après **Suspendre et revoir**, il est possible que l'ordre des patients dans la liste de travail ait changé si bien qu'un patient qui n'a pas été encore examiné précède le patient actuellement pris en charge. (consultez [Préférences des flux de production](#) à la page 130).

---

- **Importer...** — Importer des fichiers DICOM de patients dans la base de données SecurView. Consultez [Importation d'images DICOM](#) à la page 41.
- **Annuler l'importation** — Activé lors de l'importation de fichiers DICOM. Sélectionnez ce bouton pour arrêter le processus d'importation. SecurView conserve les images importées.

Trois boutons sont utilisés pour créer et modifier des sessions (consultez [Création de sessions](#) à la page 39) :

- **Créer une session** — Créer une liste de patients à analyser.
- **Recharger** — Activé lorsque vous modifiez des patients dans une session. Sélectionnez ce bouton pour annuler les modifications que vous avez apportées.
- **Annuler modification** — Activé lorsque vous modifiez des patients dans une session. Sélectionnez cette option pour désélectionner tous les patients mis en évidence.

Deux boutons de recherche figurent sous la liste de patients. Consultez [Recherche de patients](#) à la page 37.



Recherche locale Recherche sur PACS

Figure 15 : Boutons de recherche de la liste de patients

- **Recherche locale** — Rechercher des patients dans la base de données SecurView locale.
- **Recherche sur PACS** — Rechercher des patients et les récupérer d'un PACS.

### 3.2.3 Colonne de la liste de patients

La liste de patients présente des en-têtes de colonne que vous pouvez utiliser pour trier et gérer les patients. Par exemple, vous pouvez sélectionner n'importe quel en-tête de colonne pour trier les patients par date d'étude, nom, état de lecture, etc. Le tri peut s'effectuer selon deux critères. Lorsque vous sélectionnez une colonne, celle-ci devient le principal critère de tri et l'ancien principal critère devient automatiquement le secondaire. Lorsque vous triez en fonction d'une colonne, SecurView réduit toutes les études et séries de patient et trie les éléments de la liste au niveau patient.

Vous pouvez aussi modifier la largeur et la position des colonnes :

- Faites glisser un en-tête de colonne à la position désirée dans la liste de patients.
- Faites glisser le bord droit de la colonne (dans l'en-tête) pour modifier la largeur.

Lorsque vous quittez le module Administration, SecurView sauvegarde l'arrangement des colonnes comme une préférence utilisateur.

Cette section décrit les colonnes en indiquant ce qui apparaît au niveau du patient, sauf indication contraire.

- **Date de l'étude** – Date d'acquisition de l'étude la plus récente. Pour les études non locales, « non local » s'affiche au niveau série à la place de la description de la série.
- **Nom** – Nom du patient (nom de famille, prénom), jusqu'à 100 caractères.



---

### Remarque

Les caractères contenus dans le nom d'un patient qui ne sont pas pris en charge par SecurView sont remplacés par un point d'interrogation (« ? »).

---

- **ID patient** – Numéro d'identification du patient, jusqu'à 70 caractères. Un astérisque (\*) signale un patient fusionné ou combiné.



---

### Attention :

**SecurView utilise les ID patient (et la date de naissance) pour identifier les patients et affecter de nouvelles données aux données existantes des patients. Les ID de patient sont uniques au niveau de l'appareil d'acquisition des images. SecurView n'est pas en mesure d'identifier des données incorrectes provenant d'entrées erronées effectuées au niveau de la station d'acquisition ou du système de planification des patients. En cas d'ID patient incorrects, des images sont susceptibles d'être ajoutées au dossier patient incorrect, et ainsi entraîner la confusion dans les données des patients.**

---

- **Date de naissance** – Date de naissance du patient.
- **Modalité** – Liste séparée par des virgules de toutes les modalités de chaque étude de patient. Les études et séries de tomosynthèse ont pour modalité « MG + ». Les études non locales peuvent être de modalité US et MR. Au niveau des études, chaque série apparaît avec sa latéralité, sa vue, son type d'image, et son nombre d'images.
- **État** – Indique l'état de lecture pour le patient et pour chaque étude du patient (SecurView DX uniquement). Consultez [États de lecture](#) à la page 33.



---

### Remarque

Les études non locales ne présentent pas d'état. La colonne État est vide pour les études non locales.

---

- **Remarque** – Indique un statut intermédiaire pour l'étude la plus récente (Consultation nécessaire, Images supplémentaires requises, Images supplémentaires reçues, ou En attente) (SecurView DX uniquement). Consultez [Fermeture d'une étude](#) à la page 97.

- **Type** – Indique le type de l'étude la plus récente (dépistage ou diagnostic).
- **DAO** – Indique avec un « + » si un rapport DAO est disponible pour un patient. Si un rapport DAO inclut un indicateur temps de lecture (par exemple, Hologic Genius AI™ Detection), la valeur de l'indicateur temps de lecture (faible, moyen ou haut) s'affiche au lieu d'un « + ». Au niveau du patient, si plusieurs études ont un rapport DAO avec un indicateur temps de lecture, la valeur la plus élevée pour l'étude la plus récente s'affiche.
- **Complexité DAO** – Indique le nombre de résultats (pas de résultats, résultat unique ou résultats multiples) si un rapport DAO est disponible pour un patient qui inclut la complexité DAO (par exemple Hologic Genius AI Detection). Au niveau du patient, si plusieurs études ont un rapport DAO avec complexité DAO, la valeur la plus récente pour l'étude la plus récente s'affiche.
- **Priorité de lecture** – Indique la priorité de lecture (normale ou élevée) si un rapport DAO est disponible pour un patient qui inclut la priorité de lecture (par exemple Hologic Genius AI Detection). Au niveau du patient, si plusieurs études ont un rapport DAO avec priorité de lecture, la valeur la plus récente pour l'étude la plus récente s'affiche.
- **Message** – Indique qu'un ou plusieurs messages sont disponibles pour un patient (consultez [Visualisation et envoi de messages](#) à la page 94). Un signe « + » indique que la station SecurView a reçu un ou plusieurs messages. Un astérisque « \* » indique qu'un problème est survenu alors que la station a tenté d'envoyer un message. Les manipulateurs peuvent marquer les patients ayant des messages comme examinés (consultez [Fermeture d'une étude par un manipulateur](#) à la page 100).
- **AF** – Indique l'état d'auto-récupération du patient (SecurView DX uniquement). Consultez [Auto-récupération des données du patient](#) à la page 34.
- **P** – Indique qu'un patient est protégé contre la suppression automatique. Pour protéger un patient, cliquez sur le patient avec le bouton droit de la souris puis sélectionnez **Protéger contre la suppression automatique**. Consultez également [Utilisation du menu contextuel](#) à la page 35.
- **Radiologue(s)** – Nom du ou des radiologues qui ont interprété l'étude ou verrouillé les données d'un patient en « Consultation nécessaire », « Images supplémentaires requises (ou reçues) », ou « En attente ». Un astérisque (\*) apparaît en regard du nom du radiologue ayant verrouillé les données du patient (SecurView DX uniquement).
- **Manipulateur(s)** – Nom du ou des manipulateurs qui ont acquis les images du patient.
- **Médecin traitant** – Nom du médecin traitant.
- **Numéro d'accès** – Le numéro d'accès de l'étude la plus récente lors de l'affichage au niveau du patient.
- **Nom de l'établissement** – Liste de noms d'établissement, classés selon l'âge des études disponibles.
- **Nombre d'examens** – Nombre total d'études disponibles.
- **Sexe** – Sexe du patient, « F » ou « M ».



- **Double interprétation** – Indique les études soumises à la double interprétation (SecurView DX uniquement).
- **Examiné** – Cette colonne apparaît uniquement sur SecurView RT. Un « + » indique qu'un message reçu a été examiné sur SecurView RT pour au moins une étude du patient. Les manipulateurs peuvent marquer les patients ayant des messages comme examinés (consultez [Fermeture d'une étude par un manipulateur](#) à la page 100).

### 3.2.4 États de lecture

Sur SecurView DX, la colonne État de la liste de patients montre l'état de lecture actuel de chaque patient et de chaque étude du patient. La colonne État n'apparaît pas sur SecurView RT.

Les états de lecture (Interprété, Non interprété, etc.) peuvent avoir des significations différentes selon que l'indication est au niveau du patient ou au niveau de l'étude.



#### Remarque

Les études non locales ne présentent pas d'état. La colonne État est vide pour les études non locales.

Tableau 3 : Définition des états de lecture

État de lecture	Niveau patient	Niveau étude
Non interprété	Au moins une étude de ce patient est à l'état « Non interprété » ou « Interprété une fois ».	L'étude n'a pas été interprétée.
Lire	Au moins une étude de ce patient a été interprétée par l'utilisateur actuel. Toutes les autres études ont l'état « Ancien ».	L'étude a été interprétée.
Interprété une fois	(Sans objet)	Dans un environnement de double lecture, une étude qui a été interprétée par le premier lecteur mais pas par le second.
Modifié	Au moins une étude de ce patient a l'état « Changé ».	Des images supplémentaires ont été reçues après que l'étude ait été interprétée.

Tableau 3 : Définition des états de lecture

État de lecture	Niveau patient	Niveau étude
Ancien	Toutes les études de ce patient ont l'état « Ancien ».	Étude pour laquelle SecurView a reçu les images plus de cinq jours après que les images aient été produites par le périphérique d'acquisition (cette valeur est configurable).

Dans certains cas, l'état de lecture change automatiquement. Par exemple, si une étude a le statut « Interprété » et que de nouvelles images ont été reçues par SecurView (pas plus de cinq jours après leur production), l'état de lecture se transforme alors en « Changé ».

Lors de la lecture des données du patient, SecurView indique également l'état de lecture en plaçant un symbole avant l'ID du patient (consultez [États de lecture et de verrouillage des données d'un patient lors de la lecture](#) à la page 53).

### État Interprété\*

Si des objets DICOM (annotations GSPS, rapports GSPS, images de capture secondaire MG ou images de capture d'écran MM) ont été envoyés mais n'ont pas atteint une destination configurée, alors SecurView définit l'état du patient sur « Interprété\* » et active le bouton **Renvoyer** dans la liste de patients. Lorsque « Interprété\* » apparaît, vérifiez que toutes les destinations DICOM sont correctement configurées. Si, lorsque vous sélectionnez **Renvoyer**, l'état ne prend pas la valeur « Interprété », contactez le support produit Hologic. Pour plus d'informations, consultez [Les boutons de la liste de patients](#) à la page 29.

### 3.2.5 Auto-récupération des données du patient

Lorsque SecurView reçoit de nouvelles images par acquisition, il récupère automatiquement les données DICOM pour le patient à partir d'archives. Dans ce cas, SecurView récupère les images mammographiques précédentes, les SR DAO, les rapports GSPS (états de l'étude avec ou sans annotations, et coupes ou plans de coupe reconstruits de tomosynthèse marqués), les annotations GSPS, les captures secondaires GSPS, les captures d'écran MM et les objets GSPS de tierces parties qui répondent aux critères d'auto-récupération.

Cette fonctionnalité doit être configurée par un Ingénieur de maintenance ou un administrateur (consultez [Configuration des fonctions Auto-Fetching/Auto-Completion \(Auto-récupération/Auto-achèvement\)](#) à la page 169). Si l'auto-récupération est activée, la colonne AF dans la liste de patients affiche l'état des données du patient demandées aux archives configurées dans l'interface de service comme « PACS 1 ».

Les états possibles sont les suivants :

- **+** = Auto-récupération terminée avec succès
- **0** = Auto-récupération en cours
- **D** = L'auto-récupération a été reportée (ou interrompue)
- **F** = Échec de l'auto-récupération — sélectionnez l'onglet **Log** pour afficher des informations détaillées
- **—** = Rien n'a été trouvé sur le PACS 1, qui corresponde aux critères d'auto-récupération
- **blanc** = Auto-récupération non déclenchée

### 3.2.6 Utilisation du menu contextuel

Si vous cliquez sur un patient avec le bouton droit de la souris, un menu contextuel s'ouvre proposant plusieurs options :

- **Suspendre patient ouvert et revoir** – ferme le patient en cours, vous permet d'analyser un nouveau patient, et retourne ensuite au patient d'origine (comme la fonction **Suspendre et revoir** de la liste de patients). Consultez [Les boutons de la liste de patients](#) à la page 29.
- **Protéger contre la suppression automatique** – empêche la suppression involontaire du patient.
- **Déverrouiller** – permet de déverrouiller les données d'un patient que vous avez verrouillé (SecurView DX uniquement). Il existe trois états de verrouillage (« Consultation nécessaire », « Images supplémentaires requises » ou « En attente »). Consultez [Fermeture d'une étude](#) à la page 97.
- **Reprendre** – permet de « reprendre » les données d'un patient qui ont été verrouillées par un autre radiologue.
- **Synchroniser patient** – permet d'envoyer une demande de synchronisation à une application externe (consultez [Synchronisation d'un patient avec une application externe](#) à la page 104).
- **Exporter vers support** – permet d'exporter toutes les images au format DICOM du ou des patients sélectionnés vers un dossier ou un support amovible (consultez [Exportation des fichiers DICOM](#) à la page 198).
- **Dégrouper patients** – permet de séparer deux dossiers de patients qui ont été fusionnés dans la base de données SecurView. Cette fonction annule l'effet du bouton **Grouper patients** dans la liste de patients (consultez [Fusion de données de patient](#) à la page 36).

### 3.2.7 Fusion de données de patient

SecurView fusionne automatiquement toutes les données DICOM ayant même le même ID patient et la même date de naissance. Si l'établissement constate que les ID patient sont uniques et que certains types d'images (par exemple des films antérieurs numérisés) ne contiennent pas une date de naissance, un ingénieur de maintenance peut configurer le système de manière à fusionner les images ayant le même ID patient et ne comportant pas de date de naissance (ou la même date de naissance).

Cette section décrit comment fusionner les dossiers de patients n'ayant pas le même ID patient mais qui désignent en fait la même personne. Cette fonctionnalité permet de visualiser ensemble des images du patient acquises à des moments différents.



#### Remarque

Vous ne pouvez pas fusionner manuellement des patients contenant des données d'études non locales obtenues à partir d'un Study List Manager externe.



#### Remarque

La fusion de données de patients effectuée sur SecurView (par exemple, deux études ou plus) ne fusionne pas les données de patients stockées sur un PACS.

#### Pour fusionner deux dossiers de patient :

1. Lorsqu'aucun dossier de patient n'est ouvert, sélectionnez deux dossiers de patients dans la liste de patients puis sélectionnez **Grouper patients**. Si les dossiers de patient sélectionnés ne sont pas actuellement ouverts sur un quelconque client d'un groupe de travail, SecurView affiche les dossiers de patient sélectionnés :

Sélectionner premier patient

**87800030**  
 Sélectionner comme premier patient  
ID patient: 87800030  
Date de naissance: 1964-12-24  
Sexe: F

**87800029**  
 Sélectionner comme premier patient  
ID patient: 87800029  
Date de naissance: 1964-12-24  
Sexe: F

OK Annuler

Figure 16 : Boîte de dialogue Sélectionner premier patient

2. Sélectionnez le dossier de patient du premier patient : faites votre sélection, puis sélectionnez **OK**. Le système fusionne les deux patients, et referme la boîte de dialogue.  
Après la fusion des patients, seul le premier patient apparaît dans la liste de patients. SecurView affecte au premier patient toutes les études et les séries des deux dossiers de patient. Dans la liste de patients, l'ID du premier patient fusionné est signalé par un astérisque (\*).
3. Sélectionnez le premier patient puis sélectionnez **Contrôle**. SecurView affiche dans le MG Viewer toutes les images et tous les objets DICOM correspondants (messages et états des études avec annotations, SR DAO, etc.) des patients fusionnés.

### 3.2.8 Recherche de patients

Les stations SecurView offrent deux options de recherche :



Le champ de recherche par défaut (ID patient ou Nom du patient) est défini en fonction de vos préférences utilisateur (consultez [Préférences des flux de production](#) à la page 130).

#### Recherche locale

Cette option recherche des données sur la base de données SecurView locale en fonction des critères spécifiés dans l'écran suivant. Les patients qui répondent aux critères de recherche sont regroupés en haut de la liste des patients et y demeurent jusqu'à ce que l'utilisateur effectue une nouvelle recherche locale, jusqu'à ce que l'utilisateur modifie manuellement l'ordre de la liste des patients, jusqu'à ce que la liste des patients soit réinitialisée ou jusqu'à ce que l'utilisateur ferme la session. Veillez à utiliser un astérisque (\*) comme caractère générique.

Figure 17 : Critères de recherche locale

### Recherche sur PACS

Vous pouvez rechercher sur un PACS configuré (source d'image) pour récupérer des données DICOM (images antérieures ou images provenant d'autres modalités).

SecurView copie les images récupérées dans sa base de données locale.

Nom du patient	ID patient	Numéro d'accès	Date de l'étude	Heure de l'étude	Modalité	Données locales	Partie du corps examiné	Date de naissance	ID étude	Des
----------------	------------	----------------	-----------------	------------------	----------	-----------------	-------------------------	-------------------	----------	-----

Figure 18 : Critères de recherche PACS

Pour effectuer une recherche, entrez vos critères puis sélectionnez **Recherche**. Veillez à utiliser un astérisque (\*) comme caractère générique. Si la recherche réussit, les données de patient trouvées apparaissent dans la zone de « Résultats de recherche » et le bouton Récupérer devient actif. Pour transférer les données dans SecurView, sélectionnez un ou plusieurs éléments dans la zone « Résultats de recherche » puis sélectionnez **Récupérer**.



#### Important

Si vous démarrez une nouvelle recherche avant que la précédente ne soit terminée, seule la progression de la nouvelle recherche s'affiche.

Il est possible que votre PACS ne prenne pas en charge certains onglets et champs de la zone « Critères avancés ». Un ingénieur de maintenance doit configurer et activer les onglets et les champs.

### 3.3 Création de sessions

Une session est une liste de patients définie à l'avance comme liste de travail par un manipulateur ou par un radiologue sur SecurView DX. Un manipulateur peut définir des sessions pour n'importe quel radiologue. Un radiologue ne peut définir de sessions que pour son usage personnel.



#### Remarque

Pour utiliser la fonctionnalité Sessions, un administrateur doit activer l'option Planification (consultez [Programmation](#) à la page 165) et attribuer à chaque utilisateur des droits de configuration (consultez [Gestion des profils des utilisateurs](#) à la page 160). Notez également que SecurView classe automatiquement les patients dans la liste de travail de votre session en fonction de vos préférences d'utilisateur sur l'onglet **Flux de production** (consultez [Préférences des flux de production](#) à la page 130).

#### Pour créer une session :

1. Dans la **Liste de patients**, sélectionnez les patients que vous voulez affecter à une session. Sélectionnez ensuite **Créer une session** :

Étiquette de la session:	Session 1
Radiologue:	jsmith ▼
OK	Annuler

2. Dans le champ Étiquette de session, saisissez un nom de session. Si vous avez des droits d'utilisation de manipulateur, vous pouvez affecter la session à n'importe quel radiologue au moyen de la liste déroulante de radiologues.

3. Sélectionnez **OK** pour créer la session. Si vous êtes un utilisateur défini comme Radiologue, l'onglet **Sessions** s'ouvre automatiquement. (Si vous êtes un utilisateur défini comme manipulateur, la liste de patients s'ouvre.)

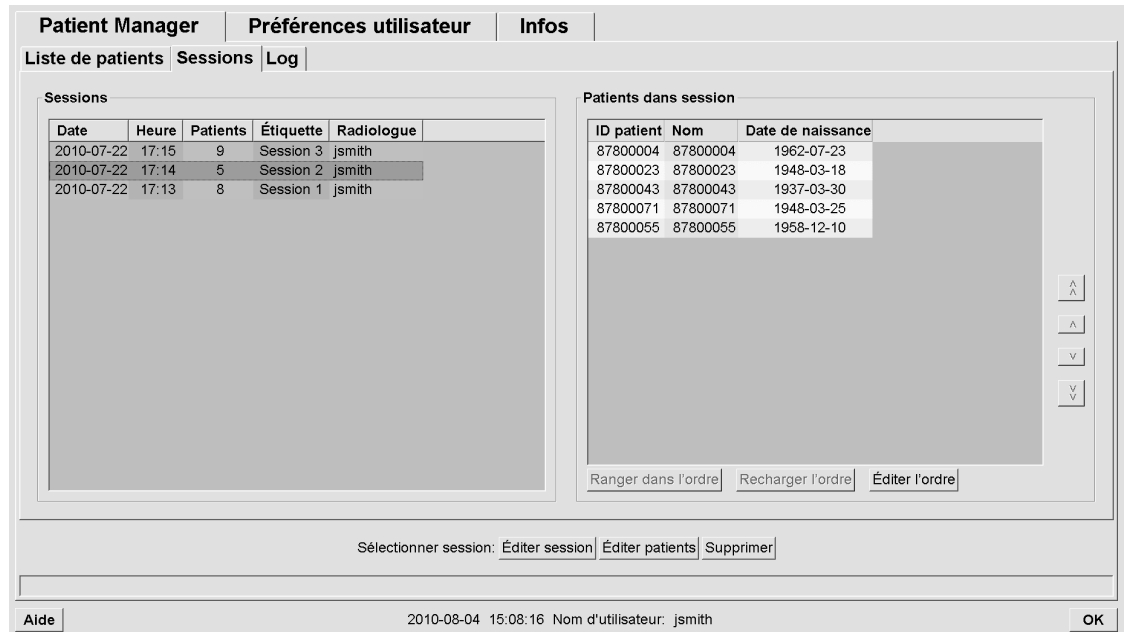


Figure 19 : Onglet Sessions

Dans l'onglet **Sessions**, pointez une session à gauche puis :

- Pour modifier l'ordre des patients, sélectionnez un patient, sélectionnez **Éditer l'ordre**, et sélectionnez un en-tête de colonne ou l'une des touches fléchées à droite.
- Modifiez la session en sélectionnant **Éditer session** pour ouvrir à nouveau la boîte de dialogue « Étiquette de la session ». Puis modifiez les éléments comme vous le souhaitez et sélectionnez **OK**.
- Ajoutez ou supprimez des patients en sélectionnant **Éditer patients** pour ouvrir à nouveau la liste de patients. Puis sélectionnez à nouveau (ou annulez la sélection) des patients comme vous le souhaitez et sélectionnez **Créer une session** pour rouvrir la boîte de dialogue « Étiquette de la session ». Modifiez les éléments comme vous le souhaitez et sélectionnez **OK**.

Si, alors que vous modifiez les données de patients, vous décidez d'abandonner vos modifications, sélectionnez **Recharger** dans la liste de patients pour restaurer la session dans son état antérieur.



### 3.4 Importation d'images DICOM

Utilisez le bouton **Importer...** pour importer des images DICOM à partir d'un dossier local ou d'un support externe (par exemple, lecteur de CD, DVD, USB).



---

**Remarque**

Pour exporter des images, consultez [Exportation des fichiers DICOM](#) à la page 198.

---

**Pour importer des images DICOM :**

1. Dans la Liste de patients, sélectionnez **Importer...** pour afficher la boîte de dialogue Importer depuis.
2. Naviguez jusqu'au dossier contenant les images DICOM que vous souhaitez importer. Le chemin d'accès par défaut est F:\Exports\.
3. Sélectionner le dossier contenant les images puis sélectionnez **OK**. SecurView importe toutes les images du dossier qui sont conformes à la norme DICOM Part 10 (y compris celles enregistrées en utilisant des syntaxes de transfert avec compression DICOM). Ceci peut prendre plusieurs minutes - les fichiers DICOM sont volumineux.
4. Après l'importation des images, assurez-vous que toutes les images importées apparaissent dans Liste de patients.

### 3.5 Synchronisation de la liste de patients avec MultiView

Si elle est configurée de manière adéquate, votre station SecurView peut être synchronisée avec un Study List Manager externe.

- La liste de patients de SecurView contient toutes les études avec les images reçues par SecurView (études locales) ainsi que les études disponibles sur des systèmes externes connues par le Study List Manager (études non locales). Sur les stations client, seules les études non locales d'un client Study List Manager (SLM) associé sont répertoriées. Sur une station Manager, toutes les études non locales connues par le Study List Manager sont répertoriées. Pour obtenir des informations sur la configuration du client SLM associé pour les stations client, consultez [Configuration de l'interface de synchronisation](#) à la page 176.
  - SecurView envoie au Study List Manager des informations sur les études locales affichées dans la liste de patients.
1. Synchronisation avec des applications externes (consultez [Synchronisation d'un patient avec une application externe](#) à la page 104) permet une lecture simultanée des données du patient sur SecurView et une application MultiView synchronisée à déclencher à partir d'une des applications.
  2. Pour obtenir des informations sur la configuration de la gestion de la liste d'études, consultez [Configuration d'un Study List Manager \(SLM\)](#) à la page 172.



---

**Attention :**

Si la synchronisation avec le SLM échoue (par exemple en raison d'une erreur de communication), les études non locales peuvent ne pas être disponibles dans la liste de patients de SecurView. Vérifiez la liste de patients locaux dans d'autres applications client connectées au SLM (par exemple, MultiView) pour garantir que toutes les études pertinentes pour un patient sont examinées.

---



---

**Attention :**

Si un patient non local est le premier patient d'un patient fusionné, les patients sont automatiquement dissociés si la synchronisation du SLM supprime le patient non local.

---

## Chapitre 4 Lecture de données patient

Ce chapitre explique comment ouvrir des données patient pour consultation, utiliser les outils de visualisation et d'annotation, fermer des études, imprimer des images et effectuer synchronisation avec une application externe.

### 4.1 Affichage d'étude de patients

L'examen s'effectue souvent sur la base d'une liste de travail. Il existe trois types de listes de travail. Une fois que vous avez établi une liste de travail, vous pouvez commencer à analyser les patients avec MG Viewer.

#### 4.1.1 Listes de travail des patients

À partir de la liste de patients, vous pouvez créer manuellement une liste de travail temporaire en pointant sur un ou plusieurs patients (surlignés ci-dessous en gris foncé) et en sélectionnant **Contrôle**.

Patient Manager		Préférences utilisateur		Infos	
Liste de patients		Sessions	Log		
Réinitialiser les colonnes		Renvoyer	Messages	Annuler modification	
Mettre à jour Liste de patients		Grouper patients		Créer une session	
				Annuler l'importation	
				Importer ...	
				Contrôle	
				Suspendre et revoir	
				Effacer	
				Recharger	

Date de l'étude	Nom	ID patient	Date de naissance	Modalité	Etat	Remarque	Type	DAO	Complexité DAO	Priorité de lecture	Message	P	Radiologue(s)	Double interprét	Technicien	Nc
+ 2021-02-03	20600160	20600160	1957-01-01	MG+	Non int.		Dépistage	+			+					Me
+ 2021-02-03	AWS_0001_3015...	1.2.276.0.28.3.203...	1970-01-01	MG	Non int.		Dépistage									Da
+ 2010-01-15	Prior_Scrolling_Test	Prior_Scrolling_Test	1970-12-31	MG	Ancien											HG
+ 2021-02-01	MACH90_IMAGES	Augptier_316211253	na	US	Non int.		Diagnosti									
+ 2021-02-01	100_3D-CAD_C...	24861649	1963-01-01	MG+	Non int.		Dépistage									Wa
+ 2021-02-03	30100013	30100013	1944-01-01	MG+	Non int.		Dépistage	+								
+ 2021-02-03	HOLX_3DQ_Exa	HOLX_3DQ_Exa	1949-01-01	MG+	Non int.		Dépistage	Haute	Résultats multiples	Haute						HG
+ 2021-02-03	00300593	00300593	2007-01-01	MG+	Non int.		Dépistage	+								Ma
+ 2021-02-03	20500052	20500052	1947-01-01	MG+	Non int.		Dépistage	+								So
+ 2021-02-03	IT450_Alf	110-08-001-38C21	1900-01-01	MG	Non int.		Dépistage									Str



Figure 20 : Lecteur de codes-barres

Pour débiter l'analyse :

- Sélectionnez un ou plusieurs patients (jusqu'à 100), puis sélectionnez **Révision**, ou
- Double-cliquez sur un patient pour ouvrir les données d'un seul patient, ou
- Utilisez le lecteur de code-barres pour ouvrir les données d'un seul patient en lisant le code-barres d'un patient. Le lecteur de codes-barres lit soit l'ID patient soit le Numéro d'accès (tel que configuré par l'Ingénieur de maintenance).

Pour plus d'informations sur la Liste de patients, consultez [Utilisation de la liste de patients](#) à la page 28.

### 4.1.2 Listes de travail générées automatiquement

SecurView DX génère automatiquement des listes de travail d'Études non interprétées ou d'Études pour double lecture si double lecture est configurée. Le système peut aussi diviser les Études non interprétées ou les Études pour double lecture en listes de travail d'Études de dépistage et d'Études diagnostiques. Les types de liste de travail générés dépendent des paramètres configurés par un administrateur (consultez [Listes de travail](#) à la page 178) En outre, si des rapports DAO comprenant un indicateur temps de lecture (par exemple Hologic Genius AI Detection) sont reçus, l'utilisateur peut filtrer les listes de travail automatiques qui contiennent les patients qui ont été dépistés conformément aux valeurs de l'indicateur temps de lecture (faible, moyen, haute).

**Pour appliquer un filtre temps de lecture à des listes de travail automatiques :**

1. Une fois connecté, sélectionnez l'onglet **Listes de travail**.
2. Sélectionnez l'onglet **Listes de travail automatiques**.
3. Sélectionnez **Actif** pour activer le filtre temps de lecture.
  - a. Sélectionnez **Faible** pour filtrer les patients qui ont été dépistés pour inclure uniquement ceux à faible indicateur temps de lecture.
  - b. Sélectionnez **Moyen** pour filtrer les patients qui ont été dépistés pour inclure uniquement ceux à indicateur temps de lecture moyen.
  - c. Sélectionnez **Haute** pour filtrer les patients qui ont été dépistés pour inclure uniquement ceux à indicateur temps de lecture haut.
  - d. Sélectionnez n'importe quelle combinaison de **Faible**, **Moyen** et **Haute** pour filtrer les patients qui ont été dépistés pour inclure seulement ceux qui ont les valeurs d'indicateur temps de lecture sélectionnées.
  - e. Sélectionnez **Défini par l'utilisateur** pour filtrer les patients qui ont été dépistés pour inclure seulement ceux qui correspondent au mélange de temps de lecture configuré (consultez *Préférences des flux de production* à la page 130).

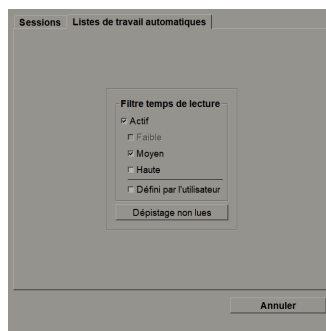


Figure 21 : Sélection de la liste de travail combinée, filtre temps de lecture

**Pour sélectionner une liste de travail automatique :**

1. Après avoir ouvert une session, sélectionnez l'onglet **Listes de travail**.
2. Sélectionnez l'onglet **Listes de travail automatiques**. Selon les paramètres de configuration, vous pouvez voir un, deux, trois ou quatre boutons :



Figure 22 : Bouton Visualisation de la liste de travail

3. Sélectionnez un bouton de la liste de travail. Le MG Viewer s'ouvre, montrant le premier patient dans la liste de travail sélectionnée qui contient tous les patients répondant aux critères énoncés.

Les boutons sont inactifs s'il n'y a pas d'études non interprétées ou d'études pour double lecture.

### 4.1.3 Listes de travail de sessions

Si votre station a été configurée pour les sessions, vous pouvez commencer votre lecture en ouvrant une session. Pour plus d'informations sur la mise en place d'une session, consultez [Création de sessions](#) à la page 39.

**Pour sélectionner une session :**

1. Une fois connecté, sélectionnez l'onglet **Listes de travail**.
2. Sélectionnez l'onglet **Sessions**. Si vous avez créé des sessions (ou qu'elles ont été créées pour vous), elles apparaissent d'après l'illustration de l'exemple ci-dessous.

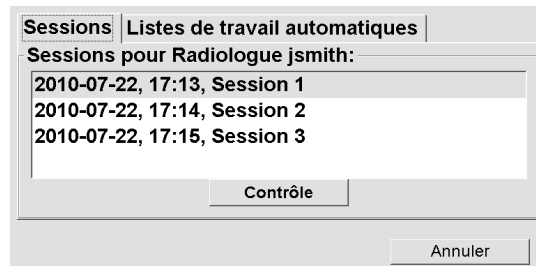


Figure 23 : Exemple de liste de sessions

3. Sélectionnez une session puis sélectionnez **Revoir**. Le MG Viewer s'ouvre montrant le premier patient dans la liste de travail de la session.

### 4.1.4 MG Viewer

Quand on ouvre les données d'un patient, le MG Viewer apparaît.



Figure 24 : MG Viewer — Écran de gauche

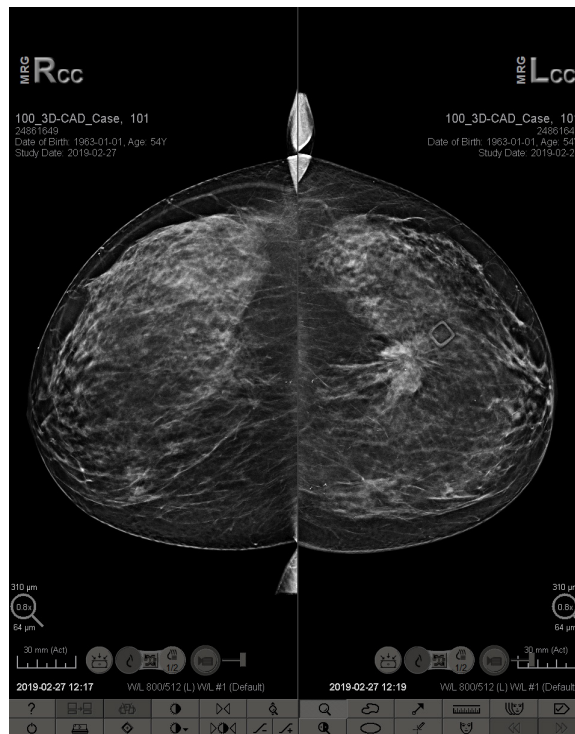


Figure 25 : MG Viewer — Écran de droite

La plupart de vos interactions avec l'application s'effectuent via les boutons de la barre d'outils au bas de chaque écran ou à l'aide des touches du clavier correspondantes.



#### Remarque

Lorsqu'un patient sans images actuelles s'ouvre, un avertissement s'affiche pour vous informer qu'aucune image actuelle n'est disponible. Vous pouvez désactiver cet avertissement (consultez « Avertissement : aucune image actuelle disponible » sous [Préférences des flux de production](#) à la page 130).




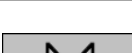



## 4.2 Affichage d'images de patients

Cette section décrit les outils et options pour afficher des images de patients.

- [Parcourir les données des patients](#) à la page 48
- [Utilisation du clavier](#) à la page 49
- [Utilisation du menu circulaire](#) à la page 50
- [Utilisation d'un ReportFlow](#) à la page 53
- [États de lecture et de verrouillage des données d'un patient lors de la lecture](#) à la page 53
- [Déplacement dans l'image \(Panning\)](#) à la page 54
- [Présentations d'images](#) à la page 54
- [Mode Mosaïque simple temporaire](#) à la page 55
- [Roaming intelligent](#) à la page 56
- [Modes échelle](#) à la page 58
- [Pixel Meter](#) à la page 60
- [Indicateurs de pile et Indicateurs de point temporel](#) à la page 61
- [MammoNavigator](#) à la page 61
- [Informations sur l'image](#) à la page 66
- [Recouvrements des informations sur le patient](#) à la page 67
- [Captures secondaires MG et captures d'écran MM](#) à la page 68

### 4.2.1 Parcourir les données des patients

La barre d'outils au bas de l'écran de droite fournit des outils pour démarrer.

Icône	Usage
	<b>Patient suivant</b> : affiche le patient suivant dans la liste de travail.
	<b>Patient précédent</b> : affiche le patient précédent dans la liste de travail.
	<b>Liste de patients</b> : affiche la liste de patients. Consultez <a href="#">Utilisation de la liste de patients</a> à la page 28.
	<b>Réinitialiser</b> : annule les modifications et rétablit les images du patient en cours à leur état initial lors de l'ouverture (les annotations demeurent).
	<b>Fermer l'étude</b> : ferme l'étude. Cette option est active quand la dernière étape du ReportFlow est affichée. Pour plus d'informations, consultez <a href="#">Fermeture d'une étude</a> à la page 97.
	<b>Aide</b> : ouvre les guides de l'utilisateur SecurView dans une fenêtre distincte. (les administrateurs système peuvent afficher les guides à l'aide du bouton Aide situé dans le coin inférieur gauche des onglets Administration).
	<b>Quitter</b> : ferme le MG Viewer et affiche le module d'administration.



## 4.2.2 Utilisation du clavier

Le clavier optionnel permet d'accéder rapidement à la plupart des options de visualisation. Les icônes du clavier correspondent aux icônes similaires sur les boutons de la barre d'outils. Les sections suivantes du guide expliquent la fonction de chaque outil.



Figure 26 : Clavier SecurView DX

### Dépannage du clavier (SecurView DX)

1. Si le clavier ne répond pas lorsque vous appuyez sur les boutons, veuillez suivre les étapes suivantes :
  - a. Connectez-vous à SecurView en tant qu'utilisateur du groupe d'utilisateurs Administrateur (par exemple, **admin**).
  - b. Déconnectez le clavier de l'ordinateur.
  - c. Sélectionnez l'onglet **Quitter vers Windows** et sur **OK** pour confirmer, puis patientez 5 à 10 secondes.
  - d. Reconnectez le clavier.
  - e. Double-cliquez sur l'icône **SecurView**, puis connectez-vous à SecurView.
  - f. Vérifiez que le clavier fonctionne bien.
2. Si le clavier ne répond toujours pas lorsque vous appuyez sur les boutons, veuillez suivre les étapes suivantes :
  - a. Connectez-vous à SecurView en tant qu'utilisateur quelconque.
  - b. Déconnectez le clavier de l'ordinateur.
  - c. Sélectionnez l'onglet **Arrêter**, puis sur **OK** pour confirmer.
  - d. Reconnectez le clavier.
  - e. Allumez l'ordinateur.
  - f. Connectez-vous à SecurView, puis vérifiez que le clavier fonctionne correctement.

### 4.2.3 Utilisation du menu circulaire

Le menu circulaire donne accès à des outils supplémentaires pour l'évaluation de l'image.

Pour utiliser le menu circulaire :

- Cliquez sur une image avec le bouton droit de la souris puis sélectionnez un outil dans le menu.
- Pointez sur **Outils d'imagerie** ou **Outils de redimensionnement** dans le menu circulaire pour ouvrir un second menu circulaire.

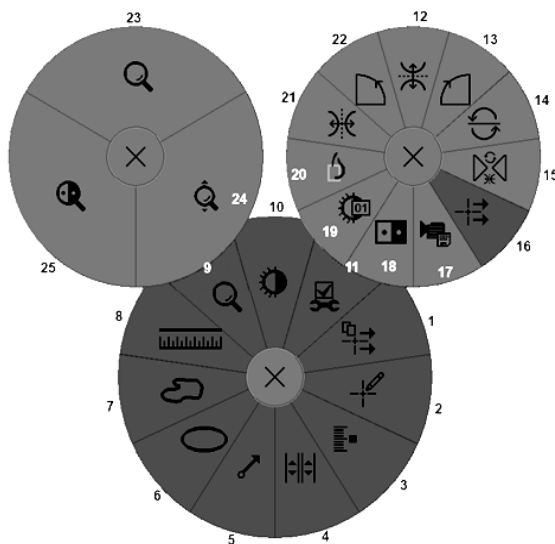









Figure 27 : Menu circulaire


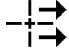










#### Légende

1. Envoyer tous les messages
2. Filtre d'annotations utilisateurs
3. Marquer images tomo
4. Lier un secteur
5. Flèche
6. Ellipse
7. À main levée
8. Mesure
9. Menu des outils de redimensionnement
10. Fenêtre/Niveau
11. Menu des outils d'imagerie
12. Basculement haut/bas
13. Rotation 90° sens horaire
14. Rotation 180°
15. Réinitialiser basculement/rotation
16. Envoyer message image
17. Export vidéo
18. Inverser image
19. Fenêtre/Niveau (numérique)
20. Pleine résolution
21. Basculement gauche/droite
22. Rotation 90° sens anti-horaire
23. Loupe
24. Zoom continu/Réinitialiser zoom continu\*
25. Loupe inversée

\*Remarque : le Zoom continu est une fonction à bascule. Sélectionnez cette option pour activer le zoom continu. Une fois le Zoom continu activé, l'icône devient Réinitialiser zoom continu.

Certains outils du menu circulaire figurent sur la barre d'outils et le clavier du MG Viewer. Le tableau suivant décrit chaque outil.

Icône	Description
	<b>Loupe</b> — Agrandir une zone d'image sélectionnée. Consultez <a href="#">Loupe et loupe inversée</a> à la page 70.
	<b>Zoom continu</b> — Redimensionner l'image autour du point focal. Consultez <a href="#">Zoom continu</a> à la page 73.
	<b>Réinitialiser zoom continu</b> — Rétablir l'image agrandie à son état initial.
	<b>Loupe inversée</b> — Inverser une zone agrandie.
	<b>Inverser image</b> — Inverser une image.
	<b>Fenêtre/Niveau</b> — Régler la luminosité et le contraste d'une image. Consultez <a href="#">Réglages de Fenêtre/Niveau et de Gamma</a> à la page 75.
	<b>Fenêtre/Niveau (numérique)</b> — Saisir des valeurs numériques pour régler avec précision la luminosité et le contraste d'une image.
	<b>Pleine résolution</b> — Pour une image en mode mosaïque simple, permet d'afficher un pixel des données de l'image originale pour chaque pixel dans la fenêtre. Consultez <a href="#">Modes échelle</a> à la page 58.
	<b>Ellipse</b> — Dessiner un repère elliptique. Consultez <a href="#">Marquage d'une image</a> à la page 89.
	<b>À main levée</b> — Dessiner un repère à main levée
	<b>Flèche</b> — Dessiner une flèche repère.
	<b>Mesures</b> — Tracer une ligne dont la longueur s'affiche.
	<b>Filtre d'annotations utilisateurs</b> — Visualiser les annotations des images actuellement affichées. Consultez <a href="#">Visualisation des annotations</a> à la page 92.

Icône	Description
	<b>Envoyer tous les messages</b> – Envoyer les messages de toutes les images à une ou plusieurs entités DICOM. Consultez <a href="#">Visualisation et envoi de messages</a> à la page 94.
	<b>Envoyer message image</b> – Envoyer un message en rapport avec l'image sélectionnée.
	<b>Lier secteur</b> – Lier les différents secteurs image pour permettre un défilement simultané des coupes ou plans de coupe reconstruits. Consultez <a href="#">Défilement des secteurs liés</a> à la page 118.
	<b>Marquer images tomo</b> – Marquer des coupes ou plans de coupe de tomosynthèse pour impression ou exportation. Consultez <a href="#">Marquage des coupes ou plans de coupe reconstruits de tomosynthèse</a> à la page 124.
	<b>Export Vidéo</b> – Exporter un film montrant le défilement de coupes ou plans de coupe reconstruits de tomosynthèse ou d'images de projection de tomosynthèse. Consultez <a href="#">Exportation d'une vidéo</a> à la page 119.
	<b>Menu des outils d'imagerie</b> – Ouvrir le menu des outils d'imagerie.
	<b>Rotation 90° sens horaire</b> – Pivoter une image dans le sens horaire.
	<b>Rotation 90° sens anti-horaire</b> – Pivoter une image dans le sens anti-horaire.
	<b>Rotation 180°</b> – Pivoter une image de 180°.
	<b>Basculement haut/bas</b> – Basculer une image sur son axe horizontal (ou, pour la tomosynthèse, basculer la pile d'images).
	<b>Basculement gauche/droite</b> – Basculer une image sur son axe vertical (ou, pour la tomosynthèse, basculer la pile d'images)
	<b>Réinitialiser basculement/rotation</b> – Remettre dans son orientation initiale toute image basculée ou pivotée.

#### 4.2.4 Utilisation d'un ReportFlow

Lorsque vous ouvrez les données d'un patient, SecurView sélectionne automatiquement un ReportFlow (une série de présentations d'images). Le ReportFlow utilisé par défaut pour un patient donné dépend de la préférence d'utilisateur (consultez [Préférences de ReportFlow](#) à la page 157). Le nom du ReportFlow apparaît sur la barre d'outils en bas à gauche.



- Pour naviguer étape par étape à travers le ReportFlow, sélectionnez **Flux - Suivant** ou **Flux - Précédent** sur la barre d'outils, ou appuyez sur **Flux - Suivant** ou **Flux - Précédent** sur le clavier.
- Vous pouvez sélectionner une autre présentation prédéfinie sur la barre d'outils ou sur le clavier. SecurView mémorise l'étape actuelle du ReportFlow et, lorsque vous sélectionnez à nouveau **Flux - Suivant**, passe à la prochaine étape du ReportFlow.
- À tout moment, vous pouvez sélectionner un autre ReportFlow dans la liste déroulante pop-up ci-dessus qui présente tous les ReportFlow disponibles.

Pour plus d'informations sur les ReportFlows, consultez [Captures d'écran de présentation et ReportFlows](#) à la page 141.

#### 4.2.5 États de lecture et de verrouillage des données d'un patient lors de la lecture

Lors de l'analyse des données d'un patient, SecurView indique l'état de lecture des données du patient au moyen d'un symbole qui apparaît avant le nom du patient, comme illustré ci-dessus et dans les exemples suivants :

Ce symbole...	Indique que l'état de lecture est...
Smith, Jane	« Non interprété » ou « Changé » (aucun symbole n'apparaît)
# Jones, Alice	« Interprété », « Interprété une fois » (par l'utilisateur actuel), ou « Ancien »
* Kumar, Revati	Verrouillé pour une des raisons suivantes : « Consultation nécessaire », « Images supplémentaires requises », « En attente » ou « Verrouillé » (dans ce dernier cas, les données du patient sont en cours de lecture sur une autre station)
++ Brown, Kelly	Verrouillé en raison d'« Images supplémentaires reçues »
@ Wong, Brenda	« Message reçu »

Pour plus d'informations sur les états de lecture, consultez [États de lecture](#) à la page 33.

Un radiologue peut verrouiller les données d'un patient à partir de la boîte de dialogue Fermer l'étude (consultez [Fermeture d'une étude](#) à la page 97). Lorsqu'un radiologue verrouille les données d'un patient, SecurView empêche les autres utilisateurs de fermer l'étude et de la marquer comme ayant l'état « Interprété ». Les autres utilisateurs peuvent créer et envoyer des Annotations, mais SecurView ne leur permet pas d'accéder à la boîte de dialogue Fermer l'étude. Les autres utilisateurs peuvent cependant déverrouiller les données d'un patient via le menu contextuel (consultez [Utilisation du menu contextuel](#) à la page 35).

L'état verrouillé est indépendant de l'état de lecture. Lorsqu'un autre utilisateur examine des données patient verrouillées, l'état verrouillé apparaît dans le coin supérieur des affichages.

### 4.2.6 Déplacement dans l'image (Panning)

Une image affichée peut, à tout moment, être déplacée à l'intérieur d'un secteur. Il suffit de cliquer sur l'image avec le bouton droit de la souris et de la faire glisser vers un nouvel emplacement du secteur.

### 4.2.7 Présentations d'images

À tout moment pendant la lecture, vous pouvez sélectionner une présentation prédéfinie sur la barre d'outils à gauche.

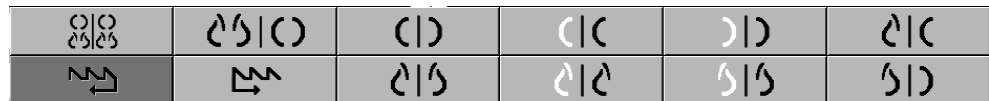



Figure 28 : Présentations d'images prédéfinies

Pour sélectionner une présentation d'images prédéfinie :



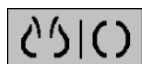Vue d'ensemble



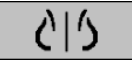
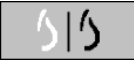



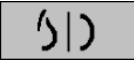
- Sélectionnez **Vue d'ensemble** pour afficher les huit images standard de dépistage pour un patient (les quatre images actuelles et les quatre précédentes). Vous pouvez personnaliser la présentation d'images affectée au bouton Vue d'ensemble grâce aux préférences utilisateur (consultez [Préférences de ReportFlow](#) à la page 157).



MLO CC

- Sélectionnez **MLO CC** pour afficher les images MLO et CC *actuelles* en mode mosaïque double (deux images MLO sur l'écran de gauche et deux images CC sur celui de droite).
- Sélectionnez à nouveau **MLO CC** pour afficher les images *précédentes* de la même manière.

Le tableau suivant décrit les autres présentations prédéfinies.

Icône	Signification	Icône	Signification
	CC actuel		LCC Précédent / Actuel
	MLO actuel		LMLO Précédent / Actuel
	RCC Précédent / Actuel		RMLO RCC actuel
	RMLO Précédent / Actuel		LMLO LCC actuel

Lorsque vous sélectionnez le bouton plus d'une fois :

- La fenêtre va afficher les images disponibles précédentes de même incidence et latéralité dans l'ordre antéchronologique.
- Si une étude précédente ne contient pas d'image de la latéralité affichée, mais contient toutefois une image de même incidence, la fenêtre va rester vide.
- Si une étude précédente ne contient pas d'image de l'incidence affichée (quelle que soit sa latéralité), l'étude précédente va alors être ignorée.


L'aspect des icônes des présentations prédéfinies dépend d'une préférence utilisateur (consultez [Préférences de présentation d'image](#) à la page 132). Dans l'exemple ci-dessus, l'utilisateur a configuré SecurView pour afficher le sein droit sur le côté gauche, les images précédentes sur la gauche, MLO à gauche, CC à droite, avec une orientation de la paroi thoracique identique pour les images actuelles et les images précédentes. Notez que l'icône indique les images précédentes en *gris clair*.



Les exemples à gauche montrent l'aspect de deux icônes de présentations prédéfinies lorsque la préférence utilisateur spécifie une orientation de paroi thoracique dos à dos. Dans ce cas, les images actuelles sont à gauche, et les images précédentes sont à droite. Les icônes indiquent le sein gauche ou droit par la lettre « L » ou « R » insérée, respectivement.



#### 4.2.8 Mode Mosaïque simple temporaire

Double-cliquez sur toute image en mode mosaïque double ou quadruple pour passer en mode mosaïque simple temporaire. Double-cliquez à nouveau sur l'image pour repasser à la mosaïque précédente. Lorsque le mode mosaïque simple temporaire est actif, il est indiqué dans les recouvrements d'image par cette icône .

L'image affichée dans une pile, ainsi que toutes les opérations Basculement et Rotation appliquées avant ou pendant le mode mosaïque simple temporaire, sont maintenues lors de l'activation ou de la désactivation du mode mosaïque simple temporaire. Le déplacement est réinitialisé à l'activation du mode mosaïque simple temporaire et l'état de déplacement précédent est restauré lors de la désactivation du mode.

Le mode mosaïque simple temporaire est automatiquement désactivé lorsque :

- Vous activez une option de présentation prédéfinie.
- Vous modifiez la disposition de la mosaïque à l'aide de MammoNavigator™.
- Vous faites glisser une image dans un secteur en mode mosaïque simple temporaire. Dans ce cas, le secteur passe en mode mosaïque simple.

#### 4.2.9 Roaming intelligent

Utilisez le roaming intelligent pour déplacer une image affichée en mode Pleine résolution, étape par étape, dans un ordre prédéfini. SecurView segmente l'image et affiche uniquement le sein, avec une marge de sécurité, en ignorant les zones noires sur les bords.

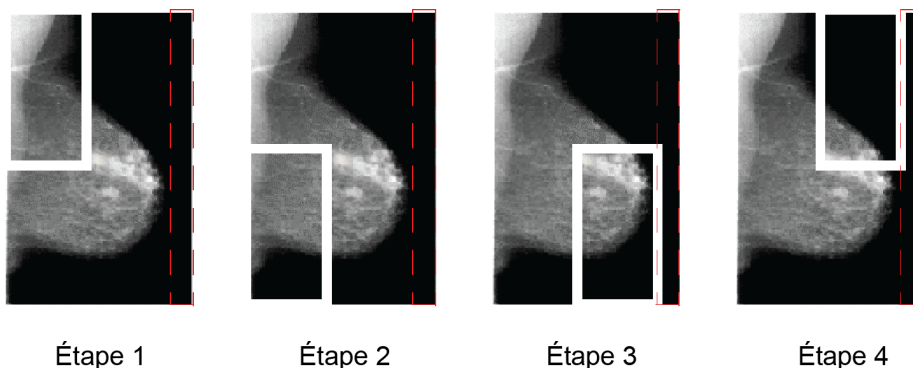


Figure 29 : Roaming intelligent

SecurView permet de diviser le sein en deux ou quatre zones selon la taille du sein. Le Roaming intelligent commence dans un coin supérieur de l'image et, selon la latéralité, avance dans le sens horaire ou anti-horaire.

Les boutons du Roaming intelligent sont activés dans la barre d'outils à droite lorsque les écrans sont en mode mosaïque simple.



### Pour se déplacer dans l'image :

Affichez une image en mode mosaïque simple. Puis :



- Sélectionnez **Roaming intelligent (étape suivante)** pour avancer d'une étape.



- Sélectionnez **Roaming intelligent (étape précédente)** pour reculer d'une étape.

### Roaming intelligent

Lorsque vous démarrez le Roaming intelligent, les écrans passent automatiquement en mode Pleine résolution.

L'indicateur de roaming intelligent présente une vignette de l'image. Un cadre blanc dans la vignette indique la position à chaque étape du Roaming intelligent.

Par défaut, cet indicateur disparaît après 1,5 seconde. Pour adapter la durée d'affichage de l'indicateur, consultez [Préférences de l'onglet Outils et Recouvrements](#) à la page 134.



### Important

Si une partie de l'image n'est pas visible, cliquez avec le bouton droit de la souris et faites glisser l'image vers un nouvel emplacement du secteur. L'indicateur roaming intelligent apparaît pour montrer la position.

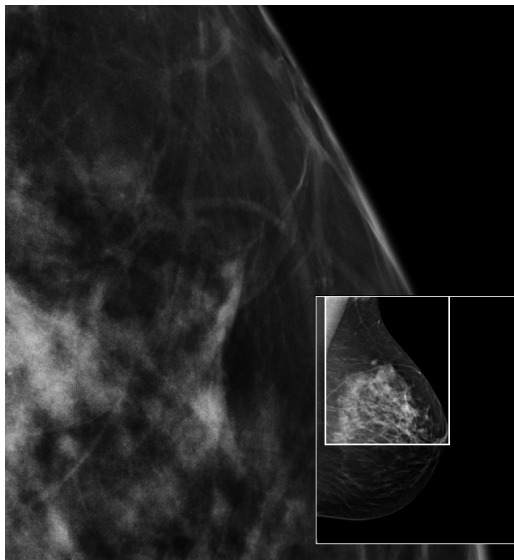


Figure 30 : Indicateur de Roaming intelligent


### 4.2.10 Modes échelle



Mode échelle  
d'image

Utilisez les options de mise à l'échelle de l'image pour modifier la résolution des images affichées. Lorsque vous sélectionnez l'icône **Mode échelle d'image**, une liste d'options d'échelle apparaît. Le tableau ci-dessous décrit le comportement de chaque icône.

Icône	Fonction / Raccourci clavier
	<p><b>Adapter à fenêtre</b> — Redimensionner chaque image de manière à ce qu'elle remplisse sa fenêtre de visualisation. Notez que si la largeur et la hauteur de l'image sont plus petites que celles de la fenêtre, le facteur d'agrandissement minimum autorisé (par défaut = 1,5) détermine le comportement. Si le facteur est dépassé, l'image est agrandie pour remplir la fenêtre. Sinon, l'image est affichée dans la résolution native. Un ingénieur de maintenance peut modifier le facteur d'agrandissement minimum autorisé si nécessaire.</p>
	<p><b>Taille correcte</b> — Affiche les images sur chaque moniteur à la même résolution sur la base du contour du sein de la plus grande image disponible pour le patient présentant un contour de sein satisfaisant. La plus grande image peut être sélectionnée parmi les images actuelles uniquement, ou parmi toutes les images actuelles et précédentes disponibles, selon les préférences de l'utilisateur (consultez <a href="#">Préférences de présentation d'image</a> à la page 132).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur <b>[Y]</b> pour passer du mode Taille correcte au mode Taille même, et inversement.</li> </ul>
	<p><b>Même taille</b> — Affiche les images sur chaque moniteur à la même résolution sur la base de la plus grande image disponible pour le patient. La plus grande image peut être sélectionnée parmi les images actuelles uniquement, ou parmi toutes les images actuelles et précédentes disponibles, selon les préférences de l'utilisateur (consultez <a href="#">Préférences de présentation d'image</a> à la page 132).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur <b>[Y]</b> pour passer du mode Taille correcte au mode Taille même, et inversement.</li> </ul>
	<p><b>Taille réelle</b> — Affiche toutes les images de telle sorte que le tissu mammaire soit affiché à sa taille physique réelle, c'est-à-dire que 1 cm de tissu mammaire mesure 1 cm sur l'écran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur <b>[X]</b> pour afficher les images en mode Taille réelle.</li> </ul>

Icône	Fonction / Raccourci clavier
	<p><b>Pleine résolution</b> — Affiche l'image de telle sorte que chaque pixel de la fenêtre représente un pixel de l'image originale (disponible lorsque les deux écrans sont en mode d'affichage mosaïque simple).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur <b>[D]</b> ou <b>[7]</b> pour passer l'écran de gauche en mode Pleine résolution. Appuyez à nouveau pour revenir au mode d'échelle précédent.</li> <li>• Appuyez sur <b>[F]</b> ou <b>[9]</b> pour passer l'écran droit en mode Pleine résolution. Appuyez à nouveau pour revenir au mode d'échelle précédent.</li> </ul>



**Remarque**

Si une partie de l'image n'est pas visible, cliquez avec le bouton droit de la souris et faites glisser l'image vers un nouvel emplacement du secteur.



Si SecurView affiche une image qui n'est pas dans le mode d'échelle sélectionné, une icône avec un « X » apparaît en regard de l'image affichée (voir exemples à gauche). Par exemple, l'icône apparaît lorsque vous affichez une image sur l'écran gauche en mode Pleine résolution alors que l'écran droit affiche quatre images dans un autre mode.



**Remarque**

Pour obtenir une présentation de l'image plus satisfaisante en Mosaïque double, ajustez la préférence utilisateur **Régler la taille de l'image en mosaïque double**. En fonction des paramètres choisis, les images sont susceptibles de ne pas pouvoir être adaptées à la taille de la fenêtre, tel que décrit dans les règles ci-dessus. Pour plus d'informations sur les préférences utilisateurs, consultez [Préférences de présentation d'image](#) à la page 132.

**Affichage d'images de diagnostic en pleine résolution**

Lors de l'examen d'images FFDM, conformez-vous aux recommandations de l'ACR. Afin de garantir une visualisation optimale des informations de diagnostic, examinez chaque image en mode Pleine résolution.

Lorsqu'une image est visualisée avec un facteur de zoom supérieur à un, SecurView agrandit l'image d'origine par interpolation des valeurs de pixel entre les pixels originaux. Les caractéristiques des pixels dans les images agrandies peuvent différer des pixels de l'image originale.

- Pour plus d'informations sur le facteur de zoom, consultez [Pixel Meter](#) à la page 60.
- Pour obtenir des instructions sur la définition du mode Pleine résolution comme mode par défaut lorsque vous créez un ReportFlow, consultez [Création de ReportFlows](#) à la page 155.

### 4.2.11 Pixel Meter

Les Pixel Meter affichent des informations de dimension pour chaque image :

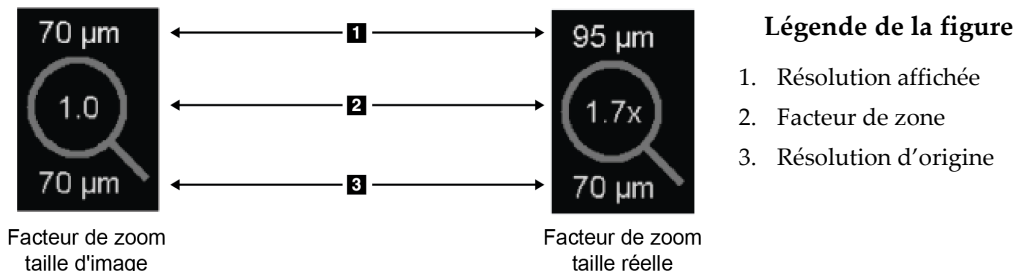


Figure 31 : Pixel Meter

Vous pouvez sélectionner le facteur de zoom grâce à une préférence utilisateur (consultez [Préférences de l'onglet Outils et Recouvrements](#) à la page 134).

- **Taille d'image** : Le facteur de zoom indique le grossissement par rapport à la taille du pixel de l'image originale. Dans l'exemple ci-dessus, le facteur de zoom Taille d'image est de « 1,0 », ce qui indique que l'image apparaît en mode Pleine résolution.
- **Taille réelle** : Le facteur de zoom indique le grossissement par rapport à la taille physique réelle de l'image, affichée ci-dessus comme « 1,7x ».

Lorsqu'une image est visualisée avec un facteur de zoom supérieur à un, SecurView agrandit l'image d'origine par interpolation des valeurs de pixel entre les pixels originaux. Les caractéristiques des pixels dans les images agrandies peuvent différer des pixels de l'image originale. Lorsque cela se produit, l'arrière-plan à l'intérieur de Pixel Meter devient blanc, comme montré ci-dessous.

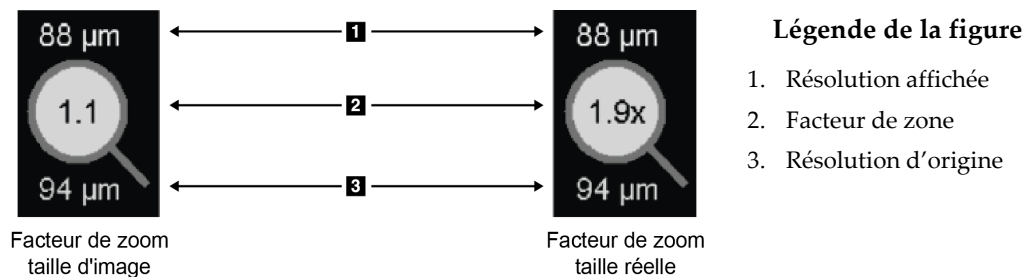


Figure 32 : Pixel Meter avec arrière-plan blanc indiquant des valeurs de pixel interpolées

#### 4.2.12 Indicateurs de pile et Indicateurs de point temporel

Quand une mosaïque comprend plus d'une image, un indicateur de pile apparaît dans le secteur correspondant. Un ou deux indicateurs peuvent apparaître, selon votre préférence utilisateur (consultez [Préférences de l'onglet Outils et Recouvrements](#) à la page 134).



Figure 33 : Indicateur de pile



Figure 34 : Indicateurs de pile et Indicateurs de point temporel

- Sélectionnez la flèche vers le haut (ou vers le bas) pour passer à l'image suivante (ou précédente) dans la pile.
- Sélectionnez la flèche droite (ou gauche) pour passer au point temporel suivant (ou précédent).

Vous pouvez aussi vous déplacer à travers les images en pointant sur un indicateur ou sur une image et en faisant tourner la molette de la souris ou celle du clavier. Si vous le souhaitez, cliquez et faites glisser l'indicateur de pile à un autre endroit de l'écran.

#### 4.2.13 Travail avec des images échographiques

Quand une mosaïque comprend plusieurs images échographiques à cadre unique ou un ensemble d'images échographiques à plusieurs cadres, un curseur horizontal apparaît dans le secteur correspondant. Pour les images échographiques à plusieurs cadres, un bouton ciné apparaît sur le curseur.

- Sélectionnez et faites glisser la poignée du curseur pour naviguer parmi les images. Les images échographiques à cadre unique sont classées par la date et l'heure d'acquisition, de la plus ancienne à la plus récente. Si la date et l'heure d'acquisition sont identiques, le numéro de série et le numéro d'instance sont utilisés, respectivement, dans l'ordre croissant.
- Sélectionnez un emplacement quelconque sur le curseur pour afficher une image spécifique.
- Faites défiler les images échographiques à plusieurs cadres en tournant la molette de la souris ou celle du clavier.
- Sélectionnez le bouton **Ciné** ou appuyez sur **Ciné** sur le clavier de workflow pour naviguer automatiquement entre les images échographiques à plusieurs cadres. Sélectionnez ou appuyez à nouveau sur **Ciné** pour arrêter l'action.



### Remarque

La vitesse par défaut est réglée dans les préférences utilisateur. La vitesse maximale par défaut est de 30 images par seconde. Un ingénieur de maintenance peut augmenter la vitesse maximale. Les systèmes équipés de processeurs plus lents risquent de ne pas pouvoir afficher des images en mode Ciné avec un débit de 30 images par seconde.

Si souhaité, vous pouvez déplacer l'outil curseur à une autre position de l'écran en pointant sur le curseur et en faisant glisser l'outil curseur.

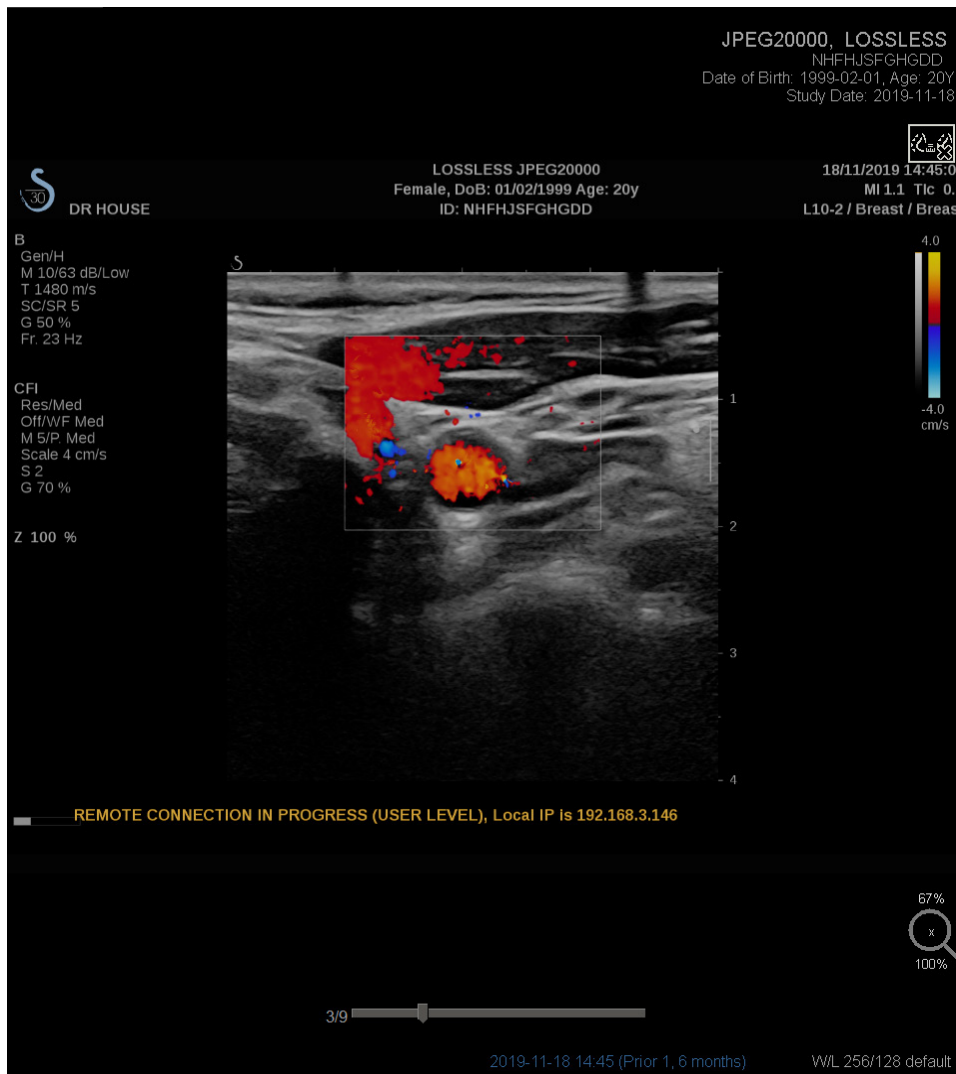


Figure 35 : Navigation dans l'image échographique


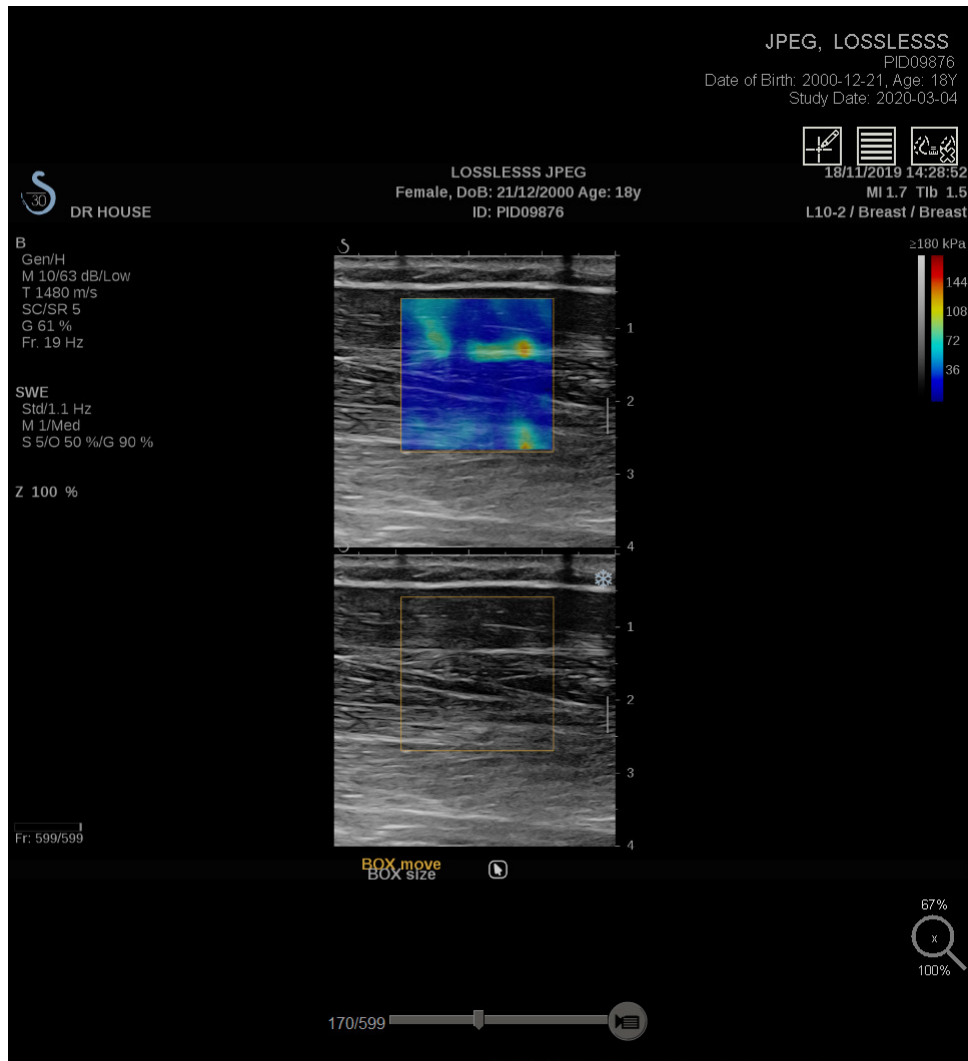


Figure 36 : Navigation dans l'image échographique à plusieurs cadres

### 4.2.14 MammoNavigator

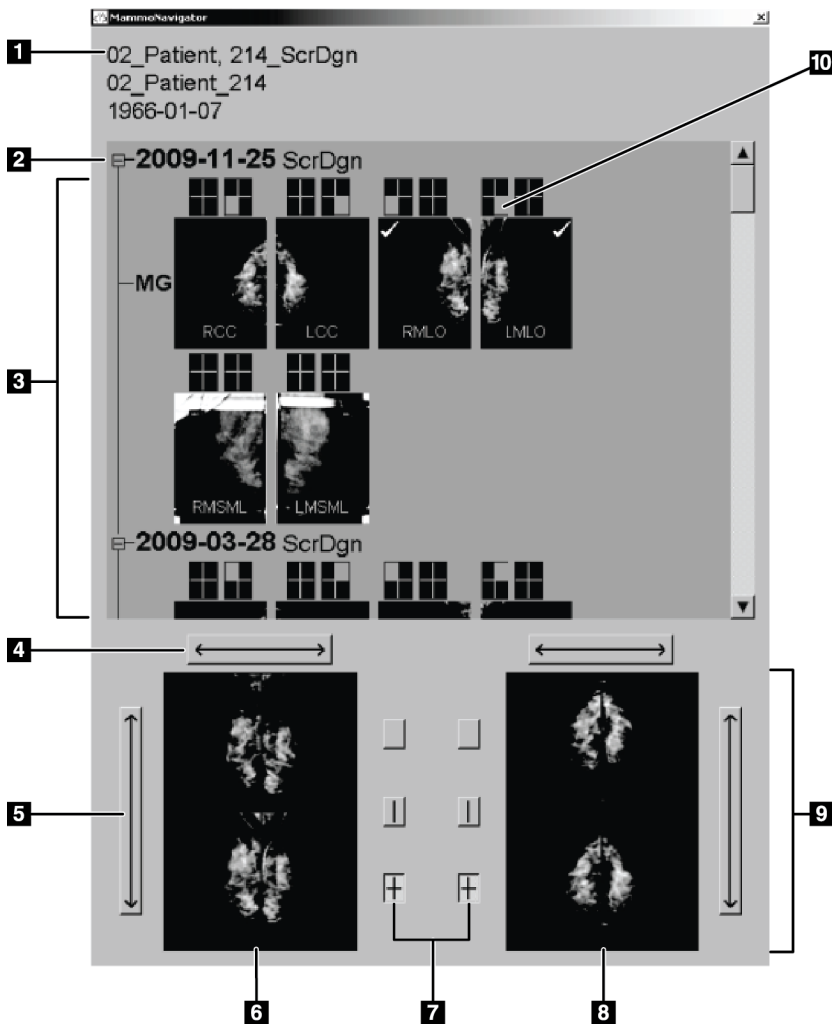MammoNavigator fournit un accès rapide à toutes les images et études du patient en cours.



#### Légende de la figure

1. Patient en cours
2. Étude disponible
3. Vue d'ensemble de l'étude (les plus récentes en haut)
4. Intervertir les images de gauche et de droite
5. Intervertir les images du haut et du bas
6. Écran de gauche
7. Boutons pour mosaïque simple, double et quadruple
8. Écran de droite
9. Images actuellement affichées
10. Indicateur de position

#### Pour ouvrir MammoNavigator :



MammoNavigator

- Sélectionnez **MammoNavigator** dans la barre d'outils à droite. Sélectionnez à nouveau pour fermer la fenêtre.

Vous pouvez modifier les ReportFlows de manière à ce que le MammoNavigator s'ouvre (ou se ferme) automatiquement en ajoutant l'étape fonctionnelle Ouvrir navigateur (ou Fermer navigateur) de ReportFlow.



En bas de MammoNavigator sont affichées les vignettes des images actuellement affichées sur les écrans. En haut, MammoNavigator fournit une vue d'ensemble de toutes les images des études du patient en cours, y compris la date de l'étude et la description de procédure. La latéralité, le mode de projection ainsi que d'autres modifications apparaissent aussi pour chaque image. Quand une image a été visionnée en mode Mosaïque simple, la vignette correspondante est cochée.

- Faites glisser une image de haut en bas pour l'afficher.
- Sélectionnez un bouton de mosaïque pour changer d'affichage (mosaïque simple, mosaïque double, etc.).



### Remarque

Depuis la version 8.2 de SecurView, les images en mosaïque double sont redimensionnées en fonction du mode de redimensionnement sélectionné (Adapter à fenêtre, Taille correcte, Même taille, ou Taille réelle). En fonction de la taille de l'image originale et du mode sélectionné, l'image peut être affichée dans une résolution inférieure que celle des versions précédentes.

---



### Remarque

Depuis la version 8.4 de SecurView, la taille de la fenêtre utilisée pour dimensionner les images présentées en mosaïque double peut être configurée, consultez [Préférences de présentation d'image](#) à la page 132. Selon la préférence utilisateur, la taille de l'image originale et le mode de redimensionnement choisis, l'image est susceptible de ne pas pouvoir tenir dans la fenêtre.

---

- Sélectionnez la flèche horizontale pour intervertir les images de gauche et de droite (pour mosaïque double et quadruple).
- Sélectionnez la flèche verticale pour intervertir les images du haut et du bas (mosaïque quadruple exclusivement).
- Double-cliquez sur une image dans la zone inférieure pour effacer l'image de l'écran.

Les vignettes de tomosynthèse sont marquées comme suit :

- « M » pour les images de mammographie 2D conventionnelles et les images de faible énergie de mammographie numérique 2D avec injection de produit de contraste (CE2D, contrast-enhanced 2D mammography)
- « G » pour les images 2D de synthèse
- « T » pour les coupes reconstruites de tomosynthèse
- « V » pour les plans de coupe reconstruits de tomosynthèse
- « P » pour les images de projection de tomosynthèse
- « S » pour les images de soustraction CE2D

Les vignettes d'images échographiques sont marquées comme suit:

- « US » pour les images échographiques à cadre unique combinées dans une vignette unique par étude et latéralité (si identifié)
- « US-MF » pour un ensemble d'images à plusieurs cadres

Un ingénieur de maintenance peut configurer l'ordre dans lequel les vignettes apparaissent.

### 4.2.15 Informations sur l'image

Pour afficher les informations DICOM détaillées d'une image, ouvrez le MammoNavigator et cliquez avec le bouton droit de la souris sur la vignette de l'image dans la zone Vue d'ensemble de l'étude.

Nom	Valeur
Modalité	MG
Latéralité	Left
Afficher position	LML
Établissement	HOLOGIC, Inc.
Adresse d'établissement	35 Crosby Drive, Bedford, MA 01730
Médecin traitant	NWH_273744
Date d'acquisition	2009-11-25
Heure d'acquisition	12:14
Partie du corps	BREAST
Compression épaisse	61.0mm
kVp	31
Couche 1/2 valeur	0.36mm
Exposition	98 mAs
Heure exposition	975 ms
DGM	0.00mGy
DEP	0mGy
Indice exposition	485
Matériau anode	MOLYBDENUM
Matériau filtre	MOLYBDENUM
Compression force	174 N
Angle arceau	90
Spot focale	0.3mm
Grille	HTC_IN
Palpateur	24cm x 30cm fast
Mode contrôle exposition	AUTO_FILTER
Description mode contrôle exposition	LORAD AUTO AEC
Manufacturer	HOLOGIC, Inc.
Serv.	Selenia
N° de série du périph.	H1KRHR835b72e2
Nom du modèle	Lorad Selenia
ID détecteur	MP1570
UID	1.2.840.113681.2203808482.774.3334562104.265.1
But de la présentation	FOR PRESENTATION
Versions logicielles	AWS:3_1_6_0 (AWS 3_1_5_2), PXC:1.2.9.0, ARR:1.4.2.6, IP:4.5.2
Dernier étalonnage détecteur	2006-08-30
Statif	n/a

Fermer

Figure 37 : Exemple d'attributs DICOM pour une image

Un administrateur peut configurer les informations apparaissant dans la fenêtre. Consultez [Recouvrement d'image dans MammoNavigator](#) à la page 188.



#### Remarque

Pour afficher les informations DICOM non disponibles dans le recouvrement d'image dans MammoNavigator, placez le curseur de la souris au-dessus de l'image et appuyez sur **[H]**.

#### 4.2.16 Recouvrements des informations sur le patient

Les informations sur le patient et les informations sur l'image sont affichées en superposition et vous pouvez les faire apparaître ou disparaître.

Pour afficher les informations sur le patient :



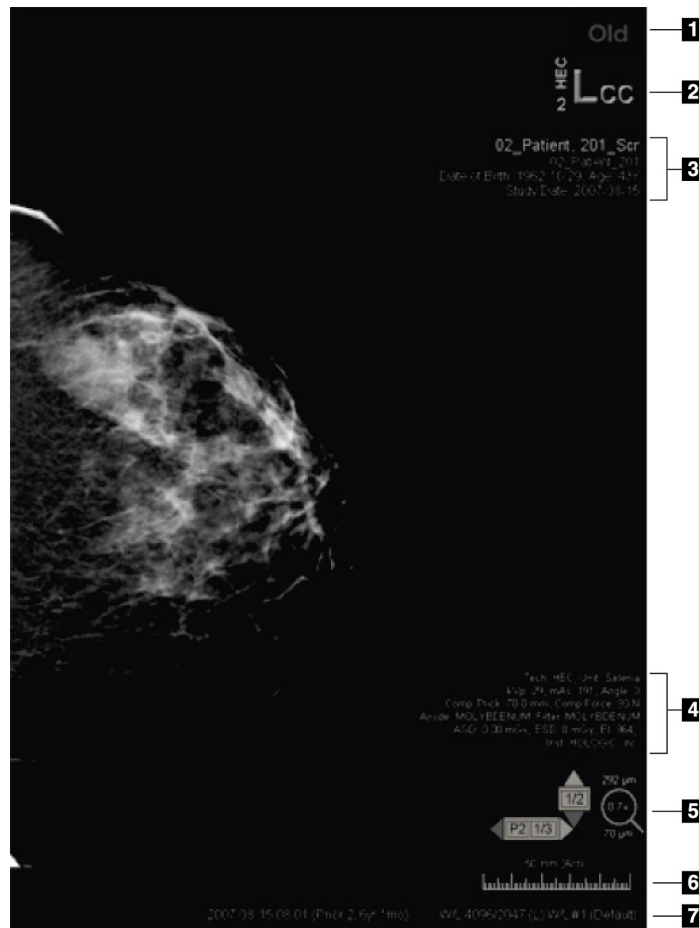
Informations sur le patient

- Sélectionnez **Informations sur le patient** dans la barre d'outils à droite pour ouvrir le recouvrement d'informations en « mode Réduit ».
- Sélectionnez à nouveau cette option pour déclencher l'affichage des informations sur le patient en « mode Étendu ».
- Sélectionnez à nouveau pour fermer les superpositions.
- Appuyez pendant deux secondes sur Informations sur le patient pour effacer tout recouvrement d'informations sur les écrans (à l'exception de l'état de l'étude et des indicateurs de pile).



#### Remarque

Pour les utilisateurs du clavier, la fonctionnalité « Effacer tout » n'est disponible que sur le clavier actuel (disposant d'une molette).



#### Légende de la figure

1. Indicateur d'état (Ancienne, Interprétée, En attente, etc.)
2. Marqueur numérique, Identifiants du manipulateur et de précédent / actuel (1 = Étude précédente, 2 = Étude antérieure à la précédente, etc.)
3. Informations sur le patient (partie supérieure) avec données patient
4. Informations sur le patient (partie inférieure) : données DICOM
5. Indicateurs d'état et Pixel Meter
6. Règle
7. Description

Figure 38 : Recouvrements des informations sur le patient

Les éléments affichés dépendent en partie de vos préférences utilisateur (consultez [Préférences de l'onglet Outils et Recouvrements](#) à la page 134). De plus, un administrateur peut personnaliser l'information affichée dans les parties supérieure et inférieure des zones superposées d'informations sur le patient (consultez [Recouvrement d'image dans MG Viewer](#) à la page 187).

Une surbrillance en niveaux de gris ou en couleurs de la date de l'étude, du marqueur numérique et de l'indicateur de pile peut être configurée par un ingénieur de maintenance de Hologic, de manière à distinguer plus facilement les images actuelles des images précédentes. Si la surbrillance est activée, elle est configurée par défaut pour ne s'appliquer qu'à la date de l'étude.

Une fois configurée, la surbrillance des images actuelles et précédentes peut être activée/désactivée à l'aide du raccourci clavier [CTRL + t]. Si la surbrillance est désactivée, elle sera activée par défaut lors du redémarrage du système.



---

### Important

Si les recouvrements d'informations de patient masquent des données d'image, sélectionnez **Informations sur le patient** pour supprimer les recouvrements.

---



---

### Remarque

Lorsqu'un patient sans images actuelles s'ouvre, un avertissement s'affiche pour vous informer qu'aucune image actuelle n'est disponible. Vous pouvez désactiver cet avertissement (consultez « Avertissement : aucune image actuelle disponible » sous [Préférences des flux de production](#) à la page 130).

---

## 4.2.17 Captures secondaires MG et captures d'écran MM



Capture secondaire  
MG

Les images de capture secondaire MG peuvent être créées à la fermeture de l'étude si le paramètre Destinations pour une capture secondaire MG (annotations et coupes tomo marquées) est configuré (consultez le *Manuel d'installation et de maintenance de la station SecurView DX/RT*). Les images de capture secondaire MG sont nécessaires lorsque le PACS de destination n'accepte pas les GSPS, ou si le PACS ne peut pas afficher les GSPS et qu'un utilisateur souhaite afficher les annotations sur la station de travail PACS. Lorsque SecurView récupère une image de capture secondaire MG à partir d'une source DICOM, une icône (illustrée à gauche) apparaît afin d'identifier l'image reçue.



Capture d'écran  
MM

De même, des images de capture d'écran MM peuvent être créées à la fermeture de l'étude lorsque le paramètre « Destinations pour une capture d'écran MM » est configuré (consultez le *Manuel d'installation et de maintenance de la station SecurView DX/RT*). Lorsque SecurView récupère une image de capture d'écran MM à partir d'une source DICOM, une icône (illustrée à gauche) apparaît afin d'identifier l'image reçue.

Pour plus d'informations, consultez [Fermeture d'une étude](#) à la page 97.

### 4.3 Visualisation des détails de l'image

Cette section décrit les outils utilisés pour visualiser les détails de l'image, y compris les réglages d'agrandissement et de luminosité/contraste.

La barre d'outils à droite fournit un ensemble d'outils d'évaluation de l'image :



Figure 39 : Outils d'évaluation d'images

Le tableau suivant décrit l'usage de chaque outil :

Icône	Usage
	<b>Fenêtre/Niveau</b> : règle la luminosité et/ou le contraste d'une image.
 	<b>Accroître / Décroître facteur gamma</b> : règle la luminosité et le contraste de <i>toutes</i> les images du patient en cours.
	<b>Initialiser F/N &amp; Gamma</b> : réinitialise les paramètres de Fenêtre/Niveau et de gamma à leurs valeurs initiales.
	<b>Tableau de consultation des valeurs d'intérêt (VOI LUT)</b> : applique un autre tableau de consultation des valeurs d'intérêt (par exemple, un réglage de Fenêtre/Niveau)
	<b>Réinitialiser</b> : annule les modifications et rétablit les images du patient en cours à leur état initial lors de l'ouverture (les annotations demeurent).
	<b>Loupe</b> : agrandit une zone d'image sélectionnée.
	<b>Loupe inversée</b> : inverse la zone agrandie.
	<b>Zoom continu</b> : active le Zoom continu.
	<b>Réinitialiser zoom continu</b> : rétablit toutes les images agrandies à leur état initial.

Le menu circulaire fournit des outils de visualisation supplémentaires (consultez [Utilisation du menu circulaire](#) à la page 50).

### 4.3.1 Loupe et loupe inversée

La loupe vous permet d'agrandir d'un facteur 2 une zone d'image affichée. (Pour les données de tomosynthèse, la fonction Loupe duplique les pixels). Des graduations millimétriques apparaissent à l'intérieur de la zone agrandie.

#### Pour agrandir une zone de l'image :



*Loupe*

- Sélectionnez **Loupe** pour remplacer le pointeur par l'icône Loupe. Pointez la zone que vous voulez agrandir et cliquez. Appuyez sur le bouton de la souris et déplacez le pointeur sur l'image pour mettre à jour dynamiquement la zone agrandie. Puis relâchez le bouton de la souris. La zone agrandie reste dans la même position.
- Pointez sur une autre image et cliquez pour placer une nouvelle loupe sur cette image.

#### Pour inverser une zone agrandie :



*Loupe inversée*

- Sélectionnez **Loupe inversée** pour remplacer le pointeur par l'icône Loupe inversée. Pointez la zone sur laquelle vous voulez appliquer l'inversion et cliquez. Comme c'est le cas avec la loupe, vous pouvez déplacer le pointeur pour mettre à jour dynamiquement la zone inversée.

#### Pour inverser toute une image :



*Inverser image*

- Cliquez avec le bouton droit sur l'image afin d'ouvrir le menu circulaire, pointez sur **Outils d'imagerie** pour ouvrir le deuxième menu circulaire. Sélectionnez ensuite **Inverser image**.

**Pour inverser toutes les images affichées :**

- Appuyez sur la touche I du clavier.

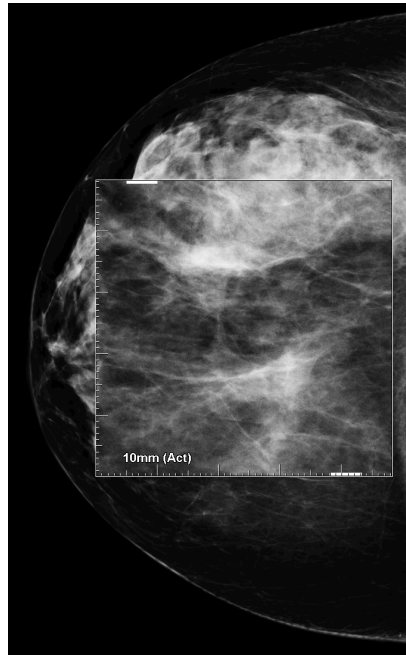


Figure 40 : Loupe

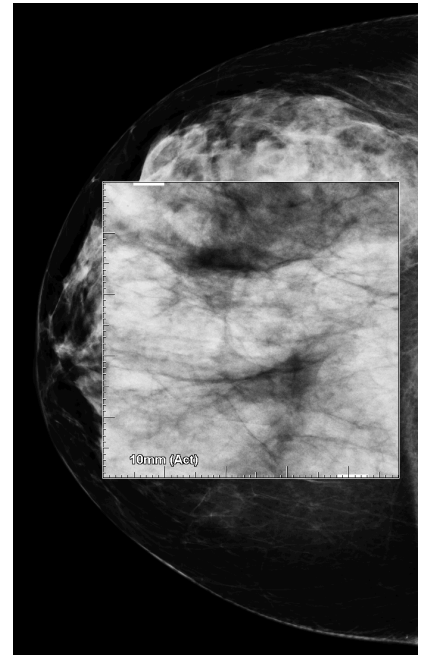


Figure 41 : Loupe inversée

**Pour fermer les loupes :**






- Double-cliquez sur une zone agrandie (un ingénieur de maintenance pourra configurer le double-clic pour fermer une loupe ou bien toutes les loupes), ou
- Modifiez la mosaïque d'images (ou passez à l'étape ReportFlow suivante).

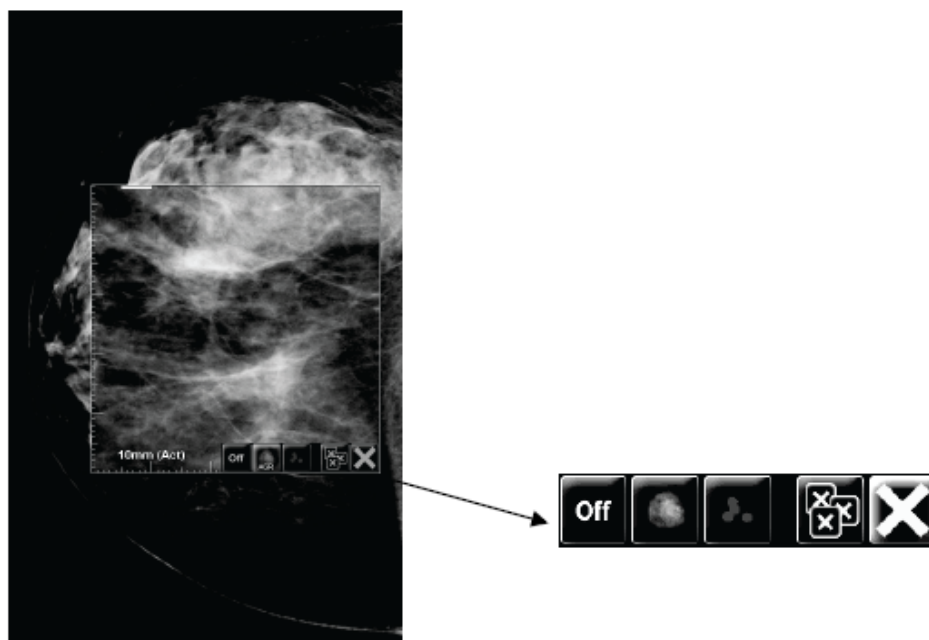
La loupe ou la loupe inversée peut être l'outil par défaut à l'ouverture du MG Viewer (préférences utilisateur). Vous pouvez aussi activer et désactiver les signes de graduation. Consultez [Préférences de l'onglet Outils et Recouvrements](#) à la page 134.

### 4.3.2 L'AIE et la barre d'outils de la loupe

Le filtre AIE (Advanced Image Enhancement — Amélioration Avancée de l'Image) aide à visualiser les masses ou les calcifications. Les fonctionnalités AIE n'apparaissent que si un ingénieur de maintenance a configuré votre station avec une licence spéciale.

Déplacez le pointeur vers le haut ou le bas de la zone agrandie pour ouvrir la barre d'outils AIE. Le tableau suivant décrit la fonction de chaque outil AIE.

Icône	Usage
	AIE On/Off — Active ou désactive le filtre AIE.
	AAI Masses — Active ou désactive le filtre AIE des masses. (« AGR » = agressif).
	AAI Calcs — Active ou désactive le filtre AIE de calcification. (« MDR » = modéré).
	Fermer toutes les loupes — Ferme toutes les loupes ouvertes.
	Fermer loupe — Ferme la loupe actuellement sélectionnée.



**Magnifier with AIE Tools**

Figure 42 : Loupe et barre d'outils AIE



### 4.3.3 Zoom continu

Utilisez le Zoom continu pour augmenter ou diminuer de façon continue le facteur de zoom d'une image affichée. Le zoom continu est limité à un facteur de zoom maximal (x20) et minimal (50 %). Contactez l'assistance technique de Hologic si vous souhaitez modifier les paramètres par défaut.



#### Remarque

Le Zoom continu est appliqué automatiquement à toutes les images de procédure combinée de même latéralité et de même vue dans un seul secteur. Par exemple, si vous zoomez sur une coupe reconstruite puis passez à une autre coupe reconstruite, le zoom s'applique également à la nouvelle coupe. Le Zoom continu s'applique aux plans de coupe reconstruits de la même façon qu'avec les coupes reconstruites. Si vous passez à une image 2D ou 2D de synthèse dans le même secteur, le zoom s'applique également.



#### Remarque

Les annotations sont redimensionnées lorsque vous modifiez le facteur de zoom des images. Si une annotation est créée sur une image agrandie et le facteur de zoom modifié, il se peut que l'annotation diminue grandement ou au contraire qu'elle recouvre en partie l'image que le radiologue souhaite visualiser. Il convient donc de ne pas créer d'annotations sur des images agrandies.

#### Pour activer le Zoom continu :



Zoom continu

1. Sélectionnez **Zoom continu** sur la barre d'outils ou appuyez sur la touche **F7** du clavier. Le curseur se transforme en icône **Zoom continu**.
2. Placez le curseur sur le point focal sur l'image, maintenez enfoncé le bouton de la souris puis faites glisser vers le haut et le bas pour modifier le facteur de zoom :
  - Vers le haut pour augmenter le facteur de zoom
  - Vers le bas pour diminuer le facteur de zoom



#### Remarque

Pour réduire jusqu'à une taille inférieure à celle initialement affichée, commencez par réduire jusqu'à la taille initialement affichée puis relâchez le bouton de la souris. Cliquez ensuite avec le bouton de la souris puis faites glisser de nouveau pour visualiser une image de taille inférieure.

3. Relâchez le bouton de la souris dès que vous atteignez la taille souhaitée. L'image demeure affichée dans la nouvelle taille.



#### Remarque

- Une fois le mode Zoom continu activé, le bouton dans la barre d'outils se transforme en icône Réinitialiser zoom continu.
- Les outils Basculement et Rotation sont désactivés lorsque le Zoom continu est actif.
- Le Zoom continu ne modifie que la taille des contours des repères DAO. Les repères DAO RightOn™ ne peuvent être ni agrandis ni diminués.

### Pour réinitialiser le Zoom continu :



---

**Remarque**

Le Zoom continu doit être actif pour pouvoir réinitialiser les modifications.

---



Réinitialiser zoom  
continu

1. Sélectionnez **Réinitialiser zoom continu** dans la barre d'outils ou appuyez sur la touche F7 du clavier pour rétablir toutes les images dans tous les secteurs à leur état initial.



---

**Remarque**

Un ingénieur de Hologic peut configurer une commande directe Réinitialiser zoom continu en raccourci clavier.

---

2. Sélectionnez **Réinitialiser zoom continu** (affiché dans un secteur) pour rétablir uniquement la ou les images du secteur à son/leur état initial.



---

**Remarque**

Tout déplacement effectué pendant l'utilisation du Zoom continu est réinitialisé. Le déplacement, le basculement et la rotation effectués avant le zoom sont conservés.

---

Vous pouvez faire de Zoom continu votre outil par défaut préféré lorsque vous ouvrez MG Viewer (préférence utilisateur). Consultez [Préférences de l'onglet Outils et Recouvrements](#) à la page 134.

#### 4.3.4 Réglages de Fenêtre/Niveau et de Gamma

Il existe deux outils permettant de régler la luminosité et le contraste de l'image :

- Utilisez l'outil de Fenêtre/Niveau pour régler la luminosité et le contraste d'une image. Au moyen d'une préférence utilisateur, vous pouvez définir l'outil de Fenêtre/Niveau comme l'outil par défaut à l'ouverture du MG Viewer (consultez [Préférences de l'onglet Outils et Recouvrements](#) à la page 134).
- Utilisez l'outil Accroître / Décroître facteur gamma pour régler la luminosité et le contraste de toutes les images du patient en cours.

**Pour régler la luminosité et le contraste d'une image :**



Fenêtre/Niveau

1. Sélectionnez **Fenêtre/Niveau**, puis pointez sur une image et faites glisser (tout en appuyant sur le bouton de la souris).
  - Faire glisser à gauche ou à droite modifie la largeur de la fenêtre (contraste) - augmentation du contraste à gauche, diminution à droite.
  - Faire glisser vers le haut ou le bas modifie la luminosité — vers le haut éclaircit l'image, vers le bas l'assombrit.
2. Relâchez le bouton de la souris lorsque vous êtes satisfait du réglage de l'image. L'image reste affichée avec les nouvelles valeurs de l'outil Fenêtre/Niveau.

**Pour régler la luminosité et le contraste par saisie numérique :**



Fenêtre/Niveau numérique

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'image afin d'ouvrir le menu circulaire, pointez sur **Outils d'imagerie** pour ouvrir le deuxième menu circulaire. Sélectionnez ensuite **Fenêtre/Niveau Numérique**.


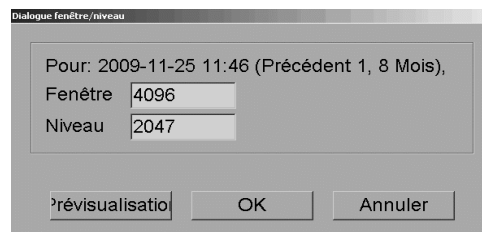


Figure 43 : Boîte de dialogue Niveau de la fenêtre

Tapez des valeurs dans les champs Fenêtre et Niveau.

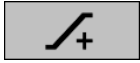
- Sélectionnez **Prévisualisation** pour tester vos paramètres.
- Sélectionnez **OK** lorsque vous êtes satisfait des nouveaux paramètres.



*Accroître facteur  
gamma*

### Pour régler la luminosité et le contraste de toutes les images du patient actuel :

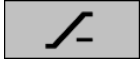- Sélectionnez **Accroître facteur gamma** pour augmenter la luminosité et le contraste en une seule étape.



*Décroître facteur  
gamma*

- Sélectionnez **Décroître facteur gamma** pour diminuer la luminosité et le contraste en une seule étape.



*Initialiser F/N*

### Pour réinitialiser les paramètres Fenêtre/Niveau et /ou Gamma à leurs valeurs par défaut :

- Sélectionnez **Initialiser F/N**, ou
- Sélectionnez **Réinitialiser**, ou
- Passez à un autre patient.



*Remise à zéro*

### 4.3.5 Application des tableaux de consultation des valeurs d'intérêt (VOI LUT)

Une image peut contenir un ou plusieurs tableaux de consultation des valeurs d'intérêt (VOI LUT). Un VOI LUT peut être un(e) Fenêtre/Niveau prédéfini(e) ou un tableau de consultation (LUT) non-linéaire. En règle générale, les images d'une même série offrent le même VOI LUT, mais différentes séries d'une même étude peuvent offrir différents VOI LUT. Lorsque le MG Viewer s'ouvre, SecurView applique un VOI LUT par défaut et met à disposition tous les autres VOI LUT intégrés. Un ingénieur de maintenance pourra définir le VOI LUT (tableau de consultation des valeurs d'intérêt) par défaut.

**Pour passer du VOI LUT par défaut à un autre VOI LUT :**



Sélectionner VOI  
LUT

1. Sélectionnez **Sélectionner VOI LUT**. Une liste de VOI LUT apparaît, si les tableaux de consultation des valeurs d'intérêt (VOI LUT) sont disponibles dans les images.

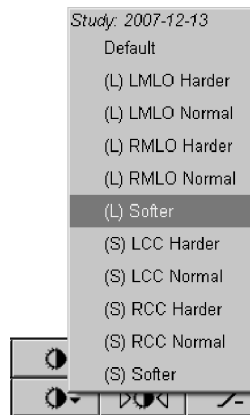


Figure 44 : Exemple de liste VOI LUT

2. Sélectionnez un LUT de la liste pour appliquer le nouveau VOI LUT.

#### 4.3.6 Images MPE

Mammography Prior Enhancement™ (MPE) est un module logiciel qui traite les clichés standard de mammographie numérique bi-dimensionnelle. MPE est destiné à être utilisé avec des incidences de dépistage d'examens précédents réalisés avec les systèmes de mammographie numérique plein champ (FFDM) GE Senographe. Les images MPE ne s'affichent que si un ingénieur de maintenance a configuré votre station avec une licence spéciale.

Vous devez entrer certaines données dans le module MPE, telles que les données de pixels d'image, des informations sur l'imagerie et les paramètres de traitement de l'image. Ce module exécute le traitement de l'image qui comprend des étapes permettant d'optimiser l'apparence des images grâce à la conversion logarithmique, la correction du profil de peau et le rehaussement du contraste. Ces méthodes standard permettent d'optimiser l'affichage et l'examen des images de la mammographie tout en limitant le nombre de fenêtre/de niveaux.

#### Utilisation prévue

L'objectif du module logiciel Mammography Prior Enhancement est d'améliorer l'apparence des clichés antérieurs de mammographie numérique qui n'ont pas été pris avec un système Hologic afin que ces clichés ressemblent au maximum à des clichés de mammographie numérique Hologic. Vous ne pouvez utiliser les images MPE qu'à des fins de comparaison et en aucune manière pour établir un premier diagnostic.

MPE fonctionne sur ordinateurs Windows. Vous pouvez afficher les résultats sur une station capable d'afficher des clichés de mammographie, comme par exemple la station SecurView DX de Hologic.

### Affichages des images MPE

Le radiologue affiche des images MPE lorsqu'il souhaite les comparer aux clichés de mammographie numérique actuels. La station SecurView DX applique automatiquement un traitement MPE à toutes les images qui remplissent les critères MPE et utilise les protocoles de présentation standard définis pour la comparaison de clichés antérieurs-actuels pour afficher les images.



#### Important

Ne prenez pas de décision clinique ou n'établissez pas de diagnostic uniquement à partir d'images MPE. Interprétez toujours des clichés actuels auxquels aucun traitement MPE n'a été appliqué.



#### Remarque

Dans de rares cas, il est possible que la présentation initiale de certaines images MPE ne soit pas optimale. Utilisez le réglage manuel de fenêtre/niveau afin d'améliorer leur apparence.

Les images suivantes proviennent de la station SecurView DX. L'image à gauche illustre une image sans traitement MPE. Celle de droite correspond à l'image après traitement MPE.

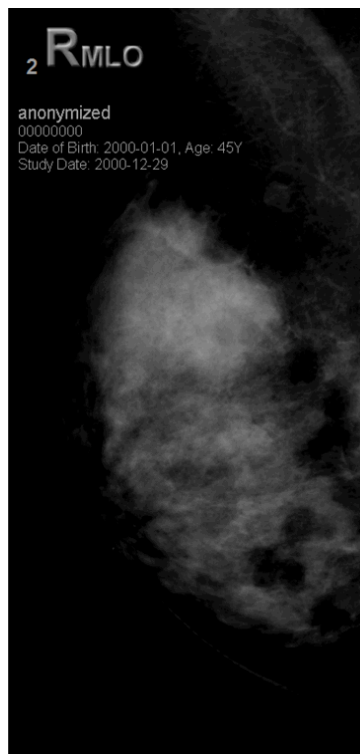


Figure 45 : Sans traitement MPE

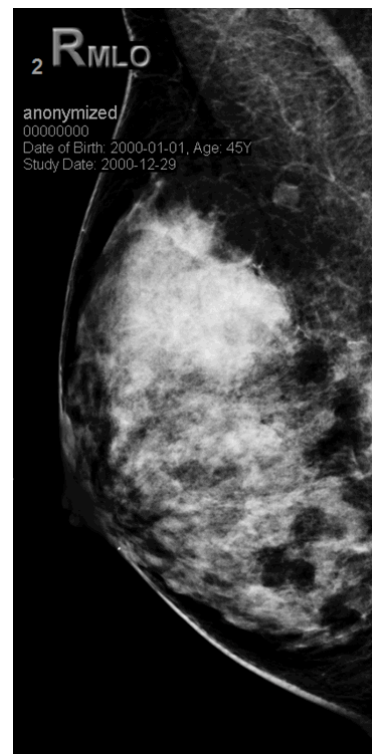


Figure 46 : Avec traitement MPE

### 4.3.7 Superpositions des champs DICOM 6000

La station de travail SecurView affiche les superpositions contenues dans le groupe DICOM 6000 dans un en-tête associé à l'image. Pour les images contenant une superposition des champs DICOM 6000, SecurView crée une copie interne de l'image sur laquelle est incorporée la superposition.

Si l'affichage des superpositions des champs DICOM 6000 n'est pas souhaité, un ingénieur peut désactiver cette fonctionnalité.

#### Affichage des superpositions des champs DICOM 6000

La copie interne de l'image sur laquelle est incorporée la superposition est empilée avec l'image originale correspondante.



#### Remarque

Si un utilisateur ne fait pas défiler toutes les images d'une pile, il peut ne pas voir les annotations contenues dans les superpositions des champs DICOM 6000.

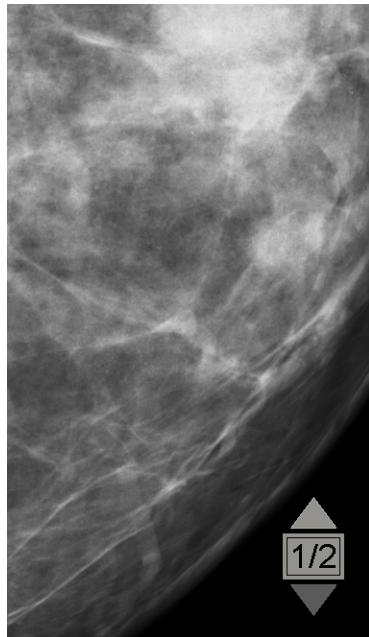


Figure 47 : Image initiale

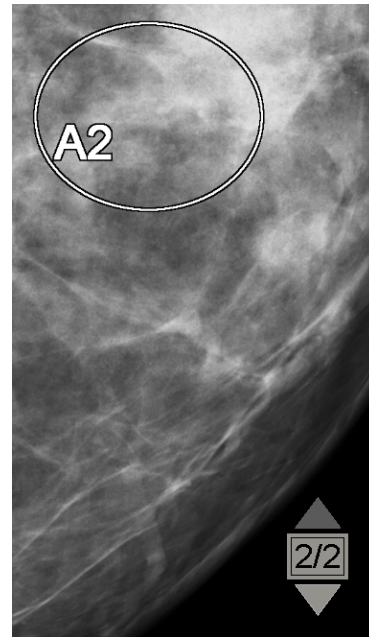


Figure 48 : Image avec superposition des champs DICOM 6000

SecurView est limité à l'affichage d'un seul groupe DICOM 6000 contenant une superposition graphique de même taille que l'image originale.

Les superpositions sont incorporées en utilisant un contour noir entourant un fond blanc. Afin d'améliorer la visibilité des superpositions, un ingénieur peut configurer l'épaisseur et la largeur du contour.



L'utilisateur de SecurView est uniquement autorisé à créer des marques, des annotations et des mesures sur l'image originale. Il n'est pas possible d'annoter la copie interne de l'image comportant la superposition incorporée.

### 4.3.8 Amélioration des images CLAHE

La station de travail SecurView prend en charge l'amélioration des images CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization). Les images bénéficiant de l'amélioration CLAHE affichent la superposition « CLAHE ». Si l'amélioration CLAHE est configurée pour une image, mais n'est pas correctement appliquée, l'image d'origine s'affiche avec un message système « Échec du traitement de l'image ».

Un ingénieur peut configurer l'amélioration CLAHE.



#### Remarque

Dans de rares cas, il est possible que la présentation initiale de certaines images améliorées CLAHE ne soit pas optimale. Utilisez le réglage manuel de fenêtre/niveau afin d'améliorer leur apparence.

---

## 4.4 Utilisation de la DAO

Les stations SecurView acceptent les objets SR DAO de mammographie produits par Hologic ImageChecker CAD, Hologic Quantra, Hologic Genius AI Detection, iCAD SecondLook, iCAD PowerLook, et toute autre application. Si le SR DAO inclut des résultats DAO, SecurView peut afficher les résultats DAO de chaque image.



#### Remarque

Hologic Genius AI Detection n'est pas disponible dans tous les pays.

---

La fonctionnalité DAO est soumise à licence. La licence contrôle l'accès à la fonctionnalité de DAO à travers l'activation des boutons DAO de la barre d'outils et du clavier. Pour plus d'informations sur chaque application DAO, consultez le guide de l'utilisateur fourni par l'éditeur de l'application DAO.

### 4.4.1 Affichage de l'information DAO

S'il y a des résultats de DAO pour un patient, un symbole « + » apparaît dans la colonne DAO de la liste de patients, ou avec les résultats de Genius AI Detection qui comprennent l'indicateur temps de lecture, la valeur correspondante (faible, moyenne, haute). De plus, lorsque vous analysez un patient ayant des résultats de DAO, le bouton DAO de la barre d'outils devient actif (non gris). Vous pouvez configurer les résultats de DAO afin qu'ils apparaissent automatiquement sous forme d'étape dans un ReportFlow.



Détection assistée  
par ordinateur

### Pour afficher les résultats de DAO :

Lorsque vous analysez une étude avec des résultats de DAO, sélectionnez **Détection assistée par ordinateur**. L'application affiche le recouvrement DAO. Des repères DAO apparaissent s'il en existe pour les images actuellement affichées.

Lorsque vous analysez une étude avec des résultats de DAO, il est possible de définir une préférence utilisateur pour afficher automatiquement la superposition de DAO sans sélectionner le bouton et indépendamment des étapes du ReportFlow configurées (consultez [Préférences de l'onglet Outils et Recouvrements](#) à la page 134).



---

#### Remarque

Tous les résultats DAO non holographiques des foyers de calcification sont affichés sous la forme d'un contour avec une ligne blanche sur fond noir. Tous les résultats de DAO non holographiques des densités mammaires de mammographie sont affichés sous forme de contour avec une ligne noire sur fond blanc.

---

### 4.4.2 Hologic CAD

L'écran des résultats de Hologic ImageChecker CAD et de Genius AI Detection comprend ce qui suit:

- Repères DAO RightOn
- Repères DAO EmphaSize™
- Repères DAO PeerView™
- LesionMetrics™ (uniquement pour ImageChecker CAD du serveur Cenova™)

#### Repères DAO RightOn

Les résultats DAO de Hologic fournissent trois types de repères DAO RightOn (Masses, Calc, et Malc). Vous pouvez choisir d'afficher un repère ou l'ensemble des trois types de repères avec une préférence utilisateur. Chaque repère indique une zone d'intérêt.



**Calc** — Indique des zones évoquant des calcifications.



**Masses** — Indique des zones évoquant des masses ou des distorsions de l'architecture mammaire.



**Malc** — Indique des zones où des repères Calc et Masses coïncident.

### Recouvrement de Hologic CAD



Détection assistée  
par ordinateur

Si vous sélectionnez **Détection assistée par ordinateur** au cours de l'analyse d'une étude avec des résultats DAO de Hologic, SecurView affiche le recouvrement de Hologic CAD. Des repères DAO apparaissent s'il en existe pour les images actuellement affichées.



Figure 49 : Superpositions de ImageChecker CAD et Genius AI Detection

Les nombres de repères Calc, Masse et Malc figurent sur le côté droit. Sur le côté gauche, SecurView affiche la version d'algorithme d'ImageChecker CAD et les points de fonctionnement dynamique sélectionnés pour les calcifications (C) et les masses (M), ou le modèle deep learning (ou apprentissage profond) de Genius AI Detection et la version d'algorithme pour les calcifications (C) et les masses (M).

Si Hologic CAD a échoué pour l'image, SecurView entoure les repères DAO RightOn de lignes brisées et le nombre des marques de l'algorithme correspondant n'apparaît pas.



Figure 50 : ImageChecker CAD a échoué pour l'image

### Repères DAO EmphaSize

Cette fonction permet à SecurView d'afficher des repères DAO Hologic de taille variable, la taille étant corrélée à l'importance des caractéristiques de l'objet. Lorsque Hologic CAD détermine qu'une zone a des caractéristiques plus importantes, le repère DAO apparaît plus grand, indiquant que cette zone doit être examinée plus attentivement par le radiologue. Les systèmes SecurView affichent, par défaut, les repères EmphaSize. Vous pouvez désactiver les repères EmphaSize au moyen d'une préférence utilisateur (consultez [Préférences de l'onglet Outils et Recouvrements](#) à la page 134).

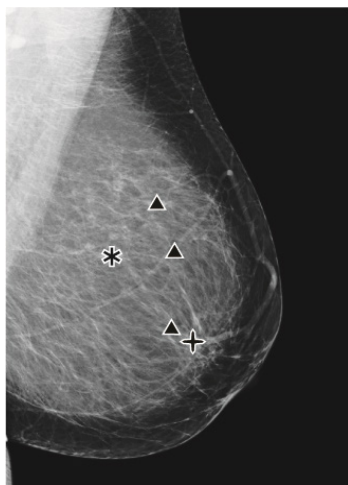


Figure 51 : CAD sans EmphaSize

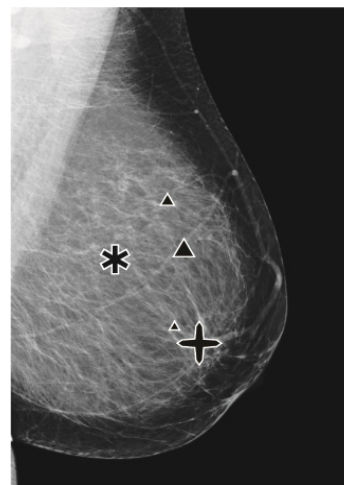



Figure 52 : CAD avec EmphaSize

### Repères DAO PeerView

PeerView met en évidence les objets anatomiques détectés par l'algorithme. Dans l'exemple ci-dessous, la même zone est représentée avec et sans repère PeerView Malc (masse avec calcifications). PeerView trace le contour de la densité centrale d'une masse et met en évidence chaque calcification d'un foyer.

#### Pour afficher les résultats PeerView :

RightOn  Sélectionnez **PeerView/RightOn**. Sélectionnez à nouveau pour afficher les repères RightOn.  
*PeerView / RightOn*

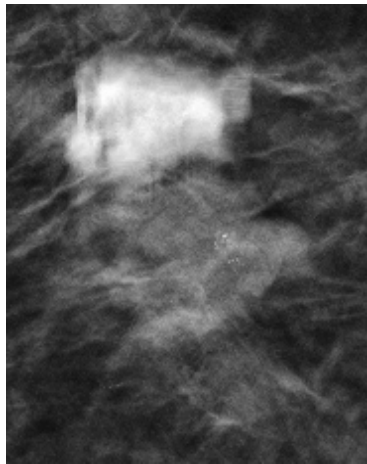


Figure 53 : PeerView désactivé



Figure 54 : PeerView activé


Les résultats PeerView n'apparaissent que lorsque l'affichage DAO a été activé et qu'au moins une image affichée indique les résultats SR DAO. Si aucune information PeerView n'est affichée sur le SR DAO, SecurView n'affiche que les repères DAO RightOn.

### LesionMetrics (ImageChecker CAD)

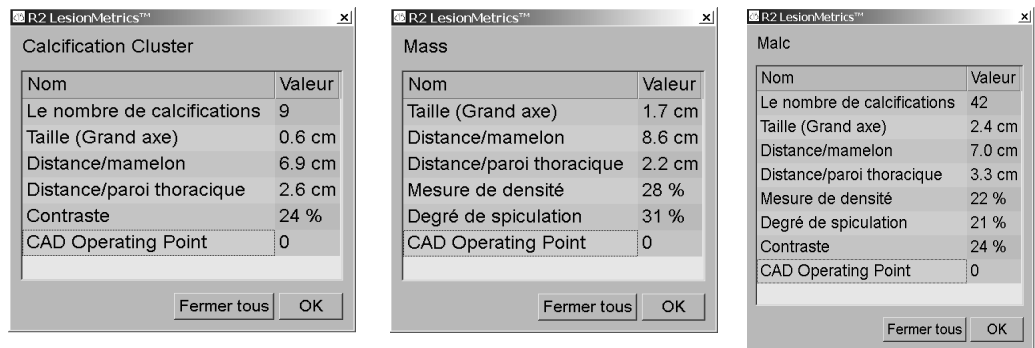LesionMetrics fournit des données calculées par ImageChecker CAD depuis un serveur Cenova pour chaque zone d'intérêt marquée par l'algorithme. Selon le type de lésion, le logiciel peut calculer des mesures telles que la taille de la lésion, la distance par rapport au mamelon, la distance par rapport à la paroi thoracique, le degré de spiculation, le contraste de la calcification, le nombre de calcifications et la densité de la masse.

#### Pour afficher les LesionMetrics de chaque résultat de DAO d'ImageChecker :

Double-cliquez sur un repère DAO RightOn ou PeerView. Une nouvelle fenêtre s'ouvre à côté du repère DAO sélectionné :



Calcification Cluster	
Nom	Valeur
Le nombre de calcifications	9
Taille (Grand axe)	0.6 cm
Distance/mamelon	6.9 cm
Distance/paroi thoracique	2.6 cm
Contraste	24 %
CAD Operating Point	0

Mass	
Nom	Valeur
Taille (Grand axe)	1.7 cm
Distance/mamelon	8.6 cm
Distance/paroi thoracique	2.2 cm
Mesure de densité	28 %
Degré de spiculation	31 %
CAD Operating Point	0

Malc	
Nom	Valeur
Le nombre de calcifications	42
Taille (Grand axe)	2.4 cm
Distance/mamelon	7.0 cm
Distance/paroi thoracique	3.3 cm
Mesure de densité	22 %
Degré de spiculation	21 %
Contraste	24 %
CAD Operating Point	0

### 4.4.3 Biomarqueurs par imagerie de Hologic



#### Remarque

L'affichage des biomarqueurs est soumis à la disponibilité de l'algorithme. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.

Les algorithmes des biomarqueurs par imagerie Hologic analysent chaque image d'une étude et fournissent les résultats d'évaluation de la densité mammaire. SecurView édite des évaluations par patient, par sein et par image. Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur Comprendre Quantra*. (Il est à noter que ce produit est vendu séparément).

#### Pour afficher les résultats des Biomarqueurs par imagerie de Hologic :



Biomarqueurs

Sélectionnez **Biomarqueurs**. Les résultats des biomarqueurs apparaissent sur trois onglets conformément à vos paramètres d'utilisateur (consultez [Préférences de l'onglet Outils et Recouvrements](#) à la page 134). En utilisant les paramètres d'utilisateur, vous pouvez configurer les résultats qui s'afficheront en premier lieu (par sujet (par défaut), par sein ou par image).



**Remarque**

Le contenu des résultats des biomarqueurs peut varier en fonction de la version des algorithmes des biomarqueurs par imagerie Hologic.


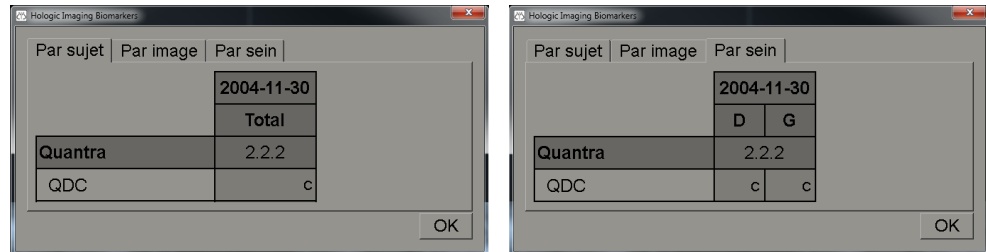


Figure 55 : Onglet Par sujet et onglet Par sein pour les Biomarqueurs par imagerie de Hologic

Les résultats n’incluant pas de valeur correspondent à une cellule vide, c.-à-d. que le rapport ne contient pas de valeur pour la mesure souhaitée.

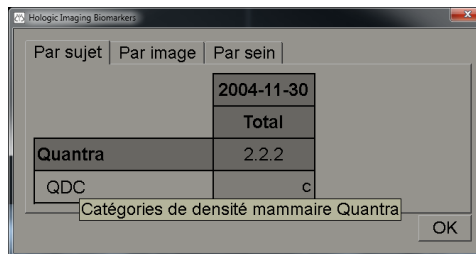Pour afficher le nom complet du résultat de biomarqueurs, pointez sur le nom abrégé comme indiqué ci-dessous.



**4.4.4 Commutation entre plusieurs SR DAO de mammographie**

SecurView affiche initialement sur chaque image les repères d’un SR DAO spécifique. Le SR DAO par défaut est le dernier rapport qui fait référence à l’image, identifié par date et par heure. Dans une même étude, il peut y avoir plusieurs SR DAO, se référant à des images différentes. Par exemple, un nouveau SR DAO peut être produit après la réouverture d’une étude au niveau de la station d’acquisition afin d’ajouter une nouvelle image.

Si vous sélectionnez un SR DAO sur une image, SecurView affiche les contenus sur toutes les images référencées par ce SR DAO. Le SR DAO sélectionné est conservé pour toutes les images référencées à condition que les données du patient soient chargées.

### Pour passer à un nouveau SR DAO :

CAD: 1 of 2  
Sélectionner  
résultats DAO

1. Dans la zone de recouvrement d'informations DAO, sélectionnez **Sélectionner résultats DAO**. Un menu contextuel présente une liste de tous les SR DAO disponibles pour l'image. Une coche s'affiche en regard du SR DAO.

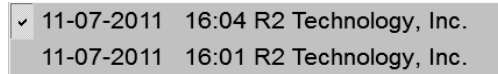


Figure 56 : Exemple de liste DAO SR

2. Sélectionnez un des éléments de la liste pour charger le SR DAO référencé et afficher les repères sur l'image.

## 4.5 Création et affichage des annotations

Une annotation se compose de repères et de la description facultative d'une zone d'intérêt. Vous pouvez marquer une lésion avec une ellipse, avec un dessin à main levée, une flèche ou avec des mesures, puis décrire la zone. SecurView relie chaque annotation à une image spécifique.

Sur SecurView DX, le créateur de l'annotation est seul autorisé à la modifier ou à l'effacer. Toutefois, les autres utilisateurs peuvent voir les annotations (sauf en situation de double lecture) et peuvent aussi saisir leurs propres annotations pour le patient. Vous pouvez envoyer des annotations à d'autres stations autonomes ou à des groupes multi-stations. Consultez [Visualisation et envoi de messages](#) à la page 94 et [Fermeture d'une étude](#) à la page 97.

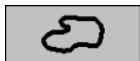


### 4.5.1 Marquage d'une image

Utilisez l'outil Ellipse, À main levée, Flèche ou Mesure pour marquer une zone d'intérêt.

Pour effectuer un marquage :

1. Sélectionnez **Ellipse**, **À main levée**, **Flèche** ou **Mesure**. Cliquez en un point pour démarrer l'inscription des repères, faites glisser pour créer la forme, puis relâchez le bouton de la souris. (Pour un repère à main levée, SecurView relie automatiquement les deux extrémités.) SecurView numérote chaque annotation (**1**, **2** et **3** ci-dessous).




À main levée



Ellipse



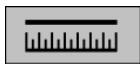Flèche



Mesure

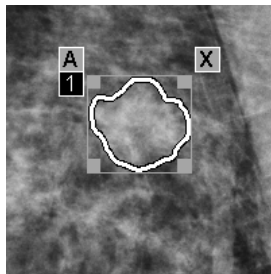


Figure 57 : À main levée

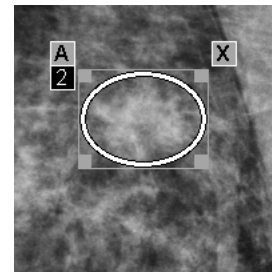


Figure 58 : Ellipse

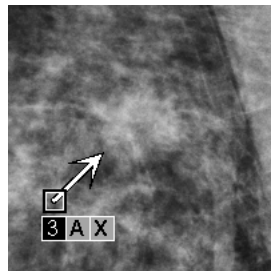


Figure 59 : Flèche

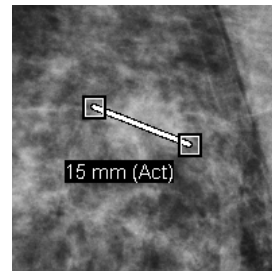


Figure 60 : Mesure

- Pour modifier la taille du repère, cliquez et faites glisser une poignée carrée.
- Pour déplacer le repère, cliquez à l'intérieur du cadre (ou cliquez sur la ligne de mesure) et faites glisser le repère vers le nouvel emplacement.
- Pour saisir la description d'un repère elliptique, à main levée ou fléché, sélectionnez **A** (consultez [Description d'une zone d'intérêt](#) à la page 91).
- Pour supprimer un repère elliptique, à main levée ou fléché, sélectionnez **X** (ou cliquez à l'intérieur du cadre et appuyez sur la touche **Retour arrière**). Pour supprimer la ligne de mesure, cliquez sur une poignée carrée (ou pressez la touche **Retour arrière**).

2. Sélectionnez un autre outil (ou passez à une autre image) pour verrouiller le repère à sa place. (Pour déverrouiller un repère, sélectionnez d'abord l'outil utilisé pour le créer : Ellipse, À main levée, Flèche ou Mesure.)



---


### Important

Soyez prudent lorsque vous prenez des mesures sur des agrandissements. Il est possible que les facteurs de conversion de l'espacement des pixels ne soient pas encodés correctement pour certains fabricants. Dans la mesure du possible, prenez les mesures sur des vues non agrandies.

---

### Pour mesurer avec la règle :

Cliquez et faites glisser la règle présente sur chaque image. Pour pivoter la règle de 90 degrés, cliquez sur la règle avec le bouton droit de la souris, puis faites glisser.

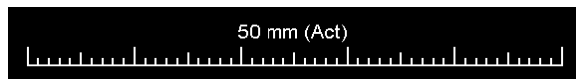

*Figure 61 : Règle*



---

### Remarque

Les longueurs des mesures sont calculées en utilisant les facteurs de conversion de l'espacement des pixels fournis par la source de données. Veuillez consulter les guides des sources de données pour des déclarations de précision.

---

#### 4.5.2 Description d'une zone d'intérêt

Après avoir marqué une image, vous pouvez ajouter une description de la zone d'intérêt en sélectionnant les attributs de lésion, en saisissant du texte ou en insérant des libellés prédéfinis.

Pour saisir la description d'une annotation :



Ellipse



À main levée



Flèche

1. Sélectionnez **Ellipse**, **À main levée** ou **Flèche**, puis cliquez sur le repère pour ouvrir le cadre.
2. Sélectionnez **A** (ou double-cliquez à l'intérieur du cadre) pour ouvrir la boîte de dialogue d'annotation :

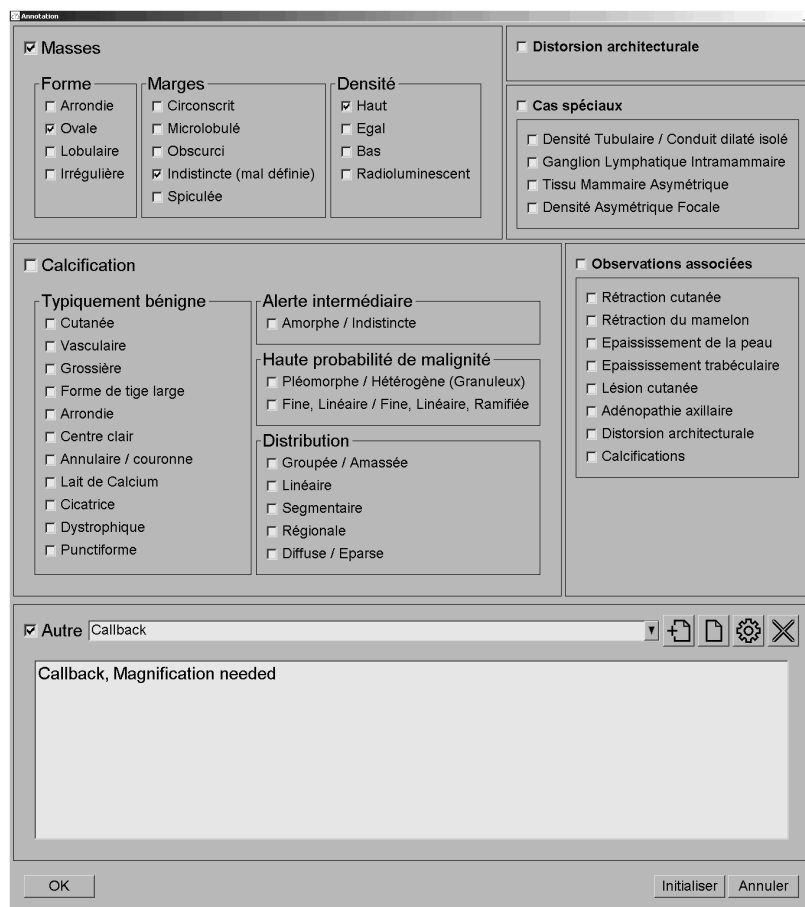


Figure 62 : Boîte de dialogue Annotation

3. Cochez une ou plusieurs cases décrivant cette lésion, et saisissez le texte souhaité (ou insérez un libellé prédéfini) dans le champ inférieur. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **OK** pour enregistrer la description.

Au moyen d'une préférence utilisateur, vous pouvez configurer la boîte d'annotation pour y inclure ou non la zone de cases à cocher (consultez [Préférences de l'onglet Outils et Recouvrements](#) à la page 134).

### Pour prédéfinir des libellés pour la description d'annotations :



Nouveau



Insérer



Modifier



Supprimer

1. Dans la boîte de dialogue Annotation, sélectionnez **Nouveau** pour ouvrir la boîte de dialogue Saisir nouveau texte.
2. Tapez votre texte et sélectionnez **OK** pour ajouter le nouveau libellé à la liste déroulante.



Une fois qu'un libellé a été défini, vous pouvez le sélectionner dans la liste déroulante, puis :

- Sélectionnez **Insérer** pour ajouter le libellé à la description de l'annotation, ou
- Sélectionnez **Modifier** pour modifier le libellé, ou
- Sélectionnez **Supprimer** pour supprimer le nouveau libellé.

### 4.5.3 Visualisation des annotations



Annotations  
présentes

Par défaut SecurView masque les annotations, quand on ouvre les données patient dans le MG Viewer. Une icône (ici à gauche) signale chaque image ayant une ou plusieurs annotations.

#### Pour voir les annotations de toutes les images actuellement affichées :



Filtre d'annotations  
utilisateurs

Sélectionnez **Filtre d'annotations utilisateurs** pour visualiser les annotations de toutes les images actuellement affichées.

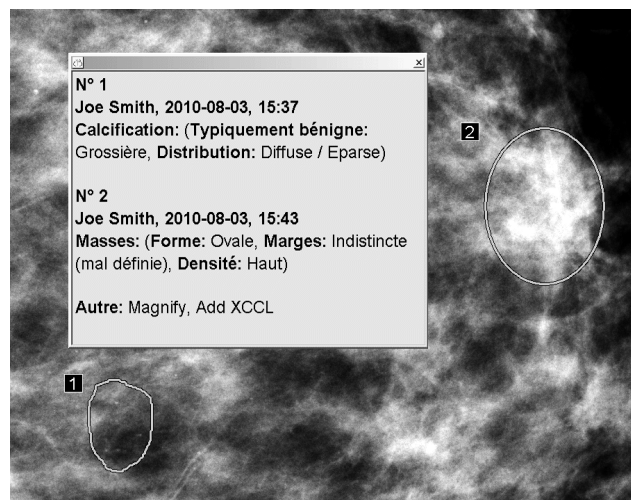


Figure 63 : Exemples d'annotations

- Pour fermer la fenêtre d'annotations, sélectionnez le X dans le coin supérieur droit.
- Pour masquer les annotations, sélectionnez à nouveau **Filtre d'annotations utilisateurs**.

**Pour afficher les annotations d'une seule image :**

Cliquez sur l'image avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu circulaire, puis sélectionnez **Filtre d'annotations utilisateurs** pour afficher ou masquer les annotations.

**Pour sélectionner des examinateurs :**

Si plusieurs examinateurs ont rédigé des annotations, une liste de ces derniers apparaît. Sélectionnez le nom du radiologue dont vous souhaitez voir les annotations (ou sélectionnez **Tous** pour visualiser toutes les annotations). Pour masquer les annotations, sélectionnez **Aucun**.

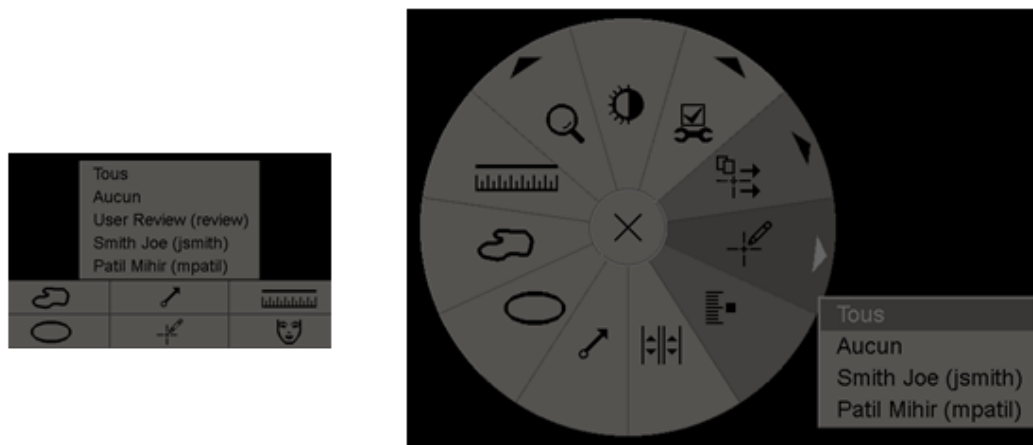


Figure 64 : Sélection d'un examinateur dans le menu circulaire

**Pour afficher des annotations GSPS de tierce partie :**



Annotations GSPS  
présentes


SecurView peut afficher des annotations GSPS tiers. Si des annotations GSPS de tierce partie sont présentes pour une image, l'icône ici à gauche apparaît. Lorsque vous sélectionnez **Filtre d'annotations utilisateurs**, SecurView marque les annotations GSPS avec une  icône.



Figure 65 : Exemple d'indicateur d'annotation GSPS d'une tierce partie



**Remarque**

SecurView ne prend pas en charge tout le contenu d'un GSPS tiers. Si les annotations GSPS provenant d'un fabricant ou d'un modèle d'appareil spécifique ne sont pas bien affichées sur SecurView, un ingénieur pourra configurer SecurView de manière à ce qu'elles ne soient pas affichées.

## 4.6 Visualisation et envoi de messages

Un message GSPS est un avis envoyé à partir d'une autre station autonome Hologic ou d'un groupe multi-stations, qui contient toutes les annotations pour une image, les valeurs actuelles de Fenêtre/Niveau, le nom d'utilisateur, ainsi que la date et l'heure de création (mais pas l'état de lecture de l'étude). Les messages basés sur des images de tomosynthèse (ensemble d'images de projection ou ensemble de coupes ou plans de coupe reconstruits) incluent toutes les annotations de l'ensemble d'images.

Pendant l'examen des données d'un patient, les utilisateurs peuvent envoyer des messages à d'autres stations autonomes ou à d'autres groupes multi-stations. Une fois qu'ils les ont reçus, les autres utilisateurs peuvent visualiser les annotations. Dans la plupart des cas, les radiologues envoient des messages pour qu'ils soient visualisés par des manipulateurs. Il est nécessaire qu'un ingénieur de maintenance configure la destination des messages.

### 4.6.1 Envoi de messages

Il existe trois manières d'envoyer des messages. Vous pouvez (1) envoyer tous les messages de l'étude en cours, (2) envoyer tous les messages lorsque vous fermez l'étude (consultez [Fermeture d'une étude](#) à la page 97) ou (3) envoyer un message de l'image actuellement sélectionnée.



Envoyer tous les messages

**Pour envoyer tous les messages :**

1. Cliquez sur l'image avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu circulaire, puis sélectionnez **Envoyer tous les messages**.
  - S'il y a une destination de messages configurée, SecurView crée les messages et les envoie immédiatement. Les messages contiennent toutes les annotations effectuées (1) par le radiologue actuel sur des études non lues ou (2) par le manipulateur actuel sur de nouvelles études (SecurView RT).
  - S'il y a plus d'une destination configurée pour les messages, un sous-menu apparaît.

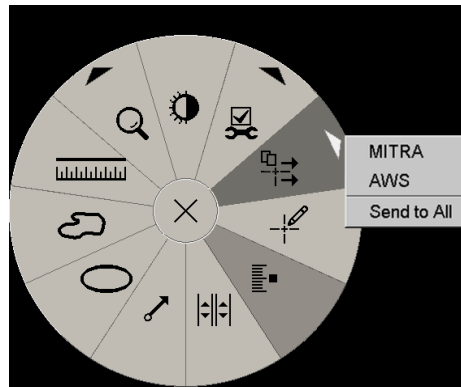


Figure 66 : Sous-menu Envoyer tous les messages

2. Pour envoyer les messages, sélectionnez une destination ou sélectionnez l'option « Send to All » (Envoyer à tous).



**Remarque**

« Envoyer tous les messages » s'applique uniquement aux études non lues. Pour envoyer les messages d'études à l'état Interprété, Ancien ou Changé, utilisez les fonctions « Envoyer message image » ou « Fermer l'étude » (consultez [Fermeture d'une étude](#) à la page 97).

### Pour envoyer un message image :



Envoyer message  
image

Cliquez avec le bouton droit sur l'image afin d'ouvrir le menu circulaire, pointez sur **Outils d'imagerie** pour ouvrir le deuxième menu circulaire. Sélectionnez ensuite **Envoyer message image**.

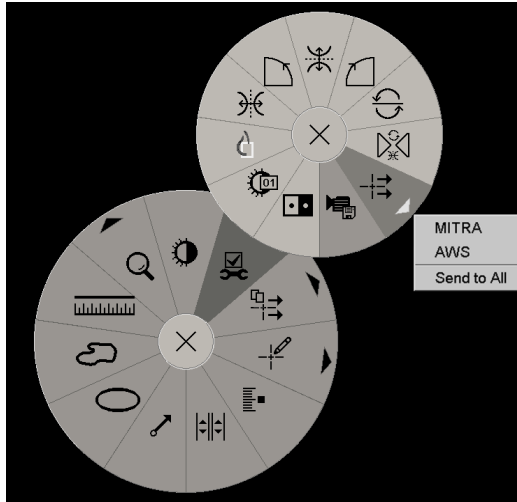


Figure 67 : Sous-menu Envoyer message image

SecurView envoie les messages immédiatement ou, s'il y a plusieurs destinations de messages configurées, un sous-menu s'ouvre pour vous permettre de choisir une destination. Ce message contient toutes les annotations de l'image sélectionnée, quel que soit le créateur ou l'état de l'étude.

### 4.6.2 Visualisation des messages



Message présent

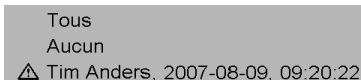
Lorsque la station reçoit un message pour un patient, le symbole « + » apparaît dans la colonne Message de la liste de patients. Par défaut, SecurView masque les messages en cas d'ouverture des données sur le patient dans le MG Viewer. Une icône (ici à gauche) signale chaque image ayant un ou plusieurs messages.

#### Pour voir les messages des images actuellement affichées :



Filtre d'annotations  
utilisateurs

1. Sélectionnez **Filtre d'annotations utilisateurs**. L'icône Message présent apparaît à côté de chaque message.



2. Sélectionnez le nom du radiologue dont vous souhaitez voir les messages (ou sélectionnez **Tous** pour visualiser toutes les annotations). Pour masquer les annotations, sélectionnez **Aucun**.



## 4.7 Fermeture d'une étude

La dernière étape dans l'examen de patients consiste généralement à fermer l'étude, c.-à-d. terminer l'examen des études actuellement chargées.

### 4.7.1 Fermeture d'une étude par un radiologue

Après avoir analysé les données d'un patient, le radiologue utilisant SecurView DX ouvre la boîte de dialogue Fermer l'étude et modifie l'état de lecture d'une ou plusieurs études, le plus souvent de « Non-interprété » à « Interprété ». Si une étude est encore non interprétée ou nécessite une double lecture, le radiologue peut attribuer des états de verrouillage.

L'option Fermer l'étude peut également servir à envoyer des messages, enregistrer des annotations, marquer des coupes ou plans de coupe de tomosynthèse et des captures d'écran de multimodalité, ou annuler la double lecture.

La boîte de dialogue Fermer l'étude s'ouvre automatiquement lorsque vous atteignez la dernière étape du ReportFlow ou lorsque vous sélectionnez **Fermer l'étude**, selon l'état de lecture des données du patient :

- La boîte de dialogue Fermer l'étude est disponible quand l'état de lecture est « Non Interprété », « Interprété une fois » ou « Changé ». La boîte de dialogue Fermer l'étude est également disponible pour toute annotation, mesure, ou coupe ou plan de coupe de tomosynthèse marqué(e), qu'il/elle soit nouveau/nouvelle ou modifié(e), quand l'état de l'étude est « Interprété » ou « Ancien ».
- La boîte de dialogue Fermer l'étude n'est pas disponible quand l'état de lecture est « Verrouillé », « Interprété » ou « Ancien », sans annotations, mesures ou coupes ou plans de coupe de tomosynthèse marqués nouveaux ou modifiés. Toutefois, si vous avez verrouillé les données patient, vous pouvez les déverrouiller (consultez [Utilisation du menu contextuel](#) à la page 35).

Pour plus d'informations sur les états de lecture, consultez [États de lecture](#) à la page 33.

### Pour fermer une étude en tant que radiologue :



Fermer l'étude

1. Sélectionnez **Fermer l'étude** (ou passez à la dernière étape du ReportFlow).

Études de 21461825	
Lu	Ancien
MG	
2014-10-18, 09:25	✓

Marquer toutes les études étant lues

Envoyer les messages  Annuler double lecture

Mémoriser annotations et coupes tomos marquées

Enregistrer capture d'écran

Comprenant aussi anc. étude/études lues

Consultation nécessaire    Images supplémentaires requises    En attente

OK    Annuler

### Légende de la figure

1. Liste des études pour le patient en cours (peut comprendre MG, US, MR, OT, DX, CR, CT, & PT)
  2. Options à exécuter à la clôture
  3. Options de verrouillage
2. Réglez les paramètres de l'étude comme il convient. Lorsque vous fermez la boîte de dialogue, SecurView peut exécuter n'importe laquelle des options suivantes :
    - a. Dans la liste des études, cochez une ou plusieurs cases pour définir l'état de lecture comme « Interprété », ou laissez les cases non cochées, ou bien sélectionnez **Marquer toutes les études étant lues**.
    - b. Sélectionnez les options pour les Messages, les Annotations et les Captures d'écran si vous souhaitez envoyer ces éléments vers des destinations configurées lorsque vous sélectionnez **OK** pour fermer la boîte de dialogue. (Consultez [Préférences des flux de production](#) à la page 130 pour configurer les paramètres par défaut de ces options.)

**Envoyer les messages** — Pour chaque étude non lue, lorsque vous sélectionnez **OK**, cette option envoie un message GSPS contenant les repères de l'utilisateur actuel (« Annotations et coupes tomo marquées »), mais n'envoie pas l'état de lecture.

**Enregistrer annotations et coupes tomo marquées** — Lorsque vous sélectionnez **OK**, cette option envoie (1) un rapport GSPS contenant l'état de lecture de l'étude et les repères de l'utilisateur actuel (« Annotations et coupes tomo marquées »), et/ou (2) une image de capture secondaire MG pour chaque image avec les repères de l'utilisateur actuel et pour chaque coupe ou plan de coupe de tomosynthèse marqué(e). Cette option s'applique à chaque étude marquée comme « Interprétée », ainsi qu'aux études déjà à l'état « Interprété » et « Ancien », si elle est activée par l'option correspondante indiquée ci-dessous.

**Enregistrer captures d'écran** — Lorsque vous sélectionnez **OK**, cette option envoie les captures d'écran de multimodalité. Cette option s'applique à chaque étude marquée comme « Interprétée », ainsi qu'aux études déjà à l'état « Interprété » et « Ancien », si elle est activée par l'option correspondante indiquée ci-dessous.

**Inclure aussi les études à l'état Ancien/Interprété** — Sélectionnez cette option si vous souhaitez inclure les annotations, les coupes ou plans de coupe de tomosynthèse marqués ou les captures d'écran de multimodalité, qu'ils soient nouveaux ou modifiés, pour les études à l'état « Interprété » ou « Ancien », respectivement dans **Envoyer messages**, **Enregistrer annotations et coupes tomo marquées** ou **Enregistrer captures d'écran**.



### Remarque

Si l'option « Inclure aussi les études à l'état Ancien/Interprété » est sélectionnée, seules les annotations, les coupes ou plans de coupe de tomosynthèse marqués, les captures d'écran de multimodalité, nouveaux ou modifiés, seront envoyés aux destinations configurées. Les messages, rapports GSPS, captures MG secondaires ou captures d'écran MM précédemment envoyés/enregistrés ne sont pas modifiés.

---

Pour de plus amples informations, consultez [Captures secondaires MG et captures d'écran MM](#) à la page 68.

- c. Sélectionnez **Annuler double lecture** pour modifier l'état d'une étude de « Interprété une fois » à « Interprété ».



### Important

Cette case à cocher n'est active que si la double lecture est configurée et que si vous définissez l'étude comme « Interprété » (voir étape 2a). Si vous annulez la double lecture et si vous modifiez l'état de lecture en 'Interprété', vous ne pourrez pas refaire passer l'état de lecture à 'Non interprété' ou 'Interprété une fois'.

---

- d. Verrouillez les données patient en sélectionnant **Consultation nécessaire, Images supplémentaires requises** ou **En attente**. Notez qu'en sélectionnant un bouton de verrouillage, toutes les nouvelles études sont marquées comme « Non interprété ».



---

### Remarque

Pour déverrouiller les données d'un patient après avoir quitté la boîte de dialogue Fermer l'étude, consultez [Utilisation du menu contextuel](#) à la page 35.

---

3. Pour enregistrer les paramètres et envoyer les données vers les destinations configurées, sélectionnez **OK** ou **Patient suivant**.



---

### Remarque

Vous pouvez configurer le système pour afficher un message d'avertissement si vous n'avez pas affiché toutes les images en mode mosaïque simple (ou double) lorsque vous fermez une étude (consultez « Avertissement de sécurité de vue manquée » sous [Préférences des flux de production](#) à la page 130).

---

## 4.7.2 Fermeture d'une étude par un manipulateur

SecurView RT active le bouton Fermer l'étude si au moins un message GSPS est disponible pour le patient actuellement ouvert. SecurView indique les études présentant un ou plusieurs messages reçus par un signe plus (+) dans la colonne Message de la liste de patients.

Si SecurView RT reçoit un ou plusieurs messages pour le patient, un manipulateur peut fermer l'étude et la passer à l'état « Examiné ».

Si un manipulateur tente de fermer un dossier de patient qui comporte des messages reçus, SecurView affiche :

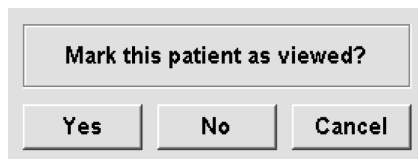


Figure 68 : Message de fermeture de l'étude pour les patients ayant reçu des messages

- Sélectionnez **Oui** pour marquer le patient comme Examiné et passer à la suite.
- Sélectionnez **Non** pour passer à la suite sans marquer le patient actuel.
- Sélectionnez **Annuler** pour visualiser à nouveau le patient en cours.

La colonne Examiné de la liste de patients indique les patients pour lesquels des messages ont été reçus et qui ont été examinés par le manipulateur.

### 4.7.3 Fermeture d'une étude depuis une application externe

En tant que radiologue, vous pouvez marquer automatiquement une étude comme « Interprétée » pour le dossier patient actuellement ouvert sur SecurView depuis une application externe, à l'aide d'Application Synchronization. L'application externe doit prendre en charge l'envoi de messages de mise à jour de l'état du patient. À la réception d'un message de mise à jour de l'état du patient depuis une application externe, SecurView marque l'étude identifiée (ou toutes les études non lues selon les préférences de l'utilisateur) comme « Interprété » et envoie tous les messages, annotations et coupes tomo marquées (y compris les plans de coupe de tomosynthèse marqués) aux destinations configurées conformément aux préférences sélectionnées par l'utilisateur (consultez [Préférences des flux de production](#) à la page 130).

Pour modifier temporairement les résultats envoyés à la clôture de l'étude, ouvrez la boîte de dialogue Fermer l'étude sur SecurView et modifiez les paramètres avant de déclencher l'envoi du message de mise à jour de l'état du patient depuis l'application externe.

## 4.8 Options d'impression

La fonction d'impression DICOM est à la disposition de tous les utilisateurs ayant des droits de consultation en lecture. Vous pouvez imprimer des images, avec d'autres données telles que les informations sur le patient, les annotations, etc., sur une imprimante de film DICOM. Pour en savoir plus sur l'impression des coupes et plans de coupe reconstruits de tomosynthèse, consultez la section [Impression des coupes et plans de coupe reconstruits de tomosynthèse](#) à la page 125.

Le MG Viewer comporte deux modes d'impression :

- Le mode **Capture d'écran** imprime les images telles qu'elles apparaissent sur les écrans de gauche ou de droite. Les images doivent être affichées dans le format souhaité pour l'impression, souvent une mosaïque simple avec une image par écran. SecurView imprime toute l'information complémentaire (recouvrements, repères, zones agrandies, etc.) telle qu'elle apparaît sur l'écran, sauf pour les annotations textuelles qui sont imprimées dans un cadre en face de la paroi thoracique.



#### Remarque

Les images couleur imprimées en utilisant le mode capture d'écran sont imprimées en niveaux de gris.

- Le mode **Diagnostic** imprime toutes les images MG d'une étude sélectionnée. Utilisez ce mode afin d'imprimer les images pour une lecture ACR. Vous pouvez choisir entre deux orientations, soit dorsale (paroi thoracique du sein droit sur la droite), soit ventrale (paroi thoracique du sein droit sur la gauche). L'impression Diagnostic n'est active que pour les patients avec des images MG (MG-MG, DX-MG, CR-MG ou SC-MG).



---

**Attention :**

Le message « Imprimé en résolution réduite » des images imprimées indique que l'impression n'est pas destinée à des fins de diagnostic. Ce message peut recouvrir ou se superposer aux autres informations textuelles.

---



---

**Remarque**

Si un film d'un format inférieur à celui nécessaire à l'impression Taille Réelle est utilisé lors de l'impression en mode Diagnostic, la mention « Image non imprimée en mode Taille réelle » est imprimée sur le film.

Si l'image à imprimer est agrandie (par exemple, si elle comprend un agrandissement des variantes de projection (M), une compression localisée (S) ou si le facteur d'agrandissement radiographique estimé est trop grand), l'image est redimensionnée pour s'adapter à la taille du film et indique la mention « Image ajustée à la taille du film ».

---



---

**Remarque**

L'impression Diagnostic n'est pas prise en charge pour les images d'échantillons.

---

**Pour imprimer les données du patient en cours :**

1. Dans la barre d'outils, sélectionnez **Impression DICOM** pour ouvrir la boîte de dialogue d'impression de MG Viewer.



DICOM Print  
(Impression  
DICOM)

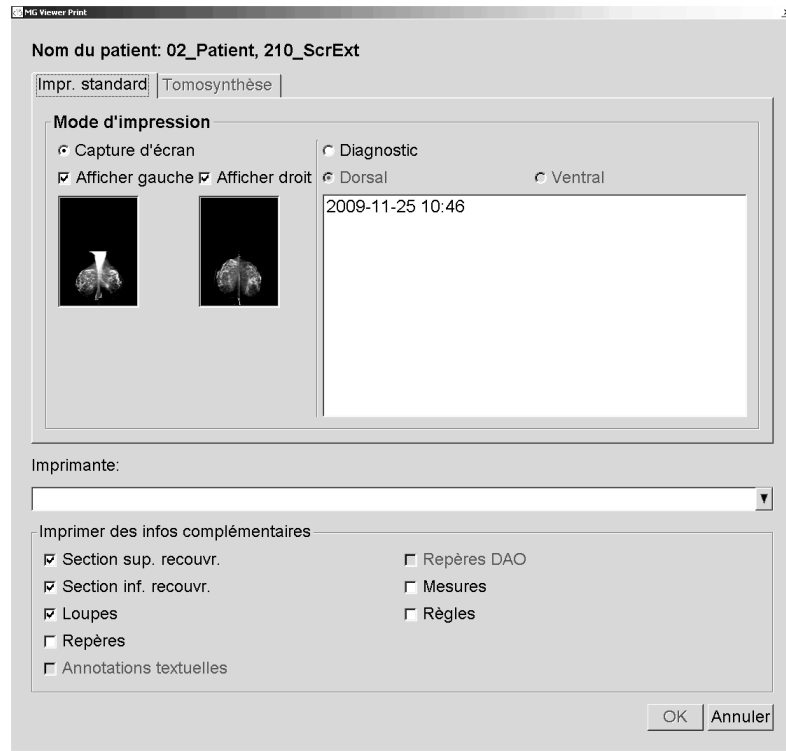


Figure 69 : Boîte de dialogue d'impression de MG Viewer

2. Sous Mode d'impression, sélectionnez **Capture d'écran** ou **Diagnostic**.
  - Pour le mode Capture d'écran, sélectionnez **Afficher gauche** ou **Afficher droit** ou les deux.
  - Pour le mode Diagnostic, sélectionnez **Dorsal** ou **Ventral**.
3. Sélectionnez une imprimante dans la liste déroulante d'imprimantes.
  - Pour le mode Capture d'écran, vous devez sélectionner le nom d'une imprimante qui comprend la taille du film.
  - Pour le mode Diagnostic, SecurView sélectionne automatiquement la taille du film et la taille de présentation DICOM en fonction de la taille de l'image.

4. Dans la section Imprimer des infos complémentaires, sélectionnez une ou plusieurs options.
  - En mode Capture d'écran, vous pouvez inclure les recouvrements d'image à imprimer, les loupes, les repères, les textes descriptifs, les repères DAO, les mesures et les règles.
  - En mode Diagnostic, vous ne pouvez imprimer que les recouvrements.



---

### Remarque

Pour configurer les recouvrements, consultez [Recouvrement d'image imprimée](#) à la page 189.

---

5. Sélectionnez **OK** pour imprimer les images sélectionnées et l'information.  
Si vous le souhaitez, sélectionnez immédiatement le bouton **Impression DICOM** pour démarrer une nouvelle tâche d'impression avant la fin de la tâche d'impression précédente.

## 4.9 Synchronisation d'un patient avec une application externe

Moyennant une configuration adéquate, votre station SecurView peut synchroniser les patients avec une application externe, et ce de plusieurs façons :

- Synchronisation manuelle
- Synchronisation automatique conformément aux préférences utilisateur
- Synchronisation automatique lorsque SecurView reçoit un message

Pour plus d'informations sur la configuration et la synchronisation avec une application externe, consultez [Configuration de l'interface de synchronisation](#) à la page 176.

### 4.9.1 Synchronisation manuelle

Vous pouvez synchroniser des patients manuellement à partir de la liste de patients ou au cours de l'examen du patient.



Synchroniser

- Dans la liste de patients, cliquez sur un patient avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez **Synchroniser** dans le menu contextuel.
- Pendant la lecture des données du patient, sélectionnez **Synchroniser** dans la barre d'outils ou appuyez sur la touche **[R]** du clavier.

En réponse, SecurView envoie un message Ouvrir les données patient à l'application externe.



### 4.9.2 Synchronisation automatique

Vous pouvez synchroniser automatiquement les patients conformément à vos ReportFlows et à vos préférences utilisateur (consultez [Préférences de profil d'utilisateur](#) à la page 138).

- **Synchronisation avec un ReportFlow** — Utilisez l'étape Synchroniser dans vos ReportFlows. Lorsque votre flux de production passe à l'étape Synchroniser, SecurView envoie un message Ouvrir les données patient à l'application externe.
- **Synchronisation à l'ouverture des données d'un patient** — Avec vos préférences utilisateur, vous pouvez faire en sorte que SecurView envoie un message Ouvrir les données patient à l'application externe chaque fois que vous ouvrez les données d'un patient dans MG Viewer.



#### Remarque

Si vous ouvrez un dossier patient en scannant le code-barres d'un numéro d'accès, par défaut, seule l'étude dotée de ce numéro d'accès scanné est envoyée dans le message Ouvrir les données patient.

---

- **Synchronisation lors du marquage d'une étude comme « Interprétée »** — Avec vos préférences utilisateur, vous pouvez faire en sorte que SecurView envoie un message Mettre à jour l'état des patients à l'application externe à chaque fois que vous fermez une étude si au moins une étude est dans l'état « Interprété ».



#### Remarque

Actuellement, seules les stations Hologic MultiView supportent la synchronisation à la clôture d'une étude.

---

### 4.9.3 Synchronisation lorsque vous recevez un message

Si vous vous connectez en tant que radiologue, SecurView peut ouvrir automatiquement les données d'un patient dans le MG Viewer lorsque le poste de travail reçoit un message Ouvrir les données patient de l'application externe.



## Chapitre 5 Travail avec des images de tomosynthèse

Ce chapitre décrit comment visualiser et travailler avec des images de tomosynthèse. La tomosynthèse du sein est une technologie d'imagerie en trois dimensions fondée sur de multiples images de projection d'un sein immobilisé et comprimé prises sous des angles différents. Les images de projection sont reconstruites en une série d'images fines (coupes) ou plus épaisses (plans de coupe) à haute résolution qui peuvent être visualisées individuellement ou en mode dynamique « Ciné ».



### Remarque

L'affichage et l'impression des images de tomosynthèse nécessitent une licence spécifique.

### 5.1 Présentation de l'imagerie de tomosynthèse

Une procédure typique combinant la tomosynthèse comporte les types d'images de séries suivantes pour chaque projection :

- Une ou plusieurs images de mammographie (mammographie conventionnelle ou image 2D de synthèse).
- Un nombre d'images de projection de tomosynthèse.
- Un nombre de coupes reconstruites de tomosynthèse.

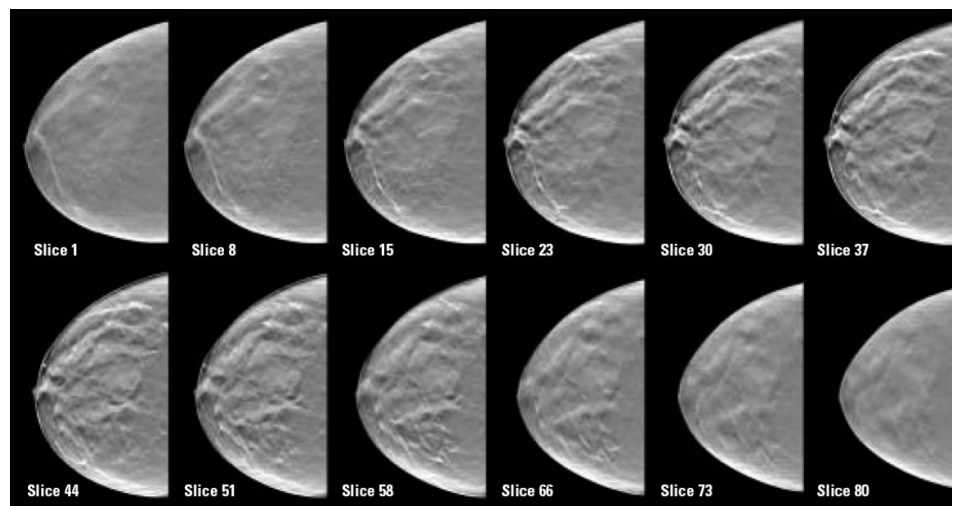


Figure 70 : Tomosynthèse : Coupes reconstruites (représentation schématique)

- Un nombre de coupes ou plans de coupe reconstruits de tomosynthèse.

Les images de tomosynthèse sont affichées en mosaïque simple, double ou quadruple. Les séries d'images de projection, les séries de coupes reconstruites, les séries de plans de coupe reconstruits, et les images de mammographie conventionnelle ou 2D de synthèse relevant de la même latéralité et de la même vue d'une procédure combinée forment une seule pile dans un secteur. Si la mammographie 2D avec injection de produit de contraste (CE2D, Contrast-Enhanced 2D mammography) est combinée avec la procédure de tomosynthèse, des images de faible énergie et de soustraction CE2D de même latéralité et de même vue apparaîtront dans la pile.

**Important**

Assurez-vous d'examiner attentivement l'étude. Lorsque vous avez consulté au moins une reconstruction (coupe ou plan de coupe reconstruit[e]) ou une image de la procédure combinée, SecurView ne vous indique pas qu'il existe des images qui n'ont pas été visualisées (c.-à-d. l'« Avertissement de sécurité de vue manquée » ne s'affiche pas).

---

**Remarque**

SecurView accepte les coupes de tomosynthèse reconstruites dans les formats d'image de capture secondaire Hologic (données de pixel privées), d'image de tomosynthèse du sein et d'image CT. Si les coupes de tomosynthèse reconstruites sont déjà disponibles dans un format et que les mêmes coupes reconstruites arrivent dans un autre format, le système est conçu pour tout ignorer à l'exception des premières coupes reconstruites reçues.

---

**Remarque**

La tomosynthèse n'est pas employée pour les agrandissements.

---

**Remarque**

SecurView prend en charge les images 2D de synthèse sur l'image de mammographie numérique, pour les formats d'image de présentation et de tomosynthèse mammaire. Si une image 2D de synthèse est déjà disponible dans un format et que cette même image 2D de synthèse se présente sous un autre format, les deux images pourront être affichées.

---

**Remarque**

Sur l'interface utilisateur de l'application SecurView, le terme « coupe » s'applique aussi bien aux coupes reconstruites qu'aux plans de coupe reconstruits.

---

## 5.2 Navigation dans les images de tomosynthèse

### 5.2.1 Boutons de navigation des images de tomosynthèse

Vous pouvez sélectionner trois types d'images lorsqu'un ensemble d'images de tomosynthèse apparaît dans un secteur ou une fenêtre :






- Images de projection
- Image de mammographie (image de mammographie conventionnelle, de synthèse 2D, de faible énergie CE2D ou de soustraction CE2D)
- Coupes et plans de coupe reconstruits



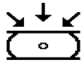Figure 71 : Boutons de navigation des images de tomosynthèse

Les boutons de navigation ci-dessus apparaissent avec les images de tomosynthèse. Si vous le souhaitez, cliquez et faites glisser le groupe de boutons à un autre endroit de l'écran. Un ingénieur de maintenance peut augmenter la zone active autour des boutons de navigation et du curseur vertical, le cas échéant.

Les plans de coupe provenant manuellement de coupes reconstruites de tomosynthèse sont affichés par la méthode de projection de l'intensité maximale (Maximum Intensity Projection – MIP).

Icône	Usage
	<b>Projection</b> — Affiche les images de projection.
	<b>Images MG</b> — Affiche des images de mammographie conventionnelle, de synthèse 2D, de faible énergie CE2D ou de soustraction CE2D. S'il existe plusieurs images, le nombre des images s'affiche sous l'icône, par exemple « 1/2 ». Sélectionnez ce bouton de façon répétée afin de faire défiler les images de mammographie disponibles.
	<b>Alternier MG/Tomosynthèse</b> — Permet de naviguer entre les images de mammographie et les reconstructions.
	<b>Reconstruction</b> — Affiche les coupes et plans de coupe reconstruits. Si l'on dispose à la fois des coupes reconstruites et des plans de coupe reconstruits, le nombre des reconstructions s'affiche sous l'icône, par exemple « 1/2 ». Sélectionnez ce bouton de façon répétée afin de naviguer entre les coupes et les plans de coupe tout en gardant le même emplacement dans le volume affiché :
	<b>Ciné</b> — Démarre et arrête l'affichage séquentiel des projections ou reconstructions.

Vous pouvez configurer l'ordre d'affichage des images de mammographie conventionnelle (dont les images de faible énergie CE2D), de synthèse 2D et de soustraction CE2D à l'aide de la configuration des captures d'écran de présentation (consultez [Création et modification de captures d'écran de présentation](#) à la page 144).

Vous pouvez configurer l'ordre d'affichage des reconstructions multiples au moyen d'une préférence utilisateur. La coupe ou le plan de coupe initial(e) à utiliser pour l'affichage des reconstructions de tomosynthèse ou la coupe initiale utilisée pour l'affichage des images de projection peuvent également être configurés au moyen d'une préférence utilisateur. Consultez [Préférences de présentation d'image](#) à la page 132.

## 5.2.2 Visualisation des coupes ou plans de coupe de tomosynthèse

Utilisez l'outil curseur pour visualiser des coupes ou plans de coupe reconstruits ou modifier l'épaisseur du plan de coupe. Utilisez la molette de la souris ou celle du clavier pour faire défiler les coupes ou plans de coupe.

**Pour visualiser des coupes ou plans de coupe de tomosynthèse :**



Reconstruction

Sélectionnez **Reconstruction** (un des boutons de navigation de la tomosynthèse) pour afficher les coupes ou plans de coupe reconstruits. Un outil curseur vertical apparaît.


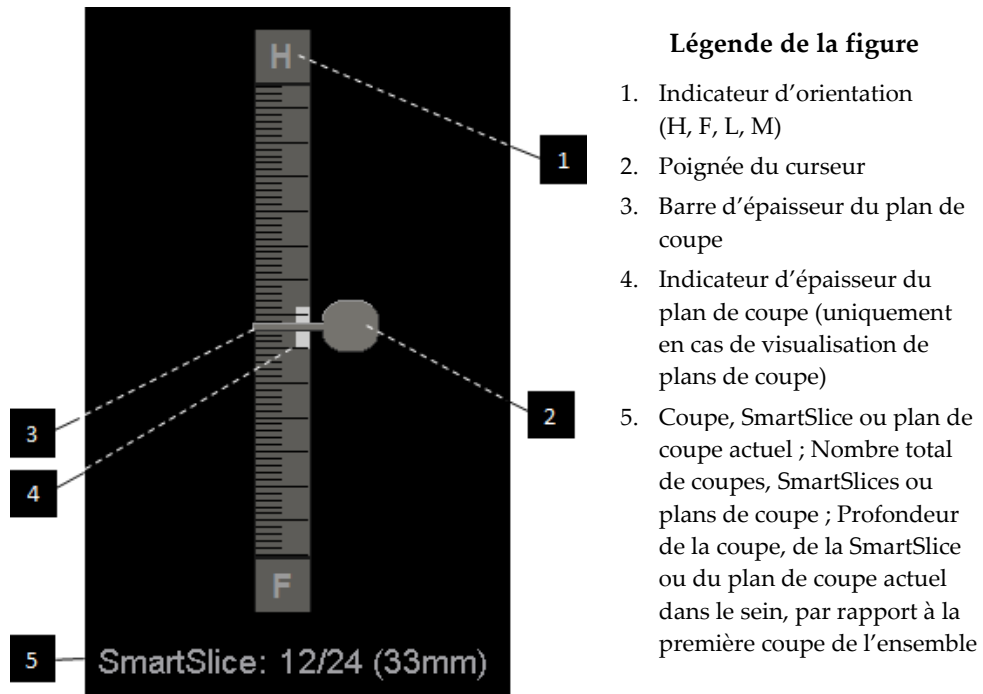


Figure 72 : Outil curseur


Les indicateurs d'orientation en haut et en bas de la règle dépendent de la direction de la vue actuelle (ML, MLO, LM, LMO, CC, SIO, ISO, XCCL, XCCM, FB) de l'image. « H » indique la tête, « F » le pied, « M » médial et « L » latéral.

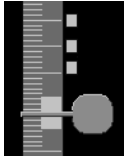Vous pouvez déplacer l'outil curseur sur une autre position de l'écran en pointant sur la règle et en faisant glisser le curseur.



Coupes marquées

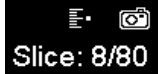Utilisez l'outil Marquer images tomo afin d'identifier une coupe ou un plan de coupe reconstruit(e) pour impression, exportation vers un support externe ou enregistrement vers les destinations configurées à la fermeture de l'étude. Une petite marque en regard du curseur vertical indique une reconstruction marquée. Cette marque est enregistrée dans la base de données et est visible tant que les données du patient restent sur la station de travail SecurView. Consultez [Marquage des coupes ou plans de coupe reconstruits de tomosynthèse](#) à la page 124.



SecurView indique les annotations de tomosynthèse de capture secondaire MG au moyen d'une icône d'appareil photo affichée à gauche. Si une capture secondaire MG représente une coupe ou un plan de coupe de tomosynthèse marqué(e), les informations sur l'emplacement de la coupe ou du plan de coupe apparaissent également.

#### **Pour naviguer parmi les coupes ou les plans de coupe :**

- Cliquez n'importe où sur l'outil (ou pointez la poignée du curseur et déplacez le curseur vers le haut ou vers le bas). SecurView affiche la coupe ou le plan de coupe reconstruit(e) correspondant(e).
- Modifiez l'emplacement en tournant la molette de la souris ou du clavier.
- Utilisez la barre d'épaisseur du plan de coupe pour ajuster le nombre de coupes ou de plans de coupe affiché(e)s (consultez [Modification de l'épaisseur du plan de coupe](#) à la page 113).

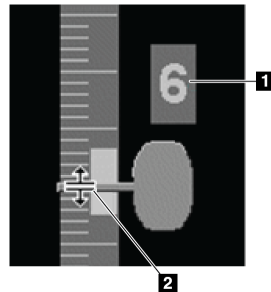
Au moyen d'une préférence utilisateur, vous pouvez choisir le mode de la molette de la souris / du clavier : soit Séquentiel (une coupe ou plan de coupe à la fois) soit Avancés (plusieurs coupes ou plans de coupe à la fois). Consultez [Préférences de présentation d'image](#) à la page 132.



### 5.2.3 Modification de l'épaisseur du plan de coupe

Utilisez la barre d'épaisseur du plan de coupe pour changer manuellement le nombre de coupes affichées.

1. Pointez la souris sur la barre d'épaisseur du plan de coupe pour afficher le curseur V-Split. L'épaisseur actuelle du plan de coupe (nombre de coupes) est affichée à droite de l'outil curseur.




#### Légende de la figure

1. Épaisseur actuelle du plan de coupe
2. Curseur V-Split sur la barre d'épaisseur du plan de coupe

Figure 73 : Curseur V-Split

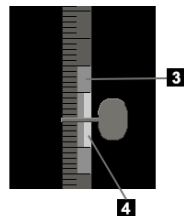2. Faites glisser le pointeur vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou diminuer l'épaisseur du plan de coupe. Les barres verticales sur l'indicateur d'épaisseur du plan de coupe indiquent l'épaisseur d'origine du plan de coupe et l'épaisseur du plan de coupe ajustée manuellement.



#### Légende de la figure

3. Épaisseur du plan de coupe ajustée manuellement
4. Épaisseur du plan de coupe d'origine


Figure 74 : Indicateur d'épaisseur du plan de coupe

3. Pour réinitialiser l'épaisseur du plan de coupe à sa valeur par défaut, double-cliquez lorsque le curseur V-Split est actif.

Définissez l'épaisseur par défaut du plan de coupe au moyen d'une préférence utilisateur (consultez [Préférences de présentation d'image](#) à la page 132).

### 5.2.4 Annotation d'une image de tomosynthèse

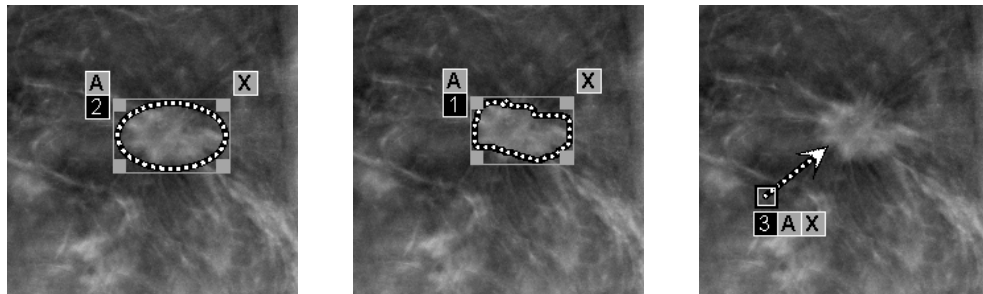Les images de tomosynthèse sont annotées de la même manière que les images MG conventionnelles (consultez [Création et affichage des annotations](#) à la page 88). Cependant, si vous augmentez l'épaisseur du plan de coupe de l'image de tomosynthèse que vous êtes en train d'annoter, le repère à main levée, elliptique ou fléché apparaît dans la coupe intermédiaire du plan de coupe et s'affiche sous la forme d'une ligne pointillée, comme illustré sur les images suivantes.



#### Remarque

Un rapport ou un message GSPS Hologic référence les objets image DICOM spécifiques sur lesquels l'utilisateur a créé des annotations. Si les mêmes coupes reconstruites ou images 2D de synthèse existent dans plusieurs formats DICOM (par exemple, capture secondaire Hologic, image de tomosynthèse mammaire et image CT pour des coupes reconstruites ; image de mammographie numérique pour l'image de présentation et de tomosynthèse mammaire 2D de synthèse), les annotations seront affichées uniquement avec les images qui correspondent au format DICOM référencé dans le GSPS.

---

## 5.2.5 Utilisation du mode Ciné

En mode « Ciné », vous pouvez visualiser, dans un certain secteur, le défilement automatique d'une série d'images de projection de tomosynthèse ou de reconstructions. Le mode Ciné s'applique simultanément à tous les secteurs liés.

Lorsque le mode Ciné démarre manuellement dans plusieurs secteurs non liés, la position de départ est synchronisée de manière à ce qu'à peu près la même position dans la poitrine soit conservée simultanément dans chaque secteur. La position ciné pour chaque secteur avec ciné déjà en cours est réglée pour correspondre à la position de départ du secteur où le mode Ciné a dernièrement démarré. Vous pouvez désactiver la synchronisation de ciné pour les secteurs non liés au moyen d'une préférence utilisateur (consultez [Préférences de présentation d'image](#) à la page 132).

Pour configurer l'activation automatique du mode Ciné pour les reconstructions de tomosynthèse lorsque vous passez à une étape ReportFlow contenant une capture d'écran de présentation en mosaïque simple, consultez [Préférences de présentation d'image](#) à la page 132.



### Remarque

Le mode Ciné ne démarre automatiquement que pour les captures d'écran de présentation qui font partie d'un ReportFlow.

### Pour démarrer le mode Ciné :

1. Sélectionnez le bouton **Ciné** ou appuyez sur **Ciné** sur le clavier de workflow. SecurView commence par la coupe ou le plan de coupe présent(e) et se déplace à travers les coupes ou plans de coupe de numéro croissant. Le mode Ciné repart en arrière quand il atteint le ou la dernière (ou le ou la première) coupe ou plan de coupe.



Ciné



### Remarque

Lorsque les repères de calcification 3D d'ImageChecker sont affichés, le mode Ciné ne fait défiler que les coupes du foyer de calcifications sélectionné.

2. Pour arrêter le mode Ciné, sélectionnez à nouveau le bouton **Ciné** ou faites tourner la molette de la souris ou du clavier.

### Pour changer la vitesse Ciné :

1. Sélectionnez le bord externe du bouton **Ciné** pour afficher la poignée du curseur de réglage de vitesse (s'il n'est pas affiché).
2. Déplacez la **poignée du curseur** pour régler la vitesse de lent/gauche (5 image par seconde) à rapide/droite (jusqu'à 30 images par seconde).



### Remarque

La vitesse par défaut est définie dans les préférences utilisateur. La vitesse maximale par défaut est de 30 images par seconde. Un Ingénieur de maintenance peut augmenter la vitesse maximale. Les systèmes équipés de processeurs lents risquent de ne pas pouvoir afficher des images en mode Ciné avec un débit de 30 images par seconde.

3. Éventuellement, sélectionnez le bord externe du bouton **Ciné** pour masquer le réglage de vitesse.

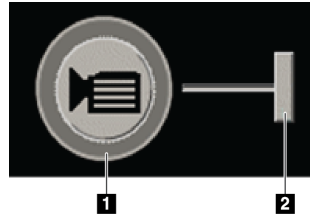


Figure 75 : Bouton Ciné et curseur de contrôle de vitesse

### Légende de la figure

1. Bord
2. Poignée du curseur de contrôle de vitesse

## 5.2.6 Utilisation du mode Ciné local

Utilisez le mode Ciné local pour afficher une plage limitée de coupes ou plans de coupe dans un seul secteur. Pour définir la plage de coupes ou plans de coupe, consultez [Préférences de présentation d'image](#) à la page 132.

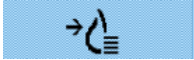
### Pour utiliser le mode Ciné local :

1. Il existe trois manières de démarrer le mode Ciné local.
  - Appuyer et maintenir enfoncé **Ciné** sur le clavier de workflow, ou
  - Appuyer et maintenir enfoncé la touche **[F6]** du clavier, ou
  - Cliquez sur le bouton **Ciné** et maintenez-le enfoncé à l'aide de la souris.SecurView commence par la coupe (ou plan de coupe) actuel(le) et se déplace d'avant en arrière parmi le nombre de coupes spécifié. Par exemple, si le nombre de coupes est 25 et que la plage est 20, SecurView fait défiler entre les coupes 15 à 35. Si le mode Ciné normal est en cours d'exécution au moment où vous passez en mode Ciné local, SecurView prend la plage du mode Ciné local.
2. Pendant l'exécution du mode Ciné local, changez la coupe (ou plan de coupe) central(e) du mode Ciné local en faisant tourner la molette de la souris ou celle du clavier ; la coupe centrale monte ou descend mais la plage de coupes reste la même.
3. Vous pouvez arrêter le mode Ciné local de trois manières différentes :
  - Appuyer sur **Ciné** sur le clavier de workflow, ou
  - Appuyer sur la touche **[F6]** du clavier, ou
  - Sélectionnez le bouton **Ciné**.

## 5.2.7 Smart Mapping

Vous pouvez utiliser le Smart Mapping pour visualiser facilement la corrélation entre une zone d'intérêt sur une image Hologic synthétisée en 2D (Intelligent 2D™ ou C-View™) et la coupe reconstruite ou SmartSlice associée la plus représentative.

### Pour utiliser le Smart Mapping :



1. Pour activer le Smart Mapping pour toutes les images 2D synthétisées affichées, sélectionnez **Smart Mapping** dans la barre d'outils de gauche, appuyez sur la touche [V] du clavier ou passez à une étape du ReportFlow qui inclut la propriété Activer le Smart Mapping (consultez [Création de ReportFlows](#) à la page 155). Le pointeur se transforme en réticule à l'intérieur de chaque secteur qui affiche une image 2D synthétisée pour indiquer que le Smart Mapping est actif.
2. Sélectionnez une région d'intérêt dans une image 2D synthétisée. La coupe reconstruite ou SmartSlice associée (selon la version disponible ou celle qui est configurée pour s'afficher sur le dessus lorsque les deux sont disponibles) est affichée dans un secteur simple sur l'écran adjacent. Un cadre en couleur ou en niveaux de gris indique quelles fenêtres sont jumelées pour le Smart Mapping (un Ingénieur de maintenance peut régler ou désactiver la surbrillance du cadre).
  - a. Lorsque le curseur se trouve dans le secteur contenant l'image synthétisée en 2D, il est possible de faire défiler (par exemple à l'aide de la molette de la souris) le secteur contenant les coupes reconstruites ou SmartSlices correspondantes.
  - b. Si la loupe est active lorsque la fonction Smart Mapping est activée, la sélection à l'intérieur de la loupe sur l'image 2D synthétisée affiche la coupe reconstruite ou SmartSlice associée avec une loupe au même endroit.
  - c. Smart Mapping reste actif pendant l'utilisation des différents outils d'évaluation d'image.
  - d. Double-cliquez dans la fenêtre des coupes Smart Mapping pour la fermer tout en gardant le Smart Mapping actif.
  - e. La fonction Smart Mapping reste active pendant le Roaming intelligent, la sélection d'une suspension prédéfinie ou la modification de l'image empilée affichée dans une fenêtre 2D synthétisée, mais la fenêtre de coupes Smart Mapping est fermée.
3. Sélectionnez **Smart Mapping** dans la barre d'outils de gauche, appuyez sur la touche [V] ou modifiez l'étape ReportFlow pour désactiver Smart Mapping pour toutes les images 2D synthétiques affichées.
  - a. Le Smart Mapping est désactivé automatiquement lorsqu'une image différente est déposée sur un secteur qui affiche actuellement une image 2D synthétisée avec le MammoNavigator.



#### Remarque :

Pour un accès rapide et temporaire au Smart Mapping, maintenez la touche [Ctrl] enfoncée tout en faisant une sélection dans une image 2D synthétisée. Le Smart Mapping cesse d'être actif lorsque la touche [Ctrl] est relâchée.



#### Remarque :

Il n'est pas possible de déposer une image du MammoNavigator dans un secteur qui affiche actuellement des coupes Smart Mapping.



---

**Remarque :**

Si les données du Smart Mapping sont corrompues, la coupe reconstruite ou SmartSlice affichée peut ne pas être la coupe la plus représentative.

---



---

**Remarque :**

La sélection de l'arrière-plan d'une image 2D synthétisée lorsque la fonction Smart Mapping est active ne modifie pas l'affichage, car aucune coupe reconstruite ou SmartSlice correspondante n'est affectée.

---

### 5.2.8 Défilement des secteurs liés

Lorsque des secteurs sont liés, le défilement dans les reconstructions ou les images de projection d'un secteur entraîne automatiquement le défilement des reconstructions ou images de projection de tous les autres secteurs liés. Le défilement de secteurs liés est valable dans des coupes reconstruites, des plans de coupe ou des images de projection avec un espacement identique ou différent.

---



---

**Remarque**

Le défilement des secteurs liés n'est disponible que lorsque des images de même type (coupes ou plans de coupe de tomosynthèse reconstruites ou projections) sont affichées dans différents secteurs.

---

#### Pour utiliser le défilement des secteurs liés :

1. Pour lancer un défilement des secteurs liés, affichez les reconstructions (ou les images de projection) de deux secteurs ou plus.
2. Cliquez sur l'image avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Lier secteur** dans le menu circulaire. Répétez cette étape pour chaque secteur à lier. Une icône d'indication s'affiche dans chaque secteur lié.



*Lier un secteur*



---

**Remarque**

Vous pouvez également activer et désactiver le lien des secteurs avec la configuration des captures d'écran de présentation.

---

3. Pour effectuer le défilement des secteurs liés :
  - Faites tourner la molette de la souris, ou
  - Déplacez la poignée du curseur d'un secteur lié, ou
  - Lancez le mode Ciné.

Si vous utilisez la molette de la souris ou le curseur, vous pouvez désactiver le défilement temporairement en maintenant la touche **Maj** enfoncée.

## 5.2.9 Exportation d'une vidéo

Vous pouvez exporter une vidéo montrant le défilement de reconstructions de tomosynthèse ou de projections de tomosynthèse.

**Pour exporter une vidéo :**

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'image afin d'ouvrir le menu circulaire, puis pointez sur **Outils d'imagerie** pour ouvrir le deuxième menu circulaire.



Export vidéo

2. Sélectionnez **Export vidéo** pour ouvrir la boîte de dialogue Export vidéo tomosynthèse. Le bouton est disponible uniquement lorsqu'une image de projection de tomosynthèse ou une coupe ou plan de coupe reconstruit(e) est affiché(e).



Figure 76 : Boîte de dialogue Export vidéo tomosynthèse

- Sous Réglages vidéo sélectionnez la résolution (largeur et hauteur) et la vitesse (images par seconde). La résolution maximale est de 2048 × 2460 pixels, la vitesse maximale est de 120 ips.
  - Sélectionnez la coupe (ou le plan de coupe) initial(e) pour la vidéo. En sélectionnant la coupe intermédiaire, vous sélectionnez également le mode Ping-pong (ci-dessous).
  - Sous Dorsal/Ventral, sélectionnez l'orientation de la vidéo.
  - Sélectionnez le mode Ping-pong pour lancer la vidéo par la coupe (ou plan de coupe) du milieu, faites défiler jusqu'à la coupe la plus haute, puis jusqu'à la coupe la plus basse, et à nouveau jusqu'à la coupe du milieu.
  - Sélectionnez Graver numéro d'image pour indiquer dans chaque coupe (ou plan de coupe) son numéro de coupe et le nombre total de coupes.
3. Sélectionnez **Export** pour ouvrir une boîte de dialogue Enregistrer sous. Sélectionnez le chemin et entrez le nom de fichier de la vidéo, puis validez. Une barre de progression s'affiche jusqu'à ce que l'exportation de la vidéo soit terminée.

### 5.3 Affichage des résultats DAO 3D

Pour les applications DAO qui détectent les foyers de calcification ou les densités mammaires de mammographie sur des coupes reconstruites par tomosynthèse, comme Hologic Genius AI Detection et iCAD PowerLook ProFound AI, les résultats DAO peuvent être affichés (consultez [Affichage de l'information DAO](#) à la page 81).

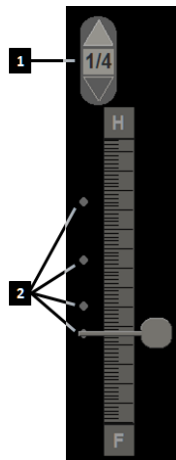


#### Remarque

Hologic Genius AI Detection n'est pas disponible dans tous les pays.

#### Pour afficher les résultats de DAO en 3D :

1. Pendant la visualisation des coupes de tomosynthèse, sélectionnez le bouton **Détection assistée par ordinateur**. Si les résultats de DAO en 3D sont disponibles, SecurView affiche un ensemble d'indicateurs DAO à côté du curseur de tomosynthèse.



#### Légende de la figure

1. Contrôles de navigation des repères DAO 3D
2. Visualisation des coupes au moyen de repères DAO 3D

Figure 77 : Curseur de tomosynthèse avec indicateurs DAO 3D

2. Pour afficher la première coupe contenant des repères DAO, sélectionnez la flèche **Haut** sur le contrôle de navigation des repères DAO 3D. SecurView affiche la première coupe qui représente le mieux un ou plusieurs repères DAO. Les repères DAO sont affichés comme estompés sur les deux coupes suivantes et précédentes. Par défaut, le score DAO est affiché avec chaque repère DAO et le score de cas est affiché dans la superposition d'informations DAO. L'affichage de ces valeurs peut être désactivé (consultez [Configuration des paramètres au niveau système](#) à la page 165).
3. Pour afficher une autre coupe contenant des repères DAO, sélectionnez les flèches **Haut** et **Bas** dans le contrôle de navigation des repères DAO 3D. Le curseur passe à la coupe correspondante.



De plus, les résultats DAO 3D peuvent être projetés sur des plans de coupe 2D conventionnels, 2D synthétisés ou de tomosynthèse pour la même vue, à condition que les coupes reconstruites de tomosynthèse référencées soient présentes. Sélectionnez le bouton **Détection assistée par ordinateur** lorsque vous visualisez les images correspondantes pour afficher les résultats DAO 3D projetés. Par défaut, la projection des résultats DAO 3D sur les images correspondantes est activée. Cette fonction peut être désactivée par type d'image (2D classique, 2D synthétisée, plans de coupe de tomosynthèse) pour un fabricant spécifique à l'aide des Paramètre fabricant (consultez [Configuration des paramètres au niveau système](#) à la page 165).

Lorsque vous visualisez des repères DAO 3D projetés sur une image 2D classique ou une image 2D synthétisée, double-cliquez sur le repère DAO pour afficher la coupe reconstruite de tomosynthèse correspondante dans la fenêtre adjacente. La coupe reconstruite de tomosynthèse correspondante peut être fermée en double-cliquant dans la fenêtre d'affichage des coupes, comme dans le mode de secteur unique temporaire Smart Mapping (consultez [Smart Mapping](#) à la page 116).

### 5.4 Affichage des résultats de DAO ImageChecker 3D Calc CAD



---

#### Remarque

ImageChecker 3D Calc CAD n'est pas disponible aux États-Unis d'Amérique.

---

ImageChecker 3D Calc CAD est un algorithme logiciel qui identifie des régions d'intérêt dans les coupes de tomosynthèse de Hologic. Pour produire et visualiser les résultats de DAO ImageChecker 3D Calc CAD, vous aurez besoin des deux éléments suivants :

- le serveur de mammographie numérique Cenova avec une licence ImageChecker 3D Calc CAD de Hologic, et
- la station SecurView DX (version 7.2 ou ultérieure) avec licence d'affichage pour la DAO de tomosynthèse de Hologic.

S'il y a des résultats de DAO pour un patient, un symbole « + » apparaît dans la colonne DAO de la liste de patients. De plus, lorsque vous analysez un patient ayant des résultats de DAO, le bouton DAO de la barre d'outils est activé (non gris).

Un administrateur pourra configurer les résultats de DAO de manière à ce qu'ils apparaissent automatiquement en formant une étape du ReportFlow.

### Pour afficher les résultats de DAO ImageChecker 3D Calc CAD :



Détection assistée  
par ordinateur

1. Pendant la visualisation des coupes de tomosynthèse, sélectionnez le bouton **Détection assistée par ordinateur**.

Si des résultats DAO de tomosynthèse sont disponibles, SecurView affiche un ensemble de barres indicatrices de DAO en regard de l'outil curseur de tomosynthèse. Chaque barre indique des coupes qui comprennent au moins une calcification importante. Le recouvrement DAO apparaît également.

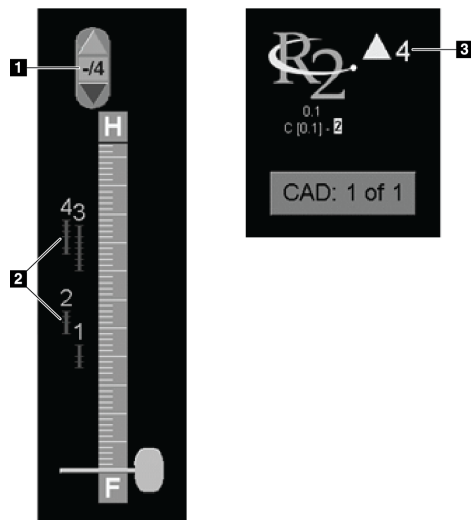


Figure 78 : Outil curseur avec indicateurs  
ImageChecker 3D Calc CAD ; Logo R2

### Légende de la figure

1. Outil de navigation DAO (sélectionnez pour afficher le premier repère DAO)
2. Barres indicatrices de repères DAO
3. Nombre de repères DAO

2. Pour afficher le premier repère, sélectionnez la flèche **Haut** de l'outil de navigation DAO ou appuyez sur la touche **[W]** du clavier.

SecurView affiche le premier repère DAO et la « coupe d'intérêt » correspondante, qui est la coupe qui représente le mieux la région d'intérêt dans son ensemble, généralement la coupe qui contient le plus de calcifications. SecurView met également en évidence le foyer sélectionné et la barre indicatrice DAO correspondante. Les autres foyers visibles apparaissent en gris.

La première apparition des repères DAO dépend de la mosaïque de visualisation et des paramètres par défaut pour chaque utilisateur (consultez [Préférences de l'onglet Outils et Recouvrements](#) à la page 134).

- En mosaïque quadruple, les résultats apparaissent sous la forme de repères DAO RightOn.
- En mosaïque double ou simple, chaque repère DAO apparaît comme une ligne pointillée délimitant la région d'intérêt ou comme des calcifications individuelles mises en évidence.

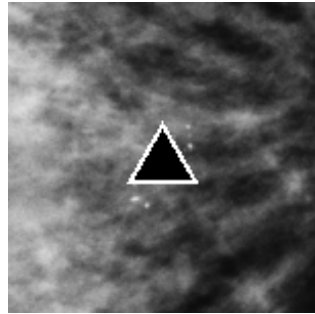


Figure 79 : Repère DAO RightOn

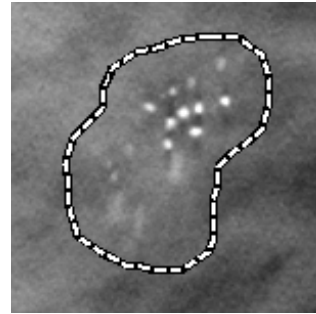


Figure 80 : Délimitation d'un repère DAO

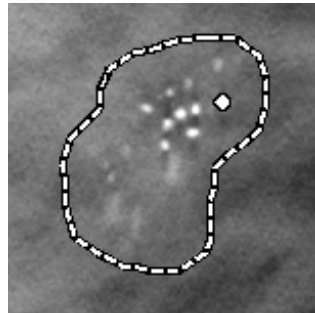


Figure 81 : PeerView (1 coupe)

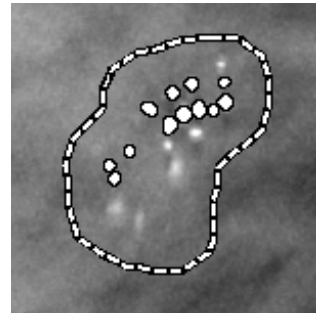


Figure 82 : PeerView (4 coupes)

### Repères DAO ImageChecker 3D Calc CAD

3. En mosaïque simple ou double, réglez l'affichage des repères DAO de la manière suivante :
  - Appuyez sur la touche [B] du clavier pour afficher ou masquer les lignes de délimitation.
  - Appuyez sur la touche [C] pour afficher ou masquer les marqueurs PeerView.
  - Augmentez l'épaisseur du plan de coupe pour visualiser la pleine étendue des calcifications dans un foyer (consultez [Modification de l'épaisseur du plan de coupe](#) à la page 113.)
4. Pour sélectionner un autre repère DAO :
  - Sélectionnez les flèches **Haut** et **Bas** de l'outil de navigation DAO.
  - Appuyez sur la touche [W] du clavier pour passer au repère suivant.
  - Appuyez sur la touche [S] pour revenir au repère précédent.
  - Cliquez sur n'importe quelle barre indicatrice DAO.

Le curseur saute à la coupe d'intérêt du repère sélectionné.



Ciné

5. Pour utiliser le mode Ciné, sélectionnez un repère DAO et sélectionnez le bouton **Ciné** (ou sélectionnez **Ciné** dans le menu circulaire).

SecurView commence par la coupe en cours et se déplace à travers les coupes qui correspondent au repère DAO. Le mode Ciné revient en arrière quand il atteint la dernière (ou la première) coupe.

6. Pour arrêter le mode Ciné, sélectionnez à nouveau **Ciné**.

## 5.5 Marquage des coupes ou plans de coupe reconstruits de tomosynthèse

Utilisez ces instructions pour identifier les coupes ou plans de coupe à imprimer, exporter vers un support externe, ou enregistrer vers les destinations configurées à la fermeture de l'étude.

**Pour marquer des coupes ou plans de coupe reconstruits de tomosynthèse :**

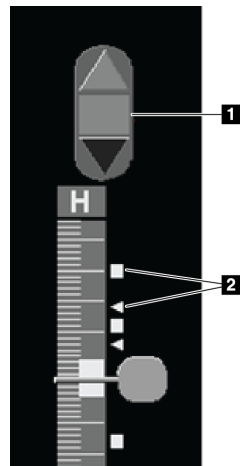
Afficher la coupe ou le plan de coupe, puis :

- Sélectionnez **Marquer images tomo** dans le menu circulaire, ou
- Appuyez sur la **Barre d'espace** du clavier.

SecurView marque la coupe (ou le plan de coupe) correspondant(e). Sur le côté droit de l'outil curseur, des petites marques indiquent les coupes marquées :



Marquer images tomo



### Légende de la figure

1. Outil de navigation pour images marquées
2. Indicateurs de marquage

Figure 83 : Outil curseur avec indicateurs de marquage



L'outil de navigation pour images marquées apparaît dès que vous marquez au moins une coupe (ou un plan de coupe) reconstruit(e) pour l'imprimer ou l'exporter. De plus, l'icône ici à gauche apparaît.

- Pour afficher la coupe marquée suivante ou la précédente, sélectionnez **Flèche vers le haut** ou **Flèche vers le bas** dans l'outil de navigation.
- Pour supprimer un indicateur de marquage, affichez la coupe marquée et appuyez sur la **barre d'espace** (ou sélectionnez à nouveau **Marquer les images Tomo**).

### Travail avec des indicateurs de marquage triangulaires :

Une marque triangulaire signale un indicateur de marquage d'un autre radiologue provenant d'un objet GSPS reçu. Les marques triangulaires ne peuvent pas être modifiées. Cependant, si vous marquez une coupe (ou un plan de coupe) présentant des marques triangulaires, vos marques se superposent sur les triangles et apparaissent sous la forme d'indicateurs de marquage carrés.

## 5.6 Impression des coupes et plans de coupe reconstruits de tomosynthèse

Pour imprimer des coupes ou plans de coupe reconstruits de tomosynthèse, vous devez d'abord identifier les coupes ou plans de coupe à imprimer, soit en les marquant (consultez [Marquage des coupes ou plans de coupe reconstruits de tomosynthèse](#) à la page 124), soit en les identifiant avec la boîte de dialogue d'impression de MG Viewer.

1. Dans la barre d'outils, sélectionnez **Impression DICOM** pour ouvrir la boîte de dialogue d'impression de MG Viewer.



DICOM Print  
(Impression  
DICOM)

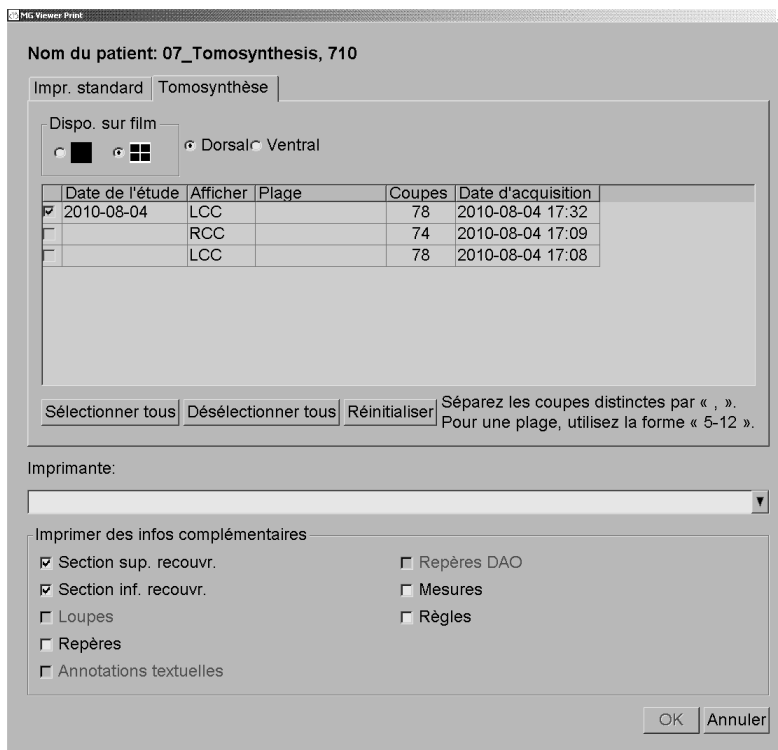


Figure 84 : Boîte de dialogue d'impression de MG Viewer

2. Sélectionnez l'option Dispo. sur film ainsi que Dorsal ou Ventral.
  - Lorsque vous sélectionnez la mosaïque quadruple, les images sont imprimées de manière à entrer dans le quadrant correspondant, conformément à la taille de film sélectionné.
  - Lorsque vous sélectionnez la mosaïque simple, l'image s'imprime en taille réelle, si cela est possible. Si la taille du film ne permet pas l'impression en taille réelle, l'impression sera réduite à la taille de la zone du film.
  - Si le nombre de coupes ou plans de coupe reconstruits à imprimer dépasse un film, SecurView distribue les images sur plusieurs films.
  - Quand il y a changement de latéralité et de projection, un nouveau film commence.
3. Dans la première colonne, cochez la case qui sélectionne **des vues reconstruites d'une étude**. La colonne **Plage** répertorie les numéros des coupes ou plans de coupe marqués pour impression.
4. Cliquez sur la zone et saisissez un numéro de coupe (ou plan de coupe) individuel(le), une plage de coupes avec un tiret (par ex. « 10-15 ») ou des coupes individuelles classés par ordre croissant et séparées par une virgule (par ex. « 10,12,20,25 »).

5. Sélectionnez **Sélectionner tous** pour sélectionner toutes les vues reconstruites. Sélectionnez **Désélectionner tous** pour effacer toutes les sélections. Sélectionnez **Réinitialiser** pour réinitialiser toutes les modifications effectuées sur l'onglet **Tomosynthèse**.
6. Dans la zone inférieure, sélectionnez les informations complémentaires à imprimer.
7. Sélectionnez **OK** pour imprimer les images. (Si vous le souhaitez, sélectionnez immédiatement **Impression DICOM** pour démarrer une nouvelle tâche d'impression avant la fin de la tâche d'impression précédente.)





## Chapitre 6 Configuration des préférences utilisateur

Ce chapitre présente comment définir les préférences de chaque utilisateur. SecurView permet à chaque radiologue et manipulateur de personnaliser l'interface afin d'optimiser son flux de production. Une fois qu'un administrateur vous a ajouté comme nouvel utilisateur de SecurView, vous pouvez configurer votre propre profil système.

Notez que les préférences utilisateur sont les paramètres par défaut. Lorsque vous visualisez des patients, vous pouvez modifier les options de visualisation à tout moment sur une base ponctuelle.

**Pour afficher les onglets de préférences utilisateur :**

Sur l'écran *Démarrage* de SecurView, sélectionnez **Administration**. Sélectionnez ensuite **Préférences utilisateur** pour afficher l'onglet **Flux de production** (vue partielle affichée).

Patient Manager	Préférences utilisateur	Infos	
<b>Flux de production</b>	<b>Présentation d'image</b>	<b>Outils et Recouvrements</b>	<b>Profil d'u</b>
<b>Tri de liste de travail Revue et Session</b> <input checked="" type="radio"/> Cliquer sur Ordre dans liste patients <input type="radio"/> Date de l'étude <input type="radio"/> Alphabétique <b>Tri automatique de liste de travail</b>		<b>Envoyer annotations, tomos marquées et cap</b> Cochez ces options par déf. ds boîte de dialogue Fermer l'étude : <input checked="" type="checkbox"/> Envoyer les messages <input checked="" type="checkbox"/> Mémoriser annotations et coupes tomos mar <input checked="" type="checkbox"/> Enregistrer captures d'écran	

Figure 85 : Onglet Flux de production des Préférences utilisateur (vue partielle)



### Remarque

Les onglets de **Préférences utilisateur** que l'on voit ici sont ceux à disposition des radiologues.

Les pages suivantes décrivent les quatre onglets **Préférences utilisateur**. Sous chaque onglet, sélectionnez les paramètres souhaités. Une fois que vous avez terminé, sauvegardez vos paramètres en cliquant sur le bouton **Appliquer** (dans le coin inférieur droit de la fenêtre).



### Remarque

Sur l'interface utilisateur de l'application SecurView, le terme « coupe » s'applique aussi bien aux coupes reconstruites qu'aux plans de coupe reconstruits.

### 6.1 Préférences des flux de production

L'onglet **Flux de production** s'ouvre lorsque vous sélectionnez **Préférences utilisateur** dans le module Administration :

The screenshot shows the 'Préférences utilisateur' dialog box with the 'Flux de production' tab selected. The dialog is divided into several sections:

- Flux de production**:
  - Tri de liste de travail Revue et Session**:
    - Cliquer sur Ordre dans liste patients
    - Date de l'étude
    - Alphabétique
  - Tri automatique de liste de travail**:
    - Date de l'étude
    - Alphabétique
  - Mélange de temps de lecture**:
    - Configurer ...
  - Présentation et ReportFlows**:
    - Configurer ...
  - Rechercher**:
    - Fermer le dialogue de recherche après récupération
  - Multimodality Viewer**:
    - Configurer ...
- Envoyer annotations, tomos marquées et captures d'écran**:
  - Cochez ces options par déf. ds boîte de dialogue Fermer l'étude.
  - Envoyer les messages
  - Mémoriser annotations et coupes tomos marquées
  - Enregistrer captures d'écran
  - Comprendre aussi anc. études/études lues
- Avertissement de sécurité de vue manquée**:
  - Mosaïque simple
  - Mosaïque simple ou double
  - Arrêt
- Aucun courante avertissement**:
  - Afficher à l'ouverture d'un cas
- Avertissement de réserve de travail automatique modifié**:
  - Afficher lors de la reprise d'une réserve de travail automatique
- Réception de messages**:
  - Notifier l'arrivée des messages
- Focus par défaut sur la recherche de patient**:
  - Focus sur l'ID patient
  - Focus sur le nom du patient

Figure 86 : Onglet Flux de production

Après avoir effectué vos sélections, sauvegardez vos paramètres en cliquant sur le bouton **Appliquer** (dans le coin inférieur droit de la fenêtre).

- **Tri de liste de travail Revue et Session** — Définit l'ordre utilisé par SecurView pour afficher les patients sélectionnés manuellement (consultez [Utilisation de la liste de patients](#) à la page 28) ou les patients présents dans la liste de travail d'une session (consultez [Création de sessions](#) à la page 39).
- **Tri automatique de liste de travail** — Définit l'ordre utilisé par SecurView pour afficher les données de nouveaux patients mis automatiquement en attente à leur réception (consultez [Listes de travail générées automatiquement](#) à la page 44).
- **Mélange de temps de lecture** – Sélectionnez **Configurer...** pour configurer un mélange de temps de lecture défini par l'utilisateur, incluant les patients qui ont été dépistés avec des rapports DAO qui comprennent un indicateur temps de lecture (par exemple Hologic Genius AI Detection) (consultez [Listes de travail générées automatiquement](#) à la page 44).
- Nombre maximum de patients dans la liste de travail – Configure le nombre maximum de patients à inclure dans la liste de travail automatique avec le filtre Mélange de temps de lecture appliqué.

- Utilisez les deux curseurs pour régler le mélange de cas avec chaque valeur de l'indicateur temps de lecture (faible, moyen, et haut).

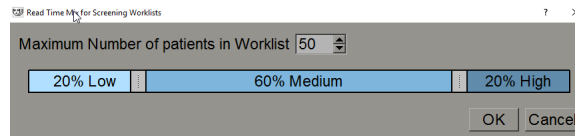


Figure 87 : Configuration du mélange de temps de lecture

- **Captures d'écran de présentation et ReportFlows** — Sélectionnez **Configurer...** pour mettre en place les captures d'écran de présentation et les ReportFlow, y compris vos préférences personnelles pour les ReportFlow par défaut. Consultez [Captures d'écran de présentation et ReportFlows](#) à la page 141.
- **Rechercher** — Sélectionnez cette option pour fermer automatiquement la boîte de dialogue de recherche quand vous sélectionnez **Récupérer** (consultez [Recherche de patients](#) à la page 37).
- **Viewer Multimodality** — Sélectionnez **Configurer...** pour ouvrir l'Éditeur de configuration multimodalité (consultez le *Guide de l'utilisateur de l'option avancée de multimodalité SecurView*).
- **Envoi de messages, d'annotations, de coupes tomo marquées, de captures d'écran, Inclure aussi les études à l'état Ancien/Interprété** — Pour SecurView DX, ces options s'appliquent si l'ingénieur de maintenance a configuré les destinations respectives. Si vous cochez l'une de ces options, SecurView les vérifiera automatiquement lorsque vous ouvrirez la boîte de dialogue Fermer l'étude. Notez que vous pouvez modifier ces paramètres pour un patient spécifique dans la boîte de dialogue Fermer l'étude (consultez [Fermeture d'une étude](#) à la page 97).
- **Avertissement de sécurité de vue manquée** — Pour SecurView DX, vous pouvez configurer le système de manière à afficher un message d'avertissement si vous n'avez pas visualisé toutes les images en mode mosaïque simple (ou double) lorsque vous fermez une étude (consultez [Fermeture d'une étude](#) à la page 97).
- **Avertissement : aucune image actuelle disponible** — Sélectionnez cette option pour que SecurView vous informe lorsqu'un patient sans images actuelles est ouvert (consultez [MG Viewer](#) à la page 46).
- **Avertissement de réserve de travail automatique modifié** — Sélectionnez cette option pour que SecurView vous informe lors du retour à une liste de travail automatique après Suspendre et revoir, lorsque l'ordre des patients peut avoir été modifié (consultez [Les boutons de la liste de patients](#) à la page 29).
- **Réception de messages** — Sélectionnez cette option si vous voulez que SecurView vous informe lorsqu'il reçoit un message d'une autre station Hologic (consultez [Visualisation et envoi de messages](#) à la page 94).
- **Focus par défaut de la recherche de patient (PACS/Local)** — Définit soit l'ID patient, soit le nom du patient comme champ d'entrée par défaut lorsqu'une recherche de patient est effectuée (consultez [Recherche de patients](#) à la page 37).

## 6.2 Préférences de présentation d'image

La fenêtre suivante s'ouvre lorsque vous sélectionnez l'onglet **Présentation d'image** :

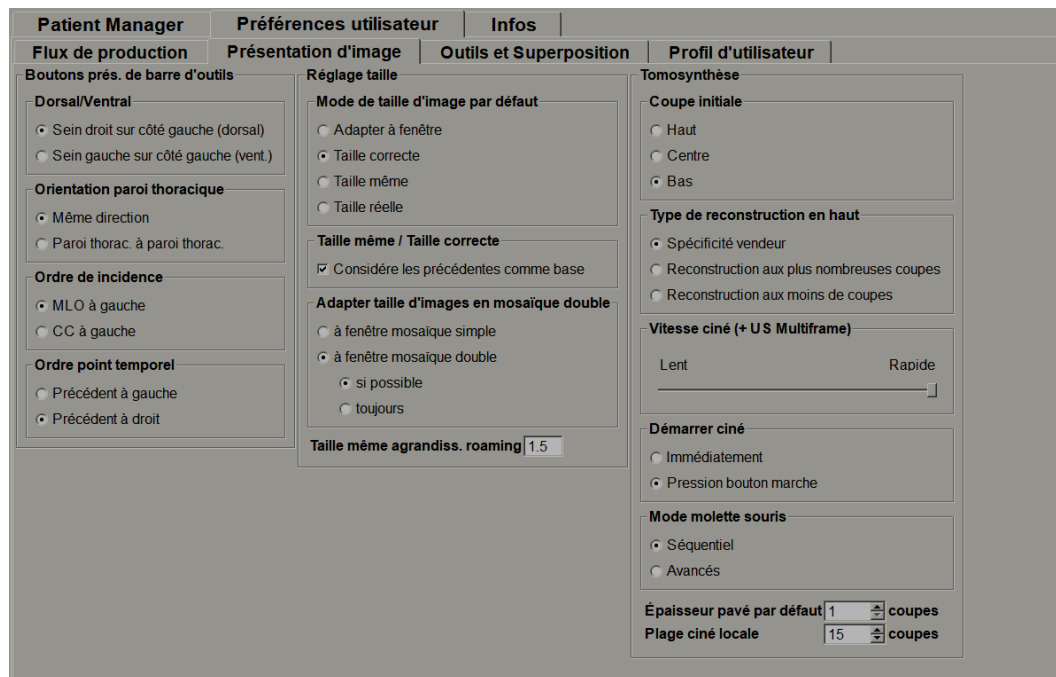


Figure 88 : Onglet Présentation d'image

Après avoir effectué vos sélections, sauvegardez les paramètres en cliquant sur le bouton **Appliquer** (dans le coin inférieur droit de l'écran).

- **Boutons Présentations de barre d'outils** : pour définir la manière dont vous voulez que les images soient placées, orientées et ordonnées lorsque vous utilisez les boutons de présentation d'image. Consultez [Présentations d'images](#) à la page 54.
- **Réglage taille** :
  - **Mode de taille d'image par défaut** sert à définir le mode de redimensionnement de l'image par défaut.
  - **Même taille/Taille correcte** : « Utiliser les précédents comme base » permet, dans les modes de mise à l'échelle de l'image Même taille et Taille correcte, d'inclure les examens actuels et précédents lors de la sélection des images les plus grandes comme référence de mise à l'échelle. Le paramètre est activé par défaut. Lorsque le paramètre est désactivé, la plus grande image à utiliser comme référence de mise à l'échelle est sélectionnée dans l'examen en cours.
  - **Régler la taille de l'image en mosaïque double** permet de configurer la taille de la fenêtre utilisée pour dimensionner les images présentées en mosaïque double. S'applique aux modes de redimensionnement Adapter à la fenêtre, Taille correcte et Même taille. Consultez [Modes échelle](#) à la page 58 pour plus d'informations. Afin d'activer le comportement d'affichage des versions SecurView antérieures à 8.2, utilisez l'option **Fenêtre mosaïque simple**.

- La fonction **Agrandissement roaming de même taille** détermine le facteur d'agrandissement numérique de ce mode de taille d'image (valeur décimale de 1,0 à 2,0). Consultez [Modes échelle](#) à la page 58.
- **Tomosynthèse** : permet de configurer la manière dont SecurView affiche des images des études combinées de tomosynthèse. Consultez [Travail avec des images de tomosynthèse](#) à la page 107.
  - **Coupe initiale** définit la coupe ou le plan de coupe qui apparaît en premier lorsque vous visualisez une reconstruction de tomosynthèse ou l'image qui apparaît en premier lorsque vous visualisez une série d'images de projection.
  - **Trier la reconstruction en haut** définit l'ordre d'affichage des reconstructions multiples dans la même procédure combinée :
    - **Spécifique au fournisseur** : Si cette option est sélectionnée, l'ordre d'affichage des reconstructions peut être configuré par fabricant. Pour configurer l'ordre de tri propre au fournisseur, consultez [Paramètres du fabricant](#) à la page 179.
    - **Reconstruction avec le plus de coupes possible** : Si cette option est sélectionnée, les reconstructions sont affichées par ordre décroissant, avec la reconstruction comportant le plus d'images (coupes) en haut et la reconstruction comportant le moins d'images (plans de coupe) en bas.
    - **Reconstruction avec le moins de coupes possible** : Si cette option est sélectionnée, les reconstructions sont affichées par ordre croissant, avec la reconstruction comportant le moins d'images (plans de coupe) en haut et la reconstruction comportant le plus d'images (coupes) en bas.
  - **Vitesse ciné (+ US Multiframe)** : définit la vitesse à laquelle SecurView affiche une séquence d'images de tomosynthèse ou d'images échographiques à plusieurs cadres en mode Ciné. La plage correspond à 5 – 30 images par seconde. La vitesse maximale par défaut est de 30 images par seconde. Un ingénieur de maintenance peut augmenter la vitesse maximale.
  - **Démarrer mode Ciné** peut être utilisé pour configurer le lancement automatique ou manuel du mode Ciné des coupes de tomosynthèse reconstruites dans des captures d'écran de présentation ReportFlow en mosaïque simple.
  - **Mode molette souris** définit le comportement de la molette de la souris lorsque vous faites défiler les coupes ou plans de coupe de tomosynthèse, soit Séquentiel (une coupe ou un plan de coupe à la fois) soit Avancés (plusieurs à la fois).
  - **Épaisseur plan de coupe par défaut** définit le nombre par défaut de coupes à combiner en une seule entité visible lors de l'affichage d'images.
  - **Plage Ciné local** définit le nombre de coupes (ou plans de coupe) que SecurView affiche en mode Ciné local. La plage correspond à 3–99 coupes.

### 6.3 Préférences de l'onglet Outils et Recouvrements

L'écran suivant s'affiche lorsque vous sélectionnez l'onglet **Outils et Recouvrements** :



Figure 89 : Onglet Outils et Recouvrements

Quand vous avez effectué votre sélection, enregistrez vos paramètres en sélectionnant **Appliquer** (dans le coin inférieur droit de la fenêtre).

- **Recouvrement d'image** : durant la lecture, le recouvrement d'image fournit des informations sur le patient pour l'image actuellement affichée. En mode Réduit ou Étendu, le système affiche les informations configurées par l'administrateur pour ce mode (consultez [Recouvrements des informations sur le patient](#) à la page 67).
- **Annotations** : permet de définir la manière dont SecurView répond lorsque vous ajoutez un texte descriptif à un repère elliptique, à main levée ou fléché, par exemple en sélectionnant à partir d'un ensemble complet ou réduit de classifications prédéfinies, en effectuant une sélection à partir d'un texte prédéfini que vous avez créé, ou en fournissant un espace de dialogue où vous pouvez saisir un texte (consultez [Création et affichage des annotations](#) à la page 88).
- **Outil par défaut** : détermine l'outil d'imagerie par défaut pour le bouton gauche de la souris.
  - **Utiliser l'outil par défaut par session** - au cours d'une séance d'analyse de données patient, lorsque vous sélectionnez un outil s'ouvrant à l'aide du bouton gauche de la souris, l'outil choisi reste sélectionné pour l'analyse des données du prochain patient.
  - **Utiliser l'outil par défaut par patient** - au cours d'une séance d'analyse de données patient, si vous sélectionnez un outil s'ouvrant à l'aide du bouton gauche de la souris, l'outil par défaut de l'utilisateur se rétablit quand vous passez à l'analyse des données du prochain patient.

- **Indicateur roaming** : détermine le comportement de l'indicateur roaming. Consultez [Roaming intelligent](#) à la page 56.
- **Barre d'outils** : détermine si la barre d'outils de MG Viewer est visible. Si vous masquez la barre d'outils, vous devez utiliser le pavé numérique et le clavier pour saisir les commandes. Pour afficher (ou masquer) la barre d'outils à tout moment, appuyez sur [\*].
- **Échelle en loupe** : détermine si les graduations métriques apparaissent lorsque vous utilisez l'outil Loupe (consultez [Loupe et loupe inversée](#) à la page 70).
- **Facteur de zoom de PixelMeter**: détermine le facteur de zoom utilisé par **PixelMeter**, soit Taille d'image (par rapport à la taille en pixel de l'image d'origine) soit Taille réelle (par rapport à la taille physique réelle). Vous pouvez également désactiver l'option **PixelMeter** (consultez [Pixel Meter](#) à la page 60).
- **Propriétés Lien par déf.** : définit le comportement de tous les secteurs que vous désignez comme liés.
  - L'option **Fenêtre/Niveau** vous permet de modifier ces paramètres simultanément dans tous les secteurs liés (consultez [Réglages de Fenêtre/Niveau et de Gamma](#) à la page 75).
  - Le mode Ciné/Défilement vous permet d'effectuer l'animation Ciné à travers tous les secteurs liés (consultez [Utilisation du mode Ciné](#) à la page 115).
- **Synchroniser le ciné** : Indique si la synchronisation du mode Ciné pour les secteurs non liés est activée ou désactivée (consultez [Utilisation du mode Ciné](#) à la page 115).
- **Défilement des images empilées** : quand un seul secteur contient de multiples images, vous pouvez choisir d'afficher un ou deux indicateurs de pile (consultez [Indicateurs de pile et Indicateurs de point temporel](#) à la page 61). Si vous sélectionnez Lier le défilement dans Précédentes, vous pourrez utiliser l'indicateur de pile pour faire défiler simultanément dans tous les secteurs empilés.
- **Résolution d'export TIFF** : permet de configurer la résolution des images Tiff exportées (consultez [Exportation de fichiers d'images actuellement affichées](#) à la page 197).

- **Afficher DAO :**
  - **Toujours afficher les résultats DAO :** Définit s'il faut afficher automatiquement les résultats DAO sans sélectionner le bouton et indépendamment des étapes configurées de ReportFlow (consultez *Affichage de l'information DAO* à la page 81).
  - Indique comment les marques DAO s'affichent sur le MG Viewer. Lorsque vous sélectionnez **Avancés...**, l'écran *Configuration affichage DAO* s'ouvre.

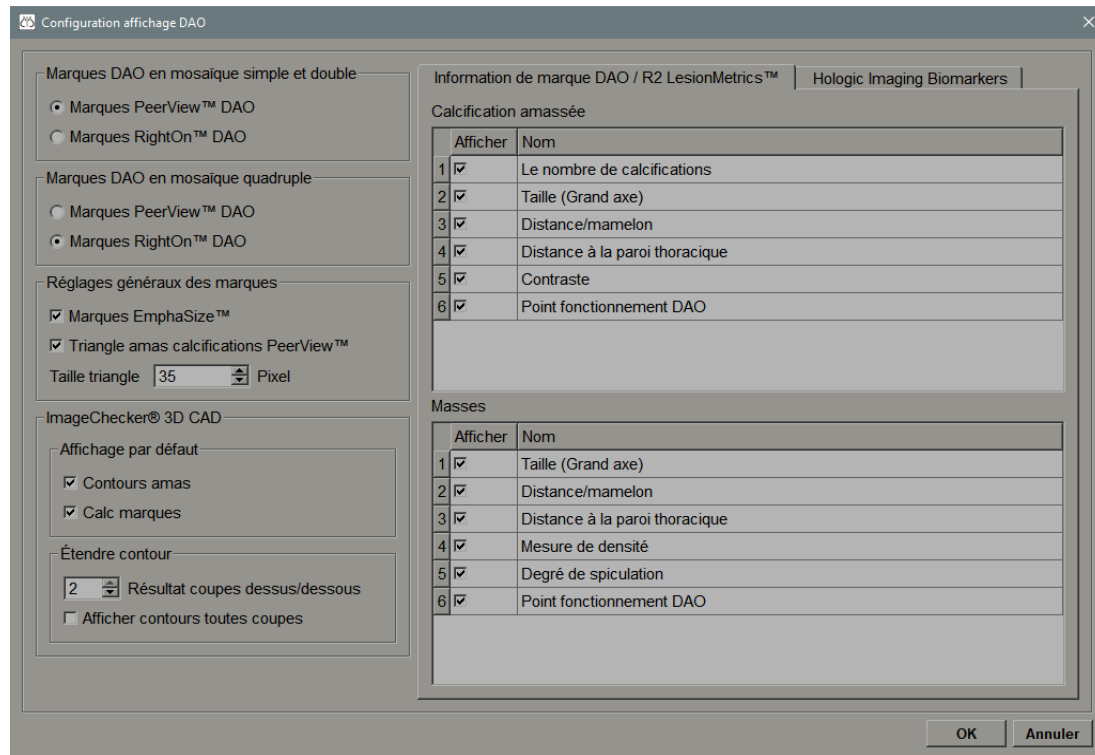


Figure 90 : Écran Configuration affichage DAO



### Remarque

La section ImageChecker 3D CAD n'apparaît que si vous disposez d'une licence pour le produit.



Si vous sélectionnez l'onglet **Biomarqueurs par imagerie de Hologic**, l'écran suivant s'affiche :

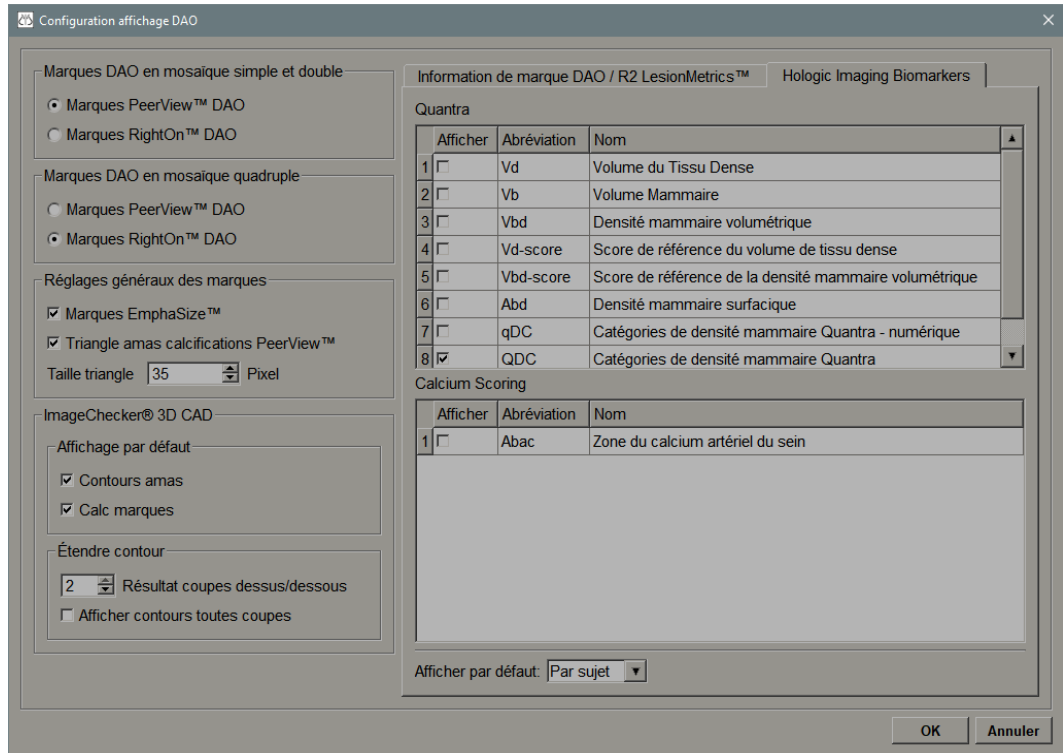


Figure 91 : Onglet Biomarqueurs par imagerie de Hologic



**Remarque**

L'affichage des biomarqueurs est soumis à la disponibilité de l'algorithme. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.



**Remarque**

Le contenu des résultats des biomarqueurs peut varier en fonction de la version des algorithmes des biomarqueurs par imagerie Hologic.

### 6.4 Préférences de profil d'utilisateur

Lorsque vous sélectionnez l'onglet **Profil utilisateur**, l'écran suivant s'ouvre :

Figure 92 : Onglet Profil utilisateur

Une fois vos réglages terminés, sélectionnez **Appliquer** (dans le coin inférieur droit de l'écran).

- **Profil d'utilisateur** : vous permet d'entrer votre nom, votre mot de passe et, si vous le souhaitez, une adresse e-mail. Notez qu'un administrateur doit définir le champ Nom d'utilisateur.
- **Déconnexion auto** : définit combien de temps l'application attend un signe d'activité avant de vous déconnecter automatiquement.
- **Références synchronisation** : sert à saisir le nom d'utilisateur de l'évaluateur sur l'application externe (s'il diffère du nom d'utilisateur SecurView et que la synchronisation de connexion/déconnexion est prise en charge). Si le mot de passe de l'évaluateur est le même sur l'application externe, sélectionnez « Utiliser le mot de passe SecurView ». Si le mot de passe diffère, entrez le mot de passe de l'évaluateur dans l'application externe. Les utilisateurs d'Active Directory peuvent sélectionner « Utiliser le mot de passe SecurView » si la synchronisation de connexion/déconnexion est prise en charge.

- **Synchronisation avec application externe** : permet de définir les préférences pour la synchronisation avec une application externe. Consultez [Synchronisation d'un patient avec une application externe](#) à la page 104.
  - **À la connexion et déconnexion** : ce paramètre ne s'applique que si l'application externe prend en charge la réception de messages de connexion et de déconnexion. Si cette case est cochée et que vous vous connectez (ou déconnectez) de SecurView, la station envoie un message de synchronisation pour vous connecter à (ou déconnecter de) l'application externe.
  - **À l'ouverture des données d'un patient** : ce paramètre ne s'applique que si l'application externe prend en charge la réception de messages d'ouverture de données de patient. Si la case est cochée et que vous ouvrez les données d'un patient dans SecurView, la station envoie un message de synchronisation pour ouvrir les données du patient sur l'application externe.
  - **Lors du marquage d'une étude comme « Interprétée »** : ce paramètre ne s'applique que si l'application externe prend en charge la réception du message de mise à jour de l'état du patient. Si la case est cochée et que vous fermez les données d'un patient dans SecurView, la station envoie un message de synchronisation pour mettre à jour l'état du patient dans l'application externe.



---

### Remarque

Actuellement, seules les stations Hologic MultiView supportent la synchronisation à la clôture d'une étude.

---

- **Me demander de sélectionner l'étude à synchroniser** : ce paramètre ne s'applique que si l'application externe prend en charge la réception de messages d'ouverture de données de patient. Si cette boîte est sélectionnée et que vous ouvrez des données d'un patient dans SecurView, la station ouvre une boîte de dialogue avec une liste des études disponibles pour le patient dans SecurView. Lorsque vous sélectionnez une étude de la liste, la station envoie un message de synchronisation afin que la même étude s'ouvre dans l'application externe. Ce paramètre est utile lorsqu'il existe plusieurs études non interprétées pour un patient (par exemple, mammographie et échographie), que les données d'un patient ne sont pas ouvertes en scannant le code-barres d'un numéro d'accès, et que vous voulez contrôler l'étude qui a été envoyée.
- **Demandes de synchronisation entrantes** :
  - **À l'ouverture des données d'un patient** : le paramètre « Avertir si le patient n'est pas disponible » ne s'applique que si l'application externe prend en charge l'envoi de messages d'ouverture de données de patient. Cochez cette case si vous voulez que SecurView affiche un message d'erreur dès qu'il reçoit un message d'ouverture de données de patient concernant un patient qui ne figure pas dans SecurView.
  - **Lors de la mise à jour de l'état du patient** : ces paramètres ne s'appliquent que si l'application externe prend en charge l'envoi des messages de mise à jour de l'état du patient.

- **Marquer uniquement les études spécifiées comme Interprétées** : seules les études qui correspondent aux critères de la demande de synchronisation entrante provenant d'une application externe seront marquées comme « Interprétées ». Si l'application externe ne fournit pas d'informations sur les niveaux d'étude, toutes les études du patient seront marquées comme « Interprétées ».
- **Marquer toutes les études du patient comme Interprétées** : toutes les études applicables du patient seront marquées comme « Interprétées ». Les informations sur les niveaux d'étude reçues de l'application externe seront ignorées.



#### **Remarque**

SecurView agit sur les messages d'ouverture de données de patient reçus uniquement si un radiologue est connecté. Si l'étude ou le patient identifié sont introuvables dans SecurView, l'afficheur se ferme.

---



#### **Attention :**

SecurView agit sur les messages de mise à jour de l'état du patient reçus uniquement si un radiologue est connecté, les données du patient identifié sont ouvertes dans l'afficheur et le patient identifié n'est pas verrouillé par un autre utilisateur. Si SecurView rejette ou ignore un message de mise à jour de l'état du patient reçu, les états de l'étude restent inchangés et peuvent être désynchronisés par rapport à l'application externe.

---

## Chapitre 7 Captures d'écran de présentation et ReportFlows

Ce chapitre décrit les captures d'écran de présentation et les ReportFlows, comment le radiologue peut sélectionner des ReportFlows spécifiques pour son usage quotidien et le mode de création et de modification de captures d'écran de présentation et de ReportFlows.

### 7.1 Visualisation des ReportFlow

SecurView fournit un ensemble standard de ReportFlows que vous pouvez utiliser pour visualiser de nombreux types d'études usuels.

**Pour afficher les ReportFlow disponibles :**

1. Dans le module Administration, sélectionnez **Préférences utilisateur** puis **Flux de production**.
2. Dans le groupe Captures d'écran de présentation et ReportFlows, sélectionnez **Configurer...** pour ouvrir la fenêtre de configuration contenant l'onglet ReportFlows qui s'affiche par défaut.

Il y a en haut trois onglets : Captures d'écran de présentation, ReportFlows et Préférences. Une liste de présentations disponibles apparaît à gauche. La liste des ReportFlows existants est à droite.

# Guide de l'utilisateur de la station SecurView DX-RT 11.0

## Chapitre 7: Captures d'écran de présentation et ReportFlows

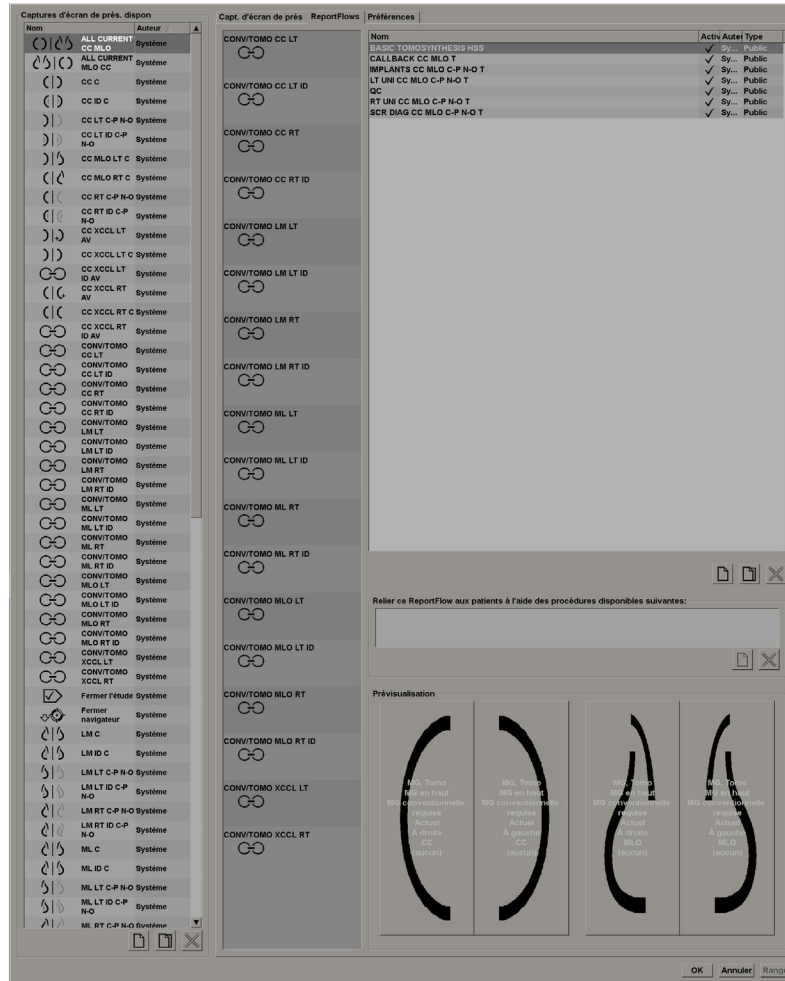


Figure 93 : Onglet ReportFlows

## 7.2 Visualisation des captures d'écran de présentation

Une capture d'écran de présentation est un ensemble d'images dans une disposition spécifique sur un ou plusieurs écrans. Lorsque vous sélectionnez l'onglet **Captures d'écran de présentation**, le volet d'édition pour la capture d'écran de présentation actuellement sélectionnée s'ouvre :

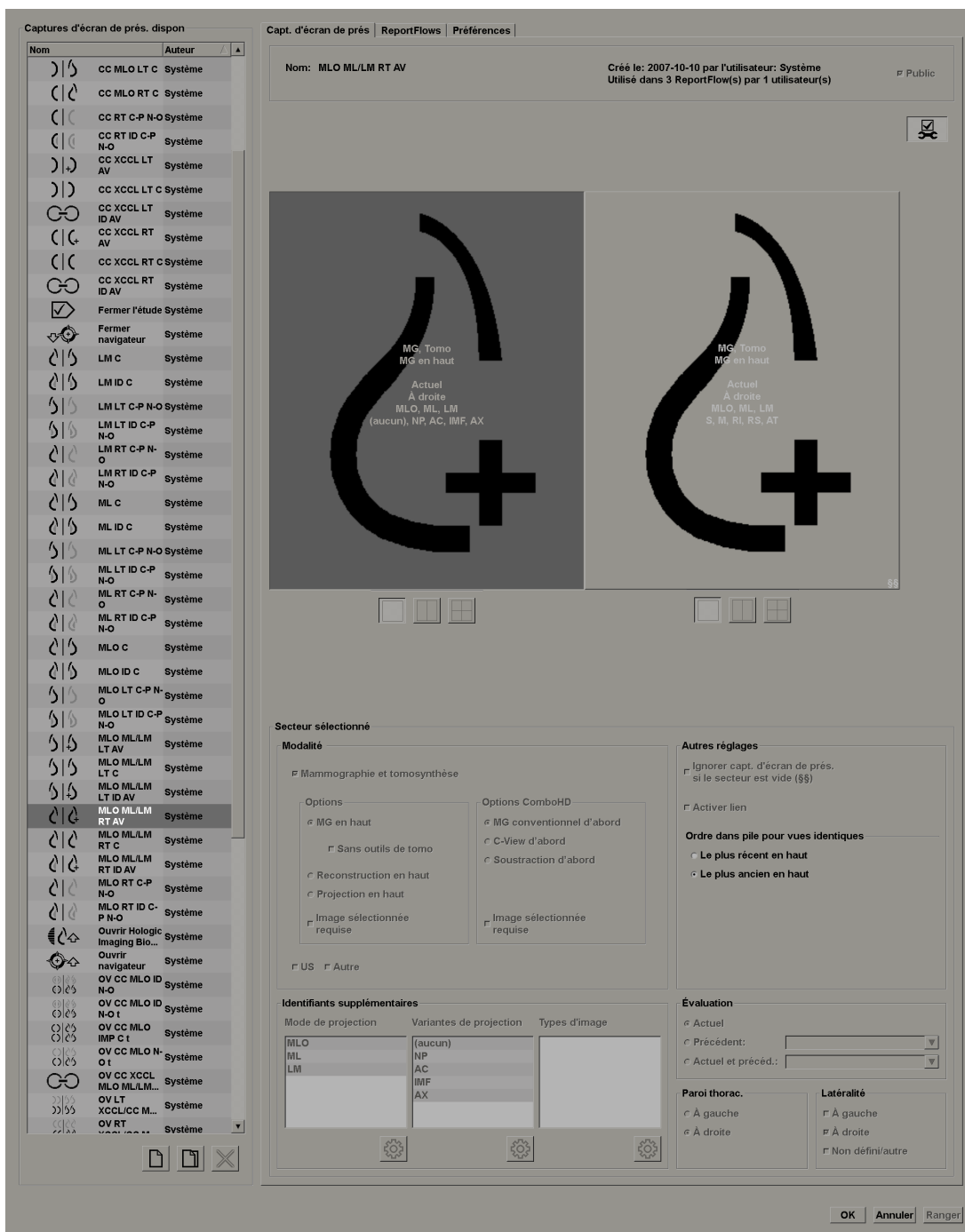


Figure 94 : Onglet Captures d'écran de présentation

Pour chaque capture d'écran de présentation :

- Le Nom et le type apparaissent en haut.
- Les images schématisées en dessous représentent chacune un écran. La prévisualisation indique les modalités, les dates (actuelles ou précédentes), les latéralités, les modes de projection, les icônes des modes de projection, les variantes de projection, les types d'images et les variantes de captures d'écran de présentation.
- Les propriétés du secteur sélectionné apparaissent en bas.

### 7.3 Création et modification de captures d'écran de présentation

Les stations SecurView offrent deux niveaux de captures d'écran de présentation :

- Les captures d'écran de présentation de niveau système sont soit fournies avec le système, soit créées par un administrateur. Ces captures d'écran de présentation ne peuvent être modifiées que par un administrateur du système.
- Les captures d'écran de présentation définies par l'utilisateur sont créées par un radiologue, et elles sont configurées soit :
  - Pour tous les utilisateurs — « Public » est sélectionné par défaut, ou
  - Pour un usage individuel — « Public » ne doit pas être sélectionné

Si vous créez une nouvelle capture d'écran de présentation, votre nom apparaît dans la colonne Auteur de la liste de présentations disponibles.

Vous pouvez créer et modifier des captures d'écran de présentation comme cela est expliqué dans les sections suivantes :

#### 7.3.1 Création de nouvelles captures d'écran de présentation

Utilisez le bouton **Nouveau** pour créer une capture d'écran de présentation. Vous pouvez aussi utiliser le bouton **Copier** pour copier et modifier une capture d'écran de présentation existante (consultez [Copie et modification d'une capture d'écran de présentation](#) à la page 149).

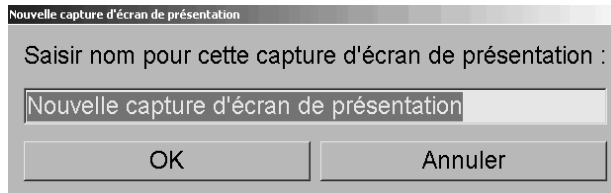


### Pour créer une capture d'écran de présentation :



Nouveau

1. Sélectionnez l'onglet **Captures d'écran de présentation**. Sélectionnez ensuite le bouton **Nouveau** sous la liste des présentations disponibles.
2. Tapez le nom de la nouvelle capture d'écran de présentation et sélectionnez **OK**.



SecurView ajoute une icône de capture d'écran de présentation tout en bas de la liste des présentations disponibles. Votre nom d'utilisateur apparaît à la droite du nom de la nouvelle capture d'écran de présentation.



Nouvelle capture  
d'écran de présentation jsmith

Par défaut, SecurView signale les captures d'écran de présentation « personnalisées » au moyen de l'icône à gauche dans la figure précédente.



#### Remarque

Pour renommer votre présentation ou pour affecter une nouvelle icône à une capture de présentation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de la capture d'écran de présentation dans la colonne des présentations disponibles.

---



Mosaïque simple



Mosaïque double



Mosaïque quadruple

- Sélectionnez **Mosaïque simple**, **Mosaïque double** ou **Mosaïque quadruple** pour choisir la mosaïque de chaque affichage dans la zone de prévisualisation.
- Sélectionnez le secteur à configurer, puis attribuez des propriétés de la zone **Secteur sélectionné** :

Figure 95 : Zone Secteur sélectionné

**Modalité** — Mammographie (y compris Tomosynthèse), Ultrason ou Autre. Pour les images de mammographie, vous pouvez configurer le type d'image affiché initialement dans la fenêtre.

- **Options** — *MG en haut*, *Tranches reconstruites en haut* ou *Images de projection en haut*. Affiche l'image configurée en haut.
- **Sans outils de tomosynthèse** (uniquement en combinaison avec *MG en haut*) — Les images de tomosynthèse et les outils de tomosynthèse ne sont pas affichés. Les images MG sont empilées. Dans la pile, les images MG sont regroupées en fonction des options ComboHD définissant quelle image doit s'afficher en premier.
- **Image sélectionnée requise** (uniquement en combinaison avec des *coupes reconstruites en haut* ou des *images de projection en haut*) — Cette option ne peut être sélectionnée que si les reconstructions ou les images de projection doivent s'afficher en haut. Si cette option est sélectionnée, le secteur correspondant sera vide si le type d'image sélectionné pour être affiché en haut n'est pas disponible. Si cette option n'est pas sélectionnée, l'image MG s'affichera en haut si le type d'image sélectionné n'est pas disponible.

- **Options ComboHD** — Affiche l'image MG Hologic configurée dans l'ordre suivant :



### Remarque

Les options ComboHD nécessitent une licence tomosynthèse.

---

- **Image MG conventionnelle** (ordre de tri : MG, image 2D de synthèse, soustraction CE2D)
  - **C-View 2D** (ordre de tri : image 2D de synthèse, MG, soustraction CE2D)
  - **Soustraction** (ordre de tri : Soustraction CE2D, MG, image 2D de synthèse)
  - **Image sélectionnée requise** — Si cette option est sélectionnée, le secteur correspondant sera vide si le type d'image MG sélectionné pour être affiché en haut n'est pas disponible. Si cette option n'est pas sélectionnée, les images de tomosynthèse s'afficheront en haut si le type d'image MG sélectionné n'est pas disponible.
- 



### Remarque

Si l'option *Image sélectionnée requise* n'est pas sélectionnée, mais que l'option *Sans outils de tomosynthèse* est sélectionnée, les images MG disponibles s'afficheront si le type d'image MG sélectionné n'est pas disponible.

---

**Évaluation** — Définit la date pour l'affichage d'image. « Actuel » réfère à l'étude la plus récente. Sélectionnez « Précédent », soit pour afficher des images d'une date précédente spécifique, soit pour visualiser toutes les images précédentes. « Actuel et Précédent » permet d'afficher les images actuelles et les images précédentes dans une seule pile d'images en les classant soit de la plus récente à la plus ancienne (*Actuelle, Toutes les précédentes [la plus récente]*), soit de la plus ancienne à la plus récente (*Toutes les précédentes [la plus ancienne], Actuelle*).

**Latéralité** — À gauche, À droite ou Non défini/autre.

**Paroi thorac.** — Orientation des images de MG.

**Ignorer capture d'écran de présentation si le secteur est vide** — Pour que SecurView ignore cette capture d'écran de présentation du ReportFlow si le secteur est vide.

**Activer lien** — Pour les images de MG, utilisez ce paramètre pour régler la largeur ou le centre de la fenêtre simultanément pour des secteurs liés. Pour les images de tomosynthèse, ce paramètre synchronise le secteur pour qu'il défile automatiquement avec les autres secteurs liés. (Ce paramètre correspond à l'option Lier secteur du menu circulaire.) Consultez [Défilement des secteurs liés](#) à la page 118.)

**Ordre dans pile pour vues identiques** — Empile les vues identiques dans un même secteur, dans l'ordre chronologique où elles ont été prises. Si la date et l'heure d'acquisition sont identiques, l'ordre d'empilement est déterminé par le numéro d'instance.



Modifier

5. Choisissez des identifiants supplémentaires pour le secteur.
  - a. Sélectionnez **Modifier** en dessous de Modes de projection pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier les vues.

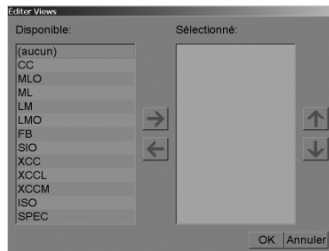


Figure 96 : Modifier la vue

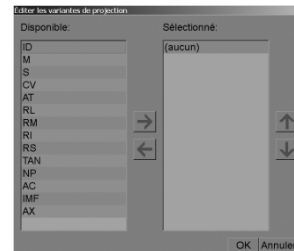


Figure 97 : Éditer les variantes de projection

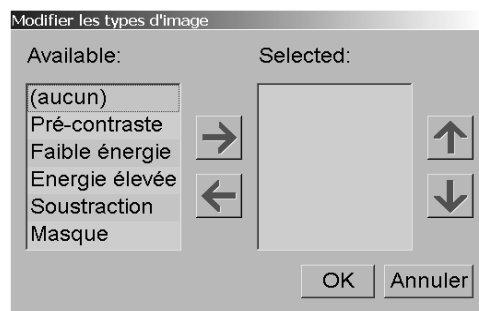


Figure 98 : Modifier les types d'images

- b. Sélectionnez les projections que vous voulez avoir dans la colonne Disponible ; vous pouvez en sélectionner plusieurs. Ensuite, faites glisser les projections dans la colonne Sélectionné ou bien utilisez les flèches pour les déplacer.
          - Vous pouvez empiler tout ou partie des projections dans le secteur. Elles s'empilent dans l'ordre que vous choisissez.
          - Changez l'ordre en sélectionnant une projection et en sélectionnant les flèches à droite.
          - Si vous choisissez « (aucun) », le système affichera dans le secteur des images qui n'ont pas d'identifiant de projection (variante de projection ou type d'image).
        - c. Sélectionnez **OK** pour fermer la boîte de dialogue Modifier les vues.
6. Choisissez des **Variantes de projection** pour le secteur en répétant la séquence de l'étape 5.
7. Choisissez des **Types d'image** pour le secteur en répétant la séquence de l'étape 5.
8. Répétez les étapes 4 à 7 pour les autres secteurs de cette présentation.
9. Lorsque vous avez fini de définir tous les secteurs de la présentation :
  - Sélectionnez **Appliquer** pour enregistrer votre nouvelle capture d'écran de présentation. (Continuez la modification, si vous le souhaitez.)
  - Sélectionnez **OK** pour enregistrer votre nouvelle capture d'écran de présentation et fermer l'onglet **Captures d'écran de présentation**.


### 7.3.2 Copie et modification d'une capture d'écran de présentation

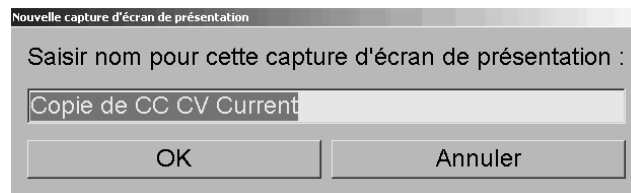Utilisez le bouton **Copier** pour créer une nouvelle capture d'écran de présentation à partir d'une ancienne.



*Copier*

1. Sélectionnez n'importe quelle capture d'écran de présentation dans la liste des présentations disponibles.
2. Sélectionnez **Copier** puis entrez un nom pour la capture d'écran de présentation copiée.



3. Modifiez les propriétés de la capture d'écran de présentation en suivant les étapes 3 à 9 de la procédure précédente.

### 7.3.3 Renommer une capture d'écran de présentation

Vous pouvez renommer une capture d'écran de présentation, avec certaines restrictions :

- Les radiologues peuvent renommer les captures d'écran de présentation personnalisées qu'ils ont eux-mêmes créées.
- Les administrateurs peuvent renommer certaines captures d'écran de présentation de niveau système.
- Certaines captures d'écran de présentation de niveau système ne peuvent pas être renommées.

### Pour renommer une capture d'écran de présentation :

Renommer  
Affecter icône

Menu contextuel

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une capture d'écran de présentation de la liste et sélectionnez **Renommer** dans le menu contextuel. Si vous renommez une capture d'écran de présentation de niveau système, SecurView affiche :

Vous êtes sur le point d'éditer une présentation utilisée par un autre utilisateur. Voulez-vous continuer ?

OK

Annuler

2. Sélectionnez **OK** puis entrez le nouveau nom :

Éditer capture d'écran de présentation

Saisir nom pour cette capture d'écran de présentation :

OK

Annuler

3. Lorsque c'est fait, sélectionnez **OK**.

### 7.3.4 Modification de l'icône d'une capture d'écran de présentation

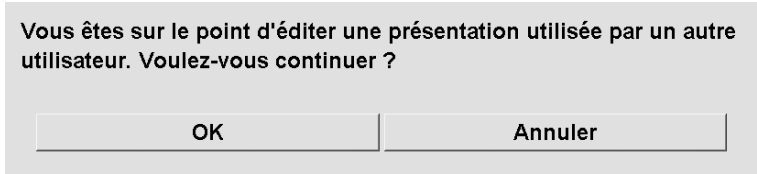
Les administrateurs peuvent modifier l'icône affectée aux captures d'écran de présentation de niveau système. Les radiologues peuvent modifier l'icône affectée aux captures d'écran de présentation personnalisées qu'ils ont eux-mêmes créées.

**Pour modifier l'icône d'une capture d'écran de présentation :**


Renommer  
Affecter icône

Menu contextuel

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une capture d'écran de présentation de la liste et sélectionnez **Affecter icône** dans le menu contextuel. Si vous modifiez une capture d'écran de présentation de niveau système, SecurView affiche :



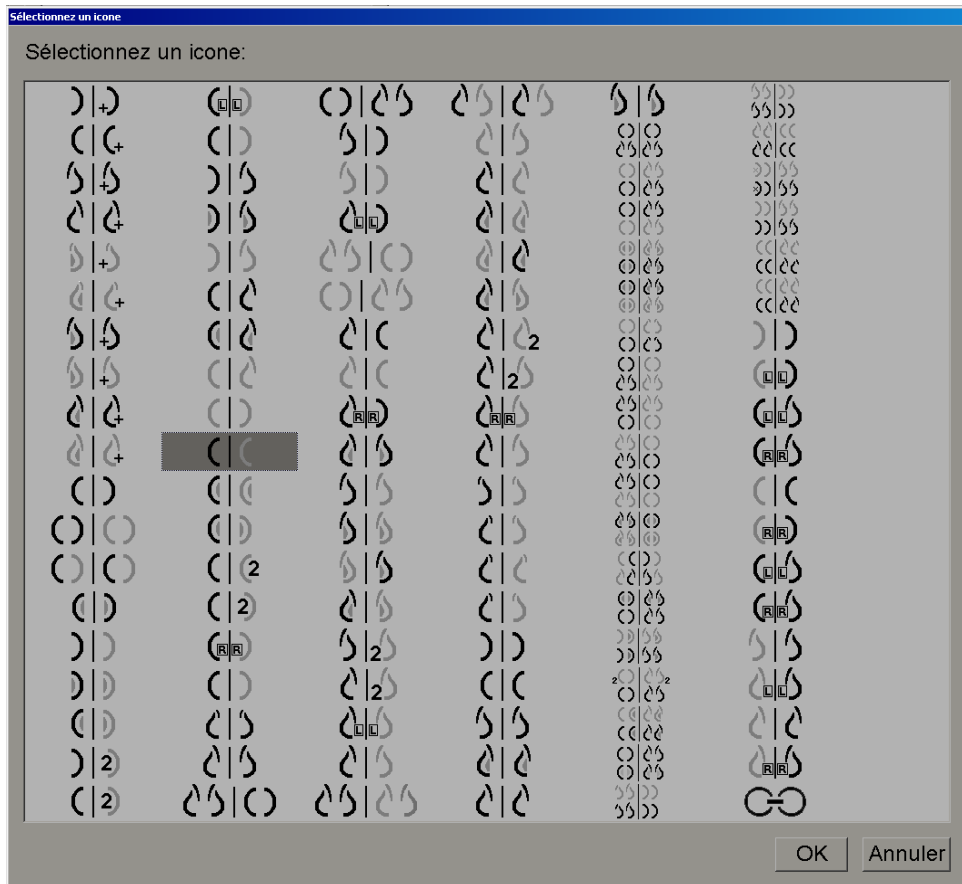2. Sélectionnez **OK** puis sélectionnez une nouvelle icône :



3. Lorsque c'est fait, sélectionnez **OK**.

## 7.4 ReportFlows

Un **ReportFlow** est constitué par une séquence de captures d'écran de présentation et d'étapes de lecture.

Nom	Activé	Auteur	Type
B-B SCR DIAG CC MLO C-P O-N	✓	Système	Public
B-B SCR DIAG CC MLO P-C N-O	✓	Système	Public
B-B SCR DIAG CC MLO P-C O-N	✓	Système	Public
B-B SCR DIAG MLO CC C-P N-O	✓	Système	Public
B-B SCR DIAG MLO CC C-P O-N	✓	Système	Public
B-B SCR DIAG MLO CC P-C N-O	✓	Système	Public
B-B SCR DIAG MLO CC P-C O-N	✓	Système	Public
CALLBACK CC MLO N-O	✓	Système	Public
CALLBACK CC MLO N-O (1)	✓	Système	Public
CALLBACK CC MLO N-O COMPARE	✓	Système	Public
CALLBACK CC MLO O-N	✓	Système	Public
CALLBACK CC MLO O-N COMPARE	✓	Système	Public

Figure 99 : Exemple de ReportFlow (vue partielle)

Ce ReportFlow, « SCR DIAG MLO CC C-P N-O », réfère à un ReportFlow utilisé pour une mammographie de dépistage ou de diagnostic, qui affiche des images comme expliqué ci-dessous :

- Les images MLO sont affichées à gauche, les images CC à droite
- Les images actuelles sont affichées en premier, puis les images précédentes
- Les images plus récentes sont affichées en haut de la pile, les images plus anciennes en bas

Une fois installé, SecurView comprend un ensemble de ReportFlows, accessible à tous les radiologues, qui fournit des présentations convenant à la plupart des types de pratique. Les radiologues et administrateurs peuvent créer de nouveaux ReportFlows selon le besoin (consultez [Création de ReportFlows](#) à la page 155). Vous pouvez configurer SecurView de manière à sélectionner automatiquement le ReportFlow le mieux adapté lors de l'ouverture des données d'un patient (consultez [Préférences de ReportFlow](#) à la page 157). Vous pouvez également sélectionner manuellement un ReportFlow disponible lors de l'analyse du patient.

Les étapes du ReportFlow apparaissent de manière ordonnée, dans la colonne de gauche ci-dessus. Si vous cliquez sur une étape, les détails de cette présentation apparaissent dans la zone de prévisualisation en bas à droite dans la figure suivante.

Lorsque vous sélectionnez une étape ReportFlow d'un ReportFlow, la capture d'écran de présentation correspondante est choisie dans la liste des présentations.

Une présentation privée d'un autre utilisateur va apparaître dans la liste des étapes ReportFlow du ReportFlow accompagnée d'une icône représentant une serrure. Cette représentation n'apparaît pas dans la liste des représentations. La représentation choisie n'est pas modifiée.





Sur la droite de la liste de ReportFlow, il y a trois colonnes :

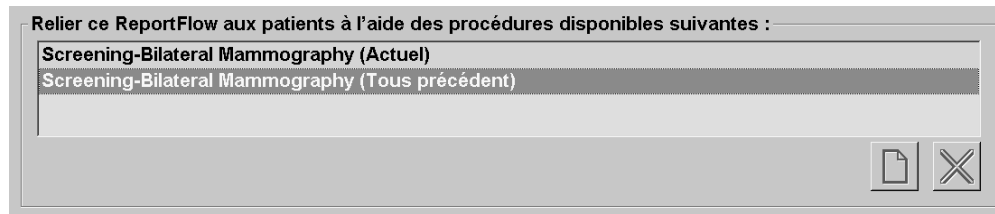
Activé	Auteur ▲	Type
✓	Système	Public
✓	Système	Public
✓	Système	Public
✓	Système	Public
✓	Système	Public

- **Activé** : si cette option est cochée, cela indique que ce ReportFlow est à la disposition du présent radiologue.
- **Auteur** : indique si le ReportFlow a été défini par un administrateur (« Système ») ou par un utilisateur tel qu'un radiologue. Si vous créez un nouveau ReportFlow, votre nom apparaît dans la colonne Auteur à côté du nom du ReportFlow.
- **Type** : indique si le ReportFlow est disponible pour tous les utilisateurs (« Public »), ou à la seule disposition de l'auteur (« Privé »). Les ReportFlows « Système » sont toujours « Public », c'est-à-dire à la disposition de tous les radiologues.

En cliquant avec le bouton droit de la souris dans la colonne Activé, vous pouvez (1) sélectionner et désélectionner les ReportFlows à utiliser, et (2) rendre un ReportFlow Public ou Privé.

### 7.5 Lier un ReportFlow à une procédure

La fenêtre **Relier ce ReportFlow** apparaît juste en dessous de la liste de ReportFlows.



Vous pouvez lier un ReportFlow spécifique à une procédure sélectionnée par un manipulateur au poste de travail d'acquisition de mammographie. Chaque procédure correspond à un ensemble prédéfini d'images associées avec le type d'étude. SecurView utilise un ReportFlow spécifique sur la base de l'information dans les en-têtes DICOM des images du patient et d'après le nom de procédure codé.


Pour utiliser cette fonction, un administrateur doit configurer SecurView avec les noms des procédures (consultez [Configuration des noms de procédures d'examen](#) à la page 185). De plus, l'option **Sélectionnez ReportFlow, en fonction des noms de procédure** doit être sélectionnée dans l'onglet **Préférences des ReportFlows**. (Consultez [Sélection de Workflow](#) à la page 158.)

#### Pour relier un ReportFlow à une procédure :

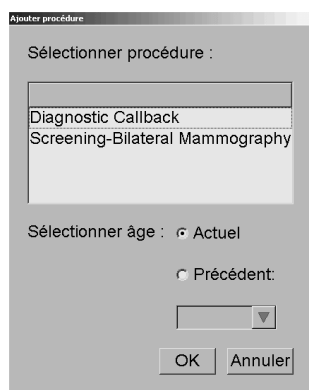1. Dans la colonne Nom, en haut, sélectionnez un nom de ReportFlow.
2. Sous la fenêtre Relier ce ReportFlow, sélectionnez **Nouveau** (illustré ci-dessus) pour afficher une liste de noms de procédure :



*Nouveau*



3. Sélectionnez une procédure à relier au ReportFlow, spécifiez soit Actuel soit Précédent pour les images, et sélectionnez **OK**.

## 7.6 Création de ReportFlows

L'onglet ReportFlows vous permet également de créer, de modifier et de supprimer des ReportFlows. Il revient à l'administrateur de créer et de modifier les ReportFlows de niveau système, mais chaque radiologue peut créer et modifier des ReportFlows pour un usage privé ou public.

**Pour créer un ReportFlow :**

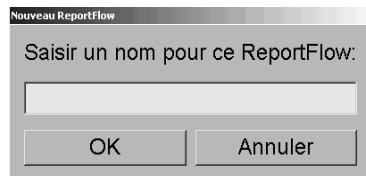


Nouveau



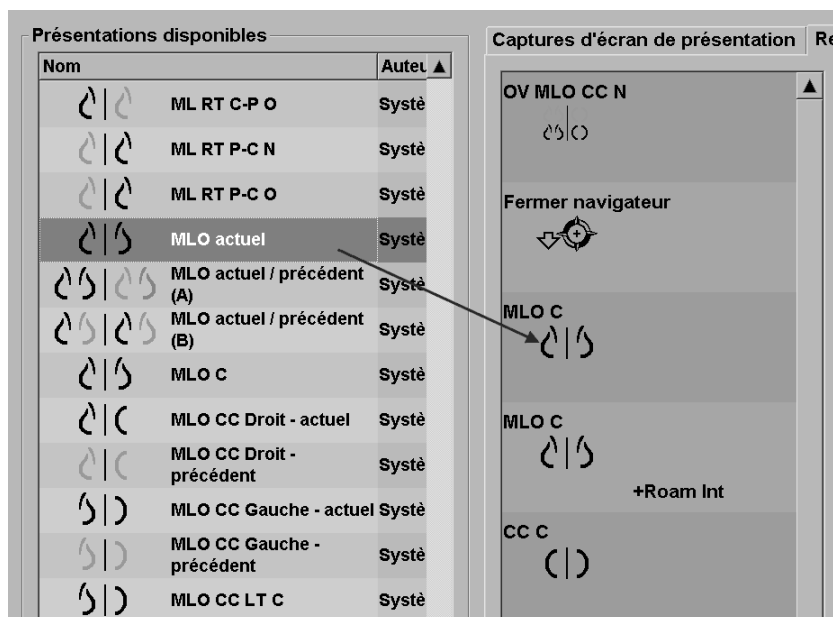
Copier

1. Sélectionnez l'onglet **ReportFlows**. Sélectionnez ensuite le bouton **Nouveau** sous la liste des noms de ReportFlow.









Ou alors, copiez un ReportFlow existant en pointant son nom et en sélectionnant **Copier**.

2. Tapez le nom du nouveau ReportFlow et sélectionnez **OK**. Le nouveau ReportFlow est ajouté à la liste, étiqueté avec votre nom d'utilisateur comme « Auteur », « Activé » et « Privé ».
  - Pour mettre le ReportFlow à disposition d'autres utilisateurs, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du ReportFlow et sélectionnez **Public**.
  - Pour modifier le nom d'un ReportFlow privé, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du ReportFlow, et sélectionnez **Renommer**.
3. Faites glisser une capture d'écran de présentation de la liste des présentations disponibles dans la liste des étapes du ReportFlow.





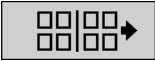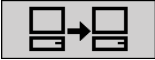4. Répétez l'opération pour chaque présentation nécessaire au ReportFlow. Vous pouvez :
  - Déplacer une capture d'écran de présentation en la faisant glisser vers une nouvelle position.
  - Supprimer une capture d'écran de présentation en la faisant glisser et en la remettant dans la liste des présentations disponibles.

La zone des présentations disponibles comprend également plusieurs étapes fonctionnelles de ReportFlow que vous pouvez utiliser dans votre ReportFlow.

Icône	Étape de ReportFlow
	Ouvrir MammaNavigator
	Fermer MammaNavigator
	Présentation consécutive — une capture d'écran de présentation qui affiche des images supplémentaires non couvertes par le ReportFlow actuel.
	Synchroniser avec une application externe
	Fermer l'étude
	Ouvrir la boîte de dialogue Biomarqueurs par imagerie de Hologic. Passer à l'étape suivante ou précédente du ReportFlow ferme automatiquement cette boîte de dialogue.

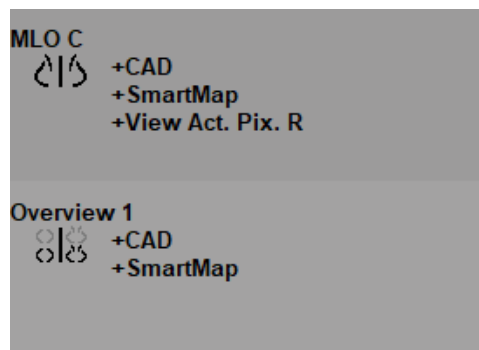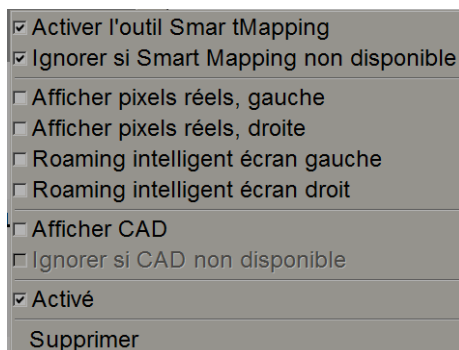5. Attribuer des propriétés supplémentaires nécessaires aux captures d'écran de présentation de votre ReportFlow. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la capture d'écran de présentation pour ouvrir le menu contextuel, et effectuez vos sélections :



### Remarque

Le Roaming intelligent et le mode Pleine résolution sont disponibles si l'écran de présentation est configuré en mosaïque simple. La mosaïque de présentation ne doit pas être modifiée après l'activation du Roaming intelligent ou du mode Pleine résolution.

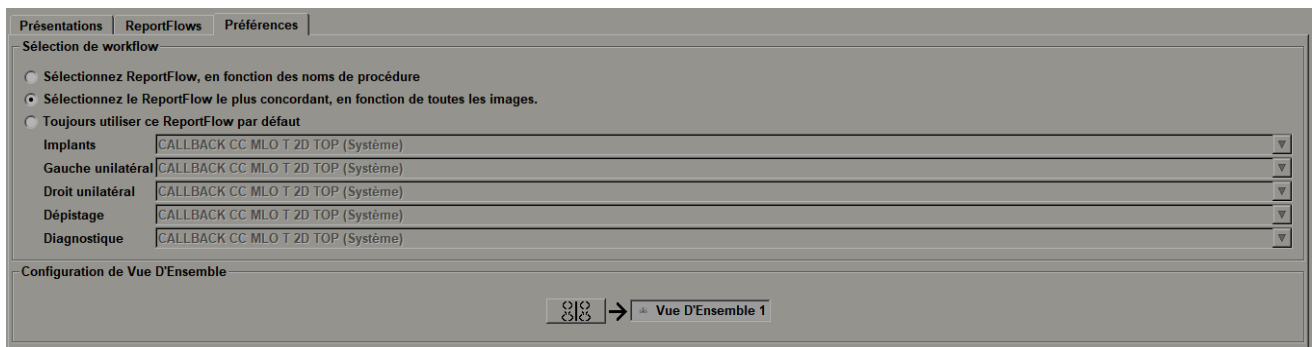
- Si votre ReportFlow comprend la Présentation consécutive, vous pouvez modifier l'étape en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris pour ouvrir son menu contextuel.

- Toutes les études
- Études actuelles
- Études précédentes
- Activé
- Supprimer

- Après avoir défini les étapes :
  - Sélectionnez **Appliquer** pour enregistrer votre nouveau ReportFlow. (Continuez la modification, si vous le souhaitez.)
  - Sélectionnez **OK** pour enregistrer votre nouveau ReportFlow et fermer l'onglet **ReportFlows**.

## 7.7 Préférences de ReportFlow

Utilisez l'onglet Préférences pour configurer le système de manière à ce qu'il sélectionne les ReportFlows les mieux adaptés à vos procédures.



### 7.7.1 Sélection de Workflow

Choisissez l'un des trois boutons d'option. Le bouton sélectionné détermine la façon dont SecurView choisit le ReportFlow à appliquer automatiquement lorsque vous ouvrez les données d'un patient.

- **Sélectionnez ReportFlow, en fonction des noms de procédure** — SecurView choisit le ReportFlow à partir de l'ensemble des descriptions de procédure qui sont associées aux études disponibles (consultez [Lier un ReportFlow à une procédure](#) à la page 154).
- **Sélectionnez le ReportFlow le plus concordant, en fonction de toutes les images** — SecurView choisit le ReportFlow sur la base des images et des projections contenues dans les études disponibles.
- **Toujours utiliser ce ReportFlow par défaut** — Pour chaque type de procédure de la liste, SecurView utilise le ReportFlow que vous sélectionnez dans la liste déroulante de tous les ReportFlows à votre disposition.



#### Remarque

Lorsque vous analysez un patient, vous pouvez choisir un autre ReportFlow si vous le souhaitez.

### 7.7.2 Configuration d'aperçu de présentation



Vue d'ensemble

Vous pouvez sélectionner une capture d'écran de présentation qui vous servira d'affichage personnel pour vue d'ensemble. Le paramètre configuré est lié à la touche Vue d'ensemble sur la barre d'outils à gauche dans le MG Viewer, et avec la touche Vue d'ensemble du clavier spécial (consultez [Présentations d'images](#) à la page 54).

#### Pour sélectionner un affichage personnel pour vue d'ensemble :

Dans la liste des présentations disponibles, sélectionnez une capture d'écran de présentation et faites-la glisser vers le bouton de configuration.



## Chapitre 8 Tâches de l'administrateur

Ce chapitre décrit comment l'administrateur système SecurView peut gérer les utilisateurs, configurer les paramètres système, et sauvegarder la base de données.

### 8.1 Ouverture du module d'administration

Utilisez le module d'administration pour la gestion des profils utilisateurs, la configuration des paramètres au niveau système, et la sauvegarde de la base de données.

**Pour ouvrir le module d'administration :**

1. Connectez-vous à SecurView en tant que « admin » .
2. Sélectionnez sur l'onglet **Administration** pour afficher l'onglet **Réglages utilisateur**.

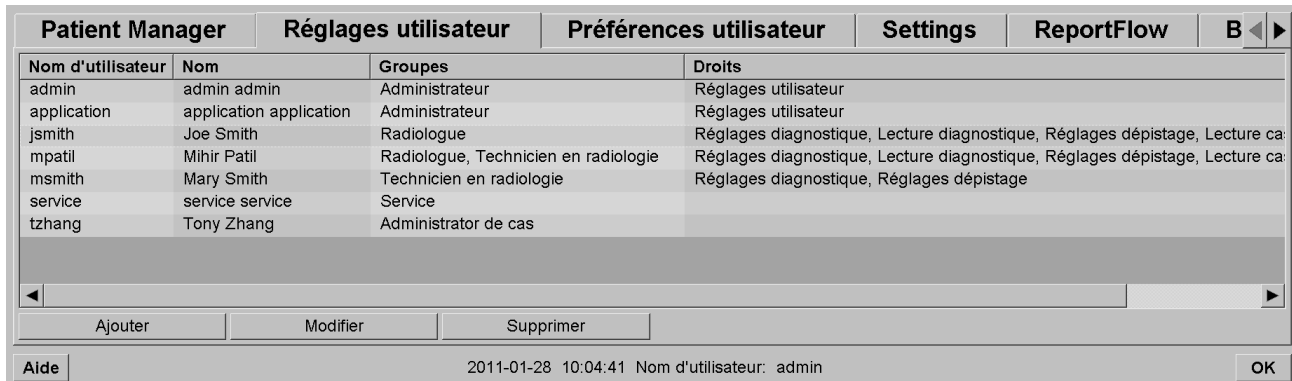


Figure 100 : Onglet Réglages utilisateur

Le module d'administration propose les onglets suivants :

- **Patient Manager** – Affiche la liste de tous les patients avec leur ID et leurs études et séries présents dans la base de données. L'administrateur système n'a pas la possibilité de créer une session, ni de grouper ou de synchroniser des patients.
- **Réglages utilisateur** (s'ouvre par défaut) – À utiliser pour ajouter, modifier et supprimer des utilisateurs. Consultez [Gestion des profils des utilisateurs](#) à la page 160.
- **Préférences utilisateur** – Affiche le profil utilisateur de l'administrateur système. Consultez [Profil d'administrateur](#) à la page 164.
- **Paramètres** – Permet de configurer les paramètres système tels que la surveillance de l'espace disque et la synchronisation avec une application externe. Consultez [Configuration des paramètres au niveau système](#) à la page 165.

- **ReportFlow** – À utiliser pour définir les noms de procédure et configurer les captures de présentation de niveau système pour les radiologues. Consultez [Configuration des captures d'écran et des ReportFlows de niveau système](#) à la page 184. Vous pouvez également utiliser l'onglet ReportFlow pour configurer les noms des procédures. Voir [Configuration des noms de procédures d'examen](#) à la page 185.
- **Maintenance** – À utiliser pour la sauvegarde et la maintenance de la base de données et pour la collecte des fichiers-journaux des groupes multi-stations. Consultez [Gestion de la base de données](#) à la page 190.
- **Recouvrement** – À utiliser pour configurer les informations de recouvrement d'image pour les radiologues. Consultez [Configuration des recouvrements d'image](#) à la page 187.
- **Infos** – Affiche des informations sur l'application. Consultez cette information lorsque vous sollicitez l'aide de Hologic.

## 8.2 Gestion des profils des utilisateurs

L'onglet Réglages utilisateur affiche les informations de profil de tous les utilisateurs enregistrés. Utilisez les trois boutons pour ajouter, modifier ou supprimer des profils d'utilisateurs.

Nom d'utilisateur	Nom	Groupes	Droits
admin	admin admin	Administrateur	Réglages utilisateur
application	application application	Administrateur	Réglages utilisateur
jsmith	Joe Smith	Radiologue	Réglages diagnostique, Lecture diagnostique, Réglages dépistage, Lecture ca
mpatil	Mihir Patil	Radiologue, Technicien en radiologie	Réglages diagnostique, Lecture diagnostique, Réglages dépistage, Lecture ca
msmith	Mary Smith	Technicien en radiologie	Réglages diagnostique, Réglages dépistage
service	service service	Service	
tzhang	Tony Zhang	Administrator de cas	

Figure 101 : Boutons de réglages utilisateur



### Pour ajouter un nouveau profil d'utilisateur :

1. Dans l'onglet **Réglages utilisateur**, sélectionnez **Ajouter** pour afficher la boîte de dialogue suivante :

Boîte de dialogue 'Nouvel utilisateur' :

- Nom d'utilisateur: [Champ]
- Nom: [Champ]
- Prénom: [Champ]
- Mot de passe: [Champ]
- Confirmer le mot de passe: [Champ]
- Authentification
  - Utiliser Active Directory
- Groupes
  - Administrateur
  - Radiologue
  - Technicien en radiologie
  - Service
  - Administrator de cas
- Droits
  - Diagnostic**
    - Configuration
    - Lecture
  - Dépistage**
    - Configuration
    - Lecture
  - Utilisateur**
    - Configuration

OK      Annuler

Figure 102 : Boîte de dialogue Nouvel utilisateur



### Remarque

Sur SecurView RT, les options Droits n'apparaissent pas.

---

2. Saisissez le nom d'utilisateur, le nom et le prénom. Puis :
  - Saisissez un mot de passe identique dans les champs Mot de passe et Confirmer mot de passe, ou
  - Sélectionnez « Utiliser Active Directory » pour authentifier l'utilisateur via le serveur Active Directory.



### Remarque

Pour les sites qui utilisent l'authentification via Active Directory :

- Vous devez configurer Active Directory avant d'ajouter de nouveaux utilisateurs. Consultez [Configuration de Active Directory](#) à la page 171.
  - Le nom d'utilisateur ne doit pas compter de barre oblique inverse (\).
  - Utilisez le caractère « @ » uniquement dans des expressions du type nomutilisateur@domaine. L'authentification de l'utilisateur est ainsi limitée à un domaine spécifique. Cette fonctionnalité s'avère utile lorsqu'il existe différents utilisateurs avec le même nom dans plusieurs domaines.
  - Vous n'êtes pas obligé d'ajouter le domaine au nom d'utilisateur. Si aucun domaine n'est indiqué, le système authentifie l'utilisateur dans n'importe quel domaine.
- 

3. Affectez l'utilisateur à un groupe. (Cas particulier : vous pouvez affecter un utilisateur à la fois au groupe des radiologues et à celui des manipulateurs.)
  - Les **Administrateurs** ont des droits leur permettant de configurer les paramètres du système, comme cela est expliqué dans ce chapitre.
  - Les **Radiologues** ont des droits leur permettant de visualiser les images de patients sur SecurView DX et de mettre en place des sessions d'études de diagnostic et/ou de dépistage (consultez [Création de sessions](#) à la page 39).
  - Les **Manipulateurs** ont des droits leur permettant de mettre en place des sessions d'études de diagnostic et/ou de dépistage (consultez [Création de sessions](#) à la page 39).
  - Les utilisateurs en charge de la **maintenance** ont les droits nécessaires pour configurer certains paramètres système (consultez le *Manuel d'installation et de maintenance de la station SecurView*).
  - Les **Administrateurs de cas** ont des droits leur permettant de grouper plusieurs enregistrements d'un même patient et de supprimer des patients de la liste de patients (consultez [Tâches de l'administrateur de cas](#) à la page 193).
4. Personnalisez les droits d'accès (pour les administrateurs, les radiologues et les manipulateurs seulement sur SecurView DX).
  - **Réglages diagnostic ou dépistage** : Si cette option est cochée, les radiologues et les manipulateurs peuvent créer des sessions. Consultez [Création de sessions](#) à la page 39.
  - **Lecture diagnostic ou dépistage** : Si cette option est cochée, les radiologues peuvent visualiser les images des patients.
  - **Réglages utilisateur** : Si cette option est cochée, les administrateurs ont des droits leur permettant de créer et de modifier les informations relatives aux profils des utilisateurs.
5. Sélectionnez **OK** pour enregistrer les nouveaux paramètres de l'utilisateur.

### Pour modifier un profil d'utilisateur :

1. Effectuez une des actions suivantes :
  - Sélectionnez un nom d'utilisateur dans l'onglet **Réglages utilisateur**, puis sélectionnez **Modifier** ou
  - Double-cliquez sur un nom d'utilisateur qui apparaît dans l'onglet **Réglages utilisateur**.
2. Modifiez le profil de l'utilisateur, puis sélectionnez **OK** pour enregistrer.

### Pour supprimer un profil d'utilisateur :

1. Sélectionnez un nom d'utilisateur dans l'onglet **Réglages utilisateur**, puis sélectionnez **Supprimer**. SecurView affiche « Voulez-vous supprimer cet utilisateur ? »
2. Sélectionnez **OK** pour supprimer le profil utilisateur.



#### Remarque

Les utilisateurs responsables de l'application et de la maintenance ne peuvent pas être supprimés de la liste Réglages utilisateur.

---

### 8.3 Profil d'administrateur

Sélectionnez l'onglet **Préférences utilisateur** pour afficher l'onglet **Profil d'utilisateur** de l'administrateur actuellement connecté. Vous pouvez modifier votre profil d'utilisateur et régler la durée pour la **Déconnexion auto** du système (c.-à-d. la durée d'inactivité de l'application acceptée avant la déconnexion automatique).

The screenshot displays the 'User Profile' configuration window. At the top, there are tabs for 'User Setup', 'User Preferences', 'Settings', 'ReportFlow', 'Maintenance', 'Overlay', and 'About'. The 'User Profile' tab is active. The form contains the following fields:

- User Name (\*): admin
- Last Name (\*): admin
- First Name (\*): admin
- E-mail Address: 1
- Password (\*): \*\*\*\*\*
- Confirm Password (\*): \*\*\*\*\*

Below the form is the 'Auto Log-off' section, which includes an 'Auto Log-off Time' dropdown menu currently set to '30 min'. At the bottom of the window, there is a 'Help' button on the left, a status bar in the center showing '08-11-2011 04:25:37 pm User Name: admin', and 'OK', 'Cancel', and 'Apply' buttons on the right.

Figure 103 : Onglet Profil utilisateur

## 8.4 Configuration des paramètres au niveau système

Utilisez la fenêtre Paramètres pour configurer les paramètres de niveau système. (Notez que l'écran ci-dessous correspond à SecurView DX. Certains paramètres ne s'appliquent pas à SecurView RT.)

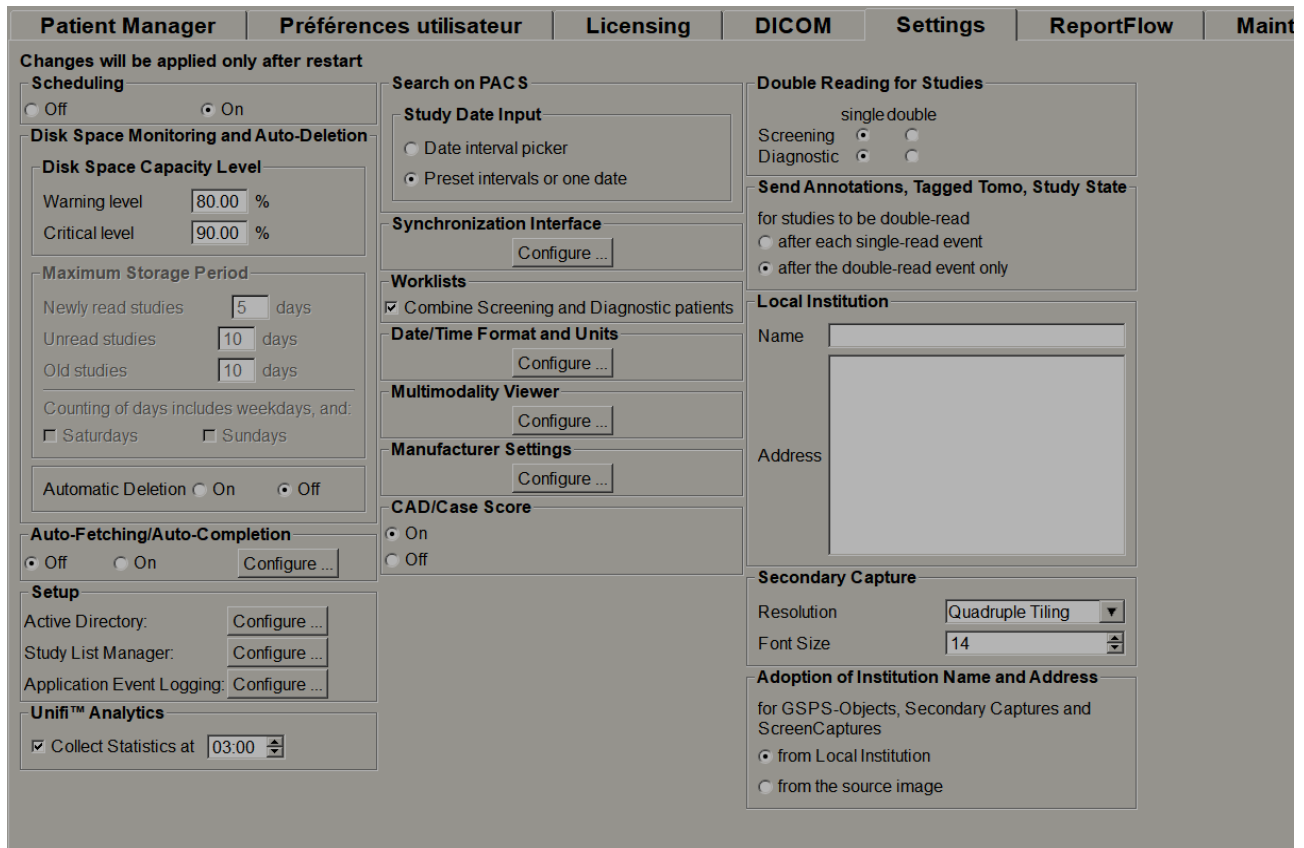


Figure 104 : La Fenêtre Settings (Paramètres)

Réglez les paramètres comme cela est décrit dans les prochaines sections. Quand vous avez effectué votre sélection, enregistrez vos paramètres en cliquant sur **OK**. Certains de ces paramètres (par exemple l'option Programmation, les listes de travail, les unités et le format de la date et de l'heure, etc.) nécessitent un redémarrage de SecurView pour enregistrer les modifications.

### 8.4.1 Programmation

Dans SecurView DX, ce paramètre permet d'activer l'option Créer une session (consultez [Les boutons de la liste de patients](#) à la page 29 et [Création de sessions](#) à la page 39).

- **Désactiver** : L'option Créer une session n'est pas disponible.
- **Activer** : L'option Créer une session est disponible. Les utilisateurs peuvent créer une session s'ils ont des droits de configuration pour dépistage ou diagnostic.

### 8.4.2 Surveillance de l'espace disque et suppression automatique

Ces paramètres indiquent combien de temps SecurView conserve les données de patient dans sa base de données et ce qui se passe lorsque le disque dur est saturé.

Disk Space Capacity Level	
Warning level	80.00 %
Critical level	90.00 %

Maximum Storage Period	
Newly read studies	5 days
Unread studies	10 days
Old studies	10 days

Counting of days includes weekdays, and:  
 Saturdays  
 Sundays

Automatic Deletion  On  Off

Figure 105 : Surveillance de l'espace disque et paramètres de suppression automatique

#### Niveau de capacité d'espace disque

Un message d'avertissement apparaît lorsque le stockage sur disque atteint l'une des limites spécifiées. Deux niveaux de capacité des disques produisent des messages d'alerte :

- **Niveau de mise en garde** : le seuil par défaut est 80 %. Les messages apparaissent toutes les 20 minutes jusqu'à ce qu'il y ait à nouveau de l'espace disque disponible.
- **Niveau critique** : le seuil par défaut est 90 %. Le système n'accepte pas les informations entrantes (par exemple, des images ou des messages DICOM) jusqu'à ce qu'il y ait à nouveau de l'espace disque disponible.

#### Période maximale de stockage

Ces paramètres ne sont disponibles que lorsque l'option Suppression automatique est définie sur **On**. La Période maximale de stockage est le nombre de jours pendant lesquels SecurView conserve les données de patients avant de supprimer automatiquement celles qui répondent aux critères configurés. La période de stockage est basée sur la date et l'heure de réception par SecurView de la dernière image d'une étude donnée.

Sur les stations SecurView RT, les paramètres correspondant aux Études récemment interprétées ou aux Études non-interprétées sont remplacés par une option unique Nouvelles études.

## Suppression automatique

Lorsqu'elle est définie sur **On**, SecurView supprime automatiquement des patients (données image et autres objets) selon des critères prédéfinis. La suppression automatique fonctionne de deux façons :

- **Suppression automatique continue** – SecurView supprime les patients dont la période de stockage a expiré. La capacité disponible sur le disque n'a aucune influence. Par exemple sur SecurView DX, lorsque l'état d'un patient est *Interprété* et que la période de stockage pour les *Études récemment interprétées* expire, SecurView supprime le patient même si ce patient a des *Études anciennes* pour lesquelles la période de stockage n'a pas expiré.
- **Suppression automatique forcée** – Lorsque la capacité disponible sur le disque atteint le niveau d'alerte, SecurView commence à supprimer les plus anciens patients dont l'état est *Interprété*. Les paramètres de durée maximale de stockage n'ont pas d'influence.

Le tableau suivant résume le comportement.

Événement	Suppression automatique	Suppression automatique
	Active	Inactive
Vérification horaire	Effectuer la suppression automatique de manière continue	Ne rien faire
Le système atteint le niveau de mise en garde	Effectuer la suppression automatique forcée	Afficher le message de mise en garde
Le système atteint le niveau critique	Afficher le message de niveau critique. Refuser toute donnée DICOM entrante. Lancer la suppression automatique forcée lorsqu'aucun utilisateur n'est connecté.	Afficher le message de niveau critique. Refuser toute donnée DICOM entrante. Lancer une suppression automatique forcée lorsque l'utilisateur sélectionne <b>Nettoyer</b> dans l'onglet <b>Patient Manager</b> .

SecurView ne supprime pas automatiquement un patient si :

- Un utilisateur est en train de visualiser les données du patient.
- Un utilisateur est connecté à un système multi-stations.
- Il y a une tâche d'impression ou de stockage d'annotations en attente pour le patient
- Les données du patient sont verrouillées (par exemple, en attente) et/ou sont protégées contre la suppression automatique (SecurView DX seulement).

- Le patient comprend une image avec message, et l'étude n'est pas marquée comme « examinée » (SecurView RT seulement).
- Le patient comprend uniquement des études non locales.

Lors de la suppression de patients fusionnés, SecurView prend en considération à la fois les études du premier patient et celles du second patient.

Les patients comprenant des études locales et non locales peuvent être supprimés automatiquement. La synchronisation du SLM peut ajouter ultérieurement le patient à la liste de patients avec seulement les études non locales.

### Suppression automatique dans une configuration multistations

Dans une configuration multistations, la fonction de suppression automatique se comporte différemment du système autonome :

- Sur le **Manager**, les paramètres de la période maximale de stockage sont globaux. Les paramètres du niveau de mise en garde et du niveau critique sont locaux. Si la suppression automatique est en mode actif **On**, le Manager effectue des vérifications horaires, des suppressions de patients continues (propagées à tous les Clients) et des procédures de nettoyage. Pendant le nettoyage, le Manager supprime chez les Clients des copies d'images préparées. (Les paramètres de suppression automatique des Clients n'ont pas d'influence).
- Sur le **Client**, les paramètres de suppression automatique sont locaux ; ils n'ont aucune influence sur d'autres Clients ou sur le Manager. Si la suppression automatique est en mode actif **On** et que le niveau de mise en garde a été atteint, le Client supprime les patients stockés localement. Les données supprimées du système local résident encore dans le Manager.

### Nettoyage dans des clients multi-stations

Dans un client, le bouton **Nettoyer** permet de supprimer des patients. Si vous sélectionnez **Nettoyer**, un message s'affiche vous demandant si vous voulez lancer la fonction de suppression automatique. Si vous sélectionnez **Oui**, SecurView se déconnecte du système et lance la suppression automatique forcée.

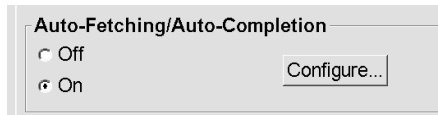
- Pour les radiologues, le bouton **Nettoyer** se trouve dans l'onglet **Patient Manager** (à côté du bouton **OK**) dès que le niveau critique est atteint.
- Pour les administrateurs et les personnes en charge de la maintenance, le bouton **Nettoyer** est toujours accessible. Si la capacité du disque disponible est inférieure au niveau d'alerte, la fonction Nettoyer supprime alors un nombre prédéfini de patients (par défaut, 50).



### 8.4.3 Configuration des fonctions Auto-Fetching/Auto-Completion (Auto-récupération/Auto-achèvement)

La fonction Auto-récupération récupère automatiquement les objets précédents, des archives lorsque SecurView reçoit de nouvelles études. Les objets peuvent être des images, des SR DAO, des états d'étude avec ou sans annotations et des objets GSPS de tierces-parties d'études qui répondent aux critères d'auto-récupération. Consultez [Auto-récupération des données du patient](#) à la page 34.

Lorsque SecurView reçoit un objet GSPS ou SR DAO, la fonction Auto-achèvement récupère automatiquement tous les objets de l'étude à laquelle celui-ci se réfère.



Si vous sélectionnez **Configurer...**, vous pouvez sélectionner des options de la boîte de dialogue suivante :

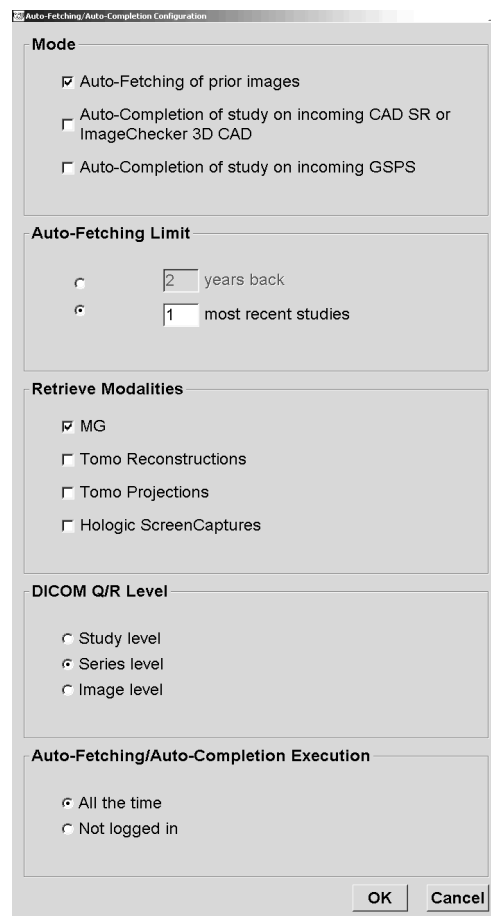


Figure 106 : Boîte de dialogue Configuration des fonctions Auto-récupération/Auto-achèvement

- **Mode** : sélectionnez **Auto-récupération des images précédentes** si SecurView est en charge de la récupération des études précédentes à partir des archives.
  - Pour SecurView DX, la fonction Auto-achèvement n'est généralement pas nécessaire car elle ajoute du trafic réseau redondant.



---

### Remarque

Si une capture secondaire MG d'un premier lecteur est envoyée à un PACS et si le rapport GSPS du premier lecteur est reçu avant la fin de la deuxième lecture, la sélection de l'option « Auto-achèvement de l'étude sur GSPS entrant » peut violer un protocole de lecture en double-aveugle en récupérant la capture secondaire MG (consultez [Envoyer les annotations, coupes tomo, état de l'étude](#) à la page 182).

---

- Pour SecurView RT, la fonction Auto-achèvement peut être appropriée (par exemple, SecurView RT peut recevoir un message pour lequel il n'a pas les images, en raison des paramètres de routage des images du site et/ou des paramètres de suppression automatique de SecurView RT).
- **Limite d'auto-récupération** : sélectionnez soit un intervalle de temps (**années auparavant**), soit le nombre d'**études les plus récentes**.
- **Modalités d'imagerie de récupération de données** : sélectionnez les modalités d'imagerie selon lesquelles vous comptez récupérer des données. (Le paramètre « MG » permet de récupérer des études précédentes de mammographie numérique avec annotations GSPS et SR DAO associés).
- **Niveau de requête/récupération DICOM** : Sélectionnez un niveau fondé sur les exigences PACS1, où PACS 1 est configuré dans le réglage DICOM par un ingénieur de maintenance.
  - **Niveau série** est le niveau privilégié s'il est pris en charge par PACS 1.
  - **Niveau d'étude** constitue également un réglage acceptable. Ce niveau requiert que le PACS 1 prenne correctement en charge les modalités de l'étude (0008,0061) dans les requêtes DICOM.
- **Exécution des fonctions Auto-Récupération/Auto-Achèvement** :
  - Pour un système multi-stations, le Manager utilise l'option **Tout le temps**. (**Non connecté** n'est pas disponible.)
  - Pour un système autonome, sélectionnez l'un de ces paramètres. Si vous sélectionnez **Non connecté**, le système ne lance l'auto-récupération que si aucun utilisateur n'est connecté au système.

### 8.4.4 Configuration de Active Directory

Active Directory est un service d'annuaires mis en place par Microsoft Windows afin de simplifier la gestion de la sécurité du réseau. Lorsque vous ajoutez ou modifiez un profil utilisateur, SecurView vous offre la possibilité d'utiliser Active Directory pour l'authentification utilisateur. Consultez [Gestion des profils des utilisateurs](#) à la page 160.

Vous pouvez configurer Active Directory depuis la fenêtre **Administration > Paramètres** :



Pour configurer Active Directory :

1. Sélectionnez **Configurer...** pour ouvrir la boîte de dialogue Configuration d'Active Directory :


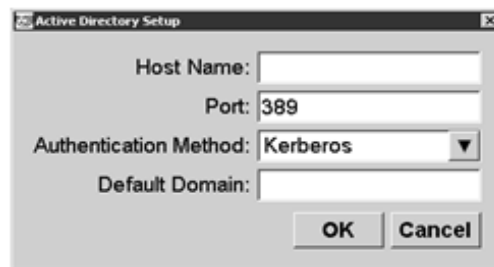


Figure 107 : Boîte de dialogue Configuration d'Active Directory

2. Saisissez le nom complet de l'hôte qualifié du serveur Active Directory.
3. Saisissez le port du serveur Active Directory. Le paramètre par défaut est 389.
4. Sélectionnez une méthode d'authentification :
  - Kerberos – paramètre par défaut.
  - Digest – ne peut pas être utilisé dans plusieurs scénarios de domaine puisqu'il est impossible de distinguer différents utilisateurs ayant le même nom d'utilisateur qui figurent dans des domaines distincts (un utilisateur ne pourra pas se connecter).
  - Mot de passe en clair – non recommandé car les mots de passe sont transmis sans chiffrement.
5. Vous pouvez également saisir le domaine par défaut à utiliser au cas où un utilisateur d'Active Directory n'indique pas de domaine lors de la connexion.
6. Sélectionnez **OK** pour enregistrer les paramètres.

### 8.4.5 Configuration d'un Study List Manager (SLM)

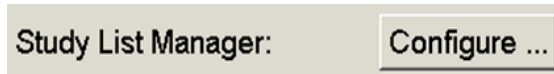La communication avec un Study List Manager peut être configurée depuis l'onglet **Administration > Paramètres** :



#### Pour configurer un Study List Manager

1. Sélectionnez **Configurer...** pour ouvrir la boîte de dialogue Configuration d'un SLM :

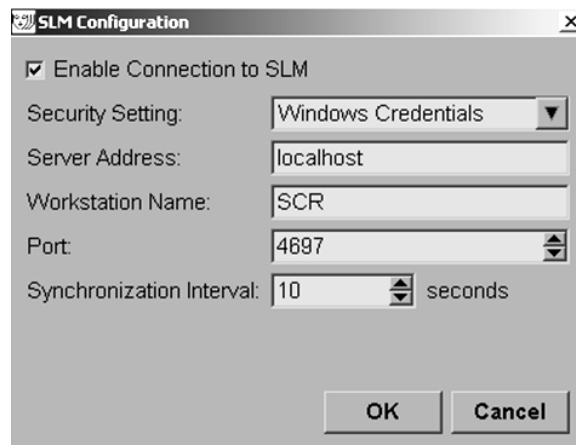


Figure 108 : Boîte de dialogue Configuration d'un SLM

2. Sélectionnez **Activer la connexion à un SLM** pour activer la connexion à un Study List Manager.
3. Sélectionnez un paramètre de sécurité à utiliser pour la communication entre SecurView et le Study List Manager. Si vous sélectionnez Informations d'identification Windows, les identifiants de l'utilisateur Windows actuellement connecté sont utilisés pour la connexion au Study List Manager.  
Sélectionnez l'un des paramètres de sécurité suivants :
  - a. Aucun
  - b. Client HTTPS anonyme
  - c. Informations d'identification Windows – par défaut
4. Saisissez l'**Adresse du serveur** (adresse IP ou nom) du serveur hébergeant le Study List Manager. Le nom par défaut est localhost, il peut être utilisé quand le Study List Manager est exécuté sur une station autonome SecurView ou une station SecurView Manager dans une configuration multistations.

5. Saisissez le **Nom de la station** utilisé pour la communication avec le Study List Manager. Le nom par défaut est le titre AE de SecurView.
6. Saisissez le **Port** du serveur hébergeant le Study List Manager.
  - a. Le port par défaut du paramètre de sécurité « Aucun » est 4699.
  - b. Le port par défaut du paramètre de sécurité « Client HTTPS anonyme » est 4698.
  - c. Le port par défaut du paramètre de sécurité « Informations d'identification Windows » est 4697.
7. Sélectionnez l'intervalle en secondes de la fréquence de synchronisation avec le Study List Manager. Le paramètre par défaut est 10 secondes.
8. Sélectionnez **OK** pour enregistrer les paramètres.

### 8.4.6 Journalisation d'événement d'application

SecurView peut créer un fichier journal qui enregistre les événements clés de l'application. Les clients ont accès à ces journaux pour suivre leur activité dans le système ou simplifier la démonstration de conformité avec les règles HIPAA ou de confidentialité du patient. Un administrateur ou une personne responsable de la maintenance peut configurer la journalisation des événements de l'application sous l'onglet **Paramètres** de l'écran *Administration*. Les options de configuration permettent d'activer ou de désactiver la journalisation et d'indiquer le répertoire cible du fichier journal.

Le journal d'événements de l'application est au format CSV. Chaque ligne du fichier représente un événement individuel et contient des valeurs séparées par une virgule propre à cet événement. Vous pouvez facilement importer le fichier dans une feuille de calcul afin d'autoriser l'analyse détaillée.



---

#### Remarque

Les fichiers journaux de l'événement d'application sont chiffrés. Contactez l'Assistance technique pour demander l'outil de déchiffrement.

---

Les champs suivants sont inclus pour les événements enregistrés dans le fichier journal. Tous les champs ne s'appliquent pas à tous les événements.

- Date et heure
- Groupe d'utilisateurs (radiologue, administrateur, administrateur de cas ou personne responsable de la maintenance)
- Utilisateur (nom de connexion)
- Événement
- ID du patient
- UID d'instance d'étude
- Autres (récupère des informations supplémentaires propres à certains événements)

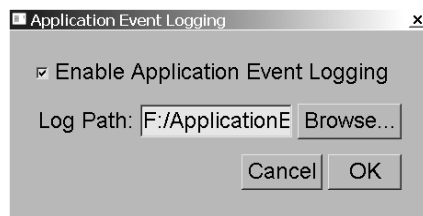
Les événements d'application suivants sont capturés dans le fichier journal :

<b>Événement</b>	<b>Texte apparaissant dans la zone Événement</b>	<b>Informations supplémentaires dans d'autres zones</b>
Échec de la tentative de connexion	échec de la connexion	
Connexion réussie	connecté	
Déconnexion réussie	déconnecté	
Suppression de patient (manuelle ou automatique)	supprimé	
Étude du patient ouverte pour examen	ouvert	
Étude patient importé dans le système	importé	
Étude patient exportée du système	exporté	Type de contenu exporté
Étude patient imprimée	imprimé	
Patients fusionnés (informations principales sur le patient)	fusionné comme principal	ID patient secondaire
Patients fusionnés (informations secondaires sur le patient)	fusionné comme secondaire	ID patient principal
Patients non fusionnés	non fusionnés	ID patient principal
Mot de passe modifié	mot de passe modifié	S'il est modifié par l'administrateur, contient le nom de l'administrateur et les groupes
Étude patient reçue d'un système externe (chaque fichier DICOM reçu est considéré comme un événement unique)	reçu	Titre AE distant et adresse IP
Journalisation désactivée	journalisation désactivée	Chemin d'accès à l'ancien fichier journal
Journalisation activée (ainsi que les modifications de la configuration)	journalisation activée	Chemin d'accès au nouveau fichier journal

Vous pouvez configurer la journalisation d'événement d'application à partir de l'onglet **Administration > Paramètres** :

**Application Event Logging: Configure ...**

Lorsque vous sélectionnez **Configurer...**, vous pouvez activer ou désactiver la fonction et définir le dossier du journal (par défaut, il s'agit de F:/ApplicationEventLogging).



### Important

Hologic recommande de maintenir le dossier Journal des événements d'application dans un lecteur externe sécurisé de la station SecurView.



### Remarque

Dans un groupe multistations, vous ne pouvez accéder à cet écran de configuration qu'à partir du Manager.

## 8.4.7 Unifi™ Analytics

SecurView peut fournir des données d'analyse pour Unifi Analytics dans un fichier XML par jour, à un emplacement de dossier prédéfini, par configuration, là où se trouve le dossier par défaut F:\Unifi. Une licence est nécessaire pour le gestionnaire ou pour un système autonome.

- **Collecte de statistiques à** : Sélectionnez la case à cocher pour activer la collecte de données d'analyse si autorisé. Sélectionnez l'heure du jour (format 24 heures) pour collecter les données. Le réglage par défaut est activé et l'heure par défaut est 3h00 soit 3 heures du matin. Pour les systèmes multistations, c'est un réglage par groupe.



### Remarque

Assurez-vous que l'heure et le jour configurés pour la collecte des données d'analyse ne coïncident pas avec l'heure de redémarrage automatique du système.

Les données d'analyse comprennent ce qui suit :

- **Réception d'objets DICOM** : heure, adresse IP de la source et de l'expéditeur de l'événement
- **La préparation a démarré / est terminée** : heure de démarrage, adresse IP de la source de l'événement, ID de l'objet, heure de fin, état

- **Distribution d'images** : heure, adresse IP de la source de l'événement, ID de l'objet, type de l'objet
- **Révision d'événements** : heure, adresse IP de la source de l'événement, ID unique pour le patient, ID unique pour l'étude, état de lecture de l'étude, état de verrouillage de l'étude, type d'étude, utilisateur de révision
  - Étude ouverte
  - Étude fermée (quitter)
  - Étude fermée (terminée)
  - Étude ajoutée au patient actuellement révisé



---

### Remarque

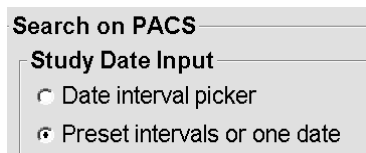
Les informations sur le patient sont anonymisées dans les données d'analyse.

---

## 8.4.8 Recherche sur PACS

Permet au radiologue de saisir le champ Date de l'étude de la recherche dans la boîte de dialogue du PACS (consultez [Recherche de patients](#) à la page 37). Le format de date peut être soit une plage de dates spécifique choisie par l'utilisateur, soit un intervalle/jour prédéfini.

- **Sélecteur de l'intervalle de date** : affiche une feuille de calendrier permettant au radiologue de sélectionner des dates précises de début et de fin pour la recherche sur PACS.
- **Intervalle prédéfini ou une certaine date** : affiche un intervalle prédéfini (par exemple, aujourd'hui, le mois dernier, etc.) dans le champ texte Date de l'étude.




## 8.4.9 Configuration de l'interface de synchronisation

Spécifiez l'adresse IP et le port pour permettre la synchronisation entre la station SecurView et une application externe. La synchronisation avec les applications autres que celles de Hologic requiert une licence de synchronisation d'application.

Sur une station client SecurView, entrez le nom d'un client SLM spécifique (par exemple, client MultiView) afin d'ajouter uniquement les études du client SLM spécifié à la liste de patients de la station client SecurView.



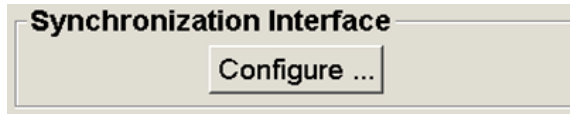L'interface de synchronisation peut être configurée depuis l'onglet **Administration** > **Paramètres** :



**Pour configurer l'interface de synchronisation**

1. Sélectionnez **Configurer...** pour ouvrir la boîte de dialogue Configuration de l'interface de synchronisation :


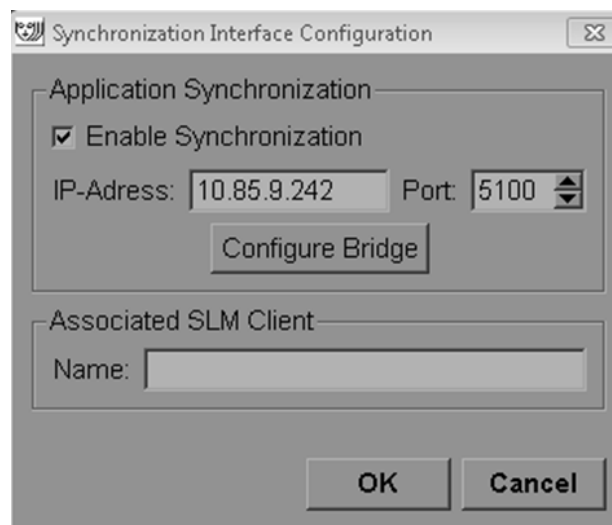


Figure 109 : Boîte de dialogue Configuration de l'interface de synchronisation

2. Sélectionnez **Activer la synchronisation** pour activer la communication avec la synchronisation d'application.
3. Entrez l'adresse IP de la synchronisation d'application.
4. Entrez le port de la synchronisation d'application. Le paramètre par défaut est 5100.
5. Si vous sélectionnez **Configurer le pont** avec une adresse IP et un paramètre de Port valides, l'interface de configuration de la synchronisation d'application apparaît (Application Synchronization doit être installée sur SecurView). Pour plus d'informations, consultez le *Manuel d'installation de la synchronisation d'applications*.
6. Sur une station client, entrez le **Nom du client SLM associé**.
  - Entrez un nom uniquement si un SLM est configuré.
  - Cette option est disponible sur une station autonome SecurView et une station client SecurView dans une configuration multi-stations. Cette valeur doit être définie sur toutes les stations qui possèdent un client SLM associé (par exemple, MultiView).
  - Vérifiez que la valeur entrée correspond au nom du client SLM associé enregistré avec le SLM.

### 8.4.10 Listes de travail

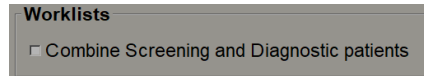
Sur SecurView DX, à utiliser pour définir de quelle manière SecurView génère automatiquement les listes de travail.



- **Combiner les patients qui ont été dépistés et les patients qui ont été diagnostiqués dans la même liste de travail (non lues et double lecture).** Consultez [Listes de travail générées automatiquement](#) à la page 44.

### 8.4.11 Format et unités de date/heure

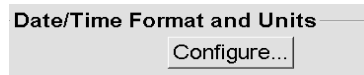Sélectionnez **Configurer...** pour choisir les paramètres de date et d'heure et les unités de force utilisées avec la palette de compression.



### 8.4.12 Viewer Multimodality

Dans SecurView DX, sélectionnez **Configure...** pour afficher l'Éditeur de configuration multimodalité (MM) afin de modifier les paramètres du Viewer MM. Cette fonction n'est disponible qu'avec une licence valide pour l'option avancée de multimodalité. Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de l'option avancée de multimodalité SecurView*.

### 8.4.13 Paramètres du fabricant

Les paramètres du fabricant contrôlent les comportements spécifiques au fabricant (et au modèle) d'un système de mammographie lors de l'affichage d'images de tomosynthèse (2D synthétisé, coupes reconstruites, plans de coupe reconstruits) acquises en combinaison avec des images 2D conventionnelles ou lors de l'affichage de résultats DAO en 3D.

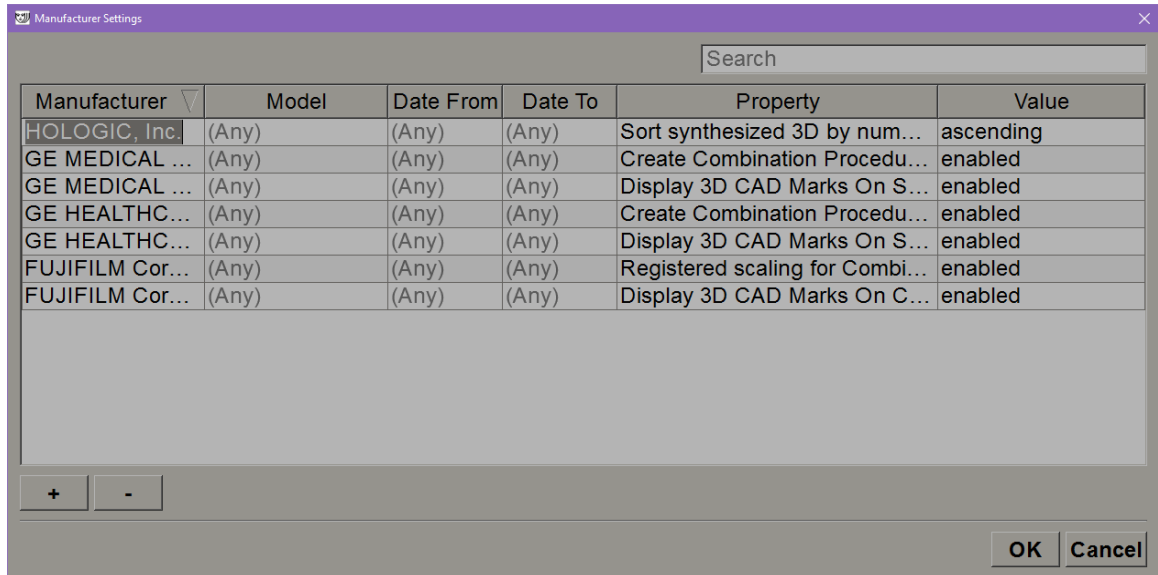


Figure 110 : Boîte de dialogue Paramètres du fabricant

#### Pour modifier les paramètres du fabricant :

1. Sélectionnez **Configurer...** dans Paramètres du fabricant pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres du fabricant :
2. Pour filtrer la liste des paramètres selon un champ, saisissez les premiers caractères dans le champ Rechercher.
3. Sélectionnez + pour ajouter un nouveau paramètre.
  - a. Entrez un nom de fabricant qui correspond exactement à la valeur du fabricant (0008,0070) dans les en-têtes d'image DICOM concernés.
  - b. Entrez un nom de modèle qui correspond exactement au nom de modèle du fabricant (0008,1090) dans les en-têtes d'image DICOM concernés, uniquement si le comportement souhaité est limité à un modèle de produit spécifique du fabricant. Sinon, laissez vide (N'importe lequel).
  - c. Saisissez une plage de dates d'étude (année, ou mois et année) dans Date de début et Date de fin, uniquement si le comportement souhaité est limité aux études acquises pendant une plage de dates spécifique pour le fabricant et/ou le modèle identifié. Sinon, laissez vide (N'importe lequel).

- d. Sélectionnez une propriété.
- e. Sélectionnez une valeur pour la propriété sélectionnée.
4. Pour modifier un paramètre, sélectionnez n'importe quel champ de ce paramètre et modifiez la valeur.
5. Pour supprimer un paramètre, sélectionnez n'importe quel champ d'un paramètre, puis sélectionnez –.
6. Sélectionnez **OK** pour enregistrer les modifications et fermer la fenêtre *Paramètres du fabricant* ou sélectionnez **Annuler** pour fermer la fenêtre *Paramètres du fabricant* sans enregistrer les modifications.

### Liste des propriétés et des valeurs des paramètres de fabricant :

Trier 3D synthétisée par nombre de coupes : ascendant | descendant

- Pour un fabricant ou un modèle spécifique, définit quelle reconstruction est affichée en haut dans le bouton Reconstruction de l'outil de navigation de tomosynthèse lorsque plus d'une reconstruction sont disponibles pour une vue (coupes, plans de coupes). S'applique uniquement lorsque la préférence utilisateur Trier la reconstruction en haut est définie sur Spécifique au fournisseur (consultez [Préférences de présentation d'image](#) à la page 132).
- Ascendant : la reconstruction comportant le moins de coupes est affichée en haut.
- Descendant : la reconstruction comportant le plus de coupes est affichée en haut.

Créer une procédure de combinaison par vue : activé | désactivé

- Pour les fabricants non Hologic seulement, combine des images de la même étude, latéralité et vue dans l'outil de navigation de la tomosynthèse, même s'il manque l'UID de l'image de référence (2D classique, 2D synthétisée, projections de tomosynthèse, reconstructions). Ne s'applique pas au grossissement, à la compression ponctuelle ou aux vues d'échantillons. Principalement pour le fabricant GE. Ignoré si Exclure de la création d'une procédure de combinaison est activé.

Exclure de la création d'une procédure de combinaison : activé | désactivé

- Pour les fabricants non Hologic uniquement, désactive la combinaison d'images de la même étude, latéralité et vue dans l'outil de navigation de tomosynthèse (2D conventionnelle, 2D synthétisée, projections de tomosynthèse, reconstructions), en ignorant l'UID de l'image de référence. Utiliser uniquement si la combinaison de ces images pose un problème.

Mise à l'échelle coordonnée pour les procédures de combinaison : activé | désactivé

- Pour les fabricants non Hologic seulement, redimensionne les images d'une procédure de combinaison (2D conventionnelle, 2D synthétisée, reconstructions) à la même hauteur. Ceci ne doit être activé que si le fabricant fournit des images coordonnées. Dans le cas contraire, l'affichage des images pourrait entraîner des résultats inattendus. Principalement pour le fabricant Fuji.

Réinitialisation du zoom et du panoramique lors du passage en procédure de combinaison : activé

- Pour les fabricants non Hologic seulement qui ne redimensionnent pas les images selon la hauteur, réinitialise le zoom et le panoramique lors du passage d'un type d'image à un autre (2D classique, 2D synthétisé, reconstructions) dans une vue combinée. Autrement, des zones différentes de l'image peuvent être affichées lorsque vous changez d'image pendant le zoom et le panoramique.

Affichage des repères DAO 3D sur 2D synthétisée : activé | désactivé

- Projette des repères DAO 3D des coupes reconstruites sur l'image 2D synthétisée correspondante dans une vue combinée.

Affichage des repères DAO 3D sur 2D conventionnelle : activé | désactivé

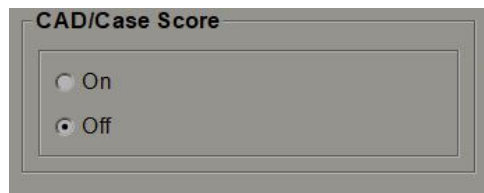
- Projette des repères DAO 3D des coupes reconstruites sur l'image 2D conventionnelle correspondante dans une vue combinée.

Affichage des repères DAO 3D sur des plans de coupe en 3D synthétisée : activé | désactivé

- Projette des repères DAO 3D des coupes reconstruites sur les plans de coupe ou les SmartSlices correspondantes dans une vue combinée.


### 8.4.14 Score DAO et Score de cas

Utilisez ce paramètre pour activer ou désactiver l'affichage du score de cas et du score DAO avec les résultats DAO 3D (consultez [Affichage des résultats DAO 3D](#) à la page 120).



### 8.4.15 Double lecture

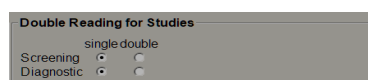Sur SecurView DX, à utiliser pour activer la double lecture automatique de chaque type d'étude (dépistage ou diagnostic). Par défaut, la lecture est simple. Lorsque l'option de double lecture est sélectionnée, deux radiologues peuvent visualiser séparément la même étude sans connaître les conclusions du collègue. (Consultez *Listes de travail générées automatiquement* à la page 44).





### Important

Lorsque SecurView affecte une étude à une lecture simple, vous ne pouvez pas la réaffecter pour une double lecture. Cependant, dans le cas des études à double lecture, un utilisateur peut annuler la seconde lecture à la clôture de l'étude. Consultez [Fermeture d'une étude](#) à la page 97.

---

### 8.4.16 Envoyer les annotations, coupes tomo, état de l'étude

Dans un scénario de double lecture, SecurView DX peut envoyer un rapport GSPS (état de lecture de l'étude avec ou sans les annotations et les coupes ou plans de coupe de tomosynthèse marqués) et des images de capture secondaire MG dès que chaque radiologue marque une étude comme « Interprétée ». Ce paramètre permet au mécanisme GSPS de synchroniser les états de lecture entre plusieurs systèmes autonomes configurés pour la double lecture.

#### Send Annotations, Tagged Tomo, Study State

for studies to be double-read

- after each single-read event
- after the double-read event only

- **après chaque événement de lecture simple** : SecurView envoie le rapport GSPS et les images de capture secondaire MG dès qu'un des radiologues marque l'étude comme « Interprétée ».
- 



### Remarque

Si GSPS ou la capture secondaire MG est envoyé à PACS après la première lecture, l'accès aux informations avant la fin de la seconde lecture peut constituer une violation du protocole de lecture en double-aveugle.

---

- **après l'événement de double lecture uniquement** : SecurView envoie le rapport GSPS et les images de capture secondaire MG dès que le deuxième radiologue marque l'étude comme « Interprétée ».

SecurView envoie les rapports GSPS et les images de capture secondaire vers les destinations configurées à l'aide de l'interface de service.

### 8.4.17 Établissement local

SecurView peut inclure le nom (Nom) et l'adresse (Adresse) de votre établissement lorsque sont créés des rapports GSPS, des messages GSPS, des captures secondaires MG et des captures d'écran MM. Consultez [Adoption du nom et de l'adresse de l'établissement](#) à la page 183. Si vous sélectionnez cette option, saisissez le nom et l'adresse de l'établissement.

The image shows a dialog box titled "Local Institution". It has two input fields: "Name" and "Address". The "Name" field is a single-line text box, and the "Address" field is a larger multi-line text box.

#### 8.4.18 Capture secondaire

Sur SecurView DX, utilisez ce paramètre pour définir le format de toutes les images de capture secondaire MG envoyées automatiquement à la clôture de l'étude. Une image de capture secondaire MG est créée seulement si le PACS de destination n'accepte pas les GSPS ou ne peut pas afficher les GSPS et que le client veut afficher les annotations sur la station de travail PACS. Consultez [Fermeture d'une étude](#) à la page 97.

The image shows a dialog box titled "Secondary Capture". It has two settings: "Resolution" is set to "Quadruple Tiling" (indicated by a dropdown arrow), and "Font Size" is set to "14" (indicated by a spin button).

#### 8.4.19 Adoption du nom et de l'adresse de l'établissement


Sélectionne la source d'information sur l'établissement pour les rapports GSPS, les messages GSPS, les captures secondaires MG et les captures d'écran MM.

The image shows a dialog box titled "Adoption nom et adresse de l'établissement". It contains the text "pour objets GSPS, captures secondaires et captures d'écran" and two radio button options: "depuis l'établissement local" and "depuis l'image source".

- **depuis l'établissement local** : les informations saisies dans le champ **Établissement local** sont appliquées à tous les objets GSPS, les captures secondaires MG et les captures d'écran MM créés par SecurView.
- **depuis l'image source** : les informations sur l'établissement contenues dans l'en-tête DICOM de l'image source (à partir de laquelle l'objet GSPS, la capture secondaire MG, ou la capture d'écran MM ont été créés) sont appliquées.

### 8.5 Configuration des captures d'écran et des ReportFlows de niveau système

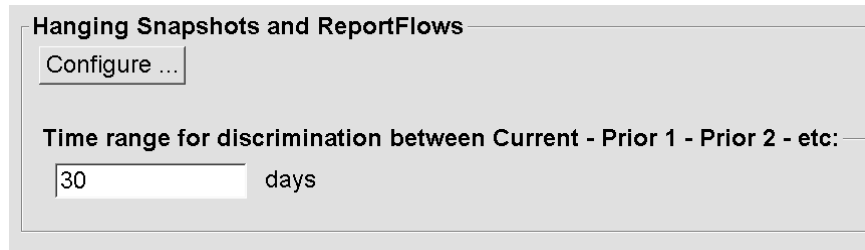Les administrateurs peuvent configurer les captures d'écran de présentation et les ReportFlows de niveau système en sélectionnant l'onglet **ReportFlow** et en sélectionnant **Configurer**.



La fenêtre *ReportFlows* s'ouvre avec une liste de captures d'écran de présentation et de ReportFlows disponibles. Pour plus d'informations, consultez [Captures d'écran de présentation et ReportFlows](#) à la page 141.

#### 8.5.1 Intervalle de temps précédent/actuel

Le champ Intervalle de temps permet de régler le nombre de jours pendant lesquels une étude reste en cours. Le réglage par défaut est de 30, ce qui signifie qu'une étude en cours devient une étude précédente 1 si elle demeure plus de 30 jours dans le système.



## 8.6 Configuration des noms de procédures d'examen

Utilisez la fenêtre *Identification des procédures d'examen* pour ajouter, modifier ou supprimer des noms de procédure. Chaque procédure correspond à un ensemble prédéfini d'images associées avec un type d'étude. Lors de la production d'images, la station d'acquisition de mammographie encode le nom de la procédure d'examen dans les en-têtes des images DICOM. Lorsque SecurView reçoit ces images, il détermine en fonction du nom de procédure le ReportFlow à sélectionner. Consultez [Lier un ReportFlow à une procédure](#) à la page 154.



Figure 111 : Fenêtre d'identification de la procédure d'examen

### Pour ajouter une nouvelle procédure :



Nouveau

1. Sélectionnez l'onglet **ReportFlow** pour afficher la fenêtre *Identification de la procédure d'examen*.
2. Sélectionnez le bouton **Nouveau** pour ouvrir la boîte de dialogue Identification de nouvelle procédure.



### Important

Assurez-vous de saisir correctement les attributs de procédure suivants. Une erreur à ce niveau peut entraîner l'absence d'études dans les réserves de travail automatiques.



Procédure

Description:

Type:

Identification

Manufacturer:

Modality:

Attribute Tag:

Format e.g. '(0008,1030)',  
for sequences  
e.g. '(0040,0275).  
(0040,0007)'

Private Creator:

(for private attributes only)

Attribute Name:

Attribute Value:

3. Dans la boîte de dialogue Identification de nouvelle procédure :
  - a. Saisissez un nom de procédure dans le champ Description (par exemple, Mammographie de dépistage bilatérale).
  - b. Sélectionnez le Type approprié dans la liste déroulante.
  - c. Saisissez le nom du Fabricant (en option).
  - d. Sélectionnez la Modalité dans la liste déroulante. MG est la modalité par défaut.
  - e. Saisissez une Balise d'attribut valide associée à la procédure. La valeur par défaut est (0008,1030), qui est la balise pour « Description de l'étude ».
  - f. Saisissez le nom de la procédure exactement comme il apparaît sur la station d'acquisition, y compris les abréviations, la casse et la ponctuation, dans le champ Valeur de l'attribut.
  - g. Une fois vos réglages terminés, sélectionnez **OK**.

### Pour modifier une procédure :



Modifier

1. Sélectionnez l'onglet **ReportFlow** pour afficher la fenêtre *Identification de la procédure d'examen*.
2. Sélectionnez le bouton **Modifier** pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier l'identification de procédure.
3. Lorsque vous avez terminé de modifier la procédure, sélectionnez **OK**.

### Pour supprimer une procédure :



Supprimer

1. Sélectionnez une procédure de la fenêtre *Identification de procédure* et sélectionnez le bouton **Supprimer**. Le système recherche les ReportFlows liés à la procédure à supprimer. Si un ReportFlow est lié à la procédure, le message suivant s'affiche :

Warning: At least one ReportFlow is linked to this procedure description. By removing this procedure description it will be deleted from the list of linked procedures of one or more ReportFlows. Do you want to continue?

2. Sélectionnez **OK** pour supprimer la procédure ou **Annuler** pour quitter sans supprimer.

## 8.7 Configuration des recouvrements d'image

Utilisez l'onglet **Recouvrement** pour sélectionner les informations apparaissant dans les recouvrements d'image de MG Viewer, de MammoNavigator, et d'impression.

- [Recouvrement d'image dans MG Viewer](#) à la page 187
- [Recouvrement d'image dans MammoNavigator](#) à la page 188
- [Recouvrement d'image imprimée](#) à la page 189

### 8.7.1 Recouvrement d'image dans MG Viewer

MG Viewer affiche des images afin qu'elles soient examinées par le radiologue. Les informations sur le patient, l'étude et l'image sont affichées en superposition, et l'utilisateur peut les faire apparaître ou disparaître. Consultez [Recouvrements des informations sur le patient](#) à la page 67.

Pour personnaliser le recouvrement d'image dans MG Viewer :

1. Dans l'onglet **Recouvrement**, sélectionnez l'onglet **Recouvrement d'image dans MG Viewer**.

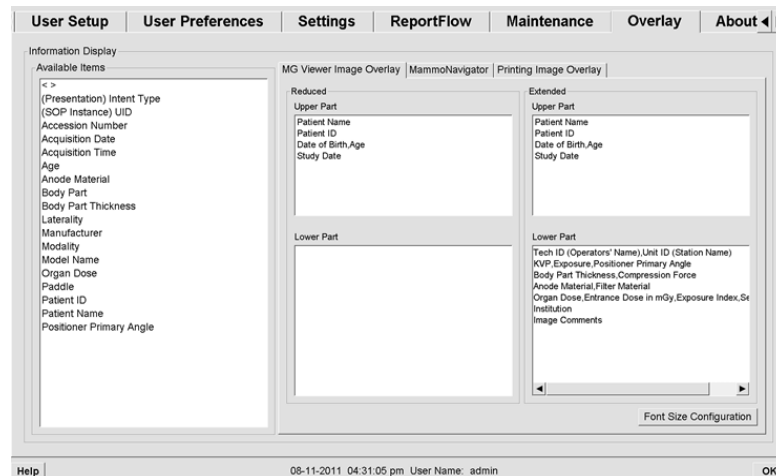


Figure 112 : Onglet Recouvrement d'image dans MG Viewer

2. Sélectionnez un élément dans la liste **Éléments disponibles**, et faites-le glisser dans les zones **Partie supérieure** ou **inférieure** de l'état **Réduit** ou **Étendu**.



#### Remarque

Les radiologues peuvent définir leurs propres préférences de recouvrement d'image pour que l'affichage se fasse soit en mode réduit (Reduced) soit en mode étendu (Extended). Consultez [Préférences de l'onglet Outils et Recouvrements](#) à la page 134.

3. Pour ajuster la taille des caractères, sélectionnez **Configuration taille police**. Sélectionnez les tailles de police pour chaque secteur et sélectionnez **OK** pour enregistrer vos paramètres.
4. Après avoir configuré le recouvrement d'images, sélectionnez **OK** pour enregistrer vos paramètres.

### 8.7.2 Recouvrement d'image dans MammoNavigator

Utilisez l'onglet **MammoNavigator** pour sélectionner les champs de données qui apparaissent dans la fenêtre Information image de MammoNavigator. La fenêtre Information d'image affiche les données de l'en-tête DICOM associé à l'image. Consultez [Informations sur l'image](#) à la page 66.

**Pour personnaliser le recouvrement d'image dans MammoNavigator :**

1. Dans l'onglet **Recouvrement**, sélectionnez l'onglet **MammoNavigator**.
2. Sélectionnez un élément dans la liste Éléments disponibles, et faites-le glisser dans la zone de la fenêtre Informations d'image MammoNavigator.

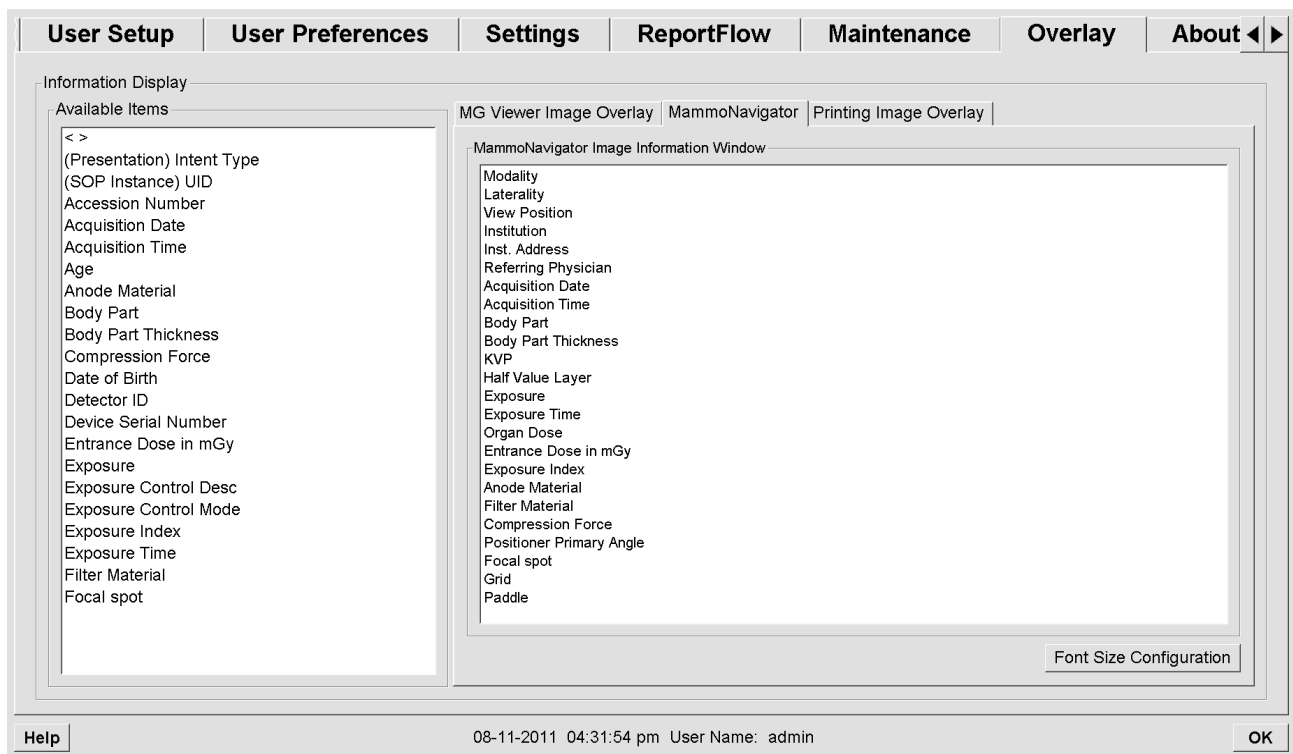


Figure 113 : Onglet MammoNavigator

3. Pour ajuster la taille des caractères, sélectionnez **Configuration taille police**. Sélectionnez la taille de police d'Information image de MammoNavigator et sélectionnez **OK** pour enregistrer vos réglages.
4. Après avoir configuré le recouvrement d'images, sélectionnez **OK** pour enregistrer vos paramètres.

### 8.7.3 Recouvrement d'image imprimée

Vous pouvez utiliser l'onglet **Recouvrement d'image imprimée** pour sélectionner les champs de données apparaissant dans une image imprimée. Un radiologue peut imprimer des images, avec d'autres données telles que les informations sur le patient, les annotations, et d'autres éléments sur une imprimante de film DICOM. L'utilisateur sélectionne des zones à imprimer (partie supérieure, partie inférieure ou les deux) en utilisant la boîte de dialogue d'impression de MG Viewer. Consultez *Options d'impression* à la page 101.

**Pour personnaliser le recouvrement d'information sur image imprimée :**

1. Dans l'onglet **Recouvrement**, sélectionnez l'onglet **Recouvrement d'image imprimée**.
2. Sélectionnez un élément dans la liste **Éléments disponibles**, et faites-le glisser dans la zone **Partie supérieure** ou **Partie inférieure**.

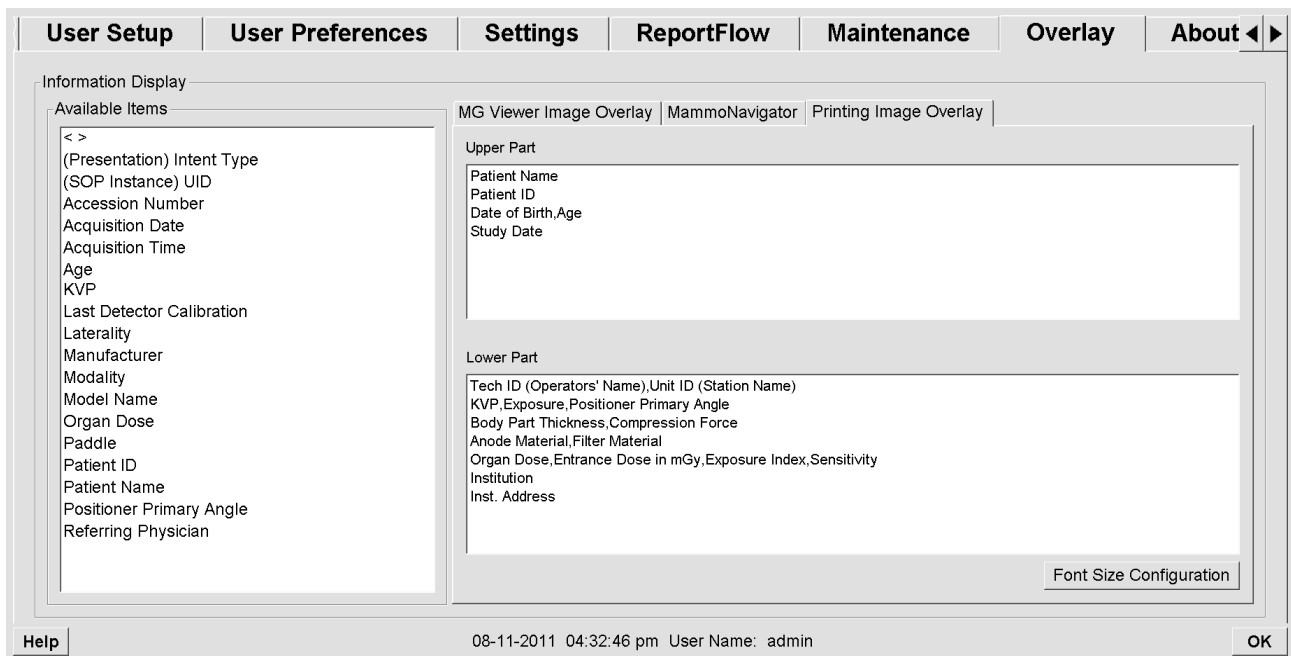


Figure 114 : Onglet Recouvrement d'image imprimée

3. Pour ajuster la taille des caractères, sélectionnez **Configuration taille police**. Sélectionnez les tailles de police pour chaque secteur et sélectionnez **OK** pour enregistrer vos paramètres.
4. Après avoir configuré le recouvrement d'images, sélectionnez **OK** pour enregistrer vos paramètres.

### 8.8 Gestion de la base de données

L'onglet **Maintenance** offre des options pour la sauvegarde de la base de données ainsi que pour la planification de la maintenance de la base de données.

#### 8.8.1 Sauvegarde de la base de données

Sauvegardez la base de données des patients sur disque CD-R/DVD. Durant tout le processus de sauvegarde, aucune autre fonction (telle que l'acceptation de nouvelles images) n'est disponible tant que le processus n'est pas terminé. Planifiez des créneaux horaires pratiques pour la maintenance et assurez-vous que tous les expéditeurs disposent des mécanismes de relance appropriés.



#### Important

SecurView sauvegarde la liste de patients, les ReportFlows, les annotations, les états de lecture et les paramètres de configuration disponibles sur l'interface utilisateur. Il ne sauvegarde pas les données d'image.

#### Pour sauvegarder la base de données :

Pour éviter toute perte de données en cas de défaillance du système, sauvegardez la base de données des patients tous les mois, ou lorsque vous savez que des changements de configuration ont été opérés.



#### Important

Dans un environnement multistations, n'effectuez la sauvegarde de la base de données que sur le Manager.

1. Sélectionnez l'onglet **Maintenance** pour afficher la fenêtre suivante :

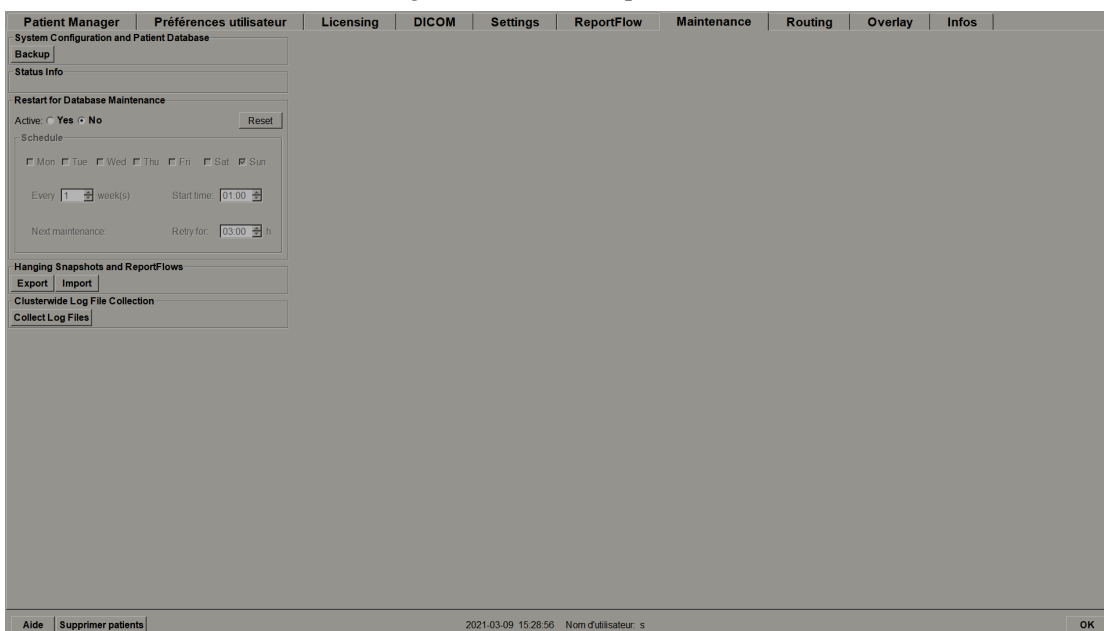


Figure 115 : Onglet Maintenance

2. Sélectionnez **Sauvegarde**. L'invite à insérer un CD apparaît.
3. Insérez le disque dans le lecteur CD/DVD, puis sélectionnez **OK**. Lorsque le processus de sauvegarde est terminé, le message « Sauvegarde terminée avec succès » apparaît.



---

### Remarque

SecurView affiche un message dans la zone d'information sur l'état si la taille de base de données dépasse la capacité du disque. Dans ces cas-là, utilisez un DVD.

---

## 8.8.2 Planification de la maintenance de la base de données

Lorsque le redémarrage pour la fonction de maintenance de la base de données est « Active », SecurView redémarre automatiquement la station en respectant l'intervalle défini, puis analyse et réindexe la base de données. Activez cette fonction uniquement si un assistant de l'assistance technique de Hologic vous le demande.

Le bouton Réinitialiser attribue toutes les valeurs par défaut à tous les paramètres.

## 8.8.3 Collecte des fichiers-journaux par groupe

Sur le gestionnaire, l'onglet de maintenance comprend une option pour la collecte centralisée des fichiers-journaux. Sélectionnez **Collecte fichiers-journaux** pour sélectionner un dossier pour collecter et enregistrer tous les fichiers-journaux des clients connectés. La boîte de dialogue de collecte des fichiers-journaux par groupe contient les boutons **Démarrer** et **Annuler** et indique la progression de la collection du fichier-journal.





## Chapitre 9 Tâches de l'administrateur de cas

Les administrateurs de cas peuvent grouper plusieurs dossiers d'un même patient et supprimer des patients de la liste. Ce chapitre donne un aperçu du module d'administration pour administrateurs de cas et explique comment supprimer des patients.

### 9.1 Ouverture du module d'administration

Lorsque vous vous connectez en tant qu'administrateur de cas, le module d'administration inclut les onglets **Patient Manager**, **Préférences utilisateur** et **Infos**.

**Pour ouvrir le module d'administration :**

1. Connectez-vous à SecurView.
2. Sélectionnez l'onglet **Administration** pour afficher la liste de patients :

The screenshot shows the 'Administration' window with the 'Patient Manager' tab selected. The window has a menu bar with 'Liste de patients', 'Sessions', and 'Log'. Below the menu bar are several buttons: 'Réinitialiser les colonnes', 'Renvoyer', 'Messages', 'Annuler modification', 'Créer une session', 'Contrôle', 'Effacer', 'Mettre à jour Liste de patients', 'Grouper patients', 'Annuler l'importation', 'Importer ...', 'Suspendre et revoir', and 'Recharger'. The main area contains a table titled 'Liste de patients' with the following data:

Date de l'étu	Nom	ID patient	Date de nais	Modalité	Etat	Rema	Type	DAO	M ▲
05-18-2011	00300670	00300670	01-01-2007	MG+	Interpr				+
04-28-2011	01_Multimodality, 001	01_Multimodality_001	04-06-1961	MG, US, MR	Interpr				+
04-12-2011	02_Patient, 001_ScrDgnExt_Scr	02_Patient_001	10-29-1962	MG	Non int Att.				+
04-12-2011	21400057	21400057	01-01-1940	MG+	Non int Supp.				+
04-03-2011	Brown, James H	1336574	12-02-1936	CT, OT	Ancien				+
12-11-2009	22400008	22400008	01-01-1961	MG+	Ancien				+
12-10-2009	22400005	22400005	01-01-1951	MG+	Ancien				+
12-10-2009	22400013	22400013	01-01-1950	MG+	Ancien				+
12-10-2009	22400014	22400014	01-01-1954	MG+	Ancien				+

At the bottom of the window, there are search options: 'Recherche locale' and 'Recherche sur PACS'. A status bar indicates '0 patient(s) sélectionné(s) parmi 91'. The footer shows 'Aide', 'Delete Patients', the date and time '05-26-2011 09:25:34 am', the user name 'Nom d'utilisateur: tzhang', and an 'OK' button.

La fenêtre *Administration* propose trois onglets :

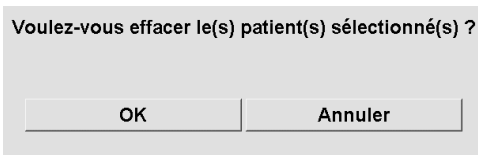
- **Patient Manager** — Affiche la liste de tous les patients avec leurs études et séries présents dans la base de données. L'administrateur de cas n'a pas la possibilité de créer une nouvelle session ou de synchroniser des patients.
- **Préférences utilisateur** — Affiche le profil utilisateur de l'administrateur de cas.
- **Infos** — Affiche des informations sur le logiciel. Consultez cette information lorsque vous sollicitez l'aide de Hologic.

### 9.2 Suppression de patients


Les administrateurs de cas peuvent supprimer manuellement des patients avec leurs images associées de la liste de patients. En général, vous pouvez supprimer les patients ayant pour état de lecture « Interprété », « Interprété une fois », « Non interprété », ou « Ancien ». Les patients qui font partie d'une session ou les données patients qui sont à l'état Verrouillé ne peuvent pas être supprimés.

#### Pour supprimer des patients :

1. Dans la liste de patients, sélectionnez un ou plusieurs patients, puis sélectionnez le bouton **Supprimer les patients**. En réponse, SecurView :
  - Supprime tous les patients sélectionnés ayant pour état de lecture « Ancien ».
  - Affiche un message pour les autres patients sélectionnés, tel que :



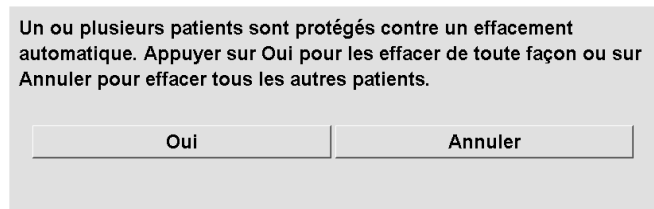2. Sélectionnez **OK** pour confirmer ou **Annuler**. SecurView affiche d'autres messages de confirmation pour les patients dans des états différents. Par exemple, si un patient est protégé contre la suppression automatique, SecurView affiche :



SecurView affiche un message similaire pour les patients ayant des annotations non encore envoyées (s'il y a une destination configurée).

SecurView ne permet pas la suppression :

- de patients ayant pour état de lecture « Changé » (de nouvelles images sont arrivées après que l'étude a été lue)
- de patients qui sont (par exemple, « Images supplémentaires requises » — consultez [Fermeture d'une étude](#) à la page 97)
- de données de patients en cours d'utilisation sur une autre station reliée au même Manager
- de patients qui font partie d'une session
- de patients dont les données sont en cours d'impression

Si vous supprimez un dossier patient fusionné, SecurView supprime le premier patient, le second patient, et tous les objets associés



---

**Remarque**

Si un patient comprenant des études non locales est supprimé, il est possible que le patient apparaisse à nouveau dans la liste de patients après la prochaine mise à jour du Study List Manager. Si un tel patient était un patient fusionné avant la suppression, il réapparaîtra en tant que patient non fusionné.

---



## Chapitre 10 Fichiers patients et ReportFlow

Ce chapitre décrit des procédures destinées à assister le manipulateur pour la gestion des fichiers DICOM et des fichiers ReportFlow.

### 10.1 Exportation de fichiers d'images actuellement affichées

Grâce à cette procédure, SecurView exporte les images apparaissant actuellement sur les écrans vers un dossier désigné par l'utilisateur. Par défaut, SecurView exporte les images vers F:\Exports. Veuillez noter les points suivants :

- Vous pouvez exporter les fichiers d'image TIFF en deux résolutions, selon ce qui est défini dans vos Préférences utilisateur (consultez [Préférences de l'onglet Outils et Recouvrements](#) à la page 134).
- SecurView crée pour chaque image un nom de fichier de la forme : [Nom du patient\_Date d'examen\_Vue\_UID instance SOP.ext], « ext » pouvant être « tif » ou « dcm », selon le type du fichier.
- Si un SR DAO DICOM de mammographie est disponible pour une des images affichées, SecurView l'exporte avec le nom du fichier [Nom du patient-DAO\_Date d'examen\_UID instance SOP.sr]. Vous ne pouvez pas exporter les fichiers SR DAO en format .tif.

Pour les images de tomosynthèse :

- SecurView exporte tous les coupes ou plans de coupe marqués. Si aucun n'est marqué, SecurView n'exporte que les images actuellement affichées (mammographie conventionnelle, image 2D de synthèse, image de faible énergie ou de soustraction CE2D, image de projection ou coupe ou plan de coupe reconstruit(e)), et non la totalité de la pile.
- SecurView identifie la coupe (ou plan de coupe) exporté(e) en ajoutant le numéro de la coupe (ou plan de coupe) à la fin du nom du fichier (par exemple, « \_42 » pour la coupe 42).
- Si vous définissez l'épaisseur du plan de coupe comme supérieure à l'épaisseur d'origine (par exemple, 1 ou 6), alors, pour les images TIFF uniquement, SecurView exporte la vue du plan de coupe, et non pas simplement la coupe du milieu, et ajoute le nombre de coupes au nom du fichier (par exemple, « \_42(7) » pour une vue de sept coupes).

### Pour exporter des images actuellement affichées vers un dossier de la station :

1. Affichez les images sur le poste de travail SecurView DX. Si vous exportez des images de tomosynthèse, consultez [Marquage des coupes ou plans de coupe reconstruits de tomosynthèse](#) à la page 124 pour obtenir des informations sur le marquage.
2. Appuyez sur la touche [E] (pour **Exporter**) du clavier.
3. Lorsque la boîte de dialogue s'ouvre, sélectionnez le format **DICOM** ou **Tiff**.



#### Important

N'utilisez pas de fichiers TIFF exportés à des fins de diagnostic. À la place, utilisez le format DICOM.

---

4. Sélectionnez **Export** et naviguez jusqu'au lecteur et au dossier dans lesquels vous voulez enregistrer les images. Lorsque vous sélectionnez **OK**, SecurView exporte les images actuellement affichées sur les deux écrans vers le dossier désigné. La boîte de dialogue se ferme automatiquement à la fin de l'export des fichiers.



#### Important

Ne sélectionnez pas **Annuler** avant la fin de l'exportation de tous les fichiers. Si vous sélectionnez **Annuler** trop tôt, SecurView peut exporter un jeu de données incomplet.

---

## 10.2 Exportation des fichiers DICOM

Utilisez cette procédure pour le transfert de fichiers DICOM Part 10 d'un ou de plusieurs patients de SecurView vers un support externe (lecteur USB ou autre support). S'il y a un Manager, il est préférable de l'utiliser quand c'est possible.

---



#### Remarque

Pour importer des images, consultez [Importation d'images DICOM](#) à la page 41.

---

1. Connectez-vous à SecurView et sélectionnez l'onglet **Administration**.
2. Dans la liste de patients, sélectionnez le ou les patients que vous voulez exporter.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le patient (ou le groupe de patients) mis en évidence puis sélectionnez **Export vers support**. Puis effectuez les opérations suivantes, au choix :
  - Insérez un disque sur le plateau du CD/DVD et refermez-le, ou
  - Sélectionnez **Parcourir...** Sous Poste de travail, recherchez et sélectionnez le lecteur USB ou DVD. Mettez en surbrillance le dossier de destination et sélectionnez **OK**. Si la boîte de dialogue Graver un disque de Windows s'affiche, sélectionnez **Annuler**.



#### Remarque

Si vous sélectionnez un mode écriture dans la boîte de dialogue Graver un disque de Windows et si vous sélectionnez **OK**, il est possible que le CD/DVD ne peut pas être utilisé pour graver des données provenant de SecurView.

---

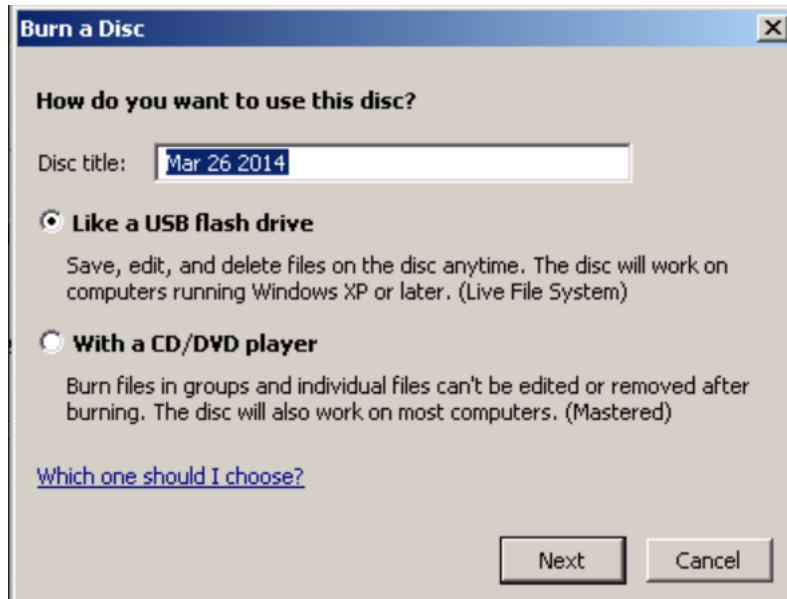


Figure 116 : Boîte de dialogue Graver un disque de Windows

4. Sélectionnez **Export** pour commencer à exporter tous les fichiers du ou des patients sélectionnés, ce qui peut prendre plusieurs minutes (les fichiers DICOM sont volumineux). À la destination choisie, SecurView crée un dossier FICHIERS et copie les fichiers DICOM dans le dossier. Lorsque l'opération est terminée, SecurView affiche le message « L'exportation a été effectuée avec succès ».
5. Si vous avez exporté les fichiers sur un disque, le plateau du CD/DVD s'ouvre automatiquement. Retirez le disque et donnez-lui une étiquette. Refermez le plateau.
6. Sélectionnez **Fermer**, puis **OK**.

### 10.3 Importer et exporter des ReportFlows

S'il y a un Manager, il est préférable de l'utiliser quand c'est possible.



#### Remarque

Pour l'importation, les ReportFlows doivent avoir été créés pour SecurView 6-x ou ultérieur. Vous ne pouvez pas importer des ReportFlows qui ont été créés pour SecurView 5-x ou antérieur.

---

#### 10.3.1 Importer des ReportFlows depuis un lecteur USB vers SecurView

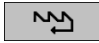
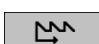


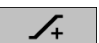
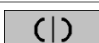
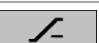
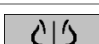

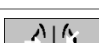







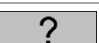





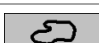

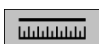


1. Insérez un lecteur USB dans un port USB de SecurView.
2. Connectez-vous à SecurView en tant que « admin ».
3. Sélectionnez l'onglet **Administration**, puis l'onglet **Maintenance**.
4. Sous Captures d'écran de présentation et ReportFlow, sélectionnez **Importer**. La boîte de dialogue Ouvrir s'affiche.
5. Dans la liste déroulante **Rechercher dans**, recherchez le disque **G:** et sélectionnez-le. (S'il n'y a pas de lecteur G, recherchez un lecteur amovible.)
6. Recherchez puis sélectionnez le ReportFlow ou le groupe de ReportFlow que vous voulez importer.
7. Sélectionnez **Ouvrir**. La boîte de dialogue Importation de ReportFlows s'ouvre.
8. Mettez en surbrillance le(s) ReportFlow(s) que vous voulez importer.
9. Sélectionnez **Importer**. La boîte de dialogue Import de ReportFlow se ferme et SecurView inscrit les ReportFlows dans sa base de données.

#### 10.3.2 Export de ReportFlow depuis SecurView vers un lecteur USB

1. Insérez un lecteur USB dans un port USB de SecurView.
2. Connectez-vous à SecurView en tant que « admin ».
3. Sélectionnez l'onglet **Administration**, puis l'onglet **Maintenance**.
4. Sous Captures d'écran de présentation et ReportFlow, sélectionnez **Export**. La boîte de dialogue Exportation de ReportFlows s'ouvre.
5. Mettez en surbrillance le(s) ReportFlow(s) à exporter, puis sélectionnez **Export** pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer sous.
6. Dans la liste déroulante **Rechercher dans**, sélectionnez le lecteur **G:**. (S'il n'y a pas de lecteur G, recherchez un lecteur amovible.)
7. Si vous le souhaitez, renommez le ReportFlow ou le groupe de ReportFlows que vous exportez sur votre lecteur USB en bas de la fenêtre où est écrit le nom du fichier. N'utilisez pas « / » comme partie de votre nom de ReportFlow.
8. Sélectionnez **Enregistrer**. La boîte de dialogue Enregistrer sous se ferme et SecurView inscrit les ReportFlows sur le lecteur USB, ce qui ne prend que quelques secondes.
9. Retirez le lecteur USB.









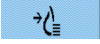


## Annexe A Raccourcis clavier

Outil	Touche	Fonction	Outil	Touche	Fonction
	[1] ou [Fin]	Flux - Précédent	—	[CTRL] et [t]	Basculer entre l'indication de couleur actuelle/précédente
	[4] ou [Flèche vers la gauche]	Flux - Suivant		[F9]	Fenêtre / Niveau
	[0] ou [Insér.]	Vue d'ensemble		[F3] ou [N]	Accroître facteur gamma
	[-]	CC actuel		[F1] ou [M]	Décroître facteur gamma
	[+]	MLO actuel		[F2]	Initialiser F/N
	[/]	DAO		[F8]	Remise à zéro
	[7], [D], [Accueil] ou [Flèche vers le haut]	Pleine résolution <b>gauche</b>		[Supprimer]	Patient précédent
	[9], [8], [F] ou [Page précédente]	Pleine résolution <b>droite</b>		[Entrée]	Patient suivant
	[Y]	Taille même		[Q]	Quitter
		Taille correcte		[?]	Aide
	[X]	Taille réelle	—	<b>[Retour arrière]</b>	Supprimer le marquage sélectionné
	[F5]	Adapter à la fenêtre d'affichage	—	[Z]	Annuler la suppression du marquage
	[R]	Synchroniser	—	[I]	Inverser toutes les images
	[F10]	Flèche	—	[E]	Exporter images
	[F11]	Ellipse	—	[*]	Afficher/Masquer la barre d'outils
	[F12]	À main levée		[J]	Alterner MG / Tomo
	[2] ou [Flèche vers le bas]	Mesure		[F6]	Démarrer/Arrêter le mode Ciné
	[A]	Loupe	—	<b>[Barre d'espace]</b>	Marquer images tomo

## Guide de l'utilisateur de la station SecurView DX-RT 11.0

### Annexe A: Raccourcis clavier

Outil	Touche	Fonction	Outil	Touche	Fonction
	[6] ou [Flèche vers la droite]	MammoNavigator		[W]	Repère DAO 3D suivant
	[3] ou [Page suivante]	Informations sur le patient		[S]	Repère DAO 3D précédent
	[G]	Liste de patients	—	[B]	Limites DAO 3D
	[5]	Fermer l'étude	—	[C]	Foyers DAO 3D
	[F7]	Zoom continu	—	[F4]	Afficher la position du curseur de la souris (si configuré)
		Réinitialiser le décompte Zoomer	—	[H]	Afficher le contenu complet de l'en-tête DICOM
	[V]	Smart Mapping			

## Annexe B Guide du manipulateur

Cette annexe fournit un aide-mémoire pour les procédures couramment utilisées par les manipulateurs d'électroradiologie médicale.

Pour cette procédure...	Consultez la section...
Pour ajouter un nouvel utilisateur dans SecurView	<a href="#">Gestion des profils des utilisateurs</a> à la page 160
Pour créer et gérer les sessions sur SecurView DX	<a href="#">Création de sessions</a> à la page 39
Pour envoyer et afficher des messages	<a href="#">Visualisation et envoi de messages</a> à la page 94
Pour fermer une étude sur SecurView RT	<a href="#">Fermeture d'une étude par un manipulateur</a> à la page 100
Pour créer et gérer des Captures d'écran de présentation	<a href="#">Création et modification de captures d'écran de présentation</a> à la page 144
Pour créer et gérer des ReportFlows	<a href="#">ReportFlows</a> à la page 152 <a href="#">Lier un ReportFlow à une procédure</a> à la page 154 Création de ReportFlows <a href="#">Préférences de ReportFlow</a> à la page 157
Pour imprimer des images de mammographie standard	<a href="#">Options d'impression</a> à la page 101
Pour imprimer des images de tomosynthèse	<a href="#">Impression des coupes et plans de coupe reconstruits de tomosynthèse</a> à la page 125
Pour exporter des images vers un support externe	<a href="#">Exportation de fichiers d'images actuellement affichées</a> à la page 197 <a href="#">Exportation des fichiers DICOM</a> à la page 198
Pour importer des images dans SecurView	<a href="#">Importation d'images DICOM</a> à la page 41
Pour importer ou exporter des ReportFlows	<a href="#">Importer et exporter des ReportFlows</a> à la page 200



## Index

### A

- Accroître facteur gamma • 77
- Active Directory • 160
  - configuration • 171
- aide pour l'affichage des manuels de l'utilisateur • 48
- Amélioration Avancée de l'Image (AIE) • 74
- Amélioration des images CLAHE • 83
- Annotations
  - descriptions • 92
  - flux de • 13, 14
  - GSPS de tierce partie • 93
  - visualisation • 93
- annulation • 35
- annulation de fusion • 35
- arrêt, système • 23
- auto-achèvement • 169
- auto-récupération • 169
- avertissements • 5

### B

- barre d'outils
  - boutons de navigation parmi les données de patients • 48
  - boutons de visualisation d'image • 70
- Biomarqueurs par imagerie de Hologic • 87
- bouton Nettoyer • 168

### C

- capture d'écran. Voir Capture d'écran MM • 182
- Captures d'écran de présentation
  - changement de nom • 149
  - copie et modification • 149
  - modification d'une icône • 150
- clavier • 49
- comptes utilisateur • 24, 160
- contraste, image • 77
- contrôle de qualité, affichages • 3
- cybersécurité • 7

### D

- DAO
  - Biomarqueurs par imagerie de Hologic • 87
  - Quantra • 87
- date, configuration du format de • 178
- Décroître facteur gamma • 77
- démarrage, système • 23
- déplacement dans une image • 54
- déverrouillage • 35
- déverrouillage des données d'un patient • 35
- DICOM
  - déclarations de conformité • 3
- disque dur, surveillance • 166

### E

- états de lecture
  - lors de l'examen du patient • 54
- études
  - affichage • 43
  - limite de durée pour en cours • 184
  - suppression • 167
- Évaluation de la densité mammaire Quantra • 87

### F

- Fenêtre/Niveau • 77
- Filtre d'annotations utilisateurs • 93

### H

- heure, configuration du format • 178

### I

- images
  - affichage • 47
  - agrandissement • 72
  - flux de • 13, 14
  - informations DICOM sur • 67
  - inversion • 72
  - mouvement panoramique • 54
  - MPE • 80
  - visualisation • 70
- Images de capture d'écran MM
  - configuration de l'établissement local pour • 182

- configuration de la source d'information sur l'établissement pour • 183
- Images de capture secondaire MG
  - configuration de l'établissement local pour • 182
  - configuration de la source d'information sur l'établissement pour • 183
- Images MPE • 80
- impression
  - personnalisation des recouvrements • 189

## J

- journalisation d'événement d'application • 173

## L

- listes de travail • 24
- Loupe • 72, 74
- Loupe inversée • 72
- luminosité, image • 77

## M

- Mammography Prior Enhancement Voir Images MPE • 80
- menu contextuel • 35
- Message image • 95
- Messages • 182
  - envoi de tous les messages • 95
  - envoi pour une seule image • 95
  - examinés par un manipulateur • 101
- Messages. Voir aussi Message image • 95
- mises en garde • 5
- Multistations • 14

## N

- nom et adresse de l'établissement • 182, 183
- noms de procédure, configuration • 184

## O

- Outil À main levée • 92
- Outil Ellipse • 92
- Outil Envoyer message image • 95
- Outil Envoyer tous les messages • 95
- Outil flèche • 92
- ouverture et fermeture de session • 24

## P

### PACS

- format de la date de l'étude pour une recherche • 176
- paramètres niveau système
  - activation des sessions • 165
  - auto-achèvement • 169
  - auto-récupération • 169
  - établissement local • 182
  - format et unités de date/heure • 178
  - limite de durée pour les études en cours • 184
  - nom et adresse de l'établissement • 183
  - saisie de la date de l'étude pour le PACS • 176
  - suppression d'études • 167
  - surveillance de l'espace disque • 166
- patients
  - navigation • 48
- Pixel Meter • 61
- plaintes concernant le produit • 8
- préférences utilisateur
  - configuration de la présentation de vue d'ensemble • 158
- présentation, SecurView • 1
- produits anti-virus • 7
- profils d'utilisateurs • 160
- programmes de formation • 3

## R

- recouvrements • 68
  - personnalisation • 187
  - personnalisation de MammoNavigator • 188
  - personnalisation pour affichage • 187
  - personnalisation pour image imprimée • 189
- Recouvrements des informations sur le patient • 68
- ReportFlows
  - relier à une procédure • 154
  - synchronisation avec • 106
  - utilisation • 53
  - visualisation • 141
- ReportFlowsReportFlows • 151
- reprise • 35
- Roaming intelligent • 57

## S

- SecurView DX • 1
  - Client • 14
  - Gestionnaire • 14
- SecurView RT • 1
- Sessions
  - activation • 165
  - sélection • 45
- SR DAO
  - commutation entre • 88
  - si affiché • 21
- Stations autonomes • 13, 18
- stations de travail
  - Autonome • 13, 18
  - division fonctionnelle Manager-Client • 21
  - Manager-Client • 14
  - présentation • 11
- Stations Manager-Client • 14
- Superpositions des champs DICOM 6000 • 82
- suppression automatique
  - configuration • 167
- suspendre et revoir • 35
- synchronisation • 35
- synchronisation avec application externe • 35, 105

## V

- verrouillage d'une étude
  - à propos de • 54
- visualisation des messages • 97
- VOI LUT, application • 78

# HOLOGIC®



**Hologic Inc.**  
36 Apple Ridge Road  
Danbury, CT 06810 USA  
1.800.447.1856  
www.hologic.com

**Australia /  
New Zealand**

**Hologic (Australia) Pty Ltd.**  
Suite 402, Level 3  
2 Lyon Park Road  
Macquarie Park NSW 2113  
Australia

**Asia Pacific**

**Hologic Hong Kong, Inc.**  
7th Floor, Biotech Centre 2  
No. 11 Science Park West Avenue  
Hong Kong Science Park  
Shatin, New Territories  
Hong Kong

EC REP

**Hologic BVBA**  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
België  
Tel: +32 2 711 46 80  
Fax: +32 2 725 20 87

CE  
0044

---

Référez-vous au site Web de l'entreprise pour connaître les différentes installations dans le monde.

[www.hologic.com](http://www.hologic.com)