

1.1 Instruções de aplicação da almofada para o peito MammoPad

As almofadas para o peito MammoPad® são produtos médicos descartáveis, para uma única utilização. São radiolúcidas e não têm látex. Utilize uma almofada nova para cada paciente. Siga este procedimento para se certificar de que a almofada é instalada adequadamente.

1. Abra o saco que contém as almofadas para o peito MammoPad, remova uma almofada e volte a selar o saco.



Nota

As almofadas devem ser armazenadas num saco de plástico selado, de forma a evitar contaminação, o que poderia afetar a qualidade da imagem.

2. Retire o papel protetor da almofada e elimine-o.
3. Aplique o lado adesivo na plataforma de imagem de acordo com as instruções da nota seguinte para o seu tipo de sistema. Não aplique a almofada sobre decalques pintados.



Nota

Selenia® e a maioria dos outros sistemas FFDM — Oriente o canto arredondado no lado inferior esquerdo do detetor. Coloque a almofada uniformemente desde a parte de trás para a frente da plataforma de imagem.

Sistemas Dimensions® e GE — Oriente o canto arredondado no lado inferior direito do detetor. Coloque a almofada uniformemente desde a parte da frente para a parte de trás da plataforma de imagem.

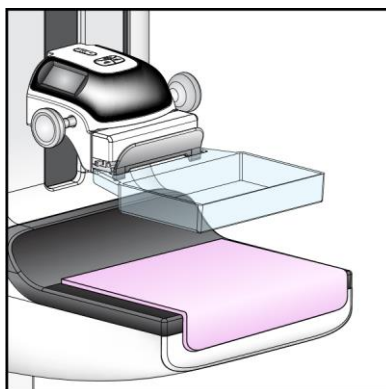


Figura 1: O MammoPad instalado numa plataforma de imagem

4. Siga a sua rotina normal de posicionamento para todas as vistas de exames de rastreio.
5. Quando o exame estiver completo, remova a almofada da plataforma de imagens e elimine-a.



Nota

Se a almofada tiver sido exposta a sangue ou fluidos corporais, siga o procedimento de eliminação de resíduos biológicos perigosos da sua instalação.

Para obter assistência com o produto MammoPad, contacte o suporte aos produtos através de 1-877-371-4372.

Representante autorizado na UE:

Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Bélgica

