

1.1 Gebrauchsanweisung für MammoPad-Brustkissen

MammoPad®-Brustkissen sind medizinische Einwegprodukte. Sie sind strahlendurchlässig und latexfrei. Verwenden Sie für jeden Patienten ein neues Kissen. Befolgen Sie die Anweisung, um sicherzustellen, dass das Kissen richtig befestigt ist.

1. Öffnen Sie den Beutel mit den MammoPad-Brustkissen, nehmen Sie ein Kissen heraus und verschließen Sie den Beutel wieder.



Hinweis

Die Kissen müssen in einem versiegelten Kunststoffbeutel gelagert werden, um Verunreinigungen zu vermeiden, die die Bildqualität beeinträchtigen könnten.

2. Ziehen Sie das Schutzpapier vom Kissen ab und entsorgen Sie es.
3. Bringen Sie die Klebeseite entsprechend den Anweisungen im folgenden Hinweis für Ihren Systemtyp auf der Bildplattform an. Bringen Sie das Kissen nicht auf bemalte Aufkleber an.



Hinweis

Selenia® und die meisten anderen FFDM-Systeme – Richten Sie die abgerundete Ecke an der unteren linken Seite des Detektors aus. Schieben Sie das Kissen von hinten nach vorne auf die Bildplattform.

Dimensions® und GE-Systeme – Richten Sie die abgerundete Ecke an der unteren rechten Seite des Detektors aus. Schieben Sie das Kissen von hinten nach vorne auf die Bildplattform.

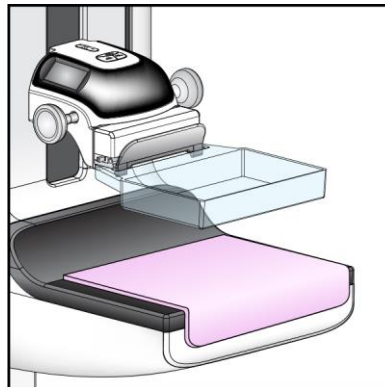


Abbildung 1: MammoPad auf einer Bildplattform befestigt

4. Nehmen Sie für alle Screening-Ansichten Ihre gewohnte Position ein.
5. Wenn die Untersuchung abgeschlossen ist, entfernen Sie das Kissen von der Bildplattform und entsorgen Sie es.



Hinweis

Wenn das Kissen mit Blut oder Körperflüssigkeiten in Berührung gekommen ist, befolgen Sie das für Ihre Einrichtung vorgesehene Verfahren zur Entsorgung von biologischem Risikomaterial.

Wenn Sie Hilfe mit dem MammoPad benötigen, wenden Sie sich an den Produktsupport unter 1-877-371-4372.

Autorisierte EU-Vertretung:

Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgien

