

## 1.1 Οδηγίες εφαρμογής μαξιλαριού μαστού MammoPad

Τα μαξιλάρια μαστού MammoPad® είναι ιατρικά προϊόντα μίας χρήσης. Είναι ακτινοδιαπερατά και δεν περιέχουν λάτεξ. Χρησιμοποιήστε καινούργιο επίθεμα για κάθε ασθενή. Ακολουθήστε αυτήν τη διαδικασία για να βεβαιωθείτε ότι το επίθεμα έχει τοποθετηθεί σωστά.

1. Ανοίξτε τον ασκό που περιέχει τα μαξιλάρια μαστού MammoPad, αφαιρέστε ένα επίθεμα και επανασφραγίστε τον ασκό.



### Σημείωση

Τα επίθεματα πρέπει να αποθηκεύονται σε σφραγισμένο πλαστικό ασκό για την αποφυγή τυχόν επιμόλυνσης που θα μπορούσε να επηρεάσει την ποιότητα της εικόνας.


2. Αποκολλήστε το χαρτί από το επίθεμα και πετάξτε το.
3. Εφαρμόστε την αυτοκόλλητη πλευρά στην πλατφόρμα απεικόνισης, σύμφωνα με τις οδηγίες της ακόλουθης σημείωσης για τον τύπο του συστήματος που διαθέτετε. Μην εφαρμόζετε το επίθεμα πάνω από βαμμένα αυτοκόλλητα.



### Σημείωση

Για συστήματα Selenia® και για τα περισσότερα άλλα συστήματα FFDM — Προσανατολίστε τη στρογγυλεμένη γωνία στην κάτω αριστερή πλευρά του ανιχνευτή. Εξομαλύνετε το επίθεμα από το πίσω προς το μπροστινό μέρος της πλατφόρμας απεικόνισης.

Για συστήματα Dimensions® και GE — Προσανατολίστε τη στρογγυλεμένη γωνία στην κάτω δεξιά πλευρά του ανιχνευτή. Εξομαλύνετε το επίθεμα από το μπροστινό προς το πίσω μέρος της πλατφόρμας απεικόνισης.

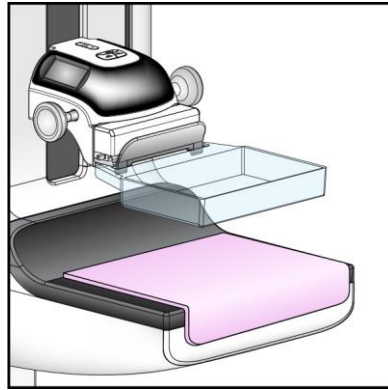

Εικόνα 1: Εγκατεστημένο MammoPad σε μια πλατφόρμα απεικόνισης

4. Ακολουθήστε τη συνήθη ρουτίνα τοποθέτησης για όλες τις λήψεις προσυμπτωματικού ελέγχου.
5. Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση, αφαιρέστε το επίθεμα από την πλατφόρμα απεικόνισης και απορρίψτε το.



#### **Σημείωση**

Εάν το επίθεμα εκτέθηκε σε αίμα ή σωματικά υγρά, ακολουθήστε τη διαδικασία απόρριψης βιολογικά επικίνδυνων υλικών του ιδρύματός σας.

Για βοήθεια σχετικά με το προϊόν MammoPad, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης προϊόντων στον αριθμό 1-877-371-4372.

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΕ:

Hologic BV  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Βέλγιο

