

## 1.1 Instructies voor toepassing van het MammoPad-borstkussen

MammoPad®-borstkussens zijn wegwerpbare medische producten voor eenmalig gebruik. Ze zijn radiolucent en bevatten geen latex. Gebruik voor elke patiënt een nieuwe pad. Volg deze procedure, zodat u zeker bent dat de pad juist is geplaatst.

1. Open de zak met MammoPad-borstkussens, haal er één pad uit en sluit de zak af.



### Opmerking

Pads dienen in een verzegelde plastic zak te worden bewaard om verontreiniging die invloed kan hebben op de beeldkwaliteit te voorkomen.


2. Trek de papieren achterkant van de pad en werp deze weg.
3. Plaats de plakkant volgens de instructies in de volgende opmerking naar gelang uw systeemtype op het beeldplatform. Plaats de pad niet op opgeschilderde stickers.



### Opmerking

Selenia® en de meeste andere FFDM-systemen: plaats de afgeronde hoek op de linker onderzijde van de detector. Strijk de pad vanaf de achterkant van het beeldplatform naar voren glad.

Dimensions® en GE-systemen: plaats de afgeronde hoek op de rechter onderzijde van de detector. Strijk de pad vanaf de voorkant van het beeldplatform naar achteren glad.

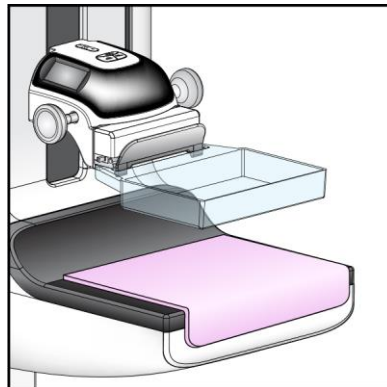

Afbeelding 1: MammoPad geplaatst op een beeldplatform

4. Volg uw normale positioneringsroutine voor alle controleweergaven.
5. Als het onderzoek voltooid is, verwijdert u de pad van het beeldplatform en voert deze af.



**Opmerking**

Als de pad aan bloed of lichaamsvloeistoffen blootgesteld is, volgt u de afvoerprocedure voor biologisch gevaarlijk materiaal van uw instelling.

---

Neem voor hulp met het MammoPad-product contact op met de productondersteuning op 1-877-371-4372.

Bevoegde EU-vertegenwoordiger:

Hologic BV  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
België

