

1.1 MammoPad-rintapehmusteen käyttöohjeet

MammoPad®-rintapehmusteet ovat kertakäyttöisiä sairaanhoitotuotteita. Ne ovat röntgenpositiivisia ja lateksittomia. Ota uusi tyyny jokaiselle potilaalle. Toimi seuraavasti, jotta pehmuste asettuu kunnolla.

1. Avaa MammoPad-rintapehmusteiden pussi, ota esiin yksi pehmuste ja sulje pussi uudelleen.



Huomautus

Pehmusteita on säilytettävä tiiviisti suljetussa muovipussissa, jotta vältetään kontaminoitumiselta, joka voisi vaikuttaa kuvanlaatuun.


2. Irrota pehmusteesta taustapaperi ja hävitä se.
3. Liimapuoli tulee kuvausalustalle seuraavan huomautuskohdan ohjeiden mukaisesti järjestelmän tyyppin mukaan. Älä aseta pehmustetta maalattujen merkkien päälle.



Huomautus

Selenia® ja useimmat muut FFDM-järjestelmät: kohdista pyörästetty kulma tunnistimen vasempaan alakulmaan. Tasoita pehmuste kuvausalustan takaosasta eteenpäin.

Dimensions® ja GE-järjestelmät: kohdista pyörästetty kulma tunnistimen oikeaan alakulmaan. Tasoita pehmuste kuvausalustan etuosasta taaksepäin.

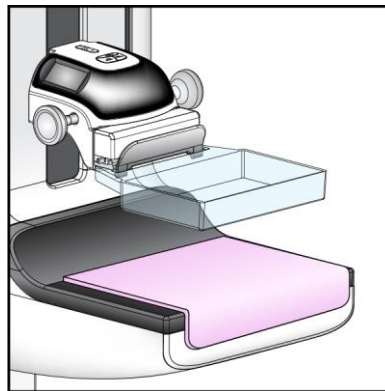

Kuva 1: MammoPad kuvausalustalla

4. Noudata normaalia asentorutiinia kaikkien seulontanäkymien suhteen.
5. Kun tutkimus on tehty, poista pehmuste kuvausalustalta ja hävitä se.



Huomautus

Jos pehmusteeseen osuu verta tai ruumiinnesteitä, noudata yksikkösi biovaarallisia materiaaleja koskevaa menettelytapaa.

Jos tarvitset apua MammoPad-tuotteen käyttämiseen, ota yhteyttä tuotetukeen numerossa 1-877-371-4372.

Valtuutettu edustaja Euroopan unionin alueella:

Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgia

