

1.1 Instruksjoner for bruk av MammoPad brystpute

MammoPad® brystputer er medisinske engangsprodukter til engangsbruk. De er gjennomtrengelige for elektromagnetisk stråling og lateksfrie. Bruk en ny pute for hver pasient. Følg denne prosedyren for å sikre at puten er riktig installert.

1. Åpne posen som inneholder MammoPad-brystputene, ta ut den ene puten og forsegl posen.



Merk

Putene må oppbevares i en forseglet plastpose for å forhindre forurensning som kan påvirke bildekvaliteten.


2. Ta av papirunderlaget fra puten og kast det.
3. Påfør limsiden på bildeplattformen i henhold til instruksjonene i følgende merknad for din type system. Ikke bruk puten over malte merker.



Merk

Selenia® og de fleste andre FFDM-systemer - Orienter det avrundede hjørnet nederst til venstre på detektoren. Glatt ut puten fra baksiden til fronten av bildeplattformen.

Dimensjoner® og GE-systemer - Orienter det avrundede hjørnet nederst til høyre på detektoren. Glatt ut puten fra forsiden til baksiden av bildeplattformen.

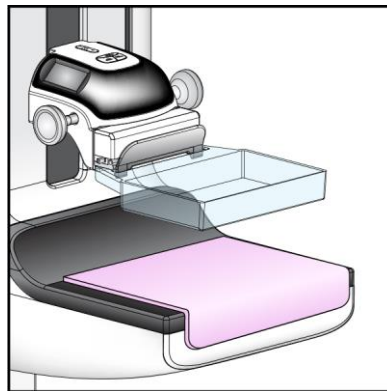

Figur 1: MammoPad installert på en bildeplattform

4. Følg din normale posisjonsrutine for alle visninger.
5. Fjern puten fra bildeplattformen og kast den når undersøkelsen er fullført.



Merk

Hvis puten ble utsatt for blod eller kroppsvæsker, følg fremgangsmåten for kassering av biologisk farlig materiale for ditt anlegg.

For å få hjelp med MammoPad-produkt, kontakt produktstøtte på 1-877-371-4372.

Autorisert EU-representant:

Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgia

