

1.1 MammoPad Brystpude – Anvendelsesvejledning

MammoPad®-brystpuder er medicinske engangsprodukter som skal kasseres efter brug. De er radiolucente og latexfri. Brug en ny pude til hver patient. Følg denne procedure for at sikre, at puden er korrekt installeret.

1. Åbn posen med MammoPad-brystpuden, tag en pude ud, og luk posen igen.



Bemærk

Puder skal opbevares i en forsejlet plastikpose for at undgå kontaminering, der kan påvirke billedkvaliteten.


2. Træk papiret af puden, og smid det ud.
3. Påfør den klæbende side på billeddannelsesplatformen i overensstemmelse med instruktionerne i den følgende note for din systemtype. Påfør ikke puden over malede decaler.



Bemærk

Selenia®- og de fleste andre FFDM-systemer – Anbring det afrundede hjørne nederst til venstre på detektoren. Stryg puden på fra bagsiden til forsiden af billeddannelsesplatformen.

Dimensions® og GF-systemer – Anbring det afrundede hjørne nederst til højre på detektoren. Stryg puden på fra forsiden til bagsiden af billeddannelsesplatformen.

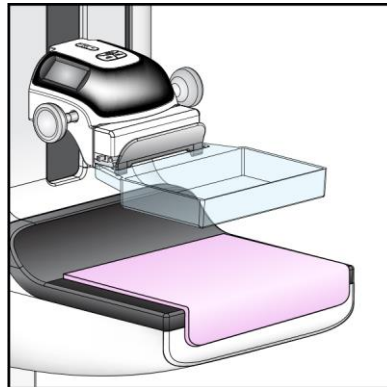

Figur 1: MammoPad installeret på en billeddannelsesplatform

4. Følg din normale rutine for positionering ved screeningsbilleder.
5. Når undersøgelsen er afsluttet, skal du fjerne puden fra billeddannelsesplatformen og kassere den.



Bemærk

Hvis puden har været i kontakt med blod eller kropsvæsker, skal du følge virksomhedens procedure for bortskaffelse af biofarlige materialer.

Hvis du har brug for hjælp til MammoPad-produktet, skal du kontakte produktsupport på 1-877-371-4372.

Autoriseret repræsentant i EU:

Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgien

