

1.1 Instruções de Aplicação da Almofada mamária MammoPad

As almofadas mamárias MammoPad® são produtos médicos descartáveis de uso único. Elas são radiolúcidas e livres de látex. Use uma almofada nova para cada paciente. Siga este procedimento para se certificar de que a almofada está devidamente instalada.

1. Abra o saco que contém as almofadas mamárias MammoPad, retire uma almofada e volte a selar o saco.

**Nota**

As almofadas devem ser guardadas num saco de plástico selado para evitar contaminações que possam afetar a qualidade da imagem.

2. Descole o suporte de papel da almofada e descarte-o.
3. Aplique o lado adesivo à plataforma de imagem de acordo com as instruções da nota seguinte para o seu tipo de sistema. Não aplique a almofada sobre decalques pintados.

**Nota**

Selenia® e a maioria dos outros sistemas FFDM - Oriente o canto arredondado no lado inferior esquerdo do detector. Alise a almofada da parte de trás para a frente da plataforma de imagem.

Dimensions® e sistemas GE - Oriente o canto arredondado no lado inferior direito do detector. Alise a almofada da frente para trás da plataforma de imagem.

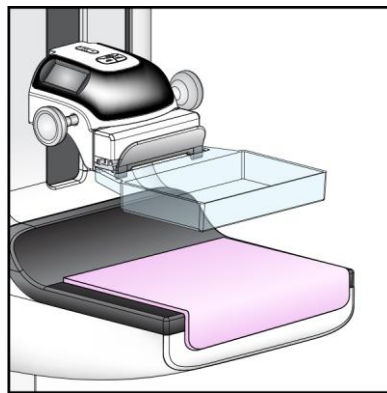


Figura 1: MammoPad Instalado em uma Plataforma de Imagem

4. Siga a sua rotina normal de posicionamento para todas as visualizações de rastreamento.
5. Quando o exame estiver concluído, remova a almofada da plataforma de imagem e descarte-a.



Nota

Se a almofada foi exposta a sangue ou fluidos corporais, siga o procedimento de eliminação de materiais de risco biológico para a sua instalação.

Para obter assistência com o produto MammoPad, entre em contato com o Suporte ao Produto pelo telefone 1-877-371-4372.

Representante autorizado na União Europeia:

Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Bélgica

