

## 1.1 Instrucciones de uso del cojín mamario MammoPad

Los cojines mamarios MammoPad® son productos médicos desechables de un solo uso. Son radiolúcidos y no contienen látex. Utilice una almohadilla nueva para cada paciente. Siga este procedimiento para asegurarse de que la almohadilla está bien instalada.

1. Abra la bolsa que contiene los cojines mamarios MammoPad, retire una almohadilla y vuelva a cerrar la bolsa.



---

### Nota

Las almohadillas deben guardarse en una bolsa de plástico sellada para evitar la contaminación que podría afectar a la calidad de la imagen.

---

2. Despegue el papel de la almohadilla y deséchelo.
3. Aplique la cara adhesiva a la plataforma de imágenes de acuerdo con las instrucciones de la siguiente nota para su tipo de sistema. No coloque la almohadilla sobre calcomanías pintadas.




---

### Nota

Sistemas Selenia® y la mayoría de los demás sistemas FFDM - Oriente la esquina redondeada hacia la parte inferior izquierda del detector. Extienda la almohadilla desde la parte trasera hasta la delantera de la plataforma de la imágenes.

Sistemas Dimensions® y GE - Oriente la esquina redondeada hacia la parte inferior derecha del detector. Extienda la almohadilla desde la parte delantera hasta la trasera de la plataforma de la imágenes.

---

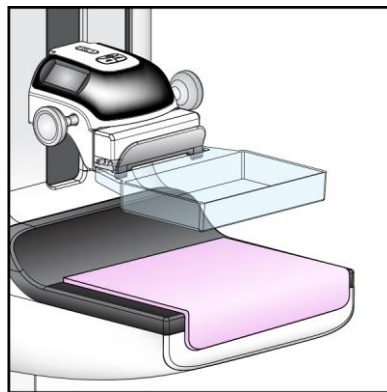

*Figura 1: MammoPad instalado en una plataforma de imágenes*

4. Siga su rutina de posicionamiento normal para todas las vistas de examen.
5. Una vez finalizado el examen, retire la almohadilla de la plataforma de imágenes y deséchela.



**Nota**

Si la almohadilla estuvo expuesta a sangre o fluidos corporales, siga el procedimiento de eliminación de materiales de riesgo biológico de su establecimiento.

---

Si necesita ayuda con el producto MammoPad, póngase en contacto con el servicio de Soporte del producto al 1-877-371-4372.

Representante en la UE autorizado:

Hologic BV  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Bélgica

