

1.1 Rinnapadja MammoPad kasutusjuhised

Rinnapadjad MammoPad® on ühekordselt kasutatavad meditsiinitooted. Need on röntgennegatiivsed ja lateksivabad. Kasutage iga patsiendi jaoks uut patja. Järgige seda protseduuri veendumaks, et padi on õigesti paigaldatud.

1. Avage kott, mis sisaldab rinnapatju MammoPad, eemaldage üks padi ja sulgege kott uuesti.



Märkus

Pildikvaliteeti mõjutada võiva saastumise vältimiseks tuleb patju hoida suletud kilekotis.


2. Eemaldage padjalt paber ja visake see minema.
3. Kandke kleepuv külg pildiplatvormile vastavalt teie süsteemi tüübi jaoks järgmises märkuses esitatud juhiste. Ärge kandke patja värvitud märgistele.



Märkus

Selenia® ja enamik teisi FFDM-süsteeme – joondage ümardatud nurk detektori vasaku alumise küljega. Siluge patja pildiplatvormi tagaosast ettepoole.

Dimensions® ja GE süsteemid – joondage ümardatud nurk detektori parema alumise küljega. Siluge patja pildiplatvormi eesosast tahapoole.

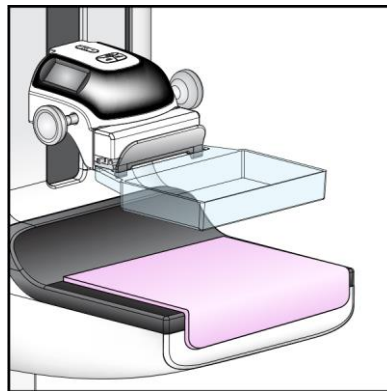

Joonis 1: Pildiplatvormile paigaldatud MammoPad

4. Järgige kõigi kontrolluuringu vaadete jaoks tavapärasest positsioneerimisrutiini.
5. Uuringu lõppemisel eemaldage padi pildiplatvormilt ja visake see minema.



Märkus

Kui padi puutus kokku vere või kehavedelikega, järgige oma ettevõtte bioloogiliselt ohtlike materjalide kõrvaldamise protseduuri.

Toote MammoPad juures abi saamiseks pöörduge tootetoepoole telefonil 1-877-371-4372.

Volitatud esindaja EL-is:

Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgia

