

1.1 Návod na použitie prsníkovej podložky MammoPad

Prsníkové podložky MammoPad® sú zdravotnícke výrobky na jedno použitie. Sú priepustné pre röntgenové žiarenie a neobsahujú latex. Pri každej pacientke použite novú podložku. Dodržaním tohto postupu zaistíte správne umiestnenie podložky.

1. Otvorte vrečko s prsníkovými podložkami MammoPad, vyberte jednu podložku a vrečko znovu uzavrite.

**Poznámka**


Podložky sa musia skladovať v uzavretom plastovom vrečku, aby sa predišlo kontaminácii, ktorá by mohla ovplyvniť kvalitu snímok.

2. Z podložky odlepte spodnú papierovú vrstvu a zlikvidujte ju.
3. Priložte lepiacu stranu na snímkovaciu platformu podľa pokynov pre váš typ systému v nasledujúcej poznámke. Podložku nelepte na potlač.

**Poznámka**

Selenia® a väčšina ostatných systémov FFDM: zaoblený roh umiestnite k ľavej dolnej časti detektora. Podložku uhladzte na snímkovacej platforme od zadného okraja smerom dopredu.

Dimensions® a systémy GE: zaoblený roh umiestnite k pravej dolnej časti detektora. Podložku uhladzte na snímkovacej platforme od predného okraja smerom dozadu.

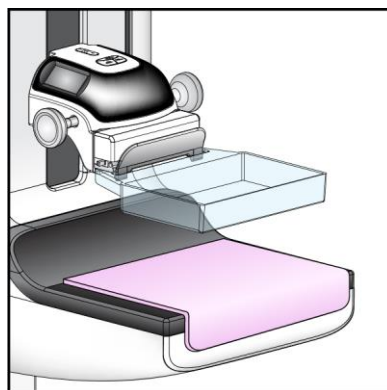

Obrázok 1: Podložka MammoPad umiestnená na snímkovacej platforme

4. Pri všetkých skriningových zobrazeniach postupujte podľa bežného postupu polohovania.
5. Po skončení vyšetrenia odstráňte podložku zo snímkovacej platformy a zlikvidujte ju.

**Poznámka**

Ak bola podložka vystavená krvi alebo telesným tekutinám, postupujte podľa postupu likvidácie biologicky nebezpečných materiálov zavedeného vo vašom zariadení.

Ak potrebujete pomoc v súvislosti s výrobkom MammoPad, kontaktujte produktovú podporu na čísle 1-877-371-4372.

Autorizovaný zástupca pre EÚ:

Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgicko

