

1.1 Instrukcja stosowania podkładki pod piersi MammoPad

Podkładki pod piersi MammoPad® są produktami medycznymi jednorazowego użytku. Są przepuszczalne dla promieniowania i nie zawierają lateksu. U każdej pacjentki należy używać świeżej podkładki. Aby mieć pewność, że podkładka została założona prawidłowo, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

1. Otworzyć torebkę z podkładkami pod piersi MammoPad, wyjąć jedną podkładkę, po czym zamknąć torebkę.



Uwaga

Podkładki wymagają przechowywania w szczelnie zamkniętej plastikowej torebce, aby zapobiec zanieczyszczeniu, które mogłoby wpłynąć na jakość obrazu.


2. Papierową podklejkę usunąć z podkładki i wyrzucić.
3. Podkładkę przyłożyć stroną samoprzylepną do platformy obrazowania, postępując zgodnie z instrukcją zawartą w poniższej wskazówce dla danego typu systemu. Podkładki nie należy umieszczać na malowanych naklejkach.



Uwaga

Selenia® i większość innych systemów FFDM — zaokrąglony róg powinien znaleźć się w lewym dolnym rogu detektora. Wygładzić podkładkę w kierunku od tyłu do przodu platformy obrazowania.

Systemy Dimensions® i GE — zaokrąglony róg powinien znaleźć się w prawym dolnym rogu detektora. Wygładzić podkładkę w kierunku od przodu do tyłu platformy obrazowania.

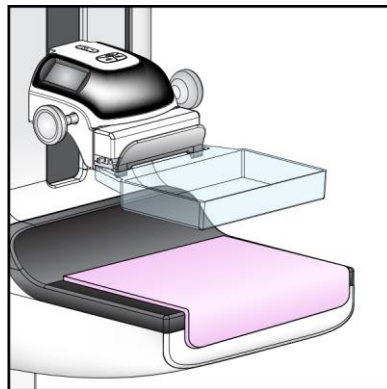

Rycina 1: Podkładka MammoPad nałożona na platformę obrazowania

4. Podczas wykonywania wszystkich zdjęć przesiewowych należy postępować zgodnie ze zwykłą procedurą ustawiania pacjentki.
5. Po zakończeniu badania podkładkę należy zdjąć z platformy obrazowania i wyrzucić.



Uwaga

Jeżeli podkładka była narażona na kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi, należy postępować zgodnie z procedurą usuwania materiałów stwarzających zagrożenie biologiczne, która obowiązuje w danej placówce.

W celu uzyskania pomocy dotyczącej produktu MammoPad należy skontaktować się z działem wsparcia dla produktów pod numerem 1-877-371-4372.

Upoważniony przedstawiciel w UE:

Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgia

