

Aptima® Multitest Swab Specimen Collection Kit -näytteenottosarjan käyttöohjeet potilaan ottamia näytteitä varten

ITSE OTETTUJA NÄYTTEITÄ KOSKEVAT POTILASTIEDOT

- Itse otettu vanupuikkonäyte on yksi tapa testata sukupuoliteitse tarttuvat infektiot. Muita vaihtoehtoja on saatavissa. Jos sinulla on kysyttävää itse otetusta vanupuikkonäytteestä, muista näytteenottotavoista tai sukupuoliteitse tarttuvista infektioista, ota yhteys terveydenhuoltohenkilöstöön.
- Näytteen ottaminen itse on mahdollista kliinisessä ympäristössä, jos suostut tekemään sen. Terveydenhuoltohenkilöstöltä on saatavissa ohjeita näytteen omatoimista ottamista varten.
- Lue huolella edellä annetut vanupuikkonäytteen omatoimisen ottamisen ohjeet. Jos pystyt mielestäsi hoitamaan näytteenoton itse ja haluat käyttää omatoimista näytteenottomenetelmää sukupuoliteitse tarttuvien infektioiden testaamiseen, ilmoita siitä terveydenhuoltohenkilöstölle.
- **Älä vie tätä näytteenottosarjaa tai itse ottamaasi näytettä klinikan ulkopuolelle.**
- Eräät itse kerätyt näytetyypit eivät ole käytettävissä kaikkien määritysten kanssa. Asianmukaiset näytetyypit on kuvattu asianmukaisen määrityksen pakkausselosteessa.

KAIKKIA NÄYTTEENOTTOMENETELMIÄ KOSKEVAT YLEISOHJEET

Analyyysien tulokset ovat luotettavia vain, jos noudatat huolellisesti ohjeita. Jos sinulla on jotain kysyttävää jostain menetelmästä, kysy lisätietoja terveydenhuoltohenkilöstöltä.

1. Pese kätesi ennen kuin aloitat.
2. Sinun on riisuuduttava tarvittaessa tutkimus- tai taukokuoneessa omassa rauhassa. Sinun on asetettava itsesi mukavaan asentoon, jotta pysyt tasapainossa näytteenoton aikana.
3. Avaa tarvikesarjan paketti. Ota vanupuikko ja putki pois paketista. Aseta putki sivuun, ennen kuin aloitat alla olevat toimenpiteet terveydenhuoltohenkilöstön pyytämien näytteiden ottoa varten.

VAROITUS: Jos putken sisältöä vuotaa ihollesi, pese iho saippuvedellä. Jos putken sisältöä roiskuu silmiisi, huuhtelee silmäsi heti vedellä. Ilmoita terveydenhuoltohenkilöstölle, jos roiskekohta alkaa ärsyttää. Jos putken sisältöä pääsee vuotamaan, pyydä uusi Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit -näytteenottosarja.

Ei sisäiseen käyttöön.

VAGINAN VANUPUIKKONÄYTTEEN OTTAMINEN

1. **Ennen jatkamista lue potilastiedot ja yleisohjeet yltä.**
2. Avaa vanupuikkopaketti auki osittain kaaviossa 1 esitetyllä tavalla. Ota vanupuikko pois.
Älä koske pehmeään kärkeen tai aseta vanupuikkoa alas.
Jos kosket pehmeään kärkeen, lasket vanupuikon alas tai pudotat sen, pyydä uusi Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit -näytteenottosarja.
3. Pidä vanupuikkoa kädessäsi kaaviossa 2 esitetyllä tavalla asettamalla peukalosi ja etusormesi vanupuikon varren keskelle peittäen murtoviivan (musta viiva).
Älä pidä kiinni vanupuikon varresta murtoviivan (musta viiva) alapuolelta.
4. Aseta vanupuikko varovasti vaginaasi noin 5 cm vaginan aukon sisäpuolelle (kuten kaaviossa 3) ja kääntele vanupuikkoa varovasti 10–30 sekunnin ajan. Varmista, että vanupuikko koskee vaginan seinämää niin, että vanupuikko imee sisäänsä kosteutta, ja vedä sen jälkeen vanupuikko ulos koskematta ihoon.
5. Pidä vanupuikosta kiinni samalla kädellä ja irrota putkesta korkki kaaviossa 4 esitetyllä tavalla.
Älä läikytä putken sisältöä. Jos putken sisältöä pääsee läikkymään, pyydä uusi Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit -näytteenottosarja.
6. Aseta vanupuikko heti siirtoputkeen niin, että murtoviiva (musta viiva) on putken yläosassa (katso kaavio 5).
7. Katkaise vanupuikon varsi katkoviivan (musta viiva) kohdalta putken kylkeä vasten (katso kaavio 6).
8. Heitä vanupuikon varren yläosa pois kaaviossa 7 esitetyllä tavalla.
9. Kiristä korkki tiukasti putken päälle kaaviossa 8 esitetyllä tavalla. Palauta putki terveydenhuoltohenkilöstön neuvomalla tavalla.

Tärkeää huomioitavaa


- JOS OLET RASKAANA, ILMOITA ASIESTA TERVEYDENHUOLTOHENKILÖSTÖLLE.
- Kerro terveydenhuoltohenkilöstölle ennen vaginan vanupuikkonäytteen ottamista, jos sinulla on ollut
 - äskettäin lantiokipua
 - kipua sukupuoliyhdyntään yhteydessä
 - epätavallista vaginan hajua tai vuotoa.

Nämä oireet voivat johtua lantion tulehdussairaudesta. Lantion tulehdussairauden mahdollisimman nopea diagnosointi ja hoito auttavat estämään lantion tulehdussairauteen liittyvän hedelmättömyyden ja kohdunulkoisen raskauden.


PENISAUKON VANUPUIKKONÄYTTEEN OTTAMINEN

1. **Ennen jatkamista lue potilastiedot ja yleisohjeet yltä.**
2. Avaa vanupuikkopaketti auki osittain kaaviossa 1 esitetyllä tavalla. Ota vanupuikko pois.
Älä koske pehmeään kärkeen tai aseta vanupuikkoa alas.
Jos kosket pehmeään kärkeen, lasket vanupuikon alas tai pudotat sen, pyydä uusi Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit -näytteenottosarja.
3. Pidä vanupuikkoa kädessäsi kaaviossa 2 esitetyllä tavalla asettamalla peukalosi ja etusormesi vanupuikon varren keskelle peittäen murtoviivan (musta viiva).
Älä pidä kiinni vanupuikon varresta murtoviivan (musta viiva) alapuolelta.
4. Tutustu kaavioon 3, jos sinulle on tehty ympärileikkaus (ei esinahkaa), tai kaavioon 4, jos sinulle ei ole tehty ympärileikkausta. Ympärileikkaamattomien miesten on rullattava esinahkaa alaspäin ennen näytteenoton aloittamista. Pidä peniksestä kiinni vapaalla kädelläsi (kädellä, jossa ei ole vanupuikkoa). Käytä toista kättäsi (jossa on vanupuikko) ja kääntele vanupuikkoa aivan peniksen kärjen kohdalla tai ulkopuolella peniksen aukkoa, josta virtsa tulee.
Muista vierittää vanupuikko kokonaan aukon ympäri, jotta saat mahdollisimman hyvän näytteen. Vanupuikkoa ei tarvitse laittaa peniksen aukon sisään.
5. Pidä vanupuikosta kiinni samalla kädellä ja irrota putkesta korkki kaaviossa 5 esitetyllä tavalla.
Älä läikytä putken sisältöä. Jos putken sisältöä pääsee läikkymään, pyydä uusi Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit -näytteenottosarja.
6. Aseta vanupuikko heti siirtoputkeen niin, että murtoviiva (musta viiva) on putken yläosassa (katso kaavio 6).
7. Katkaise vanupuikon varsi murtoviivan (musta viiva) kohdalta putken kylkeä vasten (katso kaavio 7).
8. Heitä vanupuikon varren yläosa pois kaaviossa 8 esitetyllä tavalla.
9. Kiristä korkki tiukasti putken päälle kaaviossa 9 esitetyllä tavalla. Palauta putki terveydenhuoltohenkilöstön neuvomalla tavalla.

Vaginan vanupuikkonäytteen ottaminen

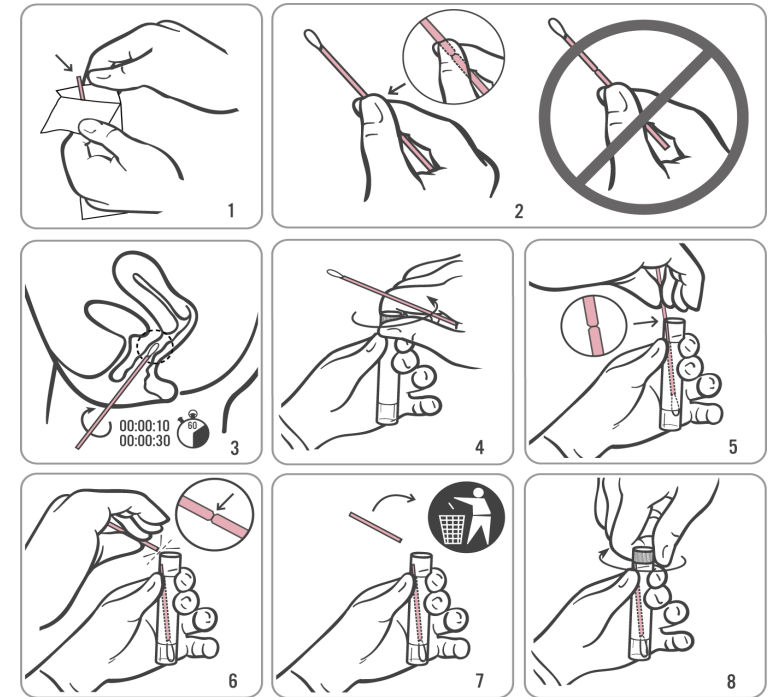

Penisaukon vanupuikkonäytteen ottaminen

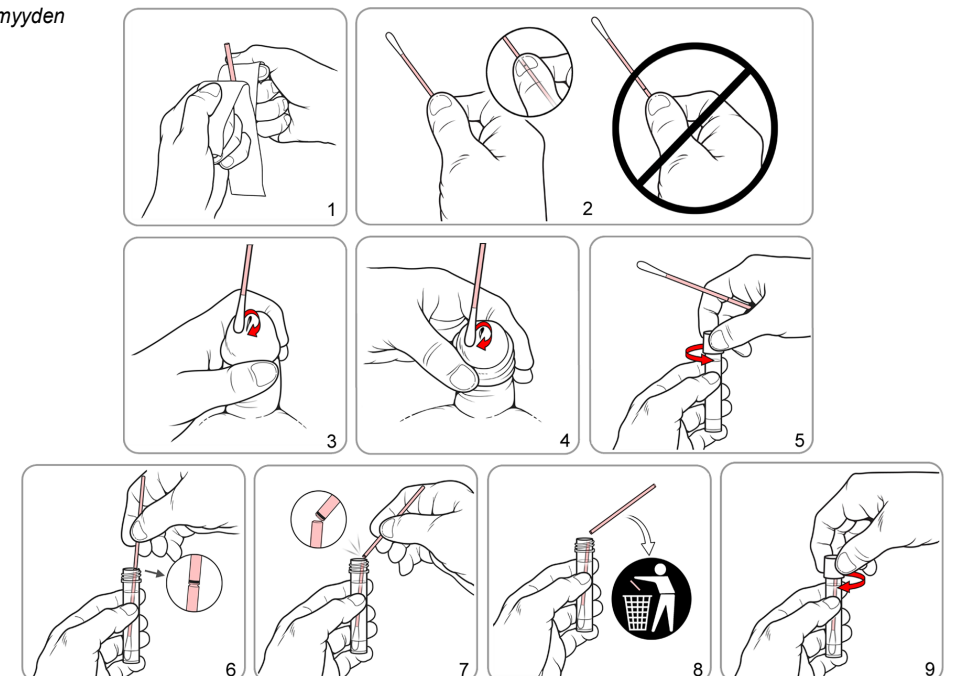

Aptima® Multitest Swab Specimen Collection Kit -näytteenottosarjan käyttöohjeet potilaan ottamia näytteitä varten

ITSE OTETTUJA NÄYTTEITÄ KOSKEVAT POTILASTIEDOT

- Itse otettu vanupuikkonäyte on yksi tapa testata sukupuoliteitse tarttuvat infektiot. Muita vaihtoehtoja on saatavissa. Jos sinulla on kysyttävää itse otetusta vanupuikkonäytteestä, muista näytteenottotavoista tai sukupuoliteitse tarttuvista infektioista, ota yhteys terveydenhuoltohenkilöstöön.
- Näytteen ottaminen itse on mahdollista kliinisessä ympäristössä, jos suostut tekemään sen. Terveydenhuoltohenkilöstöltä on saatavissa ohjeita näytteen omatoimista ottamista varten.
- Lue huolella edellä annetut vanupuikkonäytteen omatoimisen ottamisen ohjeet. Jos pystyt mielestäsi hoitamaan näytteenoton itse ja haluat käyttää omatoimista näytteenottomenetelmää sukupuoliteitse tarttuvien infektioiden testaamiseen, ilmoita siitä terveydenhuoltohenkilöstölle.
- **Älä vie tätä näytteenottosarjaa tai itse ottamaasi näytettä klinikan ulkopuolelle.**
- Eräät itse kerätyt näytetyypit eivät ole käytettävissä tiettyjen määritysten kanssa. Asianmukaiset näytetyypit on kuvattu asianmukaisen määrityksen pakkauselosteessa.

KAIKKIA NÄYTTEENOTTOMENETELMIÄ KOSKEVAT YLEISOHJEET


Analysien tulokset ovat luotettavia vain, jos noudatat huolellisesti ohjeita. Jos sinulla on jotain kysyttävää jostain menetelmästä, kysy lisätietoja terveydenhuoltohenkilöstöltä.

1. Pese kätesi ennen kuin aloitat.
2. Sinun on riisuuduttava tarvittaessa tutkimushuoneessa tai saniteettitiloissa omassa rauhassa. Sinun on asetettava itsesi mukavaan asentoon, jotta pysyt tasapainossa näytteenoton aikana.
3. Avaa tarvikesarjan paketti. Ota vanupuikko ja putki pois paketista. Aseta putki sivuun ennen alla olevien vaiheittaisten toimenpiteiden aloittamista.


VAROITUS: Jos putken sisältöä läikkyy ihollesi milloinkaan, pese iho saippuavedellä. Jos putken sisältöä roiskuu silmiisi, huuhtelee silmäsi heti vedellä. Ilmoita terveydenhuoltohenkilöstölle, jos roiskekohta alkaa ärsyttää. Jos putken sisältöä pääsee läikkymään, pyydä uusi Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit -näytteenottosarja. Älä nauti sisältöä sisäisesti.

PERÄAUKON VANUUIKKONÄYTTEEN OTTAMINEN

1. **Ennen jatkamista lue potilastiedot ja yleisohjeet yltä.**
2. Avaa vanupuikkopaketti auki osittain kaaviossa 1 esitetyllä tavalla. Ota vanupuikko pois.
Älä koske pehmeään kärkeen tai aseta vanupuikkoa alas.
Jos kosket pehmeään kärkeen, lasket vanupuikon alas tai pudotat sen, pyydä uusi Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit -näytteenottosarja.
3. Pidä vanupuikkoa kädessäsi kaavion 2 mukaisesti asettamalla peukalosi ja etusormesi vanupuikon varren keskelle niin, että murtoviiva peittyi. Älä pidä kiinni vanupuikon varresta murtoviivan alapuolelta.
4. Aseta vanupuikko varovasti peräaukkoon noin 3–5 cm peräaukon reunan sisäpuolelle (peräaukon sisään) ja **kierrä vanupuikkoa varovasti myötäpäivään 5–10 sekunnin ajan** kaaviossa 3 esitetyllä tavalla. Ota vanupuikko pois koskematta ihoosi.
5. Pidä vanupuikosta kiinni samalla kädellä ja irrota putkesta korkki kaaviossa 4 esitetyllä tavalla. Älä läikytä putken sisältöä.
Jos putken sisältöä pääsee läikkymään, käytä uutta Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit -näytteenottosarjaa.
6. Aseta vanupuikko heti siirtoputkeen niin, että murtoviiva on putken yläosassa (katso kaavio 5).
7. Katkaise vanupuikon varsi murtoviivan kohdalta putken kylkeä vasten (katso kaavio 6).
8. Heitä vanupuikon varren yläosa pois kaaviossa 7 esitetyllä tavalla.
9. Kiristä korkki tiukasti putken päälle kaaviossa 8 esitetyllä tavalla. Palauta putki terveydenhuoltohenkilöstön neuvomalla tavalla.

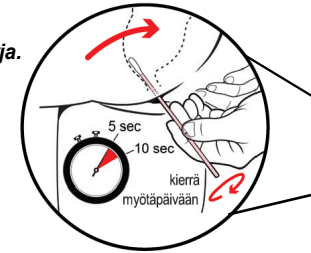


Peräaukon vanupuikkonäytteen ottaminen

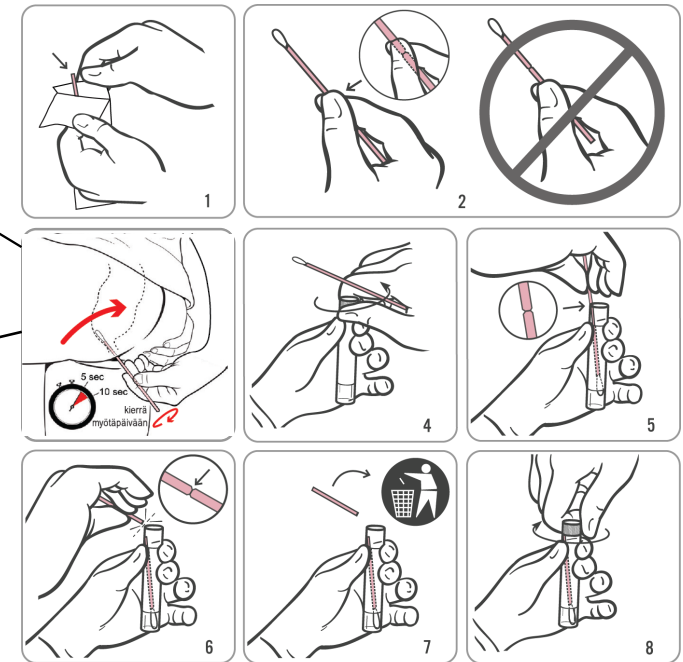

KURKUN VANUUIKKONÄYTTEEN OTTAMINEN

1. **Ennen jatkamista lue potilastiedot ja yleisohjeet yltä.**
2. Avaa vanupuikkopaketti auki osittain kaaviossa 1 esitetyllä tavalla. Ota vanupuikko pois.
Älä koske pehmeään kärkeen tai aseta vanupuikkoa alas.
Jos kosket pehmeään kärkeen, lasket vanupuikon alas tai pudotat sen, pyydä uusi Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit -näytteenottosarja.
3. Pidä vanupuikkoa kädessäsi kaavion 2 mukaisesti asettamalla peukalosi ja etusormesi vanupuikon varren keskelle niin, että murtoviiva peittyi. Älä pidä kiinni vanupuikon varresta murtoviivan alapuolelta.
4. Aseta vanupuikko varovasti suuhusi kaaviossa 3 esitetyllä tavalla ja varmista, että se koskee molemmin puolin kitarisoihin (jotka ovat suun kummallakin sivulla, ellei kitarisoja ole poistettu) ja nielun takaseinään ja ota sen jälkeen vanupuikko ulos koskematta poskien sisäpintaan tai kieleen.
5. Pidä vanupuikosta kiinni samalla kädellä ja irrota putkesta korkki kaaviossa 4 esitetyllä tavalla. Älä läikytä putken sisältöä.
Jos putken sisältöä pääsee läikkymään, käytä uutta Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit -näytteenottosarjaa.
6. Aseta vanupuikko heti siirtoputkeen niin, että murtoviiva on putken yläosassa (katso kaavio 5).
7. Katkaise vanupuikon varsi murtoviivan kohdalta putken kylkeä vasten (katso kaavio 6).
8. Heitä vanupuikon varren yläosa pois kaaviossa 7 esitetyllä tavalla.
9. Kiristä korkki tiukasti putken päälle kaaviossa 8 esitetyllä tavalla. Palauta putki terveydenhuoltohenkilöstön neuvomalla tavalla.

Kurkun vanupuikkonäytteen ottaminen

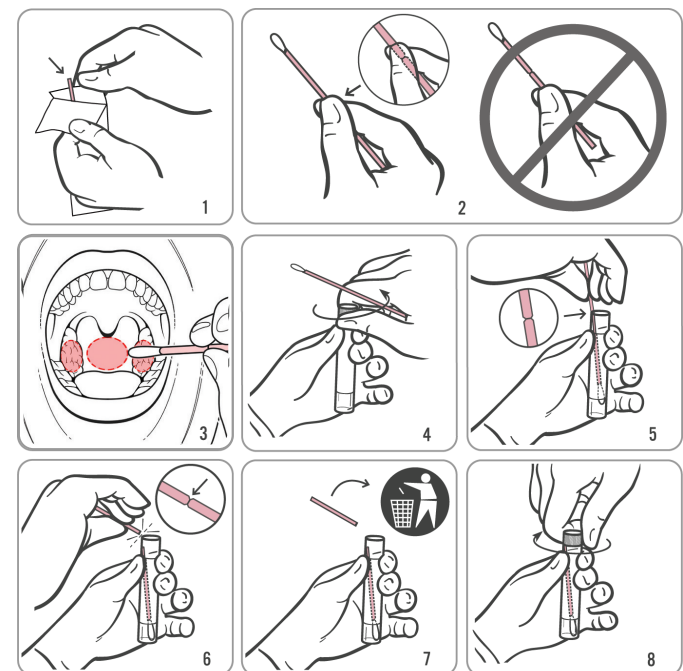

Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA



Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Maakohtaiset teknisen tuen ja asiakaspalvelun sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot löydät osoitteesta www.hologic.com/support.

Hologic, The Science of Sure, Aptima ja niihin liittyvät logot ovat Hologic Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Tämä tuote voi olla suojattu yhdellä tai useammalla sivulla www.hologic.com/patents luetelluista Yhdysvaltojen patenteista.

©2017-2021 Hologic, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
AW-14334-1701 Rev. 007
2021-02