

## ThinPrep™ CytoLyt™-oplossing

## Gebruiksaanwijzing

**BEOOGD GEBRUIK**

ThinPrep™ CytoLyt™-oplossing is een gebufferde celspoeling op methanolbasis, bestemd voor het lyseren van rode bloedcellen, de preventie van eiwitprecipitatie, het oplossen van slijm en het in stand houden van de morfologische kenmerken van algemeen-cytologische celmonsters voorafgaand aan preparatie van objectglasjes met een ThinPrep-processor. Voor professioneel gebruik.

**SAMENVATTING EN UITLEG**

CytoLyt-oplossing is bestemd voor gebruik met de ThinPrep™-processor, een apparaat om celpreparaten op objectglasjes te maken voor microscopisch onderzoek. CytoLyt-oplossing maakt transport en conservering van cellen mogelijk bij temperaturen van 15 °C tot 30 °C en voor de duur van maximaal acht dagen.

**UITGANGSPUNTEN VAN DE PROCEDURE**

CytoLyt-oplossing is een medium dat gebruikt wordt voor het verzamelen en lyseren van rode bloedcellen. Bij gebruik met monsters die met een ThinPrep-processor zijn verwerkt, is het mogelijk cellen op een objectglasje over te brengen, waarbij een dun, uniform laagje cellen wordt gevormd dat geschikt is voor cytologisch onderzoek.

**SAMENSTELLING**

Gebufferde conserveringsoplossing op methanolbasis. CAS 67-56-1

**WAARSCHUWINGEN**

**Gevaar.** Brandbaar. Bevat methanol.

H302. Schadelijk bij opname door de mond.

H312. Schadelijk bij contact met de huid.

H332. Schadelijk bij inademing.

H370. Veroorzaakt schade aan organen.

H226. Ontvlambare vloeistof en damp.

Te gebruiken voor in-vitrodiagnostiek. Zorg bij gebruik van dit product voor voldoende ventilatie. Niet bestemd voor uitwendig of inwendig gebruik bij mensen of dieren. De toxiciteit kan niet worden opgeheven.

**VOORZORGSMAATREGELEN**

P210. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken.

P260. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P280. Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P301 + P310. BIJ INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een dokter/arts raadplegen.

# ThinPrep™ CytoLyt™-oplossing

P305 + P351 + P338. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijven spoelen.

P302 + P352. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.

P308 + P311. INDIEN blootgesteld of bezorgd: Een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen

P370 + P378. In geval van brand: Droog natriumcarbonaat gebruiken om te blussen.

P403 + P233. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

P501. Verwijder de inhoud/verpakking in overeenstemming met de plaatselijke/regionale/nationale/internationale regelgeving.

Was de handen grondig nadat met dit product is gewerkt. Gebruik het product niet indien de oorspronkelijke verpakking beschadigd is.

Zorg dat een flacon CytoLyt-oplossing waarin zich cellen bevinden, tijdens het vervoer stevig is afgesloten. Breng de markering op het dopje op één lijn met de markering op de cup of het buisje, om lekkage te voorkomen

Zoals voor alle laboratoriumprocedures geldt, moeten de algemeen geldende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen.

## **VOORBEHANDELING**

Reconstitutie, mengen of verdunnen is niet nodig.

## **BEWARING**

Bewaar CytoLyt-oplossing zonder cytologische monsters bij 15 °C tot 30 °C. Gebruik CytoLyt-oplossing niet na het verstrijken van de uiterste gebruiksdatum die op de container is afgedrukt. Sluit de fles van 946 ml na elk gebruik.

## **VERSCIJNINGSVORM EN MATE VAN ZUIVERHEID**

Heldere, niet-steriele oplossing.

## **MONSTERAFNAMES EN -PREPARATIE**

Neem niet-gynaecologische monsters volgens gangbare methoden af en raadpleeg voor preparatie-instructies de gebruikershandleiding van de ThinPrep-processor. Noteer noodzakelijke informatie over de patiënt in de daarvoor voorziene ruimte. (Zie afbeelding.)

## **OPSLAG EN HANTERING**


Cellen blijven in CytoLyt-oplossing maximaal acht dagen intact, bij temperaturen tussen 15 °C en 30 °C.

## **BEWERKINGSAANWIJZINGEN**

Cytologische monsters in CytoLyt-oplossing worden verder geprepareerd met PreservCyt™-oplossing en vervolgens bewerkt met een ThinPrep-processor, overeenkomstig de aanwijzingen in de gebruikershandleiding van de ThinPrep-processor.

## **PROCEDUREBEPERKINGEN**

CytoLyt-oplossing kan bij gebruik van een ThinPrep-processor niet worden vervangen door een ander middel voor afname, preparatie en bewerking van monsters.

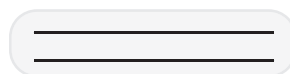

Afbeelding

## ThinPrep™ CytoLyt™-oplossing

### VEILIGHEID EN WERKINGSEIGENSCHAPPEN

Als zich een ernstig incident voordoet met betrekking tot dit hulpmiddel of onderdelen die met dit hulpmiddel worden gebruikt, meld dit dan aan de afdeling Technische ondersteuning van Hologic en aan de bevoegde autoriteit op de locatie van de patiënt en/of de gebruiker.

Zie de gebruikershandleiding van de ThinPrep-processor.

### AFVOER

Het product moet worden afgevoerd volgens alle toepasselijke voorschriften.

### SPOEDEISENDE-HULPMAATREGELEN

BIJ INSLIKKEN: Neem contact op met een ANTIGIFCENTRUM of een arts als u zich niet goed voelt. Zie [www.hologiccsds.com](http://www.hologiccsds.com) voor het volledige veiligheidsinformatieblad.

### Revisiegeschiedenis

Revisie	Datum	Omschrijving
AW-24657-1502 Rev. 001	3-2022	Verduidelijking van de instructies. Voeg instructies toe betreffende het melden van ernstige incidenten.



Fabrikant



Houdbaar tot



Brandbaar



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing



Batchcode



Irriterend, irritatie van de luchtwegen, sensibilisator voor de huid



Medisch hulpmiddel voor *in-vitro*diagnostiek



Temperatuurlimiet



Sensibilisator voor de luchtwegen, doelorgaantoxiciteit



Erkend vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap



Aantal



Het product voldoet aan de eisen voor CE-markering in overeenstemming met EU-IVD verordening 2017/746



Vervaardigd in de Verenigde Staten



Niet opnieuw gebruiken



Catalogusnummer



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752, VS  
Tel: +1 (508) 263-2900 • [www.hologic.com](http://www.hologic.com)



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • België • Tel: +32 2 711 46 80

Sponsor in Australië:

Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd. • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road  
Macquarie Park, NSW 2113 • Australië • Tel: +02 9888 8000