

## ThinPrep™ CytoLyt™ oldat

## Használati utasítás

**RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT**

A ThinPrep™ CytoLyt™ oldat egy metanolalapú, puffereelt sejtmosó oldat, amelyet a vörösvértestek lizálására, a fehérvérjék kicsapódásának megelőzésére, a nyálka feloldására és az általános citológiai sejtminék morfológiájának megőrzésére terveztek a ThinPrep feldolgozóeszközzel történő tárgylemez-előkészítés előtt. Profesionális használatra.

**ÖSSZEFOGLALÁS ÉS MAGYARÁZAT**

A CytoLyt oldat a ThinPrep™ feldolgozóeszközzel, egy citológiai előkészítő eszközzel való használatra készült, amely tárgylemezeket állít elő mikroszkópos vizsgálatokhoz. A CytoLyt oldat lehetővé teszi a sejtek szállítását és megőrzését akár nyolc napig 15 °C – 30 °C-on.

**AZ ELJÁRÁS ALAPELVEI**

A CytoLyt oldat a vörösvértestek gyűjtésére és lizálására használt közeg. A ThinPrep feldolgozóeszközben feldolgozott mintákon alkalmazva az eljárás lehetővé teszi a sejtek mikroszkópos tárgylemezre történő átvitelét, és egy vékony, egyenletes sejtréteg létrehozását, amely alkalmas a citológiai értékelésre.

**ÖSSZETÉTEL**

Metanolalapú, tartósító pufferoldat. CAS 67-56-1

**FIGYELMEZTETÉSEK**

**Veszély.** Gyúlékony. Metanolt tartalmaz.

H302. Lenyelve ártalmas.

H312. Bőrrel érintkezve ártalmas.

H332. Belélegezve ártalmas.

H370. Károsítja a szerveket.

H226. Tűzveszélyes folyadék és gőz.

In vitro diagnosztikai használatra. Megfelelően szellőző környezetben használja. Embereken vagy állatokon tilos külsőleg vagy belsőleg használni. Nem lehet nem mérgezővé alakítani.

**ÓVINTÉZKEDÉSEK**

P210. Hőtől/szikkasztól/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. – Tilos a dohányzás.

P260. A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

P280. Védőkesztyű és szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P301 + P310. LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P305 + P351 + P338. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

# ThinPrep™ CytoLyt™ oldat

P302 + P352. Ha BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.

P308 + P311. Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P370 + P378. Tűz esetén: Oltásra nátrium-karbonát használandó.

P403 + P233. Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

P501. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni. Ne használja, ha az elsődleges csomagolás sérült.

Sejteket tartalmazó CytoLyt oldat szállításakor gondoskodjon a mintaüveg szoros lezárásáról. A szivárgás elkerülése érdekében illessze a kupakon lévő jelzést a csészén vagy csövön lévő jelzéshez.

Mint minden laboratóriumi eljárás során, itt is be kell tartani az általános óvintézkedéseket.

## **ELŐKÉSZÍTÉS**

Nem kell feloldani, keverni vagy hígítani.

## **TÁROLÁS**

Citológiai minták nélkül a CytoLyt oldatot 15 °C és 30 °C (59 °F és 86 °F) között tárolja. Ne használja a CytoLyt oldatot az edényen feltüntetett lejáratú időn túl. Minden használat után zárja le a 946 ml-es palackot.

## **KÜLSŐ ÉS ÉPSÉG**

Átlátszó, nem steril oldat.

## **MINTAVÉTEL ÉS ELŐKÉSZÍTÉS**


A nem nőgyógyászati mintákat a szokásos módon vegye le. Az előkészítési utasításokat a ThinPrep feldolgozóeszköz kezelői kézikönyvében találja. Jegyezze fel a szükséges betegadatokat az erre szánt helyen. (Lásd az ábrát.)

## **TÁROLÁS ÉS KEZELÉS**

A CytoLyt oldat 15 °C (59 °F) és 30 °C (86 °F) közötti hőmérsékleten akár nyolc napig is megőrzi a sejteket.

## **FELDOLGOZÁSI UTASÍTÁSOK**

A CytoLyt oldatba levett citológiai mintákat PreservCyt™ oldattal elő kell készíteni, majd a ThinPrep feldolgozógépen a ThinPrep feldolgozógép kezelői kézikönyvének utasításait követve fel kell dolgozni.

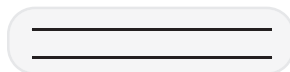

Ábra

# ThinPrep™ CytoLyt™ oldat

## AZ ELJÁRÁS KORLÁTAI

A CytoLyt oldat nem helyettesíthető más, a minták levételére, előkészítésére vagy feldolgozására szolgáló oldattal a ThinPrep feldolgozóeszközön.

## BIZTONSÁGI ÉS TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK

Ha az eszközhöz vagy az eszközzel használt bármely összetevőhöz kapcsolódó súlyos rendkívüli esemény következik be, jelentse a Hologic műszaki szolgálatának, valamint a beteg és/vagy felhasználó szerinti helyi illetékes hatóságnak.

Lásd a ThinPrep feldolgozóeszköz kezelői kézikönyvét.

## ÁRTALMATLANÍTÁS

Az ártalmatlanítást a vonatkozó jogszabályi előírások szerint végezze.

## ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI TEENDŐK

LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. A teljes biztonsági adatlapot a [www.hologicds.com](http://www.hologicds.com) weboldalon találja.

## Átdolgozási előzmények

Átdolgozás	Dátum	Leírás
AW-24657-2802 Rev. 001	3-2022	Utasítások pontosítása. Súlyos rendkívüli események bejelentésére vonatkozó utasítások hozzáadása.



Gyártó



Felhasználható



Gyúlékony



Lásd a használati utasítást



Tételszám



Irritáló, légúti irritáció, bőrszenzibilizáló



In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz



Hőmérsékleti határértékek



Légúti szenzibilizálás, célszervi toxicitás



Hivatalos képviselő az Európai Közösségben



Mennyiség



A termék megfelel az EU-IVD 2017/746 rendelet szerinti CE-jelölésre vonatkozó követelményeknek



Készült az Amerikai Egyesült Államokban



Ne használja fel újra



Katalógusszám



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA  
Tel.: +1 (508) 263-2900 • [www.hologic.com](http://www.hologic.com)



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgium • Tel.: +32 2 711 46 80

Ausztrál szponzor:

Hologic (Ausztrália és Új-Zéland) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road  
Macquarie Park, NSW 2113 • Ausztrália • Tel.: +02 9888 8000