

Protokol barvení ThinPrep®

pro

barvicí přístroj Hologic® Compass™ využívající sklička fixovaná 95% alkoholem

Je předinstalován na přístroj Compass jako program barvení č.1, „TP_95%_ALC“, pro sklička fixovaná 95% alkoholem. Níže uvedené parametry jsou automaticky nastaveny systémem při spuštění tohoto programu.

Nespouštějte více než čtyři stojany se skličky současně. Před přidáním nových stojanů počkejte, až budou všechny čtyři vyjmuty.

Upozornění: Destilovanou/napájecí vodu ve vaně na **stanici 5** vyměňte po každých **čtyřech** stojanech se skličky. Hladinu ve vaně udržujte tak, aby sklička byla zcela ponořena. (Poznámka: objem náplně = 360 ml.)

Parametry – Míchání: počet ponorů = 10, hloubka ponoru = 30 mm; rychlost výstupu = normální			
Stanice	Činidlo	Čas	Trvání
VLOŽENÍ	95% činidlo nebo etylalkohol	----	----
1	70% činidlo nebo etylalkohol	01' 00"	Nekritické
2	50% činidlo nebo etylalkohol	01' 00"	Nekritické
3	Destilovaná nebo napájecí voda (IFW) ¹	01' 00"	Nekritické
4	Barvivo na jádra ThinPrep	07' 00"	KRITICKÉ
5	Destilovaná nebo napájecí voda ¹ (Vyměňte po každých 4 stojanech.)	00' 10"	KRITICKÉ
6	Oplachovací roztok ThinPrep	01' 00"	KRITICKÉ
7	Destilovaná nebo napájecí voda ¹	00' 30"	Nekritické
8	Roztok pro modření ThinPrep	00' 30"	KRITICKÉ
9	Destilovaná nebo napájecí voda ¹	00' 30"	Nekritické
10	50% činidlo nebo etylalkohol	00' 30"	Nekritické
11	95% činidlo nebo etylalkohol	00' 30"	Nekritické
12	Roztok oranž G ThinPrep	02' 00"	KRITICKÉ
13	95% činidlo nebo etylalkohol	00' 15"	KRITICKÉ
14	95% činidlo nebo etylalkohol	00' 15"	KRITICKÉ
15	Roztok EA ThinPrep	04' 00"	KRITICKÉ
16	95% činidlo nebo etylalkohol	01' 00"	KRITICKÉ
17	95% činidlo nebo etylalkohol	01' 00"	KRITICKÉ
18	100% činidlo nebo etylalkohol	00' 30"	Nekritické
19	100% činidlo nebo etylalkohol	00' 30"	Nekritické
20	100% činidlo nebo etylalkohol	00' 30"	Nekritické
21	Xylen nebo jiné čisticí činidlo schválené společností Hologic ²	01' 00"	Nekritické
22	Xylen nebo jiné čisticí činidlo schválené společností Hologic ²	03' 00"	Nekritické
VYJMUTÍ	Xylen nebo jiné čisticí činidlo schválené společností Hologic ²	----	----
Vyjměte sklička do samostatné čisticí vany. Zakryjte vhodným fixačním roztokem schváleným společností Hologic. ²			

¹ Specifikace společnosti Hologic pro IFW: odpor $\geq 1,0$ megohm-cm NEBO vodivost $\leq 1,0$ μ Siemens/cm (viz dokument Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) C3-A4, 2006)

² Aktuální seznam čisticích činidel a fixačních médií schválených společností Hologic naleznete v Uživatelské příručce barviv ThinPrep, oddíl 1, „BARVENÍ“, nebo se obraťte na společnost Hologic.



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA • 1-800-442-9892 • www.hologic.com




Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgie

Stanice roztoků

Barvicí přístroj Hologic® Compass™

Pro barvení sklíček fixovaných 95% alkoholem

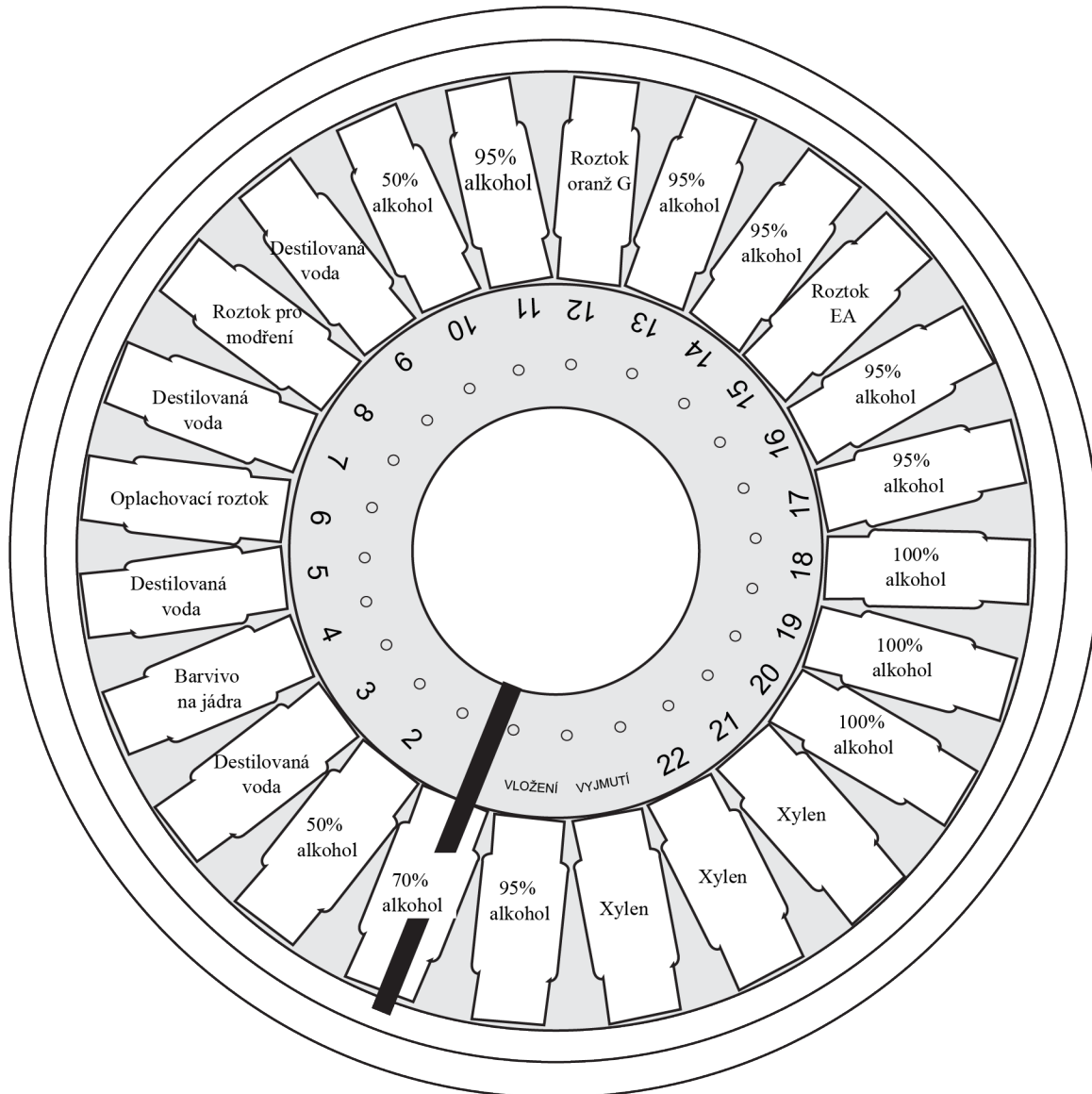

Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA • 1-800-442-9892 • www.hologic.com



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgie