

ThinPrep® festési protokoll

a

Hologic® Compass™ tárgylemezfestő, 95%-os alkohollal fixált tárgylemezek használatával

Ez előre be van töltve a Compass festőberendezésre 1. sz. programként (Program #1, „TP_95%_ALC”) a 95%-os alkohollal fixált tárgylemezekhez. Az alábbi paramétereket a rendszer automatikusan beállítja a program végrehajtásakor.

Legfeljebb négy tárgylemezállványt futtasson együtt. Új állványok hozzáadása előtt várja meg, amíg mind a négy tárgylemezállvány kiürül.

Vigyázat: Cserélje ki a desztillált/műszerbe adagolható vízből készült fürdőt az **5. állomáson** minden **négy** tárgylemezállványt követően. A fürdővizet mindig tartsa megfelelő magasságig feltöltve, hogy a teljes merítésnél a tárgylemezeket teljesen ellepje. (Megjegyzés: Fürdő töltési térfogat = 360 ml.)

Paraméterek - Keverés: Merítések száma = 10, Merítési mélység = 30 mm; Kilépési sebesség = Normál			
Állomás	Reagens	Idő	Időtartam
BETÖLTÉS	95%-os reagens vagy etil-alkohol	----	----
1	70%-os reagens vagy etil-alkohol	01' 00"	Nem kritikus
2	50%-os reagens vagy etil-alkohol	01' 00"	Nem kritikus
3	Desztillált vagy műszerbe adagolható víz (IFW) ¹	01' 00"	Nem kritikus
4	ThinPrep sejtmagfestő	07' 00"	KRITIKUS
5	Desztillált vagy műszerbe adagolható víz ¹ (minden 4 állvány után cserélje ki.)	00' 10"	KRITIKUS
6	ThinPrep öblítőoldat	01' 00"	KRITIKUS
7	Desztillált vagy műszerbe adagolható víz (IFW) ¹	00' 30"	Nem kritikus
8	ThinPrep kékítőoldat	00' 30"	KRITIKUS
9	Desztillált vagy műszerbe adagolható víz (IFW) ¹	00' 30"	Nem kritikus
10	50%-os reagens vagy etil-alkohol	00' 30"	Nem kritikus
11	95% -os reagens vagy etil-alkohol	00' 30"	Nem kritikus
12	ThinPrep Orange G festőoldat	02' 00"	KRITIKUS
13	95%-os reagens vagy etil-alkohol	00' 15"	KRITIKUS
14	95%-os reagens vagy etil-alkohol	00' 15"	KRITIKUS
15	ThinPrep EA festőoldat	04' 00"	KRITIKUS
16	95%-os reagens vagy etil-alkohol	01' 00"	KRITIKUS
17	95%-os reagens vagy etil-alkohol	01' 00"	KRITIKUS
18	100%-os reagens vagy etil-alkohol	00' 30"	Nem kritikus
19	100%-os reagens vagy etil-alkohol	00' 30"	Nem kritikus
20	100%-os reagens vagy etil-alkohol	00' 30"	Nem kritikus
21	Xilol vagy más, a Hologic által jóváhagyott tisztítószer ²	01' 00"	Nem kritikus
22	Xilol vagy más, a Hologic által jóváhagyott tisztítószer ²	03' 00"	Nem kritikus
KIÜRÍTÉS	Xilol vagy más, a Hologic által jóváhagyott tisztítószer ²	----	----

Távolítsa el a tárgylemezeket egy külön tisztítófürdőbe. Helyezzen fel fedőlemezt egy Hologic által jóváhagyott rögzítőközeggel.²

¹ A műszerbe adagolható vízre (IFW) vonatkozó Hologic specifikációk: $\geq 1,0$ megohm-cm ellenállás VAGY $\leq 1,0$ μ Siemens/cm vezetőképesség (Lásd a Klinikai és Laboratóriumi Szabványügyi Intézet (CLSI) 2006. évi C3-A4 dokumentumát)

² Lásd a ThinPrep festőanyag felhasználói kézikönyv 1. fejezetének „FESTÉS” c. részét, vagy forduljon a Hologic vállalathoz, és igényelje a Hologic által jóváhagyott tisztítószeres és rögzítőközegek listáját.




Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA • 1-800-442-9892 • www.hologic.com

Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgium

Oldatállomások

Hologic® Compass™ tárgylemezfestő

95%-os alkohollal fixált tárgylemezek festéséhez

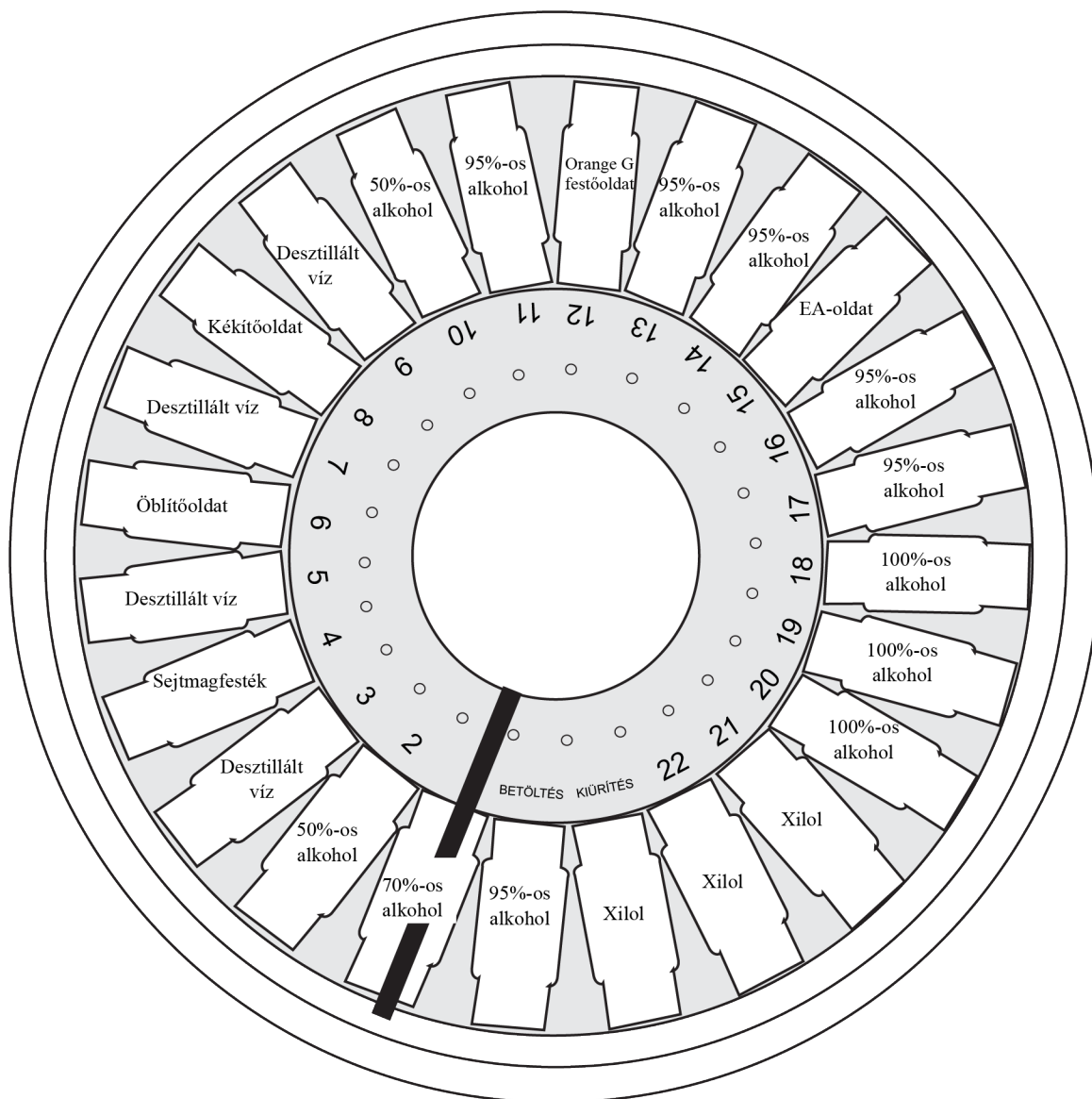

Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA • 1-800-442-9892 • www.hologic.com
Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgium