

ThinPrep® festési protokoll öblítőoldat II és kékítőoldat II használatával a Hologic® Compass™ festőkészüléken, alkohollal rögzített tárgylemezekkel

CSAK akkor használja ezt a protokollt, ha a ThinPrep öblítőoldat II és a kékítőoldat II (cikkszámok: ASY-04875, ASY-04876) a ThinPrep festék összetevői.

Használja ezt a protokollt a 95%-os alkohollal rögzített tárgylemezek festéséhez.

A „TP_95%_ALC” (AW-19464-001 sz. protokolldokumentum) előre betöltött 1 sz. Compass program kompatibilis ezzel az öblítés II-kékítés II protokollal. Győződjön meg arról, hogy a **6. állomás** öblítőoldat II, a **8. állomás** kékítőoldat II és a **10. állomás** desztillált vagy műszerbe adagolható víz (nem „50%-os alkohol”, amint az a kijelzőn megjelenik).

A fürdővizet mindig tartsa megfelelő magasságig feltöltve, hogy a teljes merítéskor a tárgylemezeket teljesen ellepje. (Megjegyzés: Fürdő töltési térfogat = 360 ml.) Az alábbi **paramétereket** a rendszer automatikusan beállítja a program végrehajtásakor.

Vigyázat: Cserélje ki a desztillált /műszerbe adagolható vízből készült fürdőt **az 5. állomáson** minden **négy** tárgylemez-állványt követően.

Legfeljebb négy tárgylemez-állványt futtasson együtt. Új állványok hozzáadása előtt várja meg, amíg mind a négy tárgylemez-állvány kiürül.

Paraméterek - Keverés: Merítések száma = 10, Merítési magasság = 30 mm; Kilépési sebesség = Normál			
Állomás	Reagens	Idő	Időtartam
BETÖLTÉS	95%-os reagens vagy etil-alkohol	----	----
1	70%-os reagens vagy etil-alkohol	01' 00"	Nem kritikus
2	50%-os reagens vagy etil-alkohol	01' 00"	Nem kritikus
3	Desztillált vagy műszerbe adagolható víz (IFW) ¹	01' 00"	Nem kritikus
4	ThinPrep sejtmagfestő	07' 00"	KRITIKUS
5	Desztillált vagy műszerbe adagolható víz ¹ (minden 4 állvány után cserélje ki.)	00' 10"	KRITIKUS
6	ThinPrep II öblítőoldat	01' 00"	KRITIKUS
7	Desztillált vagy műszerbe adagolható víz (IFW) ¹	00' 30"	Nem kritikus
8	ThinPrep II kékítőoldat	00' 30"	KRITIKUS
9	Desztillált vagy műszerbe adagolható víz (IFW) ¹	00' 30"	Nem kritikus
10	Desztillált vagy műszerbe adagolható víz (IFW) ¹	00' 30"	Nem kritikus
11	95%-os reagens vagy etil-alkohol	00' 30"	Nem kritikus
12	ThinPrep Orange G festőoldat	02' 00"	KRITIKUS
13	95%-os reagens vagy etil-alkohol	00' 15"	KRITIKUS
14	95%-os reagens vagy etil-alkohol	00' 15"	KRITIKUS
15	ThinPrep EA festőoldat	04' 00"	KRITIKUS
16	95%-os reagens vagy etil-alkohol	01' 00"	KRITIKUS
17	95%-os reagens vagy etil-alkohol	01' 00"	KRITIKUS
18	100%-os reagens vagy etil-alkohol	00' 30"	Nem kritikus
19	100%-os reagens vagy etil-alkohol	00' 30"	Nem kritikus
20	100%-os reagens vagy etil-alkohol	00' 30"	Nem kritikus
21	Xilol vagy más, a Hologic által jóváhagyott tisztítószer ²	01' 00"	Nem kritikus
22	Xilol vagy más, a Hologic által jóváhagyott tisztítószer ²	03' 00"	Nem kritikus
KIÜRÍTÉS	Xilol vagy más, a Hologic által jóváhagyott tisztítószer ²	----	----

Távolítsa el a tárgylemezeket egy külön tisztítófürdőbe. Helyezzen fel fedőlemezt egy Hologic által jóváhagyott rögzítőközeggel.²

¹ A műszerbe adagolható vízre (IFW) vonatkozó Hologic specifikációk: $\geq 1,0$ megohm-cm Ellenállás VAGY $\leq 1,0$ μ Siemens/cm Vezetőképesség (Lásd a Klinikai és Laboratóriumi Szabványügyi Intézet (CLSI) 2006. évi C3-A4 dokumentumát)

² Lásd a ThinPrep festőanyag felhasználói kézikönyv 1. fejezetének „FESTÉS” c. részét vagy forduljon a Hologic vállalathoz és igényelje a Hologic által jóváhagyott tisztítószerek és rögzítőközegek listáját.




Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA • 1-800-442-9892 • www.hologic.com

Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgium

Oldatállomások

Hologic® Compass™ festőkészülék

Öblítőoldat II és kékítőoldat II használatával
95%-os alkohollal rögzített tárgylemezek festéséhez

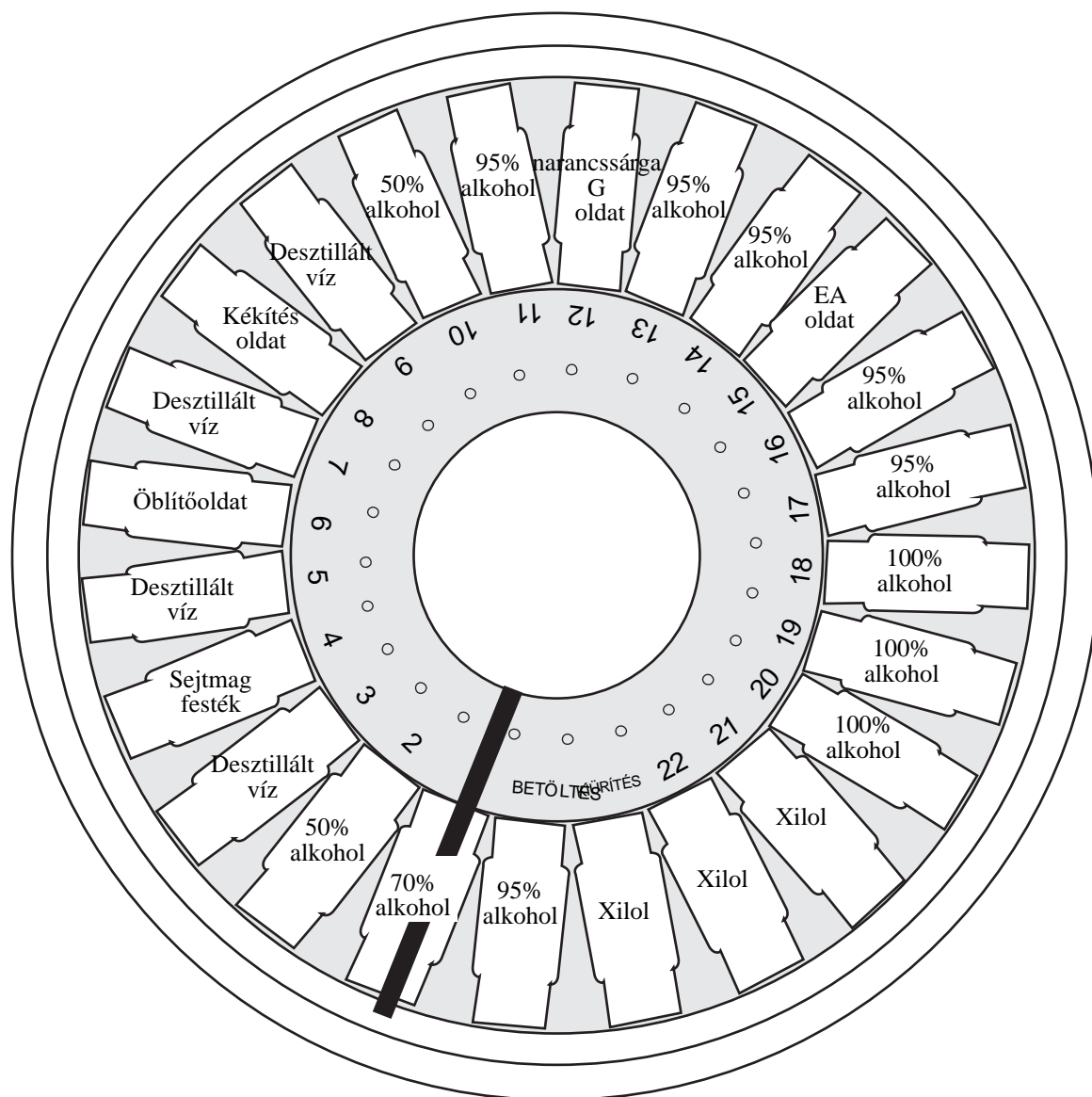

Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA • 1-800-442-9892 • www.hologic.com

Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgium