

# „ThinPrep®“ dažymo protokolas naudojant skalavimo II ir mėlinimo II tirpalus „Hologic® Compass™“ dažymo įrenginys su alkoholiu fiksuotais stikleliais

Šį protokolą naudokite TIK tada, kai „ThinPrep Rinse II“ ir „Bluing II“ tirpalai (P/Ns ASY-04875, ASY-04876) yra „ThinPrep Stain“ komponentai.

Šį protokolą naudokite 95 % alkoholiu fiksuotiems stikleliams dažyti.

„Compass“ iš anksto įkelta programa Nr. 1 „TP\_95%\_ALC“ (protokolo dokumentas AW-19464-001) yra suderinama su šiuo „Rinse II-Bluing II“ protokolu. Įsitikinkite, kad 6 **stotelė** būtų „Rinse II“ (skalavimo) tirpalas, 8 **stotelė** būtų „Bluing II“ (mėlinimo) tirpalas, o 10 **stotelė** būtų distiliuotas arba instrumento tiekiamas vanduo (ne „50 % alkoholis“, kaip nurodyta ekrane).

Vonelėje turi būti tiek tirpalo, kad panardinti stikleliai visiškai būtų uždengti. (Pastaba: vonelės užpildymo tūris = 360 ml) Toliau pateiktus **parametrus** sistema automatiškai nustato vykdydama šią programą.

**Perspėjimas.** Keiskite distiliuoto / instrumento tiekiamo vandens vonelę **5 stotelėje** kas **keturis** stovelius su stikleliais.

Kartu apdorokite ne daugiau kaip keturis stiklelių stovelius. Prieš įdėdami naujus stovelius palaukite, kol visi keturi bus išimti.

<b>Parametrai - maišymas: Panardinimų skaičius = 10, Panardinimo aukštis = 30 mm; Išėjimo greitis = Normalus</b>			
<b>Stotelė</b>	<b>Reagentas</b>	<b>Laikas</b>	<b>Trukmė</b>
<b>APKROVA</b>	95 % reagentas arba etilo alkoholis	----	----
<b>1</b>	70 % reagentas arba etilo alkoholis	01' 00"	Nekritinis
<b>2</b>	50 % reagentas arba etilo alkoholis	01' 00"	Nekritinis
<b>3</b>	Distiliuotas arba prietaiso tiekiamas vanduo (IFW) <sup>1</sup>	01' 00"	Nekritinis
<b>4</b>	„ThinPrep Nuclear“ dažai	07' 00"	KRITINIS
<b>5</b>	Distiliuostas arba instrumento tiekiamas vanduo <sup>1</sup> (Keiskite kas 4 stovus.)	00' 10"	KRITINIS
<b>6</b>	„ThinPrep Rinse II“ tirpalas	01' 00"	KRITINIS
<b>7</b>	Distiliuotas arba instrumento tiekiamas vanduo <sup>1</sup>	00' 30"	Nekritinis
<b>8</b>	„ThinPrep Bluing II“ tirpalas	00' 30"	KRITINIS
<b>9</b>	Distiliuotas arba instrumento tiekiamas vanduo <sup>1</sup>	00' 30"	Nekritinis
<b>10</b>	Distiliuotas arba instrumento tiekiamas vanduo <sup>1</sup>	00' 30"	Nekritinis
<b>11</b>	95 % Reagentas arba etilo alkoholis	00' 30"	Nekritinis
<b>12</b>	„ThinPrep Orange G“ tirpalas	02' 00"	KRITINIS
<b>13</b>	95 % reagentas arba etilo alkoholis	00' 15"	KRITINIS
<b>14</b>	95 % reagentas arba etilo alkoholis	00' 15"	KRITINIS
<b>15</b>	„ThinPrep EA“ tirpalas	04' 00"	KRITINIS
<b>16</b>	95 % reagentas arba etilo alkoholis	01' 00"	KRITINIS
<b>17</b>	95 % reagentas arba etilo alkoholis	01' 00"	KRITINIS
<b>18</b>	100 % Reagentas arba etilo alkoholis	00' 30"	Nekritinis
<b>19</b>	100 % Reagentas arba etilo alkoholis	00' 30"	Nekritinis
<b>20</b>	100 % Reagentas arba etilo alkoholis	00' 30"	Nekritinis
<b>21</b>	Ksilenas arba kita „Hologic“ patvirtinta valymo medžiaga <sup>2</sup>	01' 00"	Nekritinis
<b>22</b>	Ksilenas arba kita „Hologic“ patvirtinta valymo medžiaga <sup>2</sup>	03' 00"	Nekritinis
<b>IŠKROVIMAS</b>	Ksilenas arba kita „Hologic“ patvirtinta valymo medžiaga <sup>2</sup>	----	----

Išimkite stiklelius į atskirą valymo vonelę. Dangtelis su atitinkamu „Hologic“ patvirtintu laikikliu.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> „Hologic“ specifikacija, skirta IFW:  $\geq 1,0$  megaomo/cm varžos arba  $\leq 1,0$   $\mu$  Siemens/cm laidumo (žr. „Clinical and Laboratory Standards Institute“ (CLSI) dokumentą C3-A4, 2006)

<sup>2</sup> Žr. „ThinPrep Stain“ naudotojo žinyno 1 skyrių „DAŽYMAS“ arba kreipkitės į „Hologic“ dėl dabartinio „Hologic“ patvirtintų valymo medžiagų ir tvirtinimo terpių sąrašo.



„Hologic, Inc.“ • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 JAV • 1-800-442-9892 • www.hologic.com




„Hologic BV“ • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgija

# Tirpalų stotys

## „Hologic® Compass“ dažymo įrenginys

„ThinPrep Rinse II“ ir „Bluing II“ tirpalų naudojimas  
Skirtas 95 % alkoholiu fiksuotiems stikliams dažyti.

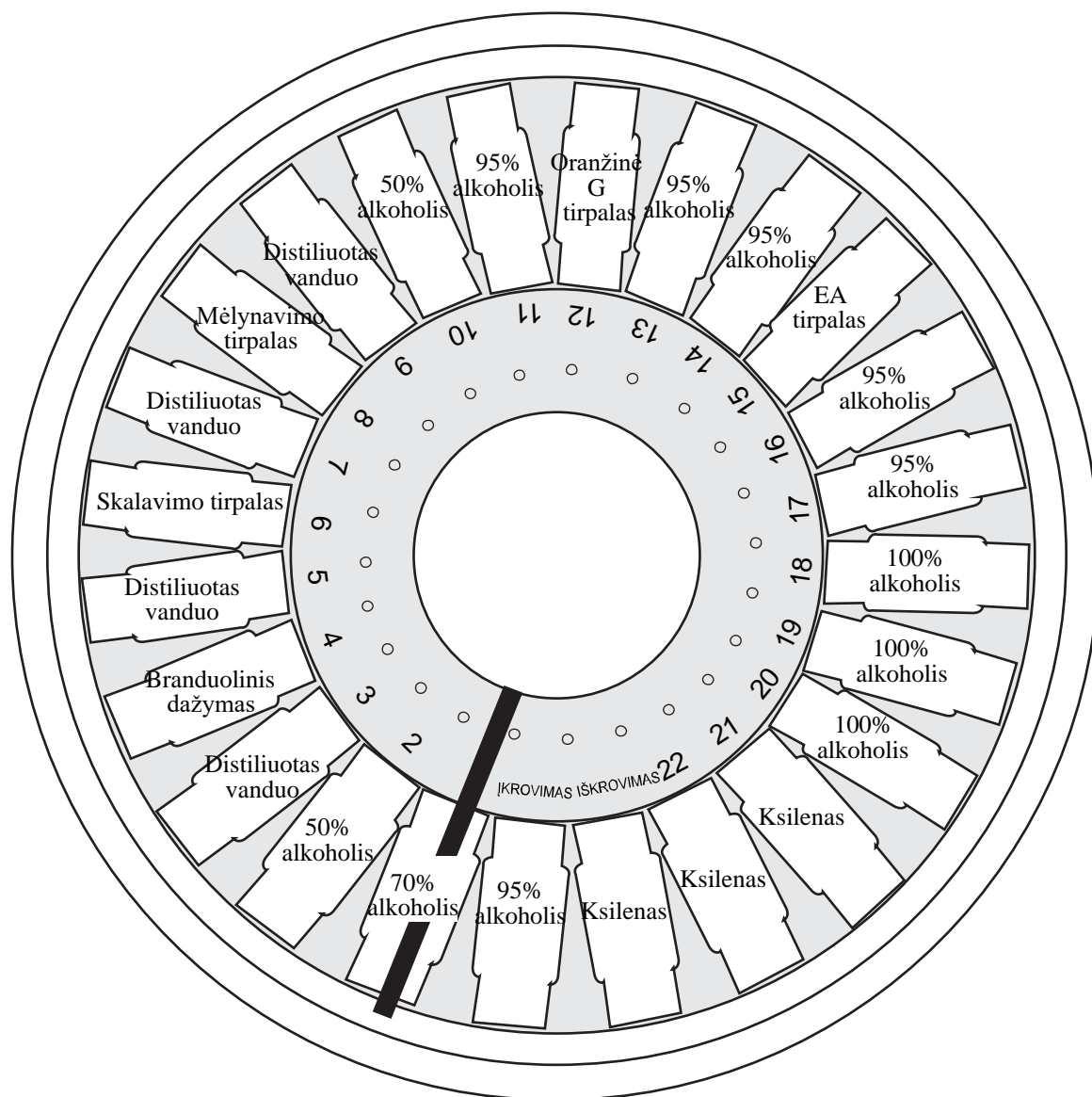

„Hologic, Inc.“ • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 JAV • 1-800-442-9892 • [www.hologic.com](http://www.hologic.com)



„Hologic BV“ • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgija