

Protokol na farbenie ThinPrep® pomocou oplachovacieho roztoku II a roztoku na modrenie II pre

Hologic® Compass™ Stainer s podložnými sklíčkami fixovanými alkoholom

Použite tento protokol IBA vtedy, keď oplachovací roztok ThinPrep II a roztok na modrenie II (P/N ASY-04875, ASY-04876) sú súčasťou farbiva ThinPrep.

Použite tento protokol na farbenie podložných sklíčok fixovaných v 95 % alkohole.

Vopred nahrať do zariadenia Compass ako program na farbenie č. 1 „TP_95%_ALC“ pre podložné sklíčka fixované 95 % alkoholom (dokument protokolu AW-19466-3201) je kompatibilný s týmto protokolom pre oplachovanie II a modrenie II. Uistite sa, že **stanica 6** je oplachovací roztok II, **stanica 8** je roztok na modrenie II a **stanica 10** je destilovaná alebo napájacia voda prístroja (nie „50 % alkohol“, ako zobrazuje displej).

Pri úplnom ponorení udržiavajte výšky kúpeľa tak, aby zakryli podložné sklíčka úplne. (Poznámka: Objem kúpeľa = 360 ml.) Pri vykonávaní tohto programu systém automaticky nastavuje nižšie uvedené **parametre**.

Upozornenie: Po každých **štyroch** stojanoch podložných sklíčok vymeňte kúpeľ s destilovanou alebo napájacou vodou prístroja na **stanici 5**.

Nespúšťajte spolu viac ako štyri stojany na podložné sklíčka. Pred pridaním nových stojanov počkajte, kým sa nevyložia všetky štyri.

Parametre – Kmitanie: Počet ponorení = 10, výška ponorenia = 30 mm; výstupná rýchlosť = normálna			
Stanica	Činidlo	Čas	Trvanie
VLOŽENIE	95 % činidlo alebo etylalkohol	----	----
1	70 % činidlo alebo etylalkohol	01' 00"	Nekritické
2	50 % činidlo alebo etylalkohol	01' 00"	Nekritické
3	Destilovaná alebo napájacia voda prístroja (IFW) ¹	01' 00"	Nekritické
4	Jadrové farbivo ThinPrep	07' 00"	KRITICKÉ
5	Destilovaná alebo napájacia voda prístroja ¹ (Vymeňte po každých 4 stojanoch.)	00' 10"	KRITICKÉ
6	Oplachovací roztok ThinPrep II	01' 00"	KRITICKÉ
7	Destilovaná alebo napájacia voda prístroja ¹	00' 30"	Nekritické
8	Roztok na modrenie ThinPrep II	00' 30"	KRITICKÉ
9	Destilovaná alebo napájacia voda prístroja ¹	00' 30"	Nekritické
10	Destilovaná alebo napájacia voda prístroja ¹	00' 30"	Nekritické
11	95 % činidlo alebo etylalkohol	00' 30"	Nekritické
12	Roztok ThinPrep Orange G	02' 00"	KRITICKÉ
13	95 % činidlo alebo etylalkohol	00' 15"	KRITICKÉ
14	95 % činidlo alebo etylalkohol	00' 15"	KRITICKÉ
15	Roztok ThinPrep EA	04' 00"	KRITICKÉ
16	95 % činidlo alebo etylalkohol	01' 00"	KRITICKÉ
17	95 % činidlo alebo etylalkohol	01' 00"	KRITICKÉ
18	100 % činidlo alebo etylalkohol	00' 30"	Nekritické
19	100 % činidlo alebo etylalkohol	00' 30"	Nekritické
20	100 % činidlo alebo etylalkohol	00' 30"	Nekritické
21	Xylén alebo iný čistiaci prostriedok schválený spoločnosťou Hologic ²	01' 00"	Nekritické
22	Xylén alebo iný čistiaci prostriedok schválený spoločnosťou Hologic ²	03' 00"	Nekritické
VYLOŽENIE	Xylén alebo iný čistiaci prostriedok schválený spoločnosťou Hologic ²	----	----

Premiestnite podložné sklíčka do samostatného čistiaceho kúpeľa. Zakryte príslušným krytom Hologic.²

¹ Špecifikácia spoločnosti Hologic pre IFW: $\geq 1,0$ megohm-cm odporu **ALEBO** $\leq 1,0$ μ Siemens/cm vodivosti (pozrite dokument Ústav klinických a laboratórnych štandardov (CLSI), dokument C3-A4, 2006)

² Pozrite príručku pre používateľa farbiva ThinPrep, časť 1, „FARBENIE“, alebo sa obráťte na spoločnosť Hologic kvôli aktuálnemu zoznamu čistiacich prostriedkov a upevňovacích médií schválených spoločnosťou Hologic.



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA • 1-800-442-9892 • www.hologic.com




Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgicko

Stanice roztokov

Hologic® Compass™ Stainer

Pomocou oplachovacieho roztoku II a roztoku na modrenie II
Na farbenie podložných sklíčok fixovaných 95 % alkoholom

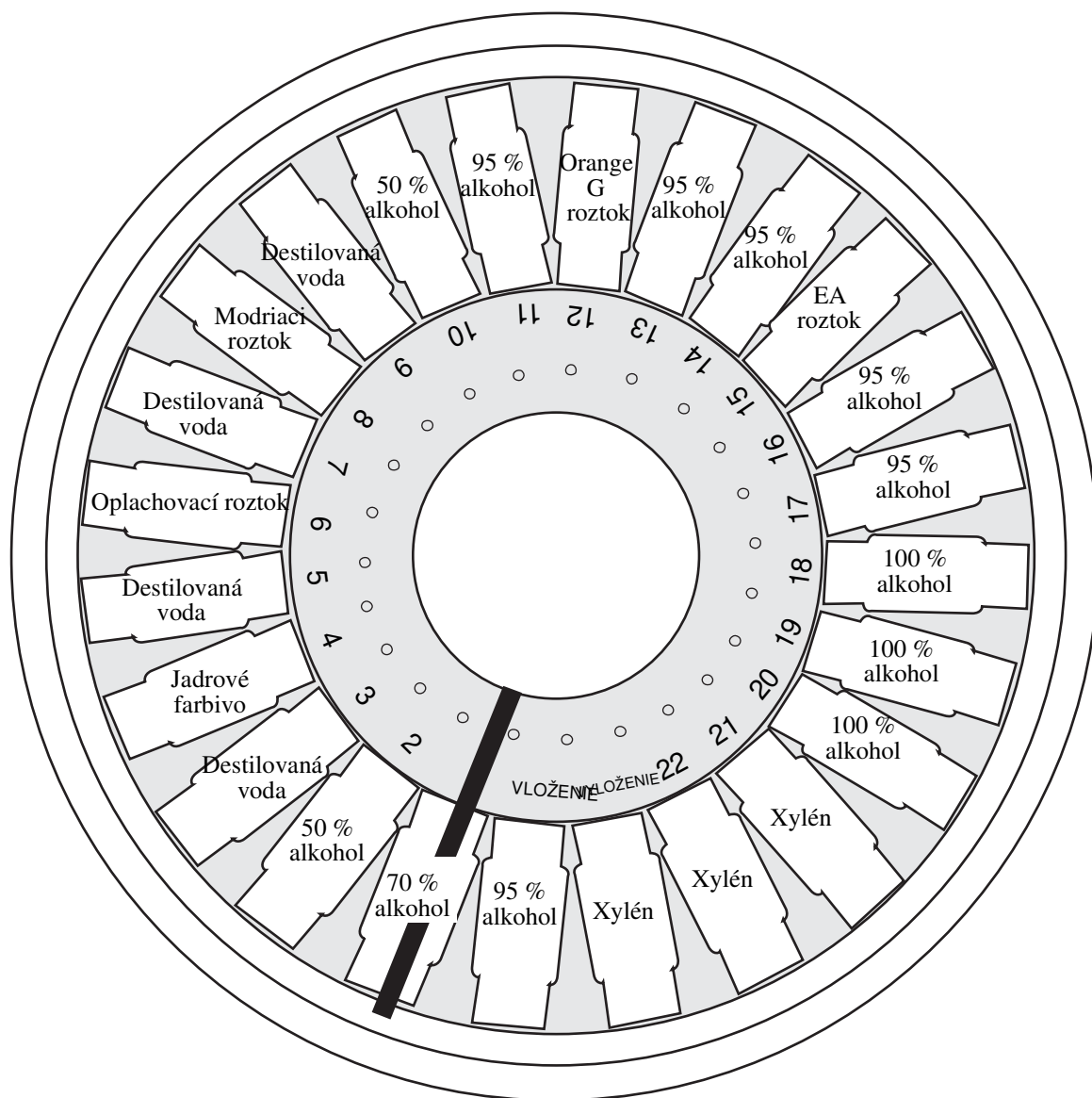

Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA • 1-800-442-9892 • www.hologic.com



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgicko