

**Οδηγίες χρήσης του Κιτ συλλογής Hologic® RespDirect™ για παρασκευάσματα που συλλέγονται από τον ασθενή****ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΡΙΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΕΙΛΕΟ**


**Ακολουθήστε προσεκτικά τις διαδικασίες, ώστε να έχετε αξιόπιστα αποτελέσματα. Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με οποιαδήποτε διαδικασία, ρωτήστε τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης.**

1. Πριν ξεκινήσετε, πλύνετε τα χέρια σας. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα σαπούνι και νερό, χρησιμοποιήστε απολυμαντικό χεριών.
2. Ανοίξτε τη συσκευασία του κιτ. Αφαιρέστε τον στείλεο και το σωληνάριο. Αφήστε το σωληνάριο στην άκρη πριν ξεκινήσετε με τις παρακάτω οδηγίες για να συλλέξετε το δείγμα ή τα δείγματα που ζητήθηκαν από τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης.
3. Χρησιμοποιήστε μόνο τον παρεχόμενο στείλεο. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τον παρεχόμενο στείλεο ενδέχεται να αλλοιωθούν τα αποτελέσματα της εξέτασης.
4. Μη χρησιμοποιείτε τον στείλεο, το σωληνάριο ή τη συσκευασία εάν παρουσιάζει εμφανείς φθορές (π.χ. εάν έχει καμφθεί ή σπάσει το ρύγχος ή το στέλεχος).
5. Μη λυγίζετε και μην αλλάζετε το σχήμα του στείλεου πριν από τη συλλογή. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη, πίεση και μη λυγίζετε τον στείλεο κατά τη συλλογή του παρασκευάσματος, γιατί μπορεί να σπάσει κατά λάθος.
6. Μην φέρνετε το περιεχόμενο του σωληναρίου μεταφοράς σε άμεση επαφή με το δέρμα ή τους βλεννογόνους ή μην το λαμβάνετε εσωτερικά.
7. Εάν χυθεί το περιεχόμενο του σωληναρίου μεταφοράς οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συλλογής, συλλέξτε ένα νέο παρασκεύασμα, χρησιμοποιώντας ένα νέο Κιτ συλλογής Hologic RespDirect. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε νέο κιτ, ενδέχεται να αλλοιωθούν τα αποτελέσματα της εξέτασης.
8. Μη χρησιμοποιείτε το κιτ για τη συλλογή παρασκευασμάτων μετά την ημερομηνία λήξης.

**ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΡΙΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΕΙΛΕΟ**

**Σημείωση προς τον ασθενή:** Εάν έχετε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, ρωτήστε τον πάροχο υγειονομικής σας περίθαλψης.


**Οδηγίες συλλογής παρασκευάσματος ρινικού επιχρίσματος με στείλεο:**

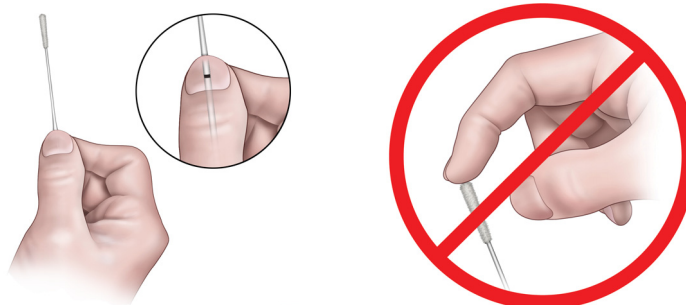

1. Ανοίξτε τμηματικά τη συσκευασία που περιέχονται οι στείλεοί. Αφαιρέστε έναν στείλεο. Μην αγγίζετε το μαλακό ρύγχος και μην ακουμπάτε τον στείλεο σε επιφάνειες. Εάν αγγίζετε το μαλακό ρύγχος, το ακουμπήσετε σε κάποια επιφάνεια ή σας πέσει κάτω, απορρίψτε το και αποκτήστε ένα νέο Κιτ συλλογής Hologic RespDirect.

2. Κρατήστε τον σπειλέο, τοποθετώντας τον αντίχειρα και τον δείκτη σας στο μέσο του στελέχους, καλύπτοντας την εγκοπή.

**Σημείωση:** Η εμφάνιση του πραγματικού προϊόντος μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από αυτήν που φαίνεται στην παρούσα ενότητα.

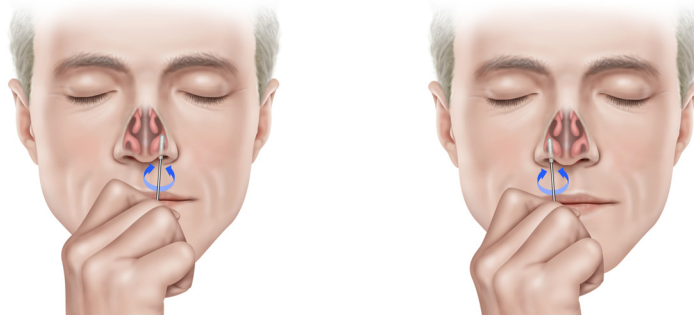


3. Εισαγάγετε προσεκτικά τον σπειλέο στο πρώτο ρουθούνι έως ότου το ρύγχος του σπειλεού δεν είναι πλέον ορατό, δηλ. σε βάθος 1,25 έως 2 cm στο εσωτερικό του. Κάντε μερικές περιστροφές με τον σπειλέο ασκώντας μέτρια πίεση σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα του τοιχώματος του ρουθουνιού και διαγράφοντας έναν μεγάλο κύκλο στο εσωτερικό της μύτης τουλάχιστον 4 φορές (περίπου 10-15 δευτερόλεπτα) στο ρινικό τοίχωμα, και κατόπιν αφαιρέστε τον σπειλέο από το ρουθούνι. Επαναλάβετε τη συλλογή στο άλλο ρουθούνι χρησιμοποιώντας τον ίδιο σπειλέο.<sup>1</sup>

**Σημείωση:** Η απλή περιστροφή του σπειλεού σε ένα τμήμα του εσωτερικού της μύτης ή το να αφήσετε απλά τον σπειλέο στο εσωτερικό της μύτης για 10–15 δευτερόλεπτα δεν αποτελεί ενδεδειγμένη τεχνική και μπορεί να μην αποδώσει επαρκές δείγμα.

**Σημείωση:** Πρέπει να συλλέξετε το δείγμα και από τα δύο ρουθούνια.

4. Ενώ κρατάτε με το ίδιο χέρι τον σπειλέο, ξεβιδώστε το καπάκι του σωληναρίου. Προσέξτε μη σας χυθεί το περιεχόμενο του σωληναρίου. Εάν χυθεί το περιεχόμενο του σωληναρίου, συλλέξτε ένα νέο παρασκεύασμα, χρησιμοποιώντας ένα νέο Κιτ συλλογής Hologic RespDirect.


**Προειδοποίηση:** Εάν έρθετε σε επαφή με υγρό από το σωληνάριο, πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό για 30 δευτερόλεπτα.

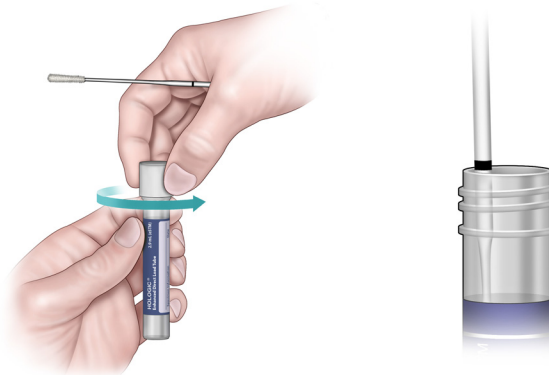

5. Τοποθετήστε αμέσως τον σπειλέο στο σωληνάριο μεταφοράς έτσι ώστε η εγκοπή να βρίσκεται στο επάνω μέρος του σωληναρίου.

<sup>1</sup> <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/guidelines-clinical-specimens.html>

6. Σπάστε προσεκτικά το στέλεχος του στειλεού στο πλευρικό τοίχωμα του σωληναρίου στο ύψος της εγχοπής.
7. Απορρίψτε το επάνω μέρος του στελέχους του στειλεού.

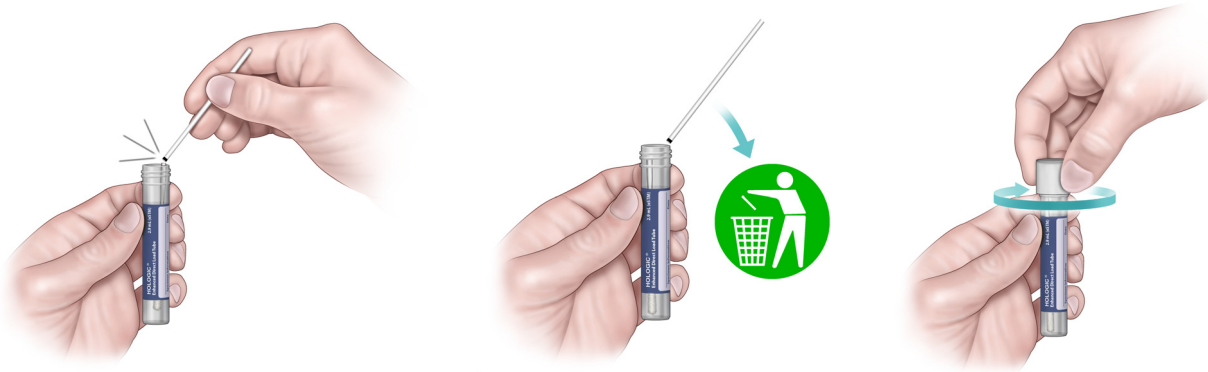

8. Βιδώστε καλά το καπάκι στο σωληνάριο.

**Σημείωση:** Η ετικέτα του σωληναρίου περιλαμβάνει ένα πεδίο καταγραφής της πηγής του δείγματος.

## Στοιχεία επικοινωνίας και Ιστορικό αναθεωρήσεων



Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 USA



**Hologic BV**  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Belgium

Για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου της τεχνικής υποστήριξης και της εξυπηρέτησης πελατών που ισχύουν για κάθε χώρα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση [www.hologic.com/support](http://www.hologic.com/support).

Σοβαρά περιστατικά που συμβαίνουν σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό προϊόν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αναφέρονται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Οι λέξεις Hologic και τα σχετιζόμενα λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της εταιρείας Hologic, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στο παρόν ένθετο συσκευασίας αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Αυτό το προϊόν μπορεί να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ, τα οποία παρατίθενται στη διεύθυνση [www.hologic.com/patents](http://www.hologic.com/patents).

©2023 Hologic, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  
AW-29024-1101 Αναθ. 002  
2023-07

Ιστορικό αναθεωρήσεων	Ημερομηνία	Περιγραφή
AW-29024 Αναθ. 001	Μάιος 2023	• Αρχική έκδοση
AW-29024 Αναθ. 002	Ιούλιος 2023	• Updates to translations only for administrative update. No change to content. (Ενημερώσεις στις μεταφράσεις μόνο για διαχειριστική ενημέρωση. Καμία αλλαγή στο περιεχόμενο.)