

Anvisninger vedrørende brug af Hologic® RespDirect™-prøvetagningskit til patientindsamlede prøver

GENERELLE ANVISNINGER VEDRØRENDE PRØVETAGNING OG HÅNDTERING AF PODNING AF NÆSE


Følg procedurerne omhyggeligt for at få pålidelige resultater. Spørg din sundhedsudbyder, hvis du har spørgsmål angående en procedure.

1. Vask hænder, før du starter. Brug hånddesinfektionsmiddel, hvis der ikke er adgang til sæbe og vand.
2. Åbn kittets emballage. Fjern podepinden og reagensglasset. Læg reagensglasset til side, før du begynder på nedenstående anvisninger til at tage den prøve eller de prøver, som din sundhedsudbyder har bedt om.
3. Brug kun den medfølgende podepind. Manglende brug af den medfølgende podepind kan gøre testresultaterne ugyldige.
4. Må ikke bruges, hvis podepinden, reagensglasset eller emballagen er synligt beskadiget (f.eks. hvis podepindens spids eller selve podepinden er bøjet eller knækket).
5. Podepinden må ikke bøjes kraftigt inden indsamlingen. Indfør podepinden forsigtigt ved indsamling af prøven, da du ellers risikerer, at podepinden knækker.
6. Transportrørets indhold må ikke anvendes direkte på huden eller slimhinderne eller indtages.
7. Tag en ny prøve ved hjælp af Hologic RespDirect-prøvetagningskit, hvis transportrørets indhold spildes på noget tidspunkt under prøvetagningsproceduren. Manglende brug af et nyt kit kan gøre testresultaterne ugyldige.
8. Brug ikke dette kit til at tage prøver efter udløbsdatoen.

PRØVETAGNING OG HÅNDTERING AF PODNING AF NÆSE


Bemærkning til patienten: Hvis du har spørgsmål til denne procedure, bedes du spørge din sundhedsudbyder.

Anvisninger til prøvetagning fra podning af næse:

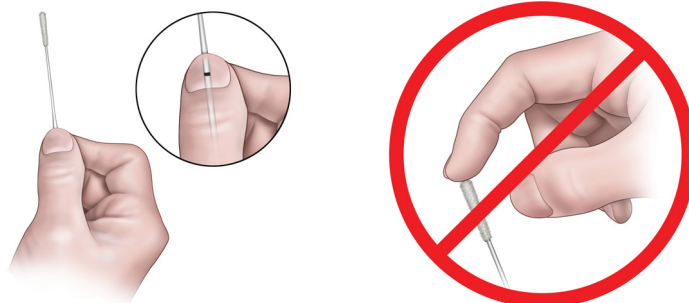

1. Åbn delvist podepindens emballage. Fjern podepinden. Rør ikke ved den bløde spids, og læg ikke podepinden ned. Hvis den bløde spids berøres, lægges ned eller tabes, skal den bortskaffes, og der skal i så fald bruges et nyt Hologic RespDirect-prøvetagningskit.
2. Hold podepinden med tommel- og pegefingeren placeret ved markeringslinjen.

Bemærkning: Det faktiske produkt ser muligvis en smule anderledes ud end det, der er vist i dette afsnit.

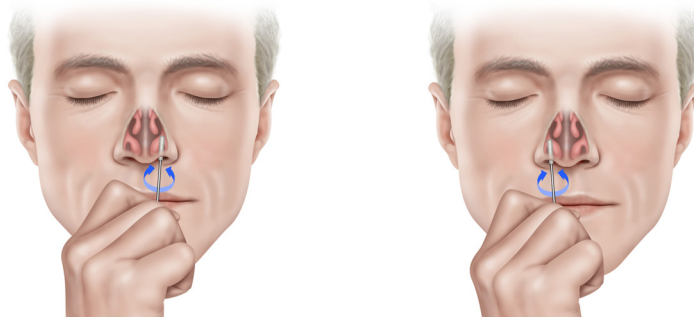


3. Før forsigtigt podepinden ind i det ene næsebor, indtil podepindens spids ikke længere er synlig, dvs. $\frac{1}{2}$ til $\frac{3}{4}$ tommer eller 1,25 til 2 cm ind i næseboret. Drej podepinden med moderat tryk mod så meget som muligt af næseborets væg i en stor cirkelformet bane indvendigt i næsen mindst 4 gange (ca. 10-15 sekunder) mod næsevæggen, og tag den derefter ud af næseboret. Gentag prøvetagningen i det andet næsebor med samme podepind.¹

Bemærkning: Blot at dreje podepinden rundt imod én del af næsevæggen eller at lade podepinden blive i næsen i 10-15 sekunder er ikke korrekt teknik og kan resultere i en utilstrækkelig prøve.

Bemærkning: Du skal udtage prøven fra begge næsebor.


4. Skru hættten af røret, mens du holder podepinden med den samme hånd. Pas på ikke at spilde rørets indhold. Tag en ny prøve ved hjælp af Hologic RespDirect-prøvetagningskit, hvis rørets indhold spildes.

Advarsel: Hvis du kommer i berøring med væske fra reagensglasset, skal du vvaske hænderne med sæbe og vand i 30 sekunder.

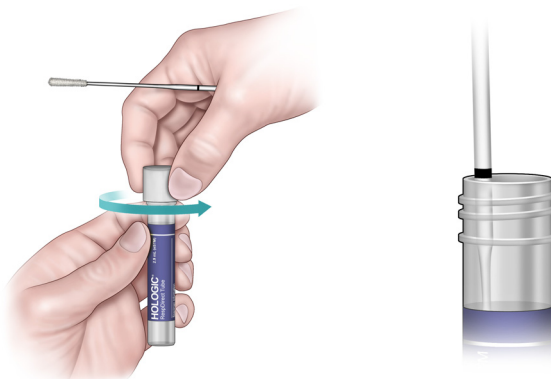

5. Anbring øjeblikkeligt podepinden i transportrøret, så markeringslinjen er øverst på røret.
6. Bræk forsigtigt podepinden mod rørets side ved markeringslinjen.
7. Bortskaf den øverste del af podepinden.

¹ <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/guidelines-clinical-specimens.html>

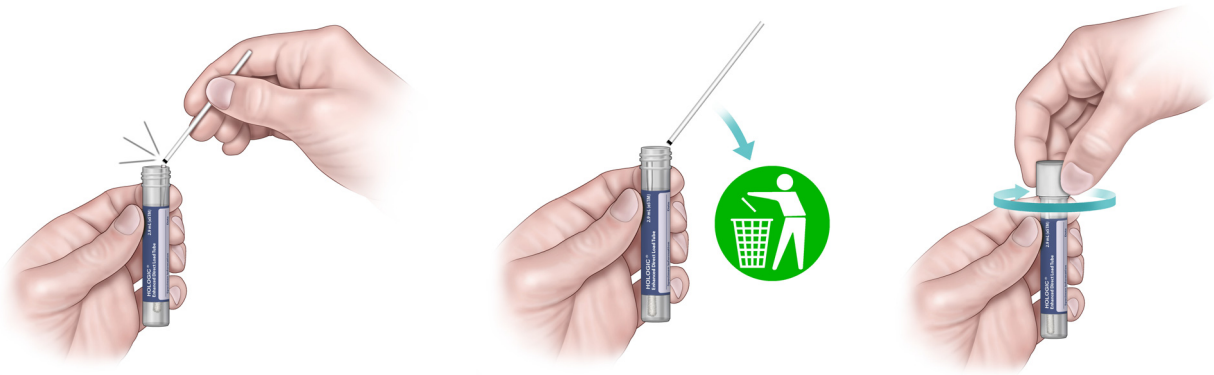

8. Skru hættten godt fast på røret.

Bemærkning: På etiketten på røret er der et felt til identifikation af prøven.

Kontaktoplysninger og revisionshistorik



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA



Hologic BV
Da Vinciiaan 5
1930 Zaventem
Belgium

E-mailadresse og telefonnummer til landespecifik teknisk support og kundeservice kan ses på adressen www.hologic.com/support.

Alvorlige hændelser, der opstår i forbindelse med udstyret i Den Europæiske Union, skal rapporteres til fabrikanten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er bosiddende.

Hologic og tilhørende logoer er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende Hologic, Inc. og/eller dennes datterselskaber i USA og/eller andre lande.

Alle andre varemærker, der måtte findes i denne indlægsseddel, tilhører deres respektive ejere.

Dette produkt kan være omfattet af et eller flere amerikanske patenter, der kan findes på www.hologic.com/patents.

©2023 Hologic, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

AW-29024-1901 Rev. 002

2023-07

Revisionshistorik	Dato	Beskrivelse
AW-29024 Rev. 001	Maj 2023	• Første udgave
AW-29024 Rev. 002	Juli 2023	• Updates to translations only for administrative update. No change to content. (Opdateringer af oversættelser kun i forbindelse med administrativ opdatering. Ingen indholdsændringer.)