


Hướng Dẫn Thẻ Thức Lấy Mẫu cho Bệnh Nhân Nữ

Lấy mẫu nước tiểu ban đầu


Chờ ít nhất 1 giờ sau lần tiểu sau cùng trước khi cho mẫu nước tiểu.



Rửa tay thật kỹ bằng xà bông và nước.

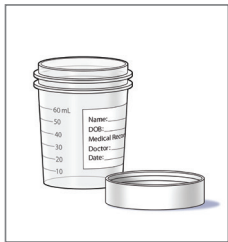


Mở nắp lọ lấy nước tiểu và để nắp úp xuống quày.
KHÔNG CHẠM ngón tay vào bên trong lọ.

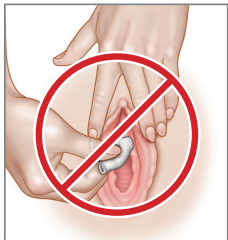

KHÔNG CHÙI lỗ tiểu bằng khăn lau sạch.



Bắt đầu tiểu vào lọ đựng mẫu.
Ngưng lại khi lọ đựng nước tiểu đầy **khoảng 20 to 30 ml**.
Không để lọ đựng mẫu bị đầy tràn.
Tiểu hết vào bồn cầu.

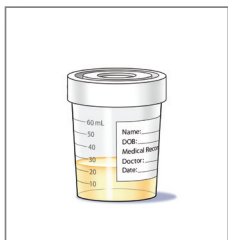

Đậy chặt nắp và tránh chạm vào bên trong lọ này.
Để lọ vào khu vực quy định hay đưa cho nhân viên y tế.


Hướng Dẫn Thử Thức Lấy Mẫu cho Bệnh Nhân Nam

Lấy mẫu nước tiểu ban đầu


Chờ ít nhất 1 giờ sau lần tiểu sau cùng trước khi cho mẫu nước tiểu.




Rửa tay thật kỹ bằng xà bông và nước.

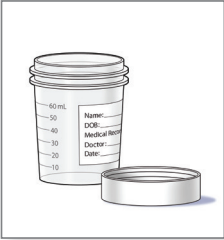


Mở nắp lọ lấy nước tiểu và để nắp úp xuống quày.
KHÔNG CHẠM ngón tay vào bên trong lọ.

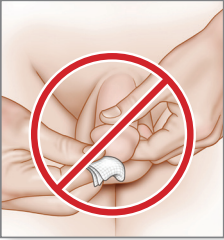

KHÔNG CHÙI lỗ dương vật bằng khăn lau sạch.

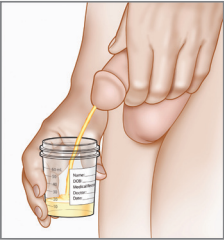

Bắt đầu tiểu trực tiếp vào lọ đựng.
Ngưng lại khi lọ đựng nước tiểu đầy **khoảng 20 to 30 ml**.
Không để lọ đựng mẫu bị đầy tràn.
Tiểu hết vào bồn cầu.

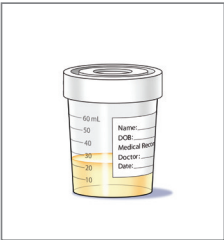

Đậy chặt nắp và tránh chạm vào bên trong lọ này.
Đề lọ vào khu vực quy định hay đưa cho nhân viên y tế.

Hologic cung cấp hướng dẫn thử thức lấy mẫu này như là công cụ thông tin chung; đây không phải là hướng dẫn xác nhận hay bảo đảm hiệu quả. Trách nhiệm của bác sĩ/phòng lab là đọc và hiểu rõ tờ thông tin thích hợp và tuân theo các điều lệ và quy định hiện dụng của địa phương, tiểu bang và liên bang.

hologic.com | diagnostic.solutions@hologic.com | +1.888.484.4747

DS-09716-1001 Duyệt lại 001 © 2018 Hologic, Inc. Giữ tất cả bản quyền. Hologic và những biểu trưng liên quan là thương hiệu và/hoặc thương hiệu cầu chứng của Hologic, Inc. và/hoặc các hãng con tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Thông tin này dành cho các chuyên gia y tế tại Hoa Kỳ và không dùng để mời chào sản phẩm hay khuyến mãi ở nơi bị cấm những hoạt động này. Do tài liệu của Hologic được gửi đi qua các trang mạng, truyền hình qua mạng (eBroadcast) và triển lãm thương mại nên không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được nơi xuất hiện những tài liệu này. Đối với những thông tin cụ thể về sản phẩm nào có sẵn để bán tại một quốc gia đặc biệt, xin liên lạc với đại diện Hologic địa phương hay gửi thư đến diagnostic.solutions@hologic.com.