


女性患者采集样本指南

初尿标本的采集

在您上一次排尿后等待至少 1 小时，再提供一份尿样。



用肥皂和水彻底洗手。

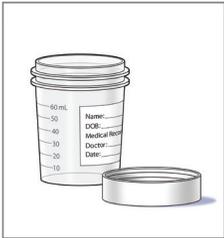


取下尿液采集盖并将盖子倒置在台面上。
手指**不要触摸到**杯子的内部。



不要用湿纸巾**清洁**尿道口。




开始将尿液排到采尿杯中。
当采尿杯装了**约 20 至 30 毫升**尿液时停止采集。
不要将杯子装得过满。
将剩下的尿液排到马桶。

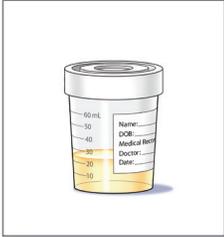


盖回盖子，将其拧紧，并小心不要碰到采集杯内部。
把杯子放在指定的区域或交给一名医务工作人员。

初尿标本的采集

在您上一次排尿后等待至少 1 小时，再提供一份尿样。

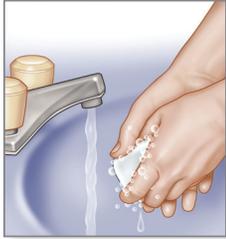


用肥皂和水彻底洗手。

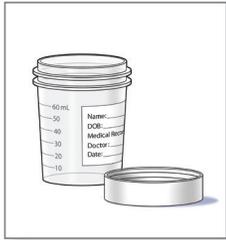


取下尿液采集盖并将盖子倒置在台面上。
手指**不要触摸到**杯子的内部。



不要用湿纸巾**清洁**阴茎口。

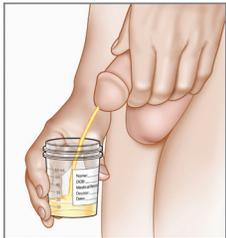

直接将尿液排进采尿杯里。
当采尿杯装了**约 20 至 30 毫升**尿液时停止采集。
不要将杯子装得过满。
将剩下的尿液排到马桶。

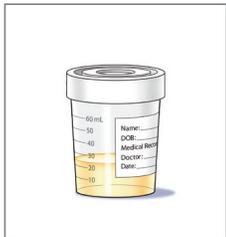

盖回盖子，将其拧紧，并小心不要碰到采集杯内部。
把杯子放在指定的区域或交给一名医务工作人员。

Hologic 提供本采集指南，仅是用其来告知信息；本指南不要求要一定按其操作或按其操作一定能保证采集性能。阅读和理解相应的包装说明书，并遵守适用的当地、州和联邦规章制度，这完全是临床医生/实验室的责任。

hologic.com | diagnostic.solutions@hologic.com | +1.888.484.4747

DS-09716-401 Rev. 001 © 2018 Hologic, Inc. 保留所有权利。Hologic 以及相关徽标是 Hologic, Inc. 和/或其子公司在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。这些信息旨在提供给美国的医务人员，无意于在禁止产品招揽或促销活动区域作为此类活动的资料。Hologic 的资料是通过网站、网播和贸易展览分发的，因此有时无法控制此类资料会出现在哪些区域。若想了解有哪些产品在某个特定国家市售的具体信息，请联系您当地的 Hologic 代表，或发送电子邮件至：diagnostic.solutions@hologic.com。