

1.1 Bevezetés

A jelen kiegészítés módosítja a Selenia® Dimensions® és a 3Dimensions™ rendszer használati útmutatóját és szervizkönyvét. Az alábbi információk felváltják az útmutatóban és a szervizkézikönyvben szereplő szimbólumtáblázatokat és a Címkék elhelyezkedése ábrákat. A jelen kiegészítést mellékelje a használati útmutatókhoz és a szervizkönyvekhez.







1.2 Érintett útmutatók

A jelen kiegészítés a következő útmutatókat érinti:






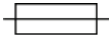







- MAN-06383-2802, 3Dimensions rendszer használati útmutatója, 2.2-es verzió, 001-es átdolgozott kiadás, 1.16. rész (Szimbólumok) és 2.7. rész (Címkék elhelyezkedése)
- MAN-06384, 3Dimensions rendszer szervizkönyve, 2.2-es verzió, 001-es átdolgozott kiadás, 1.7. rész (Szimbólumok) és 2.7. rész (Címkék elhelyezkedése)
- MAN-06385-2802, Dimensions rendszer használati útmutatója, 1.11-es verzió, 001-es átdolgozott kiadás, 1.17. rész (Szimbólumok) és 2.7. rész (Címkék elhelyezkedése)
- MAN-06386, Dimensions rendszer szervizkönyve, 1.11-es verzió, 001-es átdolgozott kiadás, 1.7. rész (Szimbólumok) és 2.7. rész (Címkék elhelyezkedése)

1.3 Szimbólumok










Ez a rész a rendszeren használt szimbólumokat ismerteti.

Szimbólum	Leírás	Normál
	Figyelem! Sugárzásveszély	Hologic
	Ez a rendszer rádiófrekvenciás (RF) energiát (nem ionizáló elektromágneses sugárzást) bocsát ki	IEC 60417, hivatkozás: 5140
	Vigyázat! Elektromosság	IEC 60417, hivatkozás: 6042
	Veszélyes feszültség	IEC 60417, hivatkozás: 5036
	Figyelem!	ISO 7010, hivatkozás: 5.1.6
	Figyelmeztetés	ISO 15223-1:2016, hivatkozás: 5.4.4

3Dimensions és Selenia Dimensions rendszer
Kiegészítés a szimbólumokhoz és a címkék elhelyezkedéséhez



Szimbólum	Leírás	Normál
	Vészleállító	Hologic
	Az elektromos és elektronikus berendezéseket a szokványos hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. A leselejtezett anyagokat küldje el a Hologicnak, vagy lépjen kapcsolatba a helyi szervizképviselővel.	2002/96/EK irányelv (Elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv)
	B típusú beteggel érintkező alkatrész	IEC 60417, hivatkozás: 5840
	Potenciálkiegyenlítési csatlakozóvég	IEC 60417, hivatkozás: 5021
	Védőföldelés	IEC 60417, hivatkozás: 5019
	Biztosíték	IEC 60417, hivatkozás: 5016
	Váltakozó áram	IEC 60417, hivatkozás: 5032
	„OFF” (Ki) (tápellátás)	IEC 60417, hivatkozás: 5008
	„ON” (Be) (tápellátás)	IEC 60417, hivatkozás: 5007
R_XONLY	Csak orvosi rendelvényre	21 CFR 801.109
	Hivatalos képviselő az Európai Közösségben	ISO 15223-1:2016, hivatkozás: 5.1.2
	CE jelölés a bejelentett szerv hivatkozási számával	MDR-rendelet, (EU) 2017/745
	Orvostechnikai eszköz	ISO 15223 (tervezet)
	Nem steril	ISO 15223-1:2016, hivatkozás: 5.2.7

3Dimensions és Selenia Dimensions rendszer
Kiegészítés a szimbólumokhoz és a címkék elhelyezkedéséhez

Szimbólum	Leírás	Normál
 www.hologic.com/package-inserts	Olvassa el a használati utasítást	ISO 15223-1:2016, hivatkozás: 5.4.3
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Translations in Box</div>	Fordítások találhatóak a dobozban	Hologic
	Újrahasznosítható	Unicode, hivatkozás: U+267C
	Hozzáférhető kerekesszékekkel	Hologic
	Szárazon tartandó	ISO 15223-1:2016, hivatkozás: 5.3.4
	Törékeny, óvatosan kezelendő	ISO 15223-1:2016, hivatkozás: 5.3.1
	Ne helyezze egymás tetejére	ISO 7000:2014, hivatkozás: 2402
	Hőmérséklet határértéke	ISO 15223-1:2016, hivatkozás: 5.3.7
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Temp Logger Activated</div>	Hőmérséklet-naplózó aktiválva	Hologic
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Temp Logger SN</div>	Hőmérséklet-naplózó sorozatszama	Hologic
	Erre van felfelé	ISO 7000:2014, hivatkozás: 0623
	Ne használja, ha a csomagolás sérült	ISO 15223-1:2016, hivatkozás: 5.2.8
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">P/N</div>	Cikkszám	Hologic
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">REV</div>	Átdolgozás	Hologic

3Dimensions és Selenia Dimensions rendszer

Kiegészítés a szimbólumokhoz és a címkék elhelyezkedéséhez

Szimbólum	Leírás	Normál
Model	Típuszám	Hologic
REF	Katalógusszám	ISO 15223-1:2016, hivatkozás: 5.1.6
LOT	Tételkód	ISO 15223-1:2016, hivatkozás: 5.1.5
SN	Sorozatszám	ISO 15223-1:2016, hivatkozás: 5.1.7
QTY	Mennyiség	Hologic
SFW SHIPPED	Szoftver mellékelve	Hologic
SFW Version	Szoftver verziószáma	Hologic
CASE	Eset	Hologic
VC	Kereskedő kódja	Hologic
	Gyártó	ISO 15223-1:2016, hivatkozás: 5.1.1
	Gyártási dátum	ISO 15223-1:2016, hivatkozás: 5.1.3
Made in USA	Készült az Egyesült Államokban	Hologic
Patents	Szabadalmak	Hologic

1.4 Címkék elhelyezkedése

A következő útmutatók 2.7. részében található Címkék elhelyezkedése ábra a továbbiakban érvényét veszti:

- MAN-06383-2802 verzió: 001
- MAN-06384 verzió: 001
- MAN-06385-2802 verzió: 001
- MAN-06386 verzió: 001